



# **Medtronic**

---

## **CONCERTO® II CRT-D D294TRK**

Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di  
resincronizzazione cardiaca (DDE-DDDR)

Monitoraggio del liquido OptiVol®, funzione ATP During  
Charging™, funzione TherapyGuide™ e collegamento  
telemetrico wireless Conexus®

---

Manuale per il medico



---

# CONCERTO<sup>®</sup> II CRT-D D294TRK

## Manuale per il medico

Guida alla programmazione ed all'uso del defibrillatore digitale impiantabile Concerto II CRT-D modello D294TRK con terapia di resincronizzazione cardiaca (DDE-DDDR)

I marchi seguenti sono marchi della Medtronic:

ATP During Charging, Active Can, Capture Management, Cardiac Compass, CareAlert, ChargeSaver, Checklist, Concerto, Conexus, Flashback, InCheck, Leadless, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareAlert, Medtronic CareLink, OptiVol, PR Logic, PatientLook, Quick Look, Reactive ATP, SureScan, Switchback, T-Shock, TherapyGuide

# Contenuto

<b>1</b>	<b>Descrizione del sistema</b>	<b>10</b>
1.1	Introduzione	10
1.2	Descrizione del sistema	21
1.3	Indicazioni ed utilizzo	24
1.4	Controindicazioni	25
<b>2</b>	<b>Avvertenze, precauzioni e possibili effetti indesiderati</b>	<b>26</b>
2.1	Avvertenze e precauzioni generali	26
2.2	Rimozione e smaltimento	26
2.3	Istruzioni per il maneggiamento e la conservazione	27
2.4	Valutazione e collegamento dell'elettrocattetere	28
2.5	Funzionamento del dispositivo	29
2.6	Rischi derivanti dall'utilizzo di determinate terapie mediche	32
2.7	Ambiente domestico e lavorativo	36
2.8	Possibili effetti collaterali	37
<b>3</b>	<b>Utilizzo del programmatore</b>	<b>39</b>
3.1	Come stabilire un collegamento telemetrico tra il dispositivo ed il programmatore	39
3.2	Conduzione di una sessione paziente	47
3.3	Caratteristiche dello schermo	52
3.4	Erogazione di una terapia per tachiaritmia di emergenza	57
3.5	Attivazione della stimolazione VVI di emergenza	58
3.6	Ottimizzazione delle sessioni di impianto e follow-up con la funzione Lista di controllo	60
3.7	Visualizzazione e programmazione dei parametri del dispositivo	66
3.8	Salvataggio e recupero di una serie di valori di parametro	71
3.9	Utilizzo della funzione TherapyGuide per selezionare i valori di parametro	73
3.10	Visualizzazione ed immissione dei dati sul paziente	77
3.11	Come utilizzare la funzione di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale	82
3.12	Come accelerare le sessioni di follow-up con il Leadless ECG	91

3.13	Salvataggio e richiamo dei dati .....	92
3.14	Stampa di rapporti .....	94
<b>4</b>	<b>Impianto del dispositivo .....</b>	<b>101</b>
4.1	Preparazione per l'impianto .....	101
4.2	Selezione ed impianto degli elettrocateri .....	104
4.3	Test del sistema di elettrocateri .....	106
4.4	Collegamento degli elettrocateri al dispositivo .....	108
4.5	Esecuzione dei test della soglia di defibrillazione ventricolare .....	110
4.6	Posizionamento e fissaggio del dispositivo .....	114
4.7	Completamento della procedura di impianto .....	115
4.8	Sostituzione di un dispositivo .....	116
<b>5</b>	<b>Svolgimento di una sessione di follow-up del paziente .....</b>	<b>118</b>
5.1	Linee guida per il follow-up del paziente .....	118
5.2	Visualizzazione di un riepilogo dei dati memorizzati di recente .....	123
5.3	Allarmi e notifiche automatiche di eventi legati al trattamento clinico e alle prestazioni del sistema .....	127
5.4	Visualizzazione delle tendenze cliniche a lungo termine con il Rapporto del Cardiac Compass .....	138
5.5	Visualizzazione dei dati sugli episodi aritmici e impostazione delle preferenze per la raccolta dati .....	144
5.6	Visualizzazione dei contatori di episodi e terapie .....	153
5.7	Visualizzazione dei dati della memoria Flashback .....	158
5.8	Utilizzo degli istogrammi della frequenza per valutare le frequenze cardiache .....	159
5.9	Visualizzazione di dati dettagliati sulle prestazioni del dispositivo e degli elettrocateri .....	162
5.10	Monitoraggio automatico dello stato del dispositivo .....	172
5.11	Ottimizzazione della durata del dispositivo .....	175
<b>6</b>	<b>Gestione dello scompenso cardiaco .....</b>	<b>180</b>
6.1	Erogazione della stimolazione biventricolare per la resincronizzazione cardiaca .....	180
6.2	Promozione della stimolazione CRT continua .....	190
6.3	Monitoraggio dell'accumulo intratoracico di fluido con OptiVol .....	200

6.4	Visualizzazione delle informazioni sulla gestione dello scompenso cardiaco .....	208
6.5	Raccolta e visualizzazione dei dati sugli episodi di sensing ventricolare ....	215
<b>7</b>	<b>Configurazione delle terapie di stimolazione .....</b>	<b>219</b>
7.1	Sensing dell'attività cardiaca intrinseca .....	219
7.2	Erogazione delle terapie di stimolazione .....	230
7.3	Erogazione della stimolazione a risposta in frequenza .....	242
7.4	Gestione delle energie di stimolazione in uscita con la funzione Gestione cattura .....	251
7.5	Modifica dell'intervallo AV durante le modifiche della frequenza .....	260
7.6	Adattamento del PVARP alle variazioni della frequenza cardiaca del paziente .....	262
7.7	Erogazione di una frequenza di stimolazione più lenta durante i periodi di sonno .....	265
7.8	Prevenzione della stimolazione atriale competitiva .....	267
7.9	Interruzione delle tachicardie mediate da pacemaker .....	269
7.10	Gestione della conduzione retrograda utilizzando la risposta a PVC .....	271
7.11	Riduzione di un'inibizione ventricolare inappropriata utilizzando la VSP ....	272
7.12	Prevenzione della stimolazione ventricolare rapida durante le tachiaritmie atriali .....	275
7.13	Aumento dell'uscita di stimolazione dopo una terapia ad alta tensione ....	278
7.14	Utilizzo della stimolazione per intervento atriale per contrastare le tachiaritmie atriali .....	279
7.15	Erogazione della stimolazione in overdrive dopo una terapia ad alta tensione per VT/VF .....	289
7.16	Risposta alle PVC con la Stabilizzazione della frequenza ventricolare ....	290
<b>8</b>	<b>Impostazione del riconoscimento delle tachiaritmie .....</b>	<b>294</b>
8.1	Riconoscimento di tachiaritmie atriali .....	294
8.2	Riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari .....	304
8.3	Discriminazione della VT/VF dalla SVT con la funzione PR Logic .....	322
8.4	Come distinguere la tachicardia sinusale dalla VT con la funzione Insorgenza .....	328
8.5	Come distinguere l'AT/AF dalla VT utilizzando la funzione Stabilità .....	334
8.6	Riconoscimento di tachiaritmie prolungate con l'ausilio del tempo massimo di sospensione .....	337

8.7	Sospensione e ripresa del riconoscimento delle tachiaritmie .....	339
<b>9</b>	<b>Configurazione delle terapie per tachiaritmia .....</b>	<b>342</b>
9.1	Trattamento degli episodi rilevati come VF .....	342
9.2	Trattamento degli episodi di VT e di FVT con terapie di stimolazione antitachicardica .....	356
9.3	Trattamento di VT e FVT con cardioversione ventricolare .....	370
9.4	Pianificazione delle terapie atriali .....	379
9.5	Trattamento degli episodi di AT/AF con la stimolazione antitachicardica ...	387
9.6	Trattamento dell'AT/AF con la cardioversione atriale .....	400
9.7	Erogazione di una cardioversione atriale attivata dal paziente .....	407
9.8	Ottimizzazione della terapia con l'opzione Terapie con aggressività crescente .....	412
9.9	Ottimizzazione del tempo di carica con la funzione Ricarica automatica dei condensatori .....	415
<b>10</b>	<b>Test di sistema .....</b>	<b>420</b>
10.1	Valutazione del ritmo intrinseco .....	420
10.2	Misurazione delle soglie di stimolazione .....	420
10.3	Misurazione dell'impedenza degli elettrocateteri .....	423
10.4	Esecuzione di un test di sensing .....	424
10.5	Test dei condensatori del dispositivo .....	425
10.6	Induzione di un'aritmia .....	427
10.7	Erogazione di terapie manuali .....	437
<b>A</b>	<b>Guida di consultazione rapida .....</b>	<b>440</b>
A.1	Caratteristiche fisiche .....	440
A.2	Specifiche elettriche .....	441
A.3	Indicatori di sostituzione .....	444
A.4	Durata prevista .....	445
A.5	Livelli di energia e tempi di carica tipici .....	446
A.6	Applicazione di un magnete .....	447
A.7	Dati memorizzati e diagnostica .....	448
<b>B</b>	<b>Parametri del dispositivo .....</b>	<b>455</b>
B.1	Impostazioni di emergenza .....	455
B.2	Parametri di riconoscimento delle tachicardie .....	456



B.3	Parametri della terapia per tachiaritmia atriale .....	457
B.4	Parametri della terapia per tachiaritmie ventricolari .....	460
B.5	Parametri di stimolazione .....	462
B.6	Parametri della funzione Medtronic CareAlert .....	469
B.7	Parametri per la raccolta dei dati .....	473
B.8	Parametri dei test di sistema .....	474
B.9	Parametri SEF .....	475
B.10	Parametri non programmabili .....	479
<b>Glossario .....</b>		<b>481</b>
<b>Indice .....</b>		<b>489</b>

# 1 Descrizione del sistema


## 1.1 Introduzione

### 1.1.1 Informazioni su questo manuale

Nel presente manuale sono descritti il funzionamento e la destinazione d'uso del sistema Concerto II CRT-D modello D294TRK.

#### 1.1.1.1 Convenzioni tipografiche adottate nel manuale

Nel presente documento, il termine “dispositivo” si riferisce al dispositivo impiantato Concerto II CRT-D.

Il simbolo  riportato nelle tabelle dei parametri indica il valore nominale della Medtronic relativo al parametro corrispondente.

Gli esempi di immagini delle schermate del programmatore riportati in questo manuale sono stati realizzati utilizzando un programmatore Medtronic CareLink modello 2090. Le immagini in questione vengono illustrate unicamente a scopo di riferimento e potrebbero non corrispondere al software finale.

I nomi dei pulsanti sullo schermo vengono visualizzati racchiusi tra parentesi: [Nome del pulsante].

Le istruzioni relative alla programmazione riportate in questo manuale vengono spesso rappresentate da un blocco di programmazione, che illustra il percorso per raggiungere determinate schermate o parametri nell'applicazione software. Nei blocchi di programmazione vengono utilizzate le seguenti convenzioni tipografiche:

- Il simbolo “⇒” precede il testo a schermo che è possibile selezionare per passare ad una nuova schermata.
- Il simbolo “▷” precede il nome di un parametro programmabile per una determinata funzione.
- Quando una fase della navigazione riguarda un campo presente nella schermata etichettato sia con un titolo di riga sia con un titolo di colonna, per separare i due titoli viene utilizzato il carattere “|”. I valori di parametro, tuttavia, non utilizzano questa convenzione tipografica.
- Quando si deve selezionare un determinato valore di parametro per abilitare gli altri parametri o la navigazione, il valore in questione è racchiuso tra <parentesi>.

Di seguito viene illustrato un esempio di un blocco di programmazione che utilizza queste convenzioni tipografiche:

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Testo a schermo da selezionare...
- ⇒ Campo visualizzato Titolo riga | Titolo colonna...
  - ▷ Nome del parametro <Valore obbligatorio>
  - ▷ Nome del parametro
  - ▷ Nome del parametro

Tranne che nella sezione Avvertenze, precauzioni e possibili effetti indesiderati, Medtronic segnala le precauzioni e le avvertenze facendole precedere rispettivamente da un triangolo bianco e da un triangolo nero contenente un punto esclamativo.

### 1.1.1.2 Nomenclatura utilizzata per indicare la durata della batteria del prodotto

Nel presente manuale viene utilizzata una nomenclatura per taluni termini relativi alla durata della batteria del prodotto conforme alle definizioni della normativa sui pacemaker CENELEC EN 45502-2-1:2003. La normativa in questione riguarda i dispositivi medici attivi impiantati (AIMD) destinati a trattare le bradiaritmie. La normativa in questione è stata approvata e pubblicata nel dicembre 2003.

La Medtronic ha adottato questa nomenclatura in conformità alla normativa CENELEC e in previsione della sua futura adozione come standard internazionale. La nomenclatura definita dalla normativa EN 45502-2-1:2003 sostituisce tutti i termini precedentemente utilizzati in relazione alla durata della batteria del prodotto.

La nomenclatura definita dalla normativa EN 45502-2-1:2003 e i termini da essa sostituiti vengono riportati nella tabella sottostante:

Nomenclatura definita dalla normativa EN 45502-2-1: 2003		Nomenclatura precedentemente utilizzata	
BOS	Inizio servizio	BOL	Inizio vita
EOS	Fine servizio	EOL	Fine vita
RRT	Momento consigliato per la sostituzione	ERI	Indicatore di sostituzione elettiva
PSP	Periodo di servizio prolungato	Condizioni post-ERI	
Durata prevista		Durata prevista	

### 1.1.2 Documentazione

Prima di impiantare il dispositivo, si raccomanda di:

- Leggere la documentazione fornita a corredo per informazioni sulla prescrizione, l'impianto e l'utilizzo del dispositivo e su come condurre una sessione di follow-up del paziente.
- Leggere attentamente i manuali tecnici relativi agli elettrocateri da utilizzare unitamente al dispositivo. Leggere inoltre i manuali tecnici relativi agli altri componenti del sistema.
- Discutere del dispositivo e della procedura di impianto con il paziente e con le altre persone interessate e consegnare loro il materiale informativo per il paziente fornito a corredo con il dispositivo.

### 1.1.3 Assistenza tecnica

La Medtronic si avvale su scala mondiale di rappresentanti e tecnici altamente qualificati in grado di assistere i clienti e, all'occorrenza, di provvedere alla formazione di personale ospedaliero qualificato sull'utilizzo dei prodotti della Medtronic.

Inoltre, consulenti tecnici della Medtronic sono a disposizione per fornire chiarimenti agli utenti dei prodotti.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante locale della Medtronic oppure scrivere o telefonare agli indirizzi o ai numeri telefonici della Medtronic elencati sul retro della copertina.

### 1.1.4 Formazione dei clienti

La Medtronic invita i medici a partecipare ad un seminario di formazione sul dispositivo. Durante il corso verranno illustrate le indicazioni sull'uso del dispositivo, le funzioni del sistema, le procedure d'impianto e la gestione del paziente.

### 1.1.5 Bibliografia

L'opera di riferimento principale per informazioni di carattere generale è Zacouto FI, Guize LJ. *Fundamentals of Orthorhythmic Pacing*. In: Luderitz B, Ed. *Cardiac Pacing Diagnostic and Therapeutic Tools*. New York: Springer-Verlag; 1976: 212-218.

Per ulteriori informazioni di carattere generale, cfr. le seguenti pubblicazioni:

- Estes M, Manolis AS, Wang P, Eds. *Implantable Cardioverter-Defibrillators*. New York, NY: Marcel Dekker, Inc. 1994.
- Kroll MW, Lehmann MH, Eds. *Implantable Cardioverter-Defibrillator Therapy: The Engineering-Clinical Interface*. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers 1996.
- Singer I, Ed. *Implantable Cardioverter-Defibrillator*. Armonk, NY: Futura Publishing Co. 1994.
- Singer I, Barold SS, Camm AJ, Eds. *Nonpharmacological Therapy of Arrhythmias for the 21st Century: The State of the Art*. Armonk, NY: Futura Publishing Co. 1998.
- Stadler RW, Gunderson BD, Gillberg JM. An Adaptive Interval-Based Algorithm for Withholding ICD Therapy During Sinus Tachycardia. *Pace*. 2003; 26:1189–1201.

### **1.1.6 Dichiarazione di Conformità**

La Medtronic dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e della Direttiva 90/385/CEE riguardante i dispositivi medici impiantabili attivi (AIMD).

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Medtronic ad uno dei numeri telefonici o degli indirizzi riportati nel retrocopertina.














### **1.1.7 Dichiarazione di conformità Industry Canada**

Il dispositivo non deve interferire con stazioni che impiegano la banda MHz 400.150 – 406.000 MHz per servizi meteorologici, servizi erogati con l'ausilio di satelliti meteorologici e di esplorazione terrestre e deve tollerare eventuali interferenze, anche se queste possono determinare un funzionamento indesiderato. Per conoscere il numero di certificazione Industry Canada relativo a questo prodotto, fare riferimento alle etichette riportate sulla confezione.









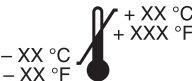

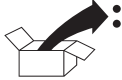

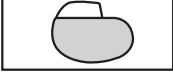
### **1.1.8 Legenda dei simboli**

La lista di simboli che segue riguarda vari prodotti. Per sapere quali simboli riguardano questo prodotto, fare riferimento alle etichette riportate sulla confezione.





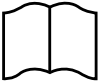








**Tabella 1.** Legenda dei simboli riportati sull'etichetta della confezione

Simbolo	Significato
	
	Conformité Européenne (Conformità Europea). Questo simbolo significa che il dispositivo è pienamente conforme alla Direttiva AIMD 90/385/CEE (NB 0123) ed alla Direttiva R&TTE 1999/5/CE.
	In Europa, l'uso di questo dispositivo potrebbe essere soggetto ai regimi di licenza dei singoli Paesi.
 N13571 Z813	Questo simbolo indica che il dispositivo è pienamente conforme alle norme sulla gestione dello spettro radio applicabili ai sistemi di radiocomunicazione emanate dalla Australian Communications and Media Authority (ACMA) e dal Ministero per lo Sviluppo Economico neozelandese.
	Conformità radio. Questo simbolo indica che il prodotto potrebbe essere soggetto ai regolamenti relativi ai servizi di telecomunicazione e radiocomunicazione in vigore nel proprio Paese di residenza. Per informazioni specifiche sulla conformità alle norme relative ai servizi di telecomunicazione e radiocomunicazione in vigore nel proprio Paese di residenza, consultare la pagina <a href="http://www.medtronic.com/radio">www.medtronic.com/radio</a> .
	Sicurezza condizionata in ambiente MRI. Il sistema di stimolazione SureScan può essere impiegato con la massima sicurezza in ambienti adibiti alla risonanza magnetica se utilizzato in conformità alle istruzioni riportate nel relativo manuale.
	<b>Nota:</b> non tutti i dispositivi sono utilizzabili in ambiente MRI.
	Attenzione
	Aprire qui
	Non utilizzare se la confezione appare danneggiata
	Non riutilizzare
	Sterilizzato con ossido di etilene
	Consultare le istruzioni per l'uso

**Tabella 1.** Legenda dei simboli riportati sull'etichetta della confezione (continua)








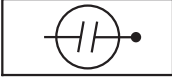
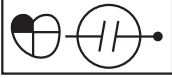
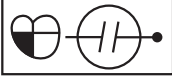
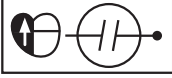
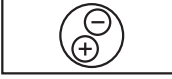
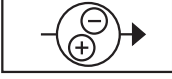
Simbolo	Significato
	Riservato al mercato statunitense
	Data di fabbricazione
	Fabbricante
	Rappresentante autorizzato per la Comunità Europea
	Data di scadenza
	Numero di lotto
	Numero di riordine
	Numero di serie
	Limiti di temperatura
	Adattato
	Contenuto della confezione
	Dispositivo IPG
	Rivestito (dispositivo IPG)

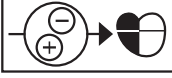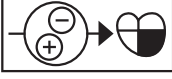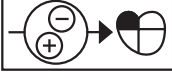**Tabella 1.** Legenda dei simboli riportati sull’etichetta della confezione (continua)














Simbolo	Significato
	Dispositivo ICD
	Rivestito (dispositivo ICD)
	Dispositivo con terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT)
	Rivestito (dispositivo CRT)
	Documentazione del prodotto
	Cacciavite torsiometrico
	Accessori
	Ampiezza/durata dell’impulso
	Ampiezza/durata dell’impulso atriale
	Ampiezza/durata dell’impulso RV
	Ampiezza/durata dell’impulso LV
	Frequenza massima/minima di trascinamento
	Frequenza

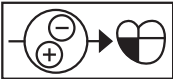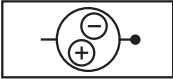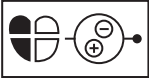

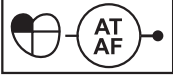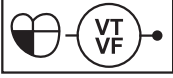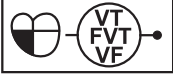
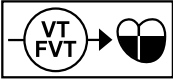

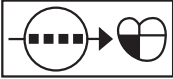
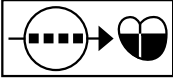
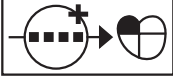

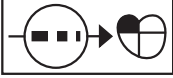
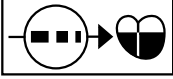
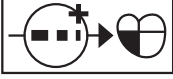
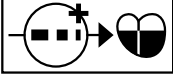
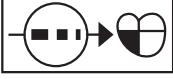
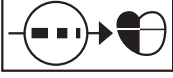
**Tabella 1.** Legenda dei simboli riportati sull'etichetta della confezione (continua)

Simbolo	Significato
	Frequenza minima
	Sensibilità
	Intervallo AV rilevato
	Intervallo AV (stimolato/rilevato)
	Periodo refrattario
	Periodo refrattario atriale
	Periodo refrattario ventricolare
	Periodo refrattario atriale post-ventricolare (PVARP)
	Polarità
	Polarità di stimolazione (monocamerale)
	Polarità di stimolazione (bicamerale)
	Polarità di stimolazione LV
	Polarità di stimolazione atriale



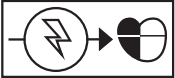





**Tabella 1.** Legenda dei simboli riportati sull'etichetta della confezione (continua)

Simbolo	Significato
	Polarità di stimolazione ventricolare destra
	Polarità di sensing (monocamerale)
	Polarità di sensing (bicamerale)
	Sensibilità atriale
	Sensibilità ventricolare
	Terapie per VF (del/sto)
	Terapie per VT
	Stimolazione V/Ritardo di stimolazione V-V
	Monitoraggio di VT
	Riconoscimento di AT/AF
	Riconoscimento di VT, VF
	Riconoscimento di VT, FVT, VF
	Terapie per AT/AF

**Tabella 1.** Legenda dei simboli riportati sull'etichetta della confezione (continua)

Simbolo	Significato
	Terapie per VT, VF
	Terapie per VT e FVT (CRT)
	Intervento di AT/AF
	Burst
	Burst (CRT)
	Burst+
	Burst a 50 Hz
	Ramp A
	Ramp (CRT)
	Ramp+
	Ramp+ (CRT)
	Ramp V
	Ramp AV

**Tabella 1.** Legenda dei simboli riportati sull'etichetta della confezione (continua)

Simbolo	Significato
	Defibrillazione
	Cardioversione V
	Cardioversione AV
	Terapie per FVT
	Cambio Modo
	Frequenza con magnete
	Tensione pericolosa
	Active Can

### 1.1.9 Nota

Il software viene fornito come strumento informativo per l'utente finale. L'utente è responsabile del corretto inserimento dei dati sul paziente nel software. Medtronic non rilascia alcuna garanzia sull'accuratezza e la completezza dei dati inseriti. Medtronic DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO DIRETTO O INDIRETTO, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE DERIVANTE DALL'USO DELLE INFORMAZIONI FORNITE NEL SOFTWARE.

## 1.2 Descrizione del sistema

Il defibrillatore bicamerale impiantabile Concerto II CRT-D modello D294TRK della Medtronic con terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT-D) è un dispositivo cardiaco multiprogrammabile in grado di monitorare e regolare la frequenza cardiaca del paziente erogando terapie di stimolazione antibradicardica mono o bicamerale a risposta in frequenza, terapie di stimolazione biventricolare sequenziale, terapie per tachiaritmie ventricolari e terapie per tachiaritmie atriali.

Il dispositivo rileva l'attività elettrica del cuore del paziente utilizzando gli elettrodi degli elettrocateri impiantati nell'atrio e nel ventricolo destro. Successivamente, analizza il ritmo cardiaco in base a parametri di riconoscimento programmabili.

Il dispositivo rileva automaticamente le tachiaritmie ventricolari (VT/VF) ed eroga terapie di defibrillazione, cardioversione e stimolazione antitachicardica. Inoltre, il dispositivo rileva automaticamente le tachiaritmie atriali (AT/AF) erogando terapie di cardioversione e stimolazione antitachicardica. Per erogare al paziente una terapia di resincronizzazione cardiaca, il defibrillatore ricorre alla stimolazione biventricolare simultanea o sequenziale. Il dispositivo risponde alle bradiaritmie erogando terapie di stimolazione antibradicardica.

Il dispositivo fornisce inoltre informazioni diagnostiche e sul monitoraggio, utili ai fini della valutazione del sistema e del trattamento del paziente.

**Elettrocateri** – Il sistema di elettrocateri utilizzato con questo dispositivo deve stimolare il ventricolo sinistro (LV), effettuare il sensing del, stimolare ed erogare terapie di cardioversione/defibrillazione al ventricolo destro (RV) ed effettuare il sensing del e stimolare l'atrio (A). Non utilizzare alcun elettrocateri con il dispositivo senza averne prima verificato la compatibilità con il connettore.

Per informazioni sulla selezione e l'impianto di elettrocateri per questo dispositivo, cfr. la Sezione 4.2, "Selezione ed impianto degli elettrocateri", pagina 104.

**Dispositivo impiantabile** – Il Concerto II CRT-D modello D294TRK e gli elettrocateri di stimolazione e defibrillazione rappresentano la parte impiantabile del dispositivo. Nella figura sottostante sono illustrati i componenti principali che comunicano con il dispositivo impiantabile.

**Figura 1.** I componenti del sistema

**Programmatori e software** – Per programmare il presente dispositivo viene utilizzato il programmatore Medtronic CareLink modello 2090 con relativo software. Il programmatore Medtronic CareLink modello 2090 con collegamento telemetrico wireless Conexus è stato appositamente studiato per facilitare e rendere efficienti l'impianto, le visite di follow-up e il monitoraggio sia per il personale medico che per i pazienti. Grazie alla telemetria wireless Conexus, è possibile fare a meno di posizionare la testina di programmazione sopra il dispositivo impiantato durante la sessione di programmazione o di monitoraggio. Il sistema utilizza la telemetria a radiofrequenza (RF) per la comunicazione wireless tra il dispositivo impiantato ed il programmatore in ospedale o in clinica. La telemetria Conexus utilizza la banda di frequenza MICS (Medical Implant Communications Service), l'unica riservata ai dispositivi medici impiantabili. L'utilizzo della banda di frequenza MICS consente di prevenire eventuali interferenze con dispositivi elettronici di uso domestico, come i forni a microonde, i telefoni cellulari ed i baby monitor.

Per attivare il collegamento telemetrico Conexus in un dispositivo medico impiantato, è necessario utilizzare l'Attivatore Conexus o la testina di programmazione. Se non si utilizza l'Attivatore Conexus o si utilizza un programmatore dotato di collegamento telemetrico non wireless, sarà necessario utilizzare la testina di programmazione sia per dare avvio alla comunicazione con il dispositivo presente nell'ospedale sia per mantenerla.

Durante una sessione di telemetria wireless, tutti gli altri programmatori non possono comunicare né avviare una sessione con il dispositivo impiantato del paziente, salvaguardando così la sicurezza e la privacy del paziente. Analogamente, altri pazienti con dispositivi impiantati non possono in alcun modo interferire con la comunicazione o la programmazione in corso durante la sessione di controllo del paziente.

I programmatori di altra marca non sono compatibili con i dispositivi della Medtronic, anche se non causano alcun danno ad essi.

**Attivatore Conexus modello 27901** – L'Attivatore Conexus modello 27901 della Medtronic consente di attivare il collegamento telemetrico wireless Conexus per i dispositivi impiantati che supportano la telemetria wireless. L'Attivatore Conexus viene utilizzato unitamente al programmatore Medtronic CareLink modello 2090 con telemetria Conexus in ospedale o in clinica.

**Analizzatore modello 2290** – Il sistema supporta l'utilizzo dell'Analizzatore Medtronic CareLink modello 2290, un accessorio del programmatore Medtronic CareLink. Il sistema consente di effettuare una sessione con il dispositivo ed una con l'analizzatore contemporaneamente e di passare rapidamente dall'una all'altra senza dover terminare o riavviare le sessioni, oltre che di inviare dati dall'analizzatore al programmatore.

**Medtronic CareLink Monitor modello 2490C** – I pazienti utilizzano il monitor modello 2490C per la raccolta automatica dei dati presenti nel dispositivo medico impiantato e per la loro trasmissione al proprio specialista di fiducia. Il monitor comunica tramite connessione wireless con il dispositivo impiantato del paziente trasmettendo i dati attraverso la normale linea telefonica fissa, a condizione che il Medtronic CareLink Network sia accessibile nella località di residenza del paziente. Di norma, le cliniche pianificano le trasmissioni durante le ore di sonno del paziente. Il monitor può anche inviare allarmi del sistema alla clinica in orari diversi da quelli programmati, se il dispositivo è stato programmato in tal senso. Il paziente non ha alcuna necessità di interagire con il monitor, ma deve solo effettuare la procedura di configurazione iniziale. Fare riferimento alla documentazione fornita a corredo del monitor per informazioni sul suo collegamento ed utilizzo.

**Indicatore PatientLook modello 2490R** – L'Indicatore PatientLook modello 2490R è un sistema di monitoraggio domestico in grado di monitorare automaticamente il dispositivo medico impiantato del paziente per rilevare eventuali variazioni rilevanti nello stato del dispositivo e nello stato del paziente. Le spie di stato Medtronic CareAlert presenti sull'Indicatore PatientLook indicano al paziente quando il dispositivo medico impiantato deve essere controllato dal medico o dalla clinica. L'Indicatore PatientLook ricorre alla

comunicazione wireless Conexus per monitorare il dispositivo del paziente. Prima di utilizzare l'Indicatore PatientLook per la prima volta, il paziente dovrà configurare la funzione di comunicazione wireless tra l'Indicatore PatientLook ed il dispositivo impiantato. Una volta completata la configurazione iniziale, l'Indicatore PatientLook controlla automaticamente il dispositivo senza necessitare di alcun intervento da parte del paziente. Il paziente può controllare manualmente l'eventuale presenza di notifiche CareAlert nel dispositivo ogni volta che lo desidera.

**InCheck Patient Assistant modello 2696** – I pazienti possono utilizzare l'InCheck Patient Assistant modello 2696 per svolgere le seguenti attività:

- Avviare la registrazione di dati sugli eventi cardiaci nella memoria del dispositivo.
- Verificare se il dispositivo impiantato abbia rilevato una sospetta tachiaritmia atriale.
- Richiedere l'erogazione di una terapia di cardioversione atriale (se il dispositivo è programmato in modo da consentire al paziente di attivare la cardioversione).

**Nota:** la cardioversione attivata dal paziente viene erogata soltanto se il dispositivo medico impiantato sta attualmente rilevando un episodio di AT/AF ed il medico ha programmato il dispositivo in modo tale da consentire la cardioversione attivata dal paziente.

**Dispositivo di monitoraggio SentryCheck modello 2697** – Il paziente può utilizzare il dispositivo di monitoraggio SentryCheck modello 2697 per determinare lo stato della funzione di monitoraggio del fluido OptiVol del proprio dispositivo medico impiantato.

**Contenuto della confezione sterile** – La confezione contiene un defibrillatore impiantabile, un cacciavite torsionometrico ed uno spinotto DF-1.

## 1.3 Indicazioni ed utilizzo

Il sistema Concerto II CRT-D è indicato per trattare i pazienti ad alto rischio di morte improvvisa determinata da tachiaritmie ventricolari ed affetti da scompenso cardiaco accompagnato da desincronizzazione ventricolare. Il dispositivo è stato progettato per l'erogazione di stimolazione, cardioversione e defibrillazione antitachicardica atriale e/o ventricolare per il trattamento automatizzato di tachiaritmie atriali e/o ventricolari con possibili conseguenze fatali.

Prima dell'impianto, è necessario sottoporre i pazienti ad una visita cardiologica completa comprendente esami elettrofisiologici. Si consiglia inoltre di eseguire un esame elettrofisiologico ed un test sulla sicurezza e l'efficacia delle terapie per tachiaritmia proposte durante e dopo l'impianto del dispositivo.



## 1.4 Controindicazioni

Il sistema Concerto II CRT-D è controindicato per i pazienti che accusano tachiaritmie con cause transitorie o reversibili tra cui: infarto miocardico acuto, intossicazione da farmaci, annegamento, elettrocuzione, sbilancio elettrolitico, ipossia o sepsi.

Il dispositivo non è indicato nei pazienti portatori di un pacemaker monopolare impiantato.

## 2 Avvertenze, precauzioni e possibili effetti indesiderati

### 2.1 Avvertenze e precauzioni generali

**Anticoagulanti** – L'utilizzo del dispositivo non dovrebbe cambiare l'applicazione di protocolli anticoagulanti stabilizzati.

**Evitare eventuali elettrocuzioni durante il maneggiamento** – Disattivare il riconoscimento delle tachiaritmie durante l'impianto, l'espianto o le procedure autoptiche. Il dispositivo può emettere una scarica ad alta tensione se si toccano i terminali di defibrillazione.

**Isolamento elettrico durante l'impianto** – Evitare che il paziente venga a contatto con apparecchiature elettriche collegate a terra che possono generare dispersioni di corrente durante l'impianto. Le dispersioni di corrente possono produrre tachiaritmie tali da causare il decesso del paziente.

**Defibrillatore esterno** – Tenere a portata di mano un defibrillatore esterno per poterlo utilizzare subito in caso di tachiaritmie o di tachiaritmie indotte volutamente durante il test del dispositivo, le procedure di impianto o il test post-impianto.

**Compatibilità degli elettrocateri** – Non utilizzare elettrocateri di altre marche se non è stata dimostrata la compatibilità con i dispositivi della Medtronic. Se un elettrocatero non è compatibile con un dispositivo della Medtronic, si può verificare undersensing dell'attività cardiaca, la mancata erogazione della terapia necessaria, la mancanza di collegamento elettrico o un collegamento elettrico intermittente.

**Occorrenza di ictus** – Dopo un accidente ischemico o cerebrovascolare, disabilitare le terapie di cardioversione atriale finché il paziente non si è stabilizzato.

### 2.2 Rimozione e smaltimento

Relativamente all'espianto ed allo smaltimento del dispositivo, tenere presente quanto segue:

- Interrogare il dispositivo e disattivare il riconoscimento delle tachiaritmie prima dell'espianto, della pulizia o della spedizione del dispositivo. Così facendo, si eviterà che il dispositivo possa erogare degli shock indesiderati.

- Espiantare il dispositivo impiantabile post-mortem. In alcuni Paesi, l'espianto di dispositivi impiantabili a batteria è obbligatorio per ragioni di tutela ambientale. Si invita pertanto ad informarsi sulle normative locali. Inoltre, il dispositivo può esplodere se sottoposto a temperature di incenerimento o cremazione.
- I dispositivi impiantabili della Medtronic sono esclusivamente monouso. Non risterilizzare né reimpiantare i dispositivi espianati.
- Si prega di restituire i dispositivi espianati alla Medtronic per l'analisi e lo smaltimento. Per l'elenco degli indirizzi a cui inviare il dispositivo, consultare il retrocopertina.

## 2.3 Istruzioni per il maneggiamento e la conservazione

Per le modalità di maneggiamento o conservazione del dispositivo, attenersi scrupolosamente a queste linee guida.

### 2.3.1 Maneggiamento del dispositivo

**Controllo ed apertura dell'imballaggio** – Prima di aprire il vassoio sterile della confezione, ispezionarlo per verificare se presenta segni di danni che potrebbero avere compromesso la sterilità del contenuto.

**Danneggiamento della confezione** – Il dispositivo viene confezionato con due imballaggi. Non utilizzare il dispositivo né gli accessori se il contenitore esterno della confezione dovesse risultare bagnato, forato, aperto o danneggiato, ma restituirlo alla Medtronic in quanto l'integrità della confezione sterile o la funzionalità del dispositivo potrebbe essere compromessa. Questo dispositivo non è destinato ad essere risterilizzato.

**Sterilizzazione** – La Medtronic ha sterilizzato il contenuto della confezione con ossido di etilene prima della spedizione. Il dispositivo è esclusivamente monouso e non è destinato ad essere risterilizzato.

**Temperatura del dispositivo** – Far raggiungere al dispositivo la temperatura ambiente prima di programmarlo o impiantarli. Se la temperatura del dispositivo è superiore o inferiore alla temperatura ambiente, il funzionamento iniziale dello stesso può risentirne negativamente.

**Caduta del dispositivo** – Non impiantare il dispositivo se è caduto su una superficie dura da un'altezza di 30 cm o superiore dopo averlo estratto dalla confezione.

**Data di scadenza ('usare entro il')** – Non impiantare il dispositivo dopo la data di scadenza, in quanto la durata della batteria potrebbe essere ridotta.

**Esclusivamente monouso** – Non risterilizzare né reimpiantare dispositivi espianati.

### 2.3.2 Per conservare il dispositivo

**Evitare magneti** – Per evitare di danneggiare il dispositivo, conservarlo in un'area pulita, lontana da magneti, kit che comprendono magneti e qualsiasi sorgente di interferenze elettromagnetiche.

**Limiti di temperatura** – Conservare e trasportare la confezione accertandosi che la temperatura sia compresa tra  $-18^{\circ}\text{C}$  e  $+55^{\circ}\text{C}$ . A temperature inferiori a  $-18^{\circ}\text{C}$  può verificarsi un reset elettrico. A temperature superiori a  $+55^{\circ}\text{C}$ , la durata del dispositivo può diminuire e le prestazioni possono risentirne negativamente.

## 2.4 Valutazione e collegamento dell'elettrocatteter

Fare riferimento ai manuali tecnici per istruzioni e precauzioni specifiche sul maneggiamento degli elettrocatteteri.

**Chiave esagonale** – Utilizzare unicamente il cacciavite torsiometrico fornito a corredo con il dispositivo. Il cacciavite torsiometrico è stato progettato per prevenire eventuali danni al dispositivo causati dall'eccessivo serraggio di una vite di arresto. Altri cacciaviti torsiometrici, (come ad esempio una chiave esagonale con manico blu o ad angolo retto) hanno capacità torsiometriche maggiori rispetto a quanto il connettore dell'elettrocatteter possa tollerare.

**Collegamento dell'elettrocatteter** – Nel collegare l'elettrocatteter e il dispositivo, tenere presente quanto segue:

- Proteggere con un cappuccio gli elettrocatteteri inutilizzati per prevenire la trasmissione dei segnali elettrici.
- Isolare ogni porta inutilizzata dell'elettrocatteter per proteggere il dispositivo.
- Controllare i collegamenti degli elettrocatteteri. Connessioni lente degli elettrocatteteri possono provocare un sensing inadeguato e la mancata erogazione della terapia antiaritmica.

**Impedenza dell'elettrocatteter** – Nell'esaminare il sistema di elettrocatteteri relativamente alla loro impedenza, tenere presente quanto segue:

- Verificare che l'impedenza dell'elettrocatteter di defibrillazione sia superiore a  $20\ \Omega$ . Un'impedenza inferiore a  $20\ \Omega$  può danneggiare il dispositivo o impedire l'erogazione di una terapia ad alta tensione.
- Prima di eseguire misurazioni elettriche e misurazioni dell'efficacia della defibrillazione, allontanare da tutti gli elettrodi gli oggetti realizzati in materiale conduttivo, come i fili guida. Gli oggetti metallici, come i fili guida, possono mandare in corto circuito il dispositivo e l'elettrocatteter, determinando il bypassaggio del cuore da parte della corrente elettrica e danneggiando eventualmente il dispositivo e l'elettrocatteter.

- Se l'impedenza di stimolazione LV per la stimolazione punta LV/coil RV è superiore a 3000  $\Omega$  e l'impedenza di defibrillazione V. (HVB) è superiore a 200  $\Omega$ , utilizzare l'EGM LV (punta LV/Cassa [Can]) per valutare l'integrità dell'elettrocattetere LV.

**Patch** – Non piegare, alterare né rimuovere alcuna parte di un patch. In caso contrario, si rischia di compromettere il funzionamento o la durata dell'elettrodo.

## 2.5 Funzionamento del dispositivo

**Accessori** – Utilizzare il dispositivo solo con accessori, parti soggette ad usura ed elementi monouso che sono stati testati in base a norme tecniche standard, e la cui sicurezza è stata provata da un istituto autorizzato al test del dispositivo.

**Esaurimento della batteria** – Monitorare attentamente la durata della batteria. L'esaurimento della batteria determina l'arresto del dispositivo. La cardioversione e la defibrillazione sono terapie ad alta energia che riducono la durata della batteria. La durata della batteria viene ridotta anche da un numero eccessivo di cicli di carica.

**Sospensione del circuito di carica o circuito di carica inattivo** – Se il programmatore visualizza un messaggio di sospensione del circuito di carica o di circuito di carica inattivo, contattare un rappresentante della Medtronic e sostituire immediatamente il dispositivo. Se viene visualizzato questo messaggio, non è possibile erogare al paziente alcuna terapia ad alta tensione.

**Uso concomitante di un pacemaker** – Se si utilizza un pacemaker a parte unitamente all'ICD, verificare che quest'ultimo non rilevi gli impulsi di stimolazione del pacemaker poiché ciò può incidere sul riconoscimento delle tachiaritmie da parte dell'ICD. Programmare il pacemaker in modo da erogare impulsi di stimolazione ad intervalli superiori rispetto agli intervalli di riconoscimento delle tachiaritmie da parte dell'ICD.

**Indicatori di stato del dispositivo** – Se dopo avere interrogato il dispositivo, sul programmatore compaiono indicatori di stato del dispositivo (ad esempio, Reset elettrico), contattare immediatamente un rappresentante della Medtronic. Se compaiono indicatori di stato del dispositivo, potrebbe non essere possibile erogare le terapie al paziente.

**Reset elettrico** – Un'esposizione a temperature inferiori a  $-18^{\circ}\text{C}$  o a campi elettromagnetici intensi può causare un reset elettrico. Consigliare ai pazienti di stare lontano dai campi elettromagnetici di forte intensità. Attenersi ai limiti di temperatura previsti per la conservazione onde evitare l'esposizione del dispositivo a basse temperature. In caso di reset parziale, la stimolazione riprende nel modo programmato mantenendo molte delle impostazioni programmate in precedenza. In caso di reset completo, il dispositivo funziona in modo VVI a  $65\text{ min}^{-1}$ . Il reset elettrico viene indicato da un messaggio di avviso emesso dal programmatore, che compare immediatamente al momento dell'interrogazione. Per ripristinare il funzionamento precedente, è necessario

riprogrammare il dispositivo. Se si è verificato un reset del dispositivo, contattare un rappresentante della Medtronic.

**Indicatore di fine servizio (EOS)** – Se sul programmatore si attiva l'indicatore di fine servizio (EOS), sostituire immediatamente il dispositivo. Entro breve tempo infatti il dispositivo potrebbe perdere la capacità di stimolare, rilevare ed erogare terapie in maniera adeguata.

**Test durante la visita di controllo** – Nell'esecuzione del test del dispositivo durante la visita di controllo, tenere presente quanto segue:

- Tenere a portata di mano un defibrillatore esterno per utilizzo immediato in caso di necessità. Durante il test del dispositivo possono verificarsi tachiaritmie spontanee o indotte potenzialmente dannose.
- Eventuali variazioni delle condizioni del paziente, della terapia farmacologia ed altri fattori possono influire sulla soglia di defibrillazione (DFT), impedendo al dispositivo di terminare le tachiaritmie del paziente in fase post-operatoria. L'effettiva conclusione della fibrillazione ventricolare o della tachicardia ventricolare durante la procedura d'impianto non garantisce che le tachiaritmie possano essere terminate in fase post-operatoria.

**Terapia con energia superiore a quella programmata** – Se il dispositivo è stato precedentemente caricato con un'energia superiore e tale carica resta nei condensatori, può erogare una terapia con una energia superiore a quella programmata.

**Magneti** – Posizionando un magnete sul dispositivo, si sospende il riconoscimento delle tachiaritmie ma non si altera in alcun modo la terapia antibradicardica. Posizionando una testina di programmazione sopra il dispositivo durante una sessione di telemetria wireless, il magnete presente nella testina sospende sempre il riconoscimento delle tachiaritmie. Posizionando invece una testina di programmazione sopra il dispositivo ed avviando una sessione di telemetria non wireless, il riconoscimento delle tachiaritmie non viene sospeso.

**Margini di sicurezza della stimolazione e del sensing** – La maturazione dell'elettrocattetero può determinare la riduzione delle ampiezze di sensing e l'aumento delle soglie di stimolazione, dando eventualmente luogo ad undersensing o ad una perdita di cattura. Assicurare un adeguato margine di sicurezza quando si selezionano valori per i parametri di ampiezza della stimolazione, durata dell'impulso di stimolazione e sensibilità.

**Sicurezza del paziente durante una sessione di telemetria wireless** – Assicurarsi di aver selezionato il paziente appropriato prima di procedere con una sessione di controllo mediante telemetria wireless. Mantenere un contatto visivo con il paziente per l'intera durata della sessione. Se si seleziona il paziente errato e si continua con la sessione, si corre il rischio di programmare inavvertitamente delle impostazioni errate nel dispositivo del paziente.

**Stimolazione del nervo frenico** – A seguito della stimolazione ventricolare sinistra ad ampiezze superiori, può verificarsi una stimolazione del nervo frenico. Nonostante si tratti di una condizione senza rischi di conseguenze fatali, si consiglia di testare la stimolazione del nervo frenico con diverse impostazioni dell'ampiezza di stimolazione e con il paziente in diverse posizioni. Se il paziente subisce la stimolazione del nervo frenico, determinare la soglia di stimolazione minima per la stimolazione del nervo frenico e programmare l'ampiezza della stimolazione su un valore in grado di ridurre al minimo la stimolazione e di fornire un margine di sicurezza della stimolazione adeguato. Se si utilizza la funzione Gestione cattura LV, impostare l'Ampiezza massima adattata LV su un valore in grado di ridurre al minimo la stimolazione del nervo frenico e di fornire un margine di sicurezza della stimolazione adeguato. Valutare attentamente i rischi correlati della stimolazione del nervo frenico rispetto alla perdita di cattura prima di programmare ampiezze di stimolazione inferiori per il paziente.

**Intervento PMT (tachicardia mediata da pacemaker)** – Anche con la funzione Intervento PMT attivata, per la risoluzione delle PMT potrebbe essere necessario un intervento medico, come la riprogrammazione del dispositivo, una terapia farmacologica o la valutazione dell'elettrocattetere.

**Programmatori** – Per comunicare con il dispositivo, utilizzare unicamente programmatori e software applicativo della Medtronic. Programmatori e software di altre marche non sono compatibili con i dispositivi della Medtronic.

**Controllo di frequenza** – Le decisioni relative ai controlli di frequenza non dovrebbero basarsi sulla capacità da parte del dispositivo di evitare aritmie atriali.

**Modi a risposta in frequenza** – Non programmare modi a risposta in frequenza per pazienti non in grado di sopportare frequenze superiori alla frequenza minima programmata poiché potrebbero causare loro fastidio.

**Valori alla consegna** – Non usare i valori alla consegna o i valori nominali di ampiezza di stimolazione e di sensibilità senza aver prima verificato che garantiscano margini di sicurezza adeguati per il paziente.

**Modi atriali monocamerale** – Non programmare dei modi atriali monocamerale per i pazienti con conduzione nodale AV compromessa. In questi modi non si verifica alcuna stimolazione ventricolare.

**Conduzione retrograda lenta e PMT** – La conduzione retrograda lenta può indurre tachicardia mediata da pacemaker (PMT) quando il tempo di conduzione V-A è superiore a 400 ms. La programmazione di un intervento PMT può aiutare soltanto ad evitare la PMT quando il tempo di conduzione V-A è inferiore a 400 ms.

**Test di stimolazione incrociata** – In caso di abilitazione della terapia di stimolazione antitachicardica, eseguire periodicamente un test con le impostazioni di uscita di ATP atriale programmate, onde evitare che si verifichi una cattura ventricolare. Questo aspetto è

particolarmente importante quando si impianta l'elettrocattetero nella parte inferiore dell'atrio.

**Sindrome di Twiddler** – La sindrome di Twiddler, ovvero la tendenza al maneggiamento del dispositivo da parte di taluni pazienti dopo l'impianto, può provocare un rialzo temporaneo della frequenza di stimolazione se il dispositivo è programmato su un modo con risposta in frequenza.

### 2.5.1 Pazienti pacemaker dipendenti

**Stimolaz. sicurezza ventricolare** – Se si trattano pazienti pacemaker dipendenti, la funzione di stimolazione ventricolare di sicurezza (VSP) deve essere sempre programmata su On. La stimolazione ventricolare di sicurezza previene l'asistolia ventricolare dovuta a inibizione inappropriata della stimolazione ventricolare causata da oversensing nel ventricolo.

**Modo di stimolazione ODO** – La stimolazione è disattivata nel modo di stimolazione ODO. Non programmare il modo ODO nei pazienti pacemaker dipendenti. Utilizzare invece il test del ritmo spontaneo per avere un breve periodo senza supporto di stimolazione.

**Test del ritmo spontaneo** – Prestare attenzione quando si esegue il test del ritmo intrinseco per inibire la stimolazione. Quando la stimolazione è inibita, il paziente è senza supporto di stimolazione.

## 2.6 Rischi derivanti dall'utilizzo di determinate terapie mediche

**Tomografia assiale computerizzata (TAC)** – Se il paziente viene sottoposto ad una TAC ed il dispositivo non si trova direttamente nel fascio radiogeno del tomografo, il dispositivo non viene compromesso. Se il dispositivo viene a trovarsi direttamente nel fascio radiogeno del tomografo, può verificarsi oversensing per l'intera durata di esposizione al fascio.

Prima di esporre il dispositivo al fascio per oltre 4 s, adottare misure appropriate per il paziente come l'attivazione di un modo asincrono per i pazienti pacemaker dipendenti o di un modo senza stimolazione per i pazienti non dipendenti da pacemaker e la disattivazione della funzione di riconoscimento delle tachicardie. Tali misure consentono di prevenire un'inibizione ed un trascinarsi fittizi. Una volta completata la TAC, ripristinare i parametri del dispositivo ed attivare la funzione di riconoscimento delle tachicardie.

**Diatermia** – Evitare di sottoporre a trattamento diatermico i pazienti portatori di dispositivi metallici come pacemaker, defibrillatori impiantabili (ICD) e relativi elettrocatteteri.

L'interazione tra l'impianto e la diatermia può causare danni ai tessuti, fibrillazione o danni ai componenti del dispositivo e provocare di conseguenza gravi lesioni, perdita di terapia e/o la necessità di riprogrammare o di sostituire il dispositivo.



**Elettrocauterizzazione** – L'elettrocauterizzazione può indurre tachiaritmie ventricolari e fibrillazione o causare un malfunzionamento del dispositivo. Nel caso in cui non fosse possibile evitare l'elettrocauterizzazione, adottare le precauzioni descritte di seguito per ridurre al minimo le complicazioni:

- Tenere a portata di mano un apparecchio di stimolazione temporanea e defibrillazione.
- Programmare il modo di stimolazione per ridurre al minimo gli effetti dell'oversensing sulla stimolazione (ad esempio, un trascinamento o un'inibizione fittizi). In caso di pazienti pacemaker dipendenti, programmare il dispositivo su un modo di stimolazione asincrona. In caso di pazienti non pacemaker dipendenti, programmare il dispositivo su un modo senza stimolazione. Una volta ultimata la procedura di elettrocauterizzazione, riportare il modo di stimolazione all'impostazione originale.
- Sospendere il riconoscimento delle tachiaritmie utilizzando un magnete o disattivare il riconoscimento delle tachiaritmie utilizzando il programmatore. Una volta ultimata la procedura di elettrocauterizzazione, rimuovere il magnete o utilizzare il programmatore per attivare il riconoscimento delle tachiaritmie.
- Se possibile, utilizzare un sistema di elettrocauterizzazione bipolare. Se si utilizza un sistema di elettrocauterizzazione monopolare, posizionare la piastra di messa a terra in modo tale che il percorso della corrente non passi attraverso o nelle vicinanze del dispositivo e del sistema di elettrocateri. Il percorso della corrente deve trovarsi ad almeno 15 cm dal dispositivo e dal sistema di elettrocateri.
- Evitare qualsiasi contatto diretto del dispositivo per elettrocauterizzazione con il dispositivo o gli elettrocateri impiantati. Qualsiasi contatto diretto può danneggiare il dispositivo o gli elettrocateri.
- Erogare impulsi brevi, intermittenti e irregolari al più basso livello di energia clinicamente accettabile.

**Defibrillazione esterna** – La defibrillazione esterna può danneggiare il dispositivo impiantato. La defibrillazione esterna può anche far aumentare temporaneamente o permanentemente le soglie di stimolazione o danneggiare temporaneamente o permanentemente il miocardio a livello dell'interfaccia tessuto/elettrodo. Il flusso di corrente che attraversa il dispositivo e l'elettrocateri può essere ridotto al minimo adottando le seguenti precauzioni:

- Utilizzare il livello di energia di defibrillazione più basso clinicamente accettabile.
- Posizionare i patch o le placche di defibrillazione ad almeno 15 cm dal dispositivo.
- Posizionare i patch o le placche di defibrillazione perpendicolari al dispositivo ed al sistema di elettrocateri.

Se viene erogata una defibrillazione esterna a meno di 15 cm dal dispositivo, contattare un rappresentante della Medtronic.

**Litotripsia** – La litotripsia può danneggiare il dispositivo in modo permanente se la posizione di quest'ultimo coincide con il punto focale del raggio del litotritore. Prima di eseguire la litotripsia, adottare le seguenti precauzioni:

- Disattivare il riconoscimento delle tachiaritmie con l'ausilio del programmatore. Una volta completata la procedura di litotripsia, attivare il riconoscimento delle tachiaritmie.
- Programmare il modo di stimolazione per ridurre al minimo gli effetti dell'oversensing sulla stimolazione (ad esempio, un trascinamento o un'inibizione fittizi). In caso di pazienti pacemaker dipendenti, programmare il dispositivo su un modo di stimolazione asincrona. In caso di pazienti non pacemaker dipendenti, programmare il dispositivo su un modo senza stimolazione. Una volta ultimata la procedura di litotripsia, riportare il modo di stimolazione all'impostazione originale.
- Tenere il punto focale del raggio del litotritore ad almeno 2,5 cm di distanza dal dispositivo impiantato.

**Risonanza magnetica (RM)** – Non sottoporre a risonanza magnetica (RM) i pazienti a cui è stato impiantato questo dispositivo. La RM può indurre corrente negli elettrocateretri impiantati, causando danni ai tessuti e induzione di tachiaritmie. La RM può anche causare danni al dispositivo.

**Terapie mediche che influenzano il funzionamento del dispositivo** – Le caratteristiche elettrofisiologiche del cuore di un paziente possono cambiare nel corso del tempo, soprattutto se il paziente assume altri medicinali. A causa di tali cambiamenti, le terapie programmate possono diventare inefficaci e potenzialmente pericolose per il paziente. Effettuare visite di controllo regolari per monitorare l'adequatezza delle terapie programmate.

**Ablazione a radiofrequenza (RF)** – Una procedura di ablazione RF può causare un errato funzionamento del dispositivo o addirittura danneggiarlo. I rischi dell'ablazione a radiofrequenza possono essere ridotti al minimo adottando le seguenti precauzioni:

- Tenere a portata di mano un apparecchio di stimolazione temporanea e defibrillazione.
- Programmare il modo di stimolazione per ridurre al minimo gli effetti dell'oversensing sulla stimolazione (ad esempio, un trascinamento o un'inibizione fittizi). In caso di pazienti pacemaker dipendenti, programmare il dispositivo su un modo di stimolazione asincrona. In caso di pazienti non pacemaker dipendenti, programmare il dispositivo su un modo senza stimolazione. Una volta ultimata la procedura di ablazione, riportare il modo di stimolazione all'impostazione originale.
- Sospendere il riconoscimento delle tachiaritmie utilizzando un magnete o disattivare il riconoscimento delle tachiaritmie utilizzando il programmatore. Una volta ultimata la procedura di ablazione, rimuovere il magnete o utilizzare il programmatore per attivare il riconoscimento delle tachiaritmie.
- Evitare ogni contatto diretto tra il catetere per ablazione ed il sistema impiantato.

- Posizionare la piastra di messa a terra in modo tale che il percorso della corrente non passi attraverso o nelle vicinanze del dispositivo e del sistema di elettrocateri. Il percorso della corrente deve trovarsi ad almeno 15 cm dal dispositivo e dal sistema di elettrocateri.

**Radioterapia e oversensing** – Se il paziente viene sottoposto a radioterapia, il dispositivo può rilevare in maniera inappropriata la radiazione diretta o diffusa come attività cardiaca per l'intera durata della procedura. Per ridurre al minimo complicazioni, adottare le seguenti precauzioni:

- Sospendere il riconoscimento delle tachiaritmie utilizzando un magnete o disattivare il riconoscimento delle tachiaritmie utilizzando il programmatore. Una volta ultimata la procedura radioterapeutica, rimuovere il magnete o utilizzare il programmatore per attivare il riconoscimento delle tachiaritmie.
- Programmare il modo di stimolazione per ridurre al minimo gli effetti dell'oversensing sulla stimolazione (ad esempio, un trascinamento o un'inibizione fittizi). In caso di pazienti pacemaker dipendenti, programmare il dispositivo su un modo di stimolazione asincrona. In caso di pazienti non pacemaker dipendenti, programmare il dispositivo su un modo senza stimolazione. Una volta ultimata la procedura radioterapeutica, riportare il modo di stimolazione all'impostazione originale.

**La radioterapia ed il rischio di danni al dispositivo** – Non esporre il dispositivo a dosi elevate di radiazione diretta o diffusa. Una dose cumulativa di radiazioni sui circuiti del dispositivo superiore ai 5 Gy può danneggiare il dispositivo; tuttavia, il danno potrebbe non essere immediatamente evidente. Il danno può manifestarsi in svariati modi, ad esempio sotto forma di un aumento del drenaggio di corrente che determina una riduzione della durata del dispositivo oppure di un deterioramento delle prestazioni del sensing.

Se un paziente necessita di una terapia radiante, indipendentemente dalla sorgente di emissione, non esporre il dispositivo a radiazioni che superano una dose cumulativa di 5 Gy. Utilizzare una schermatura appropriata oppure adottare altre misure per limitare l'esposizione del dispositivo. Normalmente, la dose cumulativa derivante da una procedura radioterapeutica, una TAC o un'apparecchiatura fluoroscopica non è sufficiente a causare danni al dispositivo. Tenere in considerazione la dose cumulativa a cui il dispositivo è stato sottoposto durante esposizioni precedenti in caso di pazienti sottoposti a svariati trattamenti con radiazioni.

**La radioterapia e gli errori di funzionamento del dispositivo** – L'esposizione del dispositivo a neutroni diretti o diffusi può provocarne il reset elettrico, errori durante il funzionamento del dispositivo, errori nei dati diagnostici o la perdita di questi ultimi. Per ridurre le possibilità di reset elettrico dovuto all'esposizione ai neutroni, somministrare il trattamento radioterapeutico utilizzando un raggio fotonico di energia pari o inferiore a 10 MV. L'utilizzo di una schermatura convenzionale contro i raggi X durante la radioterapia non protegge il dispositivo dagli effetti dei neutroni. Se il fascio fotonico ha un'energia superiore a 10 MV, la Medtronic raccomanda di interrogare il dispositivo subito dopo il

trattamento radioterapeutico. Un reset elettrico richiede la riprogrammazione dei parametri del dispositivo. I trattamenti con fasci di elettroni non determinano alcun reset elettrico del dispositivo.

**Terapia ad ultrasuoni** – Non esporre il dispositivo ad una terapia ad ultrasuoni, poiché il dispositivo potrebbe danneggiarsi in modo permanente.

## 2.7 Ambiente domestico e lavorativo

**Telefoni cellulari** – Il dispositivo contiene un filtro che impedisce l'interazione delle trasmissioni della maggior parte dei telefoni cellulari con il funzionamento del dispositivo stesso. Per ridurre ulteriormente la possibilità di interazione, raccomandare ai pazienti di adottare le seguenti precauzioni:

- Mantenere una distanza minima di 15 cm tra il dispositivo ed il telefono cellulare, anche se quest'ultimo non è acceso.
- Mantenere una distanza minima di 30 cm tra il dispositivo ed un'eventuale antenna di trasmissione al di sopra dei 3 W.
- Tenere il telefono cellulare appoggiato all'orecchio più lontano dal dispositivo.

Questo dispositivo è stato sottoposto a prove secondo le norme EN 45502-2-2:2008 e ANSI/AAMI PC-69:2007 per garantire la compatibilità con telefoni cellulari ed altri trasmettitori portatili di potenza analogica. Le suddette tecnologie di trasmissione rappresentano la maggioranza dei telefoni cellulari in uso in tutto il mondo. I circuiti di questo dispositivo, funzionanti a condizioni nominali, sono stati progettati per eliminare qualsiasi effetto significativo dei telefoni cellulari.

**Interferenze elettromagnetiche (EMI)** – Invitare i pazienti ad evitare dispositivi che generano EMI di forte intensità. Le interferenze elettromagnetiche possono causare l'erogazione di una terapia non necessaria. Le interferenze elettromagnetiche possono anche causare malfunzionamenti o guasti del dispositivo. Il paziente deve allontanarsi da una fonte di EMI o disattivarla poiché, così facendo, il dispositivo ritorna di solito al suo normale modo di funzionamento. Le EMI possono essere emesse da queste fonti:

- cavi elettrici ad alta tensione
- apparecchi di comunicazione come trasmettitori a microonde, amplificatori di potenza lineari o trasmettitori amatoriali ad alta potenza
- apparecchi elettrici di uso professionale come saldatrici ad arco, forni a induzione o saldatrici a resistenza.

Normalmente, le interferenze elettromagnetiche generate da elettrodomestici perfettamente funzionanti e dotati di adeguata messa a terra non sono sufficienti ad alterare

il funzionamento del dispositivo. Sono state segnalate interferenze temporanee provocate da elettrodomestici manuali o rasoi elettrici usati nelle immediate vicinanze del sito di impianto. Valutare attentamente l'eventualità di oversensing e di una maggiore ricettività alle EMI prima di impostare la sensibilità sul valore minimo (sensibilità massima), pari a 0,15 mV.

**Sistemi elettronici di sorveglianza (EAS)** – I dispositivi antitaccheggio come i sistemi antifurto presenti nei negozi possono interagire con i dispositivi ed erogare una terapia inappropriata. Invitare pertanto i pazienti a passare attraverso i sistemi EAS e a non rimanere nelle loro vicinanze più del necessario.

**Campi magnetici statici** – I pazienti dovrebbero evitare di avvicinarsi ad apparecchi o evitare situazioni che li espongono a campi magnetici statici superiori a 10 gauss o 1 mT. I campi magnetici statici possono interrompere il riconoscimento delle tachiaritmie. Tra gli esempi di sorgenti magnetiche statiche vi sono le casse acustiche, le bacchette per il bingo, i tubi dell'aspirapolvere, i tesserini magnetici di riconoscimento o i prodotti per magnetoterapia.

## 2.8 Possibili effetti collaterali

Di seguito sono riportati alcuni dei possibili effetti indesiderati associati all'utilizzo di elettrocateri transvenosi e sistemi di stimolazione:

- accelerazione delle tachiaritmie (causata dal dispositivo)
- emorragia
- dissezione cardiaca
- tamponamento cardiaco
- decesso
- erosione
- crescita eccessiva di tessuto fibrotico
- fibrillazione o altre aritmie
- formazione di ematomi o cisti
- lacerazione della parete cardiaca o di pareti venose
- infezioni
- abrasione e discontinuità dell'elettrocatero
- stimolazione muscolare, nervosa o entrambe
- irritabilità miocardica
- effusione pericardica
- embolia
- fenomeni di rigetto corporei, comprese reazioni dei tessuti locali
- perforazione cardiaca
- danni cronici ai nervi
- endocardite
- erosione attraverso la cute
- estrusione
- accumulo di fluido
- blocco cardiaco
- ematomi/sieromi
- formazione di cheloide
- migrazione/sposizionamento dell'elettrocatero
- danni al miocardio
- sensing del miopotenziale
- sfregamento pericardico

- pneumotorace
- fenomeni di rigetto (reazione del tessuto locale, formazione di tessuto fibrotico, migrazione del dispositivo)
- tromboembolia
- trombosi
- danni alla valvola (soprattutto in caso di cuori fragili)
- perforazione venosa o cardiaca
- rischio di decesso dovuto all'incapacità di erogare la terapia
- aumento della soglia
- tromboembolia ed embolia gassosa
- trombosi connesse all'elettrocattetero transvenoso
- occlusione venosa

Un altro possibile effetto indesiderato associato all'utilizzo di elettrocatteteri di stimolazione transvenosi per il ventricolo sinistro è la dissezione del seno coronarico.

Tra gli altri possibili effetti indesiderati associati all'utilizzo di sistemi ICD figurano:

- shock inappropriati
- mortalità potenziale dovuta all'incapacità di defibrillare
- derivazione della corrente o isolamento del miocardio durante la defibrillazione

I pazienti soggetti a shock frequenti nonostante il trattamento medico potrebbero sviluppare un'intolleranza psicologica al sistema ICD che potrebbe includere:

- dipendenza
- depressione
- timore per un esaurimento prematuro della batteria
- timore di subire eventuali shock in stato di coscienza
- timore che la capacità di erogare shock potrebbe interrompersi
- shock immaginari (shock fantasma)

## 3 Utilizzo del programmatore

### 3.1 Come stabilire un collegamento telemetrico tra il dispositivo ed il programmatore

Per stabilire un collegamento telemetrico tra il dispositivo ed il programmatore, è possibile utilizzare un modo di telemetria wireless o non wireless.

- Il programmatore Medtronic CareLink modello 2090 con collegamento telemetrico Conexus supporta le sessioni paziente effettuate utilizzando la telemetria wireless Conexus o la telemetria non wireless tramite testina di programmazione.
- Il programmatore Medtronic CareLink modello 2090 supporta le sessioni paziente effettuate con la telemetria non wireless utilizzando una testina di programmazione.

Per informazioni sulla configurazione del programmatore per una sessione paziente, consultare la guida di riferimento del programmatore.


#### 3.1.1 Utilizzo del collegamento telemetrico Conexus

Il programmatore Medtronic CareLink modello 2090 con collegamento telemetrico Conexus è stato appositamente studiato per facilitare e rendere più efficienti l'impianto e le visite di follow-up sia per il personale medico che per i pazienti. Il sistema utilizza la telemetria a radiofrequenza (RF) per la comunicazione wireless tra il dispositivo medico impiantato ed il programmatore in ospedale o in clinica. Il collegamento telemetrico Conexus utilizza la banda di frequenza MICS (Medical Implant Communications Service), l'unica riservata ai dispositivi medici impiantabili. L'utilizzo della banda di frequenza MICS consente di prevenire eventuali interferenze con dispositivi elettronici di uso domestico, come i forni a microonde, i telefoni cellulari ed i baby monitor.

Grazie alla telemetria Conexus, è possibile fare a meno di posizionare la testina di programmazione sopra il dispositivo impiantato durante la sessione di programmazione o di follow-up. Al momento dell'impianto, il sistema consente di programmare il dispositivo senza la necessità di tenere alcuna testina di programmazione in campo sterile. Vedere la Figura 2.

**Figura 2.** Utilizzo del collegamento telemetrico Conexus durante l'impianto

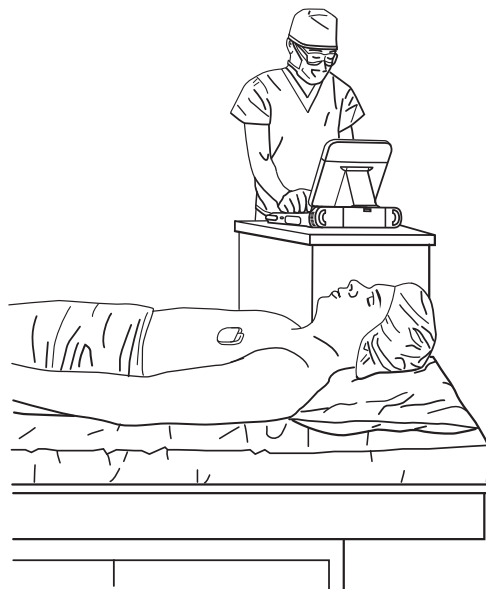---




---

Durante le sessioni di programmazione e di follow-up, il sistema consente la comunicazione wireless tra il dispositivo e il programmatore. Vedere la Figura 3.



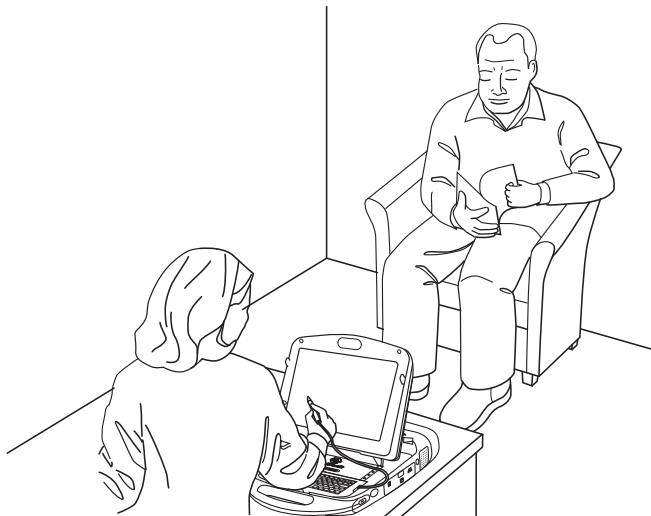**Figura 3.** Utilizzo del collegamento telemetrico Conexus durante le visite di follow-up



### **3.1.1.1 Alcune considerazioni sull'utilizzo del collegamento telemetrico Conexus**

Quando si inizia una sessione paziente tramite telemetria wireless o non wireless, prima di cambiare modo di telemetria è necessario terminare la sessione corrente. Il programmatore non è in grado di funzionare simultaneamente in modo telemetria wireless ed in modo telemetria non wireless.

### **3.1.1.2 Come attivare la telemetria wireless**

Per poter utilizzare la telemetria Conexus durante una sessione paziente, è necessario attivare la telemetria wireless sia nel programmatore che nel dispositivo.

- Per attivare la telemetria wireless nel programmatore, accendere quest'ultimo. Il programmatore si avvia e viene visualizzata la finestra Trova paziente. Selezionare la casella di controllo "Comunicaz. radio consentita" nella finestra Trova paziente. Il programmatore cerca attivamente i dispositivi attivati compatibili ad una distanza massima di 2 m tra i dispositivi ed il programmatore.
- Per attivare la telemetria wireless nel dispositivo, posizionare per alcuni istanti la testina di programmazione o l'Attivatore Conexus sopra il dispositivo finché quest'ultimo non viene rilevato.

All'attivazione, il programmatore cerca eventuali dispositivi attivati entro il raggio di azione del collegamento telemetrico. Se un dispositivo rileva un segnale proveniente dal programmatore, invia un segnale al programmatore restando attivo per 15 min. Il programmatore stabilisce quindi la comunicazione con il dispositivo. La finestra Trova paziente viene visualizzata per almeno 5 min. Se la penna ottica del programmatore non viene utilizzata entro 5 min, la finestra Trova paziente si chiude e viene visualizzata la schermata Seleziona modello.

### 3.1.1.3 Come utilizzare la finestra Trova paziente

Nell'elenco Nome paz. della schermata Trova paziente, il programmatore visualizza i nominativi di tutti i pazienti con dispositivi impiantati ad attivazione wireless che si trovano entro il raggio di azione del collegamento telemetrico. I pazienti vengono elencati in ordine di rilevamento da parte dal programmatore. L'elenco viene aggiornato periodicamente in modo da includere nominativi di pazienti con dispositivi attivati di recente eliminando i pazienti con dispositivi non più attivi. Tuttavia, l'ordine in cui gli altri pazienti vengono visualizzati nell'elenco Nome paz. non cambia. Nella finestra Trova paziente sono elencati i nominativi dei pazienti per cui la sessione non è ancora stata iniziata o è terminata.

### 3.1.1.4 Come verificare la presenza di un collegamento telemetrico affidabile tra il dispositivo ed il programmatore

Se l'interrogazione o la programmazione del dispositivo va a buon fine, il collegamento telemetrico tra il dispositivo ed il programmatore è affidabile. La prima volta che si stabilisce un collegamento telemetrico wireless durante una sessione, l'indicatore di stato della telemetria visualizzato nell'angolo in alto a sinistra della barra delle attività del programmatore passa dall'icona della testina di programmazione all'icona del collegamento telemetrico wireless illustrata nella Figura 4.

**Figura 4.** L'icona del collegamento telemetrico wireless sulla barra delle applicazioni



1 Icona del collegamento telemetrico wireless

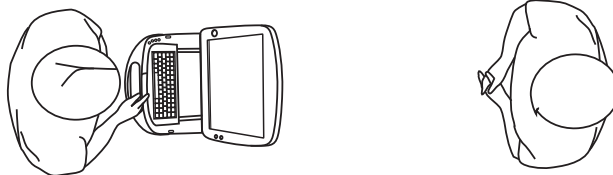
La barra indicatrice situata sull'icona del collegamento telemetrico wireless mostra l'intensità del segnale di comunicazione wireless. Verificare che almeno tre delle spie verdi siano illuminate sulla barra indicatrice. Ciò assicura la presenza di un collegamento telemetrico affidabile tra il dispositivo impiantato ed il programmatore.

### 3.1.1.5 Come mantenere un collegamento telemetrico affidabile

In una tipica sala di esame o in una sala operatoria, è lecito attendersi un collegamento telemetrico wireless affidabile tra il dispositivo impiantato ed il programmatore. Il sistema è stato appositamente studiato per garantire una comunicazione efficace ad una distanza massima di 2 m tra il dispositivo ed il programmatore anche nel caso in cui questi si trovassero nelle vicinanze di un'altra apparecchiatura elettrica. Il sistema non dovrebbe interferire con altre apparecchiature elettroniche circostanti.

Qualora si dovessero riscontrare dei problemi nel mantenere un collegamento telemetrico costante ed affidabile tra il dispositivo impiantato di un paziente e il programmatore, per aumentare il numero di spie illuminate dell'indicatore di stato della telemetria si consiglia di eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

- Modificare l'angolazione dello schermo del programmatore. L'antenna per telemetria fa parte della struttura dello schermo del programmatore. Pertanto, spostando leggermente lo schermo si potrebbe migliorare il collegamento telemetrico.
- Cambiare la posizione del programmatore in modo da eliminare o ridurre il numero di ostacoli presenti tra lo schermo del programmatore ed il paziente. La posizione ottimale del programmatore è tra il paziente e lo specialista, in modo che quest'ultimo si trovi lo schermo di fronte ed il paziente si trovi oltre lo schermo, di fronte allo specialista ed al programmatore.



- Ridurre la distanza tra il programmatore ed il paziente.
- Nel caso in cui il dispositivo sia impiantato nel paziente anziché imballato, l'intensità del segnale potrebbe risultare superiore.
- Rimuovere qualsiasi sorgente di interferenza elettromagnetica (EMI) che può incidere negativamente sul segnale di telemetria.

Nel caso in cui la sessione dovesse essere interrotta accidentalmente o subire interferenze di natura elettrica, il programmatore tenterà di ristabilire la comunicazione con il dispositivo nei 5 min successivi. Se la comunicazione tra il dispositivo e il programmatore non dovesse riprendere in questo lasso di tempo, sarà necessario utilizzare l'Attivatore Conexus o la testina di programmazione per riattivare la telemetria wireless nel dispositivo e riprendere o avviare una nuova sessione.

**Nota:** se si desidera utilizzare la telemetria Holter per trasmettere dati EGM e Marker Channel durante una sessione di telemetria Conexus, è necessario attivare prima lo standby.

### 3.1.1.6 Protezioni durante i momenti di inattività della sessione

Se lo specialista o il paziente si allontanano dal programmatore per un determinato periodo di tempo, il sistema ha due livelli di protezione contro la programmazione involontaria in caso di sessione non attiva.

- Durante una sessione di follow-up, dopo 2 min di inattività del programmatore (trascorsi senza premere pulsanti sullo schermo), il sistema visualizza il nominativo o il numero identificativo del paziente e i dati del dispositivo, sollecitando una verifica dell'identità del paziente da sottoporre alla visita di controllo prima di poter procedere con un comando di programmazione. In questo lasso di tempo, pur potendo ancora interagire con il programmatore, sarà tuttavia necessario confermare qualsiasi richiesta di programmazione e di interrogazione.
- Nel corso di una sessione di impianto o di follow-up, dopo due ore di inattività del programmatore (trascorse senza premere alcun pulsante sullo schermo), il dispositivo passa in standby.

**Standby** – In tutte le situazioni per le quali è stato programmato un periodo di inattività durante una sessione paziente, il sistema attiva una modalità di standby. Quando si trova in standby, il dispositivo funziona in maniera simile alla telemetria non wireless quando si allontana la testina di programmazione dal dispositivo. Le forme d'onda in tempo reale vengono disattivate, mentre l'indicatore di stato della telemetria del programmatore mostra l'assenza di qualsiasi collegamento telemetrico. Tra il dispositivo e il programmatore verrà mantenuto un basso livello di comunicazione.

In standby le funzioni del programmatore sono limitate. Quando il sistema è in standby, è possibile avviare una sessione con il dispositivo utilizzando il programmatore corrente o un altro programmatore. Se si intende utilizzare un altro programmatore per avviare una sessione con il dispositivo, terminare prima la sessione con il programmatore corrente. Il dispositivo può infatti condurre una sessione con un solo programmatore per volta. Prima di tentare di programmare, interrogare, testare o effettuare operazioni in casi di emergenza, è necessario verificare che si stia iniziando la sessione con il paziente desiderato.

Se lo si desidera, è possibile attivare e disattivare manualmente lo standby.

- Per attivare lo standby, selezionare l'icona della telemetria wireless nell'angolo in alto a sinistra dello schermo del programmatore.

- Per disattivare lo standby, riselectzionare l'icona della telemetria wireless nell'angolo in alto a sinistra dello schermo del programmatore o posizionare l'Attivatore Conexus o la testina di programmazione sopra il dispositivo. Dopo 5 min in standby, la telemetria wireless viene disattivata nel dispositivo. Per riattivarla, sarà necessario utilizzare l'Attivatore Conexus o la testina di programmazione.

**Nota:** lo standby viene inoltre disattivato quando si tenta di programmare dei parametri, si interroga il dispositivo o si eseguono operazioni di test o di emergenza. Sullo schermo del programmatore compare la finestra "Avvertenza - Controlla il paziente". Per disattivare lo standby e riprendere la sessione paziente, verificare che si stia svolgendo la sessione con il paziente corretto, selezionare la casella di controllo "Comunicaz. radio consentita", quindi premere [Continua].

### 3.1.1.7 Come garantire la sicurezza e la privacy del paziente

Per garantire la sicurezza e la privacy del paziente durante una sessione di telemetria wireless, tutti gli altri programmatori non possono comunicare né avviare alcuna sessione con il dispositivo impiantato del paziente. Analogamente, i dispositivi impiantati in altri pazienti non possono in alcun modo interferire con la comunicazione o la programmazione in corso durante la sessione paziente.

Quando si utilizza la telemetria wireless, il nominativo del paziente viene visualizzato nella barra dei comandi sullo schermo del programmatore. Per ulteriori informazioni sulla barra dei comandi, cfr. la Sezione 3.3, "Caratteristiche dello schermo", pagina 52. In caso di mancata immissione del nominativo del paziente, verrà visualizzato il suo numero identificativo. In caso di mancata immissione del nominativo e del numero identificativo del paziente, nella barra dei comandi compare il messaggio "(Nome paz. non inserito)". Immettere il nominativo ed il numero identificativo del paziente il prima possibile per agevolarne l'identificazione durante l'utilizzo della telemetria wireless.

### 3.1.2 Utilizzo della telemetria non wireless

È possibile utilizzare il programmatore Medtronic CareLink modello 2090 con collegamento telemetrico Conexus in modo non wireless oppure il programmatore Medtronic CareLink modello 2090. Quando è attivo questo modo, è necessario utilizzare anche una testina di programmazione Medtronic modello 2067 o 2067L. Dopo aver avviato una sessione paziente utilizzando la telemetria non wireless, è necessario terminare la sessione prima di poter passare al modo telemetria wireless.

### 3.1.2.1 Come stabilire un collegamento telemetrico non wireless

Se si utilizza il programmatore Medtronic CareLink modello 2090 con collegamento telemetrico Conexus scegliendo il modo non wireless, assicurarsi che nella finestra Trova paziente non sia stata selezionata la casella di controllo “Comunicaz. radio consentita”. Così facendo, si impedisce al programmatore di avviare una sessione di telemetria wireless. Se si utilizza un programmatore Medtronic CareLink modello 2090 sprovvisto di collegamento telemetrico Conexus, nella finestra Trova paziente non è presente nessuna casella di controllo. Posizionare la testina di programmazione sopra il dispositivo per stabilire un collegamento telemetrico non wireless tra il programmatore ed il dispositivo. Se l'interrogazione o la programmazione del dispositivo va a buon fine, il collegamento telemetrico tra il dispositivo ed il programmatore è affidabile. La prima volta che si stabilisce un collegamento telemetrico non wireless durante una sessione, l'indicatore di stato del collegamento visualizzato nell'angolo in alto a sinistra della barra delle attività del programmatore visualizza l'icona della testina di programmazione, come illustrato nella Figura 5.

**Figura 5.** L'icona della testina di programmazione sulla barra delle applicazioni



1 Icona della testina di programmazione

**Nota:** la testina di programmazione contiene un magnete che può sospendere il riconoscimento delle tachiaritmie. Una volta stabilito un collegamento telemetrico tra il dispositivo ed il programmatore, il riconoscimento non viene sospeso.

Collocando la testina di programmazione sopra il dispositivo per stabilire un collegamento telemetrico, la spia luminosa di colore arancione situata sulla testina si spegne, mentre una o più spie luminose verdi sulla testina di programmazione si illuminano. Per determinarne la posizione ottimale, muovere la testina intorno al dispositivo impiantato finché non si illumina il maggior numero possibile di spie luminose verdi. Posizionare la testina di programmazione in modo tale che almeno due spie verdi si illuminino per essere certi di aver stabilito un collegamento telemetrico corretto. Se la testina di programmazione scivola via dal paziente, la sessione non viene interrotta. Basterà infatti ricollocarla sopra il dispositivo per riprendere la programmazione o l'interrogazione del dispositivo.

**Nota:** per ulteriori informazioni sull'utilizzo generale della testina di programmazione, vedere la guida di riferimento del programmatore.

## 3.2 Conduzione di una sessione paziente

Il programmatore interroga il dispositivo del paziente all'inizio di una sessione paziente. Poiché il programmatore raccoglie e memorizza i dati sessione dopo sessione, è necessario avviare una nuova sessione per ogni singolo paziente. Prima di iniziare una sessione con un altro paziente, è necessario terminare la sessione precedente.

### 3.2.1 Avvio di una sessione paziente

**Attenzione:** l'eventuale malfunzionamento di qualsiasi componente del programmatore (ad esempio, una penna ottica difettosa) potrebbe determinare una programmazione inappropriata o l'impossibilità di terminare un'operazione o un'attività in corso. In caso di malfunzionamento di qualsiasi componente del programmatore, spegnerlo immediatamente per disattivare la telemetria e terminare qualsiasi attività controllata in corso del programmatore.

**Attenzione:** durante la sessione di telemetria wireless, verificare di aver selezionato il paziente appropriato prima di procedere con la sessione e mantenere un contatto visivo con il paziente per l'intera durata della sessione. Se si seleziona il paziente errato e si continua con la sessione, si corre il rischio di programmare inavvertitamente il dispositivo di un altro paziente.

**Attenzione:** non lasciare il programmatore incustodito mentre è in corso una sessione di telemetria wireless. Tenere sotto controllo il programmatore durante la sessione per prevenire ogni eventuale comunicazione involontaria con il dispositivo del paziente.

**Nota:** durante l'interrogazione iniziale sono utilizzabili soltanto le funzioni di emergenza del programmatore.

#### 3.2.1.1 Come avviare una sessione paziente tramite telemetria wireless

1. Accendere il programmatore.
2. Selezionare [Trova paziente...].
3. Selezionare la casella di controllo "Comunicaz. radio consentita" nella finestra Trova paziente.
4. Posizionare per alcuni istanti l'Attivatore Conexus o la testina di programmazione sopra il dispositivo per attivare la telemetria wireless nel dispositivo.

**Note:**

- Quando si utilizza l'Attivatore Conexus per attivare la telemetria nel dispositivo, il programmatore avvia automaticamente la sessione paziente senza sospendere il riconoscimento delle tachiaritmie. Avvicinando un magnete al dispositivo, il riconoscimento delle tachiaritmie viene tuttavia sospeso.
  - Quando si utilizza la testina di programmazione per attivare la telemetria nel dispositivo, il programmatore avvia automaticamente la sessione paziente sospendendo la funzione di riconoscimento delle tachiaritmie. La funzione di riconoscimento rimarrà sospesa finché la testina di programmazione resta posizionata sopra il dispositivo. In tal caso compare un avviso che segnala l'avvenuta sospensione della funzione di riconoscimento delle tachiaritmie.
5. Selezionare il paziente appropriato dall'elenco Nome paz. nella finestra Trova paziente.
- Nota:** così facendo, il programmatore visualizzerà i nominativi di tutti i pazienti con dispositivi impiantabili ad attivazione wireless presenti nel raggio d'azione del collegamento telemetrico.
6. Selezionare [Avvia].

**3.2.1.2 Come avviare una sessione paziente tramite telemetria non wireless**

1. Accendere il programmatore.
2. Selezionare [Trova paziente...].
3. Se si utilizza un programmatore Medtronic CareLink modello 2090 con collegamento telemetrico Conexus, assicurarsi che nella finestra Trova paziente non sia stata selezionata la casella di controllo "Comunicaz. radio consentita". Avviando una sessione con la testina di programmazione posizionata sopra il dispositivo del paziente e la casella di controllo "Comunicaz. radio consentita" selezionata, il sistema avvia una sessione di telemetria wireless ed interroga automaticamente il dispositivo. Se si utilizza un programmatore Medtronic CareLink modello 2090 sprovvisto di collegamento telemetrico Conexus, nella finestra Trova paziente non è presente la casella di controllo "Comunicaz. radio consentita".
4. Posizionando la testina di programmazione sopra il dispositivo, la sessione non wireless inizia automaticamente.



### 3.2.2 Il dispositivo e gli effetti della telemetria durante una sessione paziente

#### **Riconoscimento delle tachiaritmie durante una sessione di telemetria wireless –**

Posizionando una testina di programmazione sopra il dispositivo, il magnete della testina di programmazione sospende sempre il riconoscimento delle tachiaritmie.

#### **Riconoscimento delle tachiaritmie durante una sessione di telemetria non wireless –**

Se si posiziona una testina di programmazione sopra il dispositivo e si stabilisce un collegamento telemetrico, il magnete della testina di programmazione non sospende il riconoscimento delle tachiaritmie.

**Episodi in corso durante una sessione di telemetria wireless –** Se si tenta di iniziare una sessione paziente quando è in corso un episodio di aritmia rilevato, il dispositivo tratta l'aritmia normalmente. Se il collegamento telemetrico non è stato stabilito, il magnete all'interno della testina di programmazione determina la sospensione del riconoscimento da parte del dispositivo quando si posiziona la testina sopra il dispositivo.

**Episodi in corso durante una sessione di telemetria non wireless –** Dopo aver stabilito il collegamento telemetrico ed aver posizionato la testina di programmazione sopra il dispositivo quando è in corso un episodio aritmico rilevato, il dispositivo tratta l'aritmia normalmente. Se non è stato stabilito alcun collegamento telemetrico e si posiziona la testina di programmazione sopra il dispositivo, il magnete all'interno della testina di programmazione determina la sospensione del riconoscimento da parte del dispositivo.

**Carica dei condensatori durante una sessione di telemetria wireless –** Le interferenze causate dalla carica dei condensatori possono incidere negativamente sul collegamento telemetrico tra il dispositivo ed il programmatore, determinando eventualmente lo spegnimento temporaneo delle spie luminose di telemetria presenti nella barra delle applicazioni del programmatore, una perdita temporanea delle trasmissioni Marker Channel e disabilitando temporaneamente l'invio di comandi di programmazione. Assicurarsi che nella barra delle applicazioni del programmatore si illumini il maggior numero di spie luminose di intensità della telemetria per cercare di migliorare l'affidabilità del collegamento telemetrico prima di qualsiasi carica dei condensatori manuale o automatica.

**Carica dei condensatori durante una sessione di telemetria non wireless –** Le interferenze causate dalla carica dei condensatori possono incidere negativamente sul collegamento telemetrico tra il dispositivo ed il programmatore. Le spie luminose della testina di programmazione possono spegnersi durante i periodi di carica. È normale che le spie della testina di programmazione si spengano.

**Nota:** il pulsante "P" della testina di programmazione viene disattivato durante tutti gli studi EF e i test manuali di sistema. Durante le induzioni della tachiaritmia, anche il pulsante "I" della testina di programmazione è disabilitato.

**Trasmissioni Marker Channel durante una sessione di telemetria wireless** – Una volta stabilito il collegamento telemetrico, il dispositivo trasmette in continuazione dati Marker Channel e dati aggiuntivi sui marker. Quando il collegamento telemetrico viene interrotto, il dispositivo interrompe queste trasmissioni. Se è stata attivata la telemetria Holter, il dispositivo trasmette sempre tramite un collegamento telemetrico, tranne durante le sessioni di telemetria Conexus. Se si desidera utilizzare la telemetria Holter durante una sessione di telemetria Conexus, è necessario attivare prima lo standby.

**Trasmissioni Marker Channel durante una sessione di telemetria non wireless** – Dopo aver stabilito il collegamento telemetrico ed aver posizionato la testina di programmazione sopra il dispositivo, il dispositivo trasmette ininterrottamente dati Marker Channel e dati aggiuntivi sui marker. Il dispositivo interrompe la trasmissione quando la testina di trasmissione viene allontanata, a meno che la funzione Telemetria Holter non sia attivata. Se la telemetria Holter è attivata, il dispositivo trasmette Marker Channel e dati aggiuntivi sui marker indipendentemente dalla posizione della testina di programmazione.

**Durata del dispositivo e telemetria wireless** – In una sessione paziente standard ed in caso di funzionamento standard del dispositivo, la telemetria wireless non ha alcun effetto significativo sulla durata del dispositivo.

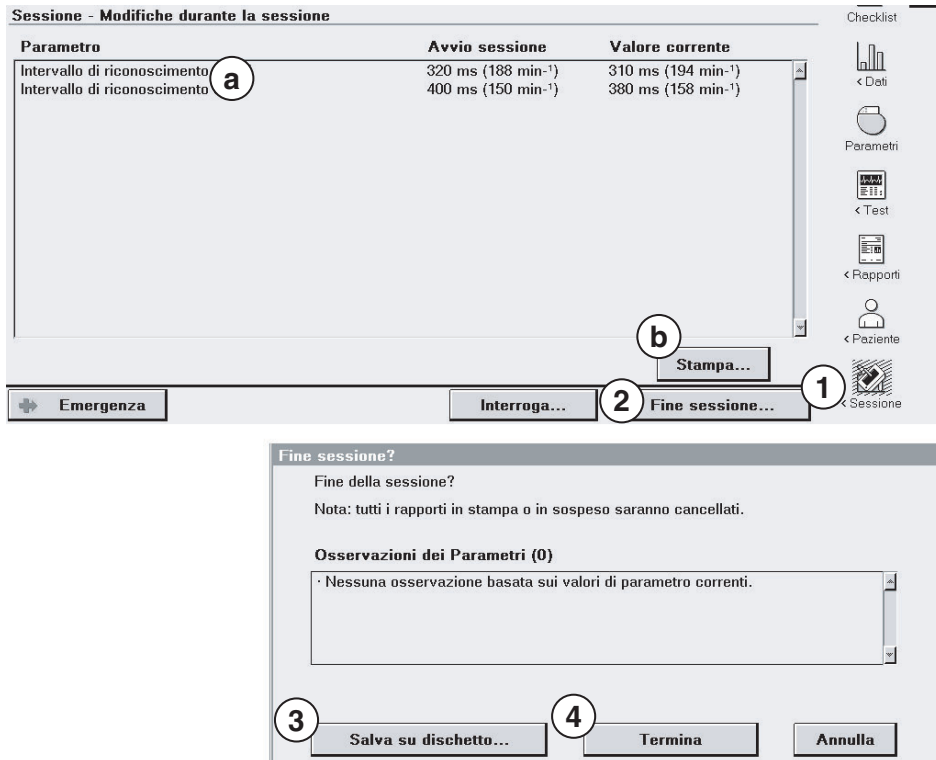
### 3.2.3 Come interrogare il dispositivo durante la sessione

All'inizio di una sessione paziente, il programmatore interroga il dispositivo. È possibile interrogare manualmente il dispositivo in qualsiasi momento della sessione paziente nel modo seguente:

1. Selezionare [Interroga...] dalla barra dei comandi. Durante una sessione non wireless, è anche possibile interrogare il dispositivo premendo il pulsante "I" sulla testina di programmazione.
2. Per raggruppare le informazioni raccolte dall'ultima sessione paziente, selezionare l'opzione Da ult. sess. dalla finestra di interrogazione. Se si desidera raggruppare tutti i dati dal dispositivo, selezionare l'opzione Tutti.
3. Selezionare [Avvia].

### 3.2.4 Conclusione di una sessione paziente

#### 3.2.4.1 Come terminare una sessione paziente




1. Per esaminare o stampare un elenco delle modifiche apportate durante la sessione corrente, selezionare Sessione > > Modifiche durante la sessione.
  - a. Rivedere le modifiche apportate alla programmazione durante la sessione paziente.
  - b. Per stampare un rapporto delle modifiche, selezionare [Stampa...].
2. Selezionare [Fine sessione...].
3. Per salvare i dati della sessione su un dischetto, selezionare [Salva su dischetto...].
4. Per concludere la sessione e ritornare alla schermata Seleziona modello, selezionare [Termina].

### 3.3 Caratteristiche dello schermo

Lo schermo del programmatore è un'interfaccia su cui vengono visualizzati testo e grafica e funge inoltre da pannello di controllo dove vengono visualizzati pulsanti e opzioni di menu selezionabili con la penna ottica.

Gli elementi principali visualizzati su una normale schermata durante una sessione paziente sono illustrati nella Figura 6.

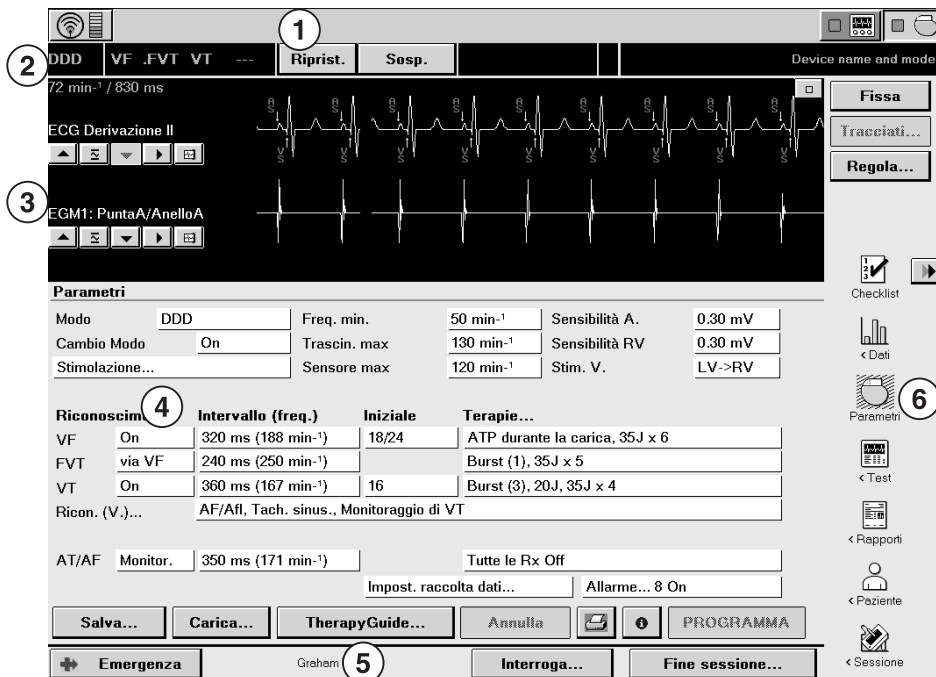**Figura 6.** Elementi principali di una schermata




- |                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 Barra delle applicazioni                                   | 4 Area delle attività |
| 2 Barra di stato                                             | 5 Barra dei comandi   |
| 3 Finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale | 6 Pannello strumenti  |

#### 3.3.1 La barra delle applicazioni

Nella parte alta dello schermo vi è una barra delle applicazioni, che consente di visualizzare lo stato di funzioni specifiche del programmatore come l'Analizzatore.

La barra delle applicazioni include anche la rappresentazione grafica di un indicatore di intensità della telemetria wireless. Durante una sessione di telemetria wireless, selezionando l'icona della telemetria wireless il collegamento telemetrico viene interrotto. Riselezionandola, si ripristina il collegamento telemetrico. Durante una sessione di telemetria non wireless, la barra delle applicazioni comprende una rappresentazione grafica delle spie luminose di intensità della telemetria situate sulla testina di programmazione.

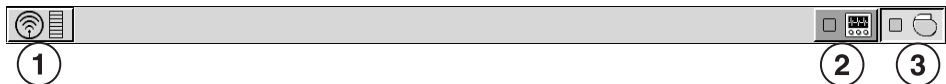**Figura 7.** La barra delle applicazioni




- 1 Icona della telemetria ed indicatore di intensità della telemetria (visualizzazione della telemetria wireless)
- 2 Icona dell'Analizzatore
- 3 Icona del dispositivo

### 3.3.2 La barra di stato

Una volta interrogato il dispositivo, utilizzando la barra di stato situata nella parte alta della schermata (subito al di sotto della barra delle applicazioni) si possono eseguire alcune funzioni generali e visualizzare lo stato corrente del dispositivo.

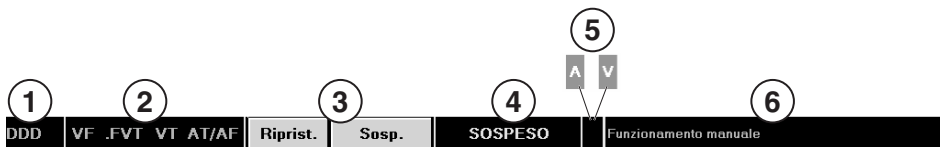**Figura 8.** La barra di stato



- 1 Modo di stimolazione attivo
- 2 Configurazione del riconoscimento e della terapia programmati
- 3 Pulsanti per ripristinare o sospendere il riconoscimento
- 4 Stato di riconoscimento automatico
- 5 Indicatore di un episodio di tachiaritmia in corso
- 6 Episodio o terapia in corso, stato di funzionamento manuale oppure nome del dispositivo e numero di modello

### 3.3.3 La finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale

Nella finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale vengono visualizzati ECG, Leadless ECG, Marker Channel e tracciati di forma d'onda EGM trasmessi tramite telemetria. Oltre ai tracciati delle forme d'onda, nella finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale viene visualizzato quanto segue:

- Una volta stabilito un collegamento telemetrico con il dispositivo, vengono visualizzati la frequenza cardiaca e l'intervallo di frequenza.
- Le annotazioni sopra il tracciato della forma d'onda mostrano il punto in corrispondenza del quale sono stati programmati i parametri.

Per impostazione predefinita, la finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale viene visualizzata solo in parte, come illustrato nella Figura 9. Questa finestra può essere ingrandita a schermo intero selezionando il pulsante quadrato nell'angolo superiore destro della finestra stessa oppure selezionando [Regola...]. Per ulteriori informazioni sul monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale, vedere la Sezione 3.11, "Come utilizzare la funzione di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale", pagina 82.

**Figura 9.** Finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale



- 1 Ubicazione del pulsante quadrato
- 2 Ubicazione del pulsante [Regola...]

### 3.3.4 L'area delle attività

È la parte della schermo compresa tra la finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale vicino all'inizio dello schermo e la barra dei comandi nella parte bassa dello schermo, a seconda dell'attività o della funzione selezionata.

Un esempio di area delle attività è la schermata Parametri, in cui vengono visualizzati e programmati i parametri del dispositivo, come illustrato nella Sezione 3.7, "Visualizzazione e programmazione dei parametri del dispositivo", pagina 66.

L'aspetto delle aree delle attività varia se si eseguono altre funzioni come la diagnostica ed i test di sistema.

**Figura 10.** L'area delle attività sullo schermo

Parametri					
Modo	DDD	Freq. min.	50 min <sup>-1</sup>	Sensibilità A.	0.30 mV
Cambio Modo	On	Trascin. max	130 min <sup>-1</sup>	Sensibilità RV	0.30 mV
Stimolazione...		Sensore max	120 min <sup>-1</sup>	Stim. V.	LV->RV

Riconoscimento	Intervallo (freq.)	Iniziale	Terapie...
VF	On	320 ms (188 min <sup>-1</sup> )	18/24
FVT	via VF	240 ms (250 min <sup>-1</sup> )	16
VT	On	360 ms (167 min <sup>-1</sup> )	
Ricon. (V.)... AF/Afl, Tach. sinus., Monitoraggio di VT			

AT/AF	On	350 ms (171 min <sup>-1</sup> )	2 Zone...	Burst+, Ramp, 50 Hz, 35J x 4, Attivato dal paz
			Impost. raccolta dati...	Allarme... 12 On

Salva...
Carica...
TherapyGuide...
Annulla


PROGRAMMA

### 3.3.5 Il pannello Strumenti







I pulsanti e le icone lungo il lato destro dello schermo formano il cosiddetto “pannello Strumenti”. Questi strumenti consentono di visualizzare la schermata di un'attività o di una funzione. Dopo l'inizio di una sessione paziente, il pannello degli strumenti viene visualizzato in tutte le schermate (ad eccezione di Emergenza e Modifica il ritmo in tempo reale...) per passare facilmente e rapidamente all'attività o alla funzione desiderata.

Ogni icona funziona come un pulsante. Per selezionare un'icona, toccarla con la penna ottica. Nella Tabella 2 vengono illustrate tutte le opzioni del pannello Strumenti.

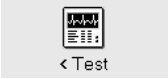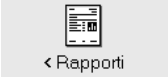**Tabella 2.** Opzioni del pannello Strumenti

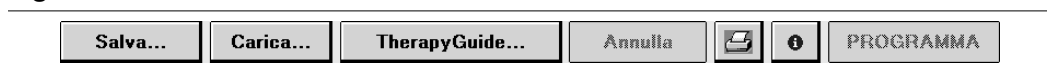
	Il pulsante [Fissa] consente di catturare un segmento della schermata di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale.
	Il pulsante [Tracciati...] consente di accedere ai tracciati di forma d'onda salvati dall'inizio della sessione.
	Premendo il pulsante [Regola...], si apre una finestra di opzioni per la regolazione della schermata di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale.
	L'icona Checklist consente di aprire la schermata Lista di controllo per la navigazione semplificata attraverso una serie di attività di follow-up. Il pulsante Checklist [ >> ] consente di passare all'attività successiva nella Lista di controllo.

**Tabella 2.** Opzioni del pannello Strumenti (continua)

	L'icona Dati consente di visualizzare le opzioni per la visualizzazione delle informazioni sul dispositivo e dei dati diagnostici.
	L'icona Parametri consente di aprire la schermata Parametri per visualizzare e programmare i parametri del dispositivo.
	L'icona Test consente di visualizzare le opzioni per l'esecuzione di test e studi EF.
	L'icona Rapporti consente di visualizzare le opzioni per la stampa dei rapporti.
	L'icona Paziente consente di visualizzare le opzioni di accesso alla schermata TherapyGuide o alla schermata Dati sul paziente.
	L'icona Sessione consente di visualizzare le opzioni di modifica delle preferenze, di visualizzazione delle variazioni apportate ai parametri durante la sessione, di salvataggio dei dati e di conclusione della sessione.

### 3.3.6 Pulsanti

I pulsanti come quelli visualizzati nella Figura 11 rispondono quando li si “seleziona” toccandoli con la punta della penna ottica.

**Figura 11.** Pulsanti sullo schermo

I pulsanti con un’etichetta testuale meno distinta non sono attivi e non rispondono se vengono selezionati.

La selezione di un pulsante con la penna ottica dà luogo a una delle seguenti risposte:

- alcuni pulsanti, ad esempio [PROGRAMMA], eseguono direttamente un comando;
- altri pulsanti, ad esempio [Interroga...] e [Fine sessione...], aprono una finestra che sollecita un’altra azione. Le etichette di questi pulsanti terminano con dei puntini di sospensione.

Determinate procedure possono richiedere di “premere e tenere premuto” un pulsante. In questi casi, toccare il pulsante con la punta della penna ottica, senza staccarla dallo schermo. Il pulsante continuerà a rispondere alla penna ottica finché non la si allontana dallo schermo.



### 3.3.7 La barra dei comandi

La barra situata nella parte bassa dello schermo contiene sempre i pulsanti per la programmazione dei parametri di emergenza, per l'interrogazione del dispositivo e per la conclusione della sessione paziente.

Se il programmatore utilizza la telemetria wireless, il nominativo del paziente può essere visualizzato nella barra dei comandi dello schermo del programmatore. A seconda dei dati sui pazienti programmati, viene visualizzato uno dei seguenti campi di testo:

- nominativo del paziente
- ID paziente, nel caso in cui il suo nominativo non sia ancora stato immesso
- il messaggio "(Nome paziente non immesso)", se non sono stati immessi né il nominativo né l'ID

**Nota:** i pulsanti [Interroga...] e [Fine sessione...] non vengono visualizzati nella schermata Emergenza.

**Figura 12.** La barra dei comandi



## 3.4 Erogazione di una terapia per tachiaritmia di emergenza

Per trattare rapidamente gli episodi di tachiaritmia ventricolare durante una sessione paziente, è possibile utilizzare le terapie di defibrillazione, cardioversione e stimolazione Burst costante di emergenza. La terapia di defibrillazione di emergenza eroga uno shock bifasico ad alta tensione con il livello di energia selezionato. Anche la terapia di cardioversione di emergenza eroga uno shock bifasico ad alta tensione, ma deve essere sincronizzata con un evento ventricolare. La terapia Burst costante di emergenza eroga impulsi di stimolazione alla massima uscita nel ventricolo all'intervallo selezionato.

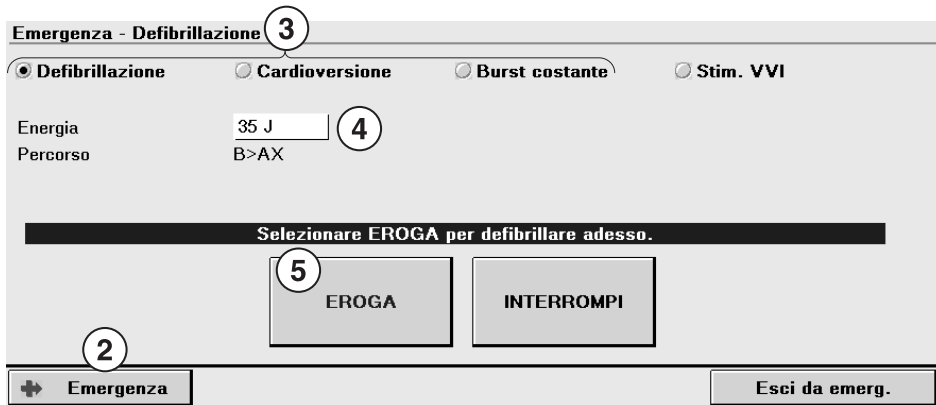
### 3.4.1 Alcune considerazioni sulle terapie per tachiaritmia di emergenza

**Riconoscimento delle tachiaritmie durante le terapie per tachiaritmia di emergenza** – Durante l'erogazione delle terapie di defibrillazione, cardioversione o stimolazione Burst costante di emergenza, il dispositivo sospende le funzioni di riconoscimento delle tachiaritmie. Selezionare [Ripristina] per riattivare il riconoscimento delle tachiaritmie.

**Valori temporanei di parametro** – Le terapie per tachiaritmia di emergenza utilizzano valori temporanei di parametro che non modificano i parametri programmati del dispositivo. Una volta erogata la terapia per tachiaritmia, il dispositivo ritorna ai valori di parametro programmati.

**Interruzione di una terapia per tachiaritmia di emergenza.** – Selezionando [INTERROMPI], si termina immediatamente una terapia di defibrillazione o di cardioversione di emergenza. Per interrompere una terapia Burst costante di emergenza, basta allontanare la penna ottica dal pulsante [BURST Premere e tenere premuto].

### 3.4.2 Come erogare una terapia per tachiaritmia di emergenza



1. Stabilire il collegamento telemetrico con il dispositivo.
2. Selezionare [Emergenza].
3. Selezionare il tipo di terapia di emergenza da erogare (Defibrillazione, Cardioversione o Burst costante).
4. Accettare i parametri della terapia visualizzati sullo schermo o selezionare nuovi valori.
5. Per la terapia di defibrillazione e cardioversione, selezionare [EROGA]. Per la terapia Burst costante, selezionare [BURST Premere e tenere premuto] e tenere la penna ottica sul pulsante per l'intera durata desiderata di erogazione della terapia.

## 3.5 Attivazione della stimolazione VVI di emergenza

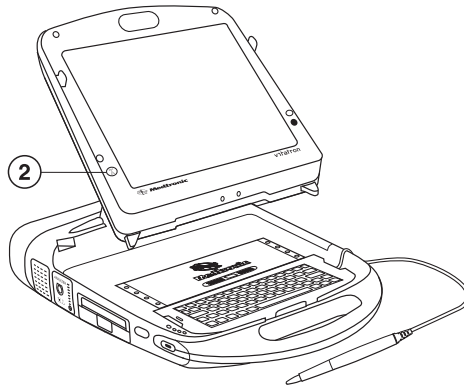
Per erogare rapidamente una stimolazione ventricolare ad alta frequenza a 70 min<sup>-1</sup> e ripristinare così il supporto ventricolare in una situazione di emergenza, è possibile ricorrere alla stimolazione VVI di emergenza.

### 3.5.1 Alcune considerazioni sulla stimolazione VVI di emergenza

**Valori di parametro** – La stimolazione VVI di emergenza riprogramma i parametri di stimolazione portandoli alle impostazioni di emergenza. Per l'elenco delle impostazioni dei parametri della stimolazione VVI di emergenza, cfr. la Sezione B.1, "Impostazioni di emergenza", pagina 455. Per terminare la stimolazione VVI di emergenza, è necessario riprogrammare i parametri di stimolazione antibradicardica dalla schermata Parametri.


### 3.5.2 Come attivare la stimolazione VVI di emergenza

1. Stabilire il collegamento telemetrico con il dispositivo.
2. Premere il pulsante meccanico rosso del programmatore per la stimolazione VVI di emergenza. Così facendo, si attiva la stimolazione VVI di emergenza e sul programmatore compare la schermata Emergenza.



**Nota:** per attivare la stimolazione VVI di emergenza, si può anche selezionare il pulsante [Emergenza] sullo schermo. Per fare ciò, procedere nel modo descritto di seguito.

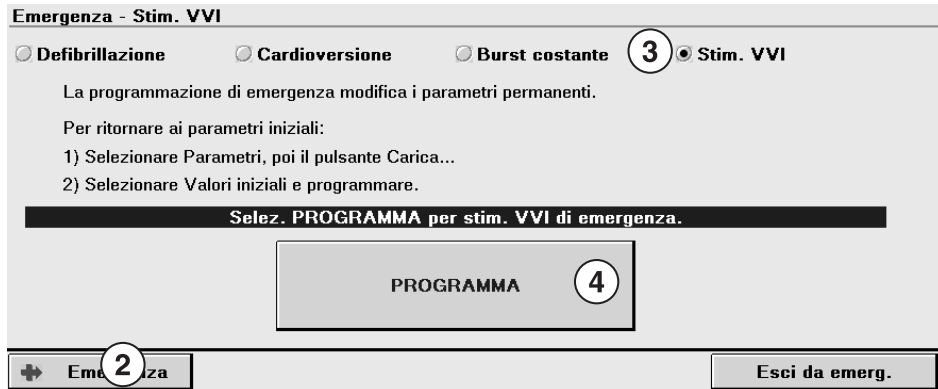1. Stabilire il collegamento telemetrico con il dispositivo.




2. Selezionare [Emergenza].
3. Selezionare Stim. VVI.
4. Selezionare [PROGRAMMA].

### 3.6 Ottimizzazione delle sessioni di impianto e follow-up con la funzione Lista di controllo

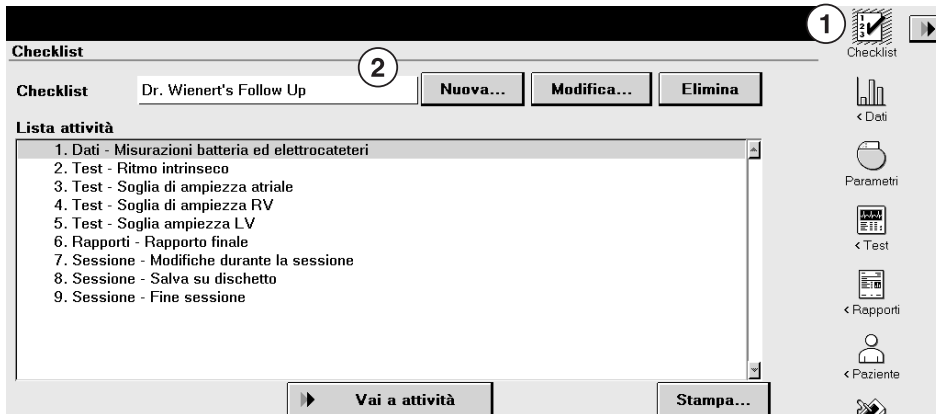La funzione Lista di controllo consente di catalogare ed ordinare in un elenco le attività che vengono eseguite durante le sessioni di impianto e follow-up. Si inizia con la prima attività e si continua con le attività successive in ordine sequenziale. Selezionando un'attività dalla lista di controllo, il programmatore visualizza la schermata associata all'attività in questione. Una volta completata l'attività, è possibile passare direttamente alla schermata associata all'attività successiva nella lista di controllo o ritornare alla lista di controllo. Vi sono due liste di controllo standard: la Impianto standard Medtronic e la Controllo standard Medtronic. Oltre alle liste di controllo standard, è possibile creare delle liste di controllo personalizzate.


### 3.6.1 Come selezionare una lista di controllo



1. Selezionare l'icona Checklist per rivedere le attività presenti nell'elenco Attività per la lista di controllo desiderata.<sup>1</sup>
2. Per selezionare una lista di controllo diversa (sia standard che personalizzata), selezionare quella desiderata dal campo Checklist.

<sup>1</sup> Quando si inizia una nuova sessione, la lista di controllo utilizzata durante l'ultima sessione di programmazione diventa la lista di controllo attiva.

### 3.6.2 Come utilizzare una lista di controllo

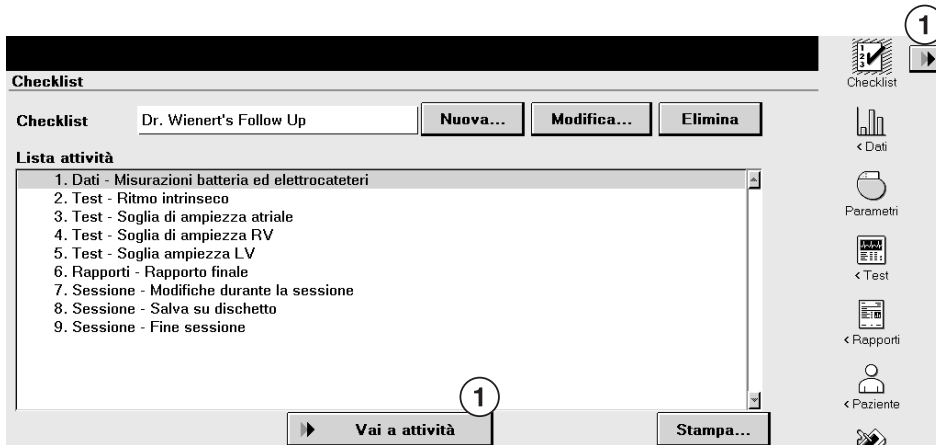


1. Per iniziare ad usare la lista di controllo, selezionare [Vai a attività] oppure il pulsante Checklist con la doppia freccia [>>].
2. Eseguire l'operazione selezionata dall'elenco Attività.
  - Per passare all'attività successiva, selezionare [>>] accanto all'icona Checklist.
  - Per eseguire un'attività non programmata o ripetere un'attività contenuta nella lista di controllo selezionata, selezionare prima l'icona Checklist. Successivamente, selezionare l'attività dall'elenco Attività e selezionare [Vai a attività] oppure [>>].<sup>2</sup>

Nella schermata Checklist vengono visualizzati dei segni di spunta accanto ai nomi delle schermate del programmatore aperte durante una sessione, allo scopo di fornire un'indicazione generale sulle attività svolte.


<sup>2</sup> È possibile selezionare un'attività indipendentemente dal fatto che questa sia spuntata o meno. Se si esegue l'ultima attività di una lista di controllo, i pulsanti [>>] e [Vai a attività] vengono disabilitati. È ancora possibile selezionare un'attività precedente dalla schermata Lista di controllo ed utilizzare [>>] per passare a tutte le altre attività che vengono dopo l'attività selezionata.

### 3.6.3 Come creare una lista di controllo personalizzata

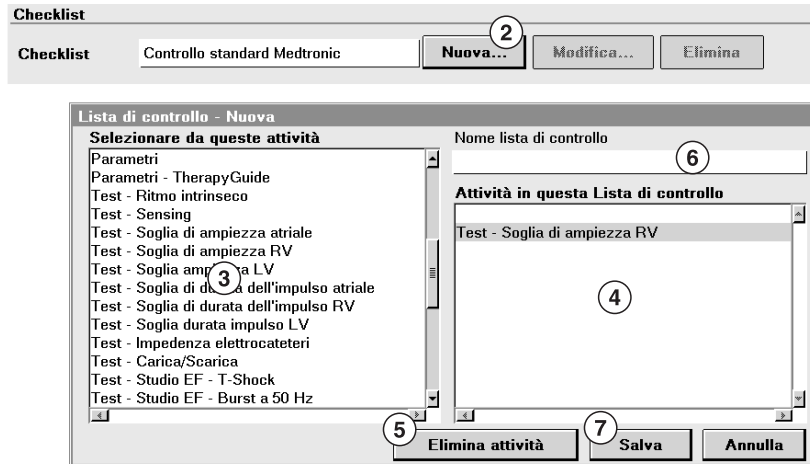

1. Selezionare l'icona Checklist.
2. Selezionare [Nuova...] dalla relativa schermata.
3. Selezionare le attività nella casella "Selezionare da queste attività" a sinistra per creare una lista di controllo personalizzata.
4. Le attività selezionate vengono visualizzate nella casella "Attività in questa Lista di controllo" a destra. L'aggiunta di attività ad una lista di controllo personalizzata può essere ripetuta più di una volta. Per inserire una nuova attività in una lista di controllo in una posizione diversa da quella finale, prima di selezionare la nuova attività evidenziare quella che dovrebbe precederla sulla lista. Nella casella "Attività in questa Lista di controllo" la nuova attività comparirà sotto l'attività evidenziata in precedenza.
5. Per cancellare un'attività, selezionare l'attività desiderata nella casella "Attività in questa Lista di controllo" e selezionare [Elimina attività].
6. Selezionare il campo "Nome Lista di controllo" ed immettere un nome.
7. Selezionare [Salva].

### 3.6.4 Come modificare una lista di controllo personalizzata

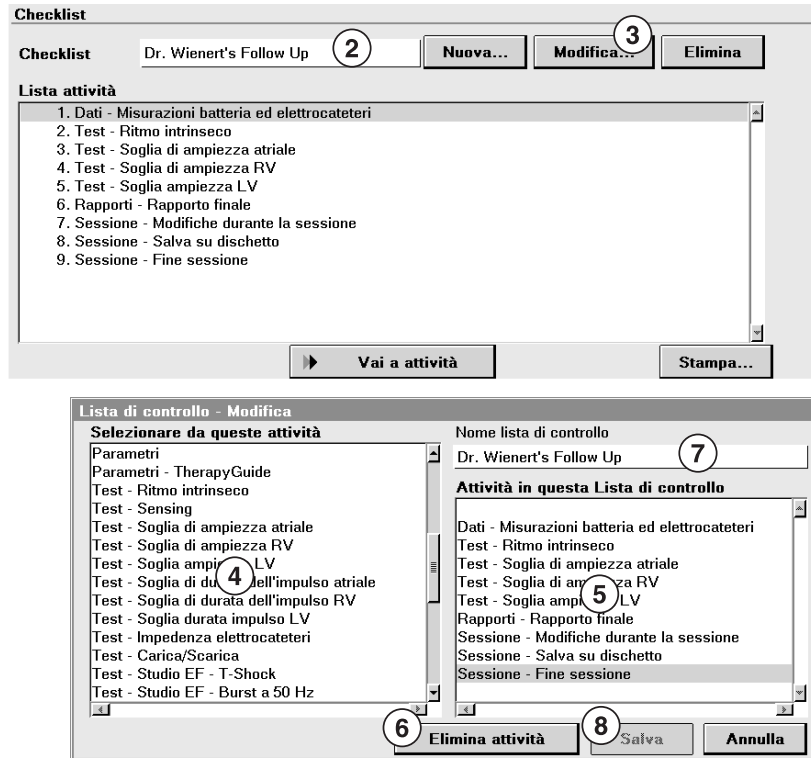


1. Selezionare l'icona Checklist.
2. Selezionare la lista di controllo personalizzata che si desidera modificare.
3. Selezionare [Modifica...].
4. Selezionare le attività nella casella "Selezionare da queste attività" a sinistra per aggiungere nuove attività all'elenco nella casella "Attività in questa Lista di controllo" a destra. L'aggiunta di attività ad una lista di controllo personalizzata può essere ripetuta più di una volta.
5. Ogni attività selezionata viene visualizzata alla fine della lista di controllo modificata. Per inserire una nuova attività in una lista di controllo modificata in una posizione diversa da quella finale, prima di selezionare la nuova attività evidenziare quella che dovrebbe precederla sulla lista. La nuova attività comparirà nella lista di controllo modificata sotto l'attività evidenziata in precedenza.
6. Per cancellare un'attività, selezionare l'attività desiderata nella casella "Attività in questa Lista di controllo" e selezionare [Elimina attività].



7. Per rinominare la lista di controllo modificata, selezionare il campo “Nome lista di controllo” ed immettere un nuovo nome.
8. Selezionare [Salva].

### 3.6.5 Come eliminare una lista di controllo personalizzata

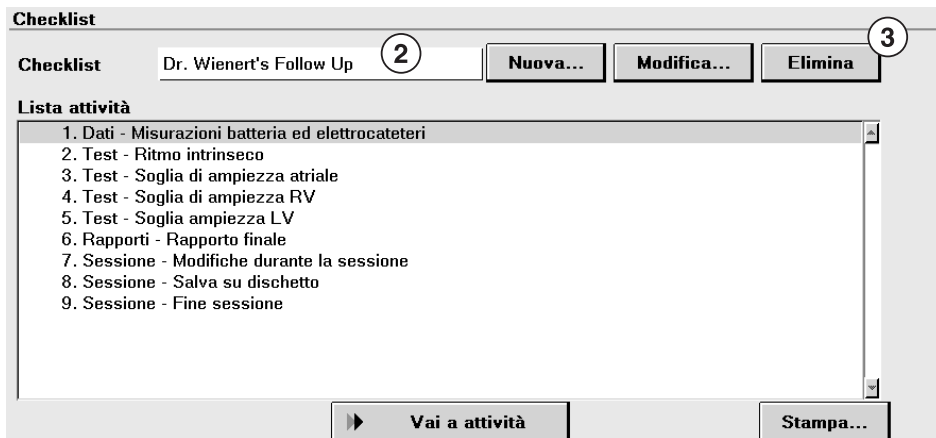

1. Selezionare l'icona Checklist.
2. Selezionare la lista di controllo personalizzata da eliminare dal menu Checklist.
3. Selezionare [Elimina].

**Nota:** dopo l'eliminazione, una lista di controllo personalizzata non può più essere ripristinata.

**Nota:** le liste Controllo standard Medtronic ed Impianto standard Medtronic non possono essere né modificate né eliminate, per cui [Modifica...] ed [Elimina] non sono utilizzabili quando si selezionano queste liste di controllo.

### **3.7 Visualizzazione e programmazione dei parametri del dispositivo**

La schermata Parametri consente di visualizzare e programmare i parametri che controllano le funzioni del dispositivo e la raccolta dati. Tutti i parametri visualizzabili e programmabili del dispositivo compaiono come “campi attivi” nell’area delle attività. I campi attivi, visualizzati come caselle non ombreggiate accanto ai nomi dei parametri, rispondono alle sollecitazioni della penna ottica. Alcuni campi attivi si riferiscono solo ad un parametro, mentre altri campi forniscono accesso a gruppi di parametri. Qualora non fosse possibile programmare un determinato parametro, accanto al nome non verrà visualizzato alcun campo attivo.








Dopo aver selezionato dei nuovi valori per i parametri, i nuovi valori vengono indicati come valori in sospeso. Un campo contenente un valore in sospeso è racchiuso da un rettangolo tratteggiato. I valori rimangono in sospeso finché non vengono memorizzati nel dispositivo. Tutte le modifiche apportate ai parametri vengono programmate nella schermata Parametri.

#### **3.7.1 Panoramica dei simboli utilizzati nella schermata Parametri**

Alcune combinazioni di valori di parametro sono soggette a limitazioni perché non sono valide o possono provocare interazioni indesiderate. Il programmatore è in grado di riconoscere tali combinazioni e può non consentire la programmazione finché non sono stati risolti i conflitti tra i parametri e non sono stati soddisfatti tutti i requisiti per la selezione dei parametri. Nella finestra di selezione, accanto al valore viene visualizzato un simbolo che indica lo stato del valore di un parametro. Accanto ad un valore di parametro possono essere visualizzati i simboli illustrati di seguito.

**Figura 13.** Simboli che vengono visualizzati accanto ai valori di parametro

---

120		Parametro non programmabile (interlock)
125		
180		Presenza di un avviso relativo ad un parametro
185		
5.00 V		Parametro adattato
175		Valore di parametro nominale della Medtronic
140		Valore di parametro programmato

---

**Parametro non programmabile (interlock)** – Quando accanto ad un valore di parametro viene visualizzato il simbolo di interlock, il valore di parametro in questione è in conflitto con l'impostazione di un altro valore presente o in sospeso. Selezionare un altro valore o risolvere il conflitto derivante dal valore prima di programmare il parametro.

**Presenza di un avviso relativo ad un parametro** – Quando accanto ad un valore di parametro vi è un punto esclamativo racchiuso in un triangolo, è disponibile un avviso relativo al valore in questione. Il messaggio può essere visualizzato selezionando il pulsante recante un'etichetta testuale o riselezionando il parametro. In quest'ultimo caso, l'avvertenza viene visualizzata sotto forma di avviso nella finestra di selezione. Questi valori di parametro sono programmabili.




**Parametro adattato** – Quando nella schermata Parametri viene visualizzato il simbolo di parametro adattato accanto ad un valore di parametro, il valore programmato può essere modificato automaticamente dal dispositivo. Il simbolo non indica necessariamente che il valore di parametro è stato adattato da un valore precedentemente programmato, ma solo che può essere adattato.

**Valore di parametro nominale della Medtronic** – Il simbolo “n” visualizzato accanto ad un valore di parametro indica il valore nominale della Medtronic.

**Valore di parametro programmato** – Il simbolo “P” visualizzato accanto ad un valore di parametro indica che il valore in questione è il valore programmato.

Sullo schermo del programmatore, accanto al pulsante [PROGRAMMA] potrebbe essere visualizzato un pulsante con etichetta grafica che, se selezionato, fornisce l'accesso a ulteriori informazioni sui parametri in sospenso. Il pulsante con etichetta grafica contiene uno dei simboli descritti nella Tabella 3. Selezionando il pulsante recante l'etichetta grafica, il programmatore apre una seconda finestra in cui sono visualizzati uno o più messaggi.

**Tabella 3.** Simboli che compaiono sul pulsante con etichetta grafica

Simbolo	Significato
	Messaggio relativo ad un parametro non programmabile (interlock)
	Messaggio di avvertenza su un parametro
	Messaggio informativo su un parametro

**Messaggio relativo ad un parametro non programmabile (interlock)** – Questo pulsante indica la presenza di un parametro non programmabile. La programmazione è sospesa finché non viene risolto il conflitto. Selezionare questo pulsante per visualizzare il messaggio che descrive il conflitto.

**Messaggio di avvertenza su un parametro** – Questo pulsante indica la presenza di un avviso legato alla programmazione di uno o più valori di parametro in sospenso. Selezionare questo pulsante per visualizzare il messaggio di avviso e i relativi consigli.

**Messaggio informativo su un parametro** – Questo pulsante indica la presenza di un messaggio informativo su uno o più valori di parametro. Selezionare questo pulsante per visualizzare il messaggio.

Se sono presenti più messaggi relativi a parametri in sospenso, il simbolo che verrà visualizzato sul pulsante dipende dal messaggio che ha maggiore importanza.

### 3.7.2 Come accedere ai parametri con due valori

Parametri					
Modo	DDD	Freq. min.	50 min <sup>-1</sup>	Sensibilità A.	0.30 mV
Cambio Modo	On	Trascin. max	130 min <sup>-1</sup>	Sensibilità RV	0.30 mV
Stimolazione...		Sensore max	120 min <sup>-1</sup>	Stim. V.	LV->RV
<b>Riconoscimento</b>	<b>Intervallo (freq.)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Terapie...</b>		
VF	On	320 ms (188 min <sup>-1</sup> )	18/24	ATP durante la carica, 35J x 6	
FVT	OFF	240 ms (250 min <sup>-1</sup> )		Tutte le Rx Off	
VT	OFF	360 ms (167 min <sup>-1</sup> )	16	Tutte le Rx Off	
Ricon. (V.)...	AF/Afl, Tach. sinus., Monitoraggio di VT				
AT/AF	Monitor.	350 ms (171 min <sup>-1</sup> )	Tutte le Rx Off		
Impost. raccolta dati...				Allarme... 8 On	
Salva...		Carica...		TherapyGuide...	
Annulla		PROGRAMMA			

Se, ad esempio, un parametro ha solo due valori (come Off o On), selezionando il campo del parametro il valore alternativo diventa "in sospeso".

1. Selezionare il campo di un parametro contenente soltanto due valori, ad esempio, un valore di parametro che passa da On a Off (o viceversa).
2. Selezionare [PROGRAMMA] per memorizzare il nuovo valore nel dispositivo.

### 3.7.3 Come accedere ai parametri con più di due valori

Parametri					
Modo	DDD	Freq. min.	50 min <sup>-1</sup>	Sensibilità A.	0.30 mV
Cambio Modo	On	Trascin. max	130 min <sup>-1</sup>	Sensibilità RV	0.30 mV
Stimolazione...		Sensore max	120 min <sup>-1</sup>	Stim. V.	LV->RV
<b>Riconoscimento</b>	<b>Intervallo (freq.)</b>	<b>Sensibilità RV</b>			
VF	On	320 ms (188 m	0.15	0.45	0.90
FVT	OFF	240 ms (250 m	0.30	0.60	1.20
VT	OFF	360 ms (167 m			
Ricon. (V.)...	AF/Afl, Tach. s				
AT/AF	Monitor.	350 ms (171 min <sup>-1</sup> )	Tutte le Rx Off		
Impost. raccolta dati...				Allarme... 8 On	
Salva...		Carica...		TherapyGuide...	
Annulla		PROGRAMMA			

Se un parametro ha più di due valori, selezionando il relativo campo si apre una finestra in cui viene visualizzata una serie di valori del parametro.

1. Selezionare il campo di un parametro contenente più di due valori. Così facendo, si apre una finestra in cui vengono visualizzati i valori disponibili per quel determinato parametro.
2. Selezionare un nuovo valore da questa finestra. Questo nuovo valore viene visualizzato come un valore in sospenso, mentre la finestra che mostra i valori disponibili relativi al parametro in questione si chiude. Per chiudere la finestra senza modificare il valore originale del parametro, è anche possibile selezionare [Chiudi].
3. Selezionare [PROGRAMMA] per memorizzare il nuovo valore nel dispositivo.

### 3.7.4 Come accedere ad un gruppo di parametri correlati

**Parametri**

Modo	DDD	Freq. min.	50 min <sup>-1</sup>	Sensibilità A.	0.30 mV
Cambio Modo	On	Trascin. max	130 min <sup>-1</sup>	Sensibilità RV	0.30 mV
Stimolazione...		Sensore max	120 min <sup>-1</sup>	Stim. V.	LV->RV

Riconoscimento	Intervallo (freq.)	Iniziale	Terapie...
VF	On 320 ms (188 min <sup>-1</sup> )	18/24	ATP durante la carica, 35J x 6
FVT	OFF 240 ms (250 min <sup>-1</sup> )		Tutte le Rx Off
VT	OFF 360 ms (167 min <sup>-1</sup> )	16	Tutte le Rx Off
Ricon. (V.)...	AF/Afl, Tach. sinus., Monitoraggio di VT		

AT/AF Monitor. 350 ms (171 min<sup>-1</sup>) Tutte le Rx Off

Impost. raccolta dati... 1 Allarme... 8 On 4

Salva... Carica... TherapyGuide... Annulla [Stampa] [Info] PROGRAMMA

**Impostazione raccolta dati**

	Sorgente	Range
LECG	Cassa/SVC	+/- 2 mV
EGM 1	Punta A/Anello A	+/- 8 mV
EGM 2	Punta RV/Anello RV	+/- 8 mV
EGM 3 2	Punta RV/Anello RV	+/- 8 mV
Monitorato	EGM1 e EGM2	
EGM pre-aritmia	On - 1 mese	
Episodi di sensing V...		Cancella i dati...
Data/Ora dispositivo...	17-Lug-2007 14:19	
Telemetria Holter	Off	
Annulla modifica		OK 3

1. Selezionare un parametro, il campo di un parametro che termina con puntini di sospensione o il campo di un parametro contenente un elenco di nomi di parametri. Così facendo, compare una schermata in cui vengono visualizzati i campi dei parametri secondari correlati. Nell'esempio visualizzato, è stata selezionata l'Impostazione raccolta dati....
2. Selezionare dei nuovi valori per i parametri secondari desiderati. I nuovi valori vengono visualizzati come valori in sospenso.
3. Selezionare [OK] per chiudere la schermata dei parametri secondari e tornare alla schermata Parametri.
4. Selezionare [PROGRAMMA] per memorizzare i nuovi valori nel dispositivo.

### **3.8 Salvataggio e recupero di una serie di valori di parametro**

È possibile salvare dei gruppi personalizzati di valori di parametro sul disco fisso del programmatore per poi richiamarli durante la sessione corrente o nel corso di sessioni successive. Ciò consente di salvare ed accedere rapidamente ad un gruppo personalizzato di valori di parametro per situazioni cliniche particolari. Ad esempio, è possibile salvare un gruppo di valori di parametro per un'impostazione iniziale di impianto, per uno stadio specifico della malattia o per situazioni in cui occorre programmare ripetutamente un determinato set di parametri.

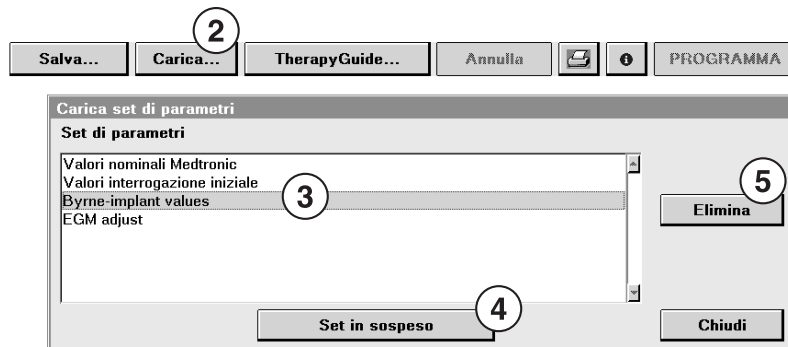
Il pulsante [Salva...] consente di aprire una finestra in cui si può assegnare un nome al gruppo di valori di parametro correntemente visualizzato dalla schermata Parametri. Un set di parametri salvato può includere sia dei valori programmati che dei valori in sospenso. Premendo il pulsante [Carica...], si apre la finestra Carica set di parametri che consente di recuperare un set di parametri nominali della Medtronic, un set di parametri di interrogazione iniziale o un set personalizzato di parametri.

### 3.8.1 Come salvare un gruppo di valori di parametro



1. Selezionare l'icona Parametri. Selezionare i parametri desiderati.
2. Selezionare [Salva...] per aprire la finestra Nome del set di parametri.
3. Immettere un nome per il set di parametri e selezionare [OK] o [INVIO].
4. Se esiste già un set di parametri con lo stesso nome, sarà necessario confermare la sostituzione del set esistente con un nuovo set o cambiare il nome del nuovo set di parametri.

### 3.8.2 Come recuperare un gruppo di valori di parametro



1. Selezionare l'icona Parametri.
2. Selezionare [Carica...] per aprire la finestra Carica set di parametri.
3. Selezionare il set di parametri che si desidera recuperare.



4. Selezionare [Set in sospenso].
5. In alternativa, per rimuovere un set di parametri non necessari dall'elenco, selezionare prima il set e poi [Elimina].

Dalla finestra Carica set di parametri si possono selezionare le opzioni descritte di seguito:

- Valori nominali Medtronic: valori selezionati come valori nominali del dispositivo dalla Medtronic. I valori nominali della Medtronic non possono essere né personalizzati né cancellati.
- Valori interrogazione iniziale: valori di parametro programmati in modo permanente, così come vengono determinati dalla prima interrogazione del dispositivo durante la sessione paziente.
- Set personalizzati di valori: tutte i set personalizzati di valori precedentemente salvati.

## 3.9 Utilizzo della funzione TherapyGuide per selezionare i valori di parametro



**Attenzione:** la funzione TherapyGuide non deve prevalere sul giudizio esperto del medico. La conoscenza delle condizioni cliniche del paziente da parte del medico è molto più estesa della serie di dati presenti nella finestra TherapyGuide. Il medico è libero di accettare, rifiutare o modificare qualsiasi valore di parametro suggerito.

La funzione TherapyGuide rappresenta un metodo semplice incentrato sul quadro clinico per ottenere i valori di parametro suggeriti. È possibile immettere informazioni sulle condizioni cliniche del paziente in sede d'impianto o durante una delle prime visite di controllo. In base ai dati immessi, il programmatore suggerisce dei valori di parametro. I suggerimenti si basano su studi clinici, sulla bibliografia esistente, sulla prassi corrente e sulle reazioni del personale medico.

### 3.9.1 La funzione TherapyGuide

Le informazioni sulle condizioni cliniche del paziente vanno immesse nella finestra TherapyGuide, a cui si accede dalla schermata Parametri oppure selezionando Paziente > TherapyGuide.

Figura 14. La finestra TherapyGuide

Salva...Carica...TherapyGuide...AnnullaPROGRAMMA

TherapyGuide

VT/VF

VT sostenuta spontanea

VT più lenta

330 ms (182 min<sup>-1</sup>)

Stato atriale

Funzione sinusale normale

Scompenso cardiaco

Classe NYHA II

Data di nascita

01-Gen-1937

Livello di attività

Attività media

Ultim. aggiorn.

13-Giu-2008

Nota: le informazioni vengono memorizzate nel dispositivo solo dopo aver selezionato PROGRAMMA nella schermata Parametri.

Logica...Visualizza suggerimentiChiudi

In base ad una serie di condizioni cliniche selezionate, la funzione TherapyGuide suggerisce dei valori per numerosi parametri programmabili. Le condizioni cliniche che influenzano questi suggerimenti sui parametri sono riportate nella Tabella 4. Questa tabella ha un valore riepilogativo, mentre la finestra Logica mostra la correlazione tra i valori suggeriti per i parametri e le impostazioni specifiche per le condizioni cliniche.

Se un parametro non è influenzato dalle condizioni cliniche, la funzione TherapyGuide può consigliare il valore nominale della Medtronic per quel determinato parametro o non fornire alcun suggerimento.

Se il valore suggerito per un parametro è diverso dal valore programmato, il parametro viene visualizzato con il valore in sospenso. Se il valore suggerito è identico al valore programmato, non viene visualizzato come valore in sospenso.

Tabella 4. Come vengono formulati i suggerimenti sulla programmazione

Suggerimenti sulla programmazione	Condizioni cliniche
Riconoscimento di VF	VT/VF VT più lenta
Riconoscimento di VT	VT/VF VT più lenta
Monitoraggio di VT	Stato atriale Data di nascita Limite intervento <sup>a</sup>
Modo di stimolazione	Stato atriale

**Tabella 4.** Come vengono formulati i suggerimenti sulla programmazione (continua)

<b>Suggerimenti sulla programmazione</b>	<b>Condizioni cliniche</b>
Frequenza minima	Stato atriale Data di nascita
Frequenza massima di trascinamento	Data di nascita Limite intervento <sup>a</sup>
Risposta in frequenza (compresa la frequenza massima del sensore)	Stato atriale Scompenso cardiaco Data di nascita Livello di attività

<sup>a</sup> Il limite intervento corrisponde all'intervallo di riconoscimento di VT se è stata abilitata la funzione Attivazione riconoscimento di VT. In caso contrario, il limite intervento corrisponde all'intervallo di riconoscimento di VF.

### 3.9.2 Alcune considerazioni sulla funzione TherapyGuide

**La funzione TherapyGuide e la schermata Dati sul paziente** – Le condizioni cliniche possono essere memorizzate nel dispositivo dalla schermata Dati sul paziente. Cfr. la Sezione 3.10, “Visualizzazione ed immissione dei dati sul paziente”, pagina 77.

**Stato ultimo aggiornamento** – La data indica l'ultima memorizzazione nel dispositivo delle variazioni apportate alle condizioni cliniche.

**Stampa delle condizioni cliniche** – Le condizioni cliniche possono essere stampate dalla schermata Dati sul paziente. Le condizioni cliniche sono incluse anche nel rapporto di interrogazione iniziale e nel file Salva su dischetto.

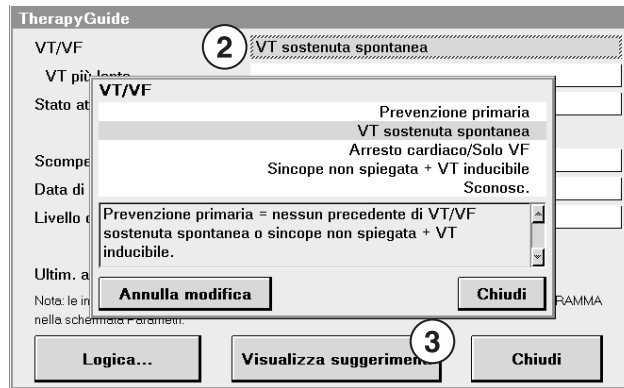
**Aspetto del pulsante [TherapyGuide...]** – L'aspetto del pulsante [TherapyGuide...] cambia 10 giorni dopo l'impianto.

### 3.9.3 Come ottenere un set di valori suggeriti

1. Nella schermata Parametri, selezionare [TherapyGuide...] per aprire la finestra della funzione TherapyGuide.



2. Per ogni condizione clinica, selezionare il campo accanto alla condizione e selezionare una delle voci in elenco.



**Nota:** se si desidera programmare soltanto le varie opzioni per le condizioni cliniche senza memorizzare le modifiche dei parametri nel dispositivo, selezionare [Chiudi] e [PROGRAMMA].

3. Dopo aver selezionato le condizioni cliniche, selezionare [Visualizza suggerimenti]. Così facendo, la finestra della funzione TherapyGuide si chiude e le modifiche suggerite da apportare ai valori di parametro vengono visualizzate come valori in sospeso nella schermata Parametri.


**Nota:** le informazioni vengono memorizzate nel dispositivo solo dopo aver selezionato [PROGRAMMA] nella schermata Parametri.

**Nota:** selezionando [Annulla] nella schermata Parametri, tutti i valori di parametro e le condizioni cliniche in sospeso vengono cancellati.

4. Rivedere le impostazioni e verificare che le nuove siano appropriate per il paziente.
5. Per modificare qualsiasi valore in sospeso, selezionare [Annulla modifica] nella finestra dei valori di parametro o selezionare un valore di parametro diverso. Ripetere questa operazione per modificare gli altri valori di parametro desiderati.
6. Selezionare [PROGRAMMA] per memorizzare nel dispositivo i valori di parametro e le condizioni cliniche in sospeso.

### 3.9.4 Come visualizzare la logica alla base dei suggerimenti forniti dalla funzione TherapyGuide

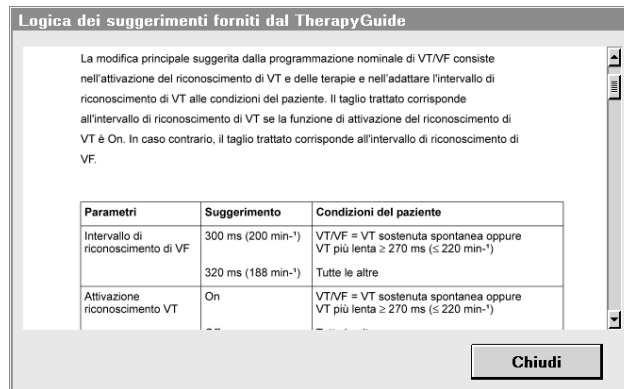1. Nella schermata Parametri, selezionare [TherapyGuide...] per aprire la finestra della funzione TherapyGuide.
2. Selezionare [Logica...] per aprire la finestra Logica.



3. Selezionare [Chiudi] due volte per ritornare alla schermata Parametri.

## 3.10 Visualizzazione ed immissione dei dati sul paziente

Il dispositivo può memorizzare le informazioni relative al paziente che è possibile visualizzare e stampare nel corso di una sessione paziente. Generalmente, questi dati vengono programmati nel dispositivo al momento dell'impianto ma possono essere rivisti in qualsiasi momento.

Quando si immettono le condizioni cliniche di un paziente (data di nascita e anamnesi) e le si memorizza nel dispositivo, queste diventano utilizzabili per la funzione TherapyGuide. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 3.9, "Utilizzo della funzione TherapyGuide per selezionare i valori di parametro", pagina 73.

Il nome e l'identificativo del paziente, oltre al numero seriale del dispositivo, sono riportati su ogni pagina di un rapporto in formato A4 o di un tracciato. Se il programmatore utilizza la telemetria wireless, il paziente viene anche identificato nella parte bassa dello schermo del programmatore, dove compare il suo nominativo o l'ID paziente (nel caso in cui il nominativo non sia stato immesso).

**Nota:** la schermata Dati sul paziente non deve essere utilizzata in sostituzione della cartella clinica (cfr. la Sezione 1.1.9, "Nota", pagina 20 nell'Introduzione).

Se si immette un testo la cui lunghezza non è compatibile con l'area di visualizzazione dei parametri, il testo viene accorciato. Il dato integrale è visibile nel rapporto sui dati del paziente. Se visualizzato o stampato da altre schermate, il testo immesso può essere accorciato.

Se si avvia una sessione concomitante con l'Analizzatore modello 2290 durante la sessione con il dispositivo, è possibile esportare le misurazioni degli elettrocateri effettuate dall'Analizzatore. Le misurazioni esportate vengono visualizzate come valori di parametro in sospeso nella finestra Impianto, a cui si accede dalla schermata Dati sul paziente. Questi valori in sospeso vengono programmati dalla schermata Dati sul paziente.

**Tabella 5.** Descrizione dei dati sul paziente

<b>Campo dati</b>	<b>Descrizione e azione richiesta</b>
Paziente	Digitare il nome del paziente (fino a 30 caratteri).
ID	Digitare l'ID del paziente (fino a 15 caratteri).
Data di nascita	Selezionare la data di nascita del paziente.
Numero di serie (non selezionabile)	Visualizza il numero seriale del dispositivo impiantato.
Elettrocateri 1...	Immettere informazioni dettagliate per un massimo di tre elettrocateri.
Elettrocateri 2...	Selezionare il Modello, la Posizione ed il Fabbricante dalle liste di opzioni. Immettere il Numero seriale e la Data di impianto.
Elettrocateri 3...	
Impianto...	Esportare i dati degli elettrocateri dall'Analizzatore modello 2290 oppure immettere i dati dell'elettrocateri utilizzando i sottomenu. Immettere i risultati del test di defibrillazione.
Note	Inserire le note o altri dati sul paziente.
Anamnesi...	Immettere le condizioni cliniche del paziente. Queste informazioni diventano utilizzabili per la funzione TherapyGuide.
EF, on	Selezionare la frazione di eiezione da una tabella di valori nel primo campo ed immettere la data nel secondo campo.
Telefono del medico	Selezionare il nome ed il numero di telefono del medico da un elenco. Se tali dati non figurano nell'elenco, aggiungerli e selezionarli.
Ospedale	Selezionare il nome dell'ospedale da un elenco. Se non figura nell'elenco, aggiungerlo e selezionarlo.
Ultimo aggiornamento (non selezionabile)	Visualizza la data dell'ultimo aggiornamento dei dati sul paziente.

### 3.10.1 Come visualizzare ed immettere i dati sul paziente

1. Selezionare Paziente > Dati sul paziente. Viene visualizzata la schermata Dati sul paziente.

**Dati sul paziente**

Paziente	John Q. Patient	Anamnesi...	VT sostenuta spontanea
ID	123-45-6789	EF, il	30 % 10-Feb-2008
Data di nascita	01-Jan-1937		
Num. di serie	DAT012SIMR		
Elettrocatteteri I...		Medico	Dr. McMurray
Elettrocatteteri II...		Telefono	763-555-1234
Elettrocatteteri III...		Ospedale	Redwing General
Impianto...	23-Feb-2008	Ult. aggiorn.	24-Feb-2008
Note			

Buttons: Annulla modifica, Stampa..., PROGRAMMA

Right sidebar: Checklist, < Dati, Parametri, < Test, < Rapporti, 1 < Paziente

2. Selezionare ciascun campo per immettere le relative informazioni o modificarne il contenuto.
3. Immettere le informazioni sull'impianto selezionando il campo Impianto... e procedendo nel modo seguente:

**Impianto**

**3a** **Dati dal test di defibrillazione**

Data impianto	05-Apr-2007		
Energia di defibrillazione	5 J	DFT	
Impedenza di alta tensione (ohm)	31		

**3b** **Dai elettroc. dall'analizz.**

	A.	RV	LV
Ampiezza dell'onda P/R (mV)	2.3	10	11
Slew Rate	0.1 V/s	1.3 V/s	1.3 V/s
Ampiezza della soglia di stimolazione	0.6 V	0.6 V	2.5 V
Impostazione durata dell'impulso	0.40 ms	0.40 ms	0.90 ms
Impedenza di stimolazione (ohm)	494	1301	1045
Corrente di soglia (mA)	0.4	0.4	0.4

- Immettere le misurazioni effettuate durante il test di defibrillazione ed indicare il metodo di test.
- Per ciascun elettrocatteter, immettere i dati dell'elettrocatteter ricavati dall'analizzatore. Selezionare [OK].

**Nota:** se è in corso una procedura di impianto, prendere in considerazione l'ipotesi di effettuare le misurazioni in una sessione concomitante con l'analizzatore. Le misurazioni possono essere esportate direttamente nella finestra Impianto (per istruzioni in proposito, vedere la Sezione 3.10.2). In caso contrario, selezionare un valore per ogni parametro.



4. Per immettere le condizioni cliniche del paziente, che saranno utilizzabili nella funzione TherapyGuide, procedere nel modo seguente:
  - a. Selezionare il campo Data di nascita, immettere le relative informazioni e selezionare [OK].
  - b. Selezionare il campo Anamnesi... per visualizzare la finestra Anamnesi. Immettere le condizioni cliniche richieste e selezionare [OK].

Anamnesi	
VT/VF	VT sostenuta spontanea
VT più lenta	330 ms (182 min <sup>-1</sup> )
Stato atriale	Funzione sinusale normale
Scompenso cardiaco	Classe NYHA III
Livello di attività	Sedentario

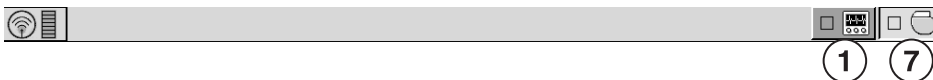
Per suggerimenti sulla programm. basati sull'anamnesi paz., selez. il pulsante TherapyGuide nella schermata Parametri (selez. L'icona Parametri).

5. Selezionare i campi Medico (o Telefono) e Ospedale e scegliere le informazioni appropriate dai relativi elenchi. Per aggiungere nuove informazioni ad un elenco, selezionare [Modifica lista...] e [Aggiungi...]. Inserire i dati che si desidera aggiungere e selezionare [OK].
6. Dopo aver immesso tutte le informazioni, selezionare [PROGRAMMA].

### 3.10.2 Come esportare le misurazioni degli elettrocateteri salvate nella finestra Impianto

Quando la sessione con l'analizzatore e quella con il dispositivo sono in esecuzione simultanea, è possibile esportare le misurazioni degli elettrocateteri salvate dalla sessione con l'analizzatore alla finestra Impianto della sessione con il dispositivo.

1. Dalla sessione con il dispositivo, avviare una nuova sessione con l'analizzatore selezionando l'icona Analizzatore situata sulla barra delle applicazioni.



2. Effettuare le misurazioni degli elettrocateri desiderate. Identificare le misurazioni per tipo di elettrocateri al momento di salvarle.
3. Selezionare [Vista valori salvati...].
4. Selezionare le misurazioni da esportare. È possibile selezionare una sola misurazione per ciascun tipo di elettrocateri.
5. Selezionare [Esporta]. Le impostazioni selezionate vengono esportate nella finestra Impianto, nella sessione con il dispositivo.
6. Dopo aver terminato, selezionare [Chiudi].
7. Ritornare alla sessione con il dispositivo selezionando l'icona Dispositivo sulla barra delle applicazioni.

I dati vengono assegnati alle colonne Atriale, RV e LV nella finestra Impianto. Come descritto nella Sezione 3.10.1, è possibile aggiungere o modificare una misurazione esportata selezionando un campo nella finestra Impianto. I valori esportati vengono programmati dalla schermata Dati sul paziente.

### 3.11 Come utilizzare la funzione di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale

La finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale consente di visualizzare ECG, Leadless ECG (LECG), Marker Channel con annotazioni sui marker e tracciati di forma d'onda di EGM trasmessi tramite telemetria sullo schermo del programmatore. La finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale consente inoltre di visualizzare la frequenza cardiaca del paziente e l'intervallo nell'angolo in alto a sinistra. È possibile visualizzare e fissare tracciati di forme d'onda, registrare forme d'onda in tempo reale utilizzando il registratore del tracciato del programmatore e richiamare qualsiasi tracciato di forma d'onda salvato prima di terminare una sessione paziente.

Per impostazione predefinita, la finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale viene visualizzata in dimensioni ridotte. Questa finestra può essere ingrandita a dimensione completa selezionando il pulsantino quadrato nell'angolo superiore destro della finestra oppure selezionando il pulsante [Regola...]. L'aspetto dei tracciati di forma d'onda varia a seconda della sorgente della forma d'onda selezionata e della disposizione dei tracciati nella visualizzazione a schermo intero.

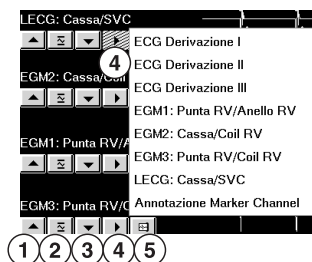
### 3.11.1 Visualizzazione dei tracciati di forma d'onda in tempo reale

Con la funzione di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale, durante una sessione paziente si possono visualizzare fino a sette diverse forme d'onda:

- La forma d'onda Leadless ECG (LECG) consente di visualizzare un'approssimazione del segnale ECG di superficie tramite la sorgente Cassa/SVC. È possibile anche optare per la visualizzazione Coil RV/Anello A. L'opzione Cassa/SVC è attivabile solo in presenza di un elettrocattetero SVC. Questo segnale viene trasmesso tramite telemetria dal dispositivo e viene selezionato dalla sorgente programmabile LECG. In sede di impostazione della raccolta dati, è possibile selezionare la sorgente LECG. Per ulteriori informazioni sul Leadless ECG, vedere la Sezione 3.12, "Come accelerare le sessioni di follow-up con il Leadless ECG", pagina 91.
- Le forme d'onda ECG Derivazione I, II e III mostrano i segnali ECG rilevati utilizzando elettrodi cutanei applicati al paziente. Il cavo ECG collegato a questi elettrodi deve essere collegato al programmatore.
- I segnali EGM1, EGM2 e EGM3 vengono trasmessi dal dispositivo tramite telemetria e vengono selezionati dalle sorgenti EGM programmabili. È possibile selezionare le sorgenti EGM1, EGM2 e EGM3 in sede di configurazione della raccolta dati. Il programmatore non è in grado né di visualizzare né di registrare un tracciato della forma d'onda EGM fino all'interrogazione dell'impostazione del range EGM da parte del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulle sorgenti EGM, vedere la Sezione 5.5, "Visualizzazione dei dati sugli episodi aritmici e impostazione delle preferenze per la raccolta dati", pagina 144.

#### 3.11.1.1 Come selezionare e modificare le forme d'onda

Per modificare l'aspetto delle forme d'onda, si può utilizzare la barra dei pulsanti di modifica delle forme d'onda.




1. Selezionare il pulsante con la freccia rivolta verso l'alto per aumentare le dimensioni del tracciato della forma d'onda.
2. Selezionare il pulsante Normalizza per ripristinare le dimensioni predefinite del tracciato della forma d'onda.

3. Selezionare il pulsante con la freccia rivolta verso il basso per ridurre le dimensioni del tracciato della forma d'onda.
4. Selezionare il pulsante con la freccia in avanti per selezionare il tracciato della forma d'onda da visualizzare.
5. Selezionare il pulsante di selezione della forma d'onda da stampare per selezionare il tracciato della forma d'onda da stampare. È possibile selezionare un massimo di due tracciati di forma d'onda da stampare.

### 3.11.1.2 Come modificare l'aspetto della forma d'onda

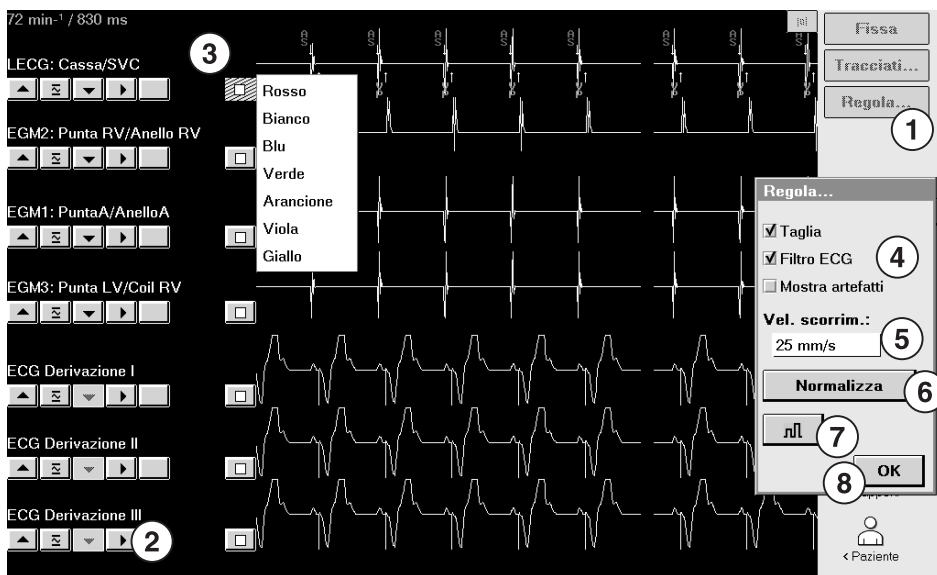Utilizzando la finestra Regola, è possibile apportare ulteriori modifiche alla visualizzazione della forma d'onda.



1. Selezionare [Regola...] per visualizzare la finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale e la finestra Regola.
2. Modificare le dimensioni, la sorgente e le opzioni di selezione per la stampa relative a ciascun tracciato di forma d'onda con la barra dei pulsanti di modifica delle forme d'onda.
3. Selezionare il pulsante del colore per cambiare il colore di una forma d'onda.

4. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo Taglia, Filtro ECG e Mostra artefatti a seconda delle esigenze.
  - La funzione Taglia consente di troncare le parti superiore ed inferiore dei tracciati con un limite di 22 mm.
  - Il Filtro ECG consente di modificare la larghezza di banda delle forme d'onda per aumentare la chiarezza dell'ECG visualizzato in caso di interferenze (selezionare la casella di controllo per impostare la larghezza di banda su un valore compreso tra 0,5 e 40 Hz o deselezionarla per impostare la larghezza di banda su un valore compreso tra 0,05 e 100 Hz).
  - Mostra artefatti consente di visualizzare gli artefatti di stimolazione che vanno a sovrapporsi ai tracciati di forma d'onda.
5. Selezionare una velocità di scorrimento, se lo si desidera. La velocità di scorrimento consente di controllare la velocità di tracciatura della forma d'onda sullo schermo. Selezionando una velocità di scorrimento elevata, la forma d'onda tracciata sarà ampia. Selezionando una velocità di scorrimento ridotta, la forma d'onda tracciata sarà stretta. La velocità di scorrimento può essere impostata su 12,5; 25; 50 o 100 mm/s.
6. Selezionare [Normalizza] per livellare la distanza tra i tracciati di forma d'onda e per portare ogni tracciato alle sue dimensioni predefinite.
7. Selezionare il pulsante Calibra per aggiungere un segnale di riferimento all'uscita analogica, alla schermata ed al registratore del tracciato in tempo reale.
8. Una volta completate le modifiche, selezionare [OK].


### 3.11.1.3 Come interpretare le annotazioni ed i simboli Marker Channel

Le annotazioni Marker Channel vengono visualizzate come due caratteri sopra o sotto il tracciato della forma d'onda Marker Channel. Queste annotazioni indicano eventi quali la stimolazione, il sensing, il riconoscimento e le terapie erogate.


Oltre ad annotazioni, il tracciato della forma d'onda Marker Channel contiene simboli indicanti eventi specifici. I simboli Marker Channel compaiono solo nelle registrazioni delle forme d'onda in tempo reale, non nelle schermate o nelle registrazioni di episodi. Per esempi di annotazioni e simboli Marker Channel, vedere le figure riportate di seguito. A volte i simboli appaiono compressi, a seconda della velocità di stampa del registratore del tracciato del programmatore.

**Nota:** qualsiasi interruzione del collegamento telemetrico con il dispositivo può determinare l'assenza di annotazioni e simboli Marker Channel nella visualizzazione del tracciato della forma d'onda.


**Figura 15.** Annotazioni e simboli Marker Channel relativi alla stimolazione

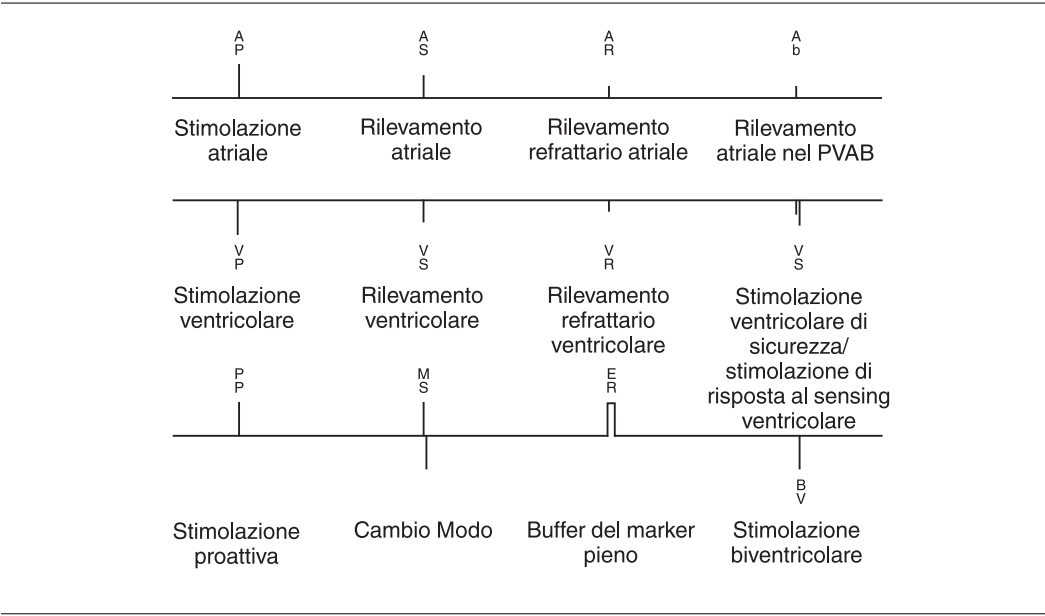

**Figura 16.** Annotazioni e simboli Marker Channel per il riconoscimento e le terapie atriali

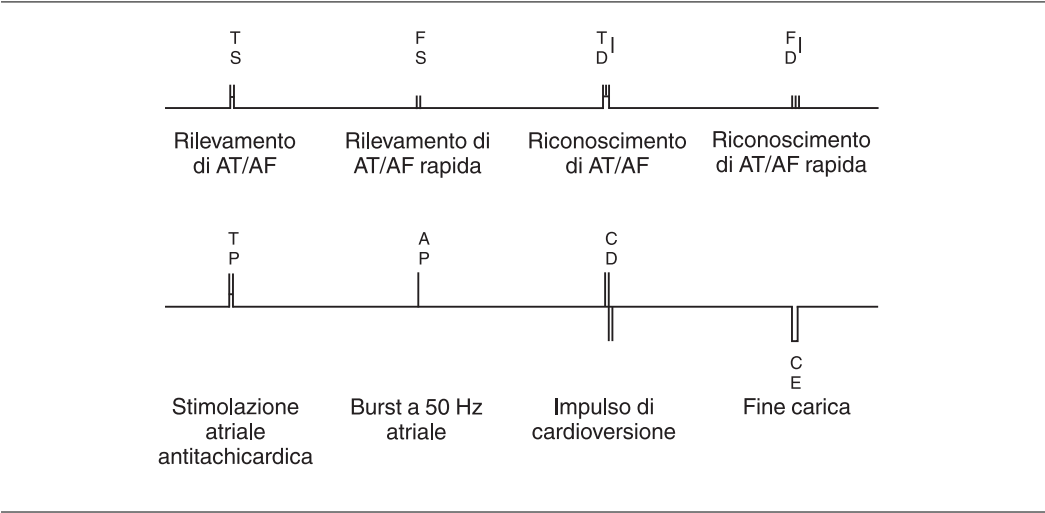

**Figura 17.** Annotazioni e simboli Marker Channel per il riconoscimento e le terapie ventricolari

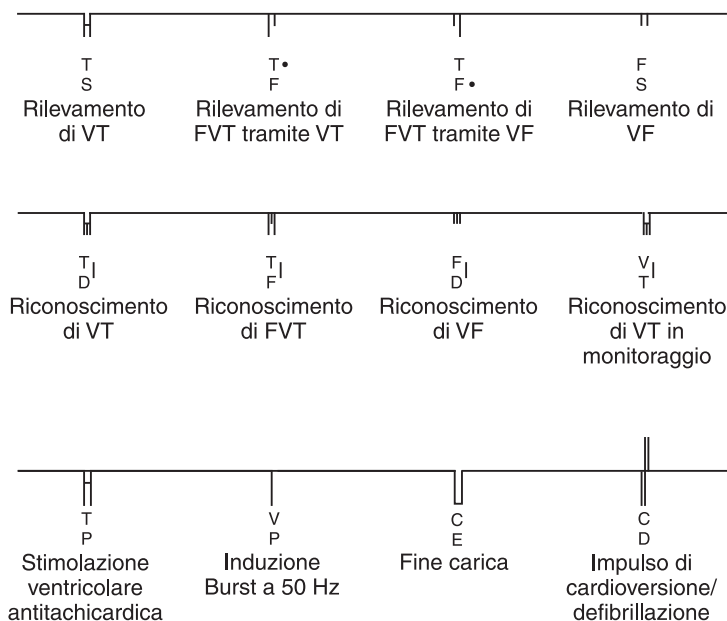

### 3.11.2 Registrazione dei tracciati di forma d'onda in tempo reale

Durante una sessione paziente, è possibile registrare in qualsiasi momento il tracciato continuo ed in tempo reale della forma d'onda dell'ECG, del LECG e dell'EGM<sup>3</sup> del paziente con il registratore del tracciato del programmatore.

**Nota:** poiché il tracciato della forma d'onda stampato ha una risoluzione superiore rispetto a quello visualizzato sullo schermo del programmatore, sul tracciato stampato possono comparire artefatti ed eventi che non vengono visualizzati sullo schermo del programmatore.

<sup>3</sup> Il programmatore può visualizzare e registrare un tracciato EGM o LECG solo dopo l'interrogazione del dispositivo.

Il tracciato stampato di una forma d'onda in tempo reale include quanto segue:

- tracciati ECG, LECG ed EGM
- l'indicazione di un comando eseguito se è stata ricevuta conferma del comando impartito
- valori ricavati durante i test di sistema
- marker di telemetria che mostrano il collegamento telemetrico tra il programmatore ed il dispositivo (programmazione del dispositivo) ed il collegamento telemetrico tra il dispositivo ed il programmatore (conferma della programmazione)
- annotazioni Decision Channel. Per ulteriori informazioni sulle annotazioni Decision Channel, cfr. la Sezione 5.5, "Visualizzazione dei dati sugli episodi aritmici e impostazione delle preferenze per la raccolta dati", pagina 144.

**Stampa di un rapporto durante la registrazione del tracciato di una forma d'onda in tempo reale** – Se si seleziona un'opzione dal menu Stampa durante la registrazione di un tracciato di forma d'onda in tempo reale, il rapporto passa in coda di stampa. Diversamente, se si inizia a registrare il tracciato di una forma d'onda in tempo reale mentre il programmatore sta stampando un rapporto, la stampa viene interrotta ed il rapporto ritorna in coda di stampa.

**Nota:** questa interruzione della stampa può avvenire soltanto in caso di rapporti stampati dal registratore di tracciati. Se la stampa viene effettuata con una stampante separata, non avviene alcuna interruzione.

**Range EGM o LECG** – Il programmatore non è in grado di visualizzare o registrare il tracciato di una forma d'onda EGM o LECG finché l'impostazione corrente del range EGM o LECG non viene interrogata dal dispositivo. Se si programma l'impostazione di un range EGM o di un range LECG durante una registrazione, il programmatore contrassegna la modifica con una linea verticale tratteggiata sul tracciato stampato.

### 3.11.3 Fissaggio dei tracciati di forma d'onda in tempo reale


La funzione Fissa consente di fissare gli ultimi 15 s di tutti i tracciati di forma d'onda in tempo reale visualizzati nella finestra di monitoraggio del ritmo in tempo reale ingrandita.



È possibile utilizzare i comandi della finestra di visualizzazione del tracciato fissato per eseguire le operazioni seguenti:

- visualizzare parti precedenti o successive del tracciato utilizzando la barra di scorrimento orizzontale;
- visualizzare i tracciati di forme d'onda fissate non visibili nella finestra utilizzando la barra di scorrimento verticale;
- misurare un intervallo di tempo con i calibri sullo schermo.

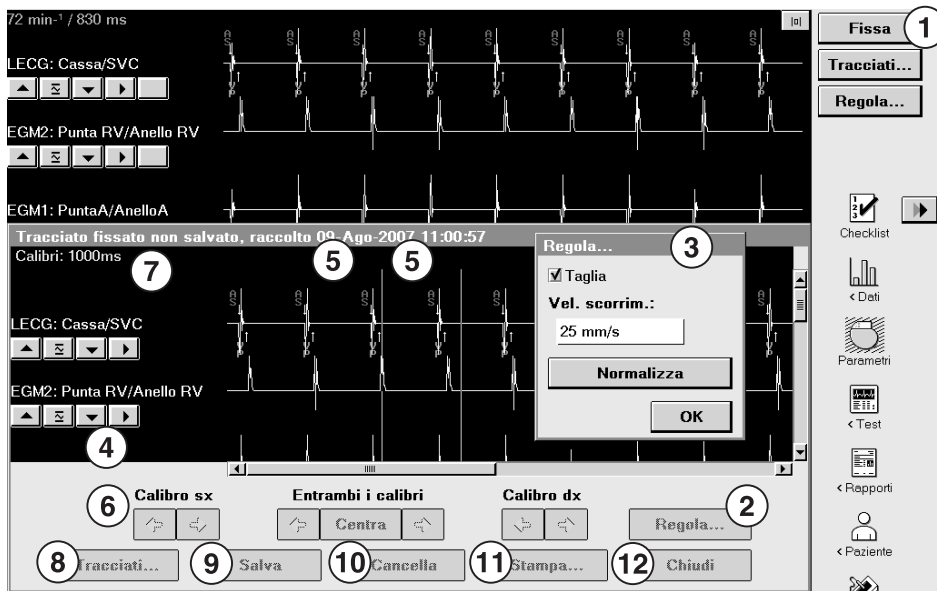**Figura 18.** Interpretazione della finestra di visualizzazione del tracciato fissato




- 1 Il pulsante [Fissa] consente di fissare il tracciato di una forma d'onda in tempo reale e di visualizzarlo nell'apposita finestra sullo schermo del programmatore.
- 2 Il pulsante [Regola...] consente di aprire la finestra Regola per la visualizzazione del tracciato.
- 3 La finestra Regola dispone di opzioni per la visualizzazione del tracciato ed è simile alla finestra Regola per il monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale.
- 4 La barra dei pulsanti di modifica delle forme d'onda consente di normalizzare il tracciato, ridimensionarlo e cambiare la sorgente delle forme d'onda.
- 5 I calibri sullo schermo definiscono gli intervalli di tempo.
- 6 I pulsanti freccia consentono di spostare i calibri sullo schermo per visualizzare l'inizio e la fine di un intervallo di tempo.
- 7 La misurazione Calibri è l'intervallo di tempo tra i calibri sullo schermo.
- 8 Il pulsante [Tracciati...] consente di aprire un elenco di altri tracciati fissati.
- 9 Il pulsante [Salva] consente di salvare il tracciato fissato sullo schermo.
- 10 Il pulsante [Cancella] consente di eliminare il tracciato fissato sullo schermo (se è stato salvato).

- 11 Il pulsante [Stampa...] consente di stampare il tracciato fissato sullo schermo.
- 12 Il pulsante [Chiudi] consente di chiudere la finestra di visualizzazione del tracciato fissato.

### 3.11.4 Richiamo dei tracciati di forma d'onda

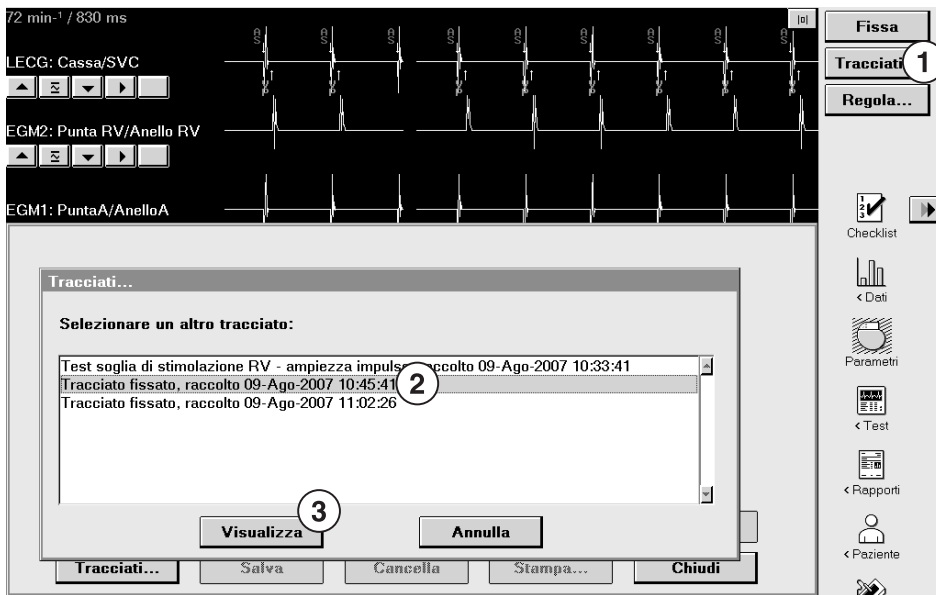Prima di terminare la sessione paziente, è possibile richiamare qualsiasi tracciato di forma d'onda raccolto e salvato durante la sessione per visualizzarlo, modificarlo o stamparlo.

#### 3.11.4.1 Come richiamare un tracciato di forma d'onda



1. Selezionare [Tracciati...] nel pannello strumenti o nel visualizzatore di tracciato.
2. Selezionare un tracciato da visualizzare.
3. Selezionare [Visualizza]. Il tracciato selezionato viene visualizzato.

## **3.12 Come accelerare le sessioni di follow-up con il Leadless ECG**

L'analisi del segnale ECG in tempo reale di un paziente rappresenta un aspetto importante della maggior parte degli esami di follow-up. Il collegamento di elettrocateteri di superficie al paziente e l'acquisizione di un segnale ECG accettabile possono rivelarsi attività molto laboriose durante una sessione di follow-up. Inoltre, il collegamento di elettrocateteri di superficie ad un paziente rende necessaria la presenza fisica del paziente in clinica.

### **3.12.1 La soluzione offerta dal sistema è il Leadless ECG**

Il Leadless ECG è stato appositamente studiato per semplificare ed accelerare le sessioni di follow-up dei pazienti ed offrire un'alternativa per l'ottenimento di un segnale ECG senza dover necessariamente collegare elettrocateteri di superficie al paziente. La funzione Leadless ECG è utilizzabile sia in clinica che in remoto.

Il Leadless ECG offre una visualizzazione in campo lontano dell'attività cardiaca senza dover collegare elettrocateteri al paziente. Il tracciato della forma d'onda Leadless ECG può essere visualizzato nella finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale (cfr. la Sezione 3.11, "Come utilizzare la funzione di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale", pagina 82), memorizzato come uno dei due segnali EGM nelle registrazioni degli episodi (cfr. la Sezione B.7, "Parametri per la raccolta dei dati", pagina 473) e stampato.

### **3.12.2 Funzionamento del Leadless ECG**

La forma d'onda Leadless ECG (LECG) consente di visualizzare un'approssimazione del segnale ECG di superficie tramite la sorgente Cassa/SVC. È possibile anche optare per la visualizzazione Coil RV/Anello A. L'opzione Cassa/SVC è attivabile solo in presenza di un elettrocatetere SVC. Questo segnale viene trasmesso tramite telemetria dal dispositivo e viene selezionato dalla sorgente programmabile LECG. In sede di impostazione della raccolta dati, è possibile selezionare la sorgente LECG.

Il tracciato della forma d'onda Leadless ECG (LECG) può essere visualizzato, registrato e stampato dalla finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale. Selezionare LECG dal pulsante della sorgente della forma d'onda, situato sulla barra dei pulsanti di modifica della forma d'onda, per visualizzare il tracciato Leadless ECG. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 3.11, "Come utilizzare la funzione di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale", pagina 82. Nella finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale, è possibile visualizzare un massimo di quattro diversi tracciati di forma d'onda EGM (compreso il tracciato della forma d'onda LECG).

### 3.13 Salvataggio e richiamo dei dati

Il programmatore consente di salvare su dischetto i dati interrogati del dispositivo da una sessione paziente. In un secondo momento, quando non è in corso alcuna sessione paziente, è possibile utilizzare l'applicazione Read From Disk del programmatore per recuperare e visualizzare i dati salvati sul dischetto.

#### 3.13.1 Salvataggio dei dati del dispositivo su un dischetto

##### 3.13.1.1 Preparazione al salvataggio dei dati su un dischetto

Il dischetto deve soddisfare i seguenti requisiti:

- deve essere un dischetto formattato e IBM compatibile da 3,5";
- deve inoltre avere una capacità di 720 KB (DS, DD) o 1,44 MB (DS, HD).

Se i dati vengono salvati su un dischetto danneggiato o non formattato IBM, il programmatore potrebbe non rispondere ai comandi. In tal caso, rimuovere il dischetto, poi spegnere e riaccendere il programmatore. Così facendo, il programmatore dovrebbe riprendere a funzionare normalmente. Informare il rappresentante locale della Medtronic dell'accaduto.

##### 3.13.1.2 Alcune considerazioni sul salvataggio dei dati del dispositivo su un dischetto

**Funzioni di emergenza durante il salvataggio** – Durante l'operazione di salvataggio, il pulsante [Emergenza] resta visualizzato e sono utilizzabili tutte le funzioni di emergenza. Tuttavia, un errore del dischetto durante il salvataggio può ritardare la visualizzazione delle schermate Emergenza. Pertanto, si consiglia di non salvare i dati su un dischetto durante gli studi EF oppure nel caso fosse necessario accedere tempestivamente alle funzioni di emergenza. In caso di utilizzo di una funzione di emergenza durante un'operazione di salvataggio, l'operazione di salvataggio viene interrotta.

**In primo luogo, eseguire un'interrogazione.** – Interrogare il dispositivo prima di salvare dati su un dischetto dal momento che il programmatore salva soltanto i dati che sono stati interrogati. Se si desidera salvare una registrazione di tutti i dati del dispositivo, selezionare l'opzione Tutti nella finestra di interrogazione. Selezionando l'opzione Tutti, si avranno più dati per l'analisi qualora fosse necessario esaminare a fondo un determinato aspetto.

##### 3.13.1.3 Come salvare i dati del dispositivo su un dischetto

1. Selezionare [Interroga...] per interrogare il dispositivo.
2. Selezionare Sessione > Salva su dischetto...

3. Inserire un dischetto nell'unità floppy del programmatore.
4. Selezionare [Salva].

Quando si seleziona [Fine sessione...], è disponibile anche l'opzione Salva su dischetto.

### 3.13.2 Recupero dei dati del dispositivo da un dischetto

Quando il programmatore legge i dati salvati durante una sessione paziente, le informazioni vengono visualizzate in sola lettura. In sola lettura, i dati vengono visualizzati in modo leggermente diverso rispetto ad una sessione in tempo reale. Non verrà visualizzato alcun monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale perché non si tratta di una sessione in tempo reale. Il monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale viene sostituito dal modello di dispositivo e dal messaggio Read From Disk. Quando l'applicazione Read From Disk è in esecuzione, il programmatore consente di visualizzare i dati salvati, stampare rapporti e visualizzare tutti i valori di parametro programmati.

#### 3.13.2.1 Alcune considerazioni sul recupero dei dati del dispositivo da un dischetto

**Avvertenza:** l'applicazione Read From Disk è destinata unicamente alla visualizzazione dei dati salvati quando non è in corso alcuna sessione paziente. Non è possibile programmare un dispositivo o erogare terapie di emergenza dall'applicazione Read From Disk.

**Test del dispositivo** – Non è possibile effettuare test del dispositivo durante la lettura dei dati da un dischetto.

#### 3.13.2.2 Come leggere i dati del dispositivo da un dischetto

1. Inserire un dischetto contenente i dati salvati durante una sessione paziente.
2. Dalla schermata Seleziona modello, selezionare la categoria di prodotto dall'elenco Visualizza.
3. Selezionare la versione Read From Disk del dispositivo.
4. Selezionare [Avvia].
5. Selezionare [OK] dopo aver letto il messaggio di avviso che segnala l'impossibilità di programmare un dispositivo e di effettuare operazioni di emergenza quando è attiva l'applicazione Read From Disk.
6. Selezionare [Apri file...].

7. Selezionare il record di dati contenente il numero di serie del dispositivo, la data e l'ora desiderati.
8. Selezionare [Apri file]. Nella schermata Read From Disk vengono visualizzate le informazioni relative alla sessione salvata.

## **3.14 Stampa di rapporti**

Il programmatore offre grande flessibilità per la stampa dei rapporti resi disponibili dal sistema. È possibile stampare rapporti informativi standard ed accedere alle funzioni di stampa in svariati modi. È anche possibile specificare quando stampare un determinato rapporto e quale stampante utilizzare.

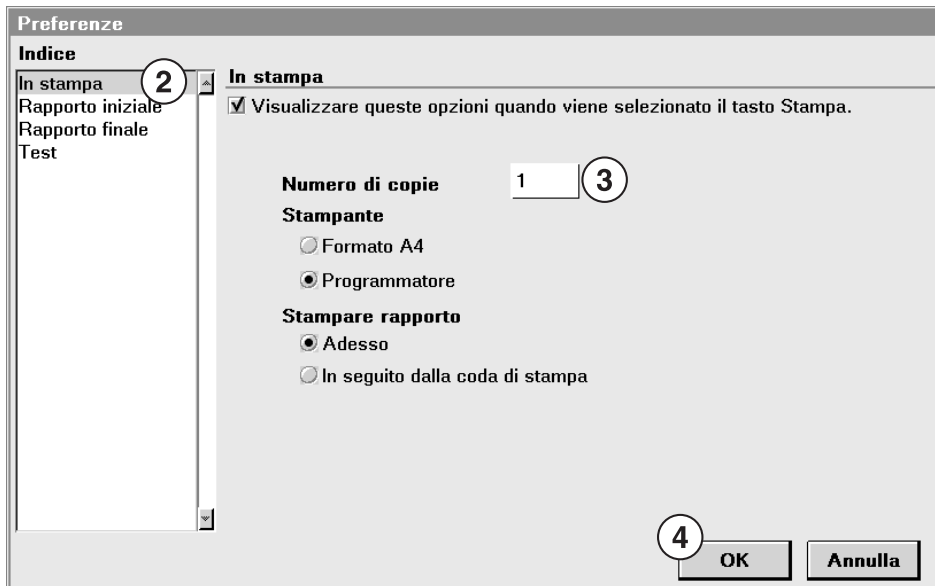
### **3.14.1 Impostazione delle preferenze di stampa**

Le preferenze di stampa consentono di selezionare le opzioni di stampa come il numero di copie, il tipo di stampante e di specificare se si desidera stampare subito o in un secondo momento.

Le preferenze di stampa vengono applicate automaticamente ogni volta che si seleziona il pulsante [Stampa...] o l'icona Stampa. Se si preferisce impostare le preferenze di stampa ogni volta che si stampa un rapporto, selezionare la casella di controllo accanto a "Visualizzare queste opzioni quando viene selezionato qualsiasi pulsante di stampa". Quando si seleziona questa casella di controllo, ogni volta che si seleziona il pulsante [Stampa...] o l'icona Stampa compare la finestra Opzioni di stampa.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una stampante esterna di dimensioni standard, cfr. la guida dell'utente relativa al programmatore della Medtronic in uso.

### 3.14.1.1 Come impostare le preferenze di stampa




1. Dopo l'inizio di una sessione paziente, selezionare Rapporti > Preferenze....
2. Dalla casella di selezione Indice, selezionare l'opzione In stampa.
3. Selezionare le preferenze di stampa desiderate.
4. Selezionare [OK].

Le preferenze di stampa generali diventano subito operative.

### 3.14.2 Stampa di un rapporto di interrogazione iniziale

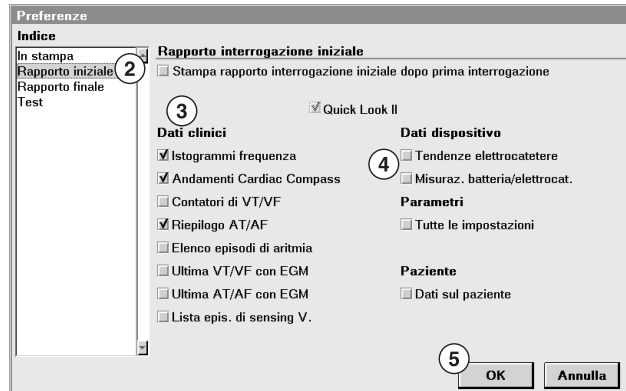Dopo la prima interrogazione durante una sessione paziente, il programmatore stampa automaticamente determinati rapporti se le preferenze Rapporto iniziale sono state impostate in tal senso. I rapporti stampati automaticamente dopo la prima interrogazione durante una sessione paziente vengono denominati collettivamente "Rapporto di interrogazione iniziale". Il rapporto Quick Look II fa sempre parte del rapporto di interrogazione iniziale. È anche possibile selezionare altri rapporti da stampare, facenti parte del rapporto di interrogazione iniziale.

### 3.14.2.1 Come impostare le preferenze del rapporto iniziale



1. Dopo l'inizio di una sessione paziente, selezionare Rapporti > Preferenze....
2. Dalla casella di selezione Indice, selezionare l'opzione Rapporto iniziale.
3. Selezionare la casella di controllo accanto a "Stampa rapporto interrogazione iniziale dopo prima interrogazione", se lo si desidera. Il rapporto viene stampato automaticamente all'inizio di una sessione paziente, dopo l'interrogazione del dispositivo.
4. Selezionare i rapporti aggiuntivi da inserire nel rapporto di interrogazione iniziale.
5. Selezionare [OK].
6. Per stampare un rapporto di interrogazione iniziale durante una sessione paziente in corso di svolgimento, terminare e poi riavviare la sessione. Il rapporto di interrogazione iniziale viene stampato automaticamente dopo l'interrogazione.

Le preferenze del rapporto iniziale avranno effetto all'inizio di una nuova sessione e resteranno attive finché non vengono modificate e non si avvia una nuova sessione.

### 3.14.3 Stampa di rapporti durante una sessione paziente

Il programmatore consente di specificare una determinata serie di rapporti da stampare e di stampare un rapporto in base a ciò che viene visualizzato sullo schermo.



### 3.14.3.1 Come stampare una serie personalizzata di rapporti



1. Per stampare una serie personalizzata di rapporti, selezionare Rapporti > Rapporti disponibili....
2. Selezionare i rapporti che si desidera stampare. Un rapporto può essere stampato solo se sono stati raccolti i relativi dati. In mancanza di tali dati, il nome del rapporto viene visualizzato in grigio.
3. Selezionare [Opzioni stampa...], se disponibile. In caso contrario, procedere con la Fase 5.
4. Selezionare le preferenze di stampa desiderate.
5. Selezionare [Stampa adesso] per una stampa immediata, oppure [Stampa in seguito] per aggiungere la richiesta alla coda di stampa.

### 3.14.3.2 Come stampare un rapporto da una determinata schermata del programmatore

1. Selezionare [Stampa...] o selezionare l'icona Stampa sullo schermo del programmatore.
2. Se compare la finestra Preferenze di stampa, selezionare le preferenze di stampa desiderate. Se la finestra Preferenze di stampa non viene visualizzata, il rapporto viene stampato secondo le preferenze di stampa precedentemente impostate.

### 3.14.4 Stampa di un rapporto riepilogativo per la sessione paziente

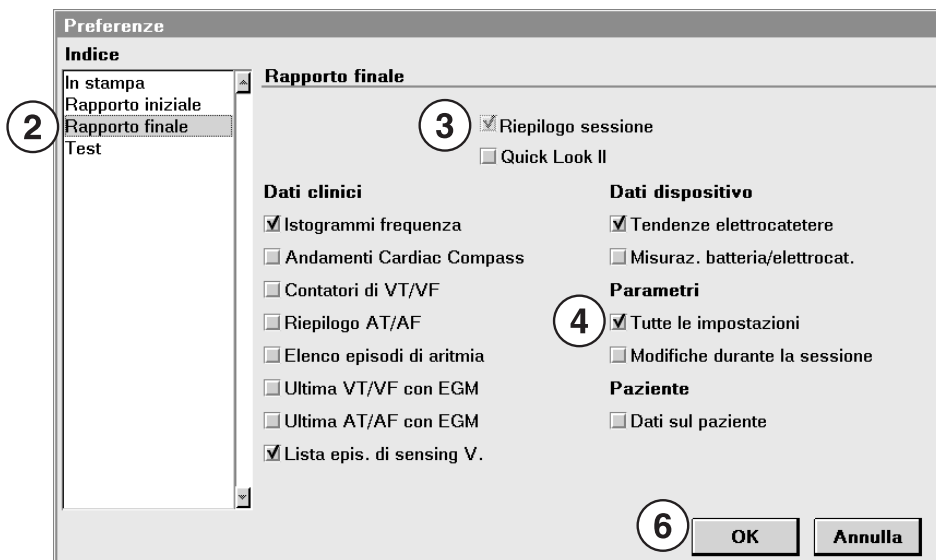
Al termine di una sessione paziente, il sistema consente di stampare un rapporto riepilogativo.

#### 3.14.4.1 Come stampare un rapporto riepilogativo per una sessione paziente

1. Selezionare Rapporti > Rapporto finale....
2. Se compare la finestra Preferenze di stampa, selezionare le preferenze di stampa desiderate. Se non viene visualizzata la finestra delle preferenze di stampa, il rapporto Riepilogo sessione e gli altri rapporti selezionati vengono stampati in base alle preferenze di stampa precedentemente impostate. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 3.14.4.2.

#### 3.14.4.2 Come impostare le preferenze di un rapporto finale

È possibile selezionare i rapporti che si desidera stampare facenti parte del rapporto finale. Quando si invia una richiesta di stampa del rapporto finale, viene sempre stampato il rapporto Riepilogo sessione.



1. Prima di terminare una sessione paziente, selezionare Sessione > Preferenze....
2. Dalla casella di selezione Indice, selezionare l'opzione Rapporto finale.

3. La casella di controllo Riepilogo sessione viene selezionata automaticamente e non può essere deselezionata. Ciò garantisce la stampa di almeno un rapporto quando si invia una richiesta di stampa del rapporto finale.
4. Se si impostano le preferenze di un rapporto finale per la prima volta, selezionare Parametri – Tutte le impostazioni.
5. Selezionare i rapporti aggiuntivi che si desidera includere nel rapporto finale.
6. Selezionare [OK].

**Nota:** le selezioni operate utilizzando la funzione Preferenze relativa ai rapporti finali resteranno valide per tutte le sessioni e per tutte le applicazioni.

Per stampare le selezioni effettuate utilizzando la funzione Preferenze sui rapporti finali, seguire la sequenza indicata nella Sezione 3.14.4.1.

### **3.14.5 Gestione della coda di stampa**

La finestra Coda di stampa indica lo stato di stampa dei rapporti selezionati per essere stampati man mano che si esegue una sessione paziente.

Quando si termina la sessione paziente, la finestra Coda di stampa resta visualizzata. In questa finestra vengono elencati i rapporti non stampati della sessione e delle sessioni precedenti.

#### **3.14.5.1 Come utilizzare la finestra Coda di stampa durante una sessione paziente**

All'inizio di una sessione paziente, la finestra Coda di stampa è vuota poiché in essa sono elencati solo i rapporti selezionati per essere stampati nella sessione corrente. Se si seleziona [Stampa in seguito], il rapporto resta nella coda di stampa.

Per visualizzare la finestra Coda di stampa durante una sessione paziente, selezionare Rapporti > Coda di stampa. Da questa finestra è possibile controllare lo stato dei lavori di stampa soltanto della sessione paziente corrente. Un lavoro di stampa presente in coda può essere stampato o cancellato. Non è possibile eliminare i rapporti il cui stato è "in stampa" o "in attesa".

### 3.14.5.2 Come utilizzare la finestra Coda di stampa quando non è in corso alcuna sessione paziente

La finestra Coda di stampa resta visualizzabile anche quando non è in corso alcuna sessione paziente. Per visualizzare la finestra Coda di stampa quando non si sta conducendo alcuna sessione paziente, selezionare l'icona Coda di stampa dalla schermata Seleziona modello. Nella finestra Coda di stampa vengono elencati i rapporti non stampati in una determinata sessione e nelle sessioni precedenti. Un lavoro di stampa presente in coda può essere stampato o cancellato. Non è possibile eliminare i rapporti il cui stato è "in stampa" o "in attesa".

### 3.14.5.3 Come interpretare la colonna Stato della coda di stampa

Nella colonna Stato della coda di stampa è elencato lo stato di stampa di ciascun rapporto da stampare tramite il programmatore:

Rapporti - Coda di stampa			
Paziente	Rapporto	Stampante	Stato
John Q. Patient	Istogrammi della frequenza	Formato A4	In coda
John Q. Patient	Rapporto del Cardiac Compass	Formato A4	In coda
John Q. Patient	Rapporto misurazioni batteria ed elettrocat.	Formato A4	In coda

**Stampante A4**            **Stampante programm.**  
 Stato:                      Pronta

- In stampa: è in corso la stampa di un rapporto.
- Elim. in corso: è in corso l'eliminazione di un rapporto (dopo aver selezionato il pulsante [Elimina]).
- In attesa: un rapporto è in attesa di essere stampato mentre è in corso la stampa di un altro rapporto.
- In coda: rapporto in attesa di essere stampato fino all'emissione della richiesta di stampa (utilizzando il pulsante [Stampa]). Lo stato In Coda potrebbe anche indicare che la stampa di un rapporto è stata interrotta dall'avvio di una registrazione o che la stampante non è in funzione (perché, ad esempio, ha esaurito la carta).
- Fatto: è stato stampato un rapporto.

## 4 Impianto del dispositivo

### 4.1 Preparazione per l'impianto

Le seguenti procedure di impianto vengono citate solo a scopo di riferimento. La correttezza dell'esecuzione delle procedure chirurgiche e delle tecniche sterili sono di responsabilità del medico. Ogni medico dovrà applicare le informazioni riportate nelle presenti istruzioni a seconda della propria formazione ed esperienza professionali.

Per informazioni sulla sostituzione di un dispositivo precedentemente impiantato, cfr. la Sezione 4.8, "Sostituzione di un dispositivo", pagina 116.

Assicurarsi di disporre di tutti gli strumenti, componenti di sistema ed accessori sterili necessari per eseguire l'impianto.

#### 4.1.1 Strumenti, componenti e accessori necessari per un impianto

Gli strumenti non impiantati descritti di seguito vengono utilizzati a supporto della procedura di impianto:

- Un programmatore Medtronic CareLink modello 2090 con collegamento telemetrico Conexus ed un Attivatore Conexus, oppure un programmatore Medtronic CareLink modello 2090 con testina di programmazione modello 2067 o 2067L
- Software applicativo modello 9995
- Analizzatore modello 2290 o analizzatore equivalente per la verifica del sistema di stimolazione
- defibrillatore esterno

I componenti di sistema e gli accessori sterili descritti di seguito vengono utilizzati per eseguire l'impianto:

- un dispositivo impiantabile ed i componenti del sistema di elettrocateri
- un manicotto per la testina di programmazione (se utilizzata)

**Nota:** se durante un impianto si utilizza una testina di programmazione sterilizzata, non è necessario utilizzare un manicotto sterile per la testina di programmazione.

- cavi dell'analizzatore del sistema di stimolazione
- introduttori per elettrocateri adatti al sistema di elettrocateri
- mandrini supplementari di lunghezza e forma idonee.

#### 4.1.2 Configurazione del programmatore ed avvio dell'applicazione

Per istruzioni sulla configurazione del programmatore, cfr. la guida di riferimento del programmatore. Il software modello 9995 deve essere installato nel programmatore. Stabilire il collegamento telemetrico con il dispositivo ed avviare una sessione di controllo del paziente.

#### 4.1.3 Considerazioni sulla preparazione per un impianto

Prima di impiantare gli elettrocatteteri o il dispositivo, leggere le seguenti informazioni:

**Avvertenza:** evitare che il paziente venga a contatto con apparecchiature elettriche collegate a terra che possono generare dispersioni di corrente durante l'impianto. Le dispersioni di corrente possono produrre tachiaritmie tali da causare il decesso del paziente.

**Avvertenza:** tenere a portata di mano un defibrillatore esterno per utilizzo immediato in caso di necessità. Durante il test del dispositivo, le procedure di impianto ed i test post-impianto possono verificarsi tachiaritmie spontanee o indotte potenzialmente dannose.

**Attenzione:** il dispositivo è destinato ad essere impiantato nella regione pettorale con elettrocatteteri transvenosi per la defibrillazione della Medtronic. L'impianto del dispositivo al di fuori della regione pettorale o l'utilizzo di un elettrocatteteri di defibrillazione epicardico anziché di un coil RV (HVB) può influire negativamente sui risultati delle misurazioni del fluido OptiVol. Nessuna richiesta relativa alla sicurezza e all'efficacia può essere avanzata in relazione ad altri sistemi di elettrocatteteri acuti o cronici impiantati non prodotti dalla Medtronic.

**Attenzione:** in caso di contatto tra i coil dell'elettrocatteteri e gli elettrodi Active Can durante una terapia ad alta tensione, il flusso di corrente può bypassare il cuore e danneggiare il dispositivo e gli elettrocatteteri. Quando il dispositivo è collegato agli elettrocatteteri, verificare che non vi siano elettrodi terapeutici, mandrini o fili guida a contatto o collegati tramite qualsiasi materiale in grado di condurre elettricità. Allontanare gli oggetti in materiale conduttivo (p. es., un filo guida impiantato) da tutti gli elettrodi prima di erogare uno shock ad alta tensione.

**Attenzione:** non impiantare il dispositivo oltre la data di scadenza ("non usare dopo il") riportata sull'etichetta posta sulla confezione. La durata della batteria può risultare ridotta.

#### 4.1.4 Preparazione del dispositivo all'impianto

Prima di aprire la confezione sterile, eseguire le operazioni seguenti per preparare il dispositivo all'impianto:

1. Interrogare il dispositivo. Stampare un rapporto di interrogazione iniziale.

**Attenzione:** se il programmatore registra un reset elettrico, non impiantare il dispositivo. Contattare un rappresentante della Medtronic.

2. Controllare il rapporto di interrogazione iniziale o la schermata Quick Look II per verificare che la tensione della batteria sia pari ad almeno 3,0 V a temperatura ambiente.

Se il dispositivo ha recentemente erogato una carica ad alta tensione oppure è stato esposto a basse temperature, la tensione della batteria sarà temporaneamente inferiore e il tempo di carica dei condensatori potrà aumentare. Lasciare che il dispositivo raggiunga la temperatura ambiente e ricontrollare la tensione della batteria. Qualora non fosse possibile raggiungere una tensione accettabile della batteria, contattare un rappresentante della Medtronic.

3. Selezionare Parametri > Impostazione raccolta dati > Data/ora dispositivo... per impostare l'orologio interno del dispositivo sulla data e sull'ora corrette.
4. Eseguire una ricarica manuale dei condensatori.
  - a. Scaricare la carica residua dai condensatori.
  - b. Eseguire un test di carica alla massima energia.
  - c. Acquisire i dati di carica.
  - d. Non scaricare la carica accumulata. Lasciare dissolvere la carica accumulata per almeno 10 min; tale dispersione ricarica i condensatori.
  - e. Qualora il tempo di carica riscontrato non fosse clinicamente accettabile, rivolgersi ad un rappresentante della Medtronic.
5. Programmare i parametri della terapia e della stimolazione su dei valori adeguati per il paziente. Accertarsi che il riconoscimento delle tachiaritmie non sia attivato.

**Note:**

- Non attivare alcuna funzione di stimolazione che influisce sulla frequenza di stimolazione (ad esempio, la stabilizzazione della frequenza ventricolare) prima di procedere all'impianto del dispositivo. In caso contrario, si può produrre una frequenza di stimolazione elevata più rapida del previsto.
- I dati sul paziente vengono generalmente inseriti al momento dell'impianto iniziale, benché possano essere modificati in qualsiasi momento.

## 4.2 Selezione ed impianto degli elettrocateri

Attenersi alle linee guida riportate in questa sezione per selezionare gli elettrocateri compatibili con il dispositivo. Le tecniche appropriate di impianto degli elettrocateri possono variare a seconda delle preferenze del personale medico e dell'anatomia o delle condizioni fisiche del paziente. Per istruzioni specifiche sull'impianto, consultare i manuali tecnici forniti a corredo degli elettrocateri.

### 4.2.1 Selezione degli elettrocateri

È possibile utilizzare elettrocateri transvenosi o epicardici. Non utilizzare alcun elettrocateri assieme al dispositivo senza aver prima verificato la compatibilità dell'elettrocateri e del connettore.

Il dispositivo viene solitamente impiantato con i seguenti elettrocateri:

- 1 elettrocateri transvenoso per il ventricolo sinistro (LV) per la stimolazione
- 1 elettrocateri transvenoso quadripolare/tripolare con un connettore triforcuto/biforcuto nel ventricolo destro (RV) per il sensing, la stimolazione e le terapie di cardioversione/defibrillazione
- 1 elettrocateri transvenoso bipolare nell'atrio (A) per il sensing e la stimolazione. Si consiglia di utilizzare un elettrocateri atriale bipolare con elettrodi ad anello ed in punta distanti  $\leq 10$  mm per ridurre il sensing del far field di onda R.

**Nota:** in caso di impianto di un elettrocateri di defibrillazione sottocutaneo, è necessario utilizzare un adattatore.

**Nota:** l'utilizzo di un elettrocateri di defibrillazione epicardico anziché di un elettrocateri a coil RV (HVB) può influire negativamente sui risultati delle misurazioni del fluido OptiVol.

### 4.2.2 Come verificare la compatibilità tra elettrocateri e connettore

**Avvertenza:** verificare la compatibilità di elettrocateri e connettori prima di utilizzare qualsiasi elettrocateri con questo dispositivo. L'utilizzo di un elettrocateri incompatibile può danneggiare il connettore, determinando una perdita di corrente elettrica o un collegamento elettrico intermittente.

**Nota:** gli elettrocateri low-profile della Medtronic da 3,2 mm non sono direttamente compatibili con il blocco connettore IS-1 del dispositivo.



**Nota:** se si utilizza un elettrocatetere che necessita di un adattatore per questo dispositivo, si prega di contattare il rappresentante locale della Medtronic per informazioni sugli adattatori per elettrocateteri compatibili.

Utilizzare le informazioni riportate nella Tabella 6 per selezionare un elettrocatetere compatibile.

**Tabella 6.** Compatibilità di elettrocateteri e connettori

Porta	Elettrocatetere primario
RV (HVB), SVC (HVX)	DF-1 <sup>a</sup>
A, RV, LV	IS-1 <sup>b</sup> bipolare

<sup>a</sup>DF-1 fa riferimento alla norma internazionale ISO 11318:2002.

<sup>b</sup>IS-1 fa riferimento alla norma internazionale ISO 5841-3:2000.

### 4.2.3 Impianto degli elettrocateteri

Impiantare gli elettrocateteri secondo le istruzioni riportate nei manuali tecnici forniti a correndo, a meno che non siano già stati impiantati elettrocateteri in cronico idonei.

**Avvertenza:** se l'elettrocatetere rimane schiacciato, il suo conduttore o l'isolamento possono danneggiarsi; ciò può portare a terapie ad alta tensione indesiderate o alla perdita di rilevamento o di una terapia di stimolazione.

**Elettrocateteri transvenosi** – Se si ricorre all'impianto di un elettrocatetere transvenoso per via succlavia, posizionare l'elettrocatetere lateralmente per evitare che il corpo dell'elettrocatetere rimanga fra la clavicola e la prima costola.

Non impiantare gli elettrocateteri LV, atriale, e RV nello stesso sito di accesso venoso. La Medtronic raccomanda di impiantare l'elettrocatetere LV attraverso la vena succlavia e gli elettrocateteri atriale e RV attraverso la vena cefalica.

**Elettrocateteri LV** – A causa della molteplicità di sistemi cardiaci venosi, è opportuno valutare l'anatomia venosa prima di procedere all'impianto dell'elettrocatetere LV per determinare un punto di impianto ottimale dello stesso. Eseguire un venogramma prima di inserire l'elettrocatetere nel seno coronarico.

**Elettrocateteri epicardici** – Per l'impianto di elettrocateteri epicardici si possono utilizzare diversi approcci chirurgici, compresa una toracotomia sinistra limitata o una sternotomia mediana. Si può utilizzare un patch anteriore destro ventricolare come il coil RV (HVB) ed un patch posterolaterale sinistro ventricolare come l'SVC (HVX).

## 4.3 Test del sistema di elettrocateteri

Dopo aver impiantato gli elettrocateteri, testare il sistema di elettrocateteri per verificare che i valori di sensing e di stimolazione siano accettabili.

### 4.3.1 Considerazioni sul test del sistema di elettrocateteri

**Elettrocateteri bipolari** – Quando si misurano i valori di sensing e stimolazione, occorre effettuare tale misurazione fra la punta (catodo) e l'anello o il coil (anodo) di ciascun elettrocatetere di stimolazione/sensing bipolare.

**Posizionamento dell'elettrocatetere** – Con il posizionamento finale dell'elettrocatetere, si dovrebbe tentare di ottimizzare sia la resincronizzazione cardiaca che la soglia di defibrillazione.

**Stimolazione extracardiaca** – Controllare la stimolazione extracardiaca da parte dell'elettrocatetere LV quando si eroga la stimolazione a 10 V utilizzando un dispositivo di stimolazione esterno. Se la stimolazione extracardiaca è presente, valutare l'eventuale riposizionamento dell'elettrocatetere.

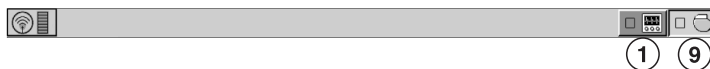
### 4.3.2 Come verificare e salvare i valori di sensing e di stimolazione

La Medtronic consiglia di utilizzare un Analizzatore modello 2290 per le misurazioni del sensing e della stimolazione. Quando la sessione con l'analizzatore e la sessione con il dispositivo sono entrambe in esecuzione, è possibile esportare le misurazioni dell'elettrocatetere salvate dalla sessione con l'analizzatore nei parametri Informazioni sui pazienti della sessione con il dispositivo. Per le procedure dettagliate di esecuzione delle misurazioni dell'elettrocatetere, consultare il manuale tecnico dell'analizzatore.

**Nota:** se si eseguono le misurazioni dell'elettrocatetere utilizzando uno strumento di supporto all'impianto diverso dall'Analizzatore modello 2290, è necessario immettere manualmente le misurazioni durante la sessione con il dispositivo.

**Nota:** per verificare il sensing, non misurare l'EGM intracardiaco telemetrizzato dal dispositivo.

1. Dalla sessione con il dispositivo, avviare una nuova sessione con l'analizzatore selezionando l'icona Analizzatore situata sulla barra delle applicazioni.



2. Misurare l'ampiezza dell'elettrogramma, lo slew rate e la soglia di cattura utilizzando un Analizzatore modello 2290.

- Utilizzare le informazioni riportate nella Tabella 7 per verificare che i valori misurati siano accettabili.

**Nota:** la misura dell'impedenza dell'elettrocatteter di stimolazione riflette la tecnologia dell'elettrocatteter e dell'apparecchiatura di misurazione. Per un elenco dei valori di impedenza accettabili, consultare il manuale tecnico dell'elettrocatteter.

- Selezionare [Salva...] in fondo alla colonna corrispondente all'elettrocatteter che si sta testando.
- Nel campo Elettrocatteter, selezionare il tipo di elettrocatteter che si sta testando e selezionare successivamente [Salva].
- Selezionare [Vista valori salvati...].
- Selezionare le misurazioni salvate che si desidera esportare. È possibile selezionare una misurazione per ciascun tipo di elettrocatteter.
- Selezionare [Esporta] e [Chiudi]. Le misurazioni selezionate verranno esportate nel campo Impianto... della schermata Dati sul paziente nella sessione con il dispositivo.
- Selezionare l'icona Dispositivo sulla barra delle applicazioni per tornare alla sessione con il dispositivo.
- Selezionare Paziente > Dati sul paziente, quindi [Programma] per programmare i valori importati nella memoria del dispositivo.

**Tabella 7.** Valori di sensing e di stimolazione accettabili

Misurazioni necessarie	Elettrocatteteri transvenosi in acuto	Elettrocatteteri in cronico <sup>a</sup>
Ampiezza dell'EGM dell'onda P (atriale)	≥ 2 mV	≥ 1 mV
Ampiezza dell'EGM dell'onda R (RV)	≥ 5 mV	≥ 3 mV
Ampiezza dell'EGM LV	≥ 3 mV	≥ 1 mV
Slew rate	≥ 0,5 V/s (atriali) ≥ 0,75 V/s (RV)	≥ 0,3 V/s (atriali) ≥ 0,5 V/s (RV)
Soglia di cattura (durata dell'impulso pari a 0,5 ms)	≤ 1,5 V (atriali) ≤ 1,0 V (RV) ≤ 3,0 V (LV)	≤ 3,0 V (atriali) ≤ 3,0 V (RV) ≤ 4,0 V (LV)

<sup>a</sup> Gli elettrocatteteri in cronico sono elettrocatteteri impiantati per 30 o più giorni.

## 4.4 Collegamento degli elettrocatteteri al dispositivo

La procedura descritta di seguito illustra in che modo collegare un elettrocattetero al dispositivo, verificare che il connettore dell'elettrocattetero sia completamente inserito nel blocco del connettore e verificare che il collegamento degli elettrocatteteri sia corretto.


**Avvertenza:** dopo avere collegato gli elettrocatteteri, verificare che i collegamenti siano corretti tirando delicatamente ciascun elettrocattetero. Un collegamento allentato degli elettrocatteteri può determinare un sensing inappropriato con conseguente erogazione di una terapia antiaritmica inappropriata o la mancata erogazione di una terapia antiaritmica.

**Attenzione:** se non è stato impiantato alcun elettrodo SVC, assicurarsi che lo spinotto fornito a corredo del dispositivo venga inserito nell'uscita SVC per evitare dispersioni di corrente.

**Attenzione:** utilizzare unicamente il cacciavite torsiometrico fornito a corredo con il dispositivo. Il cacciavite torsiometrico è stato progettato per prevenire eventuali danni al dispositivo causati dall'eccessivo serraggio di una vite di arresto.

Per informazioni sulle porte di connessione dell'elettrocattetero del dispositivo, cfr. la Figura 19.

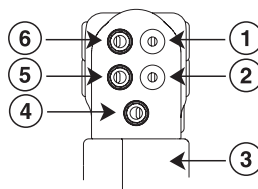**Figura 19.** Porte di connessione dell'elettrocattetero



- |                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1 Porta DF-1, SVC (HVX)                             | 4 Porta IS-1, LV |
| 2 Porta DF-1, RV (HVB)                              | 5 Porta IS-1, RV |
| 3 Elettrodo Active Can del dispositivo, Cassa (HVA) | 6 Porta IS-1, A  |


### 4.4.1 Come collegare un elettrocattetero al dispositivo

**Nota:** per facilitare il collegamento dell'elettrocattetero, inserire per primo l'elettrocattetero LV IS-1 nel blocco del connettore.

1. Posizionare il cacciavite torsiometrico sulla vite di fissaggio appropriata.
  - a. Se la porta è ostruita dalla vite di fissaggio, svitare la vite girandola in senso antiorario fino all'avvenuto sblocco della porta. Fare attenzione a non staccare la vite di fissaggio dal blocco del connettore (cfr. la Figura 20).
  - b. Lasciare il cacciavite torsiometrico sulla vite di fissaggio fino all'avvenuto fissaggio del collegamento. In questo modo si crea uno sfiato dell'aria quando viene inserito il connettore dell'elettrocattetere nella porta (cfr. la Figura 20).


**Figura 20.** Posizionamento del cacciavite torsiometrico sulla vite di fissaggio

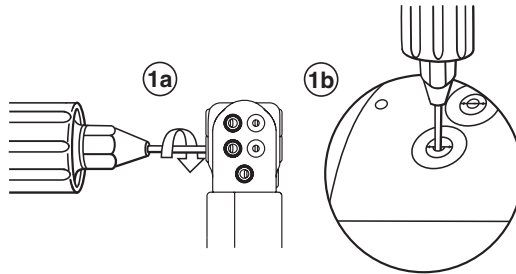---



2. Spingere il connettore dell'elettrocattetere o lo spinotto nella porta finché il pin di connessione dell'elettrocattetere non risulti chiaramente visibile. Se necessario, è possibile utilizzare acqua sterile come lubrificante. Non è necessario utilizzare del sigillante.
3. Verificare che l'elettrocattetere sia stato completamente inserito nella cavità del pin del connettore osservando il blocco del connettore del dispositivo da un lato o da un'estremità.
  - a. Il pin di connessione dell'elettrocattetere deve essere chiaramente visibile oltre il blocco della vite di fissaggio (cfr. la Figura 21).
  - b. L'anello del connettore dell'elettrocattetere deve trovarsi completamente all'interno del blocchetto contatti a molla. In questo punto non vi sono viti di arresto (cfr. la Figura 21).

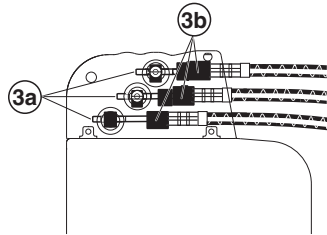**Figura 21.** Verifica del collegamento degli elettrocateri



4. Serrare la vite di fissaggio ruotandola in senso orario finché il cacciavite torsiometrico non scatta. Rimuovere il cacciavite torsiometrico.
5. Tirare leggermente l'elettrocatero per verificare che sia fissato correttamente. Non tirare l'elettrocatero prima di aver serrato la vite di fissaggio.
6. Ripetere le operazioni summenzionate per ciascun elettrocatero.

## 4.5 Esecuzione dei test della soglia di defibrillazione ventricolare

Per testare il funzionamento della defibrillazione ventricolare e l'efficacia del sistema di elettrocateri impiantato, indurre la VF utilizzando T-Shock o il metodo Burst a 50 Hz e consentire al dispositivo di rilevare e trattare la VF con le terapie automatiche programmate. Seguire le istruzioni relative al metodo preferito per verificare l'effettiva presenza di un adeguato margine di sicurezza per il sensing e di un adeguato margine di sicurezza per la defibrillazione.

### 4.5.1 Valori di impianto ad alta tensione

Per informazioni sui valori della terapia ad alta tensione misurati e consigliati all'impianto, cfr. la Tabella 8.

**Tabella 8.** Valori consigliati per la terapia ad alta tensione al momento dell'impianto

Misurazione	Elettrocateri in acuto o in cronico
Impedenza del percorso di erogazione ad alta tensione	20–200 $\Omega$
Soglia di defibrillazione	$\leq 25$ J

#### 4.5.2 Preparazione per il test della soglia di defibrillazione

**Avvertenza:** tenere a portata di mano un defibrillatore esterno per utilizzo immediato in caso di necessità. Durante il test del dispositivo, le procedure di impianto ed i test post-impianto possono verificarsi tachiaritmie spontanee o indotte potenzialmente dannose.

1. Stabilire il collegamento telemetrico tra dispositivo e programmatore ed avviare una sessione di controllo del paziente. Se si utilizza un collegamento telemetrico wireless, verificare che almeno 3 delle spie verdi presenti nell'icona della telemetria wireless siano illuminate. Interrogare il dispositivo se non lo si è ancora fatto.
2. Selezionare l'icona Parametri, quindi il campo Terapie VF ed infine [Impostazioni condivise...]. Programmare il parametro Active Can/Coil SVC su On oppure Off, in base alle necessità del paziente.
3. Osservare le annotazioni Marker Channel per controllare che il sensing da parte del dispositivo sia adeguato.
4. Eseguire un test manuale dell'impedenza dell'elettrocattetero per verificare i collegamenti degli elettrocatteteri di defibrillazione. Eseguire questo test con il dispositivo nella tasca chirurgica. Mantenere la tasca chirurgica molto umida. Se l'impedenza dell'elettrocattetero è fuori range, eseguire una (o più) delle seguenti operazioni:
  - ricontrollare i collegamenti degli elettrocatteteri ed il posizionamento dell'elettrodo dell'elettrocattetero
  - controllare l'EGM per accertarsi che non presenti anomalie
  - ripetere il test manuale di impedenza dell'elettrocattetero

#### 4.5.3 Esecuzione del test della soglia di defibrillazione con T-Shock

1. Selezionare Test > Studio EF.
2. Selezionare T-Shock dall'elenco di funzioni Studio EF.

3. Verificare che sia stata selezionata la casella di controllo Ripristino all'erogazione, in modo tale che il riconoscimento delle aritmie venga ripristinato dopo l'erogazione di un'induzione.

**Nota:** durante una sessione di telemetria wireless, non è possibile erogare un'induzione T-Shock quando si posiziona un magnete o una testina di programmazione sopra il dispositivo e si seleziona la casella di controllo Ripristino all'erogazione. In caso di visualizzazione di un messaggio di errore, rimuovere il magnete o la testina di programmazione o deselectare la casella di controllo Ripristino all'erogazione.

4. Selezionare [Regol. Permanente...].
5. Impostare il parametro Energia per la Terapia VF Rx1 su un valore inferiore di 10 J rispetto al valore finale programmato desiderato. Impostare le Terapie VF Rx2-Rx6 sul valore massimo.
6. Impostare il parametro Sensibilità RV su un valore che determini un margine di sicurezza adeguato per rilevare la VF. In caso di programmazione finale della Sensibilità RV su un valore di 0,3 mV, per ottenere un margine di sicurezza adeguato di solito basta impostare il valore su 1,2 mV durante il test.
7. Programmare Attivazione VF su On.
8. Selezionare [PROGRAMMA].
9. Selezionare [Chiudi].
10. Selezionare la casella di controllo Attivazione.
11. Selezionare [EROGA T-Shock]. Se necessario, selezionare [INTERROMPI] per interrompere l'induzione o qualsiasi terapia in corso.
12. Osservare il monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale per accertarsi che il riconoscimento, la terapia ed il sensing post-shock siano corretti.
13. Per rivedere i dati memorizzati per l'episodio indotto, selezionare [Recupero dati...]. Per visualizzare maggiori dettagli, stampare un rapporto Ultima VT/VF con EGM oppure selezionare Dati > Diagnostica clinica > Episodi aritmici per visualizzare i dati sul programmatore.
14. Selezionare [Regol. Permanente...] per programmare un nuovo livello di energia per la Terapia VF Rx1 o cambiare percorso, se lo si desidera.
15. Attendere che il timer sullo schermo indichi 5 min, quindi ripetere le operazioni da Fase 10 a Fase 15 in base alle necessità.
16. Selezionare l'icona Parametri e disattivare VF, FVT e Riconoscimento di VT prima di chiudere la tasca.



#### 4.5.4 Esecuzione del test della soglia di defibrillazione con Burst a 50 Hz

1. Selezionare Test > Studio EF.
2. Selezionare Burst a 50 Hz dall'elenco delle funzioni Studio EF.
3. Selezionare [RV] se viene visualizzata la finestra Selezionare camera. Altrimenti, impostare il parametro Camera sul valore ventricolare desiderato.
4. Verificare che la casella di controllo Ripristino al BURST sia selezionata, in modo tale da ripristinare il riconoscimento delle aritmie dopo l'erogazione di un'induzione.

**Nota:** durante una sessione di telemetria wireless, non è possibile erogare un'induzione Burst a 50 Hz quando si posiziona un magnete o una testina di programmazione sopra il dispositivo e si seleziona la casella di controllo Ripristino al BURST. In caso di visualizzazione di un messaggio di errore, rimuovere il magnete o la testina di programmazione o deselezionare la casella di controllo Ripristino al BURST.

5. Selezionare [Regol. Permanente...].
6. Impostare il parametro Energia per la Terapia VF Rx1 su un valore inferiore di 10 J rispetto al valore finale programmato desiderato. Impostare le Terapie VF Rx2-Rx6 sul valore massimo.
7. Impostare il parametro Sensibilità RV su un valore che determini un margine di sicurezza adeguato per rilevare la VF. In caso di programmazione finale della Sensibilità RV su un valore di 0,3 mV, per ottenere un margine di sicurezza adeguato di solito basta impostare il valore su 1,2 mV durante il test.
8. Programmare Attivazione VF su On.
9. Selezionare [PROGRAMMA].
10. Selezionare [Chiudi].
11. Premere e tenere premuto il pulsante [BURST A 50 Hz Premere e tenere premuto]. Rimuovere la penna ottica dal pulsante [BURST a 50 Hz Premere e tenere premuto] per interrompere automaticamente l'induzione o la terapia.
12. Osservare il monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale per accertarsi che il riconoscimento, la terapia ed il sensing post-shock siano corretti.
13. Per rivedere i dati memorizzati per l'episodio indotto, selezionare [Recupero dati...]. Per visualizzare maggiori dettagli, stampare un rapporto Ultima VT/VF con EGM oppure selezionare Dati > Diagnostica clinica > Episodi aritmici per visualizzare i dati sul programmatore.
14. Selezionare [Regol. Permanente...] per programmare un nuovo livello di energia per la Terapia VF Rx1 o cambiare percorso, se lo si desidera.

15. Attendere che il timer sullo schermo indichi 5 min, quindi ripetere le operazioni da Fase 11 a Fase 15 in base alle necessità.
16. Selezionare l'icona Parametri e disattivare VF, FVT e Riconoscimento di VT prima di chiudere la tasca.

## 4.6 Posizionamento e fissaggio del dispositivo

**Attenzione:** se non è stato impiantato alcun elettrodo SVC, assicurarsi che lo spinotto fornito a corredo del dispositivo venga inserito nell'uscita SVC per evitare dispersioni di corrente.

**Attenzione:** programmare il riconoscimento delle tachiaritmie su Off o Monitoraggio per evitare un riconoscimento inappropriato o l'erogazione inappropriata di una terapia durante la chiusura della tasca.

**Nota:** impiantare il dispositivo ad una distanza non superiore a 5 cm dalla superficie cutanea per agevolare il controllo ambulatoriale post-impianto. Il lato del dispositivo su cui è inciso il logo Medtronic dovrebbe essere rivolto verso la cute, in modo tale che i segnali acustici risultino maggiormente udibili al paziente.

### 4.6.1 Posizionamento e fissaggio del dispositivo

1. Verificare che ogni pin di connessione dell'elettrocattetero o spinotto sia inserito a fondo nella porta e che tutte le viti di arresto siano serrate.
2. Per evitare l'avvolgimento del corpo dell'elettrocattetero, ruotare il dispositivo per avvolgere senza tirare il tratto di elettrocattetero in eccesso (cfr. la Figura 22). Non attorcigliare il corpo dell'elettrocattetero.


**Figura 22.** Rotazione del dispositivo per l'avvolgimento degli elettrocatteteri



3. Inserire il dispositivo e gli elettrocatteteri nella tasca chirurgica.

4. Utilizzare punti di sutura non assorbibili per fissare il dispositivo all'interno della tasca, in modo da ridurre al minimo la rotazione e la migrazione post-impianto. Utilizzare un ago chirurgico per penetrare nei fori per sutura presenti sul dispositivo (cfr. la Figura 23).

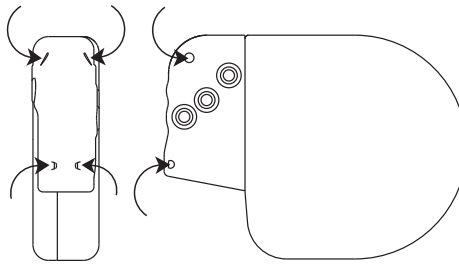**Figura 23.** Individuazione dei fori per sutura



5. Richiudere l'incisione della tasca suturandola.

## 4.7 Completamento della procedura di impianto

**Avvertenza:** non attivare la funzione Altre SVT 1:1 fino all'avvenuta stabilizzazione dell'elettrocateretere atriale (circa 1 mese dopo l'impianto). In caso di spostamento e migrazione nel ventricolo da parte dell'elettrocateretere atriale, la funzione Altre SVT 1:1 potrebbe inibire in maniera inappropriata il riconoscimento e la terapia.

**Avvertenza:** non attivare il riconoscimento di AT/AF o le terapie ATP atriali automatiche fino all'avvenuta maturazione dell'elettrocateretere atriale (circa 1 mese dopo l'impianto). In caso di spostamento e migrazione nel ventricolo da parte dell'elettrocateretere atriale, il dispositivo potrebbe rilevare in maniera inappropriata l'AT/AF, erogare un'ATP atriale al ventricolo ed indurre eventualmente una tachiaritmia ventricolare con possibili conseguenze fatali.

### 4.7.1 Come completare la programmazione del dispositivo

1. Attivare il riconoscimento delle tachiaritmie e le terapie per tachiaritmia desiderate.
2. Eseguire un'induzione finale di VF e lasciare che il sistema impiantato rilevi e tratti la tachiaritmia.
3. Verificare che i parametri della stimolazione, del riconoscimento e della terapia siano stati programmati su dei valori appropriati per il paziente.

4. Immettere le informazioni sul paziente.
5. Configurare la funzione Medtronic CareAlert.
6. Programmare i parametri relativi all'impostazione della raccolta dei dati.

#### 4.7.2 Analisi delle prestazioni del dispositivo e degli elettrocateteri

Dopo aver impiantato il dispositivo, eseguire al più presto una radiografia del paziente per verificare il posizionamento del dispositivo e dell'elettrocatetere. Prima che il paziente venga dimesso dall'ospedale, valutare le prestazioni del dispositivo e degli elettrocateteri impiantati.

1. Controllare il tracciato elettrocardiografico del paziente fino alla sua dimissione. L'eventuale dislocazione di un elettrocatetere avviene solitamente nell'immediato periodo post-operatorio.
2. In caso di attivazione di una o più terapie per tachiaritmia mentre il paziente si trova in ospedale, interrogare il dispositivo dopo ogni episodio spontaneo per valutare i parametri di riconoscimento e della terapia.
3. Se il paziente non ha avuto episodi spontanei, è possibile indurre una tachiaritmia clinica con le funzioni di studio EF non invasive per valutare ulteriormente le prestazioni del sistema.
4. Controllare i valori di stimolazione e sensing e, se necessario, modificarli.
5. Eseguire una prova con i segnali acustici Medtronic CareAlert.
6. Interrogare il dispositivo e stampare un Rapporto finale per documentare lo stato post-operatorio del dispositivo programmato.

### 4.8 Sostituzione di un dispositivo

**Avvertenza:** tenere a portata di mano un apparecchio esterno di defibrillazione e stimolazione da utilizzare subito in caso di necessità. Quando l'elettrocatetere è scollegato, il dispositivo non eroga alcuna terapia di defibrillazione o di stimolazione al paziente.

**Attenzione:** disattivare il riconoscimento delle tachiaritmie per evitare l'erogazione inappropriata della terapia durante l'espanto del dispositivo.

**Nota:** a seconda dei criteri dell'impianto, può essere necessario dover riposizionare o sostituire gli elettrocateteri in cronico oppure aggiungere un terzo elettrodo ad alta tensione. Per ulteriori informazioni consultare la Sezione 4.2, "Selezione ed impianto degli elettrocateteri", pagina 104.

**Nota:** gli elettrocateri inutilizzati che restano impiantati devono essere coperti con appositi cappucci per pin di elettrocateri per evitare la trasmissione di segnali elettrici. Per informazioni sui cappucci per pin di elettrocateri, si prega di contattare il rappresentante locale della Medtronic.

#### 4.8.1 Espianto e sostituzione di un dispositivo

1. Disattivare il riconoscimento delle tachiaritmie per evitare l'erogazione di shock potenzialmente inappropriati al paziente o a chi esegue l'impianto durante l'espianto del dispositivo.
2. Programmare il dispositivo su un modo che non sia a risposta in frequenza per evitare potenziali aumenti di frequenza durante l'espianto.
3. Staccare gli elettrocateri ed il dispositivo dalla tasca chirurgica. Fare attenzione a non danneggiare o rompere il rivestimento isolante dell'elettrocateri.
4. Utilizzare un cacciavite torsiometrico per allentare le viti di arresto presenti nel blocco del connettore.
5. Estrarre delicatamente gli elettrocateri dalle porte.
6. Esaminare le condizioni di ciascun elettrocateri (cfr. la Sezione 4.3, "Test del sistema di elettrocateri", pagina 106). Sostituire l'elettrocateri nel caso in cui l'integrità elettrica non dovesse essere accettabile o il pin di connessione dell'elettrocateri fosse bucherellato o corrosivo. In caso di espianto dell'elettrocateri, restituirlo alla Medtronic che provvederà ad analizzarlo e smaltirlo.
7. Collegare gli elettrocateri al dispositivo sostitutivo (cfr. la Sezione 4.4, "Collegamento degli elettrocateri al dispositivo", pagina 108).

**Nota:** per collegare gli elettrocateri al dispositivo sostitutivo potrebbero rendersi necessari degli adattatori per elettrocateri. Per informazioni sugli adattatori per elettrocateri compatibili, contattare un rappresentante della Medtronic.

8. Valutare l'efficacia della defibrillazione utilizzando il dispositivo sostitutivo (cfr. la Sezione 4.5, "Esecuzione dei test della soglia di defibrillazione ventricolare", pagina 110).
9. Posizionare e fissare il dispositivo nella tasca chirurgica e chiudere l'incisione della tasca suturandola (cfr. la Sezione 4.6, "Posizionamento e fissaggio del dispositivo", pagina 114).
10. Restituire il dispositivo espantato e qualsiasi elettrocateri espantato alla Medtronic, che provvederà ad analizzarli e smaltirli.

## 5 Svolgimento di una sessione di follow-up del paziente

### 5.1 Linee guida per il follow-up del paziente

Programmare delle sessioni regolari di follow-up del paziente durante la vita utile del dispositivo. La prima sessione di follow-up dovrebbe avere luogo entro settantadue ore dall'impianto in modo tale da verificare l'eventuale spostamento dell'elettrocatteter, la cicatrizzazione della ferita e le complicazioni post-operatorie nel paziente.

Nei primi mesi dopo l'impianto, occorre monitorare attentamente il paziente. Programmare delle sessioni di follow-up almeno ogni tre mesi per monitorare le condizioni del paziente, del dispositivo e degli elettrocatteteri e per verificare che il dispositivo sia configurato in maniera appropriata per il paziente.

#### 5.1.1 Strumenti per il follow-up

Il sistema offre numerosi strumenti appositamente studiati per aumentare l'efficienza delle sessioni di follow-up.

**Schermata Quick Look II** – La schermata Quick Look II viene visualizzata all'avvio dell'applicazione del programmatore e fornisce una panoramica degli indicatori più importanti relativi al funzionamento del sistema ed alle condizioni del paziente. Le osservazioni Quick Look II sono in grado di segnalare eventuali situazioni che possono rendere necessaria un'ulteriore analisi.

Dalla schermata Quick Look II si possono eseguire le seguenti operazioni:

- Valutare il corretto funzionamento del dispositivo.
- Verificare che il dispositivo stia erogando stimolazione biventricolare nella maggior parte dei casi o sempre.
- Consultare un riepilogo degli indicatori più importanti relativi al funzionamento del sistema ed alle condizioni del paziente.
- Leggere eventuali osservazioni presenti nella finestra Osservazioni.

È possibile confrontare le informazioni presenti sulla schermata Quick Look II con i dati relativi al paziente contenuti nei rapporti stampati. Per informazioni sui rapporti stampati, vedere la Sezione 3.14, "Stampa di rapporti", pagina 94. I rapporti stampati dovranno essere conservati nella cartella clinica del paziente per ogni riferimento futuro.

**Checklist** – La funzione Checklist fornisce un elenco standard di operazioni da eseguire durante una sessione di follow-up. Le liste di controllo possono anche essere

personalizzate. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 3.6, “Ottimizzazione delle sessioni di impianto e follow-up con la funzione Lista di controllo”, pagina 60.

**Leadless ECG (LECG)** – Il Leadless ECG è stato appositamente studiato per semplificare ed accelerare le sessioni di follow-up dei pazienti ed offrire un’alternativa per l’ottenimento di un segnale ECG senza dover necessariamente collegare elettrocateteri di superficie al paziente. È possibile visualizzare il tracciato della forma d’onda Leadless ECG nella finestra di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale. La funzione Leadless ECG è utilizzabile sia in clinica che in remoto. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 3.12, “Come accelerare le sessioni di follow-up con il Leadless ECG”, pagina 91.

**Rapporto del Cardiac Compass** – Il Rapporto del Cardiac Compass fornisce un quadro delle condizioni del paziente negli ultimi quattordici mesi. Il rapporto include grafici che mostrano le tendenze della frequenza delle aritmie, il volume di attività fisica, le frequenze cardiache e le terapie erogate dal dispositivo. Le date e le annotazioni degli eventi consentono di correlare le tendenze ricavate da grafici diversi. Il rapporto serve anche a valutare l’efficacia delle terapie erogate dal dispositivo o delle terapie farmacologiche. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 5.4, “Visualizzazione delle tendenze cliniche a lungo termine con il Rapporto del Cardiac Compass”, pagina 138.

### 5.1.2 Controllo del ritmo cardiaco manifesto

Il ritmo cardiaco manifesto può indicare la presenza di undersensing, oversensing in campo lontano o di una perdita di cattura. Si tratta di problemi di stimolazione generali che possono influenzare l’erogazione della terapia. Questi problemi possono essere spesso risolti apportando modifiche alla programmazione di base.

Controllare il ritmo cardiaco manifesto osservando il monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale e stampando i tracciati EGM e Marker Channel. Se si rilevano problemi legati al ritmo cardiaco manifesto del paziente, rivedere le impostazioni del dispositivo e riprogrammarlo con valori appropriati per il paziente.

### 5.1.3 Verifica dello stato del sistema impiantato

Per verificare il corretto funzionamento del dispositivo e degli elettrocateteri, rivedere le informazioni sullo stato del dispositivo e degli elettrocateteri ed i dati relativi alle tendenze degli elettrocateteri presenti nella schermata Quick Look II.

Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione e l’interpretazione di tutte le informazioni presenti nella schermata Quick Look II, cfr. la Sezione 5.2, “Visualizzazione di un riepilogo dei dati memorizzati di recente”, pagina 123.

### 5.1.3.1 Come controllare gli indicatori della tensione della batteria e dello stato del dispositivo

**Avvertenza:** se sul programmatore si attiva l'indicatore di fine servizio (EOS), sostituire immediatamente il dispositivo. Dopo l'attivazione dell'indicatore EOS, il dispositivo può perdere la capacità di stimolare, rilevare ed erogare terapie in maniera adeguata.

1. Rivedere il valore della tensione della batteria e confrontarlo con il momento consigliato per la sostituzione (RRT). Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione A.3, "Indicatori di sostituzione", pagina 444.

**Nota:** se nelle ultime 24 ore si è verificata una carica ad alta tensione, si potrebbe riscontrare un calo temporaneo della tensione della batteria visualizzata.

2. Controllare il tempo di carica relativo all'ultima carica alla massima energia. Cambiando la frequenza di ricarica automatica dei condensatori, è possibile ridurre il tempo di carica del dispositivo. Per informazioni sulla modifica dell'intervallo tra una ricarica e l'altra dei condensatori, vedere la Sezione 9.9, "Ottimizzazione del tempo di carica con la funzione Ricarica automatica dei condensatori", pagina 415.

### 5.1.3.2 Come valutare le prestazioni del dispositivo e degli elettrocateri

1. Per controllare le tendenze relative all'impedenza di stimolazione, alla soglia di cattura LV e all'ampiezza delle onde P e R, selezionare il pulsante [>>] situato accanto ai grafici sulle tendenze degli elettrocateri nella schermata Quick Look II. Il programmatore visualizza una cronologia dettagliata delle misurazioni automatiche di impedenza, soglia di cattura e sensing. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dei dati sull'andamento delle prestazioni degli elettrocateri, vedere la Sezione 5.9, "Visualizzazione di dati dettagliati sulle prestazioni del dispositivo e degli elettrocateri", pagina 162.
2. Se si desidera anche raccogliere informazioni in tempo reale sulle prestazioni del dispositivo e degli elettrocateri durante la sessione di follow-up, è possibile eseguire i seguenti test:
  - Test di impedenza degli elettrocateri: mette a confronto i risultati del test e le misurazioni precedenti dell'impedenza degli elettrocateri per stabilire se vi siano state variazioni significative dall'ultima sessione di follow-up. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 10.3, "Misurazione dell'impedenza degli elettrocateri", pagina 423.
  - Test di sensing: mette a confronto i risultati del test e le misurazioni precedenti dell'ampiezza delle onde P e delle onde R. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 10.4, "Esecuzione di un test di sensing", pagina 424.



- Test della soglia di stimolazione: consente di rivedere le soglie di cattura del paziente. Stabilire le impostazioni appropriate relative all'ampiezza ed alla durata dell'impulso per garantire la cattura e massimizzare la durata della batteria. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 10.2, "Misurazione delle soglie di stimolazione", pagina 420.

### **5.1.4 Verifica dell'efficacia clinica del sistema impiantato**

Per sapere se il dispositivo stia fornendo un supporto clinico adeguato al paziente, è possibile utilizzare le informazioni presenti nella schermata Quick Look II e nei rapporti stampati.

#### **5.1.4.1 Come valutare l'efficacia della terapia di stimolazione erogata**

1. Interrogare il paziente per accertarsi che stia ricevendo un supporto cardiaco adeguato per le attività quotidiane.
2. Controllare le percentuali di stimolazione nella schermata Quick Look II e stampare un rapporto sugli istogrammi della frequenza.
3. Stampare e rivedere il Rapporto del Cardiac Compass confrontandolo con l'anamnesi del paziente. Grazie alle tendenze Cardiac Compass, è possibile stabilire se si sono verificate variazioni nelle attività del paziente, nelle terapie di stimolazione e nelle aritmie negli ultimi quattordici mesi. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 5.4, "Visualizzazione delle tendenze cliniche a lungo termine con il Rapporto del Cardiac Compass", pagina 138.

**Nota:** il rapporto sugli istogrammi della frequenza consente inoltre di valutare la cronologia di stimolazione e sensing del paziente.

#### **5.1.4.2 Come valutare l'accuratezza del riconoscimento delle tachiaritmie**

Grazie a registrazioni diagnostiche degli episodi, il sistema consente di classificare con accuratezza le tachiaritmie del paziente. Rivedere le registrazioni degli episodi di tachiaritmia dall'ultima sessione e le osservazioni Quick Look II. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 5.5, "Visualizzazione dei dati sugli episodi aritmici e impostazione delle preferenze per la raccolta dati", pagina 144.

**Erronea identificazione di un evento** – Se dalle registrazioni degli episodi risulta che il dispositivo ha riconosciuto erroneamente il ritmo del paziente, rivedere attentamente l'episodio di tachiaritmia ed i dati di integrità del sensing, i dati sull'andamento Cardiac Compass ed i dati memorizzati sugli altri episodi. Prendere in considerazione un'eventuale modifica dei parametri di riconoscimento e dei criteri di riconoscimento della SVT, se

necessario. Per ulteriori informazioni su come visualizzare i dati di integrità del sensing, cfr. la Sezione 7.1, “Sensing dell’attività cardiaca intrinseca”, pagina 219.

**Attenzione:** fare attenzione durante la riprogrammazione dei parametri di riconoscimento o di sensing per evitare che le modifiche apportate incidano negativamente sul riconoscimento di VF. Assicurarsi che venga mantenuto un sensing appropriato. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 7.1, “Sensing dell’attività cardiaca intrinseca”, pagina 219.

#### **5.1.4.3 Come valutare l’appropriatezza della terapia per tachiaritmia erogata**

1. Rivedere ogni eventuale notifica Medtronic CareAlert relativa alle terapie erogate nella sezione Osservazioni della finestra Quick Look II. Per informazioni dettagliate sulle notifiche Medtronic CareAlert, selezionare Dati > Eventi di allarme.
2. Controllare le registrazioni degli episodi di tachiaritmia per stabilire l’efficacia delle terapie erogate.
3. Modificare i parametri terapeutici, se necessario.

#### **5.1.4.4 Come valutare l’efficacia della terapia di resincronizzazione cardiaca**

Per verificare se il dispositivo stia erogando la terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) in maniera adeguata, controllare le schermate Rapporto interrogazione iniziale o Quick Look II.

1. Rivedere le osservazioni Quick Look II relative alla percentuale di stimolazione ventricolare oppure agli episodi di sensing ventricolare.
2. Controllare le registrazioni memorizzate sugli episodi di sensing ventricolare per stabilire la continuità e l’efficacia della stimolazione CRT. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 6.5, “Raccolta e visualizzazione dei dati sugli episodi di sensing ventricolare”, pagina 215.
3. Stampare e rivedere il rapporto sugli istogrammi della frequenza per ulteriori informazioni sulla stimolazione atriale e ventricolare in generale e sulle frequenze ventricolari durante gli episodi di AT/AF.
4. Stampare e rivedere il rapporto sulla gestione degli scompensi cardiaci per un confronto con l’anamnesi del paziente. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 6.4, “Visualizzazione delle informazioni sulla gestione dello scompenso cardiaco”, pagina 208.

In caso di erogazione discontinua della terapia di resincronizzazione cardiaca, valutare le seguenti opzioni di programmazione:

- Apportare modifiche alla programmazione di base per aumentare la frequenza massima di trascinamento o per diminuire il periodo refrattario atriale totale. Per ulteriori informazioni sul periodo refrattario atriale totale, cfr. la Sezione 7.1, “Sensing dell’attività cardiaca intrinseca”, pagina 219.
- Attivare le funzioni di Risposta al Sensing Ventricolare, di Recupero del Trascinamento Atriale o di Risposta all’AF Condotta per favorire una maggiore continuità nell’erogazione della CRT.

## 5.2 Visualizzazione di un riepilogo dei dati memorizzati di recente

All’inizio di una sessione paziente, può essere utile visualizzare rapidamente le informazioni riepilogative sul funzionamento del dispositivo e sulle condizioni del paziente nel periodo successivo all’ultima visita di controllo. Ciò consente di stabilire se è necessario esaminare in maniera più approfondita i dati diagnostici o riprogrammare il dispositivo per ottimizzare la terapia da erogare al paziente.

La schermata Quick Look II fornisce una panoramica degli indicatori più importanti relativi al funzionamento del sistema e delle condizioni del paziente. Nella schermata sono inoltre riportati collegamenti ad informazioni diagnostiche e sullo stato più dettagliate memorizzate nel dispositivo. Le informazioni sullo stato del dispositivo e degli elettrocateri indicano se il sistema stia funzionando secondo le previsioni. Le informazioni sugli episodi aritmici e sulle terapie erogate forniscono un quadro generale dello stato clinico del paziente dall’ultima visita di controllo. Le osservazioni definite dal sistema segnalano eventuali condizioni non previste e suggeriscono come ottimizzare le impostazioni del dispositivo.

**Nota:** nella schermata Quick Look II vengono visualizzate le informazioni raccolte nel periodo successivo all’ultima sessione paziente e memorizzate nel dispositivo. Le osservazioni Quick Look II possono visualizzare anche modifiche apportate alla programmazione durante la sessione corrente.

### 5.2.1 Come visualizzare la schermata Quick Look II

La schermata Quick Look II viene visualizzata automaticamente dopo l’avvio della sessione paziente. Per accedere alla schermata Quick Look II, si può anche utilizzare l’icona Dati.

Selezionare l’icona Dati


⇒ Quick Look II

È possibile aggiornare i dati Quick Look II durante una sessione reinterrogando il dispositivo.

5.2.2 Informazioni visualizzate nella schermata Quick Look II

La schermata Quick Look II visualizza le informazioni in cinque sezioni.

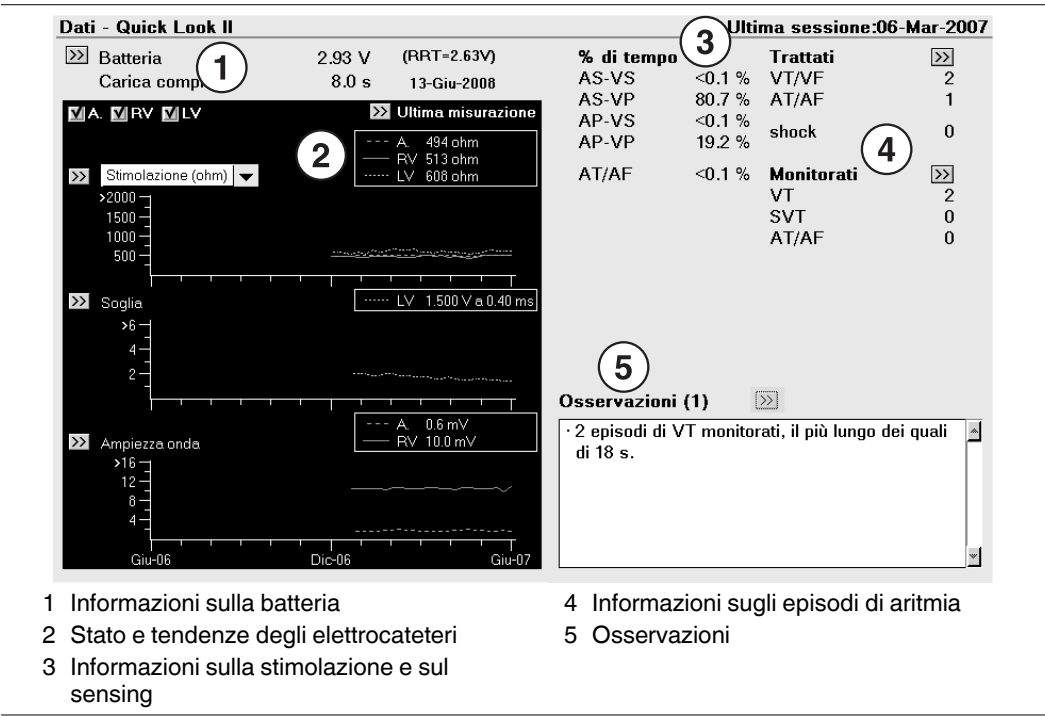Figura 24. La schermata Quick Look II



Se si seleziona una delle osservazioni visualizzate e sono disponibili ulteriori informazioni sull'osservazione selezionata, il pulsante [>>] diventa attivo. Per visualizzare i relativi dettagli, utilizzare il pulsante [>>].

5.2.2.1 Valutazione dello stato del dispositivo e degli elettrocateteri

**Informazioni sulla batteria** – La tensione della batteria viene misurata all'inizio della sessione. La tensione della batteria viene visualizzata nella schermata Quick Look II e stampata nel rapporto di interrogazione iniziale.

La tensione della batteria viene inoltre misurata automaticamente ogni giorno alle ore 2:15. Se tre misurazioni quotidiane consecutive ed automatiche della tensione della batteria risultano pari o inferiori al valore corrispondente al momento consigliato per la sostituzione (RRT), nella schermata Quick Look II e nel rapporto di interrogazione iniziale sono riportate la data in cui la batteria ha raggiunto lo stato RRT e la tensione della batteria. Per informazioni sul valore RRT, vedere la Sezione A.3, "Indicatori di sostituzione", pagina 444.

Nella schermata Misurazioni batteria ed elettrocateri e nel relativo rapporto stampato sono riportati il valore risultante dall'ultima misurazione della tensione della batteria oltre all'indicatore RRT con la data e l'ora, se applicabile.

In corrispondenza della riga Carica max vengono visualizzate la data e la durata dell'ultima ricarica dei condensatori da 0 J alla massima energia.

Selezionare il pulsante [>>] per visualizzare dati maggiormente dettagliati sulla misurazione della batteria e degli elettrocateri. Per ulteriori informazioni, tra cui la data in cui la batteria ha raggiunto lo stato RRT, vedere la Sezione 5.9, "Visualizzazione di dati dettagliati sulle prestazioni del dispositivo e degli elettrocateri", pagina 162.

**Stato e tendenze degli elettrocateri** – Le informazioni sullo stato degli elettrocateri consentono di valutare le prestazioni e l'integrità degli elettrocateri e di individuare qualsiasi situazione inconsueta. Nella colonna "Ultima misurazione" viene visualizzato il valore ricavato durante l'ultima misurazione dell'impedenza di ciascun elettrocateri.

Selezionare il pulsante [>>] nella colonna "Ultima misurazione" per visualizzare misurazioni maggiormente dettagliate degli elettrocateri e le impostazioni programmate rilevanti.

I grafici sulle tendenze degli elettrocateri visualizzati nella schermata Quick Look II mostrano le misurazioni dell'impedenza degli elettrocateri, della soglia di cattura LV e dell'ampiezza di sensing registrate nel corso degli ultimi dodici mesi.

Selezionare il pulsante [>>] situato accanto ad uno dei grafici sulle tendenze degli elettrocateri per visualizzare informazioni maggiormente dettagliate sulle prestazioni degli elettrocateri. I grafici dettagliati sulle tendenze mostrano le ultime misurazioni giornaliere (massimo quindici) ed un massimo di ottanta misurazioni riepilogative settimanali (che mostrano i valori minimi, massimi e medi per ogni settimana).

Per ulteriori informazioni sui grafici relativi alle prestazioni degli elettrocateri, vedere la Sezione 5.9, "Visualizzazione di dati dettagliati sulle prestazioni del dispositivo e degli elettrocateri", pagina 162.

### 5.2.2.2 Valutazione delle condizioni del paziente

**Informazioni sulla stimolazione e sul sensing** – Queste informazioni possono essere di aiuto nella valutazione dello stato della conduzione A-V del paziente e dell'efficacia delle impostazioni programmate del dispositivo.

Le informazioni sulla stimolazione ed il sensing atriali e ventricolari vengono visualizzate sotto forma di percentuali del tempo totale durante il periodo di registrazione. Tale percentuale comprende la durata in percentuale delle sequenze degli eventi AS-VS, AS-VP, AP-VS e AP-VP verificatesi.

La durata espressa in percentuale degli episodi di AT/AF registrati può essere di aiuto nel valutare la necessità di modificare le terapie erogate dal dispositivo o le terapie farmacologiche del paziente. La durata dell'AT/AF viene calcolata dal punto di insorgenza dell'episodio di AT/AF. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 8.1, "Riconoscimento di tachiaritmie atriali", pagina 294.

**Nota:** i contatori degli eventi stimolati e rilevati non contano tutti gli eventi registrati dal dispositivo. Se ad esempio una stimolazione ventricolare di sicurezza viene considerata una stimolazione, il sensing ventricolare precedente non viene contato. La somma delle percentuali può non arrivare al 100% per via dell'arrotondamento.

**Informazioni sugli episodi di aritmia** – In questa sezione viene visualizzato il numero di episodi aritmici trattati e monitorati che si sono verificati dall'ultima sessione paziente. Viene inoltre visualizzato il numero di shock erogati dall'ultima sessione.

Selezionare il pulsante [>>] per visualizzare informazioni dettagliate su tutti gli episodi aritmici. Per informazioni sulla schermata Dati sugli episodi aritmici, cfr. la Sezione 5.5, "Visualizzazione dei dati sugli episodi aritmici e impostazione delle preferenze per la raccolta dati", pagina 144.

### 5.2.2.3 Osservazioni Quick Look II

Le osservazioni si basano su un'analisi dei parametri programmati e dei dati raccolti dall'ultima sessione. Possono essere visualizzati i seguenti tipi di osservazioni:

- Le osservazioni sullo stato del dispositivo segnalano quando il dispositivo si sta avvicinando all'RRT o alla fine servizio (EOS). Un'osservazione viene segnalata anche in caso di irregolarità del circuito di carica o di reset del dispositivo.
- Le osservazioni sullo stato degli elettrocateri segnalano qualsiasi problema potenziale legato all'integrità del sensing degli elettrocateri, possibili spostamenti degli elettrocateri ed eventuali risultati anomali della gestione cattura LV. Le osservazioni possono inoltre segnalare eventuali incongruenze nella programmazione della polarità degli elettrocateri.
- Le osservazioni sui parametri segnalano qualsiasi incongruenza nella programmazione dei parametri di riconoscimento e della terapia. Ad esempio, possono segnalare se determinate impostazioni dei parametri determinano la disattivazione di una terapia.

- Le osservazioni sui dati diagnostici segnalano gli episodi aritmici degni di nota. Tra gli esempi figurano le aritmie di vario tipo che si verificano simultaneamente oppure episodi per i quali le terapie erogate si sono rivelate inefficaci. Vengono inoltre segnalate le condizioni che impediscono una raccolta efficace dei dati diagnostici.
- Le osservazioni Medtronic CareAlert possono segnalare determinate circostanze legate alle prestazioni del sistema o del dispositivo e determinate circostanze legate al ritmo cardiaco. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 5.3, “Allarmi e notifiche automatiche di eventi legati al trattamento clinico e alle prestazioni del sistema”, pagina 127.
- Le osservazioni sullo stato clinico segnalano eventuali condizioni anomale del paziente come basse frequenze di attività, frequenze cardiache inaspettatamente alte, un burden aritmico elevato o un accumulo di fluido.

Se si seleziona una delle osservazioni visualizzate e sono disponibili ulteriori informazioni sull'osservazione selezionata, il pulsante [ >> ] diventa attivo. Per visualizzare i dettagli rilevanti, è possibile utilizzare il pulsante [ >> ].

### **5.3 Allarmi e notifiche automatiche di eventi legati al trattamento clinico e alle prestazioni del sistema**

Durante il periodo che intercorre tra le varie sessioni paziente regolarmente pianificate, possono verificarsi eventi importanti legati al trattamento clinico ed alle prestazioni del sistema. Tali eventi possono essere legati alla disponibilità di dati pertinenti sul trattamento clinico memorizzati nel dispositivo, all'inadeguatezza delle impostazioni programmate oppure a problemi del sistema che dovrebbero essere esaminati. Grazie ad un rilevamento e ad una segnalazione tempestivi di questi eventi, qualora dovessero verificarsi, è possibile intervenire prontamente garantendo un trattamento adeguato del paziente.

### **5.3.1 La soluzione offerta dal sistema è rappresentata dalle notifiche Medtronic CareAlert**

Il dispositivo monitora in maniera continua una determinata serie di eventi legati al trattamento clinico ed alle prestazioni del sistema che possono verificarsi tra le varie sessioni di follow-up regolarmente pianificate. Se il dispositivo rileva l'occorrenza di un determinato evento clinico o legato alle prestazioni del sistema, emette una notifica Medtronic CareAlert. La notifica Medtronic CareAlert può essere emessa dal dispositivo sotto forma di segnale acustico per avvisare il paziente oppure sotto forma di segnale di notifica wireless impercettibile inviata all'Indicatore Medtronic PatientLook modello 2490R del paziente. Udito il segnale di allarme emesso dal dispositivo o notata l'accensione della spia di stato Medtronic CareAlert presente sull'indicatore, il paziente può reagire secondo le istruzioni impartitegli.

### **5.3.2 Emissione delle notifiche Medtronic CareAlert**

Le notifiche Medtronic CareAlert vengono impostate dal medico o definite dal sistema ed hanno due diversi gradi di urgenza. Le notifiche impostate dal medico possono essere programmate con un grado di urgenza alto o moderato e possono essere attivate o disattivate. Le notifiche definite dal sistema hanno un grado di urgenza alto e sono sempre attive. Le notifiche di alta urgenza emettono un doppio segnale acustico alto-basso. Le notifiche di moderata urgenza emettono un segnale acustico intermittente on-off. I segnali acustici con un grado di alta urgenza possono indicare un grave problema del sistema che richiede un intervento immediato. Le notifiche vengono visualizzate nella schermata Quick Look II del programmatore Medtronic CareLink modello 2090 durante una sessione paziente.

All'emissione di una notifica fa seguito l'emissione del segnale acustico appropriato da parte del dispositivo ad un'ora del giorno selezionabile oppure ad un intervallo di tempo fisso. Le notifiche vengono quindi emesse ogni giorno all'ora o all'intervallo selezionato finché non vengono annullate utilizzando il programmatore. Qualsiasi notifica attiva è udibile anche quando il magnete è posizionato sopra il dispositivo. Utilizzando il programmatore durante una sessione paziente, è possibile visualizzare i dettagli delle notifiche.



**Note:**

- le notifiche sonore OptiVol si interrompono se l'indice del fluido OptiVol scende al di sotto della soglia OptiVol programmata. Tutte le altre notifiche sonore restano attive finché non vengono soppresse dal programmatore.
- una trasmissione CareLink non sopprime le notifiche sonore CareAlert. Queste resteranno infatti attive finché non vengono soppresse dal programmatore.
- se la trasmissione di un allarme CareLink per una determinata condizione di allarme va a buon fine, non si verificheranno altre trasmissioni per questa condizione di allarme finché l'allarme non viene soppresso dal programmatore.

**5.3.2.1 Notifiche impostate dal medico (programmabili)****Notifiche di trattamento clinico**

Possibile accumulo di fluido	La notifica "Possibile accumulo di fluido" indica che l'indice del fluido OptiVol è pari o superiore alla soglia OptiVol.
Burden quotidiano di AT/AF > Soglia	La notifica "Burden quotidiano di AT/AF > Soglia" indica che la durata complessiva dell'AT/AF supera la soglia programmata.
Frequenza V. media durante AT/AF > Soglia	La notifica "Freq. V media durante AT/AF > Soglia" indica che la frequenza ventricolare media durante una durata selezionabile dell'AT/AF supera la soglia programmata.
Numero di shock erogati in un episodio	La notifica "Numero di shock erogati in un episodio" indica che il numero di shock erogati in un episodio di VT/VF è pari o superiore alla soglia programmata relativa al numero di shock.
Esaur. di tutte le terapie per una zona durante un epis.	La notifica "Esaur. di tutte le terapie per una zona durante un epis." indica che è stato nuovamente rilevato un episodio specifico di VF, VT o FVT dopo l'erogazione di tutte le terapie programmate per quel tipo di episodio.

**Notifiche relative all'integrità degli elettrocateri e del dispositivo**

Imped. elettrocat. di stim. fuori range	La notifica "Imped. elettrocat. di stim. fuori range" segnala che il valore di impedenza giornaliera dell'elettrocatero è fuori range, circostanza probabilmente dovuta al dislocamento o ad un collegamento erroneo dell'elettrocatero. Questa notifica può essere programmata per ciascun elettrocatero; è tuttavia importante ricordare che tutte le notifiche sull'impedenza degli elettrocateri devono essere impostate sullo stesso grado di urgenza. Gli allarmi relativi all'impedenza degli elettrocateri non vengono influenzati dal modo di stimolazione antibradicardica. Ad esempio, se il dispositivo è stato programmato su un modo VVI o VVIR, continuerà ad attivarsi una notifica sonora relativa all'impedenza dell'elettrocatero atriale.
RRT, bassa tensione batteria	La notifica "Bassa tensione batteria" indica che il valore della misurazione automatica quotidiana della tensione della batteria è risultato pari o inferiore al livello di tensione dell'indicatore di sostituzione elettiva per tre giorni consecutivi.

Tempo di carica eccessivo EOS	La notifica "Tempo di carica eccessivo EOS" indica che il periodo di carica è pari o superiore alla soglia del tempo di carica.
Ricon. VF su Off, 3 o più terapie VF o FVT su Off	La notifica "Ricon. VF su Off, 3 o più terapie VF o FVT su Off" indica che si è verificata una o più delle situazioni descritte di seguito per almeno sei ore dall'ultima programmazione: il riconoscimento di VF è stato disattivato, tre o più terapie per VF sono state disattivate, oppure il riconoscimento di FVT è stato impostato su via VF e tre o più terapie di FVT sono state disattivate. <sup>a</sup>

<sup>a</sup> La notifica "Ricon. VF su Off, 3 o più terapie VF o FVT su Off" viene emessa ogni sei ore fino alla sua soppressione.

### 5.3.2.2 Notifiche definite dal sistema (non programmabili)

Si è verificato un reset elettrico	La notifica "Si è verificato un reset elettrico" indica che il dispositivo è stato ripristinato e che potrebbe dover essere riprogrammato. Il dispositivo emette subito un segnale acustico di notifica di alta urgenza che si ripete ogni venti ore oppure ogni nove ore, a seconda del tipo di reset elettrico. Se si riceve la notifica "Si è verificato un reset elettrico", contattare immediatamente il rappresentante di zona della Medtronic. Cfr. la Sezione B.6, "Parametri della funzione Medtronic CareAlert", pagina 469 per i valori di reset elettrico. <sup>a</sup>
Si è verificata una sospensione del circuito di carica	La notifica "Si è verificata una sospensione del circuito di carica" indica che un periodo di carica ha superato il tempo massimo consentito per la carica dei condensatori. Il dispositivo emette immediatamente un segnale acustico di notifica di alta urgenza che viene ripetuto ogni venti ore. Se si riceve la notifica relativa alla sospensione del circuito di carica, contattare il rappresentante di zona della Medtronic.
Nessuna terapia a causa del modo DOO/VOO/AOO	La notifica "Nessuna terapia a causa del modo DOO/VOO/AOO" indica che il dispositivo è stato programmato su un modo di stimolazione DOO, VOO o AOO e che pertanto non è in grado di erogare alcuna terapia di stimolazione. Il dispositivo emette un segnale acustico di notifica di alta urgenza ogni giorno all'orario programmato.
Active Can disatt., elettrocat. SVC (HVX) non rilev.	La notifica "Active Can disatt., elettrocat. SVC (HVX) non rilev." indica che la funzione Active Can è disabilitata in assenza di un elettrocatetere SVC, poiché non è un percorso di defibrillazione possibile. Il dispositivo emette un segnale acustico di alta urgenza ogni giorno all'orario di notifica programmato.
Trasmissione wireless non riuscita	La notifica "Trasmissione wireless non riuscita" indica che il dispositivo ha tentato di effettuare una trasmissione wireless, ma la trasmissione non è ancora andata a buon fine dopo un periodo di 72 ore durante il quale il dispositivo ha ritentato la trasmissione ogni tre ore.

<sup>a</sup> Viene emessa subito una notifica sonora di reset elettrico, che si ripeterà ogni venti ore. Tuttavia, se il reset elettrico disattiva il riconoscimento delle tachiaritmie e la terapia, la notifica sonora si ripeterà ogni nove ore. In caso di emissione di una notifica sonora di reset elettrico, contattare il rappresentante della Medtronic.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni programmabili per un determinato parametro, vedere la Sezione B.6, "Parametri della funzione Medtronic CareAlert", pagina 469.

### 5.3.2.3 Procedura di notifica wireless


Se si verifica un evento clinico o un evento legato alle prestazioni del sistema ed il dispositivo è programmato in modo tale da informare il paziente utilizzando il sistema di monitoraggio domestico, il dispositivo tenterà di stabilire automaticamente una comunicazione wireless con l'indicatore Medtronic PatientLook modello 2490R. Successivamente, sull'indicatore si illumineranno le spie di stato Medtronic CareAlert appropriate, destinate ad essere notate dal paziente. Le spie resteranno illuminate finché il paziente non le riconosce premendo il pulsante Avvio/Arresto presente sull'indicatore. Il paziente dovrà quindi reagire in base alle istruzioni fornitegli. Se il paziente non riconosce le spie per un periodo di tempo prolungato, l'indicatore emetterà un segnale acustico che resterà attivo finché non si preme il pulsante Avvio/Arresto.

Se la trasmissione dei dati è andata a buon fine, l'indicatore riprenderà a comunicare con il dispositivo. Se una trasmissione dati non riesce al primo tentativo, il dispositivo ritenta la comunicazione con l'indicatore ogni tre ore finché la trasmissione non va a buon fine. Nel caso in cui una trasmissione non dovesse andare a buon fine dopo 72 ore, il dispositivo emetterà un segnale acustico all'orario del giorno selezionato per il paziente. La trasmissione include i dati relativi a tutte le notifiche attualmente attive.

**Nota:** se la trasmissione wireless di una notifica è andata a buon fine, il dispositivo non ritrasmetterà tramite comunicazione wireless i dati relativi a quella determinata notifica finché non viene interrogato presso la clinica utilizzando un Programmatore Medtronic CareLink modello 2090, anche se nel frattempo si incontra nuovamente la soglia di notifica. Il dispositivo continuerà comunque ad emettere segnali acustici ogni giorno per tutte le notifiche attive durante il periodo che intercorre tra una sessione di follow-up del paziente e quella successiva. Pertanto, si potrebbe optare per l'attivazione dei segnali acustici per determinate notifiche, anche se normalmente si preferirebbe non attivarle.

**Figura 25.** Procedura di notifica wireless

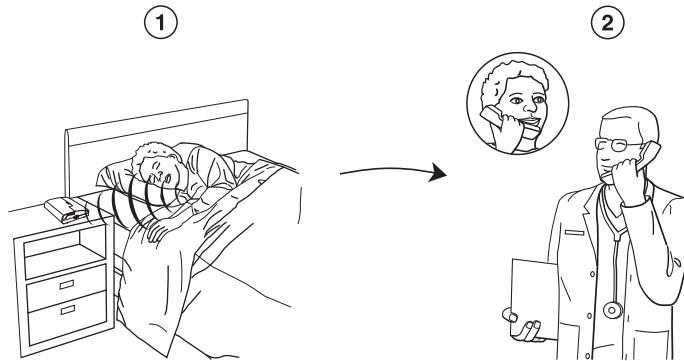---



- 1 Il dispositivo rileva una situazione degna di notifica e stabilisce una comunicazione wireless con il dispositivo di monitoraggio.
  - 2 Non appena nota una spia di stato Medtronic CareAlert illuminata, il paziente contatta la clinica.
- 

#### 5.3.2.4 Procedura di notifica sonora

Se si verifica un evento clinico o legato alle prestazioni del sistema ed il dispositivo è stato programmato in modo tale da emettere una notifica al paziente utilizzando dei segnali acustici, il dispositivo emette dei segnali acustici all'orario del giorno programmato o ad intervalli fissi. Invitare il paziente a contattare la clinica nel caso dovesse udire dei segnali acustici emessi dal dispositivo. Così facendo, sarà possibile fornirgli tempestivamente istruzioni sulla loro interpretazione ai fini del follow-up ed occuparsi della sua gestione. I segnali acustici di notifica durano un massimo di 10 s e sono volutamente più intensi dei normali rumori presenti in un'abitazione. In caso di attivazione simultanea di notifiche con un grado di urgenza sia alto che moderato, verrà data priorità alla notifica con un alto grado di urgenza. Questa notifica verrà emessa all'orario o all'intervallo previsto.

Nonostante il sistema abbia due diversi tipi di segnali acustici di notifica per scenari clinici con un grado di urgenza alto e moderato, è importante ricordare che i segnali acustici che il paziente avverte possono risultare identici se la notifica è causata da un problema legato alle prestazioni del sistema o ad un evento clinico significativo. Poiché i segnali acustici possono risultare identici, il paziente potrebbe non essere in grado di distinguere una notifica sulle prestazioni del sistema da una notifica su un determinato evento clinico. La funzione di notifica sonora è stata esclusivamente concepita per sollecitare il paziente a contattare il proprio specialista. È inoltre opportuno ricordare che il paziente che riceve una notifica sonora contatterà il proprio specialista per sapere il tipo di notifica emessa, conoscere le informazioni registrate dal dispositivo, sapere come devono essere interpretati i dati e ricevere assistenza nell'ambito del piano terapeutico generale. Il paziente potrà conoscere i dettagli della notifica (tra cui il tipo di notifica e le risultanze dettagliate) solo dopo aver parlato con il proprio specialista.

### 5.3.3 Selezione di un orario di notifica

Il sistema consente di selezionare una determinata ora del giorno per l'emissione di una notifica sonora. Il segnale acustico si attiva ogni giorno all'orario di notifica programmato finché il dispositivo non viene interrogato. Selezionare un orario di notifica in cui il paziente o una persona amica siano con tutta probabilità in grado di avvertirla. I seguenti fattori legati al paziente possono influenzare la selezione dell'orario di notifica:

- un orario in cui si prevede che il paziente si trovi in un ambiente tranquillo
- il programma quotidiano del paziente, ad esempio il regime farmacologico di routine che può influenzare il suo livello di allerta
- il livello di percezione acustica del paziente
- la presenza o l'assenza di persone amiche che potrebbero udire i segnali acustici

**Nota:** le notifiche "Reset elettrico", "Sospensione del circuito di carica" "Ricon. VF su Off, 3 o più terapie VF o FVT su Off" possono essere emesse in orari diversi da quelli programmati.

Se le condizioni che determinano una notifica sono intermittenti, l'evento da cui ha origine la notifica potrebbe non essere in corso quando viene emessa la notifica sonora. L'orario di notifica si basa sull'orologio interno del dispositivo e non si adegua al fuso orario.

### 5.3.3.1 Selezione di un orario di notifica

Selezionare l'icona Parametri

⇒ Allarme...

- ▷ Orario di attivazione allarme (OptiVol)...
- ▷ Orario di attivazione allarme (tutti gli altri)...

**Nota:** alcune notifiche (non programmabili) definite dal sistema attivano un allarme all'orario programmato. Se tutti gli allarmi (programmabili) definiti dal medico sono stati disattivati, il campo Orario attivazione allarme non viene visualizzato. In questa situazione, per visualizzare il campo Orario attivazione allarme è necessario attivare uno degli allarmi programmabili (non un allarme OptiVol). Programmare l'orario di attivazione dell'allarme desiderato. Infine, disattivare nuovamente l'allarme programmabile.

### 5.3.4 Istruzioni da fornire al paziente

È importante che il paziente sia al corrente del fatto che potrebbe avvertire dei segnali acustici di notifica Medtronic CareAlert emessi dal dispositivo. Assicurarsi che il paziente sappia il da farsi in caso di emissione di una notifica sonora.

**Avvertenza:** assicurarsi che il paziente non porti con sé, conservi o lasci il magnete posizionato sopra al dispositivo. Avvertire il paziente che il dispositivo potrebbe temporaneamente non funzionare in maniera corretta se si posiziona il magnete sopra il dispositivo, ricordandogli di allontanare il magnete dal dispositivo per ripristinarne il normale funzionamento.

- Invitare il paziente a contattare lo specialista non appena avverte QUALSIASI segnale acustico emesso dal dispositivo.
- Comunicare al paziente l'orario del giorno che è stato programmato per l'emissione di una determinata notifica. In caso di emissione di una notifica sonora, il paziente deve sapere che la notifica verrà emessa ogni giorno allo stesso orario finché il dispositivo non verrà sottoposto ad interrogazione.
- Se il paziente dispone di un sistema di monitoraggio domestico, informarlo che in caso di trasmissione non andata a buon fine di una notifica al dispositivo di monitoraggio entro 72 ore, verrà emesso un segnale acustico con un alto grado di urgenza ogni giorno all'orario di notifica programmato.
- Assicurarsi che il paziente sia al corrente del fatto che l'orario di notifica non si adegua al fuso orario.
- Avvisare il paziente dell'eventualità che potrebbe udire un segnale acustico di test continuo o qualsiasi altro segnale acustico di notifica attivo se si trova in un campo elettromagnetico di forte intensità, come quello generato dai dispositivi antitaccheggio presenti all'interno di alcuni negozi. Avvertire il paziente che il dispositivo potrebbe temporaneamente non funzionare nelle situazioni sopra descritte e che dovrà allontanarsi dalla sorgente di interferenze per ripristinare il normale funzionamento del dispositivo.

Il paziente dovrà inoltre essere al corrente della destinazione d'uso del magnete, oltre che sapere quando e come utilizzarlo. Assicurarsi che il paziente sia a conoscenza del fatto che, posizionando il magnete sopra il dispositivo, potrebbe attivarsi una notifica sonora della funzione Medtronic CareAlert. Dimostrare al paziente come posizionare il magnete sopra il dispositivo per riprodurre i segnali acustici di notifica e rivedere insieme a lui/lei il manuale relativo al magnete. Il paziente può utilizzare le istruzioni pieghevoli per l'uso del magnete come scheda di riferimento.

### 5.3.5 Dimostrazione dei segnali acustici di notifica

Durante una sessione paziente, è possibile far udire al paziente i segnali acustici con un grado di urgenza alto e moderato ed il segnale acustico di test selezionando [Dimostr. segnali...] dalla schermata Medtronic CareAlert del programmatore. È inoltre possibile far udire al paziente un segnale acustico con un grado di urgenza alto e moderato o un segnale acustico di test utilizzando il magnete. Posizionando il magnete sopra il dispositivo, viene emessa una notifica sonora attiva. Se al momento non è attiva alcuna notifica, il dispositivo emette un segnale acustico di test continuo.

#### 5.3.5.1 Dimostrazione dei segnali acustici di notifica

Selezionare l'icona Parametri

⇒ Allarme...

⇒ Dimostr. segnali

Selezionare [Si è verif. condiz. alta emerg.], [Si è verif. condiz. moderata emerg.] e [Nessuna condizione].

### 5.3.6 Alcune considerazioni sulle Notifiche Medtronic CareAlert

**Notifiche del sistema di monitoraggio domestico del paziente** – Le notifiche del sistema di monitoraggio domestico del paziente sono programmabili soltanto quando il campo Monitor. domestico paz. sullo schermo del programmatore è programmato su Sì.

**Notifiche ripetute** – Se una notifica programmabile della funzione Medtronic CareAlert si attiva talmente spesso da perdere valore clinico, si potrebbe optare per una modifica della soglia di notifica, per una programmazione del dispositivo in modo tale da migliorare l'efficacia della terapia o per la disattivazione delle notifica.

### 5.3.7 Programmazione delle notifiche Medtronic CareAlert

Selezionare l'icona Parametri

⇒ Allarme...

▷ Allarmi trattamento clinico

▷ Allarmi integrità elettrocat./disp.



### 5.3.8 Valutazione degli eventi di notifica Medtronic CareAlert

Il dispositivo memorizza gli eventi di notifica nel diario degli eventi Medtronic CareAlert. Sullo schermo del programmatore, gli eventi di notifica vengono visualizzati come eventi di allarme ed eventi OptiVol. Per ogni singolo evento di notifica, la relativa registrazione include la data e l'ora della notifica, una descrizione dell'evento e la misurazione o informazioni su ciò che ha causato l'evento. Vengono memorizzati fino a tredici eventi di allarme. Al fine di evitare registrazioni inutili nel diario, un evento di allarme viene registrato solo alla prima occorrenza di una condizione di notifica dall'ultima sessione. In caso di eventi OptiVol, nel diario eventi vengono registrate le ultime sette volte in cui l'indice del fluido OptiVol del paziente ha superato la soglia OptiVol. I dati della notifica vengono cancellati soltanto dopo aver eliminato tutti i dati del dispositivo dalla schermata Impostazione raccolta dati.

**Attenzione:** verificare l'integrità degli elettrocateri quando si valutano gli eventi OptiVol. La perdita di integrità del coil RV dovuta alla rottura di un elettrocatero o ad un difetto del rivestimento isolante può incidere negativamente sugli eventi OptiVol.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Eventi di allarme
  - ▷ Eventi di allarme
  - ▷ Eventi di allarme OptiVol

**Figura 26.** Diario degli eventi Medtronic CareAlert

Dati - Eventi Medtronic CareAlert

☒ Eventi di allarme

☐ Eventi OptiVol

Data/Ora	Evento	Soglia
(Nessun dato dall'ultima sessione.)		
----- Ultima sessione programmatore 05-Lug-2007 -----		
05-Lug-2007 15:21:18	1 shock erogati per episodio n. 12.	1 shock

Stampa...

## 5.4 Visualizzazione delle tendenze cliniche a lungo termine con il Rapporto del Cardiac Compass

Un'analisi delle informazioni cliniche raccolte a lungo termine consente di seguire le variazioni nelle condizioni del paziente e correlarle con le variazioni nella programmazione del dispositivo, nel farmaco assunto, nell'attività del paziente o nella sintomatologia.

Il Rapporto del Cardiac Compass fornisce un quadro delle condizioni del paziente negli ultimi quattordici mesi. I grafici mostrano le tendenze della frequenza delle aritmie, del volume di attività fisica, delle frequenze cardiache e delle terapie erogate dal dispositivo. Le date e le annotazioni degli eventi consentono di correlare le tendenze ricavate da grafici diversi. Il rapporto può anche aiutare a valutare l'efficacia delle terapie erogate dal dispositivo o delle terapie antiaritmiche.

I dati sulle tendenze del Cardiac Compass sono disponibili unicamente sotto forma di rapporto stampato.

Il Rapporto del Cardiac Compass si basa su dati e misurazioni raccolti quotidianamente. La memorizzazione dei dati per il Rapporto del Cardiac Compass avviene automaticamente e non è necessaria alcuna configurazione. Il dispositivo inizia a memorizzare i dati dopo l'impianto del dispositivo. In seguito, il dispositivo memorizza ogni giorno una serie di dati del Cardiac Compass. La memorizzazione continua per quattordici mesi, finché lo spazio di memorizzazione non si esaurisce. Da questo momento in poi, i dati memorizzati per primi verranno sovrascritti dai nuovi dati.

### Note:

- le annotazioni sugli orari visualizzate nel rapporto si basano sull'orologio del dispositivo.
- I dati sulle tendenze del Cardiac Compass non possono essere eliminati manualmente.

### 5.4.1 Come stampare un Rapporto del Cardiac Compass

È possibile stampare il Rapporto del Cardiac Compass iniziando dall'icona Dati o dall'icona Rapporti.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Tendenze Cardiac Compass (solo rapporto)

Selezionare l'icona Rapporti


- ⇒ Rapporti disponibili...
- ⇒ Tendenze Cardiac Compass

## 5.4.2 Informazioni presenti nel Rapporto del Cardiac Compass

Il Rapporto del Cardiac Compass mostra gli eventi che si sono verificati durante il periodo di registrazione, oltre a grafici sulle tendenze che consentono di valutare la frequenza delle aritmie VT/VF, delle aritmie AT/AF, la stimolazione e la risposta in frequenza ed informazioni sullo scompenso cardiaco.

### 5.4.2.1 Informazioni su eventi

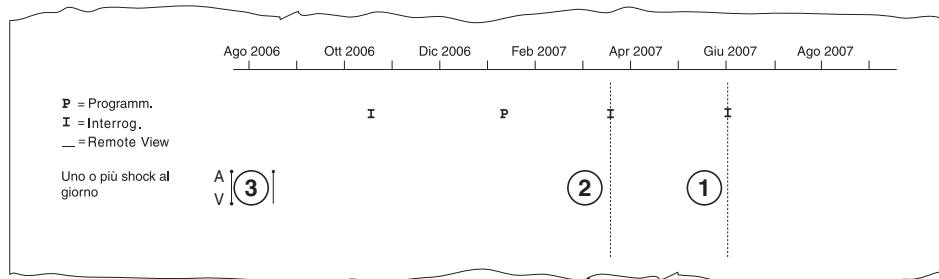**Figura 27. Annotazioni su eventi**



1 Indicatore della sessione corrente

2 Indicatore dell'ultima sessione

3 Indicatore di terapia ad alta tensione

**Eventi relativi alla programmazione e all'interrogazione** – Il rapporto mostra quando il dispositivo è stato interrogato o programmato, per rendere possibili eventuali correlazioni tra le variazioni apportate ai parametri del dispositivo ed altre tendenze cliniche.

Se il paziente viene esaminato durante una visita ambulatoriale, il rapporto registra un valore "I" per il giorno in cui il dispositivo viene interrogato ed un valore "P" per il giorno in cui viene modificato un parametro programmabile (ad eccezione delle modifiche temporanee). Se il dispositivo è stato interrogato e programmato nello stesso giorno, verrà visualizzata unicamente la lettera "P".


Quando il paziente viene esaminato durante una sessione con il sistema di monitoraggio Medtronic CareLink, nel rapporto è riportato il simbolo "I" con una linea sotto.

Due linee verticali riportate in tutti i grafici indicano l'inizio della sessione corrente e l'inizio dell'ultima sessione (se applicabile).

**Uno o più shock al giorno** – Nel rapporto viene indicato uno shock per qualsiasi giorno in cui il dispositivo ha erogato una terapia ad alta tensione (una terapia di defibrillazione automatica, una terapia di cardioversione o una terapia con shock atriali). Ogni annotazione indica l'erogazione di una o più terapie ventricolari (V) o atriali (A) ad alta tensione in uno stesso giorno.

### 5.4.2.2 Valutazione delle informazioni sulle aritmie VT/VF

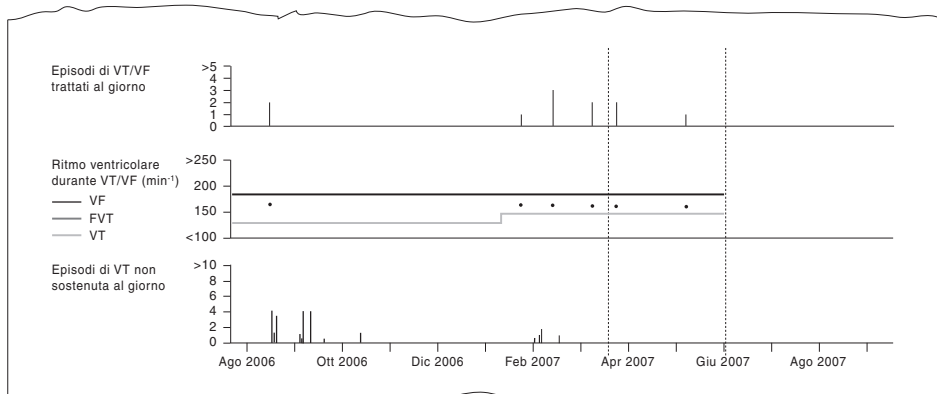**Figura 28.** Grafici sulle tendenze dell'aritmia VT/VF



**Episodi quotidiani di VT/VF trattata** – La cronologia delle tachiaritmie ventricolari può essere utile per visualizzare le correlazioni esistenti tra i cluster di episodi ed altre tendenze cliniche.

Il dispositivo registra quotidianamente il numero totale episodi spontanei di VT e VF per cui è stata erogata una terapia. Tra queste potrebbero anche esservi terapie che sono state avviate e successivamente interrotte. Non figurano invece gli episodi che sono stati soltanto monitorati.


**Frequenza ventricolare durante una VT/VF** – Questa tendenza può fornire una chiara indicazione degli effetti dei farmaci antiaritmici sulle frequenze di VF e VT, offrendo un quadro più chiaro sui margini di sicurezza per il riconoscimento.

Il grafico mostra la frequenza ventricolare mediana durante gli episodi spontanei di VT e VF. Più punti in un determinato giorno rappresentano più episodi con frequenze mediane differenti. Le linee orizzontali indicano le frequenze di riconoscimento di VF, VT e FVT (se presenti).

**Episodi quotidiani di VT non sostenuta** – Questa tendenza può servire per stabilire una relazione tra i sintomi del paziente (come le palpitazioni) e gli episodi di VT non sostenuta ed indicare la necessità di un ulteriore esame delle condizioni del paziente.

### 5.4.2.3 Valutazione delle informazioni sulle aritmie AT/AF

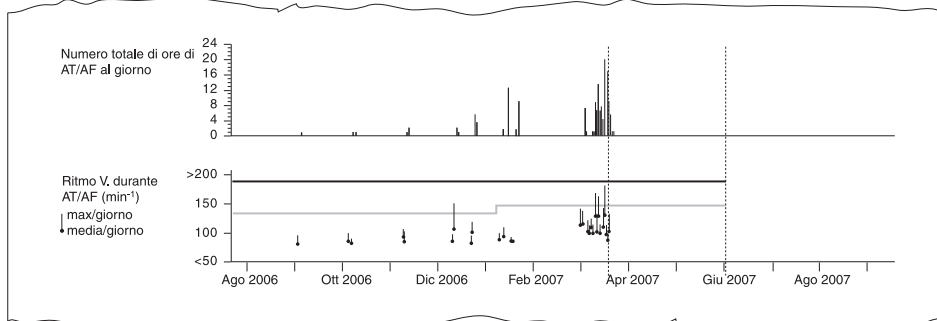**Figura 29.** Grafici sulle tendenze delle aritmie AT/AF



**Ore complessive di AT/AF al giorno** – Questa tendenza può essere di aiuto nel valutare l'opportunità di modificare le impostazioni del dispositivo del paziente o le terapie farmacologiche. Può inoltre rivelare la presenza di episodi asintomatici di AT/AF.

Il dispositivo registra la durata complessiva degli episodi di aritmia atriali avvenuti ogni giorno. La durata dell'AT/AF viene calcolata dal punto di insorgenza dell'episodio di AT/AF. Questa tendenza può essere registrata in ore (da 0 a 24) o minuti (da 0 a 60) al giorno, a seconda della durata massima giornaliera. Per ulteriori informazioni sul riconoscimento di AT/AF, vedere la Sezione 8.1, "Riconoscimento di tachiaritmie atriali", pagina 294.


**Frequenza ventricolare durante l'AT/AF** – Questa tendenza può essere utilizzata per effettuare le seguenti valutazioni:

- Stabilire una relazione tra la sintomatologia del paziente e le risposte ventricolari rapide all'AT/AF.
- Determinare i margini di sicurezza del riconoscimento di VT/VF e modificare la programmazione per evitare il trattamento di AT/AF condotte rapidamente come se fossero VT/VF.
- Prescrivere o titolare farmaci antiaritmici e per il controllo della frequenza.
- Verificare l'efficacia di una procedura di ablazione del nodo A-V.

Nel grafico sono rappresentate graficamente le frequenze ventricolari mediane giornaliere durante gli episodi di aritmia atriale. Le linee verticali mostrano la differenza giornaliera tra la frequenza mediana e la frequenza ventricolare massima rilevata quotidianamente. Più punti in un determinato giorno rappresentano più episodi con frequenze mediane differenti. Le linee orizzontali indicano le frequenze di riconoscimento di VF, VT e FVT (se presenti).

#### 5.4.2.4 Valutazione delle informazioni sulla stimolazione e sulla risposta in frequenza

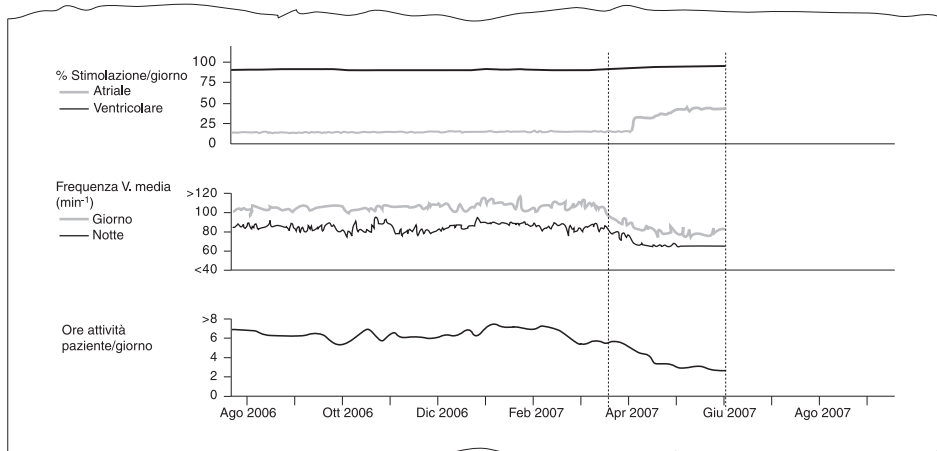**Figura 30.** Grafici sulle tendenze della stimolazione e della risposta in frequenza



**Percentuale quotidiana di stimolazione** – Questa tendenza mostra la stimolazione nel tempo, che può essere di aiuto nell'identificazione delle variazioni sopraggiunte nella stimolazione e delle tendenze della stimolazione. Nel grafico viene visualizzata la percentuale di tutti gli eventi che si verificano ogni giorno e che vengono classificati come eventi atriali e ventricolari stimolati. Le percentuali vengono calcolate in base ai conteggi giornalieri delle sequenze di eventi AS-VS, AS-VP, AP-VS e AP-VP. Sono esclusi gli eventi refrattari atriali.

**Frequenza ventricolare media** – Le frequenze cardiache diurne e notturne forniscono informazioni che possono risultare utili per gli scopi clinici descritti di seguito:

- dati oggettivi da correlare ai sintomi del paziente
- indicazioni di una disfunzione autonoma o sintomi di uno scompenso cardiaco
- informazioni relative a variazioni diurne

In questa tendenza, per “giorno” si intende un periodo di dodici ore compreso tra le ore 8:00 e le ore 20:00, mentre per “notte” si intende un periodo di quattro ore compreso tra la mezzanotte e le ore 4:00 (come indicato dall'orologio del dispositivo).


**Attività del paziente** – La tendenza relativa alle attività del paziente può fornire le seguenti informazioni:

- informazioni sul regime di esercizio fisico del paziente;
- una misurazione oggettiva della risposta del paziente a variazioni della terapia;
- un'indicazione precoce dell'instaurarsi di malattie progressive come lo scompenso cardiaco, che provocano astenia ed un conseguente calo dell'attività nel paziente.

Per determinare l'attività quotidiana del paziente il dispositivo utilizza i dati derivati dal segnale dell'accelerometro della risposta in frequenza.

### 5.4.2.5 Valutazione delle informazioni sullo scompenso cardiaco

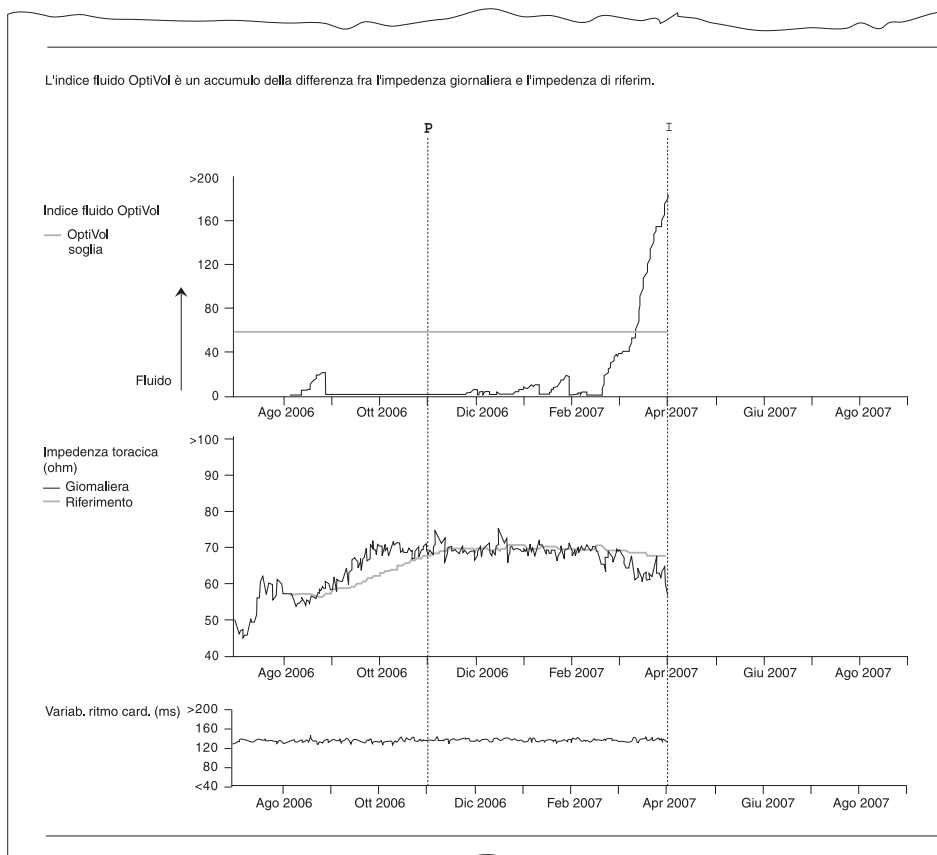**Figura 31.** Grafici sull'andamento dello scompenso cardiaco



**Variabilità del ritmo cardiaco** – La ridotta variabilità nella frequenza cardiaca del paziente può essere utile ad individuare lo scompenso cardiaco. Il dispositivo misura ciascun intervallo atriale calcolando l'intervallo atriale mediano ogni 5 min. Successivamente calcola e rappresenta graficamente un valore di variabilità (in ms) per ogni singolo giorno.

**Nota:** il calcolo della variabilità della frequenza cardiaca non include gli eventi che si verificano durante gli episodi aritmici.

**Indice del fluido OptiVol** – Una variazione dell'impedenza intratoracica può essere un indicatore precoce di un accumulo di fluido associato allo scompenso cardiaco. L'andamento dell'indice del fluido OptiVol mostra la differenza esistente tra l'impedenza toracica giornaliera misurata e l'impedenza di riferimento. Se l'impedenza giornaliera è inferiore rispetto all'impedenza di riferimento, l'indice del fluido OptiVol tende ad aumentare. Ciò può indicare che l'accumulo di liquido nel torace del paziente è aumentato. La linea orizzontale mostra il valore programmato della soglia OptiVol.

**Attenzione:** verificare l'integrità degli elettrocateri in sede di valutazione dell'andamento dell'indice del fluido OptiVol. La perdita di integrità del coil RV dovuta a una rottura dell'elettrocatero oppure a un difetto del rivestimento isolante può incidere negativamente sui risultati dell'andamento dell'indice del fluido OptiVol.

Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 6.3, "Monitoraggio dell'accumulo intratoracico di fluido con OptiVol", pagina 200.

**Nota:** la funzione di monitoraggio del fluido OptiVol costituisce una fonte aggiuntiva di informazioni per la gestione del paziente e non sostituisce gli esami che fanno parte della normale routine ospedaliera.

**Impedenza toracica** – La tendenza dell'impedenza toracica consente di confrontare l'impedenza toracica media giornaliera misurata con l'impedenza di riferimento. L'impedenza di riferimento subisce lievi variazioni da un giorno all'altro per adattarsi lentamente all'impedenza giornaliera.

## 5.5 Visualizzazione dei dati sugli episodi aritmici e impostazione delle preferenze per la raccolta dati

Il sistema fornisce un diario ad orientamento clinico degli episodi aritmici che consente di visualizzare rapidamente i dati diagnostici riepilogativi e dettagliati sugli episodi aritmici. Le informazioni sugli episodi sono disponibili in svariati formati, tra cui diagrammi degli intervalli, ECG e riepiloghi in forma testuale. Vi sono inoltre diversi strumenti di filtraggio che consentono di avere un controllo preciso dei diversi tipi di dati visualizzati.



### 5.5.1 Come visualizzare i dati sugli episodi aritmici

Selezionare l'icona Dati


⇒ Diagnostica clinica

⇒ Episodi aritmia

### 5.5.2 Visualizzazione del diario episodi

Il diario degli episodi viene visualizzato nella parte superiore della finestra Episodi aritmici. Il diario fornisce le seguenti informazioni riepilogative sugli episodi che si stanno memorizzando nel dispositivo:

- tipo di episodio
- numero di sequenze di ATP eventualmente erogate
- numero di eventuali shock erogati o energia erogata
- eventuale esito positivo dell'ultima terapia erogata
- data, ora e durata dell'episodio
- battiti atriali e ventricolari medi al minuto
- battiti ventricolari massimi al minuto
- eventuale disponibilità di dati EGM per l'episodio.

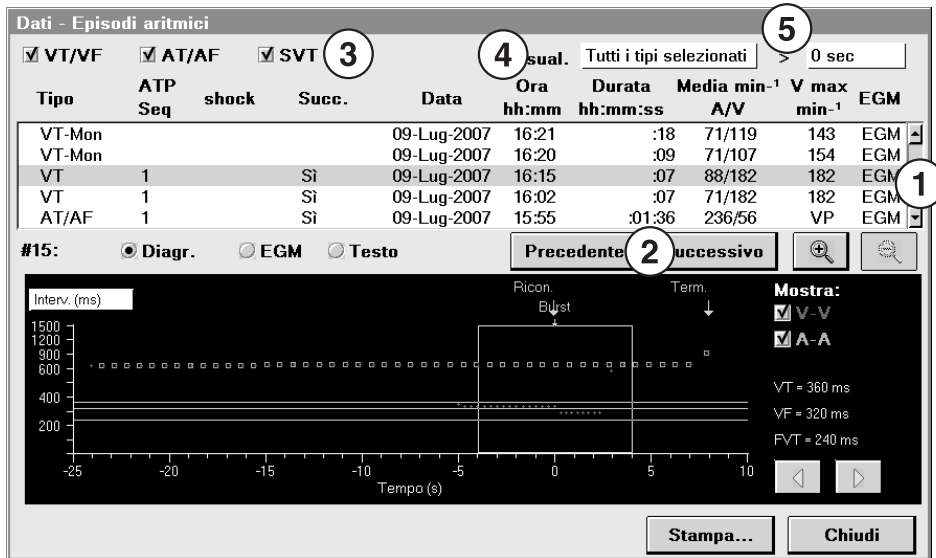**Figura 32.** La schermata di un diario episodi

- 1 Con i pulsanti di scorrimento situati sul lato destro dell'area del diario, si può sfogliare la lista degli episodi memorizzati.
- 2 Utilizzare i pulsanti [Successivo] e [Precedente] per visualizzare l'episodio successivo o precedente nel diario episodi.
- 3 Utilizzare le caselle di controllo VT/VF, AT/AF e SVT per selezionare i tipi di episodi che si desidera visualizzare.
- 4 Utilizzare il filtro di visualizzazione a discesa per limitare la visualizzazione ad episodi con caratteristiche specifiche.
- 5 Utilizzare il campo > per limitare la visualizzazione ad episodi di durata superiore ad un tempo specifico.

**Media min<sup>-1</sup> A/V** – In caso di episodi di AT/AF, Monitoraggio di VT e VT-NS, la Media min<sup>-1</sup> A/V è la durata media del ciclo A/V per l'intera durata dell'episodio. In caso di episodi di VT/VF e di SVT, la Media min<sup>-1</sup> A/V è la media dei quattro battiti al riconoscimento o immediatamente precedenti l'inibizione del riconoscimento.

**V max min<sup>-1</sup>** – Se il ventricolo è stato stimolato durante un episodio di AT/AF, il valore V max min<sup>-1</sup> viene visualizzato nel diario come VP. In caso di episodi di VT-NS, il valore V max min<sup>-1</sup> non viene visualizzato.


**Note:**

- Gli episodi che si verificano durante una sessione con il dispositivo non possono essere visualizzati nelle registrazioni degli episodi finché non si esegue un'interrogazione. L'interrogazione deve essere eseguita dopo la conclusione dell'episodio.
- In caso di esaurimento dello spazio nel diario, i dati degli episodi di ogni tipo più recenti andranno a sovrascrivere i dati degli episodi meno recenti.

**5.5.3 Visualizzazione delle registrazioni degli episodi**

La registrazione di un episodio mostra informazioni dettagliate sull'episodio attualmente selezionato nel diario episodi. La registrazione di un episodio viene inizialmente visualizzata nella parte bassa della finestra Episodi aritmici e può essere ingrandita per una migliore visualizzazione. Per un particolare episodio si possono visualizzare le seguenti informazioni:

- un diagramma degli intervalli
- un tracciato dell'EKG memorizzato (se disponibile)
- un riepilogo testuale

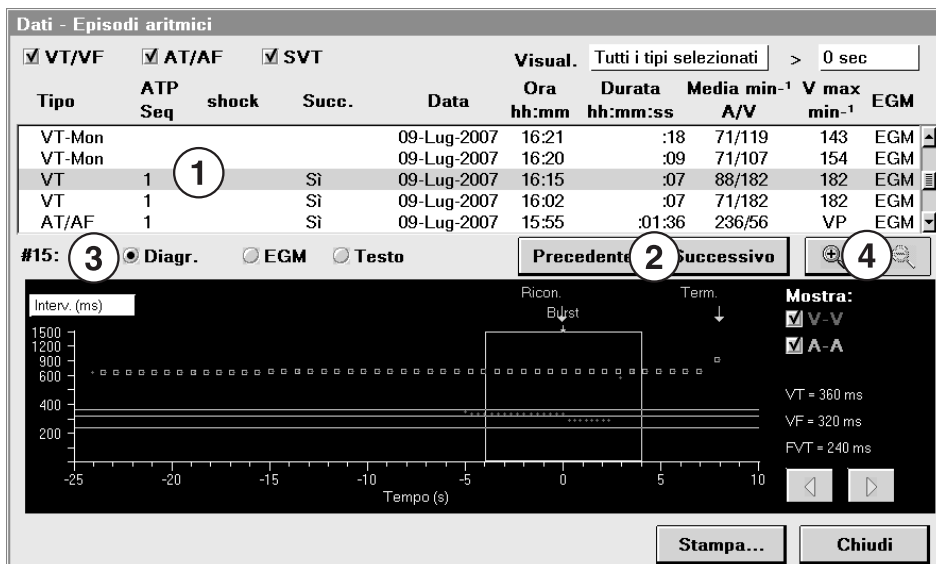**Figura 33.** Registrazione di un episodio aritmico

- 1 Selezionare la registrazione di un episodio nella parte superiore della finestra Episodi aritmici.
- 2 Utilizzare i pulsanti [Precedente] e [Successivo] per spostarsi da una registrazione all'altra.

- 3 Utilizzare i pulsanti delle opzioni Diagramma, EGM e Testo per visualizzare i dati sugli episodi selezionati in uno dei formati disponibili.
  - 4 Utilizzare il pulsante [+] per ingrandire il diagramma, l'EGM o il testo visualizzato e il pulsante [-] per ridurli.
- 

**Registrazioni dei sintomi nel diario attivate dal paziente** – Se il paziente dispone di un InCheck Patient Assistant modello 2696, raccomandargli di attivare il dispositivo per la raccolta dei dati ogni volta che avverte dei sintomi. Durante una visita di controllo, è possibile visualizzare la data, l'ora e la durata media dei cicli atriale e ventricolare nel momento in cui il paziente ha attivato la raccolta dati. Ciò può agevolare la diagnosi della sintomatologia del paziente quando non è in corso alcun episodio.


**Note:**

- L'InCheck Patient Assistant modello 2696 non può comunicare con il dispositivo medico impiantato se il dispositivo è già attivo in una sessione di telemetria wireless.
- Le registrazioni dei sintomi nel diario attivate dal paziente non vengono raccolte quando gli episodi di tachiaritmia, tra cui le SVT, vengono rilevati dal dispositivo.
- Se il paziente utilizza l'attivatore durante un episodio, nel testo sull'episodio il dispositivo registra "Il sintomo nel paziente è stato rilevato durante l'episodio". Tuttavia, non viene creata alcuna registrazione separata attivata dal paziente.

### **5.5.3.1 Visualizzazione del diagramma degli intervalli degli episodi**

Quando si seleziona per la prima volta un episodio dal diario episodi, il programmatore visualizza un diagramma che rappresenta graficamente gli intervalli V-V e A-A rispetto al tempo, indicando:

- gli intervalli di riconoscimento programmati
- il punto di riconoscimento o di inibizione del riconoscimento
- il punto di insorgenza di AT/AF
- i punti di erogazione della terapia.

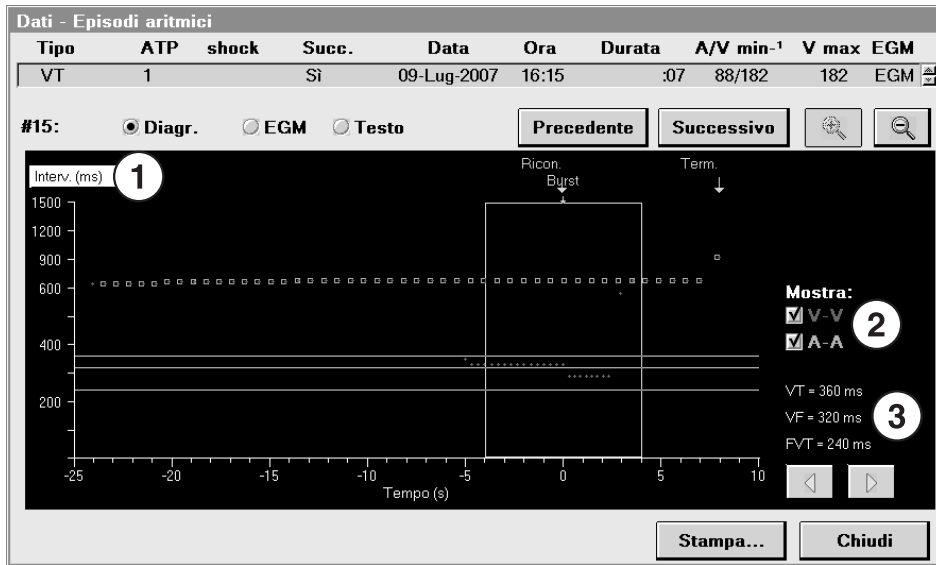
**Figura 34.** Diagramma di un episodio

- 1 Utilizzare questo pulsante per cambiare l'asse y da Intervallo (ms) a Frequenza (min<sup>-1</sup>).
- 2 Utilizzare le caselle di controllo Diagramma per visualizzare gli intervalli ventricolari e/o gli intervalli atriali.
- 3 In questa parte dello schermo vengono visualizzati gli intervalli di riconoscimento programmati.

**Nota:** il dispositivo può interrompere la memorizzazione dei dati durante un episodio per risparmiare lo spazio di memoria del dispositivo. In tal caso, le etichette temporali successive all'interruzione vengono visualizzate dal programmatore come asterischi sull'asse orizzontale del diagramma degli intervalli.

### 5.5.3.2 Visualizzazione dell'EGM degli episodi

Quando si seleziona un episodio dal diario episodi e poi l'opzione EGM, il programmatore visualizza i dati dell'EGM memorizzato per l'episodio.

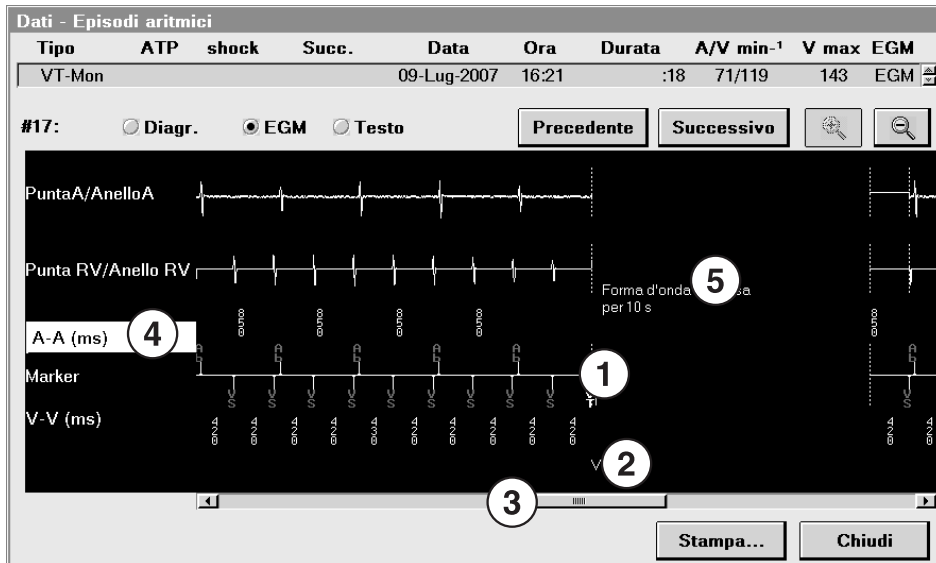**Figura 35.** EGM di un episodio

- 1 Il Marker Channel mostra gli eventi atriali e ventricolari annotati che hanno attivato il riconoscimento.
- 2 Il Decision Channel visualizza un'annotazione che indica il tipo di episodio riconosciuto (in questo caso il monitoraggio di VT). Per poter visualizzare le annotazioni del Decision Channel, è necessario che la finestra dell'EGM sia ingrandita al massimo.
- 3 Utilizzare la barra di scorrimento orizzontale nella parte bassa dello schermo per visualizzare tutti i dati EGM dell'episodio.
- 4 Utilizzare questo pulsante per selezionare un'opzione di visualizzazione di uno degli intervalli atriali. Per poter selezionare le opzioni di visualizzazione degli intervalli atriali è necessario che la finestra dell'EGM sia ingrandita al massimo.
- 5 Questa annotazione si riferisce alla durata del periodo di sospensione della registrazione dell'EGM per risparmiare spazio di memoria.

### **Memorizzazione dei dati EGM e risparmio dello spazio di memoria del dispositivo**

– In caso di episodi di VT/VF o di monitoraggio di VT, il dispositivo inizia a memorizzare i dati dell'EGM ventricolare quando si verificano tre intervalli consecutivi nella zona VT, VF o Monitoraggio di VT.

In caso di episodi di AT/AF, il dispositivo inizia a memorizzare un EGM atriale nel momento in cui il dispositivo rileva l'esordio dell'AT/AF. Il dispositivo memorizza fino a 5 s di dati EGM prima di riconoscere un episodio di AT/AF, indipendentemente dalla selezione di "EGM pre-aritmia" come opzione di memorizzazione. Per ulteriori informazioni sulla memorizzazione di EGM pre-aritmia, vedere la Sezione 5.5.4, "Come impostare le preferenze per la raccolta dati", pagina 151.

Per risparmiare spazio di memoria nel dispositivo, l'EGM viene memorizzato soltanto durante determinate parti di un episodio.

**Nota:** gli episodi di lunga durata possono contenere interruzioni dell'EGM per risparmiare spazio di memoria nel dispositivo.

### 5.5.3.3 Visualizzazione del testo di un episodio

Selezionando un episodio dal diario episodi e poi l'opzione Testo, il programmatore visualizza un testo riepilogativo dell'episodio.

**Figura 36.** Testo di un episodio

**Dati - Episodi aritmici**

Tipo	ATP	shock	Succ.	Data	Ora	Durata	A/V min <sup>-1</sup>	V max	EGM
VT-Mon				09-Lug-2007	16:21	:18	71/119	143	EGM

#17: ☐ Diagn. ☐ EGM ☒ Testo Precedente Successivo 🔍 🔍

Episodio #17: 09-Lug-2007 16:21:40

**Riepilogo dell'episodio**

Tipo iniziale	Monitoraggio di VT (spontaneo)		
Durata	18 s (26 battiti)		
Frequenza massima A/V	71 min <sup>-1</sup> /143 min <sup>-1</sup>		
V. mediano	143 min <sup>-1</sup> (420 ms)		
Attività durante insorgenza	Riposo, sensore = 55 min <sup>-1</sup>		

**Impostazioni parametri**

	Iniziale	Ric.succ.	Intervallo V. (freq.)
VF	On	18/24	12/16
FVT	via VF		
VT	On	16	12
Monitor.	Monitor.	20	

**PR Logic**

	Altre opzioni avanzate
AF/Afl	On
Tach. sinus.	On
Altre SVT 1:1	Off

**Altre opzioni avanzate**

Stabilità	Off
Insorgenza	Off
Tempo mass. sospens.	Off

Stampa... Chiudi

- 1 Utilizzare la barra di scorrimento verticale sul lato destro della schermata per scorrere il testo dell'episodio.

### 5.5.4 Come impostare le preferenze per la raccolta dati

La raccolta dati è automatica e non può essere disattivata. Tuttavia, nella schermata Impostazione raccolta dati vi sono numerose impostazioni per le preferenze che servono a controllare la visualizzazione dei dati sugli episodi. Queste impostazioni consentono inoltre di controllare la schermata di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale.

**Sorgente Leadless ECG (LECG)** – La forma d'onda Leadless ECG mostra un'approssimazione del segnale ECG di superficie attraverso la sorgente Cassa/SVC ed è utilizzabile solo in presenza di un elettrocatetere SVC.

**Nota:** l'opzione Leadless ECG non può essere eliminata dal monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale.

Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 3.12, "Come accelerare le sessioni di follow-up con il Leadless ECG", pagina 91.

**Sorgente EGM** – Definire per ciascun canale EGM gli elettrodi della sorgente attraverso i quali il dispositivo registra i segnali EGM.

**Nota:** le misurazioni dell'intervallo cardiaco effettuate dal dispositivo si basano sempre sui segnali rilevati attraverso la polarità di sensing programmata (e non sull'EGM diagnostico in memoria). Per tale motivo, i criteri dell'intervallo di tachiaritmia, la sincronizzazione e la terapia non vengono modificati dalla selezione delle sorgenti EGM.

**Range EGM e LECG** – Selezionare un range per ciascun canale EGM e per il canale LECG. L'impostazione del range influisce sulla risoluzione del segnale: più basso è il valore impostato, più alta sarà la risoluzione. Se il segnale è illeggibile o tagliato, valutare la possibilità di cambiare il range.

**Monitorato** – Selezionare un insieme di due sorgenti da utilizzare per la memorizzazione delle registrazioni degli episodi.

**EGM pre-aritmia** – Indicare se si desidera memorizzare i dati EGM raccolti prima di un episodio. Quando la memorizzazione dell'EGM pre-aritmia è attivata, il dispositivo raccoglie fino a 10 s di dati sull'EGM prima dell'insorgenza di episodi di VT/VF, di monitoraggio di VT o del riconoscimento di episodi di SVT. Se l'EGM pre-aritmia è programmato su Off, nella registrazione degli episodi verranno memorizzati solo gli intervalli e nessun EGM all'inizio di ciascun episodio di VT/VF, VT monitorata o SVT. Il dispositivo memorizza fino a 5 s di dati EGM prima del riconoscimento di AT/AF, indipendentemente dall'impostazione della funzione di memorizzazione dell'EGM pre-aritmia.

**Nota:** La memorizzazione dell'EGM pre-aritmia funziona mantenendo il circuito dell'EGM costantemente attivato e riduce pertanto la durata del dispositivo. Se si seleziona On - 1 mese oppure On - 3 mesi, la memorizzazione dell'EGM pre-aritmia viene disattivata automaticamente alla scadenza del periodo.

**Eliminazione dei dati** – La funzione Cancella i dati consente di eliminare tutti i dati memorizzati ad eccezione dei dati di tendenza e dei contatori di durata.

**Nota:** i dati cancellati non sono recuperabili.



#### 5.5.4.1 Programmazione delle preferenze per la raccolta dati

Selezionare l'icona Parametri

⇒ Impostazione raccolta dati...

- ▷ Sorgente LECG
- ▷ Range Leadless ECG
- ▷ Sorgente EGM1
- ▷ Range EGM1
- ▷ Sorgente EGM2
- ▷ Range EGM2
- ▷ Sorgente EGM3
- ▷ Range EGM3
- ▷ Monitorati
- ▷ EGM pre-aritmia

### 5.6 Visualizzazione dei contatori di episodi e terapie

Il programmatore consente di visualizzare i dati memorizzati relativi al numero di volte in cui si sono verificati episodi e terapie di VT/VF e AT/AF. I dati relativi al conteggio degli episodi ventricolari comprendono il numero di tachicardie sopraventricolari (SVT), di contrazioni ventricolari premature (PVC), di stimolazioni della stabilizzazione della frequenza ventricolare (VRS) e di episodi monitorati e non sostenuti. I dati relativi al conteggio degli episodi atriali comprendono il numero di episodi monitorati, non sostenuti, trattati e terminati con la stimolazione.

#### 5.6.1 Come visualizzare i contatori

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Contatori

## 5.6.2 Contatori di episodi di VT/VF

**Figura 37.** Contatori di episodi di VT/VF

Dati - Contatori			
<input checked="" type="radio"/> Episodi di VT/VF	<input type="radio"/> Rx VT/VF	<input type="radio"/> Episodi di AT/AF	<input type="radio"/> Rx AT/AF
	Sessione precedente 05-Lug-2007 al 09-Lug-2007	Ultima sessione 09-Lug-2007 al 11-Lug-2007	Durata dispositivo Totale
<b>Contatori di VT/VF</b>			
VF	0	1 ↑	2
FVT	0	0	0
VT	2	4 ↑	7
VT monitorata (133 - 143 min <sup>-1</sup> )	2	0 ↓	
VT-NS (>4 battiti, >143 min <sup>-1</sup> )	0	0	
Serie di PVC (2-4 battiti)	0.0 all'ora	0.2 all'ora ↑	
PVC singole	1.1 all'ora	0.7 all'ora ↓	
Cicli di stimolazioni di VRS	0.0 all'ora	0.0 all'ora	
Singole stimolazioni di VRS	0.0 all'ora	0.0 all'ora	
<b>SVT: Rx VT/VF trattenuta</b>			
FibA/FlutterA	0	1	1
Tach. sinus.	0	1	2
Altre SVT 1:1	0	0	0
Stabilità V.	0	1	1
Insorgenza	0	1	1

Stampa...

Chiudi

I dati di conteggio disponibili sugli episodi di VT/VF sono i seguenti:

**VF, FVT e VT** – Numero di episodi di ogni tachiaritmia.

**VT monitorata** – Numero di episodi di Monitoraggio di VT.

**VT-NS** – Numero di tachiaritmie ventricolari non sostenute.

**Serie di PVC** – Media oraria di serie di contrazioni ventricolari premature (PVC) in cui due, tre o quattro eventi ventricolari consecutivi sono prematuri.

**PVC singole** – Media oraria di PVC singole. Le PVC nelle serie di PVC non vengono contate come PVC singole.

**Serie di stimolazioni VRS** – Media oraria delle volte in cui due o più eventi ventricolari consecutivi sono impulsi di stimolazione (sospensioni dell'intervallo di fuga VRS) per la stabilizzazione della frequenza ventricolare (VRS).

**Singole stimolazioni VRS** – Media oraria degli impulsi di singole stimolazioni VRS (sospensioni dell'intervallo di fuga VRS). Le stimolazioni VRS contenute in serie di stimolazioni VRS non vengono contate come singole stimolazioni VRS.


**SVT: Terapia per VT/VF inibita** – Per ogni funzione di discriminazione delle tachicardie sopraventricolari (SVT), è il numero di episodi per cui è stata applicata la funzione

determinando così l'interruzione del riconoscimento e dell'erogazione della terapia per VT/FVT/VF. Se è stata applicata più di una funzione di discriminazione SVT, verrà visualizzata la funzione applicata con maggiore frequenza.

**Nota:** vengono incluse soltanto le SVT con frequenze rientranti nelle zone trattate.

5.6.3 Contatori di terapie per VT/VF

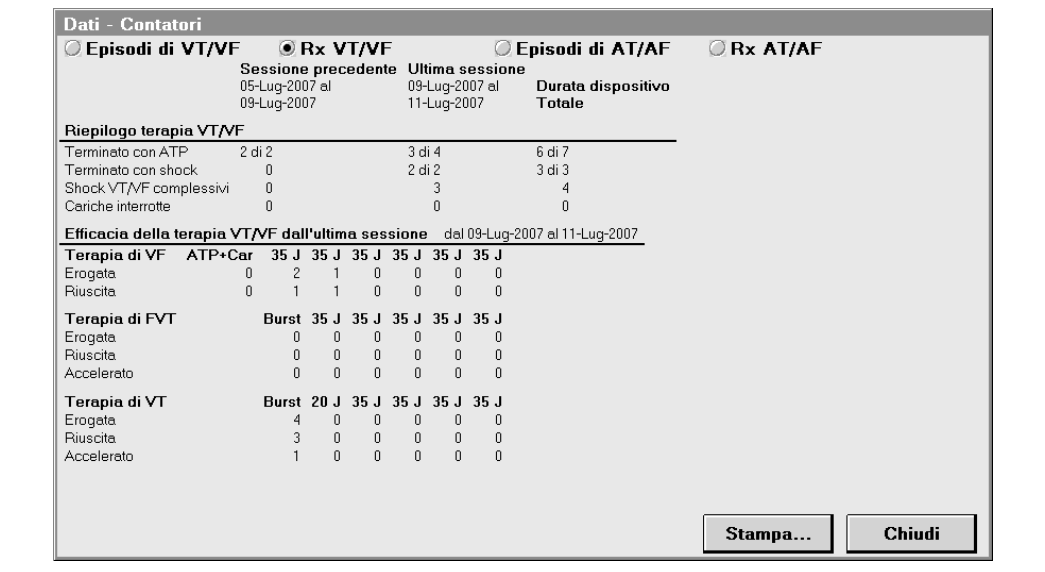Figura 38. Contatori di terapie per VT/VF




I dati di conteggio disponibili sulle terapie per VT/VF sono i seguenti:

**Riepilogo terapia VT/VF** – Numero di tachiaritmie terminate con la stimolazione e di tachiaritmie terminate con l'erogazione di uno shock; numero complessivo di shock VT/VF e di cariche interrotte.

**Efficacia della terapia per VT/VF dall'ultima sessione** – Numero e tipi di terapie per VF, FVT e VT erogate, andate a buon fine (senza riconoscimento successivo) e, per le terapie per VT e FVT, se gli episodi oggetto di riconoscimento successivo hanno subito un'accelerazione (e sono stati successivamente riconosciuti come tachiaritmie più rapide). Le sei terapie elencate vengono indicate come Rx1-Rx6 per ciascun tipo di episodio.

5.6.4 Contatori di episodi di AT/AF

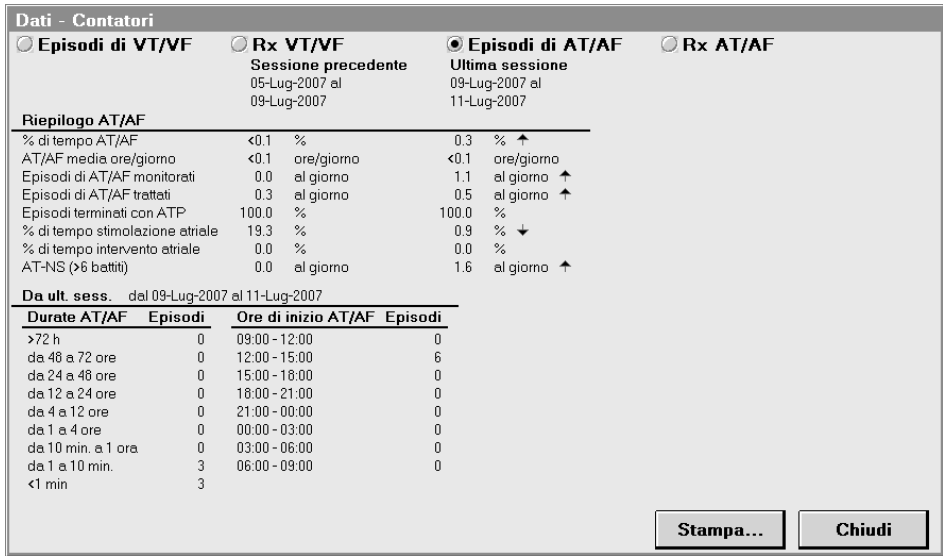Figura 39. Contatori di episodi di AT/AF



I dati riepilogativi di conteggio disponibili sugli episodi di VT/VF sono i seguenti:

**% di tempo AT/AF** – Percentuale del periodo complessivo di AT/AF. L'inizio dell'AT/AF corrisponde al momento di insorgenza della stessa.

**AT/AF media ore/giorno** – Durata media giornaliera dell'AT/AF. L'inizio dell'AT/AF corrisponde al momento di insorgenza della stessa.

**Episodi di AT/AF monitorata** – Media giornaliera di episodi di AT/AF monitorata. L'inizio dell'AT/AF corrisponde al momento in cui ha inizio il riconoscimento dell'AT/AF.

**Episodi di AT/AF trattata** – Media giornaliera di episodi di AT/AF trattata. L'inizio dell'AT/AF corrisponde al momento in cui ha inizio il riconoscimento dell'AT/AF.

**Episodi terminati con la stimolazione** – Percentuale di episodi terminati con la stimolazione per la sessione. L'inizio dell'AT/AF corrisponde al momento in cui ha inizio il riconoscimento dell'AT/AF.

**% di tempo stimolazione atriale** – Percentuale del tempo di erogazione della stimolazione atriale.

**% di tempo intervento atriale** – Percentuale di tempo di erogazione della stimolazione atriale dovuta alla stimolazione per intervento atriale (stabilizzazione della frequenza atriale

o stimolazione atriale preferenziale). Si tratta di una percentuale della durata totale, non di una percentuale della durata della stimolazione atriale.

**AT-NS** – Media giornaliera di episodi di AT (AT-NS) non sostenuta.


In caso di episodi di AT/AF, sono disponibili le seguenti informazioni su Durate AT/AF e Ore di inizio AT/AF:

**Durate AT/AF** – Numero di episodi per ciascuna serie di durate, che iniziano con episodi di durata superiore ai tre giorni e terminano con episodi di durata inferiore a 1 min.

**Ore di inizio AT/AF** – Numero di episodi che rientrano in ciascuna serie di periodi di 3 ore del giorno.

5.6.5 Contatori di terapie per AT/AF

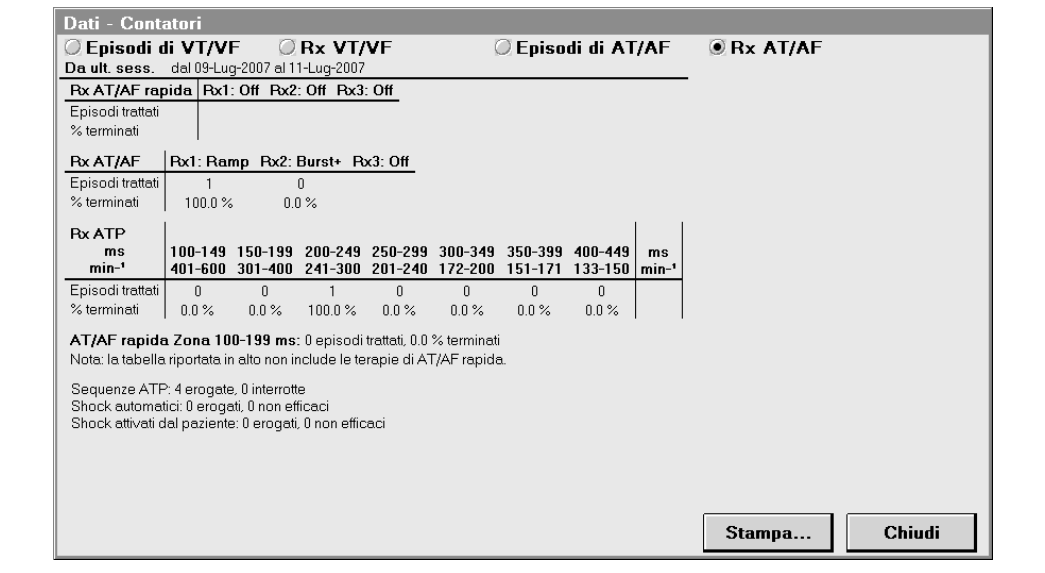Figura 40. Contatori di terapie per AT/AF



I dati sui conteggi delle terapie per AT/AF si riferiscono al periodo compreso tra l'interrogazione corrente e l'ultima sessione.

Per le terapie per AT/AF, sono disponibili i seguenti dati:

**Rx AT/AF rapida** – Numero di episodi per i quali è stata erogata una terapia (distinti per tipo di terapia) e percentuale di episodi terminati con esito positivo per terapia.

**Rx AT/AF** – Numero di episodi per i quali è stata erogata una terapia (distinti per tipo di terapia) e percentuale di episodi terminati con esito positivo per terapia.

**Episodi trattati per durata del ciclo** – Numero di episodi trattati e percentuale di episodi terminati, suddivisi in sette gruppi in base alla durata del ciclo.

**Sequenze di ATP** – Numero di sequenze di ATP atriale erogate e numero di sequenze interrotte.

**Shock automatici** – Numero di terapie di defibrillazione atriale automatica erogate e numero di terapie rivelatesi inefficaci.

**Shock attivati dal paziente** – Numero di terapie di defibrillazione atriale attivate dal paziente ed erogate e numero di terapie rivelatesi inefficaci.

## 5.7 Visualizzazione dei dati della memoria Flashback

La funzione Memoria Flashback consente di registrare gli intervalli atriali e ventricolari che si verificano immediatamente prima degli episodi di tachiaritmia o dell'ultima interrogazione. La funzione consente di rappresentare graficamente i dati degli intervalli nel tempo e di visualizzare e stampare un grafico dei dati raccolti. I dati rappresentati graficamente possono essere di aiuto nella valutazione del ritmo cardiaco del paziente e delle prestazioni di altre funzioni come la risposta in frequenza.

La funzione Memoria Flashback registra automaticamente un totale di massimo 2000 intervalli V-V e A-A e dati di marker memorizzati per i seguenti eventi:

- l'ultima interrogazione
- l'ultimo episodio di VF
- l'ultimo episodio di VT
- l'ultimo episodio di AT/AF

Se vengono rilevati due o più episodi entro 15 min, i dati della Memoria Flashback prima dell'insorgenza degli episodi possono essere troncati.

**Nota:** al riconoscimento di un episodio, la memorizzazione Flashback viene sospesa finché l'episodio non termina.

### 5.7.1 Come visualizzare i dati presenti nella memoria Flashback


Selezionare l'icona Dati

⇒ Diagnostica clinica

⇒ Memoria Flashback

**Nota:** è inoltre possibile visualizzare la schermata Memoria Flashback selezionando [Flashback] dalle schermate dei dettagli sulle ultime registrazioni di VT, VF, FVT o AT/AF.

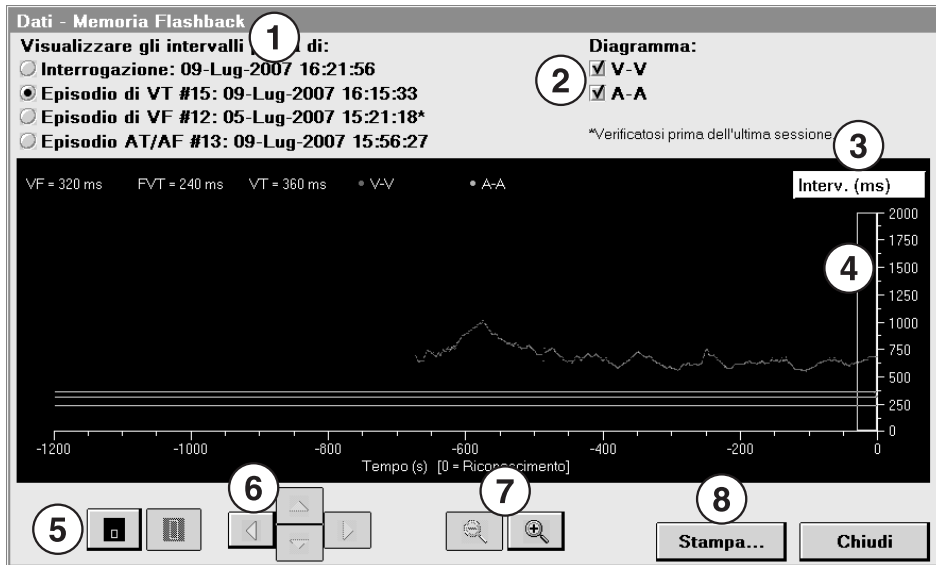**Figura 41.** La schermata Dati – Memoria Flashback



- |                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 Intervalli visualizzabili | 5 Finestra di ridimensionamento zoom (riduzione o ingrandimento) |
| 2 Intervalli del diagramma  | 6 Finestra di riposizionamento zoom                              |
| 3 Intervallo o Frequenza    | 7 Ingrandimento (+), riduzione (-)                               |
| 4 Finestra di zoom          | 8 Stampa                                                         |

## 5.8 Utilizzo degli istogrammi della frequenza per valutare le frequenze cardiache

Le informazioni sulle frequenze cardiache registrate tra una sessione paziente e quella successiva possono essere di aiuto nel monitoraggio delle condizioni del paziente per valutare l'efficacia delle terapie. Il rapporto degli istogrammi della frequenza mostra la distribuzione delle frequenze atriali e ventricolari registrate dall'ultima sessione paziente e nel periodo precedente l'ultima sessione. I dati degli istogrammi della frequenza sono disponibili unicamente sotto forma di rapporto stampato.

### 5.8.1 Come stampare il rapporto degli istogrammi della frequenza

Il rapporto degli istogrammi della frequenza può essere stampato dall'icona Dati o dall'icona Rapporti.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Istogrammi frequenza (solo rapporto)

Selezionare l'icona Rapporti


- ⇒ Rapporti disponibili...
- ⇒ Istogrammi frequenza

### 5.8.2 Informazioni contenute nel rapporto degli istogrammi della frequenza

Il rapporto degli istogrammi della frequenza si basa sui dati relativi agli eventi atriali e ventricolari memorizzati dal dispositivo. Il rapporto degli istogrammi della frequenza mostra i dati sulla frequenza cardiaca con tre tipi di istogrammi: frequenza atriale, frequenza ventricolare e frequenza ventricolare durante l'AT/AF. Il rapporto comprende anche dati sullo stato della conduzione del paziente. Il rapporto include dati relativi al periodo di raccolta corrente ed a quello precedente. La memorizzazione dei dati per il rapporto degli istogrammi della frequenza avviene in maniera automatica; non è richiesta alcuna impostazione.



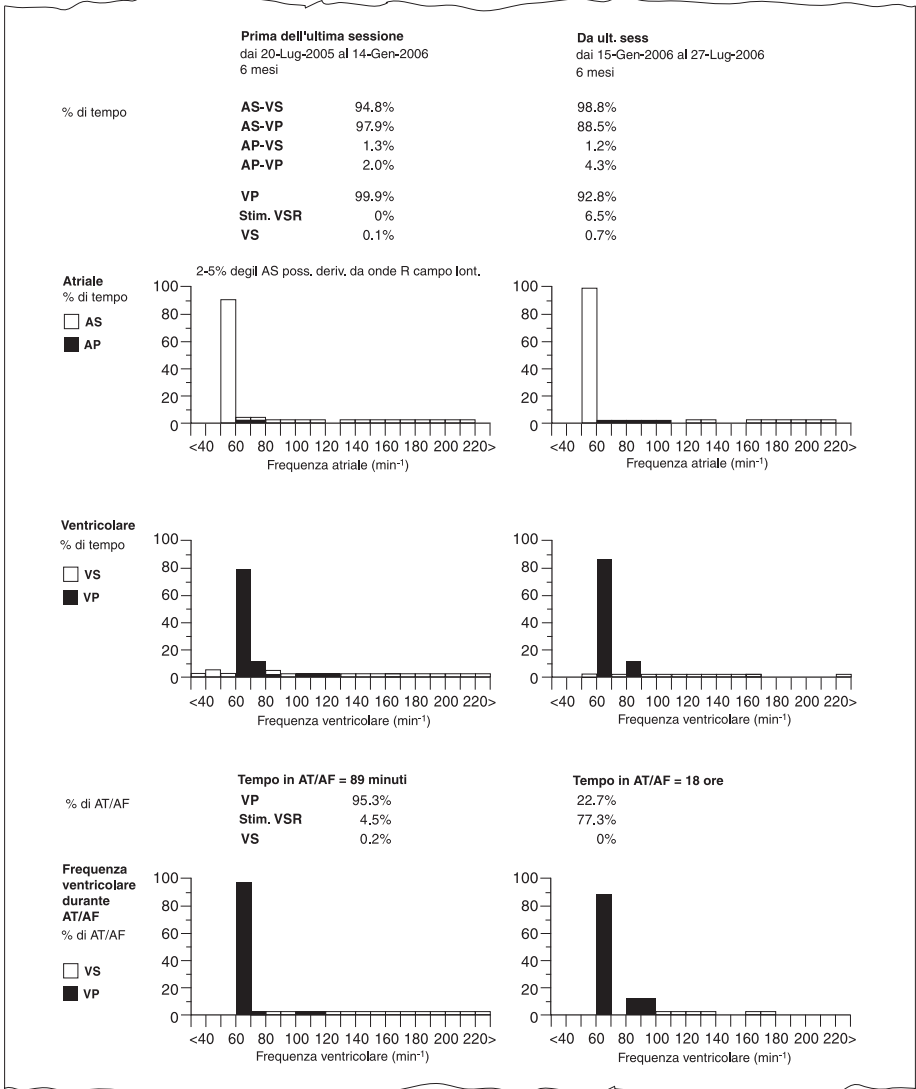Figura 42. Rapporto degli istogrammi della frequenza



Gli istogrammi della frequenza mostrano la percentuale di tempo dedicato dal dispositivo a stimolare e rilevare all'interno di determinati range di frequenze. Vi sono venti range di frequenza, ognuno dei quali ha una durata di  $10 \text{ min}^{-1}$ . Le frequenze inferiori a  $40 \text{ min}^{-1}$  rientrano nel range "<40", mentre le frequenze superiori a  $220 \text{ min}^{-1}$  rientrano nel range ">220".

**% di tempo** – Questa sezione mostra lo stato della conduzione del paziente sotto forma di percentuale del tempo complessivo impiegato dal dispositivo a stimolare o rilevare durante il periodo di raccolta. Le percentuali vengono calcolate in base ai conteggi giornalieri delle sequenze di eventi AS-VS, AS-VP, AP-VS e AP-VP. In questa sezione viene inoltre visualizzata la percentuale di tutti gli eventi ventricolari erogati dalla funzione Risposta al sensing ventricolare (VSR).

**Istogramma della frequenza atriale** – L'istogramma della frequenza atriale mostra la distribuzione della frequenza degli eventi atriali rilevati e stimolati (compresi gli eventi rilevati che si verificano durante il periodo refrattario). L'istogramma indica anche la percentuale di rilevamenti atriali che possono essere originati dal sensing del far field di onde R (FFRW). Il sensing del far field di onde R è probabile se gli intervalli tra gli eventi atriali rilevati sono irregolari. La percentuale viene registrata in due range: 2-5% o superiore al 5%.

**Istogramma della frequenza ventricolare** – L'istogramma della frequenza ventricolare mostra la distribuzione della frequenza degli eventi ventricolari rilevati e stimolati.

**Istogramma della frequenza ventricolare durante l'AT/AF** – L'istogramma della frequenza ventricolare durante l'AT/AF mostra gli eventi ventricolari stimolati e rilevati che si verificano durante le aritmie atriali rilevate. Tra le altre informazioni visualizzate figurano la durata totale dell'AT/AF<sup>4</sup> e la percentuale di tempo impiegato dal dispositivo a stimolare, rilevare o erogare una stimolazione VSR durante le aritmie atriali. Questo istogramma può essere utilizzato per monitorare l'efficacia della terapia di controllo della frequenza ventricolare e la titolazione del farmaco.

## 5.9 Visualizzazione di dati dettagliati sulle prestazioni del dispositivo e degli elettrocateri

Il dispositivo misura e registra quotidianamente dati relativi alle prestazioni del dispositivo e degli elettrocateri in maniera automatica. Tali dati vengono visualizzati in maniera dettagliata nelle schermate Misurazioni batteria ed elettrocateri e Tendenze elettrocateri.

---

<sup>4</sup> La durata dell'AT/AF viene calcolata dal punto di insorgenza dell'AT/AF. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 8.1, "Riconoscimento di tachiaritmie atriali", pagina 294.

### 5.9.1 Visualizzazione dei dati relativi alle misurazioni della batteria e degli elettrocateteri


Nella schermata Misurazioni batteria ed elettrocateteri vengono visualizzati gli ultimi valori ricavati dalle principali misurazioni delle prestazioni del dispositivo e degli elettrocateteri. Questi dati possono comprendere i valori misurati automaticamente oppure quelli misurati durante i test manuali del sistema.

#### 5.9.1.1 Come visualizzare i dati relativi alle misurazioni della batteria e degli elettrocateteri

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica dispositivo/elettrocatetere
- ⇒ Misurazioni batteria ed elettrocateteri

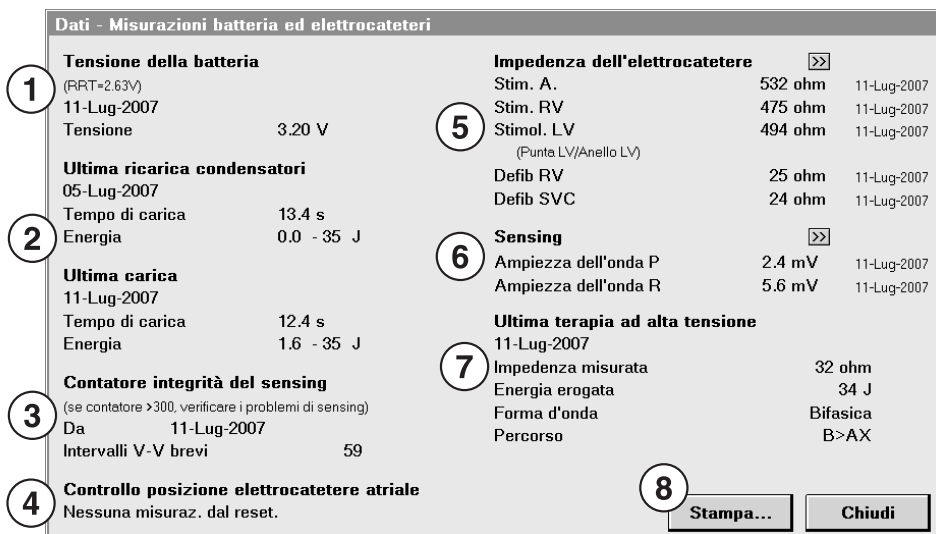**Figura 43.** La schermata Misurazioni batteria ed elettrocateteri



- 1 Informazioni sulla tensione della batteria e sull'indicatore di sostituzione
- 2 Informazioni sulla carica dei condensatori
- 3 Contatore di integrità del sensing
- 4 Risultato dell'ultimo controllo della posizione dell'elettrocatetere atriale
- 5 Ultime misurazioni dell'impedenza degli elettrocateteri
- 6 Ultime misurazioni automatiche quotidiane dell'ampiezza del sensing
- 7 Informazioni sull'ultima terapia ad alta tensione erogata
- 8 Selezionare [Stampa...] per stampare un rapporto sulle misurazioni della batteria e degli elettrocateteri

### 5.9.1.2 Gli indicatori di tensione e sostituzione della batteria

Il dispositivo misura automaticamente la tensione della batteria all'avvio del collegamento telemetrico all'inizio di una sessione, quando viene effettuato un test di impedenza degli elettrocateri ed ogni notte alle ore 2:15. Queste misurazioni fanno parte delle misurazioni automatiche giornaliere. Il risultato dell'ultima misurazione della tensione della batteria effettuata viene visualizzato nella schermata Misurazioni batteria ed elettrocateri.

**Nota:** se nelle ultime 24 ore si è verificata una carica ad alta tensione, si potrebbe riscontrare un calo temporaneo della tensione della batteria visualizzata.

Se tre misurazioni quotidiane consecutive ed automatiche della tensione della batteria risultano pari o inferiori al valore del momento consigliato per la sostituzione (RRT), sul programmatore vengono visualizzati il simbolo RRT e la data in cui la batteria ha raggiunto lo stato RRT. Se sullo schermo compare il simbolo RRT, contattare il rappresentante di zona della Medtronic e fissare un appuntamento per sostituire il dispositivo.

La durata prevista del dispositivo post-ERI (definita come "periodo di servizio prolungato" (PSP), è di tre mesi (novanta giorni).<sup>5</sup> Al termine del PSP dopo novanta giorni, il dispositivo raggiunge lo stato di fine servizio (EOS) e sullo schermo compare il simbolo EOS.<sup>6</sup>

**Avvertenza:** se sul programmatore si attiva l'indicatore di fine servizio (EOS), sostituire immediatamente il dispositivo. Dopo l'attivazione dell'indicatore EOS, il dispositivo può perdere la capacità di stimolare, rilevare ed erogare terapie in maniera adeguata.

---

<sup>5</sup> L'EOS può comparire prima dello scadere dei novanta giorni se l'utilizzo effettivo della batteria supera le condizioni previste durante il periodo di servizio prolungato. Per una spiegazione di queste condizioni, cfr. la Sezione A.3, "Indicatori di sostituzione", pagina 444.

<sup>6</sup> Il simbolo EOS può comparire anche in caso di tempo di carica eccessivo.

### **5.9.1.3 Informazioni sulla carica dei condensatori e sulle terapie ad alta tensione**

Nella schermata Misurazioni batteria ed elettrocateri vengono visualizzate informazioni sull'ultima carica ad alta tensione, sull'ultima ricarica dei condensatori e sull'ultima terapia ad alta tensione erogata. Nella sezione Ultima carica vengono visualizzati la data, l'ora della carica ed il range di energia dall'ultima carica ad alta tensione dei condensatori (da qualsiasi energia iniziale a qualsiasi energia finale). Nella sezione Ultima ricarica condensatori vengono visualizzati la data, l'ora della carica, il range di energia dall'ultima ricarica alla massima energia dei condensatori del dispositivo e la carica rimasta nei condensatori per almeno dieci minuti. Nella sezione Ultima terapia ad alta tensione vengono visualizzati la data, l'impedenza misurata, l'energia erogata, la forma d'onda ed il percorso relativi all'ultima terapia ad alta tensione erogata.

### **5.9.1.4 Contatore di integrità del sensing**

Quando il dispositivo rileva rumore elettrico ad alta frequenza, il risultato è spesso rappresentato da un gran numero di eventi ventricolari rilevati con intervalli prossimi al valore programmato per il blanking ventricolare dopo un rilevamento ventricolare (Blanking V. post VS). Il contatore di integrità del sensing registra il numero di eventi ventricolari con intervalli compresi entro 20 ms dal valore del parametro Blanking V. post VS. Un numero elevato di intervalli ventricolari brevi può indicare oversensing, la rottura di un elettrocatero o una vite di fissaggio allentata. Se il contatore di integrità del sensing registra oltre trecento intervalli ventricolari brevi, verificare che non vi siano potenziali problemi di sensing e di integrità degli elettrocateri.

### **5.9.1.5 Risultati del controllo della posizione dell'elettrocatero atriale**

Il dispositivo può essere programmato in modo tale da disattivare automaticamente le terapie per tachiaritmia atriale nel caso in cui dovesse emergere un potenziale problema di posizionamento dell'elettrocatero atriale durante il controllo quotidiano. Nella schermata Misurazioni batteria ed elettrocateri viene visualizzato il risultato relativo all'ultimo controllo della posizione dell'elettrocatero atriale. Per ulteriori informazioni sul controllo della posizione dell'elettrocatero atriale, vedere la Sezione 9.4, "Pianificazione delle terapie atriali", pagina 379.

### 5.9.1.6 Misurazioni dell'impedenza degli elettrocateri e dell'ampiezza del sensing

Nella schermata Misurazioni batteria ed elettrocateri vengono visualizzate le ultime misurazioni dell'impedenza degli elettrocateri e dell'ampiezza del sensing effettuate. Relativamente alle misurazioni dell'impedenza degli elettrocateri, vengono visualizzate le ultime misurazioni effettuate manualmente o le ultime misurazioni automatiche giornaliere. Relativamente alle misurazioni dell'ampiezza del sensing, vengono visualizzate le ultime misurazioni automatiche giornaliere effettuate. Le misurazioni effettuate con il test di sensing manuale non vengono visualizzate nella schermata Misurazioni batteria ed elettrocateri. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione delle misurazioni manuali dell'impedenza degli elettrocateri, cfr. la Sezione 10.3, "Misurazione dell'impedenza degli elettrocateri", pagina 423. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione delle misurazioni manuali dell'ampiezza del sensing, cfr. la Sezione 10.4, "Esecuzione di un test di sensing", pagina 424.

È possibile confrontare le ultime misurazioni effettuate con le tendenze delle misurazioni automatiche giornaliere selezionando il pulsante Impedenza elettrocateri [>>] oppure il pulsante Sensing [>>] per visualizzare la schermata Tendenze elettrocateri.

### 5.9.2 Visualizzazione delle tendenze dell'impedenza degli elettrocateri

Il dispositivo misura automaticamente l'impedenza di ciascun elettrocateri impiantato con impulsi elettrici sottosoglia ogni notte alle ore 3:00. Questi impulsi vengono sincronizzati con eventi rilevati o stimolati e non catturano il cuore.

Le misurazioni automatiche giornaliere dell'impedenza degli elettrocateri vengono visualizzate nella schermata Tendenze elettrocateri. I dati vengono rappresentati sotto forma di grafico. Il grafico mostra le ultime misurazioni (massimo quindici) ed un massimo di ottanta misurazioni riepilogative settimanali (mostrando i valori minimi, massimi e medi per ogni settimana). Ogni variazione significativa o improvvisa dell'impedenza degli elettrocateri può indicare un problema con l'elettrocateri.

Se il dispositivo non è in grado di eseguire misurazioni automatiche dell'impedenza degli elettrocateri, nel grafico sulle tendenze compaiono alcune interruzioni.


**Nota:** l'impedenza Defib. RV viene misurata e visualizzata solo per il percorso di defibrillazione attualmente programmato. La riprogrammazione del parametro Active Can/Coil SVC consente di cambiare gli elettrodi del percorso di defibrillazione e di determinare quali delle misurazioni raccolte verranno visualizzate nel grafico sulle tendenze.

### 5.9.2.1 Come visualizzare le tendenze dell'impedenza degli elettrocatteteri

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica dispositivo/elettrocatteteri
- ⇒ Tendenze impedenza elettrocatteteri

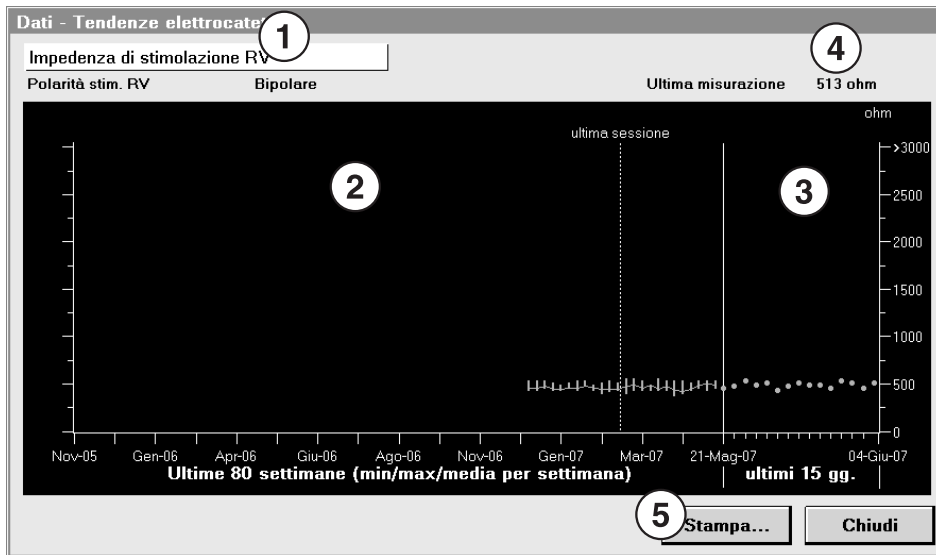**Figura 44.** La schermata Tendenze elettrocatteteri in cui vengono visualizzate le tendenze dell'impedenza di stimolazione RV



- |                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Tendenza misurazione selezionata          | 4 Ultimo valore di impedenza misurato                                                    |
| 2 Valori minimi, massimi e medi settimanali | 5 Selezionare [Stampa...] per stampare un rapporto sulle tendenze degli elettrocatteteri |
| 3 Ultimi valori misurati                    |                                                                                          |

### 5.9.3 Visualizzazione delle tendenze di ampiezza e del sensing

Il dispositivo inizia a misurare l'ampiezza degli eventi intrinseci rilevati ogni notte alle ore 2: 15. Il dispositivo tenta inoltre di misurare l'ampiezza di nove eventi intrinseci normali rilevati per poi registrare il valore mediano di tali eventi. Se il dispositivo non raccoglie nove misurazioni dell'ampiezza entro la mezzanotte, non viene registrata alcuna misurazione. Nel grafico sulle tendenze dell'ampiezza del sensing sarà presente un'interruzione per quel determinato giorno.

Le misurazioni automatiche giornaliere dell'ampiezza del sensing vengono visualizzate nella schermata Tendenze elettrocatetere. I dati vengono rappresentati sotto forma di grafico. Il grafico mostra le ultime misurazioni (massimo quindici) ed un massimo di ottanta misurazioni riepilogative settimanali (mostrando i valori minimi, massimi e medi per ogni settimana). Eventuali variazioni significative o improvvise dell'ampiezza del sensing possono indicare un problema con uno degli elettrocateteri.

**Nota:** i dati sulle tendenze dell'ampiezza del sensing mostrano le variazioni nelle misurazioni dell'ampiezza del sensing che possono essere utilizzate per valutare l'integrità degli elettrocateteri. L'idoneità del margine di sicurezza del sensing ventricolare non può essere ricavata dalla misurazione della tendenza delle onde R ma deve basarsi su test di induzione VF.

**Nota:** poiché gli eventi ventricolari rilevati non sono comuni durante la stimolazione CRT, il dispositivo potrebbe incontrare delle difficoltà nella raccolta delle misurazioni giornaliere dell'ampiezza delle onde R. Tuttavia, se la gestione cattura LV viene programmata su Adattata o Monitoraggio, il dispositivo effettuerà anche misurazioni delle onde R durante l'operazione di ricerca della soglia di stimolazione. Se in una giornata vengono raccolte meno di nove misurazioni delle onde R, il dispositivo utilizza le misurazioni delle onde R raccolte durante la ricerca della soglia di stimolazione.


### 5.9.3.1 Come visualizzare le tendenze dell'ampiezza del sensing

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica dispositivo/elettrocatetere
- ⇒ Tendenze ampiezza onda P/R



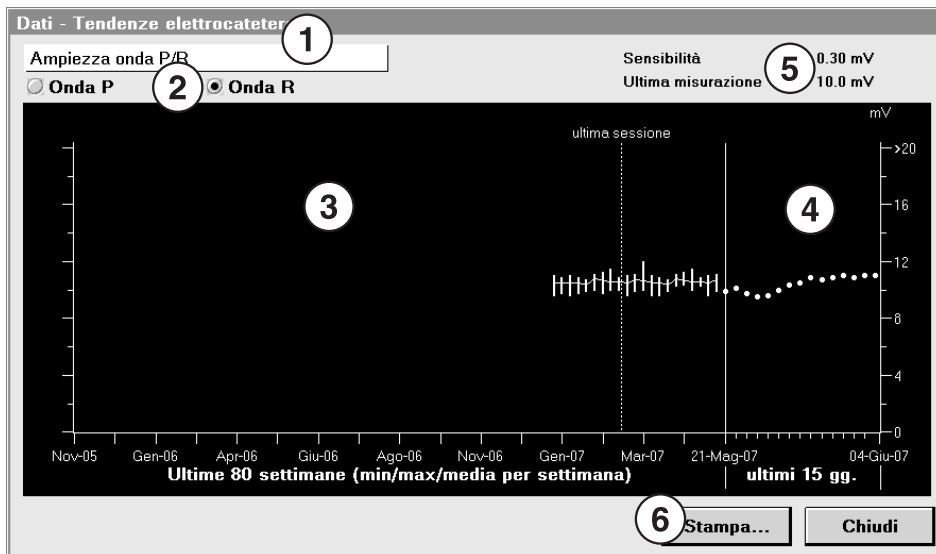**Figura 45.** La schermata Tendenze elettrocatteteri in cui viene visualizzata la tendenza dell'ampiezza delle onde R



- 1 Tendenza misurazione selezionata
- 2 Tipo di misurazione dell'ampiezza selezionato
- 3 Valori minimi, massimi e medi settimanali

- 4 Ultimi valori misurati
- 5 Ultima misurazione automatica giornaliera
- 6 Selezionare [Stampa...] per stampare un rapporto sulle tendenze degli elettrocatteteri

#### 5.9.4 Visualizzazione delle tendenze della soglia di cattura

Se la funzione Gestione cattura viene programmata su Adattata o su Monitoraggio, il dispositivo esegue automaticamente ricerche giornaliere della soglia di stimolazione registrando i risultati nei dati sulle tendenze della soglia di cattura. Per ulteriori informazioni sulla funzione Gestione cattura, vedere la Sezione 7.4, "Gestione delle energie di stimolazione in uscita con la funzione Gestione cattura", pagina 251.

I risultati delle misurazioni quotidiane della soglia di stimolazione vengono visualizzati nella schermata Tendenze elettrocatteteri nel grafico sulle tendenze della soglia di cattura. Il grafico mostra le ultime misurazioni (massimo quindici) ed un massimo di ottanta misurazioni riepilogative settimanali (mostrando i valori minimi, massimi e medi per ogni settimana). In caso di riprogrammazione del parametro Durata impulso LV, nel grafico sulle tendenze della soglia di cattura LV viene visualizzata una linea per mostrare il momento in cui si è verificata la riprogrammazione.

Nella schermata Tendenze elettrocatetere vengono inoltre visualizzati i valori programmati per i parametri dell'uscita di stimolazione e Gestione cattura, l'ultimo valore di soglia misurato ed un collegamento con una visualizzazione dettagliata degli ultimi quindici giorni di dati sulla misurazione della soglia. La schermata relativa ai dettagli mostra i risultati quotidiani degli ultimi quindici giorni di misurazioni della soglia. Questi risultati includono date, orari, misurazioni della soglia, valori di ampiezza della stimolazione e note in cui vengono descritti i risultati di ogni ricerca della soglia di stimolazione.


I dati sulle tendenze della soglia di cattura consentono di valutare il funzionamento della Gestione cattura e l'adeguatezza dei valori di uscita di stimolazione correnti. Inoltre, variazioni improvvise o significative della soglia di stimolazione possono indicare un problema con uno degli elettrocateteri.

#### **5.9.4.1 Come visualizzare le tendenze della soglia di cattura**

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica dispositivo/elettrocatetere
- ⇒ Tendenze soglia cattura

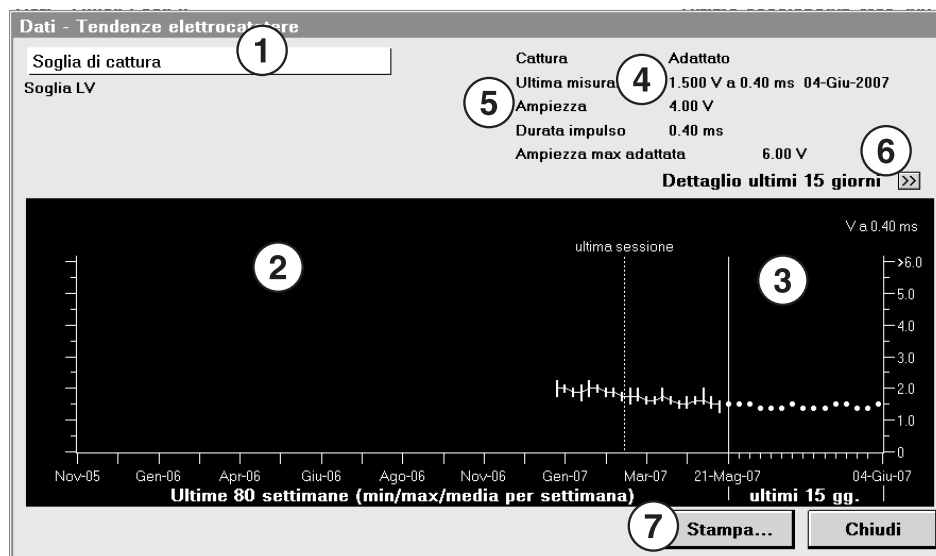**Figura 46.** La schermata Tendenze elettrocatteteri in cui viene visualizzata la tendenza della soglia di cattura LV



- 1 Tendenza misurazione selezionata
- 2 Valori minimi, massimi e medi settimanali
- 3 Ultimi valori misurati
- 4 Ultimo valore di soglia misurato
- 5 Gestione cattura e valori di parametro dell'uscita di stimolazione
- 6 Selezionare >> per visualizzare dettagli sulle misurazioni della soglia negli ultimi quindici giorni
- 7 Selezionare [Stampa...] per stampare un rapporto sulle tendenze degli elettrocatteteri

**Figura 47.** Dettaglio delle tendenze della soglia di cattura LV

Gestione cattura (dettaglio ultimi 15 giorni)

Cattura LV

Monitor.

Ampiezza

3.50 V

Ampiezza max adattata

6.00 V

Durata impulso

0.40 ms

Data	Ora hh:mm	Soglia (V)	Durata impulso (ms)	Ampiezza (V)	Note
30-Giu-2007	01:00	2.000	0.40	3.50	Misurazione OK
29-Giu-2007	01:00	2.125	0.40	3.50	Misurazione OK
28-Giu-2007	01:00	2.000	0.40	3.50	Misurazione OK
27-Giu-2007	01:00	2.125	0.40	3.50	Misurazione OK
26-Giu-2007	01:00	2.250	0.40	3.50	Misurazione OK
25-Giu-2007	01:00	2.125	0.40	3.50	Misurazione OK
24-Giu-2007	01:00	2.000	0.40	3.50	Misurazione OK
23-Giu-2007	01:00	2.000	0.40	3.50	Misurazione OK
22-Giu-2007	01:00	1.875	0.40	3.50	Misurazione OK
21-Giu-2007	01:00	2.000	0.40	3.50	Misurazione OK
20-Giu-2007	01:00	2.125	0.40	3.50	Misurazione OK
19-Giu-2007	01:00	2.250	0.40	3.50	Misurazione OK
18-Giu-2007	01:00	2.125	0.40	3.50	Misurazione OK
17-Giu-2007	01:00	2.000	0.40	3.50	Misurazione OK
16-Giu-2007	01:00	2.125	0.40	3.50	Misurazione OK

Stampa...

Chiudi

## 5.10 Monitoraggio automatico dello stato del dispositivo

Il dispositivo monitora automaticamente ed in maniera continua il livello delle prestazioni del tempo di carica, il reset elettrico e le funzioni terapeutiche disabilitate. Durante ogni interrogazione, il dispositivo registra le condizioni riconosciute che necessitano di attenzione come avvertenze che indicano lo stato del dispositivo, quindi le visualizza sullo schermo del programmatore. Le avvertenze che indicano lo stato del dispositivo vengono visualizzate sia sotto forma di una finestra a comparsa sullo schermo del programmatore sia nella casella Osservazioni della schermata Quick Look II. La procedura specifica su come rispondere all'avvertenza di reset elettrico emessa dall'indicatore di stato del dispositivo viene illustrata nella Sezione 5.10.2, "Come rispondere all'avviso di reset elettrico emesso dall'indicatore di stato del dispositivo", pagina 174.

**Attenzione:** gli indicatori di stato del dispositivo sono importanti. In caso di comparsa di uno di questi indicatori sullo schermo del programmatore dopo l'interrogazione di un dispositivo, informare il rappresentante della Medtronic.

Per eliminare l'indicatore di stato visualizzato, selezionare [Cancella] nella finestra a comparsa in cui è visualizzata l'avvertenza sullo stato del dispositivo.

### 5.10.1 Spiegazione dei messaggi emessi dagli indicatori di stato del dispositivo

**Attenzione - Sospensione del circuito di carica** – Indica che il periodo di carica ha superato i 30 s. Il circuito di carica è ancora attivo. In caso di comparsa di questo indicatore di stato del dispositivo sullo schermo del programmatore, informare il rappresentante della Medtronic. **Si consiglia di sostituire immediatamente il dispositivo.**

**Attenzione - Circuito di carica inattivo** – Indica che tre periodi di carica consecutivi hanno superato i 30 s. Il circuito di carica è inattivo e tutte le funzioni di terapia automatica, gli studi EF e i test manuali di sistema (ad eccezione della stimolazione VVI di emergenza) sono state disabilitate. In caso di comparsa di questo indicatore di stato del dispositivo sullo schermo del programmatore, informare il rappresentante della Medtronic. **Si consiglia di sostituire immediatamente il dispositivo.**

**Attenzione - Reset elettrico del dispositivo** – Indica che si è verificato un reset elettrico. Un reset elettrico può essere completo o parziale. In caso di reset completo, i parametri programmati vengono reimpostati ai valori di reset elettrico predefiniti. In caso di reset parziale, nessun parametro programmato viene modificato. Per informazioni sulle impostazioni di reset, vedere l'Appendice B, "Parametri del dispositivo", pagina 455. Leggere il messaggio che compare insieme all'indicatore e seguire attentamente le istruzioni sullo schermo. Per istruzioni sul da farsi in caso di reset elettrico, vedere la sezione successiva. Se il messaggio di avviso non segnala l'avvenuta riprogrammazione dei parametri, si è verificato un reset parziale che non ha modificato i parametri programmati.

Il reset elettrico è una funzione di sicurezza, attivata dal dispositivo, in grado di ripristinare i parametri del dispositivo su valori che ne garantiscono le funzionalità di base. Questi parametri di base sono considerati sicuri per la maggior parte dei pazienti. Durante una condizione di reset, la stimolazione in modo VVI resta attiva. Nella maggior parte dei casi di reset elettrico, la funzione di riconoscimento di VF non viene disattivata. In casi rari, un reset elettrico può disattivare il riconoscimento delle tachiaritmie e la relativa terapia. Se ciò si verifica, ogni 9 ore verrà emesso l'allarme Medtronic CareAlert di reset elettrico e il dispositivo funzionerà come semplice dispositivo di stimolazione antibradicardica (in modo VVI, a 65 min<sup>-1</sup>). Il riconoscimento delle tachiaritmie e la relativa terapia possono essere riprogrammati dopo la disattivazione dell'indicatore di reset elettrico.

Un reset elettrico può verificarsi quando il dispositivo è esposto a condizioni estreme come basse temperature (prima dell'impianto), un'esposizione intensa e diretta a raggi X, elettrocauterizzazione o defibrillazione esterna. In caso di comparsa di questo indicatore di stato del dispositivo sullo schermo del programmatore, informare il rappresentante della Medtronic.

Dopo un reset elettrico, il programmatore e il sistema di monitoraggio CareLink potrebbero non essere in grado di comunicare con il dispositivo. In tal caso, contattare un rappresentante della Medtronic. **Si consiglia di sostituire immediatamente il dispositivo.**

**GRAVE ERRORE DEL DISPOSITIVO** – Indica che si è verificato un errore che il dispositivo non è in grado di correggere. In caso di comparsa di questo indicatore di stato del dispositivo sullo schermo del programmatore, informare il rappresentante della Medtronic. **Si consiglia di sostituire immediatamente il dispositivo.**

**Terapie per AT/AF disattivate** – Le terapie atriali possono venire disattivate per i seguenti motivi:

- È stato rilevato un episodio ventricolare dopo l'erogazione di una terapia atriale automatica prima del riconoscimento successivo di AT/AF o della conclusione dell'episodio di AT/AF. La terapia atriale viene disattivata nel caso in cui dovesse risultare come la causa dell'avvio dell'aritmia ventricolare.
- Il controllo della posizione dell'elettrocattetere atriale non è andato a buon fine.
- Il dispositivo ha rilevato un'accelerazione della frequenza ventricolare durante la terapia di stimolazione antitachicardica (ATP).

Per ulteriori informazioni sulla disabilitazione delle terapie atriali, consultare la Sezione 9.4, "Pianificazione delle terapie atriali", pagina 379.

### **5.10.2 Come rispondere all'avviso di reset elettrico emesso dall'indicatore di stato del dispositivo**

Se il programmatore segnala che si è verificato un reset elettrico e il dispositivo non è ancora stato impiantato, non impiantare il dispositivo. Contattare un rappresentante della Medtronic. Se il dispositivo è già stato impiantato, procedere nel modo seguente:

1. Eliminare ogni eventuale fonte di interferenza elettromagnetica (EMI).
2. Informare un rappresentante della Medtronic.
3. Selezionare [Cancella] nella finestra a comparsa per eliminare l'indicatore di reset e l'allarme Medtronic CareAlert. Viene visualizzata una finestra di conferma indicante che tutti i dati precedentemente sottoposti a interrogazione dal programmatore verranno cancellati.
4. Selezionare [Continua].

5. Interrogare il dispositivo.
  - a. Annotare data e ora dell'ultima cancellazione dei dati del contatore, in quanto ciò corrisponde al momento in cui si è verificato il reset elettrico.
  - b. Cercare di appurare, se possibile, cosa stava facendo il paziente nel giorno e nell'ora in cui si è verificato il reset elettrico.
  - c. Salvare i dati di questa sessione e fornire una copia del file con i dati salvati al rappresentante della Medtronic; tali dati potranno servire a determinare gli eventi che hanno portato al reset.
6. Verificare i parametri programmati del dispositivo. In caso di reset completo, i valori riprogrammati vengono visualizzati nel messaggio di avviso. In caso di reset elettrico completo, riprogrammare i parametri del dispositivo.  
Dopo questo tipo di reset, il dispositivo funziona come un semplice defibrillatore (in modo VOE-VVI) finché non viene riprogrammato. Consultare l'Appendice B, "Parametri del dispositivo", pagina 455 per una lista dei parametri di reset elettrico.
7. Verificare che l'ora e la data del dispositivo siano corrette. Se necessario, riprogrammarle.
8. Eseguire una carica manuale dei condensatori per ripristinare il timer di carica e verificare che non ci siano problemi con il programma di ricarica.
9. Ripetere l'interrogazione. Controllare la schermata Misurazioni batteria ed elettrocateri per verificare l'adeguatezza dei valori di tensione della batteria e del tempo di carica.
10. Eseguire i test d'impedenza dell'elettrocateretere e delle soglie di stimolazione desiderati.

## 5.11 Ottimizzazione della durata del dispositivo

L'ottimizzazione della durata del dispositivo è un obiettivo auspicabile poiché può ridurre la frequenza di sostituzione del dispositivo per i pazienti. L'ottimizzazione della durata del dispositivo impone una valutazione del beneficio terapeutico offerto dal dispositivo e dalle funzioni diagnostiche a confronto del fabbisogno energetico della batteria per l'utilizzo di queste funzioni.

Per visualizzare l'indicatore del momento consigliato per la sostituzione (RRT) per il dispositivo, fare riferimento alla schermata Quick Look II. Per informazioni sulla durata del dispositivo, vedere la Sezione A.4, "Durata prevista", pagina 445.

Nelle seguenti sezioni vengono illustrate alcune strategie che possono rivelarsi utili a ridurre il fabbisogno energetico da parte della batteria.

### 5.11.1 Gestione delle uscite di stimolazione

**Gestione cattura** – Grazie alla funzione Gestione cattura, il dispositivo è in grado di effettuare il monitoraggio automatico e di offrire altre funzionalità di follow-up per la gestione delle soglie di stimolazione del ventricolo sinistro. Questa funzione è stata appositamente concepita per monitorare la soglia di stimolazione ed eventualmente per modificare le uscite di stimolazione allo scopo di mantenere la cattura. La programmazione della funzione Gestione cattura consente al dispositivo di impostare l'ampiezza della stimolazione su un valore sufficientemente alto da mantenere la cattura preservando la carica della batteria. Per ulteriori informazioni sulla funzione Gestione cattura, vedere la Sezione 7.4, "Gestione delle energie di stimolazione in uscita con la funzione Gestione cattura", pagina 251.

**Ottimizzazione manuale dell'ampiezza e della durata dell'impulso** – Se si sceglie di disattivare la Gestione cattura, è possibile ottimizzare i parametri di uscita della stimolazione manualmente. Eseguire un test della soglia di stimolazione per determinare le soglie di stimolazione del paziente. Selezionare delle impostazioni per l'ampiezza e la durata dell'impulso in grado di garantire un margine di sicurezza adeguato sopra la soglia di stimolazione del paziente. Ciò consente di ridurre le uscite di stimolazione e di preservare la carica della batteria. Per ulteriori informazioni sulle soglie di stimolazione, cfr. la Sezione 10.2, "Misurazione delle soglie di stimolazione", pagina 420.

**Frequenza di stimolazione** – Maggiore è il numero di eventi stimolati erogati, più rapida sarà la riduzione del livello di carica della batteria. Assicurarsi di non aver programmato una frequenza di stimolazione inutilmente elevata per il paziente. Valutare attentamente l'utilizzo di funzioni in grado di aumentare la frequenza della stimolazione antibradicardica. Utilizzare funzioni come la Stimolazione Atriale Preferenziale, la Risposta all'AF condotta e la Risposta in frequenza solo per i pazienti in grado di trarne effettivamente beneficio.

### 5.11.2 Ottimizzazione delle impostazioni della terapia per tachiaritmia

**Defibrillazione** – Per trattare gli episodi di fibrillazione ventricolare, il dispositivo può erogare una terapia di defibrillazione per far cessare gli episodi e ripristinare il ritmo sinusale normale del paziente. Il dispositivo può essere programmato in modo tale da erogare una sequenza che prevede un massimo di sei terapie di defibrillazione. La terapia di defibrillazione necessita di un elevato livello di energia. Per la prima terapia per VF, programmare il livello di energia su un valore ottimizzato (la soglia di defibrillazione più 10 J) per accelerare l'erogazione della terapia e preservare il livello di carica della batteria. Le terapie per VF successive dovranno essere programmate sul massimo livello di energia. Per ulteriori informazioni sulla terapia di defibrillazione, cfr. la Sezione 9.1, "Trattamento degli episodi rilevati come VF", pagina 342.

**Cardioversione atriale** – Per trattare gli episodi di tachiaritmia atriale, si può scegliere di programmare il dispositivo in modo tale da erogare terapie automatiche di cardioversione atriale (CV). Se si sceglie di trattare il paziente con terapie di CV atriale, è possibile



prolungare la durata del dispositivo valutando attentamente la programmazione dei seguenti parametri: il numero di shock erogati in un ciclo di 24 ore, il livello di energia degli shock e la durata di un episodio prima dell'erogazione della CV. Per ulteriori informazioni sulla cardioversione atriale, vedere la Sezione 9.6, "Trattamento dell'AT/AF con la cardioversione atriale", pagina 400.

Un altro modo per erogare una terapia di cardioversione atriale è rappresentata dalla cardioversione attivata dal paziente. Il paziente può utilizzare il Patient Assistant per sollecitare il dispositivo ad erogare una terapia di cardioversione atriale, se necessario. Sconsigliare al paziente un uso eccessivo ed inappropriato della funzione di cardioversione attivata dal paziente, poiché ciò può determinare una riduzione della durata del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla cardioversione attivata dal paziente, vedere la Sezione 9.7, "Erogazione di una cardioversione atriale attivata dal paziente", pagina 407.

**Cardioversione ventricolare** – Se si tratta il paziente con terapie di cardioversione ventricolare, valutare un'eventuale programmazione dell'energia terapeutica su un valore inferiore al livello massimo di energia ma sufficientemente alto da far cessare la VT. In ogni caso, si dovrebbero programmare al massimo livello di energia almeno un terapia per VT ed una terapia per FVT in sequenza. Per ulteriori informazioni sulla cardioversione ventricolare, cfr. la Sezione 9.3, "Trattamento di VT e FVT con cardioversione ventricolare", pagina 370.

**Riconoscimento di FVT via VF** – Per rilevare e trattare un episodio di VT compreso nella zona di frequenza di VF, si può ricorrere ad una zona di riconoscimento di FVT. Così facendo, si può mantenere un riconoscimento affidabile della VF consentendo l'erogazione dell'ATP per episodi di VT rapida. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 8.2, "Riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari", pagina 304.

**Stimolazione antitachicardica (ATP)** – Le terapie di ATP sono state appositamente concepite per interrompere gli episodi di tachicardia e ripristinare il normale ritmo sinusale del paziente. Le terapie di ATP erogano impulsi di stimolazione invece di shock ad alta tensione come quelli erogati nella terapia di cardioversione e nella defibrillazione.

La terapia di ATP richiede meno energia della batteria rispetto alla cardioversione o alla defibrillazione. Con alcuni pazienti, è possibile programmare il dispositivo in modo tale da erogare terapie di ATP prima di erogare terapie ad alta tensione.

Per ulteriori informazioni sull'ATP e sugli episodi atriali, cfr. la Sezione 9.5, "Trattamento degli episodi di AT/AF con la stimolazione antitachicardica", pagina 387. Per ulteriori informazioni sull'ATP e sugli episodi ventricolari, cfr. la Sezione 9.2, "Trattamento degli episodi di VT e di FVT con terapie di stimolazione antitachicardica", pagina 356.

**Erogazione dell'ATP prima della prima defibrillazione** – È possibile programmare il dispositivo in modo tale da erogare una terapia di ATP prima di erogare la prima terapia di defibrillazione. Così facendo, si può evitare l'erogazione di una terapia ad alta tensione per trattare quei ritmi che possono essere terminati dall'ATP (ad esempio, la VT monomorfica rapida).

Attivando la funzione ChargeSaver, il dispositivo può inoltre passare automaticamente alla funzione ATP prima della carica. Ciò consente al dispositivo di tentare la sequenza di una terapia di ATP prima della carica dei condensatori per trattare un episodio di VF rilevato. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 9.1, “Trattamento degli episodi rilevati come VF”, pagina 342.

### **5.11.3 L'importanza di valutare il tempo di carica dei condensatori a confronto della durata del dispositivo**

**Ricarica dei condensatori** – La ricarica dei condensatori assicura dei tempi rapidi di carica ed un'erogazione immediata della terapia ad alta tensione. Tuttavia, è opportuno ricordare che ogni ricarica dei condensatori viene prodotta da una carica alla massima energia che riduce la durata del dispositivo.

Per la ricarica automatica dei condensatori, se si programma un intervallo di ricarica automatica più breve è opportuno valutare l'esigenza da parte del paziente di avere una terapia più rapida a confronto con l'effetto che ciò comporta sulla durata del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla ricarica automatica dei condensatori, cfr. la Sezione 9.9, “Ottimizzazione del tempo di carica con la funzione Ricarica automatica dei condensatori”, pagina 415.

Se si esegue il test di carica/scarica per testare manualmente a ricaricare i condensatori, evitare di utilizzare questa funzione più del necessario. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 10.5, “Test dei condensatori del dispositivo”, pagina 425.

### **5.11.4 Valutazione dell'impatto delle funzioni diagnostiche e la memorizzazione dei dati sulla durata del dispositivo**

**Memorizzazione dell'EGM pre-aritmia** – Un uso costante della funzione di memorizzazione dell'EGM pre-aritmia riduce la durata del dispositivo. Per un paziente con meccanismi di insorgenza delle tachiaritmie uniformi, il beneficio maggiore della memorizzazione dell'EGM pre-aritmia si ottiene dopo la cattura di alcuni episodi.

Quando la memorizzazione dell'EGM pre-aritmia è attivata, il dispositivo raccoglie fino a 10 s di dati sull'EGM prima dell'insorgenza di episodi di VT/VF, di monitoraggio di VT o del riconoscimento di episodi di SVT. Il dispositivo memorizza fino a 5 s di dati EGM prima del riconoscimento di AT/AF, indipendentemente dall'impostazione della funzione di memorizzazione dell'EGM pre-aritmia.

Per valutare il beneficio derivante dall'utilizzo della funzione di memorizzazione dell'EGM pre-aritmia a fronte dell'ottimizzazione della durata del dispositivo, prendere in considerazione le seguenti opzioni di programmazione:

- Attivare la memorizzazione dell'EGM pre-aritmia per registrare eventuali cambiamenti del meccanismo di insorgenza delle tachiaritmie in seguito a mutamenti clinici di rilievo, come l'impianto di un dispositivo, modifiche farmacologiche e procedure chirurgiche. La memorizzazione dell'EGM pre-aritmia può essere impostata su On-1 mese, On-3 mesi oppure su On-continuo. Selezionare l'impostazione che consente di fornire i dati necessari nel tempo più breve possibile.
- Impostare la memorizzazione dell'EGM pre-aritmia su Off dopo aver acquisito i dati desiderati.

**Nota:** quando la funzione di memorizzazione dell'EGM pre-aritmia è disattivata, il dispositivo inizia a memorizzare i dati sull'EGM per gli episodi di VT/VF, VT monitorata e di SVT dopo l'occorrenza del terzo evento di tachiaritmia. Nonostante l'EGM non venga registrato prima dell'inizio dell'aritmia, il dispositivo registra comunque fino a 20 s di dati precedenti l'insorgenza o il riconoscimento dell'episodio. Questi dati includono misurazioni di intervalli ed annotazioni Marker Channel. Inoltre, per gli ultimi episodi di tachiaritmia vengono memorizzati i dati della funzione Memoria Flashback.

**Telemetria Holter** – Un uso prolungato della funzione Telemetria Holter riduce la durata della batteria. La Telemetria Holter continua a trasmettere dati sull'EGM e Marker Channel per la durata programmata, indipendentemente dal posizionamento della testina di programmazione sopra il dispositivo.

## 6 Gestione dello scompenso cardiaco

### 6.1 Erogazione della stimolazione biventricolare per la resincronizzazione cardiaca

La desincronizzazione ventricolare può causare un riempimento ed una contrazione ventricolare inefficaci, determinando così un peggioramento della sintomatologia dello scompenso cardiaco. Ciò può portare ad una riduzione dello stroke volume e, di conseguenza, del flusso ematico nel corpo.

#### 6.1.1 La soluzione offerta dal sistema è la stimolazione CRT

La terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) è stata appositamente studiata per trattare la desincronizzazione ventricolare erogando stimolazioni coordinate sia al ventricolo sinistro che al ventricolo destro. Una resincronizzazione efficace del ventricolo sinistro e del ventricolo destro può aumentare l'efficienza di ogni contrazione e, di conseguenza, la gettata cardiaca.

#### 6.1.2 Funzionamento della stimolazione CRT

La stimolazione CRT consente di stimolare sia il ventricolo sinistro che il ventricolo destro. La stimolazione di entrambi i ventricoli può migliorare la contrazione ventricolare meccanica in modo da aumentare la gettata cardiaca di ogni battito del cuore.

L'energia di uscita per gli impulsi di stimolazione nel ventricolo sinistro viene determinata dai parametri Ampiezza e Durata impulso programmati singolarmente. Nonostante sia possibile programmare questi parametri manualmente, la funzione Gestione cattura consente di gestire le energie di uscita della stimolazione nel ventricolo sinistro. Per ulteriori informazioni cfr. la Sezione 7.4, "Gestione delle energie di stimolazione in uscita con la funzione Gestione cattura", pagina 251.

Il sistema ha parametri indipendenti per l'ampiezza, la durata dell'impulso e la polarità di stimolazione per il ventricolo sinistro. Il sistema ha anche parametri aggiuntivi che consentono di selezionare la sequenza della stimolazione ed il ritardo tra le stimolazioni nel ventricolo destro e nel ventricolo sinistro. Il parametro Stimolazione V. controlla quali ventricoli ed in quale ordine vengono stimolati. Il parametro Stimolazione V. consente di selezionare la stimolazione RV→LV, LV→RV, Solo RV o Solo LV. Il parametro Ritardo di stim. V-V controlla l'intervallo di tempo tra i due impulsi ventricolari.

Il dispositivo assicura il sensing sia dell'atrio che del ventricolo destro. Per informazioni sulle soglie di sensing, sulla polarità degli elettrocateri, sui periodi di blanking e sui periodi refrattari, cfr. la Sezione 7.1, "Sensing dell'attività cardiaca intrinseca", pagina 219.

Per saperne di più sui vari modi e per informazioni sulla stimolazione, cfr. la Sezione 7.2, "Erogazione delle terapie di stimolazione", pagina 230.

### 6.1.3 Alcune considerazioni sulla programmazione del dispositivo

È importante programmare i parametri del dispositivo con impostazioni adeguate al fine di assicurare un'erogazione ottimale della terapia di stimolazione CRT per ogni tipo di attività prevista del paziente. Si raccomanda di attenersi alle linee guida riportate di seguito e di tenere conto dei disturbi e delle esigenze di stimolazione specifici di ogni singolo paziente.

**Modo di stimolazione** – Programmare il parametro Modo di stimolazione su un modo con trascinamento bicamerale (DDD). Il modo a risposta in frequenza (DDDR) può essere programmato se il paziente manifesta dei sintomi compatibili con la stimolazione a risposta in frequenza.

**Frequenza minima** – Programmare il parametro Frequenza minima su un valore inferiore rispetto alla frequenza a riposo, a meno che non sia necessario un supporto di stimolazione ad una frequenza superiore.

**Frequenza massima di trascinamento** – Programmare il parametro Frequenza massima di trascinamento sulla frequenza più elevata che il paziente riesce a sopportare, poiché la CRT viene compromessa quando la frequenza sinusale del paziente supera la frequenza massima di trascinamento. Ciò può portare ad una perdita di sincronia A-V oppure ad una perdita di stimolazione biventricolare che continuerà finché la frequenza sinusale non scende al di sotto della frequenza massima di trascinamento e la stimolazione biventricolare non viene ripristinata. Ciò può avere conseguenze emodinamiche importanti per i pazienti affetti da scompenso cardiaco. Si consiglia una frequenza massima di trascinamento pari a  $140 \text{ min}^{-1}$ , sempre che il paziente sia in grado di sopportarla.

- Evitare il funzionamento Wenckebach ed il blocco 2:1 per prevenire la perdita di CRT.
- I valori programmabili della frequenza massima di trascinamento possono essere limitati dall'intervallo di riconoscimento di VT/VF massimo programmato. Se la frequenza massima di trascinamento non può essere programmata sul valore desiderato, programmarla sul valore massimo consentito.

**Recupero del trascinamento atriale** – Programmare il parametro Recupero del trascin. atriale su On. La funzione di recupero del trascinamento atriale serve a ripristinare il trascinamento atriale nel caso in cui si fosse perso a causa di eventi atriali consecutivi compresi nel periodo refrattario di eventi ventricolari rilevati.

**AV rilevato/AV stimolato** – Programmare il parametro AV rilevato in modo tale da massimizzare il tempo di riempimento del LV, in base all'ecocardiografia effettuata o ad altri metodi. Il valore ottimizzato è spesso vicino ai 100 ms. I pazienti che necessitano di supporto della frequenza dovrebbero avere l'intervallo PAV ottimizzato.

**Intervallo AV adattabile alla frequenza** – Programmare il parametro AV adattabile alla frequenza su On con una frequenza iniziale superiore alla frequenza a riposo del paziente, una frequenza di arresto pari a  $140 \text{ min}^{-1}$  ed un intervallo minimo di AV rilevato che consenta il trascinamento verso la frequenza massima di trascinamento.

**Cambio Modo** – Il parametro Cambio Modo dovrebbe essere programmato su On se il paziente ha precedenti di aritmie atriali o si sospettano aritmie atriali.

**Funzioni di riconoscimento PR Logic** – Programmare i parametri AF/Afl e Tach. sinus. su On.

**Risposta all'AF condotta** – Programmare il parametro Risposta AF condotta su On con un livello di risposta impostato su Medio se il Cambio Modo è attivato. La funzione di risposta all'AF condotta serve a mantenere la stimolazione ventricolare quando si verifica un'aritmia atriale.

**Modi a risposta in frequenza** – Se il paziente necessita di una stimolazione a risposta in frequenza, programmare il parametro Frequenza massima del sensore in modo tale da assicurare un aumento delle frequenze di stimolazione concomitante con un aumento dell'attività. Nei pazienti con un'angina stabile, programmare i parametri Frequenza massima del sensore e Frequenza massima di trascinamento su un valore inferiore rispetto alla frequenza in corrispondenza della quale si manifesta l'angina. A tutt'oggi non sono stati effettuati studi sulla stimolazione a risposta in frequenza in una popolazione di pazienti affetti da scompenso cardiaco.

**Polarità di stimolazione LV** – Programmare il parametro Polarità stimol. LV su Punta LV/Coil RV se è stato impiantato un elettrocatteter monopolare nel ventricolo sinistro. Il vettore anello LV/spirale RV, se utilizzato con un elettrocatteter di stimolazione LV bipolare standard, può ridurre le impedenze di stimolazione e aumentare le soglie di stimolazione.

**Ritardo di stimolazione V-V** – Programmare il parametro Ritardo di stim. V-V su 0 ms oppure ottimizzarlo mediante un ecocardiogramma seguendo la procedura descritta nella Sezione 6.1.4.

**Risposta al sensing ventricolare** – Programmare il parametro Risposta al sensing V su On. La funzione di risposta al sensing ventricolare è stata appositamente studiata per erogare la stimolazione biventricolare in presenza di conduzione A-V rapida o di eventi ventricolari rilevati prematuri. Al riconoscimento di un evento ventricolare rilevato nell'intervallo AV, il dispositivo inizia immediatamente a stimolare il ventricolo o i ventricoli, purché l'impulso di stimolazione non superi la frequenza massima programmata. Nei pazienti per i quali è stato programmato un modo di stimolazione senza trascinamento atriale, si avrà una risposta al sensing ventricolare per qualsiasi evento ventricolare rilevato

non refrattario, purché l'impulso di stimolazione non superi la frequenza massima programmata.

#### **6.1.4 Raccomandazioni sulla programmazione del ritardo di stimolazione V-V**

In questa sezione vengono illustrate due tecniche ecocardiografiche non invasive per ottimizzare il ritardo di stimolazione V-V. L'ultimo metodo impiegato nei trial clinici impiega il M-Mode per rilevare il ritardo V-V che riduce al minimo la desincronizzazione ventricolare sinistra. L'altro metodo fa ricorso al cosiddetto Velocity Time Integral (VTI) per massimizzare lo stroke volume.

##### **6.1.4.1 Panoramica delle misurazioni ecocardiografiche da effettuare utilizzando il M-Mode**

- L'ecocardiografia M-Mode consente di valutare la coordinazione meccanica del ventricolo sinistro utilizzando i tempi della contrazione meccanica di picco di due segmenti del ventricolo sinistro: il segmento medio-basale settale e la parete libera medio-basale.
- I movimenti di questi segmenti vengono misurati con una serie di ritardi di stimolazione V-V differenti. Il ritardo V-V ottimale è quello che produce il ritardo più breve durante la contrazione meccanica di picco di questi due segmenti.

##### **Raccomandazioni per le misurazioni ecocardiografiche da effettuare utilizzando il M-Mode**

- Lasciare che il paziente si rilassi per almeno 5 min prima dell'esame.
- Utilizzare l'ecocardiografia in M-Mode con una proiezione parasternale in asse corto sopra i muscoli papillari.
- Si consiglia di seguire la sequenza di impostazioni di valutazione V-V riportata nella Tabella 9 per ridurre al minimo l'effetto carry-over tra i vari ritardi.
- Fare una pausa di almeno 30 s tra una misurazione e l'altra.
- Il guadagno dell'ecocardiogramma dovrebbe essere impostato sul valore più basso possibile per ridurre al minimo la distorsione del segnale ed il rumore.
- La velocità massima di scorrimento dovrebbe essere pari a 100 mm/ s per assicurare dei risultati accurati.

### Sequenza per la valutazione del ritardo di stimolazione V-V utilizzando il M-Mode

1. Accertarsi che non vi sia stimolazione tramite fusione (attivazione intrinseca con battiti stimolati) in corrispondenza di qualsiasi intervallo V-V programmato. A tale scopo, si dovrà programmare un ritardo AV breve pari a 50 ms.
2. Ricorrendo all'ecocardiografia in M-Mode con la proiezione parasternale in asse corto sopra i muscoli papillari, registrare l'intervallo (in ms) tra l'attivazione del segmento settale LV ed il segmento latero-posteriore LV per ognuna delle impostazioni di valutazione del ritardo V-V elencate nella Tabella 9.

**Tabella 9.** Impostazioni per la valutazione del ritardo V-V

Stimolazione ventricolare	Ritardo di stimolazione V-V (ms)
LV→RV (nominale)	0
LV→RV	40
LV→RV	20
LV→RV	10
RV→LV	40
RV→LV	20
RV→LV	10

3. Programmare la Stimolazione V. ed il Ritardo di stim. V-V su dei valori che determinano l'intervallo più breve tra l'attivazione del setto LV e l'attivazione latero-posteriore LV.
4. Ottimizzare il ritardo AV.

#### 6.1.4.2 Panoramica delle misurazioni ecocardiografiche da effettuare utilizzando il Velocity Time Integral (VTI)

- Questa valutazione viene effettuata determinando il ritardo di stimolazione V-V associato al valore VTI più elevato e programmando il dispositivo di conseguenza. Se si desidera un valore effettivo per lo stroke volume, è necessario misurare anche il diametro del tratto di efflusso ventricolare sinistro (LVOT) durante la procedura ecocardiografica.  $\text{Stroke volume} = \text{area LVOT} \times \text{VTI del flusso aortico}$ .
- Il diametro LVOT viene misurato utilizzando una proiezione parasternale in asse lungo.
- Il VTI del flusso aortico viene misurato nella proiezione apicale a 5 camere.

#### Alcune raccomandazioni sulle misurazioni ecocardiografiche da effettuare con il VTI

- Lasciare che il paziente si rilassi per almeno 10 min prima dell'esame.
- Utilizzare il Doppler ad onda pulsata.




- Impostare il guadagno sul valore più basso possibile per ridurre al minimo la distorsione del segnale ed il rumore.
- Impostare la velocità di scorrimento su 100 mm/ s.
- Per le misurazioni della velocità aortica, porre il volume campione in posizione centrale ed apicalmente a circa 0,5 cm dalle cuspidi della valvola aortica in proiezione a 5 camere.
- Acquisire i profili del flusso aortico per tutte le impostazioni del ritardo V-V **senza spostare il volume campione**. Impostare la durata dell'acquisizione su 15-20 s in base al ritardo V-V impostato.
- Eseguire le misurazioni VTI dopo aver acquisito tutti i profili del flusso.
- Selezionare un battito uniforme e di buona qualità per la misurazione (non troppo grande, non troppo piccolo né distorto).
- Prendere eventualmente in considerazione la media di due o tre battiti nel caso in cui non fosse possibile ottenere dei battiti uniformi.

#### Valutazione della relazione tra un intervallo AV ottimale ed il ritardo di stimolazione V-V con il VTI

- Questa valutazione dovrebbe essere effettuata dopo aver rilevato un intervallo AV ottimale (AVopt) tramite una valutazione ecocardiografica.
- Poiché l'AVopt viene impostato per ottimizzare il tempo di riempimento del ventricolo sinistro, l'evento atriale per l'intervallo di stimolazione LV deve rimanere costante al variare del ritardo di stimolazione V-V (cfr. la Figura 48). Ciò significa che quando il ventricolo destro viene stimolato per primo, il ritardo della stimolazione V-V va sottratto dal ritardo AV ottimale per determinare l'intervallo AV da programmare.

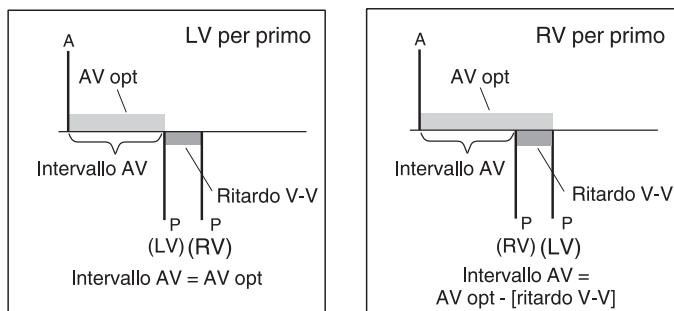**Figura 48.** Relazione tra il ritardo AV ottimizzato ed il valore programmato per il ritardo AV e il ritardo di stimolazione V-V.



### Sequenza per la valutazione del ritardo di stimolazione V-V utilizzando il VTI

1. Programmare le seguenti impostazioni nominali iniziali:

**Tabella 10.** Impostazioni nominali iniziali

Stimolazione V.	LV→RV
Ritardo di stimolazione V-V	0 ms
Ritardo A-V	Ottimizzato tramite ecocardiografia

2. Misurare il LVOT per ottenere dei valori di stroke volume (facoltativo).
3. Misurare i valori VTI con una varietà di impostazioni del ritardo V-V. I valori possono essere selezionati in base alle preferenze del medico o del centro. Nella Tabella 11 è elencata una serie di valori a cui fare riferimento.
4. Una volta individuata l'impostazione ottimale del ritardo V-V, programmare la stimolazione ventricolare, il ritardo AV ed il ritardo di stimolazione V-V ottimali nel dispositivo.
5. Riconfermare il ritardo AV ottimale con l'impostazione finale del ritardo di stimolazione V-V.

**Tabella 11.** Impostazioni per la valutazione del ritardo V-V

<b>AVopt = ritardo AV ottimale determinato tramite ecocardiogramma</b>		
<b>Stimolazione V.</b>	<b>Ritardo A-V</b>	<b>Ritardo di stimolazione V-V (ms)</b>
LV→RV	AVopt	0
LV→RV	AVopt	10
LV→RV	AVopt	20
LV→RV	AVopt	40
RV→LV	AVopt-10	10
RV→LV	AVopt-20	20
RV→LV	AVopt-40	40

### 6.1.5 Alcune considerazioni sulla programmazione della stimolazione CRT

**Margini di sicurezza della stimolazione** – gli impulsi di stimolazione devono essere erogati secondo un margine di sicurezza adeguato, al di sopra delle soglie di stimolazione.

**Livelli di uscita di stimolazione elevati** – I valori di durata e ampiezza dell'impulso influiscono sulla durata del dispositivo, soprattutto se il paziente necessita di una terapia di stimolazione antibradicardica il più delle volte.

**Sensing nella camera opposta** – La durata e l'ampiezza dell'impulso possono influire sul sensing incrociato. Se i valori di durata ed ampiezza dell'impulso sono troppo elevati, gli

impulsi di stimolazione in una camera potrebbero essere rilevati nell'altra, con conseguenti modifiche alla terapia di stimolazione.

### 6.1.6 Programmazione della stimolazione CRT

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ▷ Stimolazione V.
- ▷ Ritardo V-V
- ▷ Ampiezza LV
- ▷ Durata impulso LV
- ▷ Polarità di stimolazione LV

### 6.1.7 Valutazione della stimolazione CRT


Il rapporto degli istogrammi della frequenza, il rapporto di gestione degli scompensi cardiaci e la registrazione degli episodi di sensing ventricolare possono essere di aiuto nella valutazione della stimolazione CRT.

#### 6.1.7.1 Rapporto degli istogrammi della frequenza

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Istogrammi frequenza (solo rapporto)

Il rapporto degli istogrammi della frequenza mostra la percentuale di stimolazione ventricolare in un range di frequenze.

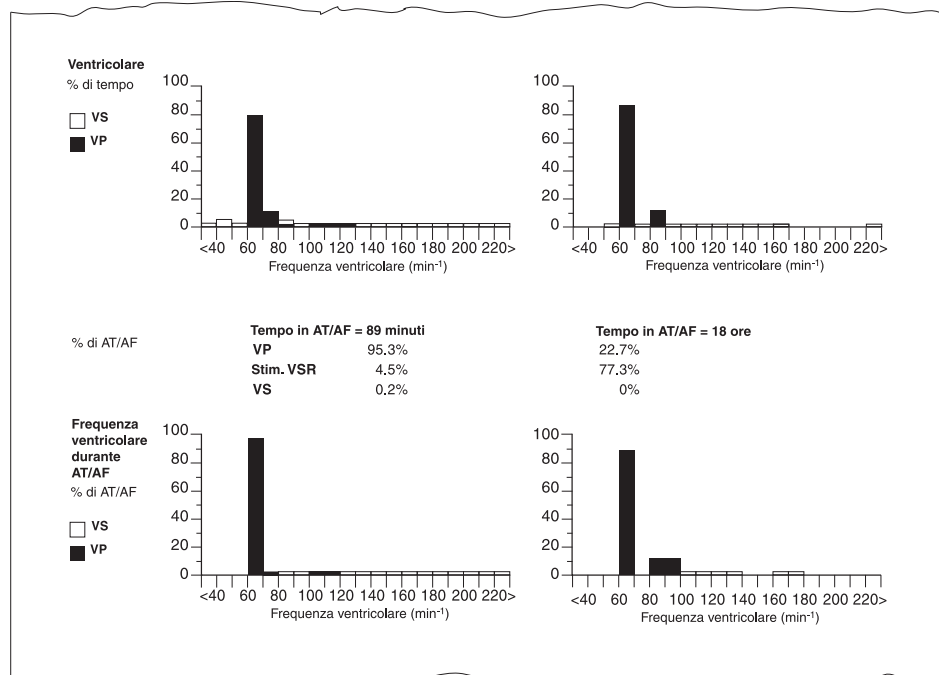**Figura 49.** Rapporto degli istogrammi della frequenza


### 6.1.7.2 Rapporto di gestione scompensi cardiaci

Selezionare l'icona Rapporti

⇒ Scompenso cardiaco...

La tendenza % Stimolazione/giorno nel rapporto di gestione degli scompensi cardiaci fornisce una panoramica della stimolazione nel tempo che può essere di aiuto nell'individuazione delle variazioni e delle tendenze della stimolazione. Nel grafico viene visualizzata la percentuale di tutti gli eventi che si verificano ogni giorno e che vengono classificati come eventi atriali e ventricolari stimolati. Le percentuali vengono calcolate in base ai conteggi giornalieri delle sequenze di eventi AS-VS, AS-VP, AP-VS e AP-VP. Sono esclusi gli eventi refrattari atriali.

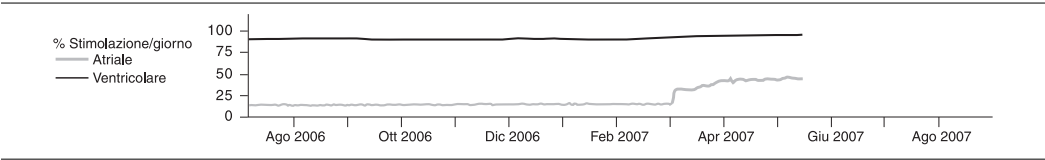**Figura 50.** Grafico delle tendenze % Stimolazione/giorno



**6.1.7.3 Dati – Registrazione episodi di sensing ventricolare**


Selezionare l'icona Dati

⇒ Diagnostica clinica

⇒ Episodi di sensing ventricolare


Un episodio di sensing ventricolare si verifica quando la stimolazione CRT non viene erogata nel modo desiderato a causa del sensing del ritmo intrinseco del paziente.

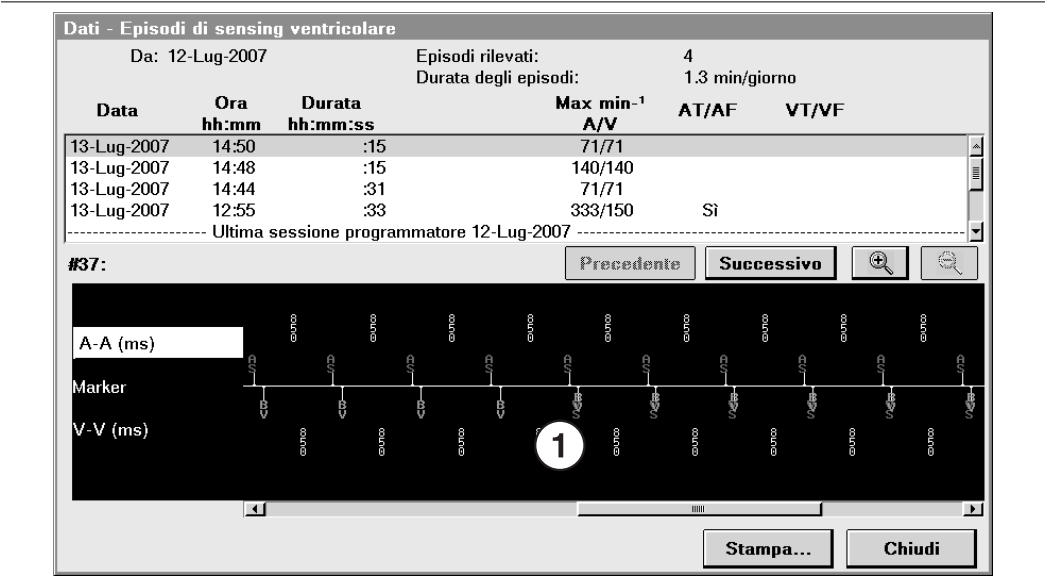**Figura 51.** Registrazione degli episodi di sensing ventricolare – Stimolazione in risposta al sensing ventricolare



- 1 Stimolazione di risposta al sensing ventricolare (stimolazione biventricolare erogata subito dopo un rilevamento ventricolare)

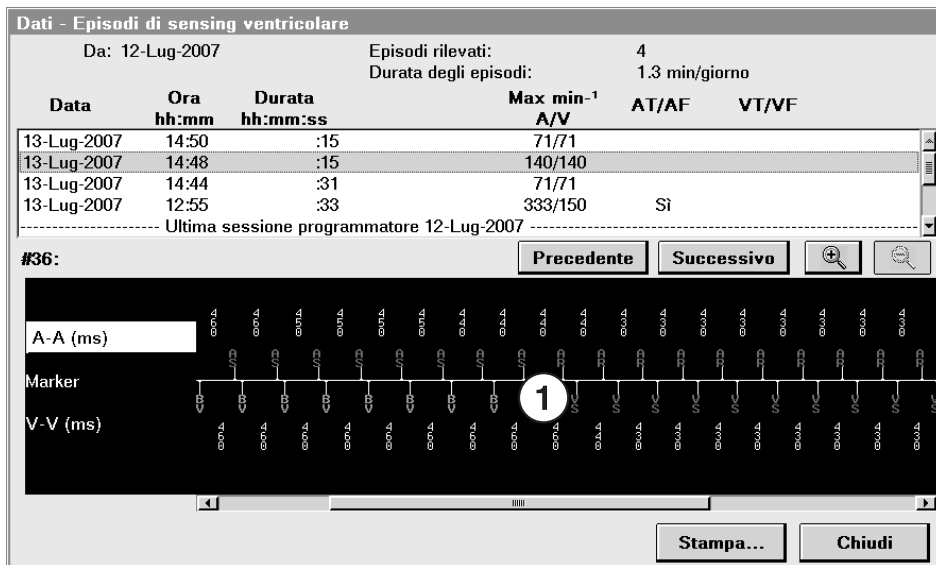**Figura 52.** Registrazione degli episodi di sensing ventricolare – perdita di stimolazione CRT



- 1 Perdita di trascinarsi atriale e, di conseguenza, della stimolazione CRT durante un'alta frequenza atriale intrinseca

## 6.2 Promozione della stimolazione CRT continua

Una terapia ottimale mediante la stimolazione CRT da erogare ai pazienti affetti da scompenso cardiaco richiede che il paziente debba ricevere la stimolazione biventricolare il più a lungo possibile. La stimolazione biventricolare può essere interrotta da eventi ventricolari rilevati, PVC e frequenze ventricolari rapide legate all'AF. L'interruzione della stimolazione biventricolare può determinare l'insorgenza della sintomatologia nel paziente e ridurre l'efficacia generale della terapia.

### 6.2.1 La soluzione offerta dal sistema è rappresentata dalle funzioni di recupero della stimolazione CRT

Il dispositivo è provvisto di tre funzioni distinte che servono a mantenere una stimolazione biventricolare sincronizzata.

La risposta al sensing ventricolare è stata appositamente studiata per aiutare il dispositivo a mantenere la stimolazione CRT in presenza di sensing ventricolare.


Il recupero del trascinamento atriale è stato appositamente studiato per aiutare il dispositivo a recuperare il trascinamento atriale quando viene perso per effetto di PVC oppure a causa di un ritmo atriale troppo rapido per essere trascinato al ventricolo. Il ripristino del trascinamento atriale serve a mantenere la sincronia A-V ed a garantire una stimolazione CRT continua.

La risposta all'AF condotta è stata appositamente studiata per promuovere l'erogazione della stimolazione CRT durante gli episodi di AT/AF condotta.

### 6.2.2 Funzionamento della risposta al sensing ventricolare

La risposta al sensing ventricolare è disponibile sia nei modi di stimolazione con trascinamento non atriale che in quelli con trascinamento atriale. In un modo senza trascinamento atriale, un evento rilevato nel ventricolo destro attiva un impulso di stimolazione ventricolare immediato. In un modo con trascinamento atriale, un evento rilevato nel ventricolo destro durante l'intervallo AV attiva un impulso di stimolazione ventricolare immediato. Gli impulsi di stimolazione con risposta al sensing ventricolare vengono erogati in base ai parametri della stimolazione CRT programmati.

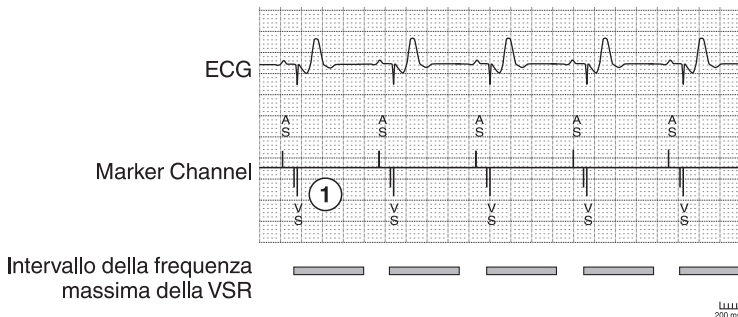**Figura 53.** Funzionamento della risposta al sensing ventricolare



- 1 Gli impulsi di stimolazione con risposta al sensing ventricolare vengono erogati subito dopo gli eventi ventricolari rilevati. Questi eventi attivati dalla stimolazione vengono indicati da una breve annotazione Marker Channel (rilevati), seguita da un'annotazione Marker Channel lunga (stimolati). Entrambe le annotazioni vengono indicate con la sigla VS.

Se l'intervallo ventricolare misurato partendo dall'evento ventricolare precedente è più breve dell'intervallo di frequenza massima programmato, non viene erogato alcun impulso di stimolazione in risposta al sensing ventricolare.

Data la vicinanza dell'evento ventricolare rilevato e dell'impulso di stimolazione in risposta al sensing ventricolare, l'annotazione biventricolare (BV) non verrà stampata sul tracciato ECG in tempo reale.

**Note:**

- Gli impulsi di stimolazione in risposta al sensing ventricolare non vengono inclusi nei calcoli dell'intervallo per il riconoscimento delle tachiaritmie.
- Un rilevamento ventricolare che determina una stimolazione in risposta al sensing ventricolare viene incluso nel conteggio degli eventi rilevati consecutivi per il riconoscimento di un episodio di sensing ventricolare. La stimolazione in risposta al sensing ventricolare non viene inclusa nel conteggio degli eventi stimolati consecutivi per il riconoscimento della cessazione di un episodio di sensing ventricolare.
- Il sensing ventricolare per la funzione di risposta al sensing ventricolare avviene soltanto tramite l'elettrocattetero RV.
- Il funzionamento della risposta al sensing ventricolare viene sospeso durante le terapie per tachiaritmia, i test del sistema, le induzioni tramite studi EF, le terapie manuali e le terapie Burst costante, di cardioversione e di defibrillazione di emergenza. Il funzionamento della risposta al sensing ventricolare non viene sospeso durante un test di impedenza o un test di carica/scarica.

**6.2.2.1 Alcune considerazioni sulla programmazione della risposta al sensing ventricolare**

**Risposta al sensing ventricolare e stimolazione ventricolare di sicurezza** – Quando la risposta al sensing ventricolare e la stimolazione ventricolare di sicurezza sono entrambe attivate, la stimolazione ventricolare di sicurezza ha la precedenza durante l'intervallo della stimolazione ventricolare di sicurezza. Se un evento ventricolare viene rilevato durante l'intervallo della stimolazione ventricolare di sicurezza, l'impulso di stimolazione in risposta al sensing ventricolare non viene erogato. Al suo posto viene erogato un impulso di stimolazione di sicurezza al termine dell'intervallo della stimolazione ventricolare di sicurezza. La risposta al sensing ventricolare viene riattivata una volta trascorso l'intervallo della stimolazione ventricolare di sicurezza. Per ulteriori informazioni sulla stimolazione ventricolare di sicurezza, vedere la Sezione 7.11, "Riduzione di un'inibizione ventricolare inappropriata utilizzando la VSP", pagina 272.



### 6.2.2.2 Programmazione della risposta al sensing ventricolare

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Aritmia/post-shock...
  - ▷ Risposta al sensing V. <On>
- ⇒ Impostazioni V. aggiuntive...
  - ▷ Risposta al sensing ventricolare
  - ▷ Frequenza massima


### 6.2.3 Funzionamento del Recupero del trascinamento atriale

Gli eventi atriali rilevati possono rientrare nel periodo refrattario atriale post-ventricolare (PVARP). Se ciò avviene, il dispositivo classifica l'evento atriale come un evento refrattario e si registra una perdita di trascinamento atriale. La perdita di trascinamento può impedire l'erogazione della stimolazione CRT.

Per recuperare il trascinamento atriale e la terapia CRT, gli eventi atriali non devono rientrare nel PVARP. La funzione di recupero del trascinamento atriale accorcia temporaneamente il PVARP, in modo tale da consentire il trascinamento degli eventi atriali rilevati al ventricolo e la ripresa della stimolazione CRT.

Il recupero del trascinamento atriale è disponibile nei modi di trascinamento atriale (DDD e DDDR) quando non è attivo alcun cambio modo.

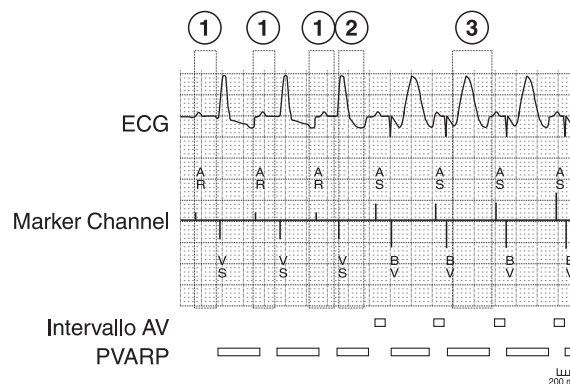**Figura 54.** Funzionamento del Recupero del trascinamento atriale



- 1 Gli eventi atriali si verificano durante il PVARP e non vengono trascinati ai ventricoli per attivare la stimolazione CRT.

- 2 La funzione di recupero del trascinamento atriale interviene per interrompere lo schema. Il PVARP viene accorciato in modo tale che il trascinamento atriale possa essere ripristinato.
  - 3 L'intervento continua finché non viene ripristinato un trascinamento AV corretto con il valore SAV programmato e la stimolazione CRT biventricolare non riprende.
- 

**Nota:** il funzionamento del recupero del trascinamento atriale viene sospeso durante le terapie per tachiaritmia, i test del sistema, le induzioni tramite studi EF, le terapie manuali e le terapie Burst costante, di cardioversione e di defibrillazione di emergenza. Il recupero del trascinamento atriale non viene sospeso durante un test di impedenza o un test di carica/scarica.

### 6.2.3.1 Alcune considerazioni sulla programmazione del recupero del trascinamento atriale

**Frequenza massima di trascinamento** – Gli interventi di recupero del trascinamento atriale si verificano soltanto quando la frequenza sinusale è inferiore alla frequenza massima di trascinamento programmata. Pertanto, la selezione della frequenza massima di trascinamento relativa al range di frequenze sinusali del paziente può incidere sulla frequenza e sulla necessità degli interventi di recupero del trascinamento atriale.

**Nota:** vi sono meno probabilità che gli interventi di recupero del trascinamento atriale si rendano necessari quando il dispositivo è programmato con una frequenza massima di trascinamento più elevata, con un intervallo AV più breve o adattabile alla frequenza o con un PVARP più breve, consentendo pertanto il trascinamento di frequenze atriali più elevate.

**Parametri di stimolazione** – Se si programmano i parametri di stimolazione mentre è in corso l'intervento di recupero del trascinamento atriale, l'intervento viene interrotto e il recupero del trascinamento atriale riprende a monitorare lo schema AR-VS.

### 6.2.3.2 Programmazione del recupero del trascinamento atriale

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Altre funzioni...
- ▷ Recupero del trascinamento atriale


### 6.2.4 Funzionamento della risposta all'AF condotta

Quando si verifica l'AT/AF nei pazienti con una conduzione A-V intatta, il ritmo atriale rapido può essere condotto in maniera irregolare nei ventricoli. La sintomatologia del paziente può derivare dall'irregolarità della frequenza ventricolare e dalla perdita di stimolazione ventricolare.

Per permettere l'erogazione di una terapia di resincronizzazione cardiaca durante gli episodi di AT/AF, è possibile programmare il dispositivo in modo tale da aumentare la frequenza di stimolazione a seconda della risposta ventricolare intrinseca del paziente ad una tachiaritmia atriale condotta. La funzione di risposta all'AF condotta regola la frequenza di stimolazione facendola aumentare quando si verificano eventi ventricolari rilevati e facendola diminuire quando si verificano impulsi di stimolazione ventricolari. A seconda del valore del livello di risposta programmato, il dispositivo aggiunge un massimo di  $3 \text{ min}^{-1}$  a seguito di un evento rilevato e sottrae  $1 \text{ min}^{-1}$  in risposta ad un impulso di stimolazione. Il risultato è una percentuale più alta di stimolazione ventricolare ad una frequenza media che si avvicina di molto alla risposta ventricolare del paziente all'episodio di AT/AF. Facendo corrispondere in modo dinamico la risposta del paziente all'AT/AF, il dispositivo può aumentare la percentuale di stimolazione ventricolare, con solo un eventuale leggero aumento della frequenza cardiaca media giornaliera.

La funzione di risposta all'AF condotta è disponibile soltanto nei modi senza trascinamento (DDIR o VVIR). Di solito viene applicata durante un cambio modo causato dall'insorgenza di una tachiaritmia atriale.

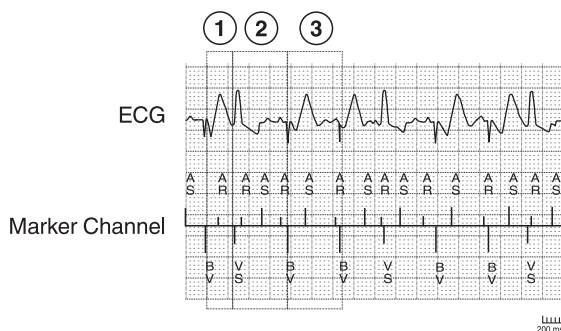**Figura 55.** Funzionamento della risposta all'AF condotta



- 1 La sequenza BV-AR-VS determina un aumento della frequenza di stimolazione pari a  $1 \text{ min}^{-1}$ , se il livello di risposta è stato programmato su Basso o Medio.
- 2 La sequenza VS-BV lascia la frequenza di stimolazione invariata.
- 3 La sequenza BV-BV determina un calo della frequenza di stimolazione pari a  $1 \text{ min}^{-1}$ .

**Nota:** il funzionamento della risposta all'AF condotta viene sospeso durante le terapie per tachiaritmia, i test del sistema, le induzioni tramite studi EF, le terapie manuali e le terapie Burst costante, di cardioversione e di defibrillazione di emergenza. Il funzionamento della risposta all'AF condotta non viene sospeso durante un test di impedenza o un test di carica/scarica.

#### 6.2.4.1 Alcune considerazioni sulla programmazione della risposta all'AF condotta

**Frequenza massima** – Gli aumenti della frequenza di stimolazione causati dalla risposta all'AF condotta vengono limitati dalla frequenza massima programmata.

**Valore del livello di risposta** – Un valore del livello di risposta più elevato determina una percentuale più elevata di stimolazione ventricolare e un allineamento più rapido con la frequenza di risposta ventricolare del paziente.

**Modo DDD o DDDR** – La risposta all'AF condotta è disponibile soltanto nei modi senza trascinamento. Programmando pertanto il modo DDD o DDDR, la risposta AF condotta entrerà in funzione soltanto durante il cambio di modo. Per programmare la risposta all'AF condotta su On, il cambio modo deve essere programmato su On.

#### 6.2.4.2 Programmazione della risposta all'AF condotta

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Aritmia/post-shock...
- ▷ Risposta all'AF condotta <On>
- ⇒ Impostazioni V. aggiuntive...
- ▷ Livello di risposta
- ▷ Frequenza massima

#### 6.2.5 Valutazione delle funzioni di recupero CRT


##### 6.2.5.1 RegISTRAZIONI degli episodi di sensing ventricolare

Il dispositivo registra un episodio quando rileva eventi nel ventricolo destro che possono impedire l'erogazione di una stimolazione CRT ottimale.

Selezionare l'icona Dati


- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Episodi di sensing ventricolare

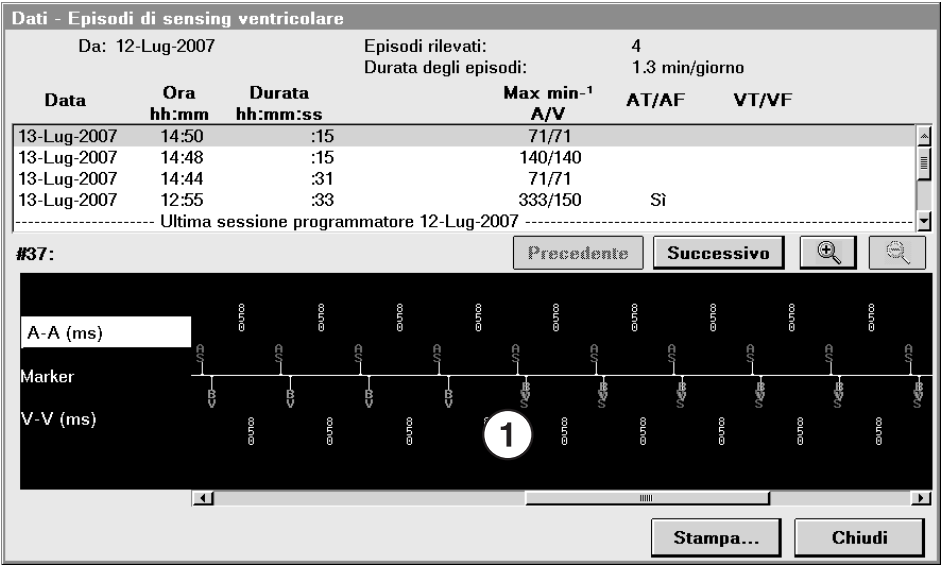**Figura 56.** Registrazione degli episodi di sensing ventricolare – Stimolazione in risposta al sensing ventricolare



1 Stimolazione in risposta al sensing ventricolare (marker BV sui marker VS)

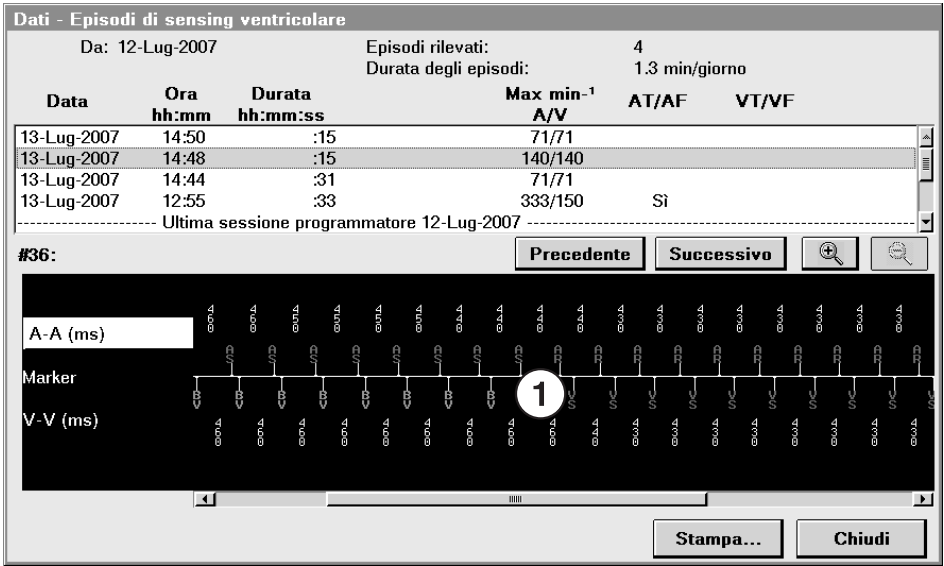**Figura 57.** Registrazione degli episodi di sensing ventricolare – perdita di stimolazione CRT




1 Perdita di trascinamento atriale e, di conseguenza, della stimolazione CRT durante un’alta frequenza atriale intrinseca

**6.2.5.2 Rapporto delle tendenze del Cardiac Compass**

Selezionare l'icona Rapporti

- ⇒ Rapporti disponibili...
- ⇒ Tendenze Cardiac Compass (solo rapporto)

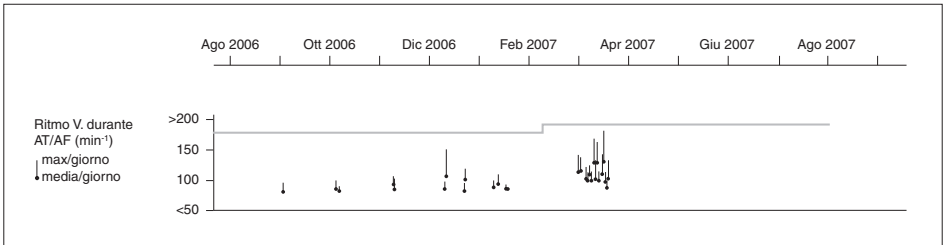**Figura 58.** Rapporto delle tendenze del Cardiac Compass



Questo rapporto mostra la frequenza ventricolare durante gli episodi di AT/AF, fornendo le frequenze massime e medie per ciascun episodio. Per ulteriori informazioni sul rapporto delle tendenze del Cardiac Compass, cfr. la Sezione 5.4, “Visualizzazione delle tendenze cliniche a lungo termine con il Rapporto del Cardiac Compass”, pagina 138.


### 6.2.5.3 Rapporto degli istogrammi della frequenza

Selezionare l'icona Rapporti

⇒ Rapporti disponibili...

⇒ Istogrammi frequenza

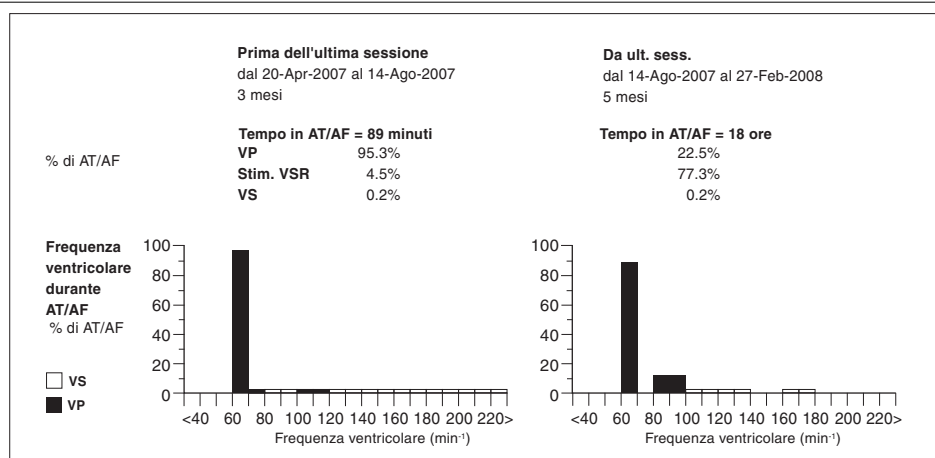**Figura 59.** Rapporto degli istogrammi della frequenza



Questo rapporto mostra la distribuzione delle frequenze ventricolari durante gli episodi di AT/AF. Per ulteriori informazioni sul rapporto degli istogrammi della frequenza, cfr. la Sezione 5.8, “Utilizzo degli istogrammi della frequenza per valutare le frequenze cardiache”, pagina 159.

## 6.3 Monitoraggio dell'accumulo intratoracico di fluido con OptiVol

Da alcuni studi clinici effettuati è emerso che la congestione polmonare è una complicazione primaria associata allo scompenso cardiaco ed è una delle cause più comuni delle ospedalizzazioni ripetute.<sup>7</sup>

I pazienti con uno scompenso cardiaco da moderato a severo sono a rischio di un ulteriore peggioramento dello scompenso cardiaco a seguito di accumulo di fluido sia nel corpo intero sia nel torace. Un riconoscimento tempestivo dell'accumulo toracico di fluido può consentire l'apporto di variazioni al trattamento in maniera più tempestiva.

### 6.3.1 La soluzione offerta dal sistema è la funzione di monitoraggio del fluido OptiVol

I dati clinici esistenti suggeriscono che le variazioni dell'impedenza intratoracica e l'accumulo di fluido nella cavità toracica o nei polmoni sono inversamente correlati.<sup>8</sup> Quando i polmoni di un paziente si congestionano, l'impedenza intratoracica tende a diminuire. Analogamente, un aumento dell'impedenza intratoracica può indicare che i polmoni del paziente stanno diventando più asciutti.

La funzione di monitoraggio dell'accumulo di fluido OptiVol misura l'impedenza intratoracica del paziente utilizzando il percorso Coil RV/Cassa, che attraversa il tessuto all'interno della cavità toracica. Eventuali aumenti di fluido toracico determinano una diminuzione dell'impedenza in questo percorso, mentre eventuali diminuzioni del fluido determinano un aumento dell'impedenza.

#### Note:

- La funzione di monitoraggio dell'accumulo di fluido OptiVol potrebbe non fornire un'avvertenza tempestiva per tutti i fenomeni di scompenso correlati alla presenza di fluido. Pertanto, raccomandare ai pazienti di rivolgersi immediatamente ad un medico nel caso di un malore e qualora abbiano bisogno di assistenza, anche se le funzioni di monitoraggio del dispositivo del paziente e/o del dispositivo di monitoraggio indicano uno stato accettabile della quantità di liquido polmonare.
- La funzione di monitoraggio del fluido OptiVol rappresenta una fonte aggiuntiva di informazioni per la gestione del paziente e non sostituisce gli esami che fanno parte della normale routine ospedaliera.

---

<sup>7</sup> Bennett SJ, et al. Characterization of the precipitants of hospitalization for heart failure decompensation. *American Journal of Critical Care*. 1998; 7:168–174.

<sup>8</sup> Yu CM, Wang L, Chau E, et al. Intrathoracic Impedance Monitoring in Patients With Heart Failure. *Circulation*. 2005; 112:841–848.




## 6.3.2 Funzionamento della funzione di monitoraggio dell'accumulo di fluido OptiVol

### 6.3.2.1 Impedenze quotidiana e di riferimento

Le misurazioni dell'impedenza intratoracica vengono effettuate ad intervalli regolari tra le ore 12:00 e le ore 17:00. Una volta effettuate tutte le misurazioni dell'impedenza per un determinato giorno, viene calcolato il valore di impedenza medio per quel giorno. Questo valore di impedenza giornaliera viene utilizzato per aggiornare una tendenza che si adatta lentamente, denominata "impedenza di riferimento", che viene calcolata dal dispositivo. Così facendo, viene calcolato un valore di controllo per ogni singolo paziente. Il dispositivo utilizza questo valore di controllo per valutare le variazioni dell'impedenza.

Il sistema fornisce un diagramma diagnostico che illustra lo stato del fluido toracico nel tempo. Il diagramma fa parte dei rapporti di gestione degli scompensi cardiaci e Cardiac Compass. Vedere la Sezione 6.3.5.1, "Visualizzazione dell'andamento del fluido OptiVol", pagina 206.

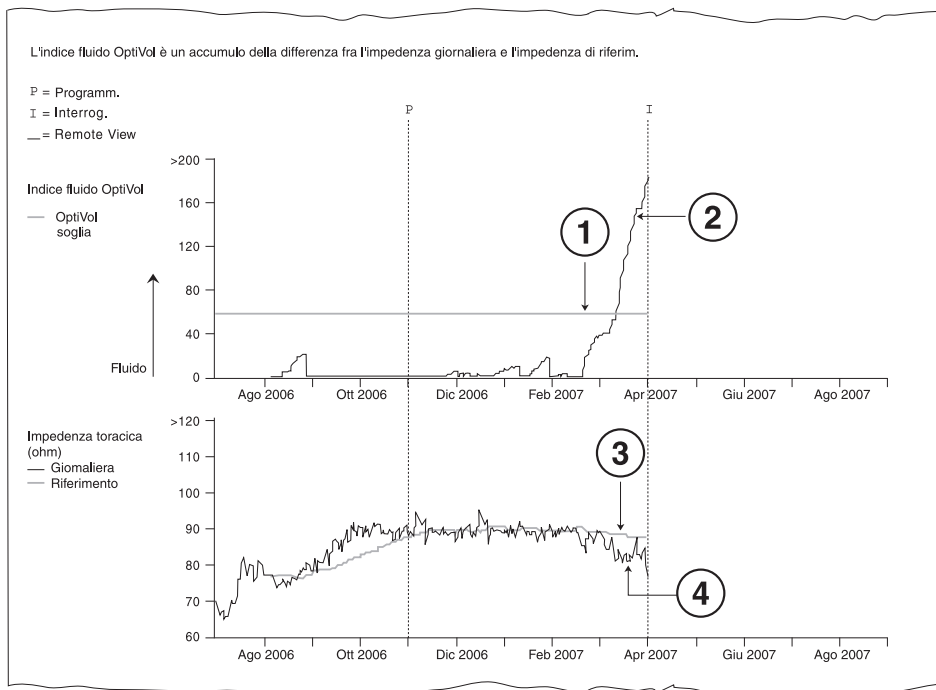**Figura 60.** Andamento del fluido OptiVol



- 1 Soglia OptiVol
- 2 Indice del fluido OptiVol: accumulo della differenza tra l'impedenza giornaliera e l'impedenza di riferimento

- 3 L'impedenza di riferimento si adatta lentamente alle variazioni dell'impedenza giornaliera
  - 4 L'impedenza giornaliera è la media delle diverse misurazioni dell'impedenza effettuate giornalmente
- 

**Indice del fluido OptiVol** – Se l'impedenza giornaliera scende al di sotto dell'impedenza di riferimento, si sta probabilmente verificando un accumulo di fluido nella cavità toracica del paziente. Ogni giorno in cui l'impedenza giornaliera resta al di sotto dell'impedenza di riferimento, la differenza tra i valori di impedenza giornaliera e di riferimento viene aggiunta all'indice del fluido OptiVol.

Se l'impedenza giornaliera inizia ad aumentare, l'accumulo intratoracico di fluido è probabilmente in via di risoluzione. L'indice del fluido continua tuttavia ad aumentare in caso di discrepanza tra l'impedenza giornaliera e l'impedenza di riferimento. Quando l'impedenza giornaliera torna ai valori dell'impedenza di riferimento, l'evento legato all'accumulo di liquidi si considera terminato e l'indice OptiVol viene azzerato.

**Soglia OptiVol** – Se l'impedenza giornaliera resta al di sotto dell'impedenza di riferimento per diversi giorni consecutivi, l'indice del fluido OptiVol può superare la soglia programmata OptiVol. Ciò attiva un allarme paziente e una notifica Medtronic CareAlert. Il segnale acustico di allarme persiste finché l'indice del fluido OptiVol non viene azzerato.

### 6.3.2.2 Medtronic CareAlert

Il sistema emette un allarme programmabile OptiVol per informare il paziente con segnali acustici in caso di superamento della soglia OptiVol da parte dell'indice del fluido OptiVol. Il paziente può reagire in base alle istruzioni ricevute. L'allarme paziente cessa soltanto quando l'impedenza giornaliera torna ai valori dell'impedenza di riferimento e l'indice del fluido OptiVol viene azzerato.

**Attenzione:** verificare integrità degli elettrocateteri in sede di valutazione di un allarme OptiVol. La perdita di integrità del coil RV dovuta alla rottura di un elettrocatetere o ad un difetto del rivestimento isolante può incidere negativamente sull'allarme OptiVol.

Gli allarmi e le osservazioni OptiVol vengono visualizzati anche sull'Indicatore PatientLook modello 2490R della Medtronic, a condizione che gli allarmi sul sistema di monitoraggio domestico del paziente siano stati abilitati nella schermata Configurazione della funzione Medtronic CareAlert. Vedere la Sezione 6.3.4.3, "Programmazione dell'allarme OptiVol sull'Indicatore PatientLook della Medtronic", pagina 205.

### 6.3.2.3 Monitor SentryCheck

Il paziente può utilizzare il Monitor SentryCheck per determinare lo stato di accumulo intratoracico di fluido. Quando viene interrogato dal paziente, il monitor indica se l'indice del fluido del paziente supera al momento la soglia OptiVol. Ciò può consentire al paziente di correlare la sintomatologia con lo stato del fluido. Il paziente può reagire in base alle istruzioni ricevute.

Il paziente può anche utilizzare il monitor SentryCheck per verificare se un determinato allarme acustico sia stato attivato da un evento OptiVol. Il monitor risponde ad un'interrogazione anche se l'allarme OptiVol è disattivato.

### 6.3.3 Alcune considerazioni sul monitoraggio del fluido OptiVol

**Impostazione della soglia OptiVol** – La soglia OptiVol è programmata su un valore nominale pari a 60. La Medtronic consiglia di utilizzare questa impostazione finché non si acquisisce un'esperienza clinica soddisfacente con l'utilizzo della funzione di monitoraggio del fluido OptiVol sui singoli pazienti.

Un numero eccessivo di osservazioni o allarmi OptiVol eventualmente riscontrato dal paziente può essere determinato dall'impostazione della soglia OptiVol su un livello di eccessiva sensibilità (basso). In tal caso, è opportuno valutare un eventuale aumento della soglia OptiVol.

La mancata attivazione acustica o un ritardo dell'allarme OptiVol in presenza di un accumulo di liquido toracico nel paziente possono essere determinati dall'impostazione della soglia OptiVol su un livello di eccessiva insensibilità (alto). In tal caso, è opportuno valutare un'eventuale riduzione della soglia OptiVol.

**Periodo di inizializzazione dell'impedenza di riferimento** – Il primo calcolo dell'impedenza di riferimento avviene al trentaquattresimo giorno di misurazione dell'impedenza dopo l'impianto. Se l'elettrocattetere del paziente è ancora in fase di maturazione, il paziente ha un accumulo di fluido nei polmoni o i tessuti intorno alla tasca del dispositivo sono edematosi, potrebbe essere necessario ancora del tempo per consentire all'impedenza di riferimento di adattarsi alla normale impedenza giornaliera del paziente.

**Programmazione dell'allarme OptiVol** – È possibile impostare il grado di urgenza su alto o moderato. È inoltre possibile programmare l'orario in cui verrà emesso il segnale di allarme OptiVol, indipendentemente dagli altri eventi CareAlert.

L'allarme acustico OptiVol non viene emesso durante i 34 giorni corrispondenti al periodo di inizializzazione dell'impedenza di riferimento. La Medtronic consiglia di non attivare l'allarme OptiVol prima della conclusione del periodo di inizializzazione dell'impedenza di riferimento. Successivamente, è possibile valutare la tendenza dell'impedenza toracica e la correlazione tra impedenza giornaliera ed impedenza di riferimento in condizioni normali prima di configurare l'allarme OptiVol.

**Nota:** se il paziente dispone di un Indicatore PatientLook modello 2490R, selezionare Monitoraggio domestico paziente nella schermata Configurazione allarmi del dispositivo per programmare gli allarmi appropriati del sistema di monitoraggio domestico. Se l'allarme OptiVol è disattivato, le osservazioni OptiVol sono comunque presenti nella schermata Quick Look II e nel rapporto di gestione degli scompensi cardiaci.

**Sospensione dell'allarme OptiVol** – Per dare tempo allo stato del fluido del paziente di stabilizzarsi, è possibile sospendere il tono di allarme OptiVol per 3, 5, 7 o 14 giorni. Se sospeso, l'allarme resta abilitato ma il segnale acustico verrà emesso solo alla scadenza del numero di giorni specificato.

**Nota:** la sospensione del segnale acustico di allarme del sistema non cambia il modo in cui l'Indicatore PatientLook e gli altri strumenti gestiscono le condizioni di allarme.

**Modifica dell'impedenza di riferimento** – In presenza di circostanze favorevoli, è possibile modificare l'impedenza di riferimento per renderla maggiormente compatibile con le misurazioni dell'impedenza giornaliera del paziente. Ciò dovrà avvenire solo in casi rari e quando lo stato del fluido polmonare del paziente è stabile. La procedura di modifica dura alcuni giorni. L'impedenza di riferimento viene adattata alla media dell'ultima misurazione dell'impedenza giornaliera ed alle tre misurazioni dell'impedenza giornaliera successive.

**Note:**

- Prima di modificare l'impedenza di riferimento, si consiglia di sospendere l'allarme OptiVol e di verificare se l'impedenza di riferimento si sia adattata all'impedenza giornaliera del paziente prima della conclusione del periodo di sospensione.
- L'impedenza di riferimento può essere modificata solo in presenza di tutte le condizioni descritte di seguito: lo stato del fluido polmonare del paziente è stabile, le tendenze OptiVol mostrano che l'impedenza giornaliera del paziente è stabile e l'impedenza di riferimento non si è ancora adattata all'impedenza giornaliera del paziente.
- La modifica dell'impedenza di riferimento non può essere effettuata durante il periodo di inizializzazione dell'impedenza di riferimento.
- Nei primi giorni successivi ad una modifica, non si verificherà alcun allarme del dispositivo né del monitor Medtronic CareLink.

### 6.3.4 Programmazione del monitoraggio del fluido OptiVol

#### 6.3.4.1 Programmazione della soglia OptiVol

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Allarme...
- ⇒ Allarmi trattamento clinico
  - ⇒ Impostazioni fluido OptiVol... | Segnale disp.
  - ▷ Soglia OptiVol

#### 6.3.4.2 Programmazione dell'allarme OptiVol

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Allarme...
- ⇒ Allarmi trattamento clinico
  - ⇒ Impostazioni fluido OptiVol... | Segnale disp.
  - ▷ Attivaz. allarme OptiVol - Emerg....

#### 6.3.4.3 Programmazione dell'allarme OptiVol sull'Indicatore PatientLook della Medtronic

- ⇒ Selezionare l'icona Parametri
- ⇒ Allarme...
  - ⇒ Allarmi trattamento clinico
    - ▷ Monitor domestico paz. <Sì>
  - ⇒ Impostazioni fluido OptiVol... | Monitor domestico paz.
    - ▷ Attivazione allarme OptiVol
    - ▷ Soglia OptiVol

#### 6.3.4.4 Sospensione dell'allarme OptiVol

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Allarme...
- ⇒ Allarmi trattamento clinico
  - ⇒ Impostazioni fluido OptiVol... | Segnale disp.
    - ⇒ Attivaz. allarme OptiVol - Urgenza...
      - ▷ Allarme OptiVol

#### 6.3.4.5 Modifica dell'impedenza di riferimento

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Allarme...
- ⇒ Allarmi trattamento clinico
  - ⇒ Impostazioni fluido OptiVol... | Segnale disp.
  - ⇒ Impostazioni aggiuntive...

#### 6.3.5 Valutazione del monitoraggio del fluido OptiVol


**Attenzione:** verificare l'integrità degli elettrocateri in sede di valutazione del monitoraggio del fluido OptiVol. La perdita di integrità del coil RV dovuta alla rottura di un elettrocatero oppure ad un difetto del rivestimento isolante può incidere negativamente sui risultati del monitoraggio del fluido OptiVol.

##### 6.3.5.1 Visualizzazione dell'andamento del fluido OptiVol

Selezionare l'icona Rapporti

- ⇒ Scompenso cardiaco...

I rapporti Gestione scompensi cardiaci e Cardiac Compass mostrano i dati sull'andamento del fluido OptiVol nel paziente relativi ad un massimo di quattordici mesi.

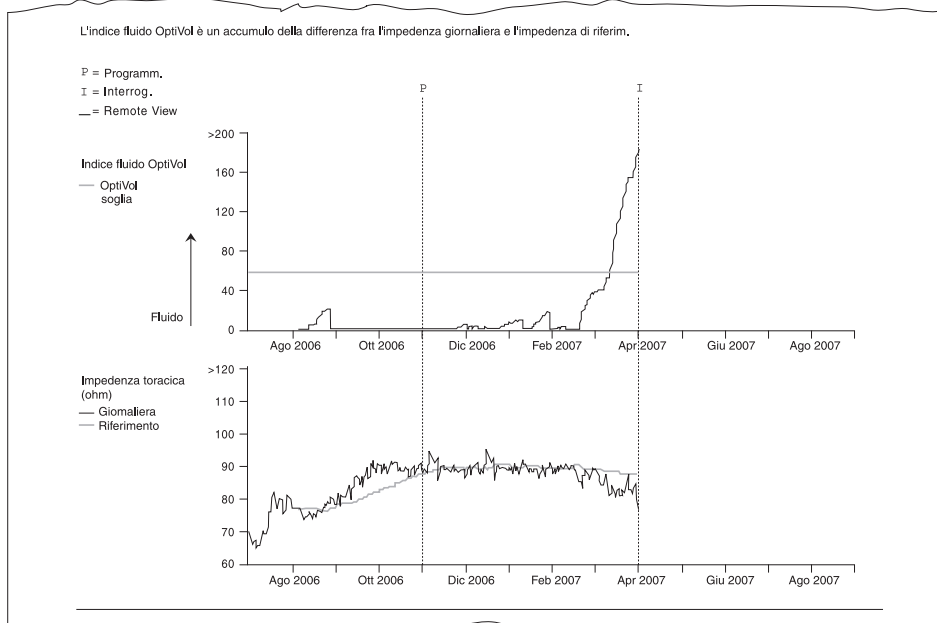**Figura 61.** Esempio di rapporto di gestione degli scompensi cardiaci

L'indice del fluido OptiVol è un diagramma delle differenze cumulative tra i valori di impedenza giornaliera e di impedenza di riferimento. Se l'impedenza giornaliera è inferiore rispetto all'impedenza di riferimento, la tendenza dell'indice del fluido OptiVol aumenta.

La tendenza dell'impedenza toracica rappresenta graficamente i valori dell'impedenza giornaliera e di quella di riferimento.

### 6.3.5.2 Visualizzazione delle osservazioni OptiVol

Selezionare l'icona Dati

⇒ Quick Look II

Quando l'indice del fluido OptiVol raggiunge o supera la soglia OptiVol dall'ultima sessione, nella schermata Quick Look II e nel rapporto di gestione dello scompenso cardiaco compare un'osservazione sullo stato clinico. Se l'indice del fluido OptiVol è ancora al di sopra della soglia, l'osservazione mostra la prima data in cui l'indice del fluido OptiVol era pari o superiore rispetto alla soglia e "In corso". Se l'indice del fluido OptiVol è sceso al di sotto della soglia, le date visualizzate nell'osservazione sono il primo giorno e l'ultimo giorno in cui l'indice del fluido OptiVol era pari o superiore alla soglia.

### 6.3.5.3 Visualizzazione del diario eventi OptiVol

Selezionare l'icona Dati

⇒ Eventi di allarme

⇒ Eventi OptiVol

Nel diario eventi OptiVol vengono segnalate le ultime sette volte in cui l'indice del fluido OptiVol ha superato la soglia OptiVol.

## 6.4 Visualizzazione delle informazioni sulla gestione dello scompenso cardiaco

Un'analisi delle informazioni cliniche relative allo scompenso cardiaco può servire a seguire le variazioni nelle condizioni del paziente e correlarle con le variazioni nella programmazione del dispositivo, nel farmaco, nell'attività del paziente o nella sintomatologia.

Il rapporto di gestione scompensi cardiaci fornisce un quadro delle condizioni del paziente a breve ed a lungo termine, con particolare attenzione rivolta alla gestione dello scompenso cardiaco. Un riepilogo dei dati clinici registrati dall'ultimo appuntamento di follow-up mostra informazioni sugli episodi aritmici e le terapie erogate. I grafici sulle tendenze cliniche mostrano le tendenze a lungo termine delle frequenze cardiache, delle aritmie e degli indicatori di accumulo di fluido negli ultimi quattordici mesi.

I dati sulla gestione dello scompenso cardiaco sono disponibili soltanto sotto forma di rapporto stampato.

Il rapporto di gestione degli scompensi cardiaci si basa sui dati e le misurazioni presenti nelle schermate Dati sul paziente e Quick Look II e nel rapporto del Cardiac Compass. La memorizzazione dei dati per il rapporto di gestione degli scompensi cardiaci è automatica, non è necessaria alcuna configurazione.

**Nota:** le annotazioni sugli orari visualizzate nel rapporto si basano sull'orologio del dispositivo.

### 6.4.1 Come stampare il rapporto di gestione degli scompensi cardiaci

Selezionare l'icona Rapporti

⇒ Scompenso cardiaco...



6.4.2 Informazioni fornite dal rapporto di gestione degli scompensi cardiaci

Il rapporto di gestione degli scompensi cardiaci fornisce informazioni sul paziente e sul suo stato clinico dall'ultimo appuntamento di follow-up. Mostra gli eventi che si sono verificati durante il periodo di notifica e fornisce grafici che possono essere di aiuto nella valutazione dell'andamento del fluido OptiVol e delle tendenze cliniche relative allo scompenso cardiaco.

Figura 62. Dati sul paziente, stato clinico e osservazioni

Data di nascita	EF, il	---			
Impianto	13-Jan-1994	Ospedale			
<b>Stato clinico (Da 27-Ago-2006&gt; a 10-Feb-2007)</b>					
VT/VF trattata	9 episodi	Stim. V.	85.2%	Freq. min.	60 min <sup>-1</sup>
AT/AF	8 episodi	Stimolazione atriale	20.8%	Freq. sup.	130 min <sup>-1</sup>
Tempo in AT/AF	0.1 ore/giorno (<0.1%)			Batteria	OK
<b>Osservazioni (4) (Da 27-Ago-2006&gt; a 10-Feb-2007)</b>					
· 13 giorni con oltre 12 ore di AT/AF.					
· Stimolazione V. (battiti V.) inferiore al 90%.					
· Poss. accumulo di fluido: soglia OptiVol superata, 23-Ott-2006 -- 26-Ott-2006.					
· Impedenza toracica di rif. OptiVol regolata il 27-Ago-2007.					

6.4.2.1 Dati sul paziente

I dati sul paziente si basano sui dati immessi nella schermata Dati sul paziente. Il rapporto include ogni anamnesi presente e le date di esecuzione delle misurazioni che sono state registrate nella schermata Dati sul paziente.


### 6.4.2.2 Stato clinico e osservazioni

Nelle sezioni del Rapporto di gestione scompensi cardiaci intitolate "Stato clinico" e "Osservazioni" sono contenute delle informazioni che possono risultare utili nella gestione dello scompenso cardiaco. Le stesse informazioni sono disponibili anche nella schermata Quick Look II. Per ulteriori informazioni sui dati Quick Look II, vedere la Sezione 5.2, "Visualizzazione di un riepilogo dei dati memorizzati di recente", pagina 123. Nel Rapporto di gestione scompensi cardiaci figurano le seguenti informazioni:

- Informazioni sugli episodi aritmici, con il numero di episodi aritmici trattati e monitorati che sono stati registrati dall'ultimo appuntamento di follow-up.
- La stimolazione ventricolare ed atriale viene visualizzata sotto forma di percentuale del tempo totale durante il periodo di registrazione.
- Lo stato della batteria all'inizio della sessione può essere OK, RRT (momento consigliato per la sostituzione) o EOS (fine servizio).
- Le osservazioni definite dal sistema segnalano la presenza di condizioni che possono essere legate allo scompenso cardiaco.

### 6.4.2.3 Informazioni su eventi

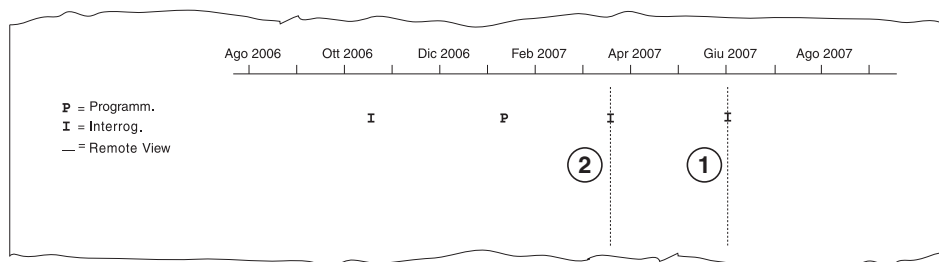**Figura 63.** Annotazioni su eventi



1 Indicatore della sessione corrente

2 Indicatore dell'ultima sessione

**Eventi relativi alla programmazione e all'interrogazione** – Il rapporto mostra quando il dispositivo è stato interrogato o programmato, per rendere possibili eventuali correlazioni tra le variazioni apportate ai parametri del dispositivo ed altre tendenze cliniche.

Se il paziente viene esaminato durante una visita ambulatoriale, il rapporto registra un valore "I" per il giorno in cui il dispositivo viene interrogato ed un valore "P" per il giorno in cui viene modificato un parametro programmabile (ad eccezione delle modifiche temporanee). Se il dispositivo è stato interrogato e programmato nello stesso giorno, verrà visualizzata unicamente la lettera "P".

Quando il paziente viene esaminato durante una sessione con il sistema di monitoraggio Medtronic CareLink, nel rapporto è riportato il simbolo “I” con una linea sotto.

Due linee verticali riportate in tutti i grafici indicano l’inizio della sessione corrente e l’inizio dell’ultima sessione (se applicabile).


#### 6.4.2.4 Valutazione dell’andamento del fluido OptiVol

I grafici sull’indice del fluido OptiVol e sull’impedenza toracica mostrano dati sull’impedenza intratoracica raccolti negli ultimi quattordici mesi.

Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 6.3, “Monitoraggio dell’accumulo intratoracico di fluido con OptiVol”, pagina 200.

**Nota:** la funzione di monitoraggio del fluido OptiVol costituisce una fonte aggiuntiva di informazioni per la gestione del paziente e non sostituisce gli esami che fanno parte della normale routine ospedaliera.

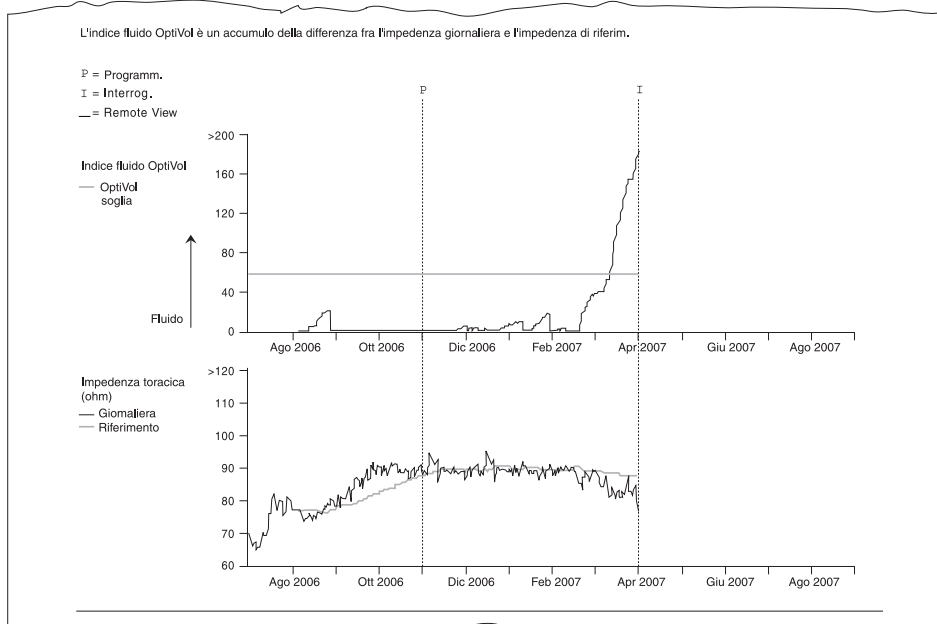**Figura 64.** Andamento del fluido OptiVol



**Indice del fluido OptiVol** – Una variazione dell’impedenza intratoracica può essere un indicatore precoce di un accumulo di fluido associato allo scompenso cardiaco.

L'andamento dell'indice del fluido OptiVol mostra la differenza esistente tra l'impedenza toracica giornaliera misurata e l'impedenza di riferimento. Se l'impedenza giornaliera è inferiore rispetto all'impedenza di riferimento, l'indice del fluido OptiVol tende ad aumentare. Ciò può indicare che l'accumulo di liquido nel torace del paziente è aumentato. La linea orizzontale mostra il valore programmato della soglia OptiVol.


**Attenzione:** verificare l'integrità degli elettrocateri in sede di valutazione dell'andamento dell'indice del fluido OptiVol. La perdita di integrità del coil RV dovuta a una rottura dell'elettrocatero oppure a un difetto del rivestimento isolante può incidere negativamente sui risultati dell'andamento dell'indice del fluido OptiVol.

**Impedenza toracica** – La tendenza dell'impedenza toracica consente di confrontare l'impedenza toracica media giornaliera misurata con l'impedenza di riferimento. L'impedenza di riferimento subisce lievi variazioni da un giorno all'altro per adattarsi lentamente all'impedenza giornaliera.

#### 6.4.2.5 Valutazione delle tendenze cliniche

Nei grafici sulle tendenze cliniche vengono visualizzati dati raccolti negli ultimi quattordici mesi che possono risultare utili per la gestione dello scompenso cardiaco. Le date e le annotazioni degli eventi consentono di correlare le tendenze ricavate da grafici diversi.

I grafici sulle tendenze presenti sia nel rapporto di gestione dello scompenso cardiaco sia nel rapporto del Cardiac Compass sono identici. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 5.4, "Visualizzazione delle tendenze cliniche a lungo termine con il Rapporto del Cardiac Compass", pagina 138.

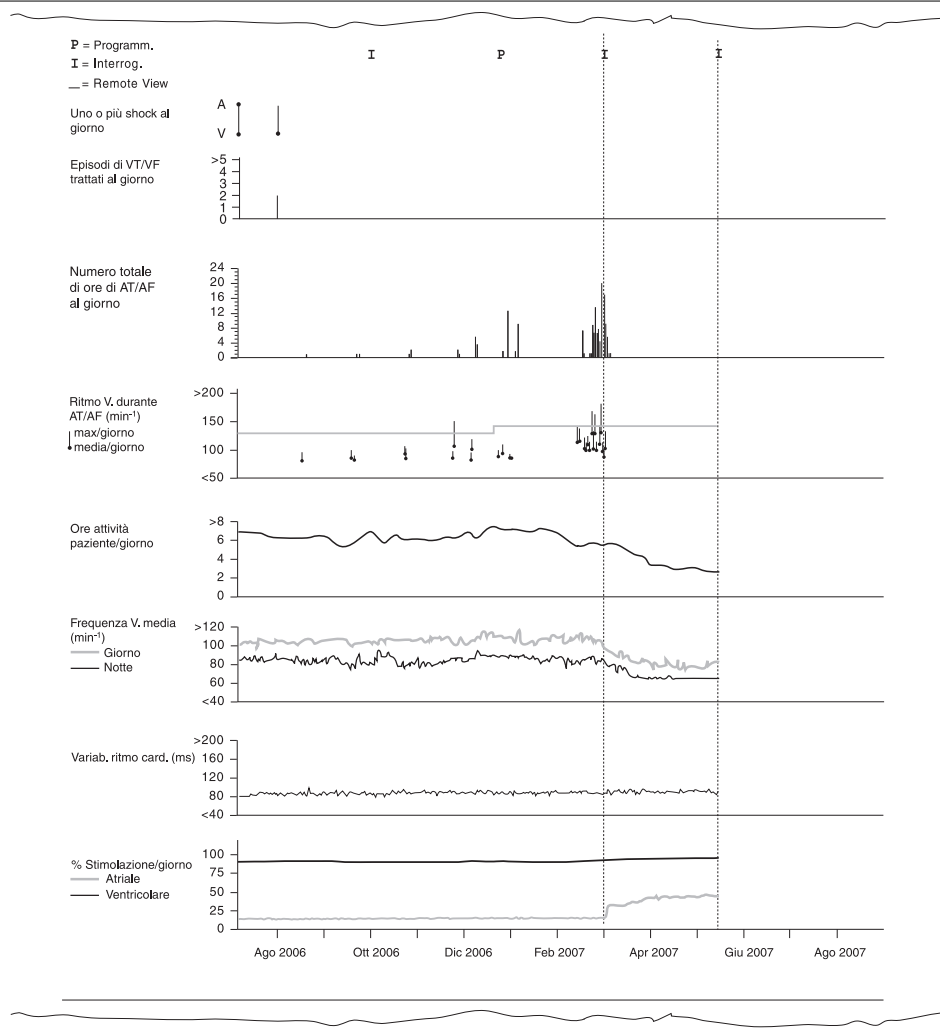**Figura 65.** Esempio di grafici sulle tendenze cliniche

**Uno o più shock al giorno** – Nel rapporto viene indicato uno shock per qualsiasi giorno in cui il dispositivo ha erogato una terapia ad alta tensione (una terapia di defibrillazione automatica, una terapia di cardioversione o una terapia con shock atriali). Ogni annotazione indica l'erogazione di una o più terapie ventricolari (V) o atriali (A) ad alta tensione in uno stesso giorno.

**Episodi quotidiani di VT/VF trattata** – La cronologia delle tachiaritmie ventricolari può essere utile per visualizzare le correlazioni esistenti tra i cluster di episodi ed altre tendenze cliniche.

Il dispositivo registra quotidianamente il numero totale episodi spontanei di VT e VF per cui è stata erogata una terapia. Tra queste potrebbero anche esservi terapie che sono state avviate e successivamente interrotte. Non figurano invece gli episodi che sono stati soltanto monitorati.

**Ore complessive di AT/AF al giorno** – Questa tendenza può essere di aiuto nel valutare l'opportunità di modificare le impostazioni del dispositivo del paziente o le terapie farmacologiche. Può inoltre rivelare la presenza di episodi asintomatici di AT/AF.

Il dispositivo registra la durata complessiva degli episodi di aritmia atriali avvenuti ogni giorno. La durata dell'AT/AF viene calcolata dal punto di insorgenza dell'episodio di AT/AF. Questa tendenza può essere registrata in ore (da 0 a 24) o minuti (da 0 a 60) al giorno, a seconda della durata massima giornaliera. Per ulteriori informazioni sul riconoscimento di AT/AF, vedere la Sezione 8.1, "Riconoscimento di tachiaritmie atriali", pagina 294.

**Frequenza ventricolare durante l'AT/AF** – In questo grafico vengono rappresentate le frequenze ventricolari mediane durante gli episodi quotidiani di AT e AF. Le linee verticali mostrano la differenza giornaliera tra la frequenza mediana e la frequenza ventricolare massima rilevata quotidianamente. Le linee orizzontali indicano la frequenza di riconoscimento di VF, VT e FVT, se presente.

**Attività del paziente** – La tendenza delle attività del paziente può essere un indicatore precoce della sintomatologia causata da uno scompenso cardiaco progressivo, che provoca affaticamento ed una conseguente riduzione delle attività del paziente. La tendenza può anche fornire una misurazione oggettiva della risposta del paziente alle variazioni apportate alla terapia e può servire a monitorare il regime di esercizio fisico del paziente. Il dispositivo utilizza i dati derivati dal segnale dell'accelerometro della risposta in frequenza per determinare l'attività quotidiana del paziente.

**Frequenza ventricolare media** – Le frequenze cardiache diurne e notturne forniscono informazioni che possono indicare una disfunzione autonoma legata allo scompenso cardiaco. Un aumento graduale della frequenza cardiaca può indicare decompensazione, un sintomo dello scompenso cardiaco. In questa tendenza, per "giorno" si intende un periodo di dodici ore compreso tra le ore 8:00 e le ore 20:00, mentre per "notte" si intende un periodo di quattro ore compreso tra la mezzanotte e le ore 4:00 (come indicato dall'orologio del dispositivo).

**Variabilità del ritmo cardiaco** – La ridotta variabilità nella frequenza cardiaca del paziente può essere utile ad individuare lo scompenso cardiaco. Il dispositivo misura ciascun intervallo atriale calcolando l'intervallo atriale mediano ogni 5 min. Successivamente calcola e rappresenta graficamente un valore di variabilità (in ms) per ogni singolo giorno.

**Nota:** il calcolo della variabilità della frequenza cardiaca non include gli eventi che si verificano durante gli episodi aritmici.

**Percentuale quotidiana di stimolazione** – Questa tendenza mostra la stimolazione nel tempo, che può essere di aiuto nell'identificazione delle variazioni sopraggiunte nella stimolazione e delle tendenze della stimolazione. Nel grafico viene visualizzata la percentuale di tutti gli eventi che si verificano ogni giorno e che vengono classificati come eventi atriali e ventricolari stimolati. Le percentuali vengono calcolate in base ai conteggi giornalieri delle sequenze di eventi AS-VS, AS-VP, AP-VS e AP-VP. Sono esclusi gli eventi refrattari atriali.

## 6.5 Raccolta e visualizzazione dei dati sugli episodi di sensing ventricolare

Il dispositivo definisce un episodio di sensing ventricolare come un periodo di tempo in cui la stimolazione ventricolare è inibita a causa dell'attività ventricolare intrinseca del paziente. Dei periodi prolungati di sensing ventricolare possono inibire la stimolazione CRT, determinando una perdita di sincronia ed eventualmente un peggioramento della sintomatologia dello scompenso cardiaco. Il sistema fornisce informazioni diagnostiche che possono essere di aiuto per individuare la causa degli episodi di sensing ventricolare e riprogrammare il dispositivo in modo tale da evitarli.

I dati raccolti su un episodio di sensing ventricolare includono la data e l'ora, la durata, gli intervalli ed i marker, le frequenze ventricolari ed atriali massime, oltre ad indicare se l'episodio faceva parte di una tachiaritmia.

Il dispositivo inizia a raccogliere i dati di un episodio di sensing ventricolare dopo che si è verificato un numero programmabile di rilevamenti ventricolari consecutivi. La raccolta dei dati su un episodio termina nel momento in cui si verifica un numero programmabile di eventi ventricolari stimolati consecutivi.

### Note:

- Il dispositivo classifica gli eventi di risposta al sensing ventricolare o di stimolazione ventricolare di sicurezza come eventi rilevati quando raccoglie i dati su un episodio di sensing ventricolare. Di conseguenza, la terapia di stimolazione erogata da queste funzioni non previene il riconoscimento degli episodi di sensing ventricolare.
- La stimolazione ventricolare durante un intervento di recupero del trascinamento atriale non è inclusa nel conteggio degli episodi di sensing ventricolare necessari per terminare la raccolta.
- Per ulteriori informazioni sulla risposta al sensing ventricolare o sul recupero del trascinamento atriale, cfr. la Sezione 6.2, "Promozione della stimolazione CRT continua", pagina 190.

### 6.5.1 Programmazione dei parametri per gli episodi di sensing ventricolare

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Impostazione raccolta dati...
- ⇒ Episodi di sensing V....
  - ▷ Raccogli se: VS consecut. >=
  - ▷ Termina raccolta se: VP consecut. >=

Quando si impostano i parametri per la raccolta dati su episodi di sensing ventricolare, è necessario specificare il numero di rilevamenti ventricolari consecutivi che sono necessari per iniziare la raccolta dati (definita dalla funzione Memorizza se: VS consecut. >= parametro) ed il numero di stimolazioni ventricolari consecutive che sono necessarie per terminare la raccolta dati su un episodio (definito dalla funzione Termin. memoriz. se: VP consecut. >= parametro).

L'impostazione di valori inferiori per il numero di rilevamenti ventricolari per iniziare la raccolta dati e per il numero di stimolazioni ventricolari per terminare la raccolta dati può determinare un numero relativamente elevato di episodi di sensing ventricolare. Alcuni di questi episodi possono essere di breve durata. Selezionare dei valori più elevati per questi parametri se si desidera raccogliere dati sulla frequenza e sui meccanismi di insorgenza di episodi più lunghi.

### 6.5.2 Come visualizzare gli episodi di sensing ventricolare


Gli episodi di sensing ventricolare possono essere visualizzati nella schermata Dati – Episodi di sensing ventricolare.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Episodi di sensing ventricolare



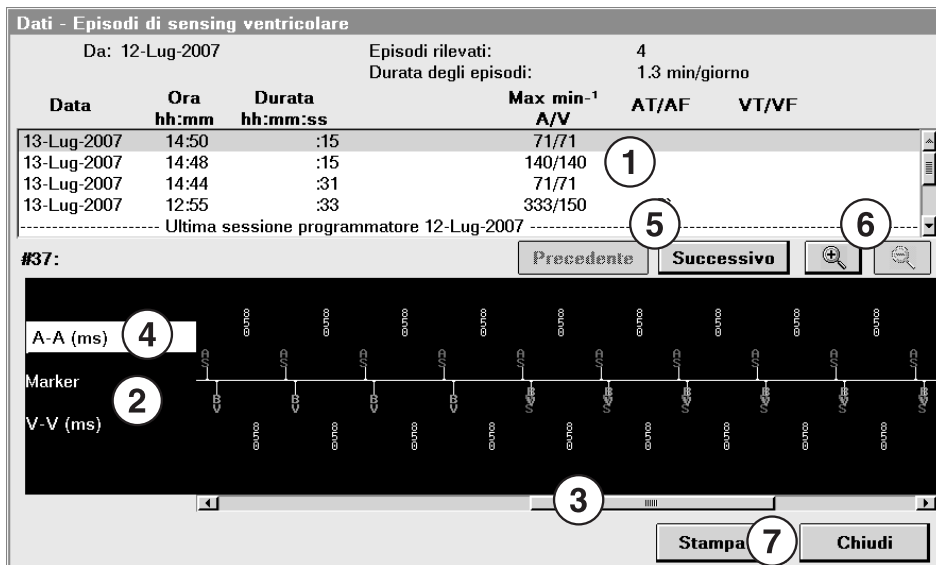**Figura 66.** Esempio di un episodio di sensing ventricolare con la funzione di risposta al sensing ventricolare attivata



1. Selezionare la registrazione di un episodio di sensing dall'elenco.
2. Nella schermata vengono visualizzati i dati sui marker e sull'intervallo relativi alla registrazione dell'episodio selezionata.
3. Spostare la barra di scorrimento orizzontale a destra e a sinistra per visualizzare le diverse aree del tracciato dei marker.
4. Selezionare il tipo di dati di intervallo da visualizzare nel tracciato dei marker.
5. Selezionare [Precedente] o [Successivo] per visualizzare la registrazione dell'episodio precedente o successivo nell'elenco, in base alla registrazione dell'episodio attualmente selezionata.
6. Utilizzare i pulsanti della lente d'ingrandimento per ingrandire o ridurre le dimensioni del tracciato dei marker.
7. Selezionare [Stampa...] per stampare una copia della registrazione dell'episodio selezionata.

Nella Figura 66, il dispositivo ha erogato una stimolazione biventricolare regolare prima che iniziasse il primo evento ventricolare rilevato. Al riconoscimento di un rilevamento ventricolare, il dispositivo ha erogato una stimolazione biventricolare ma da quel momento in poi la stimolazione è stata erogata in risposta al rilevamento ventricolare poiché la funzione di risposta al sensing ventricolare era attivata. I marker BV che compaiono subito dopo i marker di rilevamento ventricolare indicano che il dispositivo sta erogando una stimolazione biventricolare per via della risposta al sensing ventricolare.

Se la stimolazione in risposta al sensing ventricolare si verifica ripetutamente perché la CRT non è ottimizzata per il paziente, è possibile modificare i parametri di stimolazione.

**Max min<sup>-1</sup> A/V** – Questi dati indicano il numero massimo di battiti atriali e ventricolari al minuto registrati durante la raccolta dati per la registrazione degli episodi di sensing ventricolare.

**AT/AF** – Se il dispositivo rileva una tachiaritmia atriale o una fibrillazione atriale durante l'episodio di sensing ventricolare, sotto il titolo del campo compare la parola "Si". Le aritmie atriali, benché presenti nei dati sull'episodio di sensing ventricolare, non fanno cessare l'episodio.

**VT/VF** – Una tachiaritmia ventricolare determina sempre la conclusione della raccolta dei dati su un episodio di sensing ventricolare. Quando la parola "Si" compare sotto questo titolo, la raccolta dei dati su un episodio di sensing ventricolare si è conclusa a causa di una tachiaritmia ventricolare e non a causa del numero programmabile di stimolazioni ventricolari consecutive verificatesi.

## 7 Configurazione delle terapie di stimolazione

### 7.1 Sensing dell'attività cardiaca intrinseca

Il dispositivo deve rilevare l'occorrenza di eventi cardiaci intrinseci evitando l'oversensing in modo tale da poter erogare le terapie in maniera adeguata. Un sensing efficace può ridurre gli effetti di lunghe depolarizzazioni dopo gli eventi stimolati, l'oversensing di uno stesso evento, il sensing nella camera opposta, il sensing del far field di onde R, il sensing delle onde T, il rumore e le interferenze.

#### 7.1.1 La soluzione offerta dal sistema è il sensing


Un sensing efficace è essenziale ai fini di un utilizzo sicuro ed efficace del dispositivo. Il dispositivo effettua il rilevamento sia nell'atrio che nel ventricolo destro utilizzando gli elettrodi di sensing degli elettrocateri impiantati in queste camere. È possibile adattare la sensibilità ai segnali intracardiaci. Ogni impostazione della sensibilità rappresenta un valore di soglia che definisce l'ampiezza elettrica minima riconosciuta dal dispositivo come un evento rilevato nell'atrio o nel ventricolo destro.

**Nota:** la selezione di un valore superiore per la soglia di sensing determina una riduzione della sensibilità ai segnali di ampiezza più bassi.

I periodi di blanking programmabili ed i periodi refrattari servono a scartare il sensing estraneo oppure ad evitare che il dispositivo risponda al sensing estraneo. Agli impulsi di stimolazione, eventi rilevati e shock fanno seguito dei periodi di blanking. Durante i periodi di blanking, il sensing è inibito. Agli impulsi di stimolazione ed eventi rilevati fanno seguito dei periodi refrattari. Il dispositivo è in grado di rilevare gli eventi che si verificano durante i periodi refrattari, ma li contrassegna come eventi refrattari. Generalmente, gli eventi refrattari non hanno alcun effetto sulla tempistica degli eventi di stimolazione successivi, ma vengono utilizzati dalle funzioni di riconoscimento delle tachiaritmie.

La polarità di sensing è bipolare nell'atrio e bipolare o punta/coil nel ventricolo destro. Il dispositivo può utilizzare un elettrocatetere bipolare autentico oppure un elettrocatetere bipolare integrato per il sensing del ventricolo destro. Con un elettrocatetere bipolare autentico, il sensing del ventricolo destro può avvenire tra la punta RV e gli elettrodi ad anello RV (bipolari) o tra la punta RV e gli elettrodi a spirale RV (cfr. la Figura 67). Il vettore di sensing è programmabile mediante il parametro Polarità sensing RV. Con un elettrocatetere bipolare integrato, il sensing del ventricolo destro avviene tra la punta RV e gli elettrodi a spirale RV. In questo caso, il parametro Polarità sensing RV non ha alcun effetto sul vettore di sensing. Le funzioni di sensing e blanking sono identiche in queste configurazioni degli elettrocateteri.

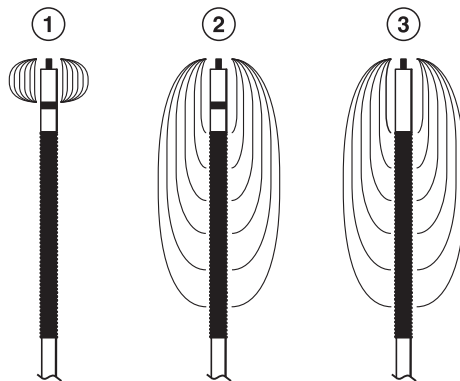**Figura 67.** Sensing ventricolare effettuato con un elettrocatetere bipolare autentico o un elettrocatetere bipolare integrato




- 1 Sensing ventricolare effettuato con un elettrocatetere bipolare autentico e la polarità di sensing RV programmata su Bipolare
- 2 Sensing ventricolare effettuato con un elettrocatetere bipolare autentico e la polarità di sensing RV programmata su Punta/Coil
- 3 Sensing ventricolare effettuato con un elettrocatetere bipolare autentico e la polarità di sensing RV programmata su Bipolare o su Punta/Coil

### 7.1.2 Funzionamento delle soglie di sensing

Il dispositivo modifica automaticamente le soglie di sensing dopo un certo numero di eventi stimolati e rilevati per consentire la riduzione dell'oversensing delle onde T, degli eventi nella camera opposta e degli impulsi di stimolazione. La modifica della soglia dipende dal tipo di evento che precede la modifica. In caso di modifica automatica, la soglia di sensing aumenta automaticamente per poi diminuire gradualmente avvicinandosi al valore di sensibilità programmato, che corrisponde all'ampiezza minima che può essere rilevata. La diminuzione della soglia è stata appositamente studiata per essere sufficientemente rapida da consentire il sensing dei segnali successivi a bassa ampiezza. Nella Figura 68 è illustrata una modifica della soglia con impostazioni nominali.

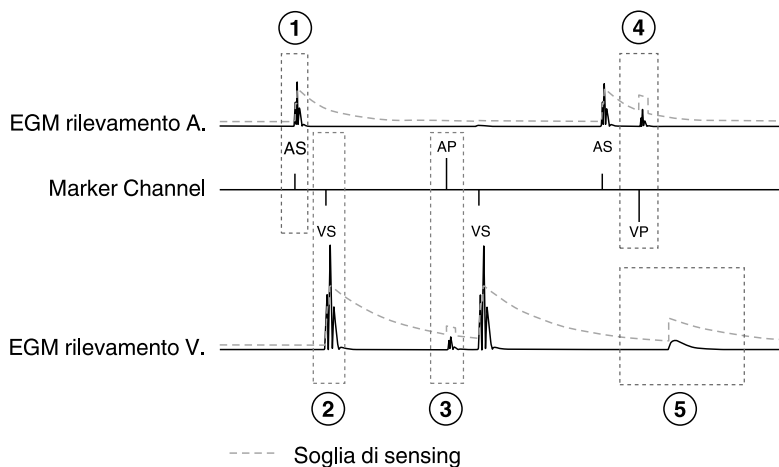**Figura 68.** Modifica automatica delle soglie di sensing



- 1 Dopo un evento atriale rilevato, il dispositivo diventa temporaneamente meno sensibile agli eventi atriali.
- 2 Dopo un evento ventricolare rilevato, il dispositivo diventa temporaneamente meno sensibile agli eventi ventricolari.
- 3 Dopo un evento atriale stimolato, il dispositivo diventa temporaneamente meno sensibile agli eventi ventricolari, ma la sensibilità agli eventi atriali rimane invariata.
- 4 Dopo un evento ventricolare stimolato, il dispositivo diventa temporaneamente meno sensibile agli eventi atriali.
- 5 Dopo il periodo di blanking post-stimolazione, il dispositivo diventa temporaneamente meno sensibile agli eventi ventricolari.

**Nota:** in caso di eventi ad alta ampiezza rilevati, la riduzione della sensibilità è limitata per prevenire l'undersensing di eventi intrinseci successivi.


### 7.1.3 Funzionamento dei periodi di blanking

I periodi di blanking fanno seguito agli eventi stimolati e rilevati e fanno in modo che il dispositivo non rilevi gli impulsi di stimolazione, gli impulsi di cardioversione e defibrillazione, la depolarizzazione post-stimolazione, le onde T e l'oversensing del medesimo evento. I periodi di blanking che fanno seguito ad eventi stimolati hanno una durata pari o superiore a quelli che fanno seguito ad eventi rilevati, per evitare il sensing delle depolarizzazioni atriali e ventricolari.

**Nota:** in caso di stimolazione biventricolare, la durata del blanking viene misurata dalla fine della seconda stimolazione ventricolare.

I parametri programmabili determinano la durata dei periodi di blanking che fanno seguito ad eventi rilevati, eventi stimolati ed eventi stimolati post-shock.

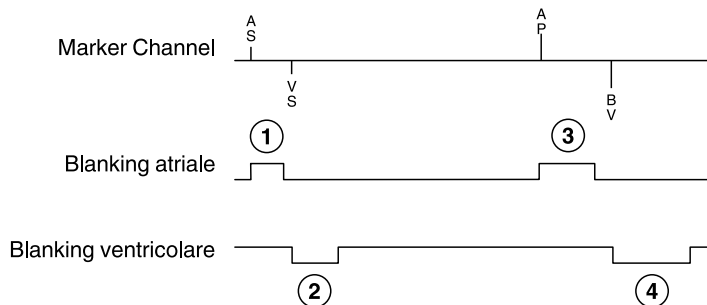**Figura 69.** Periodi di blanking programmabili



- 1 Per la durata di questo periodo di blanking atriale (definito dal parametro Blanking A. post AS), il sensing atriale viene disabilitato dopo un evento atriale rilevato.
- 2 Per la durata di questo periodo di blanking ventricolare (definito dal parametro Blanking V. post VS), il sensing ventricolare viene disabilitato dopo un evento ventricolare rilevato.
- 3 Per la durata di questo periodo di blanking atriale (definito dal parametro Blanking A. post AP), il sensing atriale viene disabilitato dopo un evento atriale stimolato.
- 4 Per la durata di questo periodo di blanking ventricolare (definito dal parametro Blanking A. post VP), il sensing ventricolare viene disabilitato dopo un evento ventricolare stimolato.

I periodi di blanking nella camera opposta elencati nella Tabella 12 non sono programmabili.

**Tabella 12.** Periodi di blanking nella camera opposta

Parametro	Valore
Blanking atriale dopo un impulso di stimolazione ventricolare	30 ms <sup>a</sup>
Blanking ventricolare dopo un impulso di stimolazione atriale	30 ms <sup>b</sup>

<sup>a</sup> Il dispositivo può prolungare o accorciare questo valore in modo appropriato dopo impulsi di stimolazione biventricolari.

<sup>b</sup> Se l'ampiezza della stimolazione RV viene programmata su 8 V, questo valore è pari a 35 ms.

Come i periodi descritti precedentemente, i periodi di blanking post-shock non sono programmabili. Dopo l'erogazione di una terapia di cardioversione o di defibrillazione, il blanking atriale e ventricolare è pari a 520 ms.

### 7.1.4 Funzionamento del Periodo di blanking atriale post-ventricolare (PVAB)

Il sistema utilizza il periodo di blanking atriale post-ventricolare (PVAB) per l'eliminare l'effetto del far field di onde R. Il far field di onde R è un evento ventricolare rilevato nell'atrio. Il funzionamento del PVAB viene determinato da due parametri programmabili: l'intervallo PVAB ed il metodo PVAB. Gli eventi atriali rilevati durante l'intervallo PVAB vengono utilizzati solo dal riconoscimento delle tachiaritmie e non influenzano la tempistica della stimolazione. Tuttavia, modificando l'intervallo PVAB si determina se gli eventi debbano rientrare o meno nell'intervallo.

I tre valori programmabili per il metodo PVAB sono Parziale, Parziale+ e Assoluto. Questo parametro determina se gli eventi atriali che si verificano durante l'intervallo PVAB debbano essere rilevati dal dispositivo. Controlla inoltre il modo in cui la soglia di sensing atriale viene modificata dopo un evento ventricolare. Per un confronto tra i metodi PVAB, cfr. la Figura 70.


**PVAB Parziale** – Quando si utilizza il metodo PVAB Parziale, gli eventi atriali rilevati durante l'intervallo PVAB programmato non vengono utilizzati dalle funzioni di stimolazione antibradicardica ma dalle funzioni di riconoscimento delle aritmie.

**PVAB Parziale+** – Il metodo PVAB Parziale+ può eliminare il sensing del far field di onde R in maniera più efficace del PVAB Parziale. Il metodo PVAB Parziale+ funziona con le stesse modalità del metodo Parziale PVAB. L'unica differenza consiste nel fatto che, dopo un evento ventricolare, la soglia di sensing atriale aumenta per la durata dell'intervallo PVAB programmato. Durante questo periodo, è meno probabile che il far field di onde R venga rilevato. Dopo l'intervallo PVAB, la soglia di sensing atriale ritorna gradualmente al livello programmato. Il prolungamento dell'intervallo PVAB può influenzare il sensing intrinseco e il sensing del far field di onda R poiché cambia il periodo in cui la soglia di sensing aumenta.

**PVAB Assoluto** – Utilizzando il metodo PVAB Assoluto, nell'intervallo PVAB non viene rilevato alcun evento atriale. Il metodo del PVAB assoluto è consigliato solo per far fronte alle complicazioni che gli altri metodi PVAB non riescono a gestire.

**Avvertenza:** programmando l'opzione "Assoluto" come metodo PVAB, durante l'intervallo di blanking non si verificherà alcun sensing atriale. Il blanking assoluto può ridurre la capacità di rilevare l'AT/AF e di distinguere le VT dalle SVT. Utilizzare i metodi Parziale o Parziale+, a meno che non si sia certi dell'idoneità del blanking assoluto.

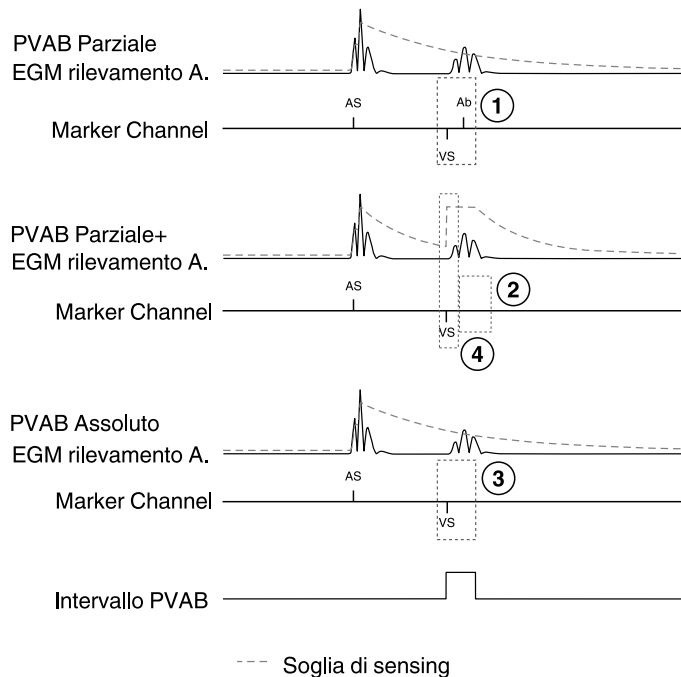**Figura 70.** Confronto tra i metodi PVAB



- 1 Utilizzando il metodo PVAB Parziale, se il far field di onda R supera la soglia atriale, un marker Ab indica che l'evento è stato rilevato durante l'intervallo PVAB.
- 2 Con il metodo PVAB Parziale+, dopo un evento ventricolare rilevato o stimolato, la soglia di sensing atriale aumenta e il dispositivo è meno sensibile agli eventi atriali.
- 3 Utilizzando il metodo PVAB Assoluto, nell'intervallo PVAB non si verificherà alcun evento atriale, indipendentemente dal superamento della soglia atriale da parte del far field di onda R.
- 4 Fatta eccezione per la modifica della soglia di sensing atriale, i metodi PVAB Parziale+ e Parziale sono simili. Con entrambi i metodi, gli eventi atriali rilevati nell'intervallo PVAB vengono utilizzati dalle funzioni di riconoscimento delle tachiaritmie.



### 7.1.5 Funzionamento dei periodi refrattari

Durante un periodo refrattario, il dispositivo rileva normalmente ma classifica gli eventi rilevati come refrattari, limitando la propria risposta a questi eventi. I periodi refrattari della stimolazione prevengono i segnali rilevati in maniera inappropriata, come il far field di onde R o il rumore elettrico, che potrebbero attivare determinati intervalli nella tempistica della stimolazione. I periodi refrattari della stimolazione non incidono sul riconoscimento delle tachiaritmie.


La disponibilità dei periodi refrattari dipende dal modo di stimolazione programmato. Il periodo refrattario atriale post-ventricolare (PVARP) è disponibile nei modi di stimolazione bicamerale, mentre il periodo refrattario atriale è disponibile nei modi di stimolazione atriale.

#### 7.1.5.1 Periodo refrattario atriale post ventricolare (PVARP)

Il periodo refrattario atriale post-ventricolare (PVARP) fa seguito ad un evento ventricolare stimolato, rilevato o refrattario rilevato. Un evento atriale rilevato durante questo intervallo viene classificato come evento refrattario. Il PVARP non inibisce alcuna stimolazione atriale pianificata né avvia alcun intervallo SAV. Il parametro PVARP è programmabile unicamente per i modi di stimolazione bicamerale (ad eccezione del modo DOO).

- Quando il dispositivo funziona nei modi DDDR e DDD, il parametro PVARP previene il trascinarsi delle onde P retrograde che possono dare avvio ad una tachicardia mediata da pacemaker.
- Quando il dispositivo funziona nei modi DDIR e DDI, il parametro PVARP previene l'inibizione della stimolazione atriale in base alle onde P retrograde rilevate. Il PVARP dovrebbe essere programmato su un valore superiore al tempo di conduzione (retrogrado) dell'intervallo AV.

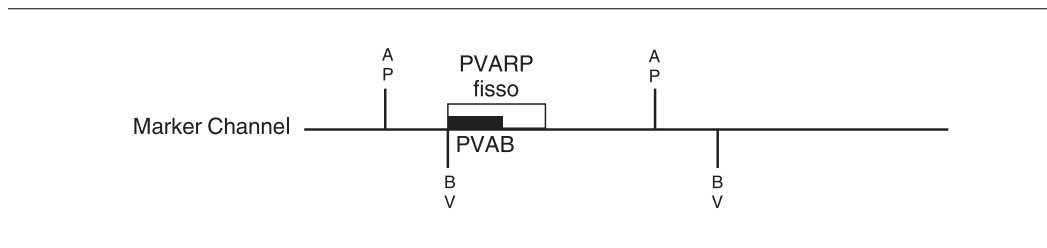**Figura 71.** Tempistica del PVARP fisso



Il parametro PVARP può essere programmato su Automatico anziché su un valore fisso. Il PVARP automatico modifica il PVARP in risposta alle variazioni della frequenza intrinseca o di stimolazione del paziente. Durante un episodio di Cambio Modo, il dispositivo attiva il PVARP Automatico. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 7.6, “Adattamento del PVARP alle variazioni della frequenza cardiaca del paziente”, pagina 262.

Il parametro PVARP può essere prolungato dalla funzione di risposta a PVC o dalla funzione di intervento PMT.

### 7.1.5.2 Periodo refrattario atriale

Il parametro del periodo refrattario atriale può essere programmato soltanto per i modi di stimolazione monocamerale AAI e AAIR. Il periodo refrattario atriale previene l'inibizione della stimolazione atriale dovuta al far-field di onde R rilevato o al rumore.

## 7.1.6 Alcune considerazioni sulla programmazione del sensing

**Soglie di sensing** – Le soglie di sensing impostate programmando i parametri di sensibilità si applicano a tutte le funzioni di sensing, compreso il riconoscimento, la stimolazione antibradicardica ed il test di sensing.

**Stimolazione antibradicardica e sensing** – Una lunga durata dell'impulso di stimolazione o un'ampiezza elevata abbinata ad una bassa soglia di sensing può provocare oversensing attraverso le camere o nella stessa camera. Programmando una durata dell'impulso inferiore, un'ampiezza più bassa, un periodo di blanking post-stimolazione più lungo o una soglia di sensing più elevata, è possibile eliminare questo sensing inappropriato.

**Alta soglia di sensing ventricolare** – Si consiglia di non impostare la sensibilità RV su un valore superiore a 0,6 mV, tranne che per scopi di test. Ciò potrebbe infatti provocare undersensing che, a sua volta, può determinare una delle seguenti situazioni:

- stimolazione asincrona
- mancato riconoscimento delle tachiaritmie
- ritardo o interruzione dell'erogazione della terapia di cardioversione
- ritardo nell'erogazione della terapia di defibrillazione (quando la conferma della VF è attiva)

**Sensing durante la VF** – Verificare sempre che il dispositivo effettui un rilevamento corretto durante la VF. Se il dispositivo non effettua un sensing o un riconoscimento corretti, disattivare il riconoscimento e le terapie ed esaminare il sistema (monitorando il paziente per accertare la presenza di eventuali tachiaritmie mortali finché le funzioni di riconoscimento e le terapie non vengono riattivate). Ai fini di un sensing corretto, potrebbe essere necessario riposizionare o sostituire l'elettrocattetere di sensing ventricolare.

**Modi di sensing bicamerale e stimolazione antibradicardica** – Il dispositivo esegue sempre il sensing sia nell'atrio che nel ventricolo, a meno che il modo di stimolazione antibradicardica programmato non sia DOO, VOO o AOO. Programmando il modo di stimolazione su DOO o VOO, nel ventricolo non avviene alcun sensing. Programmando il modo di stimolazione su DOO o AOO, nell'atrio non avviene alcun sensing.

**Soglia di sensing atriale elevata** – Impostando la sensibilità A. su un valore troppo elevato, il sensing delle onde P da parte del dispositivo durante gli episodi di AT/AF ed il ritmo sinusale potrebbe risultare inaffidabile.

**Stimolazione atriale e sensing ventricolare** – Se il dispositivo viene programmato su un modo di stimolazione atriale, assicurarsi che non rilevi gli impulsi di stimolazione atriale come se fossero eventi ventricolari.

**Selezione degli elettrocateretri atriali** – Gli elettrocateretri atriali con una distanza interelettroda punta-anello ridotta (ad esempio, 10 mm) possono ridurre il sensing del far field di onda R.

**Riposizionamento dell'elettrocaterete atriale** – Se la riprogrammazione della soglia di sensing atriale impostata riprogrammando il parametro Sensibilità A. non dovesse assicurare un sensing atriale affidabile durante gli episodi di AT/AF ed il ritmo sinusale, potrebbe essere necessario riposizionare o sostituire l'elettrocaterete di sensing atriale.

**PVAB Assoluto** – Il metodo PVAB non può essere impostato su Assoluto quando il modo di stimolazione programmato è ODO, AAI o AAIR.

**Frequenze massime e periodi refrattari** – Una combinazione di frequenza massima del sensore e frequenza massima di trascinamento impostate su un valore elevato ed un lungo periodo refrattario può dar luogo ad una stimolazione atriale competitiva. Per ulteriori informazioni, consultare la Sezione 7.8, "Prevenzione della stimolazione atriale competitiva", pagina 267.

**Bassa soglia di sensing** – Impostando un parametro di sensibilità sul valore di sensibilità massima, il dispositivo diventa più sensibile alle interferenze elettromagnetiche (EMI), al sensing nella camera opposta ed all'oversensing.

**Soglia di sensing ventricolare consigliata** – Si consiglia di impostare la sensibilità RV su 0,3 mV per aumentare al massimo le probabilità di riconoscimento di VF e limitare le possibilità di oversensing e di sensing nella camera opposta.

**Soglia di sensing atriale consigliata** – Si consiglia di impostare la sensibilità A. su 0,3 mV per ottimizzare l'efficacia del riconoscimento atriale e delle operazioni di stimolazione, limitando le possibilità di oversensing e di sensing nella camera opposta.

**Test della sensibilità dopo la riprogrammazione** – Se si modifica la soglia o la polarità di sensing ventricolare, verificare che il sensing sia corretto. Se opportuno, condurre un test per verificare che il riconoscimento venga eseguito correttamente inducendo una VF e lasciando che il dispositivo rilevi e tratti automaticamente la tachiaritmia.

## 7.1.7 Programmazione del sensing

### 7.1.7.1 Programmazione delle sensibilità, delle polarità e dei periodi di blanking

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
  - ▷ Sensibilità A.
  - ▷ Sensibilità RV
  - ▷ Polarità di sensing RV
- ⇒ Blanking...
  - ▷ Intervallo PVAB
  - ▷ Metodo PVAB
  - ▷ Blanking A. post AP
  - ▷ Blanking A. post AS
  - ▷ Blanking V. post VP
  - ▷ Blanking V. post VS

### 7.1.7.2 Programmazione dei periodi refrattari

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ PVARP...
  - ▷ PVARP (o Refrattario A.)
  - ▷ PVARP minimo

## 7.1.8 Valutazione del sensing

### 7.1.8.1 Utilizzo del test di sensing per valutare il sensing

Il test di sensing consente di misurare le ampiezze delle onde P e delle onde R. Queste misurazioni possono essere utili per la valutazione dell'integrità degli elettrocateri e delle prestazioni di sensing. Una volta completato il test di sensing, i risultati del test vengono visualizzati nella schermata Test. I risultati possono essere visualizzati e stampati ogni volta che lo si desidera. Per ulteriori informazioni cfr. la Sezione 10.4, "Esecuzione di un test di sensing", pagina 424.

### 7.1.8.2 Visualizzazione del contatore di integrità del sensing

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica dispositivo/elettrocattetero
- ⇒ Misurazioni batteria ed elettrocatteteri

**Figura 72.** La schermata Misurazioni batteria ed elettrocatteteri

Dati - Misurazioni batteria ed elettrocatteteri			
<b>Tensione della batteria</b>		<b>Impedenza dell'elettrocattetero</b> <input type="button" value="»"/>	
(RRT=2.63V)		Stim. A.	532 ohm 11-Lug-2007
11-Lug-2007		Stim. RV	475 ohm 11-Lug-2007
Tensione		Stimol. LV	494 ohm 11-Lug-2007
3.20 V		(Punta LV/Anello LV)	
<b>Ultima ricarica condensatori</b>		Defib RV	25 ohm 11-Lug-2007
05-Lug-2007		Defib SVC	24 ohm 11-Lug-2007
Tempo di carica	13.4 s	<b>Sensing</b> <input type="button" value="»"/>	
Energia	0.0 - 35 J	Ampiezza dell'onda P	2.4 mV 11-Lug-2007
<b>Ultima carica</b>		Ampiezza dell'onda R	5.6 mV 11-Lug-2007
11-Lug-2007		<b>Ultima terapia ad alta tensione</b>	
Tempo di carica	12.4 s	11-Lug-2007	
Energia	1.6 - 35 J	Impedenza misurata	32 ohm
<b>Contatore integrità del sensing</b>		Energia erogata	34 J
(se contatore >300, verificare i problemi di sensing)		Forma d'onda	Bifasica
Da	11-Lug-2007	Percorso	B>AX
Intervalli V-V brevi	59		
<b>Controllo posizione elettrocattetero atriale</b>			
Nessuna misuraz. dal reset.			


Il contatore di integrità del sensing registra il numero di intervalli ventricolari brevi che si verificano tra una sessione paziente e l'altra. Un numero elevato di intervalli ventricolari brevi può indicare oversensing, la rottura di un elettrocattetero o una vite di fissaggio allentata.

**Nota:** se il numero di intervalli brevi visualizzati è superiore a 300, il programmatore visualizza un'osservazione Quick Look II.

### 7.1.8.3 Visualizzazione delle tendenze dell'ampiezza delle onde P e delle onde R

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica dispositivo/elettrocattetero
- ⇒ Tendenze ampiezza onda P/R

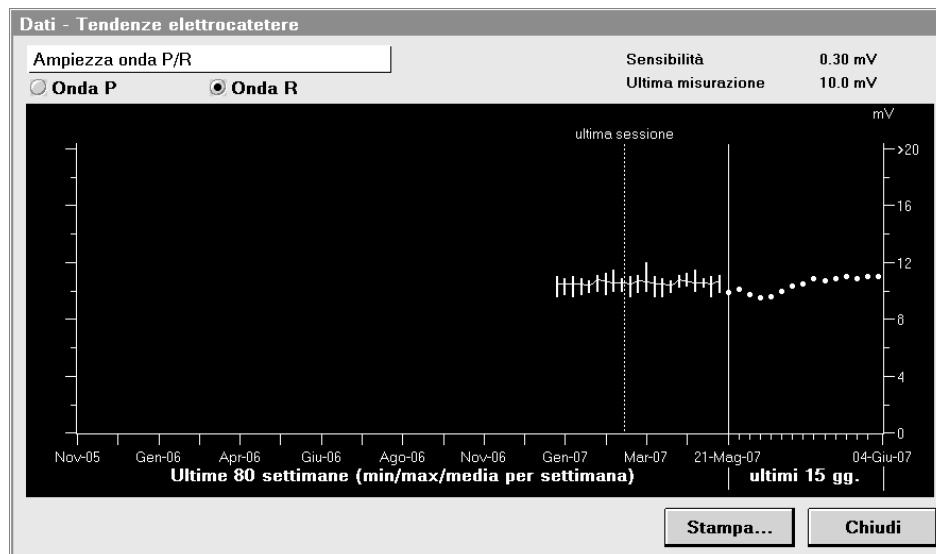**Figura 73.** Tendenza ampiezza onda R

Il dispositivo inizia a misurare l'ampiezza degli eventi intrinseci rilevati ogni notte alle ore 2: 15. Il dispositivo tenta inoltre di misurare l'ampiezza di nove eventi intrinseci normali rilevati per poi registrare il valore mediano di tali eventi. Se il dispositivo non raccoglie nove misurazioni dell'ampiezza entro la mezzanotte, non viene registrata alcuna misurazione. Nel grafico sulle tendenze dell'ampiezza del sensing sarà presente un'interruzione per quel determinato giorno.

## 7.2 Erogazione delle terapie di stimolazione

La terapia di stimolazione può essere indicata per una varietà di disturbi. Tra questi disturbi figurano l'asistolia cardiaca, l'AT/AF cronica, la perdita di sincronia atrioventricolare (AV) o una funzione ventricolare insufficiente dovuta ad uno scompenso cardiaco.

### **7.2.1 La soluzione offerta dal sistema è rappresentata dalle terapie di stimolazione**

Il sistema dispone di modi di stimolazione bicamerale, monocamerale e di resincronizzazione cardiaca (CRT) per trattare svariate cardiopatie. La stimolazione bicamerale ripristina la sincronia A-V rilevando e stimolando due camere cardiache: l'atrio destro ed il ventricolo destro. La stimolazione monocamerale è indicata per i pazienti con asistolia sporadica o nessun evento asistolico, oppure i pazienti affetti da AT/AF cronica e per i quali la stimolazione bicamerale non è indicata. La stimolazione CRT consente di aggiungere una terza area di stimolazione nel ventricolo sinistro per migliorare la contrazione meccanica dei ventricoli ed aumentare la gettata cardiaca di ogni battito del cuore.

### **7.2.2 Funzionamento della stimolazione e del sensing**

L'energia di uscita per gli impulsi di stimolazione in ogni camera viene determinata dai parametri di ampiezza e durata impulso programmati singolarmente. Nonostante sia possibile programmare questi parametri manualmente, la funzione Gestione cattura consente di gestire le energie di uscita della stimolazione nel ventricolo sinistro. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 7.4, "Gestione delle energie di stimolazione in uscita con la funzione Gestione cattura", pagina 251.

Il dispositivo assicura il sensing sia dell'atrio che del ventricolo destro. Per informazioni sulle soglie di sensing, sulla polarità degli elettrocateteri, sui periodi di blanking e sui periodi refrattari, vedere la Sezione 7.1, "Sensing dell'attività cardiaca intrinseca", pagina 219.


### **7.2.3 Funzionamento della stimolazione bicamerale**

Nei modi bicamerale, il sensing e la stimolazione hanno luogo sia nell'atrio che nel ventricolo. I modi di stimolazione bicamerale sono DDDR, DDD, DDIR e DDI. Nel modo DDD, la stimolazione ha luogo alla frequenza minima programmata in assenza di attività atriale intrinseca. Nel modo DDI, la stimolazione ha luogo con la frequenza minima programmata. Nei modi DDDR e DDIR, che sono a risposta in frequenza, la stimolazione ha luogo con la frequenza del sensore.

### 7.2.3.1 Modi DDDR e DDD

DDDR e DDD sono modi di stimolazione a trascinamento atriale. Il trascinamento atriale avviene quando il dispositivo pianifica un evento ventricolare stimolato dopo aver rilevato un evento atriale intrinseco (cfr. la Figura 74). Il ritardo che intercorre tra l'evento atriale rilevato e l'evento ventricolare stimolato corrispondente è l'intervallo SAV. Il ritardo che intercorre tra l'evento atriale stimolato e l'evento ventricolare stimolato corrispondente è l'intervallo PAV. Se un intervallo di stimolazione termina prima che il dispositivo abbia rilevato un evento atriale, il dispositivo stimola l'atrio e poi pianifica un evento ventricolare stimolato che avrà luogo al termine dell'intervallo PAV. Se durante l'intervallo SAV o PAV si verifica un evento ventricolare rilevato, la stimolazione ventricolare viene inibita. Un evento atriale rilevato che ha luogo durante il periodo refrattario atriale post-ventricolare (PVARP) viene classificato come refrattario, non inibisce la stimolazione atriale e non viene trascinato. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 7.6, "Adattamento del PVARP alle variazioni della frequenza cardiaca del paziente", pagina 262.

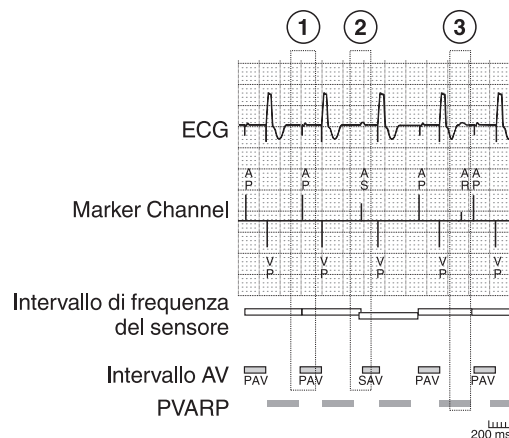**Figura 74.** Funzionamento della stimolazione bicamerale in modo DDDR




- 1 Un evento atriale stimolato dà avvio ad un intervallo PAV.
- 2 Un evento atriale rilevato dà avvio ad un intervallo SAV.
- 3 Durante il periodo PVARP, un evento atriale rilevato non viene trascinato.



### 7.2.3.2 Modi DDIR e DDI

Nei modi DDIR e DDI, gli eventi atriali rilevati non vengono trascinati. Quando viene rilevato un evento atriale, la stimolazione atriale viene inibita ma l'intervallo SAV non ha inizio (cfr. la Figura 75). Al contrario, la stimolazione ventricolare viene erogata con la frequenza di stimolazione corrente (ad esempio, alla frequenza minima o alla frequenza del sensore). Se l'intervallo di stimolazione corrente termina prima che il dispositivo abbia rilevato un evento atriale, il dispositivo stimola l'atrio per poi pianificare un evento ventricolare stimolato che avrà luogo al termine dell'intervallo PAV. Se durante l'intervallo PAV si verifica un evento ventricolare rilevato, la stimolazione ventricolare verrà inibita. Un evento atriale rilevato che si verifica durante il PVARP viene classificato come refrattario e non inibisce la stimolazione atriale. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 7.6, "Adattamento del PVARP alle variazioni della frequenza cardiaca del paziente", pagina 262.

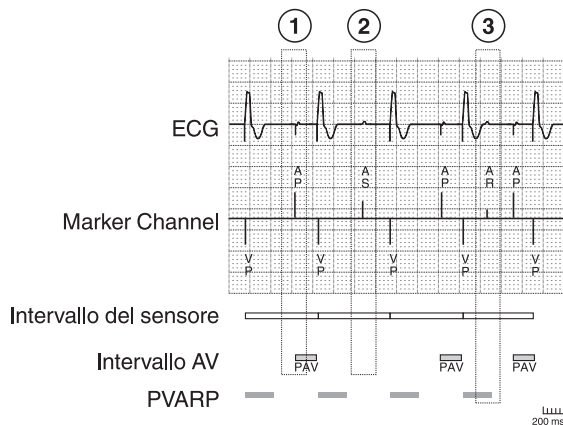**Figura 75.** Funzionamento della stimolazione bicamerale in modo DDIR



- 1 Un evento atriale stimolato dà avvio ad un intervallo PAV.
- 2 Un evento atriale rilevato inibisce l'evento atriale stimolato pianificato ma non dà avvio ad alcun intervallo SAV (non viene trascinato).
- 3 Un evento atriale rilevato durante il PVARP non inibisce l'evento atriale stimolato pianificato.

### 7.2.3.3 Modo ODO (stimolazione antibradicardica disattivata)

Il modo ODO non eroga alcuna stimolazione ventricolare o atriale, indipendentemente dalla frequenza intrinseca. Il modo ODO è destinato solo a quelle situazioni in cui la stimolazione antibradicardica non è necessaria.

Quando la stimolazione è programmata sul modo ODO, il sensing bicamerale, il riconoscimento atriale, il riconoscimento ventricolare, la terapia di ATP, la defibrillazione e la cardioversione continuano a funzionare come programmato.

**Attenzione:** il dispositivo non fornisce alcun supporto di stimolazione se programmato in modo ODO. Utilizzare il modo ODO soltanto nelle situazioni cliniche in cui la stimolazione antibradicardica non è necessaria o è dannosa per il paziente.

#### 7.2.3.4 Modo DOO

Il modo DOO consente di erogare una stimolazione sequenziale AV alla frequenza minima programmata senza inibizione da parte di eventi intrinseci.

**Avvertenza:** se programmato in modo DOO, il dispositivo non effettua sensing né riconoscimento in nessuna delle due camere. Utilizzare il modo DOO solo nelle situazioni in cui la stimolazione asincrona è garantita.

Per programmare il dispositivo sul modo DOO, il riconoscimento di VT e di VF deve essere programmato su Off mentre il riconoscimento di AT/AF deve essere programmato su Monitoraggio.

#### 7.2.4 Funzionamento della stimolazione CRT


La stimolazione CRT consente di stimolare sia il ventricolo sinistro che il ventricolo destro. La stimolazione di entrambi i ventricoli può migliorare la contrazione ventricolare meccanica in modo da aumentare la gettata cardiaca di ogni battito del cuore. Per ulteriori informazioni sulla stimolazione CRT, cfr. la Sezione 6.1, “Erogazione della stimolazione biventricolare per la resincronizzazione cardiaca”, pagina 180.

#### 7.2.5 Funzionamento della stimolazione monocamerale

Con i modi di stimolazione monocamerale si possono stimolare l'atrio o il ventricolo.

##### 7.2.5.1 Modi VVIR e VVI

Nei modi VVIR e VVI, il ventricolo viene stimolato se non vengono rilevati eventi ventricolari intrinseci. La stimolazione ha luogo alla frequenza minima programmata nel modo VVI e alla frequenza del sensore nel modo VVIR (cfr. la Figura 76). Nei modi VVIR e VVI, il dispositivo continua a rilevare gli eventi atriali ai fini del riconoscimento delle tachiaritmie.

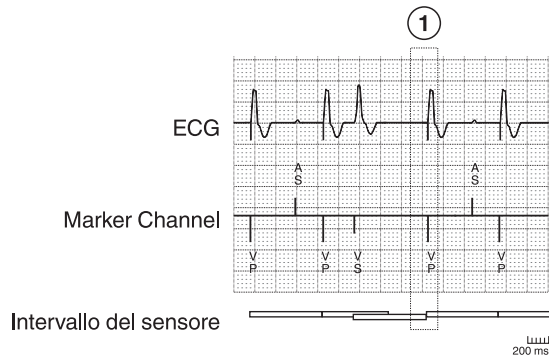**Figura 76.** Funzionamento della stimolazione ventricolare monocamerale in modo VVIR


- 1 Un evento ventricolare stimolato ha luogo quando non viene rilevato alcun evento ventricolare intrinseco.

### 7.2.5.2 Modi AAIR e AAI

Nei modi AAIR e AAI, l'atrio viene stimolato se non vengono rilevati eventi atriali intrinseci. La stimolazione ha luogo alla frequenza minima programmata nel modo AAI e alla frequenza del sensore nel modo AAIR (cfr. la Figura 77).

Un evento atriale rilevato che ha luogo durante il periodo refrattario atriale viene classificato come refrattario e non inibisce la stimolazione atriale. Nei modi AAIR e AAI, il dispositivo continua a rilevare gli eventi ventricolari ai fini del riconoscimento delle tachiaritmie. Il riconoscimento di VT/VF è compromesso nei modi AAIR e AAI. Il blanking nella camera opposta può impedire il rilevamento degli eventi ventricolari, mentre il crosstalk può causare un falso riconoscimento.

**Avvertenza:** non utilizzare il modo AAIR o AAI nei pazienti in cui la conduzione del nodo atrioventricolare è compromessa perché questi modi non forniscono alcun supporto ventricolare.

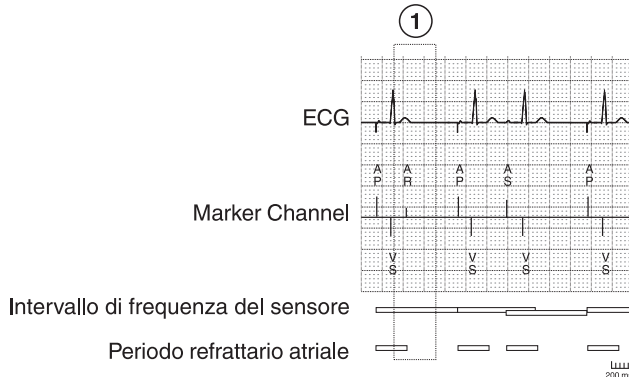**Figura 77.** Funzionamento della stimolazione atriale monocamerale nel modo AAIR

- 1 In caso di un evento atriale durante il periodo refrattario atriale, l'intervallo di stimolazione A-A non viene riavviato.

### 7.2.5.3 Modo VOO

Il modo VOO eroga una stimolazione ventricolare alla frequenza minima programmata senza inibizione da parte di eventi ventricolari intrinseci.

Il riconoscimento ventricolare non è disponibile nel modo VOO, nonostante il dispositivo continui a rilevare in atrio ed a monitorare le aritmie atriali. Per poter programmare il dispositivo in modo VOO, il riconoscimento di AT/AF deve essere programmato su Monitoraggio mentre il riconoscimento di VT e di VF deve essere programmato su Off.

### 7.2.5.4 Modo AOO

Il modo AOO eroga una stimolazione atriale alla frequenza minima programmata senza inibizione da parte di eventi atriali intrinseci.

Quando il dispositivo è programmato in modo AOO, non è possibile eseguire alcun riconoscimento atriale ma soltanto il sensing ventricolare. Per poter programmare il dispositivo in modo AOO, il riconoscimento di AT/AF deve essere programmato su Monitoraggio mentre il riconoscimento di VT e di VF deve essere programmato su Off.

## **7.2.6 Alcune considerazioni sulla programmazione delle terapie di stimolazione**

### **7.2.6.1 Selezione del modo di stimolazione**

**TherapyGuide** – Per stabilire il modo di stimolazione più appropriato per un determinato paziente, si consiglia di utilizzare la funzione TherapyGuide. Per ulteriori informazioni sulla funzione TherapyGuide, cfr. la Sezione 3.9, “Utilizzo della funzione TherapyGuide per selezionare i valori di parametro”, pagina 73.

### **7.2.6.2 Alcune considerazioni sulla programmazione della stimolazione bicamerale**

**Intervallo SAV e PAV** – L'intervallo SAV viene solitamente programmato su un valore più basso dell'intervallo PAV di 30 ms-50 ms. Ciò avviene per compensare per il ritardo intrinseco che intercorre tra l'evento cardiaco effettivo nell'atrio e il momento del suo rilevamento da parte del dispositivo.

**Frequenza massima di trascinamento** – Programmando frequenze massime di trascinamento più elevate, SAV e PVARP dovrebbero essere programmati su valori tali da assicurare un trascinamento 1:1 (cfr. la Sezione 7.2.9, “Trascinamento di frequenze atriali rapide”, pagina 239).

**Frequenze massime e periodi refrattari** – Una combinazione di frequenza massima del sensore e impostata su un valore elevato ed un lungo periodo refrattario può dar luogo ad una stimolazione atriale competitiva (cfr. la Sezione 7.2.9, “Trascinamento di frequenze atriali rapide”, pagina 239). Valutare l'attivazione della stimolazione atriale non competitiva (NCAP).

**Margini di sicurezza della stimolazione** – Gli impulsi di stimolazione devono essere erogati con un margine di sicurezza adeguato, al di sopra delle soglie di stimolazione.

**Livelli di uscita di stimolazione elevati** – I valori di durata e ampiezza dell'impulso influiscono sulla durata del dispositivo, soprattutto se il paziente necessita molto spesso di una terapia di stimolazione antibradicardica.

**Sensing nella camera opposta** – Le impostazioni della durata e dell'ampiezza dell'impulso possono influire sul sensing nella camera opposta. Se i valori della durata e dell'ampiezza dell'impulso sono troppo elevati, gli impulsi di stimolazione in una camera potrebbero essere rilevati nell'altra, con conseguente inibizione inappropriata della stimolazione.

### 7.2.7 Programmazione delle terapie di stimolazione

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
  - ▷ Modo
  - ▷ Frequenza minima
  - ▷ Trascin. max
  - ▷ Sensore max
  - ▷ Ampiezza atriale
  - ▷ Durata impulso atriale
  - ▷ Ampiezza RV
  - ▷ Durata impulso RV
  - ▷ Ampiezza LV
  - ▷ Durata impulso LV
  - ▷ Stimolazione V.
  - ▷ Ritardo V-V
- ⇒ AV stimolato...
  - ▷ AV stimolato
  - ▷ AV rilevato

### 7.2.8 Valutazione delle terapie di stimolazione

Per verificare che il dispositivo stia stimolando in maniera adeguata, rivedere i dati relativi alla percentuale di tempo (% di tempo) nella schermata Quick Look II.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Quick Look II

**Percentuale di tempo (% di tempo)** – Nei modi monocamerale, nella sezione % di tempo la stimolazione ed il sensing del paziente vengono registrati come percentuale del tempo totale durante il periodo di registrazione. Nei modi bicamerale, nella sezione % di tempo viene registrata la percentuale per ciascuna delle possibili combinazioni di sequenze AV (AS-VS, AS-VP, AP-VS, AP-VP).

**Figura 78.** Percentuali di stimolazione nella schermata Quick Look II


% di tempo	
AS-VS	<0.1 %
AS-VP	80.7 %
AP-VS	<0.1 %
AP-VP	19.2 %

## 7.2.9 Trascinamento di frequenze atriali rapide

Quando il dispositivo funziona in modo DDDR o DDD, il dispositivo è in grado di trascinare i ritmi atriali solo fino ad una determinata frequenza. Tra le limitazioni per il trascinamento atriale figurano la frequenza di blocco 2:1 e la frequenza massima di trascinamento come descritto nella Sezione 7.2.9.1.

### 7.2.9.1 Blocco 2:1

Il blocco 2:1 ha luogo quando l'intervallo atriale intrinseco è talmente breve che ogni altro evento atriale rilevato si verifica durante il PVARP (cfr. la Figura 79). Questi eventi atriali non danno avvio ad alcun intervallo SAV e non determinano pertanto alcun evento ventricolare stimolato. Dal momento che viene trascinato soltanto ogni altro evento atriale rilevato, la frequenza di stimolazione ventricolare viene dimezzata rispetto alla frequenza atriale. Il blocco 2:1 può rivelarsi un utile strumento per prevenire le frequenze di stimolazione ventricolare rapide all'insorgenza dell'AT/AF. Tuttavia, il blocco 2:1 durante lo sforzo è di norma indesiderabile poiché la frequenza di stimolazione ventricolare può scendere improvvisamente ad un valore che è la metà della frequenza atriale. L'improvvisa riduzione della gettata cardiaca può dar luogo a sintomi nel paziente.

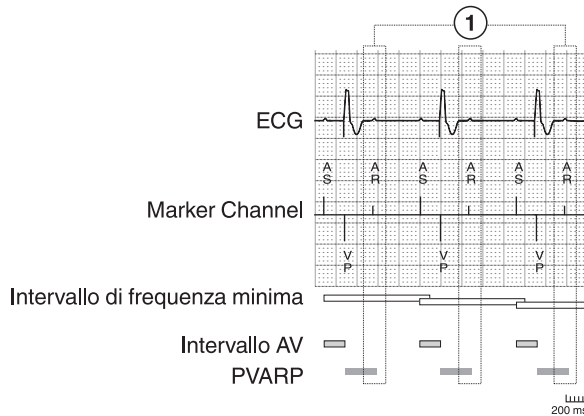**Figura 79.** Esempio di stimolazione con la frequenza di blocco 2:1

1 Un evento atriale su due ha luogo durante il PVARP e non viene trascinato.

In taluni casi, la portata della caduta di frequenza è meno grave per via della stimolazione con la frequenza del sensore (nel modo DDDR) o per effetto di svariate funzioni di stabilizzazione della frequenza, regolarizzazione o stimolazione in overdrive.

Un metodo comune utilizzato per prevenire il blocco 2:1 in presenza di frequenze di esercizio elevate (ad esempio, superiori ai  $150 \text{ min}^{-1}$ ) consiste nel programmare dei valori inferiori a quelli nominali per il SAV ed il PVARP. Utilizzando le funzioni AV adattabile alla frequenza e PVARP automatico, è possibile accorciare in maniera dinamica i valori correnti del SAV e del PVARP durante l'esercizio. Per ulteriori informazioni sul PVARP, cfr. la Sezione 7.6, "Adattamento del PVARP alle variazioni della frequenza cardiaca del paziente", pagina 262. Queste funzioni possono prevenire un blocco 2:1 sintomatico durante l'esercizio consentendo un SAV ed un PVARP su valori nominali o superiori a frequenze a riposo per prevenire le frequenze di stimolazione ventricolare rapida durante l'insorgenza dell'AT/AF.

Quando si programmano i parametri SAV o PVARP, il programmatore calcola e visualizza la frequenza di blocco 2:1. Se la frequenza di blocco 2:1 è dinamica a causa delle funzioni AV adattabile alla frequenza o PVARP automatico, sullo schermo vengono visualizzate frequenze di blocco 2:1 sia a riposo che durante l'esercizio.




### 7.2.9.2 Frequenza massima di trascinamento

The programmable Upper Tracking Rate also places a limit on the fastest ventricular pacing rate during atrial tracking. Di solito, la frequenza massima di trascinamento viene programmata su una frequenza più bassa rispetto alla frequenza di blocco 2:1 durante l'esercizio. Se ciò non avviene, la frequenza di blocco 2:1 diventa il limite assoluto e la frequenza massima di trascinamento non può essere raggiunta.

In caso di frequenze sinusali pari o inferiori alla frequenza massima di trascinamento programmata, può verificarsi un trascinamento atriale 1:1. Poiché la frequenza sinusale aumenta fino a superare la frequenza massima di trascinamento, la frequenza di stimolazione ventricolare resta pari alla frequenza massima di trascinamento mentre l'intervallo SAV osservato (intervallo AS-VP) viene prolungato ad ogni ciclo di stimolazione successivo. Alla fine, dopo diversi cicli di stimolazione, si verifica un evento atriale rilevato durante il PVARP e non viene trascinato, determinando un calo dei battiti. Questo schema si ripete finché la frequenza sinusale resta al di sopra della frequenza massima di trascinamento programmata. Il calo dei battiti si verifica con meno frequenza quando la frequenza sinusale è solo leggermente superiore alla frequenza massima di trascinamento (ad esempio, ogni sette o otto battiti) e con maggiore frequenza quando la frequenza sinusale supera ampiamente la frequenza massima di trascinamento (ad esempio, ogni tre o quattro battiti).

Questo comportamento della frequenza massima di trascinamento è noto come "pacemaker Wenckebach" (cfr. la Figura 80). Il comportamento Wenckebach può essere ulteriormente influenzato dalla frequenza di occorrenza del calo di battiti, solitamente come rapporto del numero di eventi atriali rilevati rispetto agli eventi ventricolari stimolati (ad esempio, 8:7, 7:6, 6:5 o 3:2). Ulteriori aumenti della frequenza atriale possono alla fine raggiungere la frequenza di blocco 2:1, per cui il rapporto diventa 2:1.

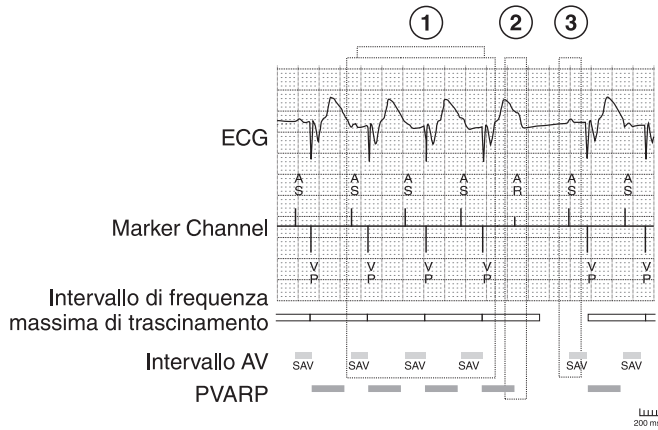**Figura 80.** Esempio di stimolazione Wenckebach

- 1 Gli intervalli SAV vengono prolungati in modo tale che gli eventi ventricolari non interferiscano con la frequenza massima di trascinamento.
- 2 Un evento atriale ha luogo durante il PVARP e non viene trascinato.
- 3 Il trascinamento riprende con gli eventi atriali successivi.

Per assicurare un corretto riconoscimento delle tachiaritmie, il programmatore forza la programmazione di diverse frequenze di riconoscimento delle tachiaritmie su un valore superiore alla frequenza massima di trascinamento programmata, impedendo la programmazione di lunghi periodi di blanking e di valori elevati per la frequenza massima di trascinamento.

## 7.3 Erogazione della stimolazione a risposta in frequenza


La frequenza cardiaca di taluni pazienti non si adatta alle variazioni della loro attività fisica. La loro sintomatologia potrebbe comprendere un respiro affannoso, affaticamento o capogiri. Tra i soggetti che ne sono interessati vi sono pazienti affetti da incompetenza cronotropica e pazienti con AF parossistica o cronica.

### 7.3.1 La soluzione offerta dal sistema è la risposta in frequenza

La stimolazione a risposta in frequenza adatta la frequenza di stimolazione alle variazioni nell'attività fisica del paziente. Il dispositivo utilizza un sensore di attività per misurare il movimento del paziente e per determinare la frequenza di stimolazione più appropriata, fornendo una risposta in frequenza dual-slope che può essere automatica o manuale.

### 7.3.2 Funzionamento della risposta in frequenza

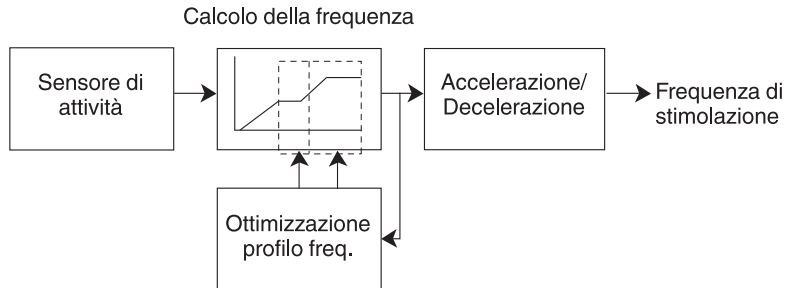**Figura 81.** Panoramica della risposta in frequenza



Il sistema di risposta in frequenza dispone di un sensore di attività per misurare il movimento del paziente, di una funzione di calcolo della frequenza per convertire il livello di attività fisica del paziente in una frequenza di stimolazione, di una funzione di ottimizzazione del profilo della frequenza per modificare automaticamente le impostazioni della risposta in frequenza nel tempo e di funzioni di accelerazione e decelerazione per rendere meno brusca la frequenza di stimolazione. Questa frequenza di stimolazione viene denominata anche "frequenza del sensore".

#### 7.3.2.1 Sensing di attività


Il sensore di attività è un accelerometro del dispositivo che rileva i movimenti corporei del paziente. Poiché il rilevamento dell'attività varia da paziente a paziente, la sensibilità al movimento può essere modificata riprogrammando il parametro Soglia di attività. Se la soglia di attività viene ridotta, anche i minimi movimenti corporei influiscono sulla frequenza di stimolazione. Se la Soglia di attività viene aumentata, i movimenti corporei devono essere di una certa portata per poter influenzare la frequenza di stimolazione. Il conteggio attività utilizzato per calcolare la frequenza del sensore viene ponderato in base alla frequenza ed all'ampiezza del segnale dell'accelerometro.

La frequenza di stimolazione viene determinata dal livello di attività fisica del paziente e dai parametri della risposta in frequenza. In assenza di attività (ad esempio, quando il paziente è seduto), la frequenza di stimolazione si avvicina all'impostazione della frequenza minima programmata. In caso di aumento dell'attività (ad esempio quando il paziente cammina), la frequenza di stimolazione è più elevata.

### 7.3.2.2 Calcolo della frequenza

La curva di frequenza mostra in che modo il dispositivo calcola la frequenza di stimolazione al variare del livello di attività del paziente.

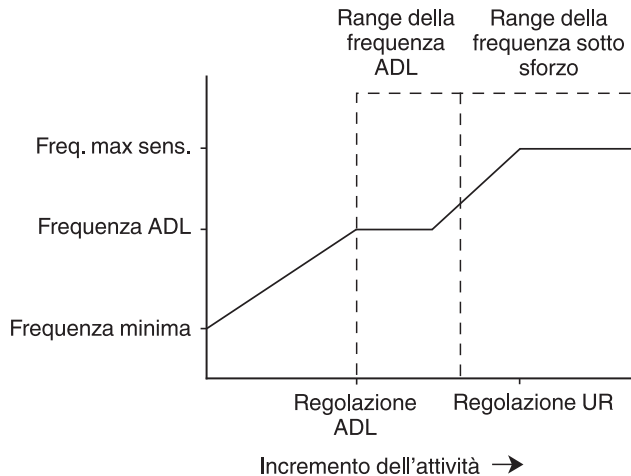**Figura 82.** La curva di frequenza



**Frequenze programmabili** – La frequenza minima è la frequenza più bassa con cui viene erogata la stimolazione in assenza di attività fisica. La frequenza per le attività quotidiane (Frequenza ADL) è la frequenza di stimolazione approssimativa durante un esercizio moderato e rappresenta una base che aiuta a mantenere una frequenza di stimolazione stabile in caso di variazioni in un'attività moderata. La frequenza massima del sensore è il limite massimo per la frequenza di stimolazione durante un esercizio vigoroso.

**Valori di riferimento per la risposta in frequenza** – I valori di riferimento definiscono i due slope caratteristici della risposta in frequenza dual-slope. La Regolazione ADL determina i conteggi ponderati delle attività che permettono alla frequenza di stimolazione di raggiungere la frequenza ADL. La Regolazione UR determina i conteggi ponderati delle attività che permettono alla frequenza di stimolazione di raggiungere la frequenza massima del sensore. Un valore di riferimento più basso significa che è necessario un numero inferiore di attività per raggiungere le frequenze massime.

**Risposta in frequenza automatica** – Con la risposta in frequenza automatica, l'ottimizzazione del profilo della frequenza continua a rettificare la curva di frequenza variando i valori di riferimento. In questo caso, i valori di riferimento non sono programmabili. La curva di frequenza viene modificata in base al modo in cui sono programmati i parametri Risposta ADL e Risposta sotto sforzo. La Risposta ADL controlla il primo slope, che

determina il livello di aggressività con cui la frequenza di stimolazione passa dalla frequenza minima alla frequenza ADL. La Risposta sotto sforzo controlla il secondo slope, che determina il livello di aggressività con cui la frequenza di stimolazione si avvicina alla frequenza massima del sensore.

**Risposta in frequenza manuale (Ottimizzazione del profilo di frequenza programmato su Off)** – Con la Risposta in frequenza manuale, la curva di frequenza viene determinata durante una sessione paziente nel momento in cui si programmano le frequenze ed i valori di riferimento. La curva di frequenza rimane costante finché i parametri non vengono riprogrammati.

### 7.3.2.3 Ottimizzazione del profilo di frequenza

L'ottimizzazione del profilo di frequenza modifica automaticamente la risposta in frequenza da parte del paziente tra una visita ambulatoriale e quella successiva. L'obiettivo dell'ottimizzazione del profilo di frequenza è quello di assicurare che la risposta in frequenza resti adeguata per l'intera gamma di attività del paziente. Il dispositivo raccoglie e memorizza quotidianamente le medie giornaliere ed a lungo termine della percentuale di tempo relativo alla frequenza indicata dal sensore del paziente a varie frequenze di stimolazione. Il dispositivo utilizza successivamente i parametri Risposta ADL e Risposta sotto sforzo per definire la percentuale di tempo in cui la frequenza di stimolazione resta rispettivamente nel range di frequenza ADL e nel range di frequenza sotto sforzo. In base a confronti quotidiani, il dispositivo modifica la Regolazione ADL, la Regolazione UR o entrambi i valori di riferimento.

Questi confronti vengono influenzati dalla programmazione di nuove impostazioni per le frequenze o per l'ottimizzazione del profilo di frequenza. Le modifiche apportate sono immediate e determinano in che modo la risposta in frequenza dovrà variare in futuro in base alle informazioni memorizzate sulla frequenza del sensore ed alle impostazioni selezionate relative all'ottimizzazione del profilo di frequenza. Il dispositivo continua a modificare la risposta in frequenza nel tempo.

Il dispositivo adatta la risposta in frequenza in maniera più rapida nei primi 10 giorni dopo la prima attivazione post-impianto dell'ottimizzazione del profilo di frequenza oppure dopo la riprogrammazione manuale di determinati parametri della risposta in frequenza (Frequenza minima, Frequenza ADL, Frequenza massima del sensore, Risposta ADL o Risposta sotto sforzo). Lo scopo è quello di adeguare rapidamente la risposta in frequenza all'operazione desiderata modificando i parametri.


**Nota:** dal momento che il dispositivo modifica automaticamente i valori di riferimento, programmando manualmente i valori di riferimento l'ottimizzazione del profilo di frequenza viene disabilitata.

### 7.3.2.4 Accelerazione dell'attività e decelerazione dell'attività

Le funzioni Accelerazione attività e Decelerazione attività consentono di stabilizzare la frequenza di stimolazione. La funzione Accelerazione attività controlla la rapidità dell'aumento della frequenza di stimolazione. La funzione Decelerazione attività controlla invece la rapidità della riduzione della frequenza di stimolazione ed ha valori fissi e l'opzione "Esercizio". Il parametro Esercizio modifica la decelerazione in maniera dinamica in base all'intensità ed alla durata dell'esercizio e può prolungare la decelerazione fino a 20 min.

Come illustrato nella Figura 83, la modifica dei valori dei parametri Accelerazione attività e Decelerazione attività influisce sulla frequenza di stimolazione durante e dopo lo sforzo.

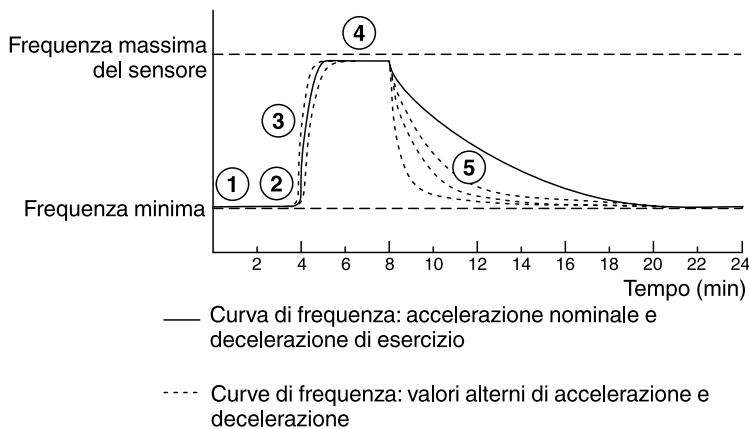**Figura 83.** Le curve di Accelerazione attività e Decelerazione attività per la risposta in frequenza



- 1 La stimolazione ha luogo quando il paziente è a riposo.
- 2 L'attività aumenta e l'accelerazione dell'attività ha inizio.
- 3 L'accelerazione dell'attività continua verso una frequenza di stimolazione più elevata.
- 4 La stimolazione ha luogo ad una frequenza più elevata durante lo sforzo.
- 5 Lo sforzo termina e la frequenza di stimolazione rallenta.

### 7.3.2.5 Risposta in frequenza durante l'impianto

La risposta in frequenza non è attiva durante le procedure di impianto al fine di evitare un aumento della stimolazione causata dalla manipolazione. La Risposta in frequenza e l'Ottimizzazione del profilo di frequenza diventano attivi a impianto avvenuto, quando Riconoscimento di VF è programmato su On.

### 7.3.2.6 La schermata dei parametri per la risposta in frequenza

Nella schermata dei parametri per la risposta in frequenza viene visualizzata la curva di frequenza corrispondente ai valori di parametro interrogati. Se si selezionano dei valori in sospenso per i parametri, nella schermata viene visualizzata anche una curva in sospenso. La curva in sospenso visualizza le modifiche immediate che vengono apportate dopo la riprogrammazione.

### 7.3.3 Alcune considerazioni sulla programmazione della risposta in frequenza

**Stimolazione a risposta in frequenza e modo DDD** – Quando il modo di stimolazione programmato è DDD e la funzione Cambio Modo è attivata, i parametri di risposta in frequenza sono programmabili. Tuttavia, questi parametri sono operativi solo durante gli episodi di cambio modo quando il modo corrente è DDIR.

**Regolazione della soglia di attività** – In molti casi, non sarà necessario riprogrammare il parametro Soglia di attività. Tuttavia, se il paziente ha una risposta in frequenza minima durante l'esercizio, potrebbe essere necessario programmare la soglia di attività su un valore inferiore (per una maggiore sensibilità). L'impostazione di massima sensibilità è "Bassa". Viceversa, se il paziente ha una frequenza di stimolazione elevata a riposo, potrebbe essere necessario programmare la soglia di attività su un valore superiore (per una minore sensibilità). L'impostazione di sensibilità minima è "Alta".

**Modifica dell'ottimizzazione del profilo di frequenza** – Prima di programmare gli altri parametri della risposta in frequenza, verificare che le impostazioni per la frequenza minima, la frequenza ADL e la frequenza massima del sensore siano appropriate per il paziente.

Nel caso in cui la riprogrammazione delle frequenze non dovesse sortire l'effetto desiderato sull'ottimizzazione del profilo di frequenza, potrebbe rendersi necessaria la riprogrammazione dei parametri Risposta ADL e Risposta sotto sforzo. Riprogrammando i parametri Risposta ADL e Risposta sotto sforzo, si può creare un profilo di frequenza adeguato allo stile di vita o al livello di attività del paziente per ogni range di frequenza.

Modificare la risposta ADL per definire la rapidità con cui il paziente raggiunge la frequenza ADL e la risposta sotto sforzo per definire la rapidità con cui il paziente raggiunge la frequenza massima del sensore. In entrambi i casi, un valore basso determina una riduzione della responsività della frequenza mentre un valore alto la fa aumentare.


**Nota:** nel caso in cui l'impostazione della risposta sotto sforzo non dovesse rendere la risposta in frequenza sufficientemente aggressiva, aumentare il valore della risposta ADL.

**Modifica manuale dei valori di riferimento** – È possibile disattivare l'ottimizzazione del profilo di frequenza e programmare i valori di riferimento manualmente. In questo caso, i parametri Regolazione ADL (per il Setpoint ADL) e Regolazione UR (per il Setpoint di

frequenza massima) determinano la curva della frequenza di stimolazione, mentre i calcoli della risposta in frequenza restano operativi come da programmazione.

### 7.3.4 Programmazione della risposta in frequenza

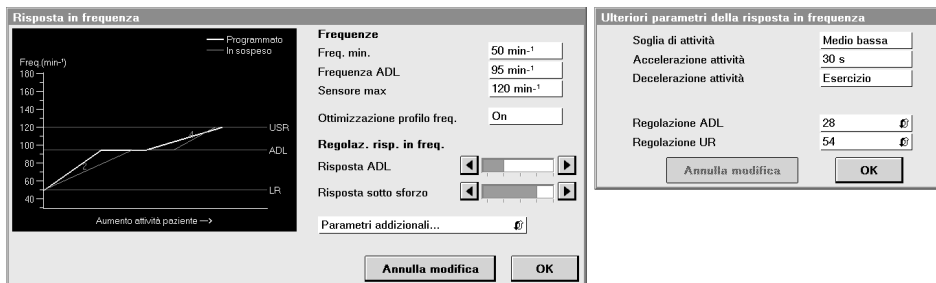**Figura 84.** Le schermate dei parametri della risposta in frequenza



Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Risposta in frequenza...
  - ▷ Frequenza minima
  - ▷ Frequenza ADL
  - ▷ Sensore max
  - ▷ Ottimizzazione profilo freq.
  - ▷ Risposta ADL
  - ▷ Risposta sotto sforzo
- ⇒ Altri parametri...
  - ▷ Soglia di attività
  - ▷ Accelerazione dell'attività
  - ▷ Decelerazione di attività
  - ▷ Regolazione ADL
  - ▷ Regolazione UR



### 7.3.5 Valutazione della risposta in frequenza

#### 7.3.5.1 Il rapporto degli istogrammi di frequenza

Selezionare l'icona Dati

⇒ Diagnostica clinica


⇒ Istogrammi frequenza (solo rapporto)

Il rapporto degli istogrammi di frequenza fornisce informazioni sulle prestazioni della risposta in frequenza dalla sessione paziente precedente.

Nella Figura 85, è possibile osservare come gli istogrammi siano cambiati dopo la programmazione della risposta in frequenza su un maggiore livello di aggressività.

Tenere presente che la percentuale di stimolazione atriale è passata dalle frequenze più basse alle frequenze più elevate.

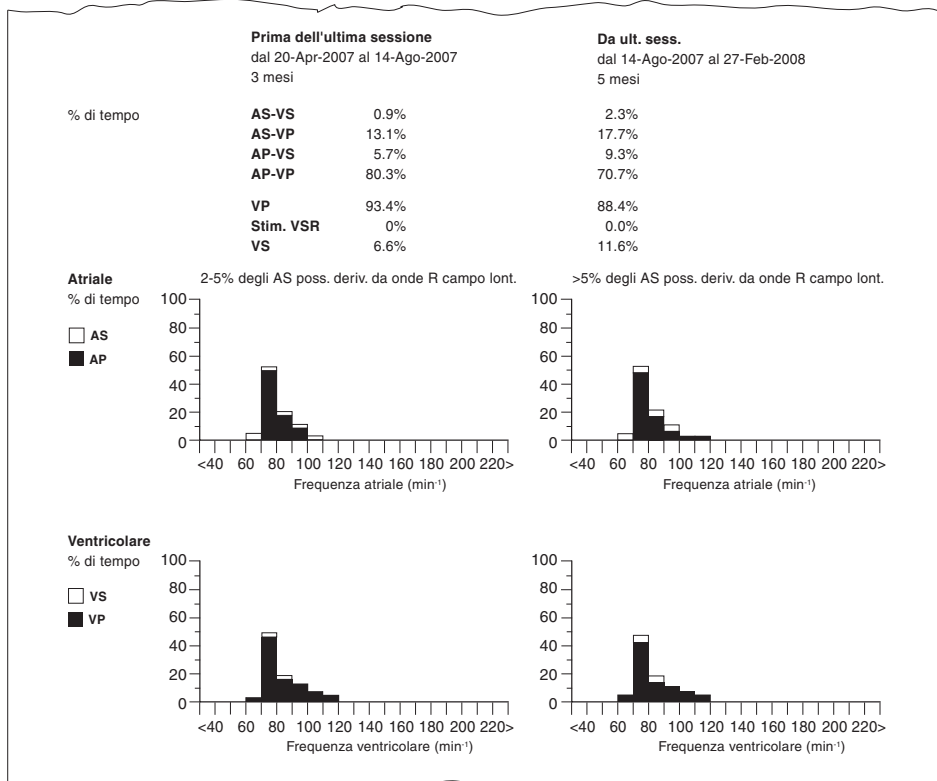**Figura 85.** Rapporto degli istogrammi di frequenza



### 7.3.5.2 La Memoria Flashback

Selezionare l'icona Dati


- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Memoria Flashback

La memoria Flashback mostra una tendenza della frequenza in base all'interrogazione iniziale. La tendenza della frequenza mostra in che modo stava funzionando la risposta in frequenza prima della sessione paziente.

1. Visualizzare la Memoria Flashback.
2. Selezionare Visualizzare gli intervalli prima di: Interrogazione.
3. Impostare il metodo di visualizzazione del diagramma su Frequenza.

**Nota:** per visualizzare una tendenza della frequenza aggiornata senza terminare la sessione paziente, invitare il paziente a camminare nella sala e successivamente reinterrogare il dispositivo.

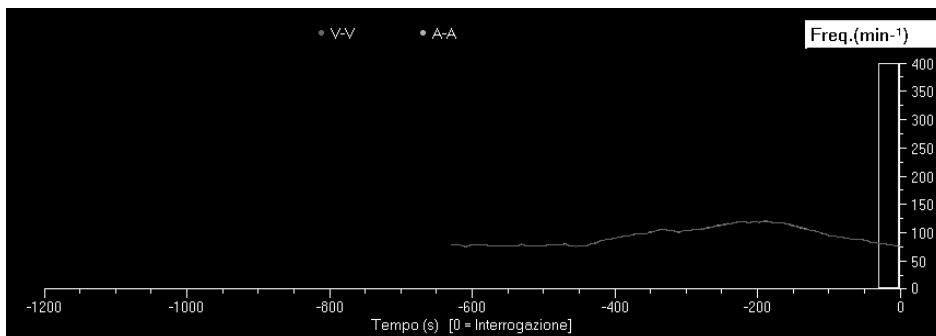**Figura 86.** Tendenza della frequenza nella memoria Flashback



## 7.4 Gestione delle energie di stimolazione in uscita con la funzione Gestione cattura

Mantenere dei margini di sicurezza adeguati per le energie di stimolazione in uscita ed ottimizzare la durata del dispositivo rappresentano due aspetti cruciali del trattamento del paziente. Una variazione delle condizioni del paziente può essere accompagnata da una variazione delle soglie di stimolazione. Ciò comporta un monitoraggio regolare delle uscite di stimolazione e la loro modifica, se necessario, per la cattura del miocardio.


### 7.4.1 Soluzione del sistema: la funzione Gestione cattura

La funzione Gestione cattura gestisce automaticamente le soglie di stimolazione nel ventricolo sinistro monitorando l'effettiva cattura del miocardio da parte degli impulsi di stimolazione ed eventualmente modificando l'ampiezza di questi ultimi in base alle mutate condizioni del paziente.

### 7.4.2 Funzionamento della Gestione cattura

Gestione cattura è una funzione programmabile per il ventricolo sinistro (LVCM). Durante il funzionamento della Gestione cattura, il dispositivo si prepara ad effettuare una ricerca della soglia di stimolazione, effettua la ricerca e determina l'impostazione della soglia. Nel corso del tempo, le misurazioni della soglia vengono raccolte per creare una tendenza di soglia. Programmando la LVCM su Adattata, il dispositivo può modificare automaticamente le uscite di stimolazione. Programmando la LVCM per il monitoraggio, non viene apportata alcuna modifica.

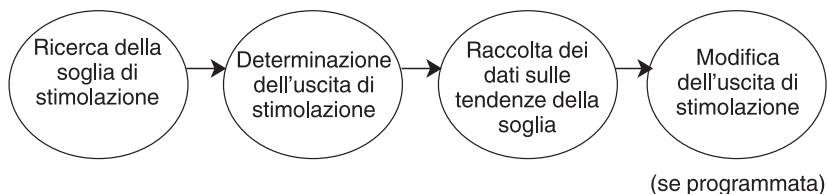**Figura 87.** Panoramica della Gestione cattura




#### **7.4.2.1 Modifica manuale delle uscite di stimolazione**

Il parametro Durata impulso LV deve essere programmato manualmente. Si può optare per la programmazione manuale del parametro Ampiezza LV anziché per l'utilizzo della funzione Gestione cattura LV automatica. I dati sulla soglia raccolti dalla LVCM possono facilitare la selezione di valori per il parametro Ampiezza LV. I parametri di ampiezza e durata dell'impulso dell'atrio e del ventricolo destro devono essere programmati manualmente. Prima di riprogrammare i parametri dell'uscita, controllare i margini di sicurezza di stimolazione. Per ulteriori informazioni sulla programmazione manuale, cfr. la Sezione 7.2, "Erogazione delle terapie di stimolazione", pagina 230.

#### **7.4.2.2 Soglie di stimolazione e margini di sicurezza**

I parametri di ampiezza e durata dell'impulso controllano l'energia di uscita degli impulsi di stimolazione in ogni camera. L'energia della stimolazione in uscita determina la cattura effettiva del miocardio da parte degli impulsi di stimolazione. È necessario che i valori della stimolazione in uscita siano superiori alla soglia di stimolazione di un certo margine di sicurezza. Le variazioni nella soglia di stimolazione possono essere provocate dall'esercizio fisico, dai pasti, dal sonno, dalle terapie farmacologiche e da alterazioni di altre condizioni cardiache da cui è affetto il paziente.

Nella Figura 88 sono illustrate una curva di soglia ed una curva del margine di sicurezza. La curva di soglia è composta da diverse combinazioni di impostazioni di ampiezza e durata dell'impulso. Le impostazioni dell'uscita di stimolazione che rientrano nella curva o la superano determinano la cattura, mentre le impostazioni al di sotto della curva determinano una perdita di cattura. La curva del margine di sicurezza è composta da impostazioni dell'uscita di stimolazione, ognuna delle quali ha un'ampiezza ottimale pari ad un'ampiezza di soglia con un margine di sicurezza applicato.

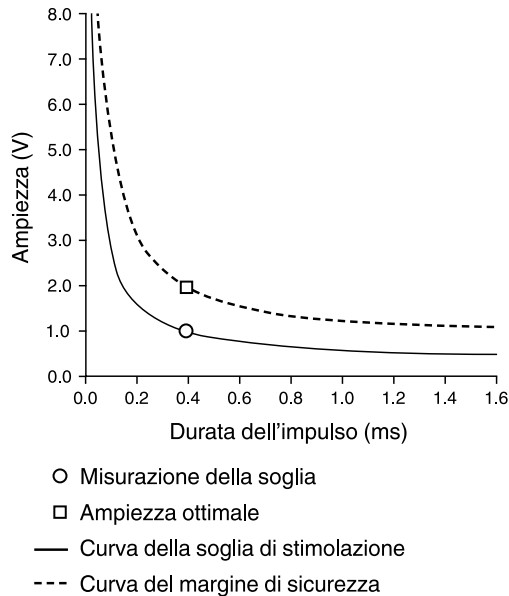**Figura 88.** Le curve di soglia e del margine di sicurezza

### 7.4.3 Funzionamento della gestione della cattura ventricolare sinistra

La gestione cattura ventricolare sinistra (LVCM) è disponibile quando il dispositivo funziona in modo DDDR, DDD o VVIR. La LVCM è inoltre disponibile quando il dispositivo passa dal modo DDDR o DDD al modo DDIR. Programmando la LVCM su Monitoraggio o su Adattata, il dispositivo effettua una ricerca della soglia di stimolazione per determinare la soglia di stimolazione LV. Programmando la LVCM su Adattata, il dispositivo utilizza la soglia di stimolazione LV per definire un'ampiezza ottimale e modifica l'ampiezza della stimolazione impostando un valore vicino all'ampiezza ottimale. L'ampiezza ottimale si basa sulle impostazioni programmate per i parametri Margine di sicurezza ampiezza LV e Ampiezza massima adattata LV.

**Nota:** in caso di dislocamento parziale o totale di elettrocateteri, la funzione LVCM potrebbe non impedire una perdita di cattura.

#### **7.4.3.1 Preparazione per una ricerca della soglia di stimolazione LV**

Il dispositivo si prepara a pianificare le operazioni di LVCM ogni notte alla 1:00. La LVCM viene pianificata quando non vi sono altre funzioni in sospenso con una priorità più elevata. La LVCM ha inizio con un controllo da parte del dispositivo per stabilire se una delle impostazioni dei parametri può impedire una ricerca. Ad esempio, i valori permanenti programmati relativi all'ampiezza LV non possono superare i 6 V, la durata dell'impulso LV deve superare 0,3 ms, mentre la configurazione della stimolazione ventricolare deve includere la stimolazione LV. Se il controllo da parte del dispositivo ha esito negativo, non viene pianificata alcuna ricerca della soglia di stimolazione LV fino al giorno seguente.

Il dispositivo valuta anche se il ritmo corrente del paziente è sufficientemente stabile da supportare una ricerca della soglia di stimolazione. Se il controllo della stabilità va a buon fine, i tempi di conduzione V-V e A-V vengono controllati. Se i controlli della stabilità hanno esito negativo, il dispositivo continua automaticamente a pianificare le ricerche ad intervalli di 30 min fino alla fine della giornata. Se il dispositivo non è in grado di completare un controllo della stabilità in un determinato giorno, la procedura viene ripetuta il giorno successivo.

Il dispositivo esegue controlli della conduzione prima di tentare la ricerca di una soglia di stimolazione. Per controllare la conduzione V-V del paziente, il dispositivo deve essere in grado di rilevare una depolarizzazione nel ventricolo destro dopo una stimolazione erogata soltanto nel LV. I parametri di stimolazione vengono modificati in modo da forzare la stimolazione LV per un massimo di otto cicli cardiaci al fine di osservare il range di ritardi V-V presenti. Se i tempi di conduzione V-V sono costanti in quattro cicli consecutivi, il controllo della conduzione V-V va a buon fine.

Per controllare la conduzione A-V del paziente (nei modi in cui è disponibile), il dispositivo prolunga il ritardo AV stimolato dando avvio alla stimolazione atriale in un modo con trascinamento fino ad un massimo di otto cicli. Se agli impulsi di stimolazione atriale fanno seguito eventi RV rilevati, i tempi di conduzione AV e V-V sono troppo ravvicinati. Ai fini del buon esito della LVCM, è necessario che gli eventi RV vengano rilevati solo quando gli impulsi di stimolazione di test LV catturano il ventricolo sinistro.

Se i controlli della conduzione danno esito negativo, il dispositivo pianifica automaticamente un'altra ricerca entro 30 min. Se in una giornata vengono interrotti oltre cinque controlli della conduzione, il test della soglia di stimolazione viene sospeso fino al giorno successivo. Ogni volta che ciò avviene, il dispositivo effettua un nuovo controllo e la procedura viene ripetuta.

### 7.4.3.2 Ricerca e determinazione della soglia di stimolazione LV


Il dispositivo effettua una ricerca della soglia di stimolazione per determinare la soglia dell'ampiezza di stimolazione LV ad una durata dell'impulso fissa. La LVCM varia l'ampiezza degli impulsi di stimolazione di test per trovare l'ampiezza più bassa in grado di catturare in maniera costante il miocardio ventricolare sinistro. Il dispositivo analizza la cattura osservando la tempistica degli eventi RV rilevati successivi ad un evento LV stimolato per determinare se le ampiezze di test danno luogo alla cattura.

Se il ventricolo sinistro risponde ad una serie di impulsi di stimolazione di test, il risultato è "Cattura". Se non viene rilevata alcuna risposta, il risultato è "Perdita di cattura". Il risultato di una serie di impulsi di stimolazione di test viene ignorato se il dispositivo non riesce a stabilire se gli impulsi di stimolazione di test siano in grado di catturare il miocardio. In questo caso, il test può continuare con impulsi di stimolazione di test aggiuntivi con la stessa ampiezza di test. Se il numero di risultati inconcludenti è eccessivo, il dispositivo interrompe la ricerca della soglia di stimolazione e tenta di effettuarla nuovamente nel periodo pianificato successivo (cfr. la Sezione 7.4.3.4).

Una ricerca della soglia di stimolazione inizia con un'ampiezza di test più bassa di 0,125 V rispetto all'ultima soglia misurata. Se non è stata effettuata alcuna ricerca in precedenza, la nuova ricerca inizia da 0,75 V. Il dispositivo continua a ridurre l'ampiezza di test con decrementi di 0,125 V finché un'ampiezza di test non viene classificata come inferiore alla soglia di stimolazione. Il dispositivo aumenta quindi l'ampiezza di test con incrementi di 0,125 V finché la stessa ampiezza di test non viene classificata come superiore alla soglia di stimolazione per tre volte consecutive. Questa ampiezza di test rappresenta la soglia di stimolazione LV.

In ogni misurazione della soglia, gli impulsi di stimolazione di prova fanno parte di una sequenza di prova (vedere la Figura 89). In una sequenza di test, gli impulsi di stimolazione di test vengono preceduti da tre cicli di supporto. I cicli di supporto stimolano il ventricolo sinistro ad un'ampiezza pari all'ampiezza permanente o in base all'impostazione programmata per l'ampiezza massima adattata LV. I cicli di supporto mantengono il supporto di stimolazione durante la ricerca della soglia di stimolazione. Durante la ricerca della soglia di stimolazione, la configurazione della stimolazione ventricolare passa a solo LV. Inoltre cambia anche la durata del blanking RV nella camera opposta.

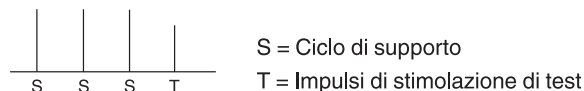**Figura 89.** Sequenza di prova con la funzione LVCM



Durante una ricerca della soglia di stimolazione, il dispositivo promuove la stimolazione ventricolare, che può influenzare il normale funzionamento della stimolazione. Per garantire la stimolazione ventricolare, il dispositivo può modificare i tempi sia nei modi con trascinamento che in quelli senza trascinamento.

#### **7.4.3.3 Modifica dell'ampiezza LV**

Se la LVCM viene programmata su Adattata, il dispositivo modifica automaticamente l'ampiezza LV. La durata dell'impulso LV non viene modificata dalla LVCM. Dopo una ricerca della soglia di stimolazione andata a buon fine, il dispositivo calcola un'ampiezza ottimale aggiungendo il margine di sicurezza dell'ampiezza LV programmato alla soglia di ampiezza. Per informazioni sulle ampiezze ottimali e sui margini di sicurezza, cfr. la Sezione 7.4.2.2.

Oltre alla soglia di ampiezza corrente ed all'ampiezza ottimale, la modifica dell'ampiezza può dipendere dall'ultima soglia di ampiezza misurata e dall'ampiezza massima adattata LV programmata.

Se l'ampiezza ottimale non supera l'ampiezza massima adattata LV, l'ampiezza LV può essere modificata impostando un valore vicino all'ampiezza ottimale. Il dispositivo riduce l'ampiezza di 0,25 V a giorni alterni finché non raggiunge l'ampiezza ottimale. Non vi è alcun limite minimo programmabile. Se la soglia di ampiezza corrente è superiore all'ultima soglia di ampiezza misurata, il dispositivo adatta immediatamente l'ampiezza corrente all'ampiezza ottimale arrotondandola allo 0,25 V più vicino. Le ampiezze modificate che superano i 5 V vengono arrotondate allo 0,5 V più vicino.

#### **7.4.3.4 Interruzione di una ricerca della soglia di stimolazione LV in corso**

Il dispositivo interrompe immediatamente la ricerca della soglia di stimolazione in caso di variazioni improvvise della frequenza cardiaca del paziente o se altre funzioni del dispositivo prevalgono sulla ricerca.

Nel caso in cui non fosse possibile completare una ricerca della soglia di stimolazione, il dispositivo pianifica automaticamente un'altra ricerca entro 30 min. Se in una giornata vengono interrotti oltre cinque tentativi di ricerca, il test della soglia di stimolazione viene sospeso fino alle ore 1:00 del giorno successivo. Ogni volta che ciò avviene, il dispositivo effettua un nuovo controllo e la procedura viene ripetuta. I motivi dell'interruzione di una ricerca della soglia di stimolazione sono indicati nella diagnostica delle tendenze della soglia di cattura (cfr. la Sezione 7.4.6).



7.4.4 Alcune considerazioni sulla programmazione della gestione della cattura

**Ampiezza massima adattata LV** – Se si programma la LVCM su Adattata o Monitoraggio e il valore programmato per l'ampiezza LV è superiore all'ampiezza massima adattata LV, la LVCM non sarà attiva.

**Situazioni che possono influenzare le misurazioni della soglia** – In una percentuale ridotta di pazienti, le situazioni descritte di seguito possono influenzare le soglie misurate dalla funzione Gestione cattura:

- In caso di fissaggio inadeguato degli elettrocateteri, le variazioni della tempistica e della frequenza della stimolazione possono influenzare le soglie.
- In casi rari, la combinazione di alcune morfologie e ritmi può dar luogo a bassi valori di soglia misurati. Ciò può avvenire se la ricerca delle soglie di stimolazione non è in grado di distinguere le contrazioni miocardiche provocate dall'impulso di stimolazione da quelle di origine fisiologica. Questo fenomeno viene definito "rifiuto di eventi intrinseci".

7.4.5 Programmazione della gestione della cattura

Per maggiori informazioni sulla programmazione manuale dei parametri di ampiezza e durata dell'impulso, vedere la Sezione 7.2, “Erogazione delle terapie di stimolazione”, pagina 230.

Figura 90. Parametri relativi alla stimolazione e alla funzione Gestione cattura

Stimolazione

		Atriale	RV	LV
Modo	DDD	Ampiezza... 1.25 V	1.25 V	3.00 V
Cambio Modo	On	Durata impulso... 0.40 ms	0.40 ms	0.40 ms
Freq. min.	50 min <sup>-1</sup>	Sensibilità 0.30 mV	0.30 mV	
Trascin. max	130 min <sup>-1</sup>	Polarità stim.	Bipolare	Bipolare Punta LV/Anello LV
Sensore max	120 min <sup>-1</sup>	Polarità sensing	Bipolare	Punta/Coil
Risposta in frequenza...		Stim. V./Ritardo V-V	LV->RV	0 ms

Intervallo AV

Refrattario/Blanking

Funzioni/interventi

AV stimolato...	130 ms	PVARP...	Automatico	Altre funzioni...
AV rilevato...	100 ms	Blanking...		Aritmia/post-shock...

Annulla modifica OK

Cattura

	Atriale	RV	LV
Gestione cattura			Adattato
Ampiezza	1.25 V	1.25 V	3.00 V
Margine di sicurezza ampiezza			+ 1.5 V
Ampiezza massima adattata			6.00 V
Durata impulso	0.40 ms	0.40 ms	0.40 ms

Annulla modifica OK

**Nota:** la comparsa del simbolo Adattato accanto al valore del parametro Ampiezza LV indica che il valore programmato può essere adattato dal dispositivo. Il simbolo non indica necessariamente che il valore del parametro è stato adattato. La Durata impulso LV non viene mai adattata.

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Ampiezza LV...
  - ▷ Gestione cattura LV
  - ▷ Margine di sicurezza ampiezza LV
  - ▷ Ampiezza massima adattata LV


7.4.6 Valutazione della Gestione cattura

7.4.6.1 Quick Look II

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Quick Look II

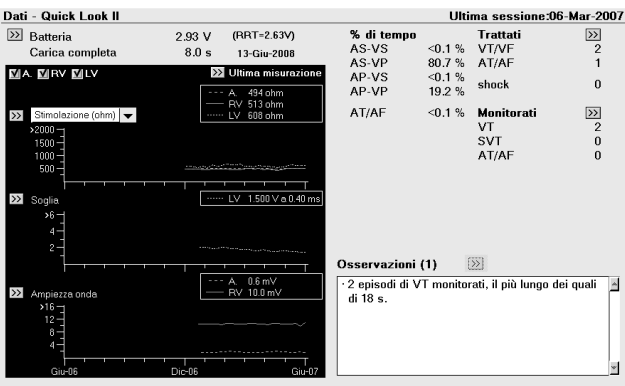Figura 91. La schermata Quick Look II



**Tendenze di soglia** – Nella schermata Quick Look II vengono visualizzate le tendenze delle soglie di cattura medie. I dati sulle soglie vengono raccolti dai test automatici delle soglie di stimolazione quotidiani effettuati dalla funzione Gestione cattura. Selezionare il pulsante Soglia [ >> ] per visualizzare le schermate diagnostiche Tendenze elettrocattetere e Soglia di cattura.

**Osservazioni Quick Look II** – In caso di osservazioni significative sulla LVCM, queste vengono visualizzate nella finestra Osservazioni di Quick Look II.


#### 7.4.6.2 Tendenze della soglia di cattura

Selezionare l'icona Dati

⇒ Diagnostica dispositivo/elettrocatteter

⇒ Tendenze soglia cattura

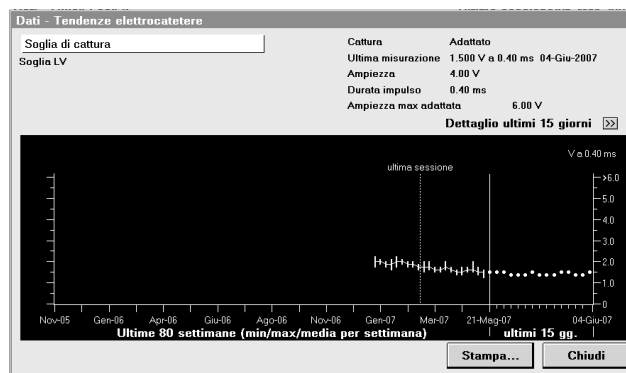**Figura 92.** La tendenza della soglia di cattura LV



I risultati delle misurazioni quotidiane della soglia di stimolazione vengono visualizzati nella schermata Tendenze elettrocatteter nel grafico sulle tendenze della soglia di cattura. Il grafico mostra un massimo di quindici giorni delle ultime misurazioni ed un massimo di ottanta misurazioni riepilogative settimanali (mostrando i valori minimi, massimi e medi per ogni settimana). In caso di riprogrammazione del parametro Durata impulso o del parametro Polarità di stimolazione, nel grafico viene visualizzata una linea per mostrare il momento in cui si è verificata la riprogrammazione.

Dalla tendenza della soglia di cattura, è possibile selezionare il pulsante [ >> ] per il dettaglio degli ultimi quindici giorni per visualizzare i dettagli sulle ricerche quotidiane delle soglie di cattura. La schermata relativa ai dettagli mostra i risultati relativi agli ultimi quindici giorni di misurazioni della soglia, con date, orari, misurazioni delle soglie, durata e ampiezza dell'impulso di stimolazione. Le note illustrano i risultati di ogni ricerca delle soglie di stimolazione.

**Figura 93.** Dettaglio della soglia di cattura LV

Gestione cattura (dettaglio ultimi 15 giorni)					
Cattura LV		Monitor.			
Ampiezza		3.50 V		Ampiezza max adattata 6.00 V	
Durata impulso		0.40 ms			
Data	Ora hh:mm	Soglia (V)	Durata impulso (ms)	Ampiezza (V)	Note
30-Giu-2007	01:00	2.000	0.40	3.50	Misurazione OK
29-Giu-2007	01:00	2.125	0.40	3.50	Misurazione OK
28-Giu-2007	01:00	2.000	0.40	3.50	Misurazione OK
27-Giu-2007	01:00	2.125	0.40	3.50	Misurazione OK
26-Giu-2007	01:00	2.250	0.40	3.50	Misurazione OK
25-Giu-2007	01:00	2.125	0.40	3.50	Misurazione OK
24-Giu-2007	01:00	2.000	0.40	3.50	Misurazione OK
23-Giu-2007	01:00	2.000	0.40	3.50	Misurazione OK
22-Giu-2007	01:00	1.875	0.40	3.50	Misurazione OK
21-Giu-2007	01:00	2.000	0.40	3.50	Misurazione OK
20-Giu-2007	01:00	2.125	0.40	3.50	Misurazione OK
19-Giu-2007	01:00	2.250	0.40	3.50	Misurazione OK
18-Giu-2007	01:00	2.125	0.40	3.50	Misurazione OK
17-Giu-2007	01:00	2.000	0.40	3.50	Misurazione OK
16-Giu-2007	01:00	2.125	0.40	3.50	Misurazione OK

## 7.5 Modifica dell'intervallo AV durante le modifiche della frequenza

Un intervallo AV fisso rende difficoltosa la selezione del valore ottimale dell'intervallo AV in grado di soddisfare tutte le esigenze del paziente. Per evitare un blocco sintomatico 2:1 durante l'esercizio e la stimolazione asincrona, è preferibile un intervallo AV breve a frequenze più elevate. È inoltre preferibile un intervallo AV breve a frequenze più elevate per promuovere una stimolazione biventricolare costante. Per un miglioramento potenziale dell'emodinamica, è preferibile un intervallo AV lungo a frequenze minime.


### 7.5.1 La soluzione offerta dal sistema è l'intervallo AV adattabile alla frequenza

Un intervallo AV adattabile alla frequenza accorcia gli intervalli AV a frequenze elevate per mantenere il trascinamento 1:1, la sincronia A-V ed una stimolazione biventricolare costante.

### 7.5.2 Funzionamento dell'intervallo AV adattabile alla frequenza

L'intervallo AV adattabile alla frequenza è operativo nei modi DDDR, DDIR, DDD o DDI.

Il modo in cui l'intervallo RAAV modifica gli intervalli AV correnti in maniera lineare al variare della frequenza cardiaca in battiti al minuto ( $\text{min}^{-1}$ ) è illustrato nella Figura 94.

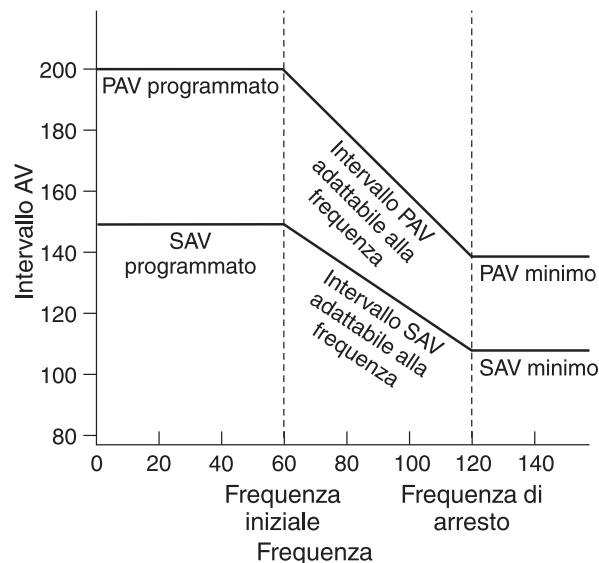**Figura 94.** Funzionamento dell'intervallo RAAV in modo DDDR

La frequenza iniziale determina la frequenza cardiaca alla quale gli intervalli AV cominciano ad accorciarsi. La frequenza di arresto determina la frequenza cardiaca in presenza della quale vengono applicati gli intervalli PAV e SAV minimi.

**Nota:** il dispositivo può talvolta avere un comportamento simile a quello dell'intervallo AV adattabile alla frequenza, anche se questa funzione non è attiva. Se il dispositivo sospetta che vi sia una tachiaritmia in corso accorcia l'intervallo PAV per consentire l'osservazione del ritmo. Ciò avviene anche quando l'intervallo AV adattabile alla frequenza è disattivato.

### 7.5.3 Alcune considerazioni sulla programmazione dell'intervallo AV adattabile alla frequenza

**Messaggio visualizzato dal programmatore sulla frequenza di blocco 2:1 –** Il programmatore calcola la frequenza del blocco 2:1 dinamico in base ai parametri di stimolazione selezionati. È possibile visualizzare la frequenza di blocco 2:1 dinamico calcolata premendo l'icona delle informazioni nella parte bassa della schermata. Se si seleziona un nuovo valore per un parametro che influenza la frequenza di blocco 2:1 dinamico (ad esempio, l'intervallo SAV o il PVARP), premere l'icona delle informazioni per visualizzare la frequenza ricalcolata.

### 7.5.4 Programmazione dell'intervallo AV adattabile alla frequenza

**Nota:** la funzione TherapyGuide suggerisce valori di parametro che si basano sulle informazioni immesse relative alle condizioni cliniche del paziente. Sono compresi i valori di parametro per questa funzione. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 3.9, "Utilizzo della funzione TherapyGuide per selezionare i valori di parametro", pagina 73.

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ AV stimolato...
  - ▷ AV adattabile alla frequenza <On>
  - ▷ Frequenza iniziale
  - ▷ Frequenza di arresto
  - ▷ PAV minimo
  - ▷ SAV minimo

## 7.6 Adattamento del PVARP alle variazioni della frequenza cardiaca del paziente

Un valore fisso per il periodo refrattario atriale post ventricolare (PVARP) potrebbe non fornire un'impostazione ottimale per il PVARP tale da soddisfare le esigenze mutevoli del paziente. In presenza di basse frequenze cardiache, il PVARP deve essere sufficientemente lungo da prevenire una tachicardia mediata da pacemaker (PMT). A frequenze cardiache elevate, il PVARP dovrebbe essere sufficientemente breve da evitare il blocco 2:1 e promuovere la sincronia A-V.

Per informazioni correlate, vedere la Sezione 7.1, "Sensing dell'attività cardiaca intrinseca", pagina 219 e la Sezione 7.2, "Erogazione delle terapie di stimolazione", pagina 230.

### 7.6.1 La soluzione offerta dal sistema è il PVARP automatico

Il PVARP automatico modifica il PVARP in risposta a variazioni della frequenza cardiaca o di stimolazione del paziente.


### 7.6.2 Funzionamento del PVARP automatico

Il PVARP automatico funziona quando il dispositivo si trova in modo DDDR, DDD, DDIR o DDI. In un modo con trascinamento (DDDR o DDD), il PVARP automatico modifica il PVARP in base alla frequenza cardiaca corrente del paziente. Quando la frequenza cardiaca è bassa, il PVARP viene prolungato per prevenire una PMT. All'aumentare della frequenza cardiaca, il PVARP viene accorciato per mantenere il trascinamento su un rapporto di 1:1. Il PVARP automatico consente un rapporto di trascinamento 1:1 degli eventi atriali fino a  $30 \text{ min}^{-1}$  oltre la frequenza cardiaca o  $100 \text{ min}^{-1}$  (verrà selezionato il valore più elevato).

Il valore di parametro per il PVARP minimo programmabile fissa un limite per il PVARP minimo consentito. Se il valore programmato per il PVARP minimo viene raggiunto ed il parametro AV variabile con la frequenza (RAAV) è impostato su On, l'intervallo AV rilevato (SAV) viene accorciato per mantenere il trascinamento in un rapporto 1:1.

Per informazioni sul RAAV, consultare la Sezione 7.5, "Modifica dell'intervallo AV durante le modifiche della frequenza", pagina 260.

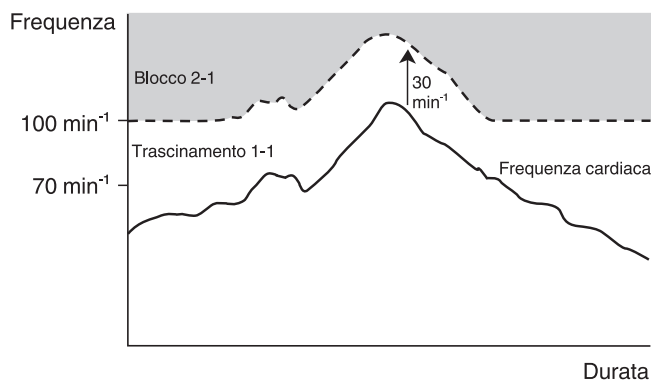
**Figura 95.** Funzionamento del PVARP automatico in modo DDDR o DDD



In un modo senza trascinamento (DDIR o DDI), il PVARP varia con la frequenza di stimolazione corrente così da essere sufficientemente lungo da promuovere la sincronia A-V ad una bassa frequenza di stimolazione e sufficientemente breve da prevenire la stimolazione atriale competitiva ad un'alta frequenza di stimolazione.

Il dispositivo calcola il PVARP nel tentativo di mantenere una finestra temporale di 300 ms tra la fine del PVARP e la stimolazione atriale successiva. Il PVARP viene limitato in modo tale da non risultare più breve dell'intervallo programmato per il parametro Periodo di blanking atriale post-ventricolare (PVAB).

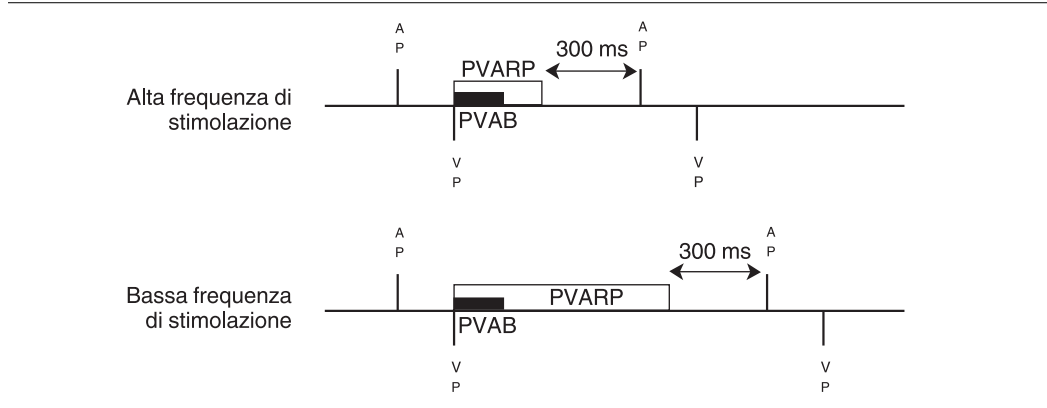**Figura 96.** Funzionamento del PVARP automatico in modo DDIR o DDI



### 7.6.3 Alcune considerazioni sulla programmazione del PVARP automatico

**Selezione di un valore minimo per il PVARP** – Nel programmare un valore superiore per la frequenza massima di trascinamento, potrebbe essere necessario programmare un valore più basso per il PVARP minimo in modo da avere un trascinamento 1:1 fino alla frequenza massima. Un'alternativa consiste nell'utilizzare l'intervallo AV adattato alla frequenza o una combinazione fra l'intervallo AV adattato alla frequenza e un valore PVARP minimo più ridotto.

Quando si seleziona un nuovo valore per il PVARP minimo o per l'intervallo AV adattato alla frequenza, il programmatore ricalcola la frequenza di blocco 2:1 dinamico all'esercizio. Il dispositivo raggiunge un trascinamento 1:1 fino alla frequenza massima di trascinamento, quando la frequenza di blocco 2:1 dinamico ricalcolata è superiore alla frequenza massima di trascinamento. È possibile visualizzare il messaggio del programmatore sulla frequenza di blocco 2:1 dinamico premendo il pulsante con l'icona delle informazioni nella parte bassa della schermata.

**Nota:** il parametro PVARP minimo è applicabile solo quando il dispositivo funziona in un modo con trascinamento (DDDR o DDD).

**PVARP fisso nei modi DDI e DDIR** – Se il dispositivo viene programmato su un modo DDI o DDIR permanente, un PVARP fisso potrebbe risultare più idoneo. Lo scopo del PVARP



automatico nei modi senza trascinamento è quello di supportare la parte DDIR del funzionamento del Cambio Modo durante un episodio di AT/AF.

#### 7.6.4 Programmazione del PVARP automatico

Selezionare l'icona Parametri

⇒ Stimolazione...

⇒ PVARP...

▷ PVARP <Automatico>

▷ PVARP minimo

### 7.7 Erogazione di una frequenza di stimolazione più lenta durante i periodi di sonno


Alcuni pazienti hanno difficoltà a dormire se stimolati ad una frequenza destinata agli orari in cui normalmente sono svegli.

#### 7.7.1 La soluzione offerta dal sistema è la funzione Sonno

La funzione Sonno sostituisce la frequenza minima programmata con una frequenza di stimolazione più lenta nelle ore in cui il paziente normalmente dorme.

#### 7.7.2 Come agisce la funzione Sonno

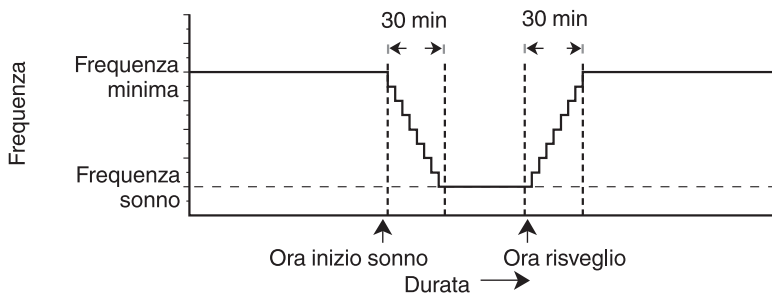**Figura 97.** Panoramica della funzione Sonno



La funzione Sonno è controllata da tre parametri programmabili: Frequenza sonno, Ora inizio sonno e Ora risveglio. Nei 30 min successivi all'orario di inizio del sonno programmato, il dispositivo riduce gradualmente la frequenza di stimolazione più lenta, passando dalla frequenza minima alla frequenza sonno. La frequenza sonno resta attiva fino all'ora di risveglio programmata. Nei 30 min successivi all'ora di risveglio programmata, il dispositivo aumenta gradualmente la frequenza di stimolazione più lenta passando dalla frequenza sonno alla frequenza minima.

Nei modi a risposta in frequenza, se il paziente si sveglia ed inizia ad essere attivo durante l'orario di sonno programmato, il dispositivo eroga una stimolazione a risposta in frequenza, se necessario. Tuttavia, il profilo di frequenza inizia dalla frequenza sonno più bassa ed aumenta fino a raggiungere la frequenza per le attività quotidiane (frequenza ADL). Il profilo di frequenza superiore alla frequenza ADL rimane invariato.

La programmazione di qualsiasi parametro di stimolazione antibradicardica durante il periodo Sonno annulla la funzione Sonno per quel determinato giorno.

Se nel paziente si verifica un episodio di AT/AF e la funzione di Cambio Modo è attiva durante il periodo Sonno, il dispositivo non stimola al di sotto della frequenza minima finché l'episodio di AT/AF non è terminato. Per ulteriori informazioni sul cambio modo, cfr. la Sezione 7.12, "Prevenzione della stimolazione ventricolare rapida durante le tachiaritmie atriali", pagina 275.

### **7.7.3 Alcune considerazioni sulla programmazione della funzione Sonno**

Quando si impostano l'orario di inizio sonno e l'ora del risveglio, è necessario tenere conto delle differenze di fuso orario in caso di viaggi, ora legale e variazioni delle abitudini di sonno del paziente, come dei turni di lavoro variabili.

Per garantire l'accuratezza dei parametri Ora inizio sonno ed Ora risveglio, tenere il dispositivo impostato sull'ora corretta. La funzione Sonno utilizza l'orologio del dispositivo.

#### **7.7.3.1 Come regolare l'orologio del dispositivo**

Selezionare l'icona Parametri

⇒ Impostazione raccolta dati...

⇒ Data/ora dispositivo...

### 7.7.4 Programmazione della funzione Sonno

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Altre funzioni...
  - ⇒ Sonno...
    - ▷ Sonno <On>
    - ▷ Frequenza Sonno
    - ▷ Ora inizio sonno
    - ▷ Ora risveglio

### 7.7.5 Valutazione della funzione Sonno

L'istogramma della frequenza ventricolare mostra le frequenze cardiache inferiori alla frequenza minima ma superiori alla frequenza Sonno per la percentuale di tempo legata al periodo di sonno.

Il Rapporto del Cardiac Compass mostra la frequenza ventricolare media durante il giorno e la notte. Il valore dovrebbe indicare che il dispositivo assicura una frequenza cardiaca più lenta durante le ore notturne.

#### 7.7.5.1 Stampa del rapporto Istogramma della frequenza ventricolare

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Istogrammi frequenza (solo rapporto)

#### 7.7.5.2 Stampa del rapporto Tendenze Cardiac Compass

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Tendenze Cardiac Compass (solo rapporto)

## 7.8 Prevenzione della stimolazione atriale competitiva

Se si verifica un evento atriale stimolato nel periodo vulnerabile dell'atrio, può iniziare una tachicardia atriale. Ciò può accadere in caso di frequenze di stimolazione elevate da parte del dispositivo e in caso di contrazione atriale prematura durante un periodo refrattario atriale, a cui fa immediatamente seguito una stimolazione atriale.

### 7.8.1 La soluzione offerta dal sistema è la NCAP

La funzione di stimolazione atriale non competitiva (NCAP) previene la stimolazione prematura dell'atrio dopo un rilevamento atriale refrattario ritardando la stimolazione atriale pianificata.


### 7.8.2 Funzionamento della NCAP

La NCAP è disponibile quando il dispositivo funziona nei modi DDDR, DDD, DDIR o DDI.

Ogni volta che si verifica un rilevamento atriale refrattario, il dispositivo dà avvio ad un intervallo NCAP programmabile. Se durante un intervallo NCAP viene pianificata una stimolazione atriale, tale stimolazione viene ritardata fino alla conclusione dell'intervallo NCAP. Quando una stimolazione atriale viene ritardata dalla funzione NCAP, l'intervallo AP-VP viene ridotto (ma non al di sotto di 30 ms). Dopo la riduzione dell'intervallo AP-VP provocata dalla NCAP, può verificarsi una variazione nell'intervallo VP-VP. Queste variazioni influiscono solo sull'intervallo ventricolare corrente e su quello successivo.

L'intervallo NCAP è pari a 400 ms per un singolo ciclo di stimolazione ogni volta che si verifica una risposta ad una PVC o un intervento PMT.

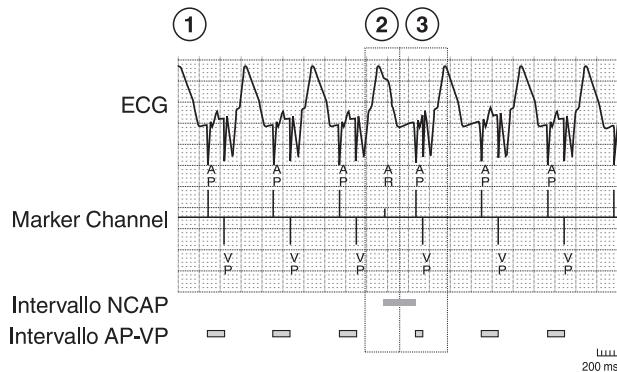**Figura 98.** Funzionamento della NCAP



- 1 Il dispositivo sta stimolando ad una frequenza elevata.
- 2 Si verifica un rilevamento atriale refrattario, che dà inizio ad un intervallo NCAP (in questo caso 300 ms).
- 3 Dopo l'intervallo NCAP, il dispositivo stimola prima l'atrio e poi il ventricolo dopo un intervallo AP-VP ridotto.

### 7.8.3 Programmazione della NCAP

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Altre funzioni...
  - ▷ Stimolaz. A. non competitiva
  - ▷ Intervallo NCAP

### 7.8.4 Valutazione della NCAP

Osservando un tracciato ECG, si noter  che l'intervallo AP-VP   stato accorciato. L'intervallo NCAP pu  essere considerato il periodo che intercorre tra gli eventi AR e AP (cfr. la Figura 98).

## 7.9 Interruzione delle tachicardie mediate da pacemaker

Nei modi con trascinamento (DDDR e DDD), la conduzione retrograda pu  determinare una tachicardia mediata da pacemaker (PMT). La PMT   una sequenza ripetitiva durante la quale il dispositivo risponde ad ogni onda P retrograda stimolando il ventricolo ad una frequenza elevata, che, a sua volta, genera un'onda P retrograda.

### 7.9.1 La soluzione offerta dal sistema   l'intervento PMT

La funzione Intervento PMT prolunga il PVARP dopo il rilevamento di una PMT. Ci  interrompe la PMT facendo in modo che l'evento atriale rilevato successivo rientri nel periodo refrattario.

### 7.9.2 Funzionamento dell'intervento PMT


L'intervento PMT   applicabile quando il dispositivo funziona in modo DDDR o DDD.

Il dispositivo definisce una PMT come otto intervalli VP-AS consecutivi che si verificano in meno di 400 ms. Quando il dispositivo rileva una PMT, la funzione Intervento PMT forza un PVARP di 400 ms dopo il nono evento ventricolare stimolato. Ci  fa in modo che il rilevamento atriale successivo rientri nel periodo refrattario. Poich  questo evento refrattario non viene trascinato al ventricolo per un intero ciclo, la PMT viene interrotta.

Un intervento per PMT viene sospeso per 90 s dopo il PVARP prolungato per prevenire un intervento inutile in presenza di frequenze atriali intrinseche rapide. I criteri di riconoscimento della PMT possono essere soddisfatti durante frequenze sinusali elevate normali, determinando la caduta di un battito (non trascinato) ogni 90 s.

La PMT può essere prevenuta anche tramite la risposta alle PVC. Se le funzioni di risposta alle PVC e di intervento per PMT sono attivate e si rilevano degli episodi di PMT, valutare le prestazioni o le posizioni degli elettrocateretri atriali e ventricolari o prendere in considerazione una terapia farmacologica per ridurre la conduzione retrograda.

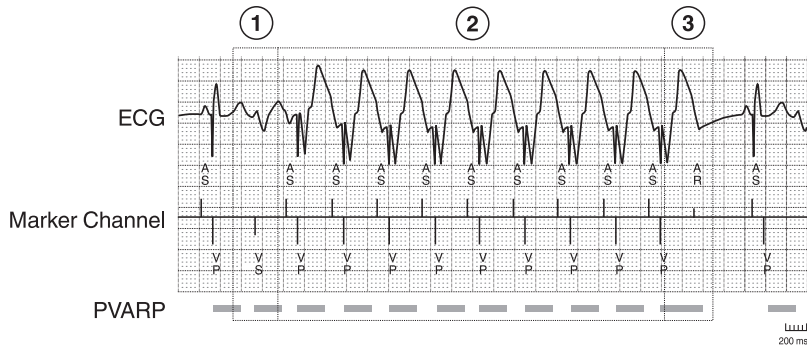**Figura 99.** Prolungamento del PVARP dovuto a un intervento per PMT



- 1 La conduzione retrograda che fa seguito ad una PVC viene riconosciuta come un evento atriale rilevato.
- 2 Si verifica una PMT.
- 3 La PMT viene riconosciuta e il PVARP viene prolungato in modo da interromperla.

### 7.9.3 Programmazione dell'intervento PMT

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Altre funzioni...
- Intervento PMT

## **7.10 Gestione della conduzione retrograda utilizzando la risposta a PVC**

La conduzione retrograda che fa seguito ad una PVC può interrompere la sincronia A-V ed influenzare la tempistica del modo di stimolazione. Nei modi con trascinamento (DDDR e DDD), la conduzione retrograda che fa seguito ad una PVC può dare avvio ad una tachicardia mediata da pacemaker (PMT), una sequenza ripetitiva in cui il dispositivo risponde ad ogni onda P retrograda stimolando il ventricolo ad una frequenza elevata. Ogni singola stimolazione ventricolare genera a sua volta un'onda P retrograda. Per i modi senza trascinamento (DDIR e DDI), la conduzione retrograda che fa seguito ad una PVC può causare una perdita di sincronia A-V determinando una sequenza ripetitiva di inibizione atriale seguita da una stimolazione ventricolare.

### **7.10.1 La soluzione offerta dal sistema è la risposta a PVC**


La risposta a PVC prolunga il PVARP dopo una PVC per evitare di trascinare un'onda P retrograda ed impedire che la conduzione retrograda inibisca una stimolazione atriale.

### **7.10.2 Funzionamento della risposta a PVC**

La funzione Risposta a PVC è disponibile quando il dispositivo funziona in modo DDDR, DDD, DDIR o DDI.

Il sistema definisce una PVC come un evento ventricolare rilevato che fa seguito ad un altro evento ventricolare, senza un evento atriale di intervento. Quando il dispositivo rileva una PVC, forza la durata del PVARP ad almeno 400 ms (se il PVARP corrente è già pari o superiore a 400 ms, non seguirà alcuna azione). Dal momento che la conduzione retrograda si verifica normalmente entro 400 ms da una PVC, l'onda P retrograda sarà compresa nel PVARP, non verrà trascinata e non inibirà la stimolazione atriale. Ciò consente di prevenire l'avvio di una PMT (nei modi DDDR e DDD) e di preservare la sincronia A-V (nei modi DDIR e DDI).

Se la risposta a PVC è attivata e si rilevano PMT, prendere in considerazione la programmazione dell'intervento PMT, valutare le prestazioni o le posizioni degli elettrocateretri atriali e ventricolari o prendere in considerazione una terapia farmacologica per ridurre la conduzione retrograda.

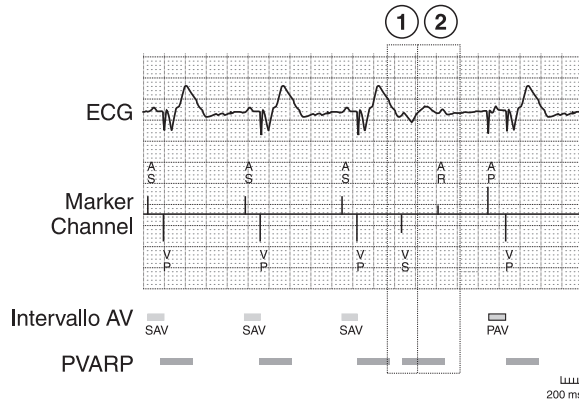**Figura 100.** La funzione di Risposta PVC inizia un PVARP esteso

- 1 Si verifica una PVC.
- 2 Il dispositivo estende il PVARP a 400 ms ed il successivo l'evento atriale viene classificato come refrattario.

### 7.10.3 Programmazione della risposta a PVC

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Altre funzioni...
- ▷ Risposta PVC

## 7.11 Riduzione di un'inibizione ventricolare inappropriata utilizzando la VSP

In un sistema di stimolazione bicamerale con stimolazione atriale e ventricolare e sensing ventricolare, il dispositivo può rilevare un impulso di stimolazione atriale nel canale ventricolare ed inibire la stimolazione ventricolare (crosstalk). In caso di inibizione della stimolazione ventricolare, il dispositivo potrebbe non fornire un supporto ventricolare completo.

### 7.11.1 La soluzione offerta dal sistema è la VSP

La stimolazione ventricolare di sicurezza (VSP) rileva il crosstalk monitorando gli eventi ventricolari non fisiologici rilevati e reagisce stimolando il ventricolo.




### 7.11.2 Funzionamento della VSP

La VSP è disponibile quando il dispositivo funziona in modo DDDR, DDD, DDIR o DDI.

Il dispositivo utilizza una finestra VSP di 110 ms per monitorare i rilevamenti ventricolari che si verificano troppo prematuramente dopo un impulso di stimolazione atriale. I rilevamenti ventricolari nella finestra VSP vengono classificati come non fisiologici e sono probabilmente dovuti a crosstalk. Se nella finestra VSP si verifica un evento ventricolare rilevato, il dispositivo eroga un impulso VSP alla fine della finestra VSP.

Se l'evento rilevato viene causato da crosstalk, l'impulso di stimolazione di backup fornisce supporto ventricolare. Se l'evento rilevato è una depolarizzazione ventricolare, l'impulso di stimolazione di backup viene erogato in maniera talmente prematura da rientrare nel periodo refrattario assoluto del ventricolo ed evitare la stimolazione sull'onda T.

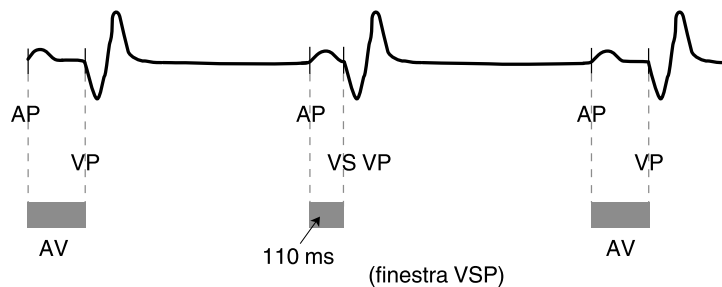**Figura 101.** L'impulso VSP erogato al termine della finestra VSP (110 ms)



Quando l'intervallo AV stimolato corrente è inferiore alla finestra VSP, la stimolazione ventricolare viene erogata al termine dell'intervallo AV stimolato. La finestra VSP passa da 110 ms durante le basse frequenze di stimolazione a 70 ms durante le frequenze di stimolazione elevate. Questo accorciamento della finestra VSP a 70 ms contribuisce a supportare il riconoscimento della tachicardia ventricolare.

Nei dispositivi moderni, l'occorrenza di crosstalk è rara. Tra le situazioni in cui il dispositivo può erogare la VSP figurano l'undersensing atriale o le PVC che si verificano nella finestra VSP.

**Nota:** in caso di attivazione della stimolazione biventricolare o della stimolazione solo RV, la VSP viene erogata soltanto nella camera RV. Se la stimolazione solo LV è attivata, la VSP verrà erogata nella camera LV.

### 7.11.3 Alcune considerazioni sulla programmazione della VSP

**Attenzione:** non disattivare la VSP se il paziente è pacemaker dipendente, poiché non potrebbe essere fornito alcun supporto ventricolare durante il crosstalk.


### 7.11.4 Programmazione della VSP

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Altre funzioni...
- ▷ Stimolazione V. sicur.

### 7.11.5 Valutazione della VSP

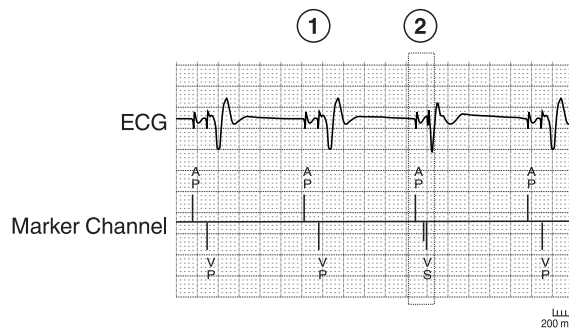**Figura 102.** Come riconoscere una VSP su un tracciato ECG



- 1 Intervalli AV normali
- 2 Impulso VSP subito dopo un rilevamento ventricolare

Quando si osserva un tracciato ECG, si noterà che l'impulso VSP viene subito dopo un rilevamento ventricolare e che di solito ha un intervallo AV più breve. Di solito, l'annotazione "VP" presente nel Marker Channel non compare nei tracciati ECG in tempo reale per via dello spazio limitato dopo l'annotazione "VS". Le annotazioni "VP" e "VS" vengono visualizzate nella schermata di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale, nei tracciati fissati e nei tracciati fissati stampati.

## 7.12 Prevenzione della stimolazione ventricolare rapida durante le tachiaritmie atriali

Una tachiaritmia atriale può determinare una frequenza di stimolazione ventricolare rapida quando il dispositivo funziona in modo DDDR o DDD. Il dispositivo impiantato dovrebbe essere in grado di inibire il trascinarsi atriale durante i periodi di tachiaritmia atriale, mentre ha luogo il trascinarsi della frequenza sinusale normale.

### 7.12.1 La soluzione offerta dal sistema è il Cambio Modo

Grazie alla funzione Cambio Modo, il dispositivo passa ad un modo di stimolazione senza trascinarsi quando rileva una tachiaritmia atriale e ripristina il modo di stimolazione programmato quando la tachiaritmia atriale cessa. Funzionando in un modo senza trascinarsi, il dispositivo previene la stimolazione ventricolare rapida che può derivare da un'alta frequenza atriale.

### 7.12.2 Funzionamento del Cambio Modo

**Figura 103.** Panoramica del funzionamento del Cambio Modo




Il cambio modo è disponibile quando il dispositivo funziona in modo DDDR o DDD.

La funzione Cambio Modo si attiva quando il dispositivo rileva l'insorgenza di un episodio di tachiaritmia atriale. Il riconoscimento dell'insorgenza di AT/AF si basa sull'intervallo di AT/AF programmato e sull'accumulo di altre prove sulla tachiaritmia atriale, che si basano sul numero e sulla tempistica degli eventi atriali all'interno degli intervalli ventricolari. Per ulteriori informazioni sul riconoscimento delle tachiaritmie atriali, cfr. la Sezione 8.1, "Riconoscimento di tachiaritmie atriali", pagina 294.

Dopo il rilevamento dell'insorgenza di una tachiaritmia atriale da parte del dispositivo, la funzione Cambio Modo cambia il modo di stimolazione passando dal modo programmato ad un modo senza trascinarsi (DDIR). La frequenza di stimolazione ventricolare passa gradualmente dalla frequenza di trascinarsi alla frequenza del sensore. Ciò previene una brusca caduta della frequenza ventricolare.

Quando la tachiaritmia atriale termina e la frequenza atriale scende al di sotto della frequenza massima di trascinamento programmata, il Cambio Modo riporta il modo di stimolazione al modo con trascinamento programmato. La frequenza di stimolazione ventricolare passa gradualmente dalla frequenza del sensore alla frequenza di trascinamento.

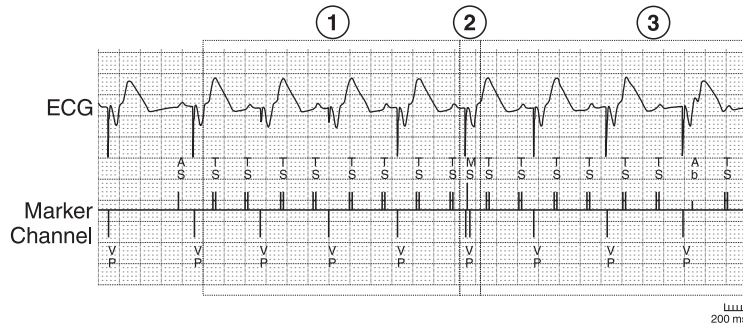**Figura 104.** Esempio di un episodio di Cambio Modo



- 1 Ha inizio un episodio di tachiaritmia atriale, che dà luogo ad una stimolazione ventricolare più rapida.
- 2 Quando il dispositivo rileva una tachiaritmia atriale, il Cambio Modo passa dal modo di stimolazione programmato al modo DDIR.
- 3 Il dispositivo passa gradualmente dalla frequenza di stimolazione ventricolare rapida alla frequenza del sensore.

### 7.12.2.1 Interazioni con altre attività del dispositivo

**Terapie di stimolazione antitachicardica (ATP)** – Un'operazione di Cambio Modo non può iniziare durante l'erogazione di una terapia di ATP. Se un episodio di Cambio Modo ha inizio prima che la terapia di ATP venga erogata, il dispositivo sospende l'operazione di Cambio Modo per riprenderla dopo l'erogazione della terapia.

### 7.12.3 Alcune considerazioni sulla programmazione del Cambio Modo

**Stimolazione overdrive dopo Cambio Modo** – Per prolungare la stimolazione nel modo DDIR al termine della tachiaritmia atriale, è possibile programmare la stimolazione overdrive dopo Cambio Modo (PMOP). Per ulteriori informazioni sulla funzione PMOP, cfr. la Sezione 7.14, "Utilizzo della stimolazione per intervento atriale per contrastare le tachiaritmie atriali", pagina 279.

## 7.12.4 Programmazione del Cambio Modo

Selezionare l'icona Parametri

▷ Cambio Modo

### 7.12.4.1 Programmazione dell'intervallo atriale (frequenza)

Selezionare l'icona Parametri

▷ Intervallo AT/AF (frequenza)

## 7.12.5 Valutazione delle prestazioni della funzione Cambio Modo


### 7.12.5.1 tracciato dell'EGM

Selezionare l'icona Dati

⇒ Diagnostica clinica

⇒ Episodi aritmia

Selezionare un episodio di AT/AF dal diario degli episodi aritmici. Controllare la colonna  $\text{min}^{-1}$  A/V per valutare le frequenze atriali e ventricolari medie durante l'episodio. Controllare che nella colonna EGM vi sia un'indicazione della disponibilità di un tracciato EGM per l'episodio in questione. Se l'EGM è disponibile, selezionare l'opzione EGM. Per verificare se il dispositivo stesse funzionando in un modo di stimolazione senza trascinamento durante l'episodio, è possibile valutare gli eventi atriali e ventricolari sul tracciato EGM memorizzato.

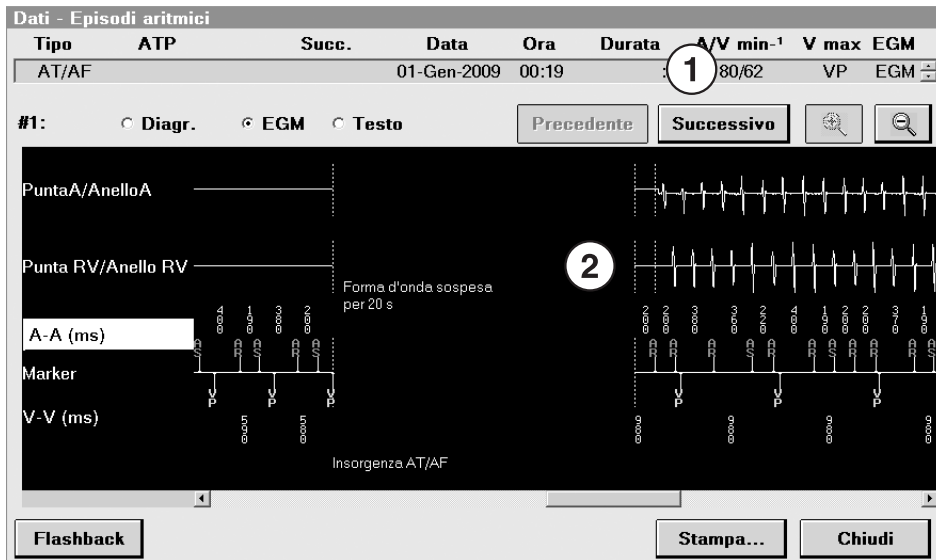**Figura 105.** Valutazione dell'operazione di Cambio Modo durante un episodio di AT/AF

- 1 La bassa frequenza ventricolare media e la differenza tra le frequenze atriale e ventricolare medie suggeriscono che il dispositivo non stava funzionando in un modo con trascinamento.
- 2 Dall'EKG memorizzato si evince che il dispositivo non trascina la frequenza atriale durante la stimolazione del ventricolo.

### 7.12.5.2 Passaggi ad altri modi

Il Marker Channel comprende un marker "MS" per ogni passaggio ad un modo senza trascinamento oppure ad un modo con trascinamento.

Il modo di funzionamento corrente viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Durante un episodio di Cambio Modo, viene visualizzato il DDIR.

## 7.13 Aumento dell'uscita di stimolazione dopo una terapia ad alta tensione

Dopo l'erogazione di una terapia ad alta tensione al cuore, potrebbe verificarsi un aumento temporaneo delle soglie di stimolazione. L'aumento della soglia di stimolazione può determinare una perdita di cattura.

### 7.13.1 La soluzione offerta dal sistema è la stimolazione post-shock

La stimolazione post-shock fa aumentare l'ampiezza di stimolazione e la durata dell'impulso dopo una terapia ad alta tensione.

### 7.13.2 Funzionamento della stimolazione post-shock

Il dispositivo consente di programmare impostazioni separate per l'ampiezza della stimolazione post shock e la durata dell'impulso, che diventano effettive dopo ogni terapia ad alta tensione. Questi parametri restano attivi per 25 cicli di stimolazione.

### 7.13.3 Programmazione della stimolazione post-shock

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Aritmia/post-shock...
- ▷ Ampiezza A.
- ▷ Ampiezza V.
- ▷ Durata impulso A.
- ▷ Durata impulso V.

## 7.14 Utilizzo della stimolazione per intervento atriale per contrastare le tachiaritmie atriali

La gestione dei pazienti affetti da tachiaritmie atriali viene resa più complessa dai diversi tipi di meccanismi noti per dare avvio alle tachiaritmie atriali. La gestione risulta inoltre più complessa anche per l'alta incidenza di tachiaritmie che fanno seguito a cessazioni sia terapeutiche che spontanee. Tra le potenziali cause delle tachiaritmie atriali figurano le contrazioni atriali premature (PAC), che determinano lunghe pause sinusali e battiti ectopici che hanno origine da molteplici aree di attivazione atriale. Inoltre, la fase vulnerabile delle proprietà elettrofisiologiche atriali che fa seguito al ripristino del ritmo sinusale può contribuire a ricorrenze precoci delle tachiaritmie atriali.

### 7.14.1 La soluzione offerta dal sistema è rappresentata dalle funzioni di stimolazione per intervento atriale

Il sistema dispone di funzioni di stimolazione in overdrive appositamente concepite per contrastare i potenziali meccanismi di insorgenza della tachiaritmia atriale.

La stabilizzazione della frequenza atriale (ARS) modifica la frequenza di stimolazione in risposta ad una PAC per evitare le lunghe pause sinusali che fanno seguito ad intervalli atriali brevi (sequenze breve-lungo-breve) che possono causare l'insorgenza di alcune tachicardie atriali).


La stimolazione atriale preferenziale (APP) è stata appositamente concepita per mantenere una sequenza di attivazione costante erogando una stimolazione continua molto vicina alla frequenza sinusale intrinseca.

La stimolazione overdrive dopo Cambio Modo (PMOP) si attiva insieme alla funzione Cambio Modo per erogare una stimolazione atriale preferenziale durante la fase vulnerabile che segue alla cessazione di un episodio di AT/AF.

### 7.14.2 Funzionamento della ARS

La stabilizzazione della frequenza atriale (ARS) è disponibile quando il dispositivo funziona nei modi DDDR, DDD, AAIR o AAI.

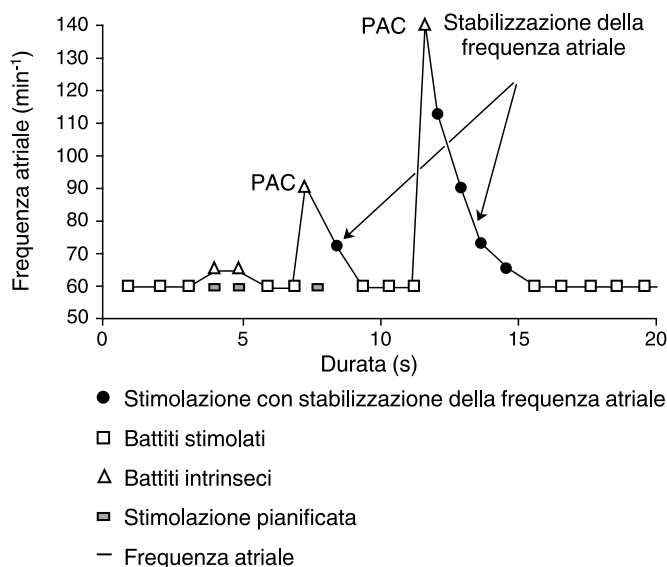**Figura 106.** Stabilizzazione della frequenza atriale (ARS)






La ARS è una funzione programmabile appositamente concepita per prevenire la lunga pausa sinusale che di solito fa seguito ad una PAC. La ARS risponde ad una PAC aumentando immediatamente la frequenza di stimolazione atriale per poi rallentarla fino a raggiungere la frequenza intrinseca o la frequenza di stimolazione programmata (quella più rapida). Se attivato da una PAC, il dispositivo eroga un impulso di stimolazione nell'intervallo prematuro aumentato di una percentuale dello stesso intervallo (definito dal parametro programmato Incremento percentuale di intervallo). Per ogni evento atriale stimolato o rilevato successivo, il dispositivo continua ad aumentare ciascun intervallo di stimolazione in base alla percentuale programmata dell'intervallo precedente. Così facendo, la ARS riesce a prevenire le sequenze “breve-lungo-breve” degli intervalli atriali che possono precedere l'insorgenza di talune tachiaritmie atriali. Il parametro Frequenza massima consente di impostare un limite di frequenza massima per la ARS.

Gli impulsi di stimolazione atriale erogati per la ARS vengono annotati nel canale Marker Channel con la sigla PP (stimolazione proattiva).

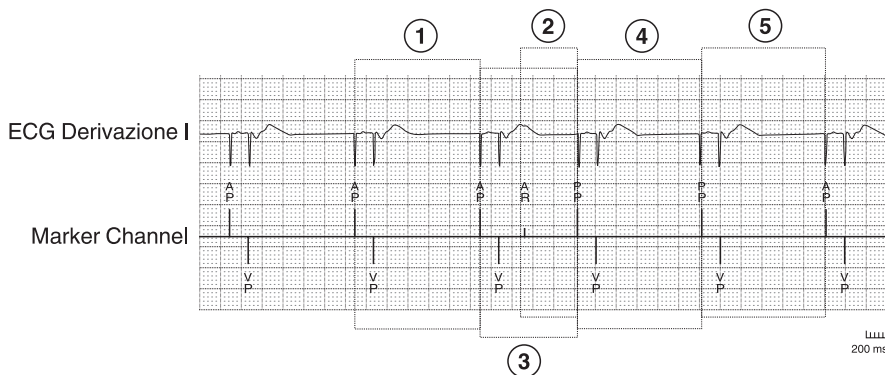**Figura 107.** Esempio di funzionamento della ARS



- 1 La stimolazione ha luogo alla frequenza di stimolazione programmata.
- 2 Si verifica un battito prematuro seguito da un impulso di stimolazione ARS (indicato dal marker PP). L'impulso di stimolazione viene erogato nell'intervallo AP-AR a cui si somma l'incremento percentuale di intervallo programmato (il 25% in questo esempio).
- 3 Il dispositivo utilizza l'intervallo AP-PP per calcolare l'intervallo di stimolazione ARS successivo.
- 4 In base al valore programmato per Incremento percentuale di intervallo, l'intervallo di stimolazione ARS è più lungo del 25% rispetto a quello precedente.
- 5 La stimolazione ARS cessa nel momento in cui viene raggiunta la frequenza del sensore o la frequenza minima.

**Interazioni con altre attività del dispositivo** – La ARS viene sospesa durante il Cambio Modo (PMOP compresa) e il riconoscimento degli episodi di tachiaritmia.

**Nota:** in linea di massima, quando le molteplici funzioni del dispositivo tentano di controllare la frequenza di stimolazione, la funzione con la frequenza più rapida prevale sulle altre.

### 7.14.3 Alcune considerazioni sulla programmazione della ARS

**Stimolazione atriale non competitiva (NCAP)** – La funzione NCAP è in grado di ritardare un impulso di stimolazione atriale derivante dalla stabilizzazione della frequenza atriale.

**Limiti della programmazione** – Per garantire un riconoscimento affidabile delle tachiaritmie, il sistema regola i valori selezionabili per la frequenza massima, l'intervallo di riconoscimento di AT/AF, l'intervallo di riconoscimento di VT/VF e l'intervallo di monitoraggio ventricolare.

### 7.14.4 Programmazione della ARS


Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Aritmia/post-shock...
  - ▷ Stabilizzaz. frequenza A. <On>
- ⇒ Impostazioni A. aggiuntive...
  - ▷ Frequenza massima
  - ▷ Incremento percentuale di intervallo

### 7.14.5 Funzionamento della APP

La stimolazione atriale preferenziale (APP) è disponibile quando il dispositivo funziona nei modi DDDR, DDD, AAIR o AAI.

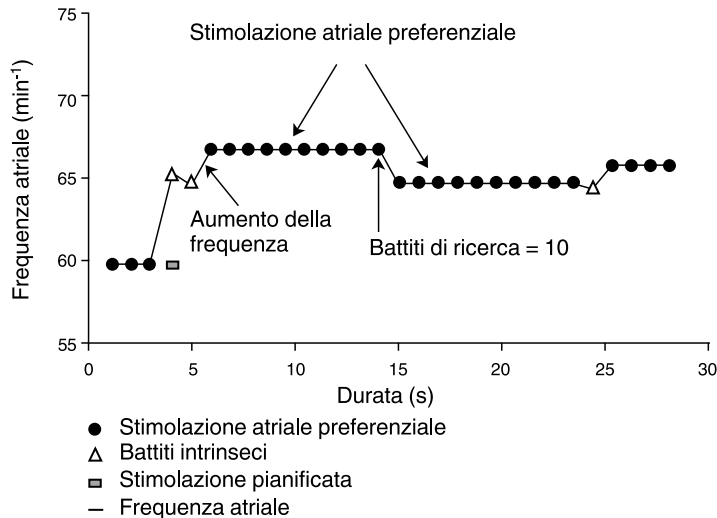
**Figura 108.** Stimolazione atriale preferenziale (APP)



La APP è una funzione programmabile appositamente studiata per massimizzare la stimolazione atriale in overdrive quando non è in corso alcuna tachiaritmia atriale nel paziente. Il dispositivo risponde alle variazioni della frequenza atriale accelerando la frequenza di stimolazione finché non raggiunge un ritmo stimolato stabile leggermente più rapido della frequenza intrinseca.

Dopo ogni evento atriale rilevato non refrattario, il dispositivo riduce l'intervallo di stimolazione atriale del valore di decremento di intervallo programmato. Questa operazione continua finché la frequenza di stimolazione non supera la frequenza intrinseca, determinando un ritmo atriale stimolato. La funzione sostiene questo aumento della frequenza per il numero di battiti programmati definito dal parametro Battiti di ricerca, per poi ridurre leggermente la frequenza di stimolazione (di 20 ms) e ricercare il battito intrinseco successivo. Ciò porta ad una riduzione o ad un aumento dinamico, controllato e scalare nell'intervallo di stimolazione, che determina una frequenza di stimolazione leggermente superiore alla frequenza intrinseca. Il parametro Frequenza massima consente di impostare un limite di frequenza massima per la APP.

Gli impulsi di stimolazione atriale erogati per la APP vengono annotati nel canale Marker Channel con la sigla PP (stimolazione proattiva).

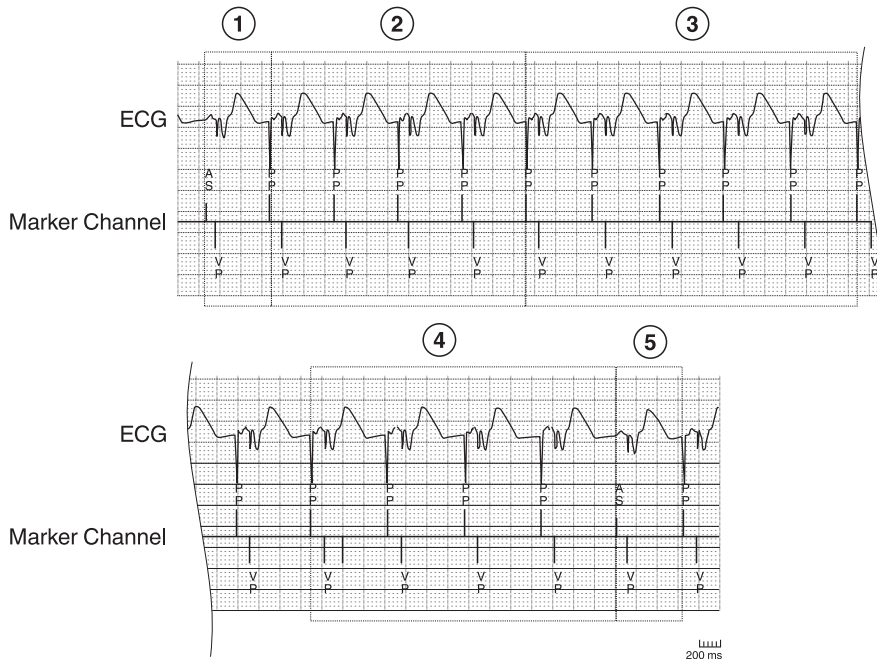**Figura 109.** Esempio di funzionamento della APP

- 1 Si verifica un evento atriale rilevato non refrattario che determina un aumento della frequenza di stimolazione atriale (come definito dal parametro Decremento intervallo).
- 2 La frequenza viene mantenuta con il numero di battiti di ricerca definiti dal parametro Battiti di ricerca.
- 3 Le frequenza diminuisce leggermente (di 20 ms) per un'altra serie di battiti di ricerca.
- 4 Questo ciclo continua finché non viene raggiunta la frequenza intrinseca.
- 5 Si verifica un nuovo evento atriale rilevato non refrattario che determina anche questa volta un aumento della frequenza di stimolazione atriale.

**Note:**

- la APP viene sospesa durante il Cambio Modo (PMOP compresa) e durante il riconoscimento degli episodi di tachiaritmia.
- In linea di massima, quando le molteplici funzioni del dispositivo tentano di controllare la frequenza di stimolazione, la funzione con la frequenza più rapida prevale sulle altre.

### 7.14.6 Alcune considerazioni sulla programmazione della APP

**Durata del dispositivo** – Quando la APP è attivata, il dispositivo tende a fornire un rapporto più elevato tra gli eventi stimolati e gli eventi rilevati, il che può determinare una riduzione della durata della batteria.

**Parametro Decremento intervallo** – Quando si seleziona un valore per il parametro di decremento di intervallo, tenere presente che un valore alto (ad esempio, 100 ms) fornirà una risposta più aggressiva ad un aumento della frequenza sinusale. Ciò determina un'erogazione della stimolazione APP più frequente, più rapida e di durata superiore rispetto ad un valore di decremento intervallo più basso. Un valore più basso per il parametro di decremento di intervallo determina una riduzione della risposta a PAC isolate ed alla variabilità sinusale, pari o inferiore alla frequenza del sensore.

**Stimolazione atriale non competitiva (NCAP)** – La funzione NCAP è in grado di ritardare un impulso di stimolazione atriale derivante dalla APP.

**Limiti della programmazione** – Per garantire un riconoscimento affidabile delle tachiaritmie, il sistema regola i valori selezionabili per la frequenza massima, l'intervallo di riconoscimento di AT/AF, l'intervallo di riconoscimento di VT/VF e l'intervallo di monitoraggio ventricolare.

### 7.14.7 Programmazione della APP


Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Aritmia/post-shock...
  - ▷ Stimolazione A. preferenziale <On>
- ⇒ Impostazioni A. aggiuntive...
  - ▷ Frequenza massima
  - ▷ Decremento intervallo
  - ▷ Battiti di ricerca


### 7.14.8 Funzionamento della PMOP

La stimolazione overdrive dopo Cambio Modo (PMOP) è disponibile quando il dispositivo funziona nei modi DDDR o DDD.

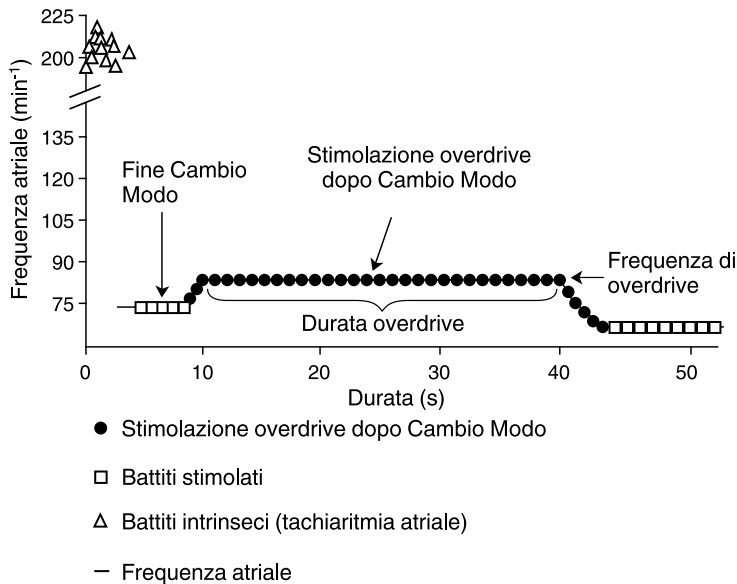**Figura 110.** Stimolazione overdrive dopo Cambio Modo (PMOP)



La PMOP è una funzione programmabile che consente di erogare la stimolazione atriale preferenziale al termine di un Cambio Modo. Dopo un Cambio Modo, il dispositivo aumenta la frequenza di stimolazione battito per battito (riducendo l'intervallo di stimolazione di 70 ms ad impulso) finché non raggiunge la frequenza overdrive programmata, continuando la stimolazione DDIR con la frequenza overdrive per la durata di overdrive programmata. Successivamente ritorna gradualmente al modo di trascinamento atriale programmato rallentando progressivamente la frequenza (aumentando l'intervallo di stimolazione di 70 ms ad impulso) fino a raggiungere la frequenza di stimolazione programmata.

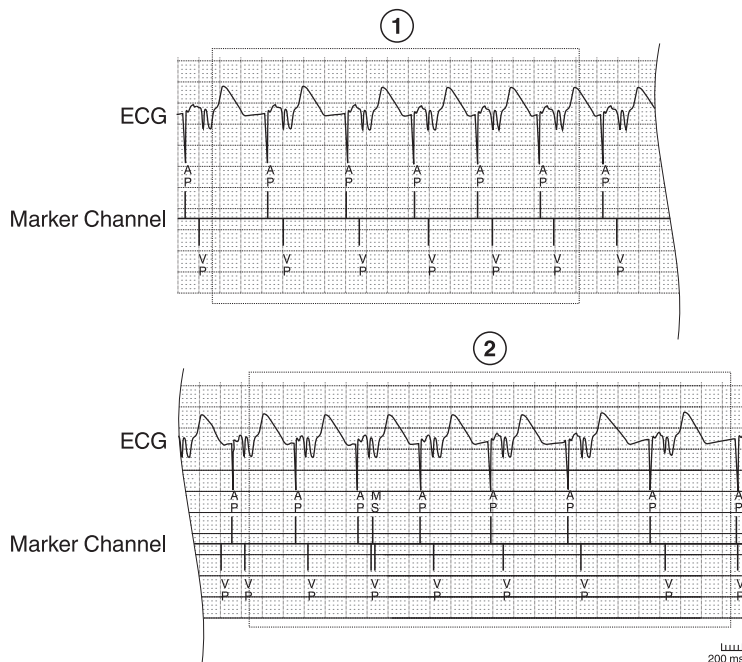**Figura 111.** Esempio di funzionamento della PMOP

- 1 Dopo un Cambio Modo, il dispositivo aumenta gradualmente la frequenza di stimolazione fino a raggiungere la frequenza overdrive programmata.
- 2 Dopo avere stimolato per la durata di overdrive programmata, il dispositivo indica la fine del Cambio Modo rallentando gradualmente la frequenza di stimolazione fino a raggiungere la frequenza programmata.

#### 7.14.9 Alcune considerazioni sulla programmazione della PMOP

**Aumento potenziale della stimolazione del ventricolo destro** – Dal momento che il dispositivo rimane in modo DDIR quando la PMOP è in funzione, l'attivazione di quest'ultima può portare ad un aumento della stimolazione del ventricolo destro nei pazienti soggetti ad episodi frequenti di AT o AF parossistica.

**Cambio Modo** – La PMOP può essere attivata solo se la funzione Cambio Modo è attivata.

### 7.14.10 Programmazione della PMOP

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Aritmia/post-shock...
  - ▷ Post Cambio Modo <On>
  - ▷ Frequenza di overdrive
  - ▷ Durata overdrive

### 7.14.11 Valutazione della stimolazione per intervento atriale

Il dispositivo raccoglie e memorizza i dati riepilogativi sugli episodi di AT/AF, compresa la percentuale complessiva di tempo dedicato dal dispositivo ad erogare la stimolazione per intervento atriale. È possibile visualizzare i dati riepilogativi sugli episodi di AT/AF sullo schermo del programmatore e stampare i dati sotto forma di rapporto. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 5.6, "Visualizzazione dei contatori di episodi e terapie", pagina 153.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Contatori
  - ⇒ Episodi di AT/AF

La linea relativa alla percentuale di tempo di intervento atriale nella sezione Riepilogo AT/AF della schermata Dati-Contatori mostra la percentuale complessiva di tempo dedicato all'erogazione della stimolazione per intervento atriale al paziente. La percentuale visualizzata riflette il totale complessivo di stimolazione derivante dalla ARS e dalla APP.

**Figura 112.** Esempio della sezione Riepilogo AT/AF della schermata Dati-Contatori

Riepilogo AT/AF					
% di tempo AT/AF	5.3	%	0.0	%	↓
AT/AF media ore/giorno	1.3	ore/giorno	0.0	ore/giorno	↓
Episodi di AT/AF monitorati	0.0	al giorno	0.0	al giorno	
Episodi di AT/AF trattati	1.7	al giorno	0.0	al giorno	↓
Episodi terminati con ATP	50.0	%	0.0	%	↓
% di tempo stimolazione atriale	<0.1	%	95.3	%	↑
% di tempo intervento atriale	<0.1	%	95.2	%	↑
AT-NS (>6 battiti)	1.7	al giorno	0.0	al giorno	↓



**Nota:** se l'APP è abilitata, è molto probabile che la stimolazione per intervento atriale sia derivata dalla APP piuttosto che dalla ARS o dalla PMOP.

## 7.15 Erogazione della stimolazione in overdrive dopo una terapia ad alta tensione per VT/VF

Dopo la cessazione riuscita di un episodio di VT/VF con una terapia ad alta tensione, può verificarsi una riduzione temporanea della gettata cardiaca.

### 7.15.1 La soluzione offerta dal sistema è la stimolazione post-shock VT/VF

La stimolazione post-shock VT/VF eroga la stimolazione in overdrive che è in grado di migliorare la gettata cardiaca.

### 7.15.2 Funzionamento della stimolazione post-shock VT/VF

La stimolazione post-shock VT/VF fornisce parametri programmabili per la frequenza di overdrive e la durata di overdrive dopo il trattamento di un episodio VT/VF con uno shock. Il modo di stimolazione resterà sull'impostazione programmata. La stimolazione continuerà con la frequenza di overdrive per la durata di overdrive, a meno che non si effettui prima un test o venga erogata prima un'altra terapia. Una volta terminata la durata di overdrive, la frequenza di stimolazione tornerà gradualmente alle normali frequenze di stimolazione.

**Nota:** i primi 25 cicli di stimolazione utilizzano le impostazioni della stimolazione post-shock per l'ampiezza e la durata dell'impulso.


### 7.15.3 Programmazione della stimolazione post-shock VT/VF

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Aritmia/post-shock...
  - ▷ Stim. post-shock VT/VF <On>
  - ▷ Frequenza di overdrive
  - ▷ Durata overdrive

### 7.15.4 Valutazione della stimolazione post-shock VT/VF

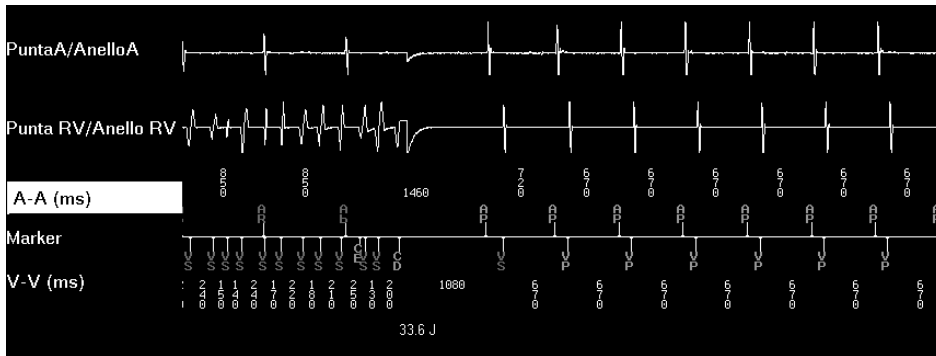**Figura 113.** La stimolazione post-shock VT/VF dopo la erogazione di una terapia ad alta tensione



Per esaminare la stimolazione erogata con la frequenza overdrive, andare in Episodi aritmici ed osservare i marker di stimolazione.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Episodi aritmia
- ⇒ EGM

## 7.16 Risposta alle PVC con la Stabilizzazione della frequenza ventricolare

La PVC avvertita da un paziente è spesso seguita da una lunga pausa nel ciclo cardiaco. Questa pausa è talvolta associata all'insorgenza di tachiaritmie ventricolari legate alle pause.

### 7.16.1 La soluzione offerta dal sistema è la stabilizzazione della frequenza ventricolare

Stabilizzazione della frequenza ventricolare (VRS) è una funzione appositamente studiata per eliminare la lunga pausa che normalmente fa seguito ad una PVC. La VRS risponde ad una PVC aumentando la frequenza di stimolazione, per poi rallentarla gradualmente fino a raggiungere la frequenza di stimolazione programmata o la frequenza intrinseca.

### 7.16.2 Funzionamento della VRS


La VRS opera allo stesso modo di una funzione costante di regolarizzazione della frequenza modificando gli intervalli ventricolari che possono far seguito ad una PVC. I parametri programmabili elencati di seguito controllano la frequenza di stimolazione determinata dalla VRS:

- la frequenza massima fissa un limite all'intervallo minimo di stimolazione.
- l'incremento di intervallo prolunga l'intervallo di stimolazione con ogni sensing ventricolare o stimolazione ventricolare successivo.

Dopo ciascun rilevamento ventricolare o evento di stimolazione ventricolare successivo, il dispositivo calcola un nuovo intervallo di stimolazione aggiungendo il valore di incremento di intervallo programmato all'intervallo di stimolazione precedente. L'intervallo calcolato viene prolungato, da battito a battito, finché il dispositivo non ritorna alla frequenza intrinseca o alla frequenza di stimolazione programmata (quella che si verificherà per prima). Tuttavia, l'aumento della frequenza di stimolazione determinata dalla VRS non supera la frequenza massima programmata per questa funzione.

La VRS è disponibile quando il dispositivo funziona nei modi DDDR, DDD, DDIR, DDI, VVIR o VVI.

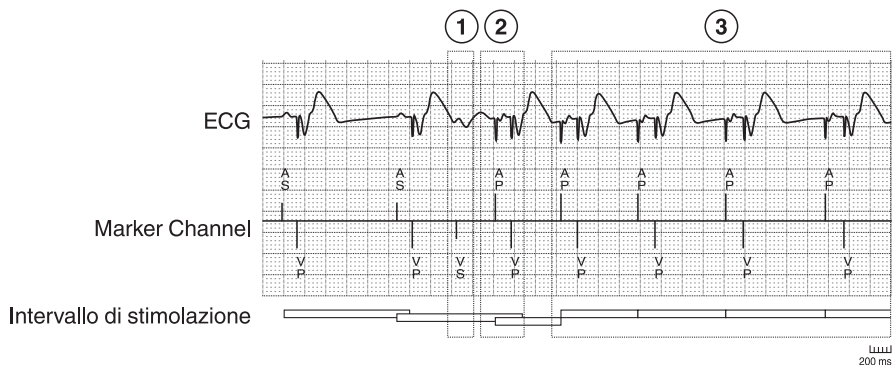**Figura 114.** Funzionamento della VRS



- 1 Si verifica una PVC, che dà luogo ad un breve intervallo di stimolazione.
- 2 Il dispositivo stimola il ventricolo all'intervallo di stimolazione precedente e con l'incremento di intervallo programmato. La VRS programma la stimolazione atriale per uno stadio precoce al fine di preservare la sincronia A-V.
- 3 Ad ogni stimolazione successiva, la VRS aumenta l'intervallo di stimolazione in base all'incremento di intervallo programmato.

**Note:**

- La VRS ha un limite superiore poiché deve essere considerata come la risposta ad un battito ventricolare prematuro. La VRS non risponde invece alle alte frequenze cardiache sostenute.
- Nei modi di stimolazione bicamerale, la VRS riduce automaticamente l'intervallo di stimolazione atriale in modo tale che l'impulso di stimolazione ventricolare venga erogato all'intervallo di stimolazione richiesto.
- In linea di massima, quando le molteplici funzioni del dispositivo tentano di controllare la frequenza di stimolazione, la funzione con la frequenza più rapida prevale sulle altre.

**7.16.3 Alcune considerazioni sulla programmazione della VRS**

**PVARP automatico e VRS** – Nel modo DDIR o DDI, quando la VRS aumenta la frequenza di stimolazione, il PVARP automatico riduce le probabilità di stimolazione atriale competitiva.

**Cambio Modo e VRS** – La VRS non è attiva durante gli episodi di Cambio Modo.

**Risposta all'AF condotta e VRS** – Nei modi DDIR e VVIR, la risposta all'AF condotta e la VRS non possono essere attivate contemporaneamente.

**7.16.4 Programmazione della VRS**

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Stimolazione...
- ⇒ Aritmia/post-shock...
  - ▷ Stabilizzaz. frequenza V. <On>
- ⇒ Impostazioni V. aggiuntive...
  - ▷ Frequenza massima
  - ▷ Incremento dell'intervallo

**7.16.5 Valutazione delle prestazioni della VRS**

Il dispositivo raccoglie e memorizza i dati dei contatori, che includono informazioni sulla frequenza delle PVC e sull'attivazione della VRS. I dati memorizzati possono essere visualizzati sullo schermo del programmatore e stampati.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Contatori
- ⇒ Episodi di VT/VF

Figura 115. Esempio di dati dei contatori sulle PVC e la VRS

Dati - Contatori				
<input checked="" type="radio"/> Episodi di VT/VF <input type="radio"/> Rx VT/VF <input type="radio"/> Episodi di AT/AF <input type="radio"/> Rx AT/AF				
	Sessione precedente	Ultima sessione		Durata dispositivo Totale
	05-Lug-2007 al 09-Lug-2007	09-Lug-2007 al 11-Lug-2007		
Contatori di VT/VF				
VF	0	1 ↑	2	
FVT	0	0	0	
VT	2	4 ↑	7	
VT monitorata (133 - 143 min <sup>-1</sup> )	2	0 ↓		
VT-NS (>4 battiti, >143 min <sup>-1</sup> )	0	0		
① Serie di PVC (2-4 battiti)	0.0 all'ora	0.2 all'ora ↑		
② PVC singole	1.1 all'ora	0.7 all'ora ↓		
③ Cicli di stimolazioni di VRS	0.0 all'ora	0.0 all'ora		
④ Singole stimolazioni di VRS	0.0 all'ora	0.0 all'ora		

- 1 Il contatore Serie di PVC registra i casi di PVC in cui si verificano contemporaneamente due o più eventi ventricolari prematuri.
- 2 Il contatore PVC singole registra casi di eventi prematuri che si verificano separatamente.
- 3 Il contatore Cicli di stimolazioni di VRS registra casi di impulsi di stimolazione VRS all'ora in cui due o più eventi ventricolari consecutivi sono impulsi di stimolazione VRS.
- 4 Il contatore Singole stimolazioni di VRS registra casi di singoli impulsi di stimolazione VRS all'ora.

## 8 Impostazione del riconoscimento delle tachiaritmie

### 8.1 Riconoscimento di tachiaritmie atriali


Le tachiaritmie atriali sono generalmente caratterizzate da frequenze atriali più rapide delle frequenze ventricolari. La tachiaritmia atriale può dar luogo a sintomi nel paziente. Quando il dispositivo si trova in un modo di trascinamento atriale, la tachiaritmia atriale può dar luogo anche ad una stimolazione ventricolare rapida non desiderata.

#### 8.1.1 La soluzione offerta dal sistema è il riconoscimento di AT/AF

Il riconoscimento delle tachiaritmie atriali è un processo continuo in cui il dispositivo analizza la frequenza atriale ed il suo effetto sul ritmo ventricolare per determinare se nel paziente sia al momento presente una tachiaritmia atriale. Il riconoscimento accurato di una tachiaritmia atriale consente al dispositivo di rispondere erogando terapie antitachicardiche adeguate e di raccogliere informazioni diagnostiche che possono essere di aiuto nella gestione dei pazienti con tachiaritmie atriali. È possibile programmare il dispositivo in modo da rispondere ad una tachiaritmia atriale passando al modo DDIR senza trascinamento per evitare la stimolazione ventricolare ad alta frequenza. Se programmato su Monitoraggio, il dispositivo passa al modo DDIR, se necessario, raccogliendo dati sugli episodi di tachiaritmia atriale ma non erogando alcuna terapia.

#### 8.1.2 Funzionamento del riconoscimento di AT/AF

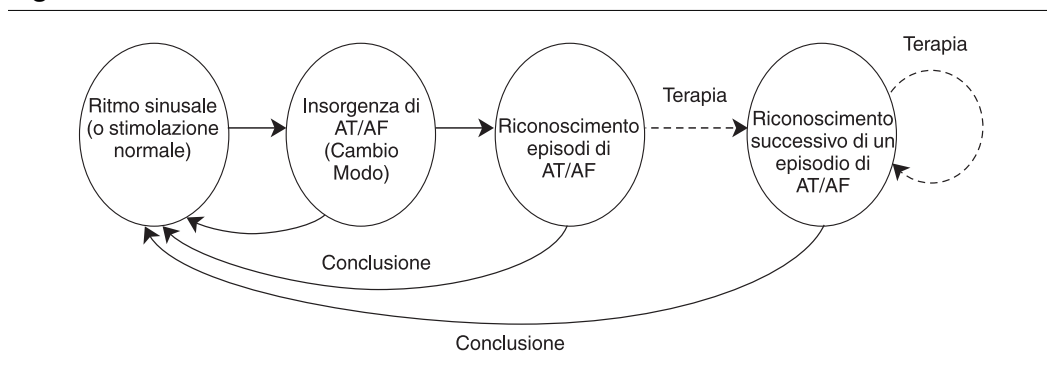**Figura 116.** Panoramica del riconoscimento di AT/AF



Il dispositivo rileva un episodio di tachiaritmia atriale quando determina che la frequenza atriale è aumentata e che vi sono ulteriori prove che si tratta di tachiaritmia atriale in base al numero ed alla tempistica degli eventi atriali durante gli intervalli ventricolari. Dopo il riconoscimento iniziale degli episodi, il dispositivo continua a monitorare l'episodio finché non cessa. A seconda della programmazione, il dispositivo eroga una sequenza programmata di terapie atriali o continua a monitorare senza erogare alcuna terapia.

Per programmare il riconoscimento delle tachiaritmie atriali, selezionare un intervallo di AT/AF indicato come "Intervallo A. (frequenza)" sullo schermo del programmatore.

**Figura 117.** Parametri di riconoscimento di AT/AF

Riconosc.	Zone	Intervallo A. (freq.)	
On	1		
	AT/AF	350 ms (171 min <sup>-1</sup> )	350 ms

**8.1.2.1 Individuazione dell’insorgenza di una tachiaritmia atriale**

Il dispositivo individua l’insorgenza di una tachiaritmia atriale in presenza delle seguenti condizioni:

- vi sono almeno due eventi atriali rilevati per intervallo ventricolare per un numero sufficiente di intervalli ventricolari (dall’inizio dell’episodio devono essersi verificati almeno 3 intervalli ventricolari);
- la media degli ultimi dodici intervalli atriali è più breve dell’intervallo di AT/AF (o di AT/AF rapida) programmato.

L’insorgenza di AT/AF viene registrata nel diario episodi. Se la funzione Cambio Modo è attivata, il dispositivo passa ad un modo senza trascinamento (DDIR) all’insorgenza dell’AT/AF.

**Nota:** se vi sono le condizioni previste per l’insorgenza dell’AT/AF, il sistema inizia a calcolare la durata in percentuale dell’AT/AF nel paziente. Queste informazioni vengono utilizzate nel Rapporto del Cardiac Compass.


### 8.1.2.2 Rilevamento di un episodio di tachiaritmia atriale

Il dispositivo conserva le prove di una tachiaritmia atriale basandosi sul numero e sulla tempistica degli eventi atriali durante gli intervalli ventricolari. Il dispositivo conferma il riconoscimento iniziale degli episodi di AT/AF in presenza di entrambe le condizioni descritte di seguito:

- presenza di almeno due eventi atriali rilevati per intervallo ventricolare per un numero sufficiente di intervalli ventricolari (dall'inizio dell'episodio devono essersi verificati almeno 32 intervalli ventricolari);
- la mediana degli ultimi dodici intervalli atriali rilevati è più breve dell'intervallo di AT/AF (o di AT/AF rapida) programmato.

La registrazione degli episodi in memoria avviene in presenza delle condizioni previste per il riconoscimento di AT/AF. Nella registrazione degli episodi, il riconoscimento di AT/AF viene contrassegnato con l'annotazione "Riconoscimento di AT/AF". Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 8.1.5, "Valutazione del riconoscimento di AT/AF", pagina 300.

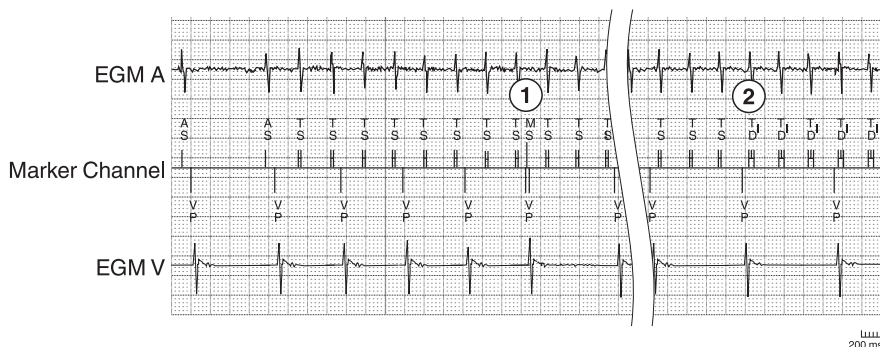**Figura 118.** Insorgenza e riconoscimento di AT/AF



- 1 Il marker MS indica che si è verificato un Cambio Modo. Questo marker viene visualizzato solo se è stata attivata la funzione Cambio Modo.
- 2 Il marker TD indica che si è verificato il riconoscimento di episodi di AT/AF.

Dopo il riconoscimento, il dispositivo può erogare una sequenza programmata di terapie atriali.



**Note:**

- Quando avviene un riconoscimento di AT/AF, il sistema registra l'episodio contrassegnando l'insorgenza di AT/AF ed i punti di riconoscimento. Se si verifica l'insorgenza ma il riconoscimento non avviene, non verrà effettuata alcuna registrazione degli episodi per quel caso di AT/AF.
- Quando vi sono almeno due eventi atriali in un intervallo ventricolare, il dispositivo analizza le informazioni sul pattern A:V per stabilire se uno degli eventi atriali corrisponda realmente a un far field di onda R. Il far field di onda R non viene contato nel riconoscimento di AT/AF.
- Il riconoscimento di VT/VF ha la precedenza sul riconoscimento di AT/AF. In caso di riconoscimento di VT/VF, qualsiasi procedura di riconoscimento di AT/AF in corso viene rimandata e verrà ripresa una volta cessato l'episodio di VT/VF.

**8.1.2.3 Classificazione degli episodi di tachiaritmia atriale da trattare**

Il sistema utilizza delle “zone di riconoscimento” programmabili per classificare le tachiaritmie atriali da trattare. È possibile programmare una zona di riconoscimento (AT/AF) o due zone di riconoscimento (AT/AF e AT/AF rapida). Utilizzare una sola zona se il paziente manifesta una tachiaritmia atriale clinica. Utilizzare due zone se il paziente manifesta due tachiaritmie atriali cliniche distinte e si desidera trattare ogni tachiaritmia con una serie unica di terapie.

**Figura 119.** Parametri di riconoscimento di AT/AF e di AT/AF rapida

Riconosc.	Zone		Intervallo A. (freq.)	
On	2	AT/AF rapida	200 ms (300 min <sup>-1</sup> )	200 ms
		AT/AF	350 ms (171 min <sup>-1</sup> )	350 ms

Per programmare la zona di riconoscimento di AT/AF, selezionare un intervallo di AT/AF indicato come "Intervallo A. (frequenza)" sullo schermo del programmatore. Se si programma il campo Zone su 2, è anche possibile selezionare un intervallo di AT/AF per l'AT/AF rapida.

#### 8.1.2.4 Riconoscimento successivo di una tachiaritmia atriale


Una volta erogata una sequenza di terapie, il dispositivo deve riconoscere nuovamente la tachiaritmia atriale prima di applicare un'altra sequenza di terapie. Il dispositivo applica una sequenza di terapie successiva solo in presenza delle seguenti condizioni:

- vi sono almeno due eventi atriali rilevati per intervallo ventricolare per un numero sufficiente di intervalli ventricolari (dall'erogazione della terapia devono essersi verificati almeno 32 intervalli ventricolari);
- la media degli ultimi dodici intervalli atriali rilevati è più breve dell'intervallo di AT/AF (o di AT/AF rapida) programmato.

#### 8.1.2.5 Individuazione della cessazione della tachiaritmia atriale

Il dispositivo stabilisce che un episodio di tachiaritmia atriale è cessato quando individua un ritmo sinusale normale (o un ritmo stimolato normale) per cinque intervalli ventricolari consecutivi.

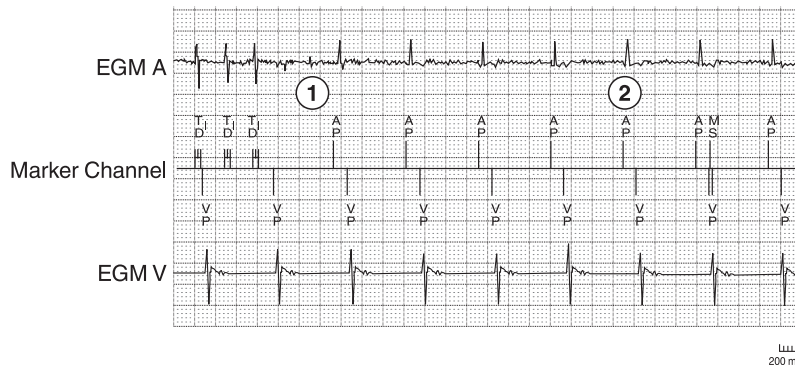**Figura 120.** Cessazione di un episodio di AT/AF



- 1 L'EGM atriale mostra che il ritmo atriale rapido è cessato.
- 2 Si sono registrati cinque intervalli consecutivi di ritmo atrio-ventricolare 1:1, con tutti i cinque intervalli più lunghi dell'intervallo di AT/AF programmato. L'episodio è terminato. Il marker MS mostra che la funzione di cambio modo è passata ad un modo di trascinamento atriale.

**Nota:** quando la procedura di riconoscimento delle tachiaritmie atriali continua ininterrottamente per 3 min senza che i criteri di riconoscimento o di conclusione vengano soddisfatti, l'episodio viene considerato cessato.

### 8.1.2.6 Monitoraggio di una tachiaritmia atriale senza l'erogazione di alcuna terapia

Quando il riconoscimento delle tachiaritmie atriali viene programmato su Monitoraggio, il dispositivo non eroga terapie per AT/AF e non si verifica alcun riconoscimento successivo. Tutte le altre operazioni, tra cui il Cambio Modo, restano invariate.

### 8.1.3 Alcune considerazioni sulla programmazione del riconoscimento di AT/AF

**Riconoscimento di VF di backup durante l'AT/AF** – Affinché il riconoscimento di AT/AF possa essere attivato, il riconoscimento di VF deve essere programmato su On. Ciò assicura il riconoscimento di VF di backup durante gli episodi di AT/AF.

**Modo di stimolazione asincrono** – Quando il modo di stimolazione programmato è DOO, VOO o AOO, il riconoscimento di AT/AF non può essere attivato.

### 8.1.4 Programmazione del riconoscimento di AT/AF

#### 8.1.4.1 Programmazione del riconoscimento di AT/AF

Selezionare l'icona Parametri

- ▷ Riconoscimento di AT/AF <On>
- ▷ Intervallo AT/AF (frequenza)

#### 8.1.4.2 Programmazione del riconoscimento di AT/AF per due zone di riconoscimento

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ AT/AF | Terapie...
  - ▷ Riconoscimento <On>
  - ▷ Zone <2>
  - ▷ Intervallo A. di AT/AF rapida (frequenza)
  - ▷ Intervallo A. di AT/AF (frequenza)

### 8.1.4.3 Programmazione del monitoraggio di AT/AF

Selezionare l'icona Parametri

- ▷ Riconoscimento di AT/AF <Monitor>
- ▷ Intervallo A. di AT/AF (frequenza)

### 8.1.5 Valutazione del riconoscimento di AT/AF

#### 8.1.5.1 La schermata Quick Look II

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Quick Look II

Nella schermata Quick Look II viene visualizzata la durata totale in percentuale dell'AT/AF nel paziente ed il numero di episodi di AT/AF monitorata o trattata dall'ultima sessione.

#### 8.1.5.2 La schermata Dati - Episodi aritmici

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Episodi aritmia

Nella schermata Dati - Episodi aritmici vengono visualizzati gli episodi di tachiaritmia registrati e le terapie attivate. L'opzione Diagramma consente di visualizzare un diagramma dell'episodio e gli orari di insorgenza, riconoscimento, erogazione e cessazione della terapia. L'opzione EGM consente di visualizzare le informazioni sugli episodi nel contesto di un tracciato EGM.

Figura 121. Diagramma di un episodio



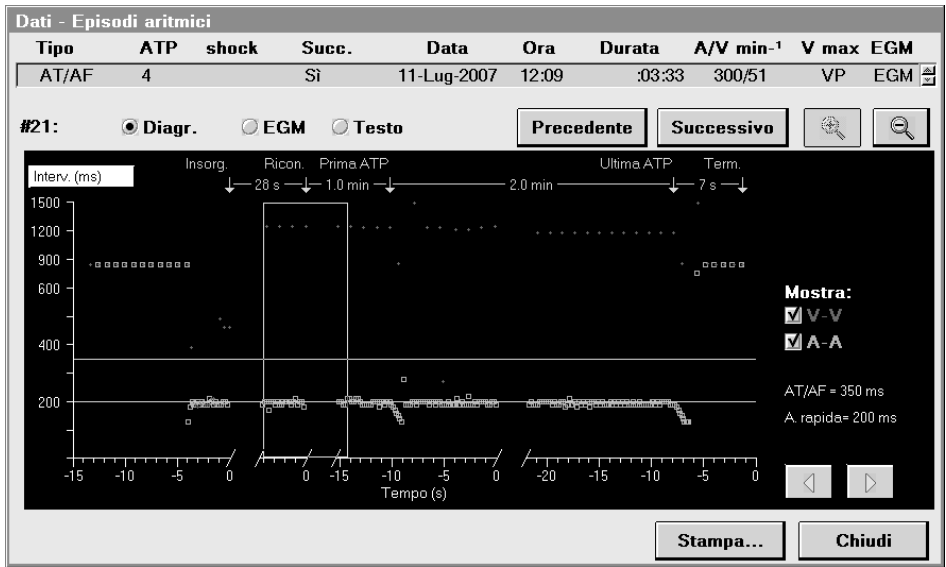


Figura 122. EGM di un episodio che mostra l'insorgenza di AT/AF

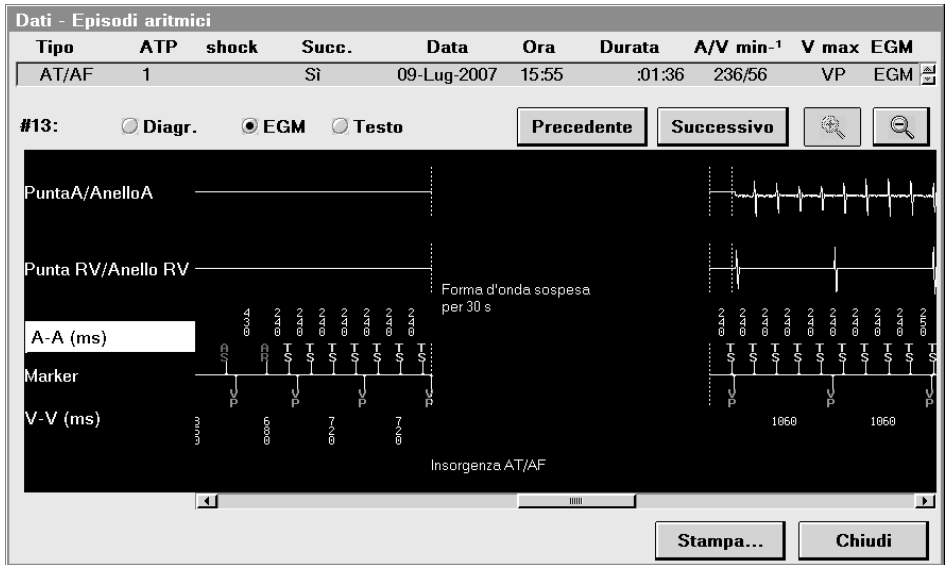

**Figura 123.** EGM di un episodio che mostra il riconoscimento di AT/AF

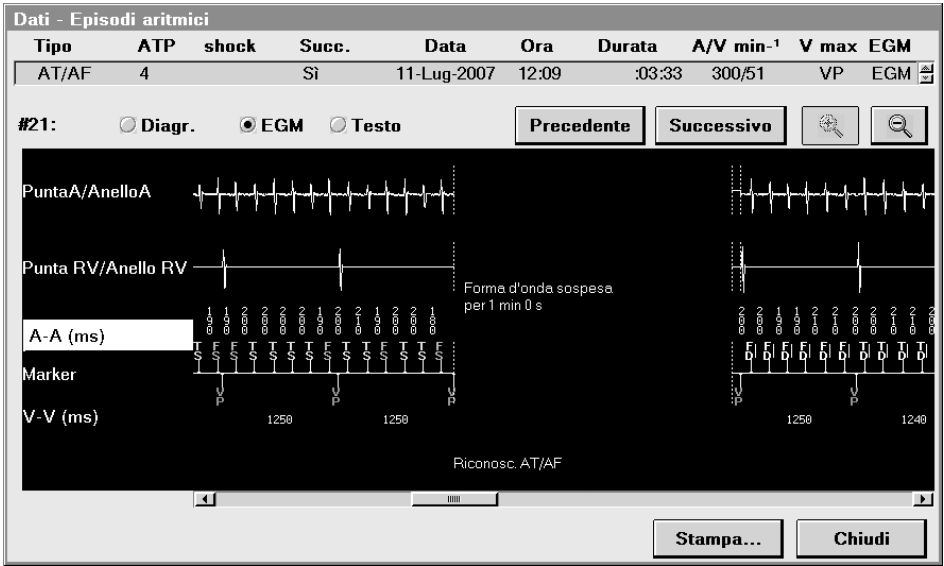


**8.1.5.3 Rapporto del Cardiac Compass**

Selezionare l'icona Dati


- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Tendenze Cardiac Compass (solo rapporto)

Il Rapporto del Cardiac Compass fornisce informazioni sugli episodi di AT/AF, sui ritmi ventricolari e sulla durata complessiva dell'AT/AF nel paziente.

La tendenza Frequenza V. durante AT/AF nel Rapporto del Cardiac Compass visualizza informazioni sulla risposta ventricolare durante le tachiaritmie atriali.

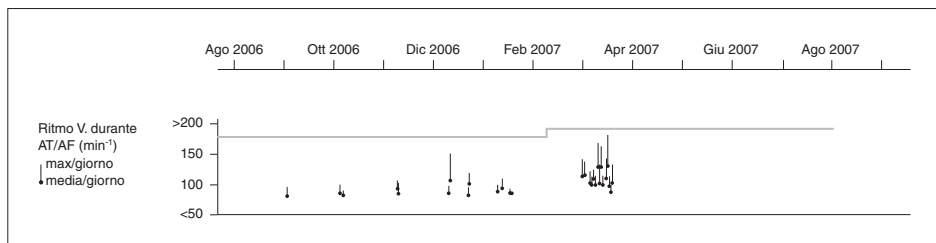**Figura 124.** Frequenza V. Cardiac Compass durante l'AT/AF

La tendenza Numero totale di ore di AT/AF al giorno nel Rapporto del Cardiac Compass fornisce informazioni sulla durata complessiva dell'AT/AF nel paziente.

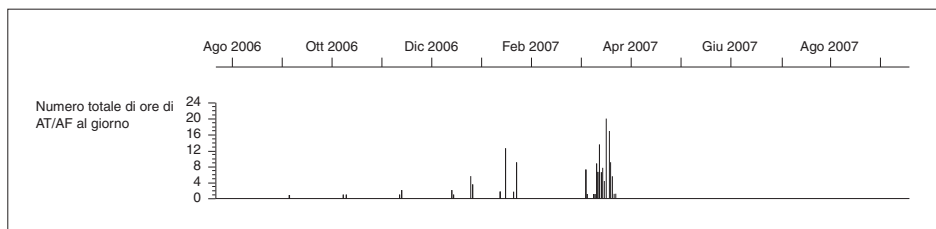**Figura 125.** Numero totale di ore di AT/AF al giorno nel Cardiac Compass


#### 8.1.5.4 Rapporto degli istogrammi di frequenza

Selezionare l'icona Dati

⇒ Diagnostica clinica

⇒ Istogrammi frequenza (solo rapporto)

Il rapporto Istogramma della frequenza V. durante AT/AF fornisce informazioni sulla risposta ventricolare del paziente durante l'AT/AF.

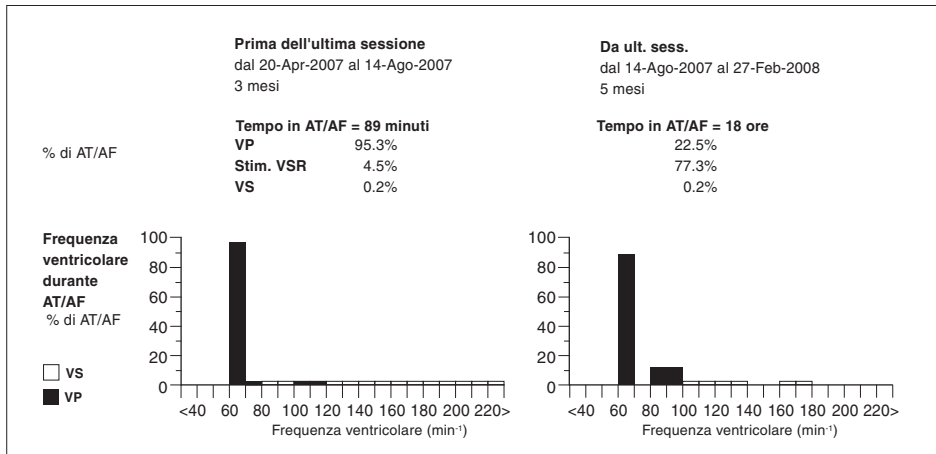**Figura 126.** Istogramma della Frequenza V. durante AT/AF

### 8.1.5.5 Contatori di episodi di AT/AF

Selezionare l'icona Dati

⇒ Diagnostica clinica

⇒ Contatori

⇒ Episodi di AT/AF

I contatori degli episodi di AT/AF forniscono un riepilogo dell'attività di AT/AF, comprensivo della durata complessiva in percentuale dell'AT/AF e del numero di episodi di AT/AF dall'ultima sessione. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 5.6, "Visualizzazione dei contatori di episodi e terapie", pagina 153.

## 8.2 Riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari

Per poter erogare terapie adeguate al paziente, il dispositivo deve prima rilevare la presenza di una tachiaritmia e classificarla in maniera accurata. Il dispositivo deve essere in grado di rilevare diversi tipi di tachiaritmia ventricolare con caratteristiche differenti. Di solito, la fibrillazione ventricolare (VF) è un ritmo a frequenza rapida ed a bassa ampiezza con intervalli irregolari. La tachicardia ventricolare (VT) è solitamente un ritmo più lento rispetto alla VF, ma con intervalli regolari. Nonostante alcune VT possano essere rapide come la VF, esse manifestano degli intervalli regolari. La tachicardia sopraventricolare (SVT) è un ritmo rapido che ha origine negli atri e non costituisce indicazione alla terapia ventricolare.




Dopo l'erogazione di una terapia, il dispositivo deve valutarne l'efficacia ed erogare una nuova terapia se l'aritmia dovesse persistere. Dopo la cessazione di un episodio, il dispositivo deve continuare a monitorare per individuare un'eventuale ricorrenza della tachiaritmia. Se un'aritmia cessa in maniera spontanea dopo il riconoscimento o in caso di SVT nel paziente, la terapia dovrebbe essere inibita.

### 8.2.1 Soluzione del sistema: Riconoscimento di VT/VF

Il riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari è un processo continuo di classificazione degli eventi ventricolari rilevati per il riconoscimento degli episodi di tachiaritmia. In base ai risultati della procedura di riconoscimento, il dispositivo può erogare una terapia programmata al paziente o inibire la terapia. Dopo aver erogato una terapia, il dispositivo continua a monitorare il ritmo del paziente per stabilire se la tachiaritmia è terminata, persiste o è cambiata. Il dispositivo può essere programmato per monitorare le VT più lente e non pericolose senza erogare terapia.

### 8.2.2 Funzionamento del riconoscimento di VT/VF

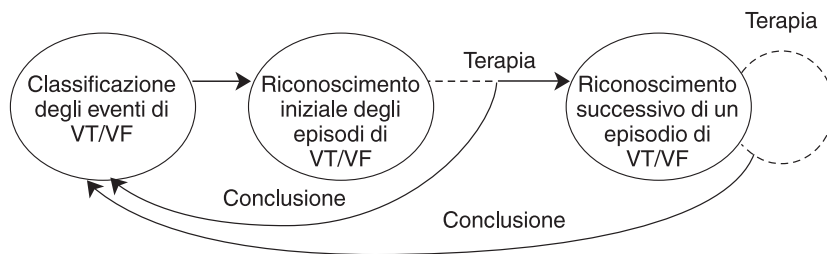
**Figura 127.** Panoramica del riconoscimento di VT/VF



Il dispositivo classifica il ritmo cardiaco del paziente misurando ogni intervallo e contando il numero di eventi di tachiaritmia che si verificano nelle “zone di riconoscimento” delle tachiaritmie programmate. Vi sono quattro zone di riconoscimento programmabili: VF, VT rapida, VT e Monitoraggio. Se il numero di eventi di tachiaritmia in una determinata zona supera una soglia programmata, il dispositivo rileva un episodio di tachiaritmia ventricolare. Al momento del riconoscimento, il dispositivo può erogare una terapia pianificata per poi valutare nuovamente il ritmo cardiaco del paziente per stabilire se si è verificata la cessazione o è avvenuto il riconoscimento successivo dell'episodio.

8.2.2.1 Classificazione degli eventi ventricolari

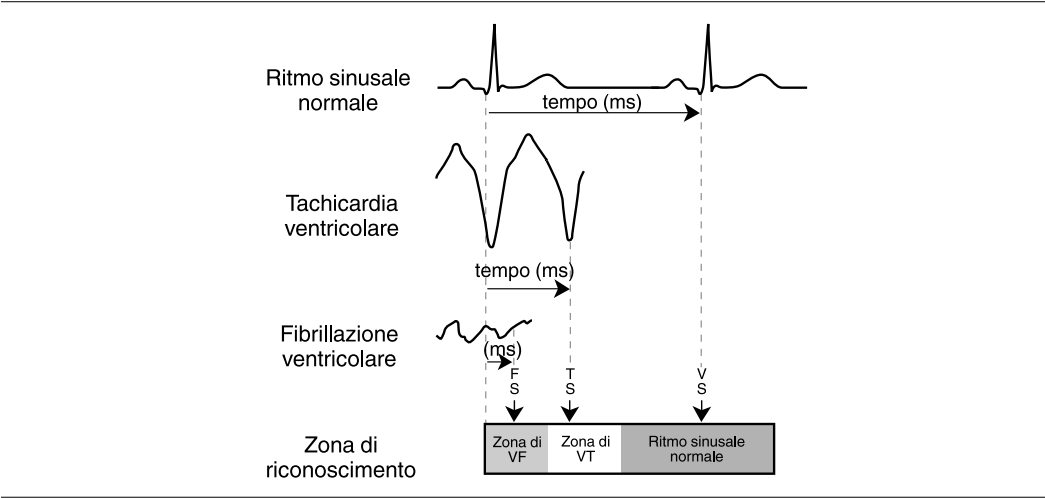Figura 128. Zone di riconoscimento di VF e VT



Il sistema utilizza delle “zone di riconoscimento” programmabili per classificare gli eventi ventricolari per il riconoscimento delle tachiaritmie e per erogare la terapia. Una zona di riconoscimento è una serie di durate di ciclo che consentono di classificare un evento di tachiaritmia ventricolare rilevato come fibrillazione o come tachicardia.

Figura 129. Intervalli di riconoscimento di VF e VT

		Iniziale	Ric.succ.	Intervallo V. (freq.)	
VF	On	18/24	12/16	320 ms (188 min <sup>-1</sup> )	320 ms
FVT	OFF			240 ms (250 min <sup>-1</sup> )	
VT	On	16	12	400 ms (150 min <sup>-1</sup> )	400 ms
Monitor.	Off	20		450 ms (133 min <sup>-1</sup> )	


Per programmare le zone di riconoscimento, selezionare un intervallo di riconoscimento per ciascun tipo di tachiaritmia che si desidera venga riconosciuto dal dispositivo (nella schermata Parametri, l'intervallo di riconoscimento viene indicato con la dicitura "Intervallo V. (frequenza)"). Quando si programma un intervallo di riconoscimento per la VF, si definisce una zona per gli eventi di VF. Gli intervalli più brevi o pari all'intervallo di riconoscimento di VF rientrano nella zona di riconoscimento di VF e vengono classificati come eventi di fibrillazione ventricolare. Inoltre, quando si programma un intervallo di riconoscimento di VT, si definisce una zona per gli eventi di VT. Gli intervalli di durata compresa tra l'intervallo di riconoscimento di VT e l'intervallo di riconoscimento di VF rientrano nella zona di riconoscimento di VT e vengono classificati come eventi di tachicardia ventricolare.

### 8.2.2.2 Riconoscimento degli episodi di VF e VT

Per definire il numero di battiti consecutivi necessari affinché una tachiaritmia venga rilevata come un episodio, il sistema utilizza il valore programmabile Battiti riconoscimento iniziale. Il valore del parametro Battiti riconoscimento iniziale funziona in maniera diversa a seconda che si tratti di eventi presenti nella zona di VF o di eventi presenti nella zona di VT.

Gli episodi di VF hanno intervalli rapidi ed irregolari a causa della natura caotica delle depolarizzazioni VF. Alcuni segnali minori di VF potrebbero non essere rilevati e contati. Pertanto, il sistema ricorre ad un rapporto tra eventi di VF ed eventi consecutivi per il riconoscimento di VF. Se ad esempio si programma il valore del parametro Battiti riconoscimento iniziale di VF su 18/24, il dispositivo rileva la VF quando almeno 18 degli ultimi 24 intervalli sono stati classificati come eventi di VF.

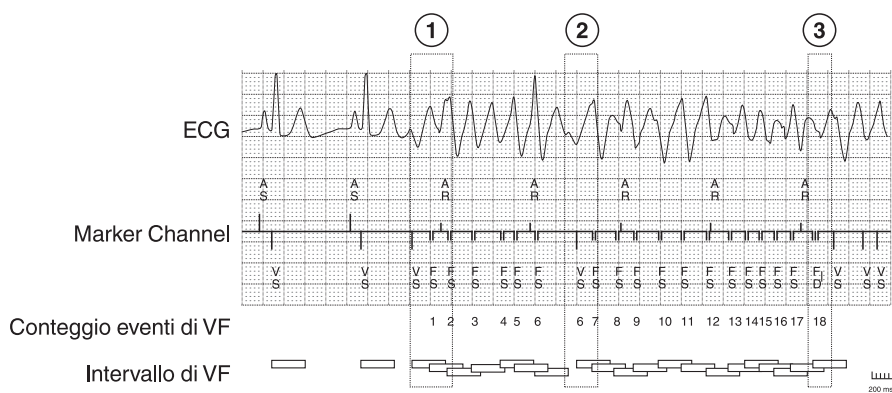**Figura 130.** Calcolo dei battiti per il riconoscimento iniziale della VF




- 1 La fibrillazione ventricolare ha inizio e gli intervalli rilevati nella zona di riconoscimento di VF vengono classificati come eventi di VF (e contrassegnati con la sigla FS).

- 2 Un intervallo ventricolare rilevato avviene fuori dalla zona di riconoscimento di VF. Questo evento non viene classificato come evento di VF.
- 3 Il valore programmato relativo al parametro Battiti per il riconoscimento iniziale di VF di 18 eventi su 24 viene raggiunto e il dispositivo rileva un episodio di VF (indicato dal marker FD).

Poiché i ritmi VT non sono soggetti ad undersensing come i ritmi VF, il sistema ricorre ad un conteggio di eventi consecutivi per il riconoscimento di VT. Programmando ad esempio il valore del parametro Battiti riconoscimento iniziale di VF su 16, il dispositivo rileva la VT quando 16 intervalli consecutivi vengono classificati come eventi di VT. Se un intervallo è più lungo della zona di VT, la procedura di riconoscimento ricomincia. Se l'intervallo è più breve dell'intervallo di riconoscimento di VT ed avviene nella zona di VF, il dispositivo tiene invariato il numero di eventi di VT consecutivi (non li azzerà né li incrementa).

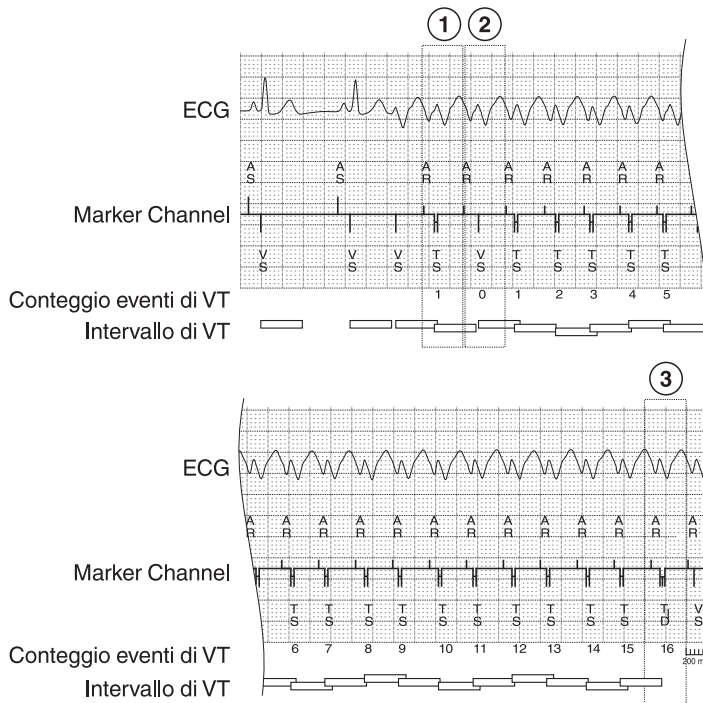**Figura 131.** Calcolo dei battiti per il riconoscimento iniziale della VT



- 1 La tachicardia ventricolare ha inizio e gli intervalli ventricolari rilevati nella zona di riconoscimento di VT vengono classificati come eventi di VT (e contrassegnati con la sigla TS).

- 2 Si verifica un intervento ventricolare rilevato al di fuori della zona di riconoscimento di VT. Il riconoscimento di VT ricomincia.
- 3 Il valore di 16 eventi programmato per il parametro Battiti per il riconoscimento iniziale di VT viene raggiunto e il dispositivo rileva la VT (ciò viene indicato dal marker TD).

8.2.2.3 Riconoscimento di due VT cliniche

Per consentire approcci terapeutici differenti per trattare un paziente con due VT con frequenze differenti, si può utilizzare una zona di riconoscimento di tachiaritmie ventricolari rapide (FVT). Per rilevare due VT cliniche, programmare il riconoscimento di FVT su via VT e selezionare un valore Intervallo V. (freq.) per la FVT. Per fare in modo che la tachicardia ventricolare rapida venga classificata come FVT, selezionare un valore che corrisponda all'intervallo ventricolare più lungo che solitamente si verifica durante la VT rapida del paziente.

Figura 132. Parametri di riconoscimento di FVT via VT


		Iniziale	Ric.succ.	Intervallo V. (freq.)	
VF	On	18/24	12/16	320 ms (188 min <sup>-1</sup> )	320 ms
FVT	via VT			350 ms (171 min <sup>-1</sup> )	350 ms
VT	On	16	12	400 ms (150 min <sup>-1</sup> )	400 ms
Monitor.	Off	20		450 ms (133 min <sup>-1</sup> )	

Il dispositivo riconosce un episodio di tachiaritmia quando il numero di eventi consecutivi di VT o FVT raggiunge il valore programmato di battiti per il riconoscimento iniziale di VT. A questo punto, se uno degli ultimi otto intervalli si è verificato nella zona di FVT, il dispositivo rileva un episodio di FVT. Se tutti gli ultimi otto intervalli sono più lunghi dell'intervallo di riconoscimento di FVT, il dispositivo rileva un episodio di VT.

8.2.2.4 Riconoscimento di una VT nella zona di VF


Una zona di riconoscimento di FVT può anche essere utilizzata per riconoscere e trattare un episodio di VT che si trova nella zona di VF. Questo metodo può assicurare un riconoscimento affidabile della VF, consentendo al contempo di erogare una terapia meno aggressiva, come la stimolazione antitachicardica, per trattare la VT rapida del paziente. Per rilevare una VT nella zona di VF, programmare il riconoscimento di FVT su via VF e selezionare un valore Intervallo V. (freq.) per la FVT. Per fare in modo che la tachicardia ventricolare rapida venga classificata come FVT, selezionare un valore che corrisponda all'intervallo ventricolare più breve che solitamente si verifica durante la VT rapida del paziente.

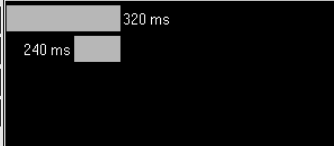**Figura 133.** Parametri di riconoscimento di FVT via VF

		Iniziale	Ric.succ.	Intervallo V. (freq.)	
VF	On	18/24	12/16	320 ms (188 min <sup>-1</sup> )	
FVT	via VF			240 ms (250 min <sup>-1</sup> )	
VT	OFF	16	12	400 ms (150 min <sup>-1</sup> )	
Monitor.	Off	20		450 ms (133 min <sup>-1</sup> )	

Il dispositivo riconosce un episodio di tachiaritmia quando il numero eventi recenti di VF o FVT raggiunge il valore programmato del parametro Battiti riconoscimento iniziale di VF. A questo punto, se tutti gli ultimi otto intervalli sono stati classificati come eventi di FVT, il dispositivo rileva un episodio di FVT. Se uno o più degli ultimi otto intervalli sono stati classificati come eventi di VF, il dispositivo rileva un episodio di VF.

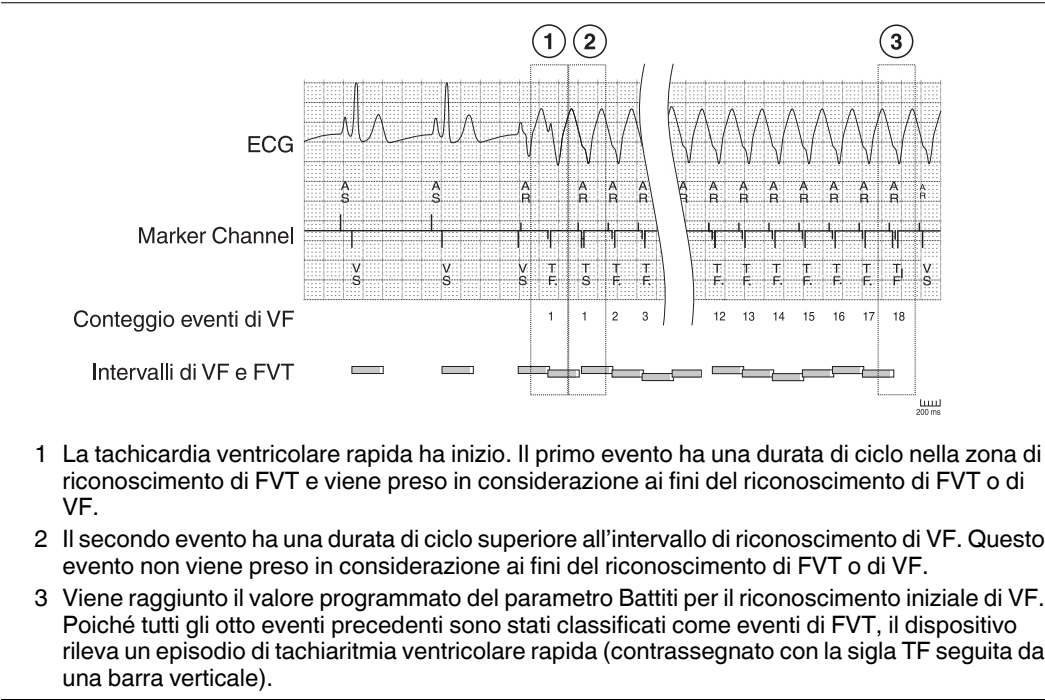**Figura 134.** Riconoscimento di un episodio di FVT via VF



**8.2.2.5 Riconoscimento di una tachiaritmia ventricolare che oscilla tra le due zone: il riconoscimento tramite conteggio combinato**

Il riconoscimento tramite conteggio combinato è stato appositamente studiato per impedire un ritardo nel riconoscimento di VF quando la tachiaritmia ventricolare oscilla tra le zone di VF e di VT. Il riconoscimento tramite conteggio combinato avviene se la somma degli eventi di VT e VF raggiunge 7/6 del valore programmato del parametro Battiti per il riconoscimento iniziale di VF. Se, ad esempio, il valore programmato del parametro Battiti per il riconoscimento iniziale di VF è 18/24, il riconoscimento tramite conteggio combinato avviene quando il conteggio raggiunge 7/6 di 18, ovvero 21. Dopo il riconoscimento tramite conteggio combinato, vengono esaminati gli ultimi otto eventi. Se uno degli otto eventi viene classificato come evento di VF, la VF viene rilevata. In caso contrario viene rilevata la VT (o la FVT). Il riconoscimento tramite conteggio combinato si applica anche al riconoscimento successivo.


**Note:**

- Il riconoscimento tramite conteggio combinato non è programmabile e si attiva automaticamente quando il riconoscimento di VT è attivato. Il riconoscimento tramite conteggio combinato ha inizio quando si sono verificati almeno sei eventi di VF.
- Gli eventi nella zona di monitoraggio non sono inclusi nel riconoscimento tramite conteggio combinato.

**8.2.2.6 Monitoraggio delle tachiaritmie ventricolari senza l'erogazione di alcuna terapia**

La zona di monitoraggio può essere utilizzata per programmare un range di frequenze per il rilevamento della tachicardia ventricolare senza erogare alcuna terapia.

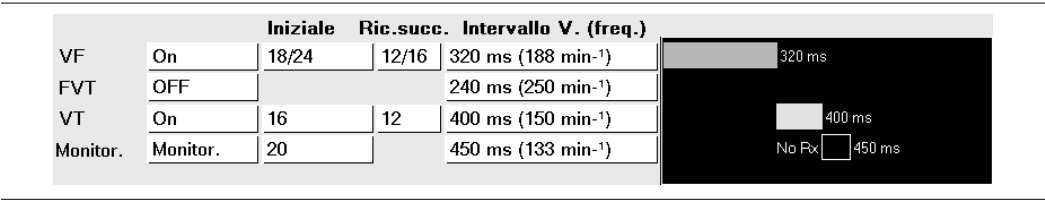**Figura 135.** Parametri del riconoscimento di VT in monitoraggio



Quando il riconoscimento di VT è attivato, la zona di monitoraggio può funzionare come zona diagnostica per monitorare le VT non mortali con durate del ciclo più lunghe dell'intervallo di riconoscimento di VT (cfr. la Figura 135).

Quando il riconoscimento di VT non è attivato, è possibile programmare una zona di monitoraggio per monitorare qualsiasi tachiaritmia ventricolare con una durata del ciclo più lunga dell'intervallo di riconoscimento di VF.

**Note:**

- Il riconoscimento di un episodio di VF, VT o FVT fa cessare l'episodio di monitoraggio di VT e sospende l'operazione di monitoraggio di VT finché la tachiaritmia non cessa.
- Le funzioni di discriminazione SVT programmate (Insorgenza, Stabilità e PR Logic) si applicano alla zona di monitoraggio di VT.

### **8.2.2.7 Riconoscimento di episodi di tachiaritmia ventricolare non sostenuta**

Se almeno cinque battiti rientrano in qualsiasi zona di riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari programmata (ma di numero inferiore rispetto al valore programmato dei battiti per il riconoscimento iniziale), l'episodio viene classificato come VT non sostenuta (VT-NS). Se, ad esempio, si verificano cinque o più intervalli nella zona di VT che non sono sufficienti a rilevare un episodio di VT, viene rilevata la VT-NS.

Dopo l'interrogazione del dispositivo, è possibile selezionare gli episodi di VT-NS dal Diario episodi. Per ulteriori informazioni sul diario episodi, cfr. la Sezione 5.5, "Visualizzazione dei dati sugli episodi aritmici e impostazione delle preferenze per la raccolta dati", pagina 144.

### **8.2.2.8 Valutazione del ritmo ventricolare dopo la terapia**


Dopo l'erogazione di una terapia, il dispositivo valuta il ritmo ventricolare, per determinare se l'episodio è ancora in corso.

**Riconoscimento successivo** – La tachiaritmia ventricolare viene riconosciuta nuovamente dal dispositivo se viene raggiunto il valore programmato del parametro Battiti di VF o VT per riconoscimento successivo. In tal caso, il dispositivo eroga la successiva sequenza di terapie programmata per la tachiaritmia ventricolare riconosciuta nuovamente e valuta di nuovo il ritmo per il riconoscimento successivo o la cessazione.

**Note:**

- È possibile accelerare il riconoscimento successivo programmando i battiti di VF e VT per il riconoscimento successivo su valori inferiori rispetto al valore dei battiti per il riconoscimento iniziale di VF e VT.
- Le funzioni di discriminazione SVT non sono attive durante il riconoscimento successivo, ad eccezione della funzione Stabilità, che viene sempre attivata dopo tre eventi di VT consecutivi.

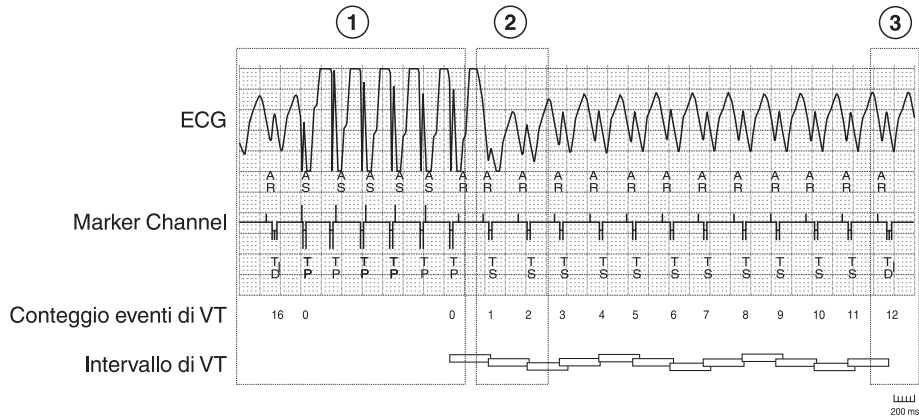

**Figura 136.** Riconoscimento successivo di VT dopo erogazione di terapia

- 1 Viene riconosciuto un episodio di VT e il dispositivo eroga una terapia di ATP Burst.
- 2 Dopo la terapia di ATP Burst, il dispositivo continua ad individuare gli eventi di VT.
- 3 Quando il numero di eventi di VT raggiunge il valore programmato del parametro Battiti di VT per riconoscimento successivo, la VT viene nuovamente riconosciuta dal dispositivo.

**Fusione delle zone** – Per assicurare l'erogazione di terapie sufficientemente aggressive quando viene programmato il riconoscimento di FVT, durante un riconoscimento successivo il dispositivo unisce le zone di riconoscimento nel modo seguente:

- Se il riconoscimento di FVT è programmato su FVT via VT e viene rilevato un episodio di FVT o di VF, la zona di VT si fonde con la zona di FVT. Una volta effettuata la fusione delle zone, l'episodio non può essere classificato per il riconoscimento successivo come ritmo VT più lento.
- Se il riconoscimento di FVT è programmato su FVT via VF e viene rilevato un episodio di VF, la zona di FVT si fonde con la zona di VF. Una volta avvenuta la fusione delle zone, l'episodio non può essere classificato per il riconoscimento successivo come ritmo FVT più lento.

La configurazione della zona unita resta attiva finché l'episodio non termina.

### 8.2.2.9 Valutazione del ritmo ventricolare per la cessazione

Il dispositivo stabilisce che l'episodio è cessato se otto intervalli ventricolari consecutivi sono di durata pari o superiore all'intervallo di riconoscimento di VT programmato o se trascorrono 20 s durante i quali la media degli ultimi dodici intervalli ventricolari è sempre di durata superiore all'intervallo di riconoscimento di VT.

Se il riconoscimento di VT è stato programmato su Off, il dispositivo stabilisce che l'episodio è terminato se otto intervalli ventricolari consecutivi sono di durata pari o superiore all'intervallo di riconoscimento di VF programmato o se trascorrono 12 s durante i quali la media degli ultimi dodici intervalli ventricolari è sempre di durata superiore all'intervallo di riconoscimento di VF.


#### **8.2.2.10 Funzioni di discriminazione SVT per il riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari**

Per impedire che le tachicardie sopraventricolari condotte (SVT) vengano trattate come tachiaritmie ventricolari, il dispositivo dispone delle seguenti funzioni:

**PR Logic** – PR Logic è una serie di funzioni di discriminazione di SVT che inibiscono il riconoscimento di VT/VF se il ritmo manifesta le caratteristiche tipiche di un'origine sopraventricolare. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 8.3, "Discriminazione della VT/VF dalla SVT con la funzione PR Logic", pagina 322.

**Insorgenza** – La funzione Insorgenza è stata appositamente studiata per impedire che la tachicardia sinusale venga trattata come una tachicardia ventricolare. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 8.4, "Come distinguere la tachicardia sinusale dalla VT con la funzione Insorgenza", pagina 328.

**Stabilità** – La funzione Stabilità è stata appositamente studiata per impedire che gli episodi di fibrillazione atriale condotta vengano trattati come una tachicardia ventricolare. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 8.5, "Come distinguere l'AT/AF dalla VT utilizzando la funzione Stabilità", pagina 334.

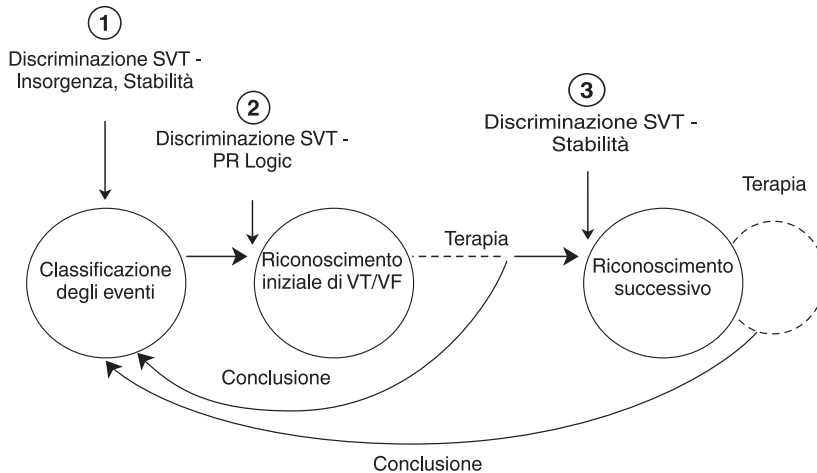**Figura 137.** Panoramica della funzione di discriminazione SVT

- 1 Insorgenza e Stabilità inibiscono il riconoscimento impedendo il raggiungimento del valore programmato del parametro Battiti per il riconoscimento iniziale.
- 2 PR Logic inibisce il riconoscimento e l'erogazione della terapia dopo il raggiungimento del valore programmato del parametro Battiti per il riconoscimento iniziale.
- 3 La Stabilità è attiva anche nella fase di riconoscimento successivo.

### 8.2.3 Alcune considerazioni sulla programmazione del riconoscimento di VT/VF

**Intervalli di riconoscimento degli episodi di VF, FVT e VT** – Per consentire normali variazioni nell'intervallo di tachicardia, occorre programmare gli intervalli di riconoscimento di VF, FVT e VT ad una distanza di almeno 40 ms gli uni dagli altri.

**Riconoscimento delle tachiaritmie e stimolazione antibradicardica** – Per ridurre le possibilità che la stimolazione antibradicardica possa interferire con il riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari, il programmatore limita i valori di parametro disponibili per le frequenze di stimolazione, gli intervalli di stimolazione e gli intervalli di riconoscimento.

**Parametro minimo dell'intervallo di riconoscimento di VF** – La programmazione dell'intervallo di riconoscimento di VF su un valore inferiore a 300 ms può aumentare le probabilità di mancato riconoscimento di VF.

**Parametro massimo dell'intervallo di riconoscimento di VF** – La programmazione dell'intervallo di riconoscimento di VF su un valore superiore a 350 ms può aumentare le

probabilità di riconoscimento errato di una fibrillazione atriale condotta rapidamente come VF o FVT via VF.

**Riconoscimento di VT, AF/Afl e Tach. Sinus.** – Quando il riconoscimento di VT è impostato su On o il monitoraggio di VT è impostato su Monitoraggio, anche le opzioni AF/Afl e Tach. Sinus. vengono automaticamente impostate su On. Per ulteriori informazioni sulle funzioni AF/Afl e Tach. Sinus., vedere la Sezione 8.3, “Discriminazione della VT/VF dalla SVT con la funzione PR Logic”, pagina 322.

**Riconoscimento di AT/AF** – Se è stato attivato il riconoscimento di AT/AF, la funzione Battiti per attivare il monitoraggio di VT non può essere impostata su un valore superiore a 32, mentre la funzione Battiti per il riconoscimento iniziale di VT/VF non può essere impostata su un valore superiore a 28.

**Riconoscimento di VF di backup** – Per assicurare il riconoscimento di VF di backup durante gli episodi di monitoraggio di VT, FVT e di VT (se il monitoraggio di VT, FVT e VT è attivato), dovrà essere attivato anche il riconoscimento di VF.

**Battiti per attivare il monitoraggio di VT** – Il valore della funzione Battiti per attivare il monitoraggio di VT dovrà essere superiore a quello della funzione Battiti per il riconoscimento iniziale di VF e VT.

## 8.2.4 Programmazione del riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Riconoscimento (V.)...
  - ▷ VF <On>
  - ▷ Iniz. di VF
  - ▷ Riconosc. successivo di VF
  - ▷ Intervallo V. di VF (frequenza)
  - ▷ FVT <via VF, via VT>
  - ▷ Intervallo V. di FVT (Frequenza)
  - ▷ VT <On>
  - ▷ Iniz. di VT
  - ▷ Riconosc. successivo di VT
  - ▷ Intervallo V. di VT (frequenza)
  - ▷ Monitoraggio <Monitor>
  - ▷ Monitoraggio: battiti iniziali
  - ▷ Monitoraggio Intervallo di V. (frequenza)

## 8.2.5 Valutazione del riconoscimento di VT/VF

### 8.2.5.1 La schermata Quick Look II

Selezionare l'icona Dati

⇒ Quick Look II

La schermata Quick Look II mostra il numero di episodi di VT, FVT e VF monitorata e trattata dall'ultima sessione.

### 8.2.5.2 La schermata Dati - Episodi aritmici


Selezionare l'icona Dati

⇒ Diagnostica clinica

⇒ Episodi aritmia


L'opzione Diagramma consente di visualizzare un diagramma degli intervalli degli episodi ed i punti di riconoscimento e di cessazione.

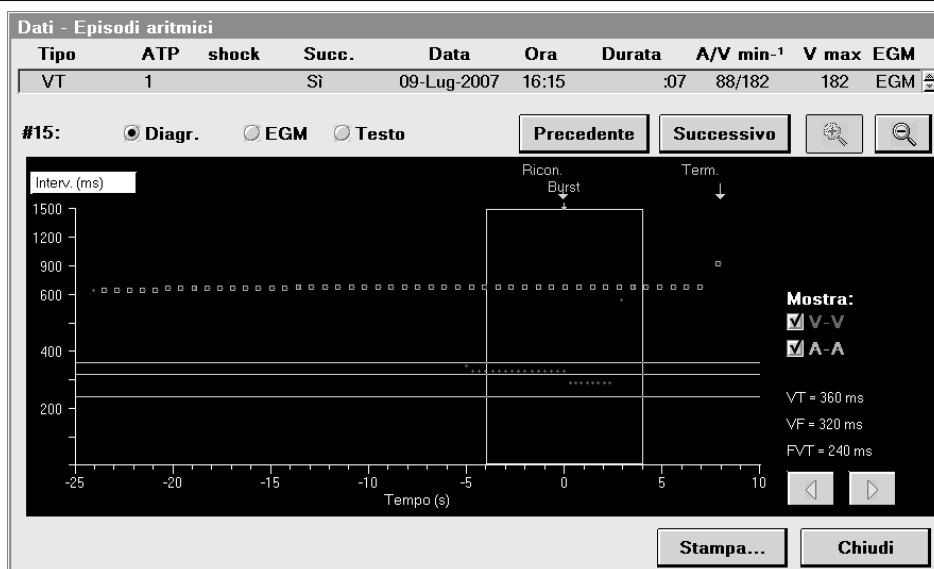**Figura 138.** Diagramma di un episodio



L'opzione EGM consente di visualizzare i tracciati EGM che mostrano il punto di riconoscimento, l'erogazione della terapia e la conclusione.

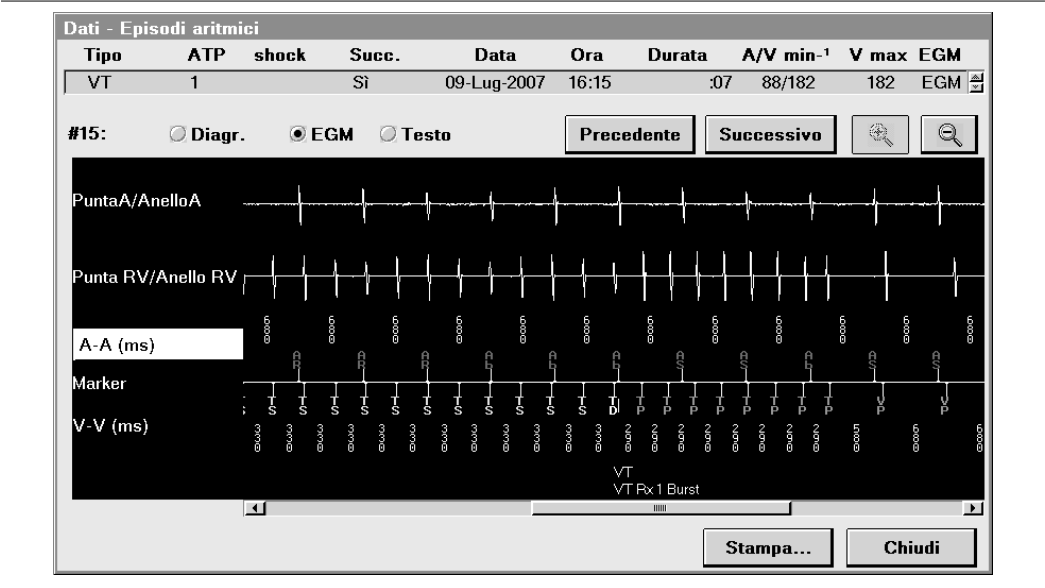Figura 139. EGM di un episodio



L'opzione Testo episodio fornisce un riepilogo testuale dell'episodio.

Figura 140. Testo episodio

Dati - Episodi aritmici

Tipo	ATP	shock	Succ.	Data	Ora	Durata	A/V min <sup>-1</sup>	V max	EGM
VT	1		Sì	09-Lug-2007	16:15	:07	88/182	182	EGM

#15:

☐Diagr.

☐EGM

☒Testo

Precedente

Successivo

Episodio #15: 09-Lug-2007 16:15:33

Riepilogo dell'episodio

Tipo iniziale

Durata

Frequenza massima A/V

V. mediano

Stabilità V.

Attività durante insorgenza

Ultima terapia

VT (spontaneo)

7 s

Sconosc./182 min<sup>-1</sup>

182 min<sup>-1</sup> (330 ms)

0 ms - 0 ms

Riposo, sensore = 59 min<sup>-1</sup>

VT Rx1: Burst Riuscita

Riconosc. Iniz. di VT/VF

Sospeso per

No

Terapie

Erogato

Carica

Ohm

Energia

VT Rx1 Burst

Seq 1

Terminazione

Impostazioni parametri

Iniziale

Ric.succ.

Intervallo V. (freq.)

VF

On

18/24

12/16

320 ms (188 min<sup>-1</sup>)

FVT

via VF

240 ms (250 min<sup>-1</sup>)

Stampa...


Chiudi

8.2.5.3 Memoria Flashback

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Memoria Flashback

Nella schermata Memoria Flashback vengono visualizzati i dati su intervalli e marker prima dell'ultima occorrenza di un episodio di VT o di VF. Il tempo totale trascorso viene rappresentato graficamente e confrontato con la durata dell'intervallo in ms.

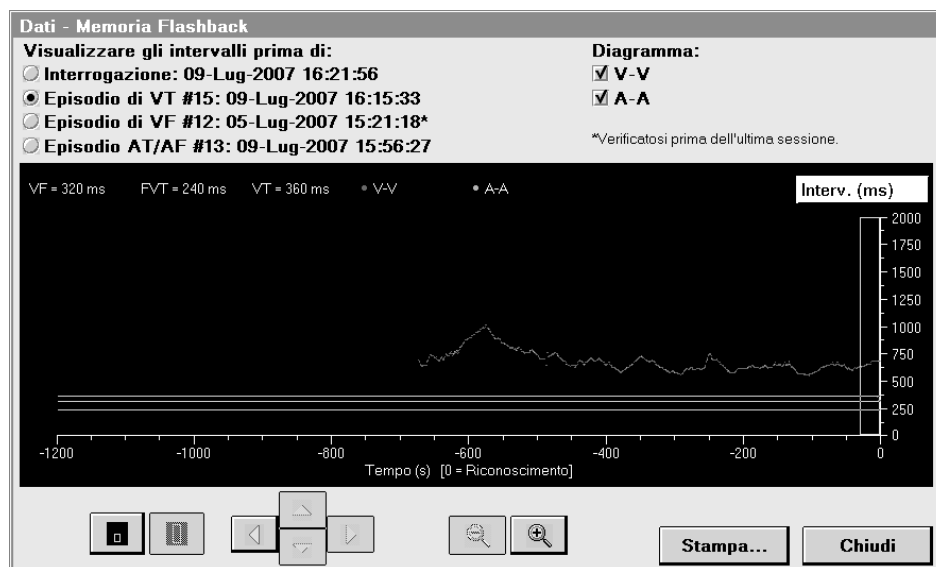**Figura 141.** La schermata Memoria Flashback

#### 8.2.5.4 Rapporto del Cardiac Compass


Selezionare l'icona Dati

⇒ Diagnostica clinica

⇒ Tendenze Cardiac Compass (solo rapporto)

I dati sulle tendenze Cardiac Compass includono informazioni sugli episodi quotidiani di VT/VF trattata, sulla frequenza ventricolare durante gli episodi di VF, FVT o VT e sugli episodi quotidiani di VT non sostenuta

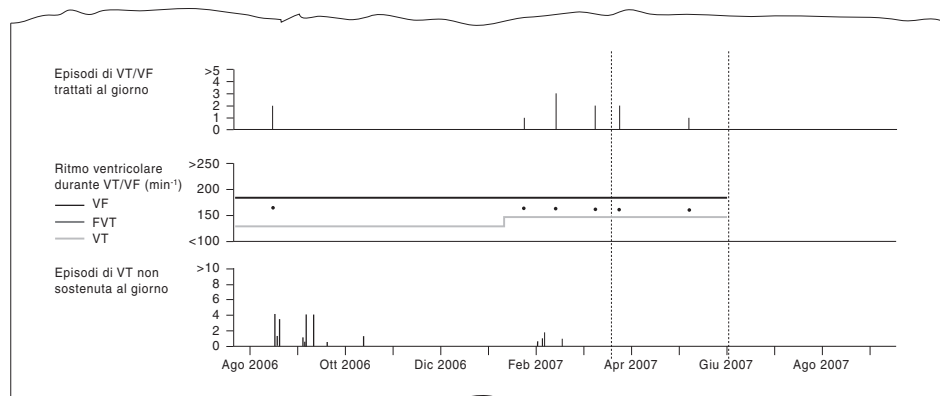

**Figura 142.** Dati sulle tendenze del Cardiac Compass

### 8.2.5.5 Contatore episodi di VT/VF

Selezionare l'icona Dati


⇒ Diagnostica clinica

⇒ Contatori

⇒ Episodi di VT/VF

Il contatore degli episodi di VT/VF fornisce un riepilogo dell'attività di VT/VF per l'ultima sessione, la sessione precedente e la durata del dispositivo, compresi il numero di episodi di VF, FVT e VT ed i casi di inibizione della terapia.

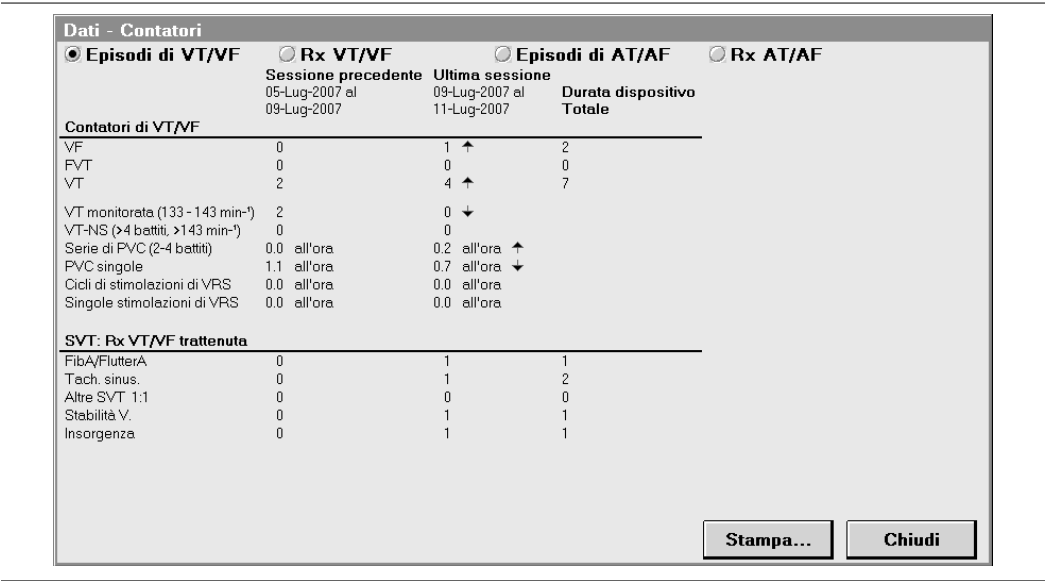Figura 143. Contatore degli episodi di VT/VF



8.3 Discriminazione della VT/VF dalla SVT con la funzione PR Logic


Nei pazienti con tachicardia sopraventricolare (SVT) possono verificarsi frequenze ventricolari nella zona di riconoscimento di VT/VF. Se sostenute, queste frequenze ventricolari rapide possono causare l'erogazione inappropriata di una terapia per tachiaritmia. L'individuazione e l'inibizione di una SVT condotta riduce le possibilità di erogare una terapia inadeguata per alte frequenze ventricolari che non sono ventricolari all'origine.

8.3.1 La soluzione offerta dal sistema è la funzione PR Logic

La funzione PR Logic ricorre ad un'analisi di schemi e frequenze per distinguere le SVT dalle tachiaritmie ventricolari autentiche ed inibire il riconoscimento inappropriato e l'erogazione di terapie inadeguate per VT/VF durante gli episodi di SVT condotte rapidamente.

### 8.3.2 Funzionamento del PR Logic

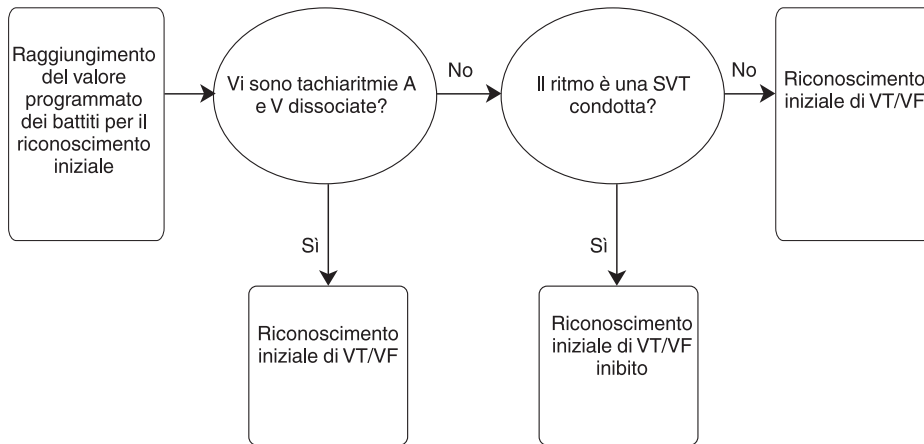**Figura 144.** Panoramica della funzione PR Logic



Al raggiungimento del valore programmato per il parametro Battiti per il riconoscimento iniziale, la funzione PR Logic analizza gli schemi e la tempistica di attivazione in entrambe le camere cardiache per acquisire informazioni:

- sulle frequenze atriali e ventricolari
- sul numero e la posizione degli eventi atriali rispetto agli eventi ventricolari
- sull'associazione o la dissociazione degli eventi atriali e ventricolari
- sulla regolarità o l'irregolarità del ritmo ventricolare

Se l'analisi indica la presenza di tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari dissociate, il dispositivo rileva e tratta la tachiaritmia ventricolare. Se l'analisi determina che la tachiaritmia ventricolare è una SVT condotta come la fibrillazione atriale, il flutter atriale, la tachicardia sinusale o la tachicardia giunzionale, il dispositivo inibisce il riconoscimento della tachiaritmia ventricolare e la terapia.

**Nota:** durante l'elaborazione, la funzione PR Logic valuta se gli eventi atriali possono essere far field di onde R.

Vi sono tre opzioni distinte della funzione PR Logic che possono essere programmate su On: AF/Flutter A, Tach. Sinus. e Altre SVT 1:1.

**AF/Flutter A (fibrillazione atriale/flutter atriale)** – La funzione AF/Flutter A è stata appositamente studiata per inibire il riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari quando il rapporto tra eventi atriali ed eventi ventricolari rilevati è superiore a 1:1 e la durata del ciclo

ventricolare non è regolare, il che indica una fibrillazione atriale condotta in modo irregolare. La funzione AF/Flutter A è stata inoltre appositamente studiata per inibire il riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari quando le informazioni sullo schema A:V mostrano una conduzione regolare 2:1 o 3:2, il che indica flutter atriale.

**Tach. Sinus. (tachicardia sinusale)** – La funzione Tach. Sinus. è stata appositamente studiata per inibire il riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari in presenza di un rapporto 1:1 per quanto concerne la conduzione di ritmi atriali/ventricolari rilevati che mostrano un aumento graduale della frequenza nella zona di riconoscimento e un intervallo PR simile alla conduzione anterograda normale.

**Altre SVT 1:1 (altre tachicardie sopraventricolari 1:1)** – La funzione Altre SVT 1:1 è stata appositamente studiata per distinguere le tachiaritmie dai ritmi ventricolari che derivano da depolarizzazioni atriali e ventricolari strettamente collegate (ad esempio, ritmi giunzionali come la tachicardia rientrante del nodo A-V). La funzione Altre SVT 1:1 inibisce il riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari quando le informazioni sullo schema AV indicano una SVT 1:1 con presenza di depolarizzazioni costanti e quasi simultanee delle camere.

### 8.3.2.1 Limiti per l'inibizione della terapia

**Tachiaritmia sopraventricolare e ventricolare dissociata** – Nel caso in cui si verifichino tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari simultaneamente e l'analisi PR Logic mostri che i ritmi sono dissociati e che il ritmo ventricolare non è una SVT condotta, il dispositivo riconosce la tachiaritmia ventricolare erogando la terapia ventricolare in una determinata zona. Nel testo sull'episodio, la VT, la VF o la FVT riconosciuta viene registrata come VT (+SVT), VF (+SVT) o FVT (+SVT).

**Limite V. di SVT** – Il parametro Limite V. di SVT consente di limitare il range di frequenze in presenza delle quali la funzione PR Logic inibisce l'erogazione delle terapie. Quando la media degli ultimi dodici intervalli ventricolari rilevati è più breve del Limite V. di SVT programmato, le funzioni PR Logic non inibiscono l'erogazione della terapia. Il Limite V. di SVT può essere programmato su un valore compreso tra 240 ms e l'intervallo della zona di riconoscimento più lungo.

**Nota:** il Limite V. di SVT non può inoltre essere programmato su una durata superiore all'intervallo di riconoscimento di VT.

**Tempo massimo di sospensione** – È possibile programmare una durata massima di inibizione del riconoscimento di una tachiaritmia ventricolare da parte della funzione PR Logic. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 8.6.

### 8.3.3 Alcune considerazioni sulla programmazione della funzione PR Logic

**Avvertenza:** non attivare la funzione Altre SVT 1:1 fino all'avvenuta stabilizzazione dell'elettrocateretere atriale (circa 1 mese dopo l'impianto). In caso di spostamento e migrazione nel ventricolo da parte dell'elettrocateretere atriale, la funzione Altre SVT 1:1 potrebbe inibire in maniera inappropriata il riconoscimento e la terapia.

**Attenzione:** fare attenzione durante la programmazione della funzione Altre SVT 1:1 nei pazienti con conduzione retrograda lenta 1:1 durante un episodio di VT o VF. Questa funzione potrebbe infatti inibire in modo indesiderato la terapia per VT/VF in questi pazienti.

**Criteri PR Logic e riconoscimento di VT** – Se si attiva il Monitoraggio o il Riconoscimento di VT, il dispositivo attiva anche le funzioni PR Logic, AF/Flutter A e Tach. Sinus..

**Intervalli di riconoscimento e limite V. di SVT** – Il valore del Limite V. SVT deve essere inferiore all'intervallo di riconoscimento di VT. Se il riconoscimento di VT è disattivato, il valore del Limite V. di SVT deve essere inferiore o pari all'intervallo di riconoscimento di VF.

### 8.3.4 Programmazione della funzione PR Logic

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Riconoscimento (V.)...
- ▷ AF/AFI
- ▷ Tach. sinus.
- ▷ Altre SVT 1:1
- ▷ Limite V. di SVT

### 8.3.5 Valutazione della funzione PR Logic

#### 8.3.5.1 Visualizzazione del testo sull'episodio

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Episodi aritmia
- ⇒ Testo

Il testo sull'episodio fornisce informazioni sugli episodi di SVT e sulle funzioni PR Logic che sono state attivate.

**Figura 145.** Testo sull'episodio che indica le funzioni PR Logic attivate

Dati - Episodi aritmici							
Tipo	ATP	shock	Succ.	Data	Ora	Durata	A/V min <sup>-1</sup> V max EGM
SVT-AF				11-Lug-2007	12:52	:07	353/182 182 EGM

#23: ☐ Diagn. ☐ EGM ☒ Testo

Precedente Successivo

Episodio #23: 11-Lug-2007 12:52:47

Riepilogo dell'episodio		Criteri di SVT attivati	
Tipo iniziale	SVT - AF/Afl (spontaneo)	FibA/FlutterA	
Durata	7 s		
Frequenza massima A/V	375 min <sup>-1</sup> /182 min <sup>-1</sup>		
V. mediano	176 min <sup>-1</sup> (340 ms)		
Attività durante insorgenza	Riposo, sensore = 49 min <sup>-1</sup>		
Durante l'episodio, il dispositivo era in Cambio Modo.			
Episodio trasformatosi in un episodio di VT/VF.			

Impostazioni parametri	Iniziale	Ric.succ.	Intervallo V. (freq.)
VF	On	18/24	12/16
FVT	via VF		
VT	On	16	12
Monitor.	Monitor.	20	

PR Logic	Altre opzioni avanzate
AF/Afl	On
Stabilità	30 ms

Stampa... Chiudi


### 8.3.5.2 Annotazioni Decision Channel

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Episodi aritmia
- ⇒ EGM

Le annotazioni PR Logic vengono visualizzate nel Decision Channel quando la funzione PR Logic inibisce il riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari. Le seguenti tre annotazioni sono annotazioni Decision Channel della funzione PR Logic: AF (AF/Flutter A), ST (Tach. Sinus.), SV (Altre SVT 1:1).

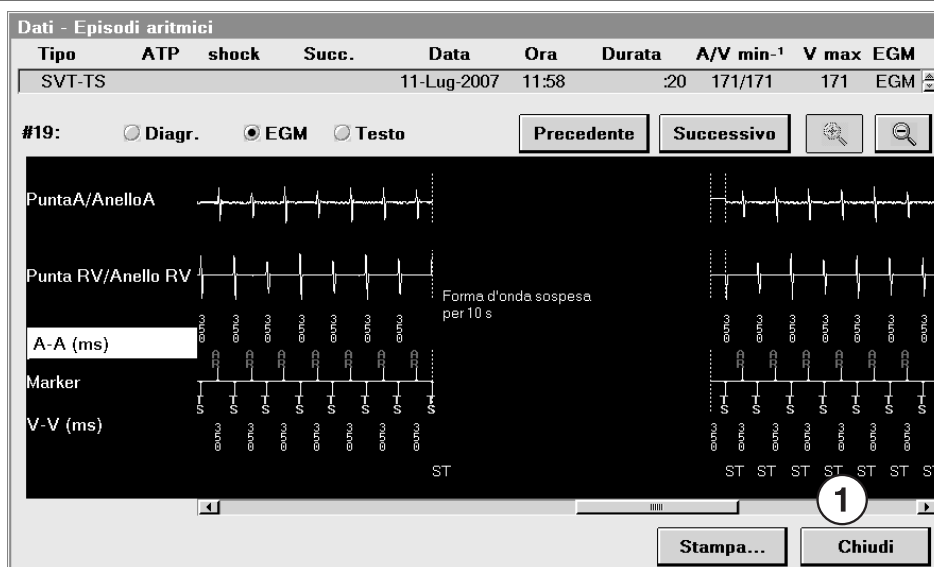**Figura 146.** Annotazioni ST (Tach. Sinus.) Decision Channel in una registrazione di episodi memorizzata



1 Annotazioni ST (Tach. Sinus.)

Le annotazioni Decision Channel vengono visualizzate anche nella registrazione in tempo reale. Nella registrazione in tempo reale, viene stampata una singola annotazione alla prima inibizione del riconoscimento di VT/VF da parte di un'opzione PR Logic o in caso di variazione di un'opzione PR Logic che al momento inibisce il riconoscimento di VT/VF.


### 8.3.5.3 Rapporto delle tendenze del Cardiac Compass

Selezionare l'icona Dati

⇒ Diagnostica clinica

⇒ Tendenze Cardiac Compass (solo rapporto)

Il rapporto Tendenze Cardiac Compass fornisce informazioni sulla durata degli episodi di AT/AF nel paziente e sulla frequenza ventricolare durante gli episodi di AT/AF.

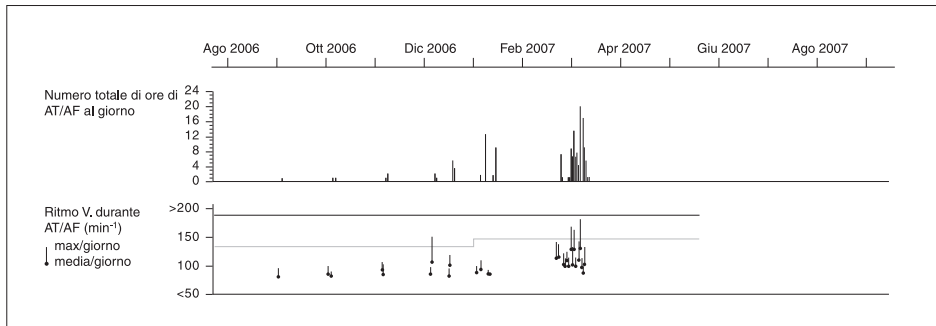**Figura 147.** Dati sulle tendenze Cardiac Compass

## 8.4 Come distinguere la tachicardia sinusale dalla VT con la funzione Insorgenza

I pazienti con tachicardia sinusale possono mostrare frequenze ventricolari nella zona di riconoscimento di VT. Se sostenute, queste frequenze ventricolari rapide possono causare l'erogazione inappropriata di una terapia per tachiaritmia ventricolare. La tachicardia sinusale può essere generalmente distinta dalla tachicardia ventricolare in base alla velocità di aumento della frequenza ventricolare. Di solito, la tachicardia sinusale è caratterizzata da un graduale aumento della frequenza ventricolare, mentre la tachicardia ventricolare mostra un improvviso aumento della frequenza ventricolare.


### 8.4.1 Soluzione del sistema: funzione Insorgenza

La funzione Insorgenza può essere di aiuto per prevenire il riconoscimento di una tachicardia sinusale come VT esaminando l'accelerazione della frequenza ventricolare. Se la frequenza ventricolare aumenta gradualmente, come di solito accade durante la tachicardia sinusale, il dispositivo non classifica come eventi di VT gli eventi ventricolari rilevati che si verificano nella zona di riconoscimento di VT. Se la frequenza ventricolare aumenta rapidamente, come di solito accade durante un episodio di tachicardia ventricolare, il dispositivo classifica come eventi di VT gli eventi ventricolari rilevati che si verificano nella zona di riconoscimento di VT.



### 8.4.2 Come agisce la funzione Insorgenza

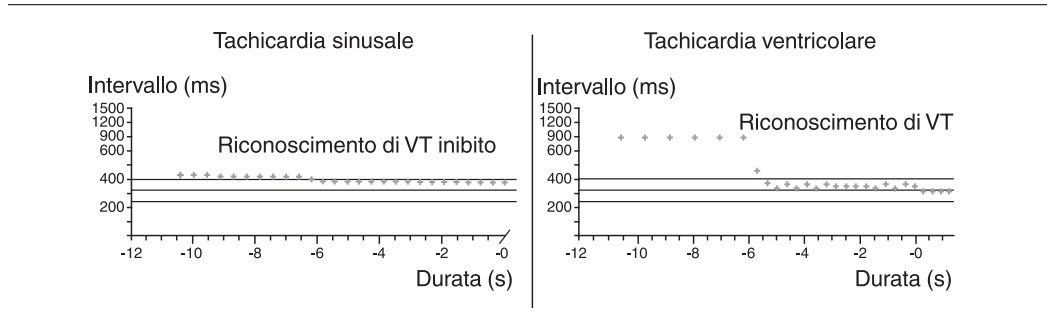
**Figura 148.** Confronto tra un'accelerazione della frequenza graduale e un'accelerazione della frequenza improvvisa



Per valutare la repentinità o la gradualità della variazione della una durata media del ciclo di una serie di quattro intervalli rispetto a quella successiva, viene utilizzato un valore programmabile per il parametro Percentuale di insorgenza. Programmando la Percentuale di insorgenza su un valore basso, per poter rilevare la VT sarà necessaria una maggiore accelerazione della frequenza da parte del dispositivo. Programmando invece la Percentuale di insorgenza su un valore alto, per poter rilevare la VT sarà necessaria una minore accelerazione della frequenza da parte del dispositivo.

Se la frequenza ventricolare accelera gradualmente, come illustrato nella Figura 149, la funzione Insorgenza impedisce la classificazione come eventi di VT degli intervalli ventricolari rilevati che si verificano nella zona di riconoscimento di VT.

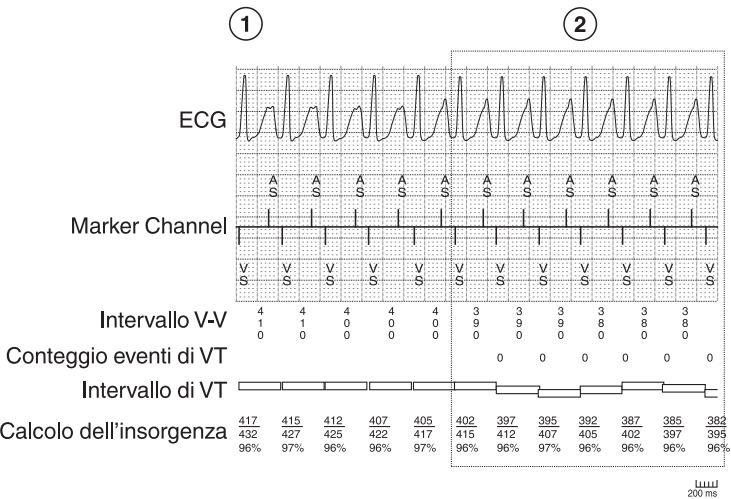
**Figura 149.** Come agisce la funzione Insorgenza durante una frequenza ventricolare ad accelerazione graduale



- 1 La frequenza ventricolare sta accelerando (le durate del ciclo di intervallo stanno diminuendo).
- 2 La frequenza ventricolare si trova ora nella zona di riconoscimento di VT, ma l'accelerazione è graduale. La durata media del ciclo di qualsiasi serie di quattro intervalli non è mai pari o inferiore all'81% della serie precedente di quattro intervalli (l'81% è il valore della percentuale di insorgenza in questo esempio).

Se la frequenza ventricolare accelera rapidamente, come illustrato nella Figura 150, la funzione Insorgenza consente la classificazione come eventi di VT degli intervalli ventricolari rilevati che si verificano nella zona di riconoscimento di VT.

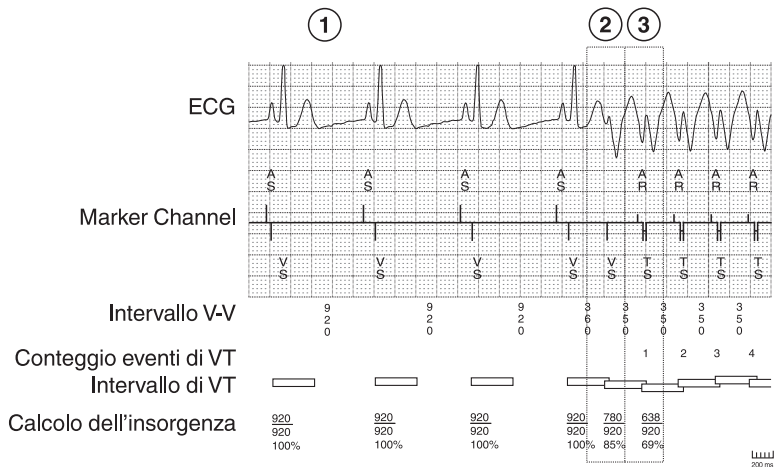**Figura 150.** Come agisce la funzione Insorgenza durante una frequenza ventricolare ad accelerazione rapida



- 1 La frequenza ventricolare è lenta e stabile.
- 2 La frequenza ventricolare aumenta improvvisamente ed il primo intervallo si verifica nella zona di riconoscimento di VT. Tuttavia, dal momento che l'intervallo ventricolare medio è pari all'85% della media dei quattro intervalli precedenti (più lento della percentuale di insorgenza programmata dell'81%), questo intervallo non viene classificato come un evento di VT.
- 3 L'intervallo ventricolare medio è ora pari al 69% della media dei quattro intervalli precedenti (più rapido della percentuale di insorgenza programmata dell'81%) e pertanto viene classificato come evento di VT.

### 8.4.2.1 Eventi di monitoraggio di VT e funzione Insorgenza

La funzione Insorgenza si applica sia al riconoscimento che al monitoraggio di VT.

### 8.4.2.2 Come assicurare un riconoscimento appropriato degli eventi di VT e VF

**Episodi aritmici continuati** – La funzione Insorgenza non influenza il riconoscimento successivo delle tachiaritmie ventricolari. Se viene riconosciuto un episodio di VT, FVT o VF, la funzione Insorgenza viene sospesa fino alla conclusione dell'episodio.

**Riconoscimento di VF** – La funzione Insorgenza non influenza il riconoscimento di VF. La funzione Insorgenza può impedire la classificazione degli eventi ventricolari rilevati nella zona di riconoscimento di VT come eventi di VT ed influenzare pertanto il riconoscimento di VT, il riconoscimento di FVT via VT ed il riconoscimento tramite conteggio combinato.

### 8.4.3 Alcune considerazioni sulla programmazione della funzione Insorgenza

**Episodi di VT indotta dall'esercizio** – L'insorgenza può ritardare il riconoscimento di VT reali nei pazienti in cui si manifestano episodi di tachicardia ventricolare indotta dall'esercizio fisico.

**Riduzione della sensibilità del riconoscimento di VT** – Impostando la percentuale di insorgenza su un valore basso, è meno probabile che il dispositivo rilevi in maniera indesiderata episodi di tachicardia sinusale come la tachicardia ventricolare. Tuttavia, potrebbero esservi meno probabilità di rilevare una tachicardia ventricolare reale.

### 8.4.4 Programmazione della funzione Insorgenza

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Riconoscimento (V.) ...
  - ⇒ Insorgenza ...
    - ▷ Insorgenza <On, Monitor>
    - ▷ Percentuale

### 8.4.5 Valutazione della funzione Insorgenza


La schermata Dati - Episodi aritmici e l'opzione Monitoraggio insorgenza possono essere di aiuto nella valutazione delle prestazioni della funzione Insorgenza.

#### 8.4.5.1 La schermata Dati - Episodi aritmici

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
  - ⇒ Episodi aritmia
    - ⇒ EGM

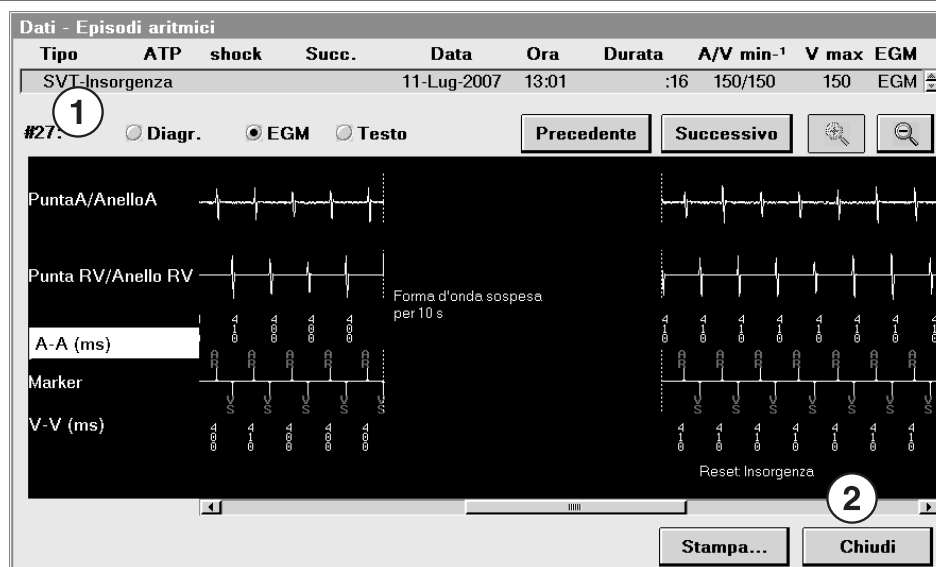**Figura 151.** Annotazione Decision Channel sull'insorgenza indicante l'inibizione del riconoscimento



- 1 Un episodio per il quale il riconoscimento è inibito viene indicato da "SVT-Insorgenza".
- 2 Nel Decision Channel della visualizzazione EGM, gli eventi ventricolari per i quali il riconoscimento di VT è stato inibito dalla funzione Insorgenza vengono indicati da "Reset: Insorgenza".

### 8.4.5.2 L'opzione Monitoraggio insorgenza

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Riconoscimento (V.) ...
  - ⇒ Insorgenza ...
    - ▷ Insorgenza <Monitor>
    - ▷ Percentuale

L'impostazione Monitoraggio può essere utilizzata per testare la potenziale efficacia della funzione Insorgenza sul paziente senza attivarla.

Impostando la funzione Insorgenza su Monitoraggio, il dispositivo esegue tutti i calcoli associati alla funzione Insorgenza. Tali calcoli non influenzano tuttavia la classificazione degli intervalli di VT. Se il dispositivo rileva un episodio di VT o di FVT via VT per il quale il riconoscimento sarebbe stato inibito nel caso in cui funzione Insorgenza fosse stata attivata, l'episodio viene annotato nel testo sull'episodio.

## **8.5 Come distinguere l'AT/AF dalla VT utilizzando la funzione Stabilità**

La fibrillazione atriale può far accelerare la frequenza ventricolare del paziente nella zona di riconoscimento di VT, attivando eventualmente l'erogazione indesiderata di una terapia per tachiaritmia ventricolare. La fibrillazione atriale è solitamente associata ad una frequenza ventricolare (instabile) rapida ed irregolare. La tachicardia ventricolare autentica è di solito rapida ma regolare (stabile).


### **8.5.1 Soluzione del sistema: funzione Stabilità**

La funzione Stabilità può essere di aiuto nella prevenzione del riconoscimento della fibrillazione atriale come tachiaritmia ventricolare valutando la stabilità della frequenza ventricolare. Quando il dispositivo stabilisce che la frequenza ventricolare non è stabile, non classifica gli intervalli ventricolari come eventi di VT anche se si verificano nella zona di riconoscimento di VT.

### **8.5.2 Come agisce la funzione Stabilità**

La funzione Stabilità diventa operativa quando il dispositivo conta almeno tre eventi consecutivi di VT. Il dispositivo classifica un intervallo come instabile se la differenza tra il suo valore ed uno degli altri tre intervalli precedenti è superiore all'intervallo di stabilità programmato. Se il dispositivo classifica un intervallo come instabile, il sistema lo contrassegna come un evento ventricolare rilevato azzerando il numero di eventi di VT.

**Nota:** la funzione Stabilità è attiva per l'intera durata del riconoscimento iniziale e del riconoscimento successivo di VT e FVT tramite VT.

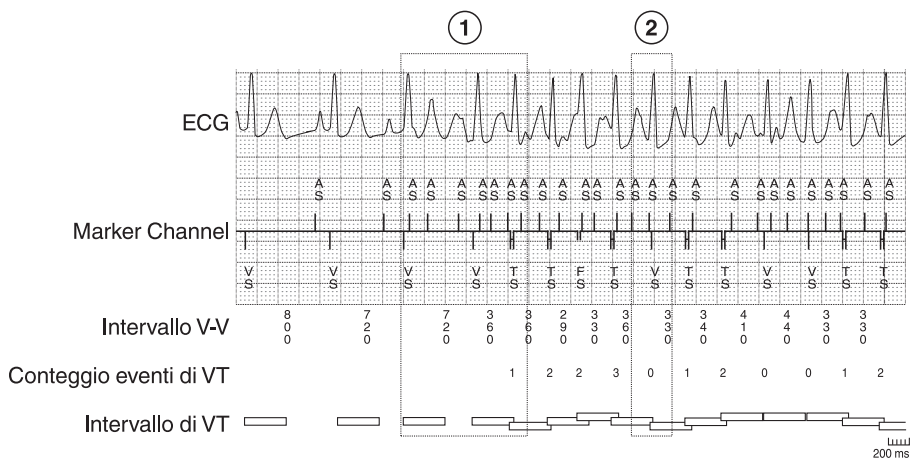**Figura 152.** Funzionamento della Stabilità durante la fibrillazione atriale

- 1 Inizia la fibrillazione atriale, che viene condotta nel ventricolo con una frequenza elevata.
- 2 Dopo tre eventi di VT, il dispositivo applica la funzione Stabilità. Poiché la differenza tra l'intervallo di 360 ms e l'intervallo di 290 ms è superiore all'intervallo di stabilità programmato (in questo caso 50 ms), il dispositivo azzerava il conteggio degli eventi di VT.

### 8.5.2.1 Eventi di monitoraggio di VT e funzione Stabilità

Se la funzione Stabilità è abilitata ed è stata programmata una frequenza sia per il riconoscimento di VT che per il monitoraggio VT, la funzione Stabilità viene applicata in maniera autonoma ad entrambi. Per poter applicare la funzione Stabilità, devono esservi almeno tre eventi di monitoraggio di VT.

### 8.5.3 Alcune considerazioni sulla programmazione della funzione Stabilità

**Intervallo di stabilità** – Un basso valore di stabilità può non consentire una variazione dell'intervallo di VT normale e ridurre pertanto la sensibilità di riconoscimento delle tachicardie ventricolari da parte del dispositivo.

### 8.5.4 Programmazione della funzione Stabilità

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Riconoscimento (V.)...
- ▷ Stabilità


### 8.5.5 Valutazione della funzione Stabilità

La schermata Dati - Episodi aritmici può essere di aiuto nella valutazione delle prestazioni della funzione Stabilità.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Episodi aritmia

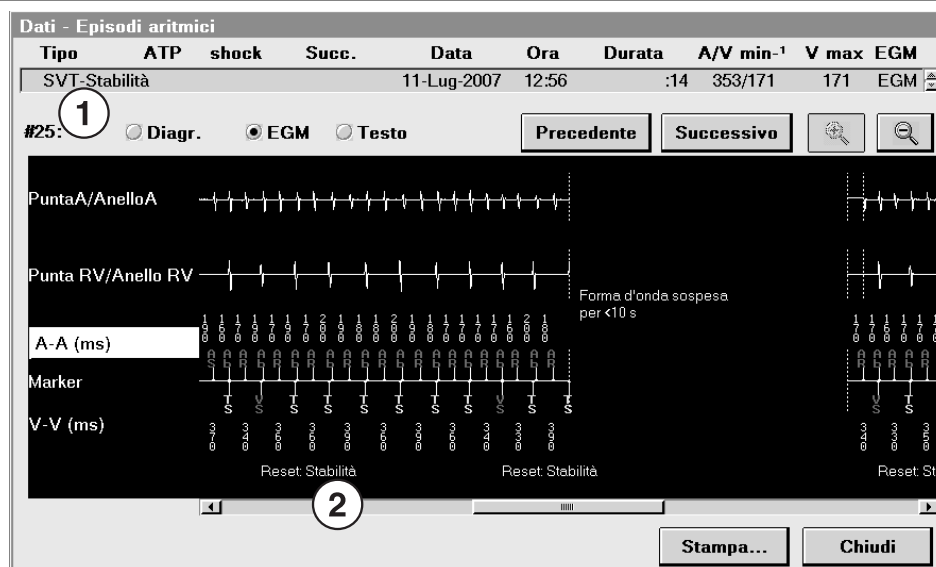**Figura 153.** Annotazione Decision Channel sulla stabilità indicante l'inibizione del riconoscimento



- 1 Un episodio per il quale riconoscimento è inibito dalla funzione Stabilità viene indicato da "SVT-Stabilità".
- 2 Nel Decision Channel della visualizzazione dell'EGM, gli eventi ventricolari per i quali il riconoscimento è stato inibito dalla funzione Stabilità viene indicato da "Reset: Stabilità".



## **8.6 Riconoscimento di tachiaritmie prolungate con l'ausilio del tempo massimo di sospensione**

Le funzioni di discriminazione SVT (Insorgenza, Stabilità e PR Logic) sono state appositamente studiate per inibire il riconoscimento e l'erogazione di terapie per frequenze ventricolari classificate dal dispositivo come di origine sopraventricolare. Per taluni pazienti, potrebbe esservi l'esigenza di annullare le funzioni di discriminazione SVT quando una tachiaritmia ventricolare si protrae oltre un determinato periodo di tempo.

### **8.6.1 La soluzione offerta dal sistema è il tempo massimo di sospensione**

La funzione Tempo massimo di sospensione consente al dispositivo di erogare la terapia per qualsiasi tachiaritmia ventricolare che dovesse protrarsi oltre un determinato periodo di tempo.

### **8.6.2 Funzionamento del tempo massimo di sospensione**

Il dispositivo dà avvio al periodo programmato del tempo massimo di sospensione in caso di riconoscimento di VF, FVT o VT o di una inibizione da parte di una funzione di discriminazione SVT. Se la tachiaritmia continua oltre il periodo di sospensione programmato, il dispositivo sospende tutte le funzioni di discriminazione SVT e consente al dispositivo di erogare la terapia.

Durante il periodo di tempo massimo di sospensione, se il dispositivo stabilisce che la discriminazione SVT non è più applicabile, avviene il riconoscimento di VF, FVT, o VT e la terapia viene immediatamente erogata, indipendentemente dal tempo massimo di sospensione.

Il sistema offre opzioni programmabili per passare direttamente ad una terapia per VF dopo il periodo di sospensione programmato oppure per erogare la terapia programmata per la zona di riconoscimento.

#### **Note:**

- Dopo l'erogazione di una terapia per VF, il dispositivo sospende normalmente il riconoscimento di VT per i diciassette eventi successivi. Tuttavia, se il dispositivo eroga una terapia per VF per un episodio rilevato di VT o FVT poiché il tempo massimo di sospensione è stato programmato su Passare a Terapia per VF, il dispositivo non sospende il riconoscimento di VT.
- Il tempo massimo di sospensione non viene applicato alle frequenze nella zona di monitoraggio di VT.

### 8.6.3 Alcune considerazioni sulla programmazione del tempo massimo di sospensione

**Tempo massimo di sospensione e terapie indesiderate** – Una volta trascorso il tempo massimo di sospensione programmato e le funzioni di discriminazione SVT sono sospese, è possibile che il dispositivo possa rilevare una tachiaritmia ventricolare che in realtà è una SVT condotta. In tal caso, potrebbe essere erogata una terapia per tachiaritmia indesiderata.

### 8.6.4 Programmazione del tempo massimo di sospensione

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ Riconoscimento (V.)...
- ⇒ Sospensione max...
  - ▷ Sospensione max
  - ▷ Terapia

### 8.6.5 Valutazione del tempo massimo di sospensione


#### 8.6.5.1 Barra di stato del dispositivo

Se durante una sessione di programmazione si supera il periodo di tempo massimo di sospensione programmato, sulla barra di stato del dispositivo compare la dicitura "Tempo massimo di sospensione".

#### 8.6.5.2 La schermata Dati - Episodi aritmici

Se il periodo di tempo massimo di sospensione termina durante un episodio, nella visualizzazione dell'EGM memorizzato per quell'episodio viene visualizzata l'annotazione Decision Channel "HT" in corrispondenza del punto in cui il periodo di tempo massimo di sospensione è terminato.

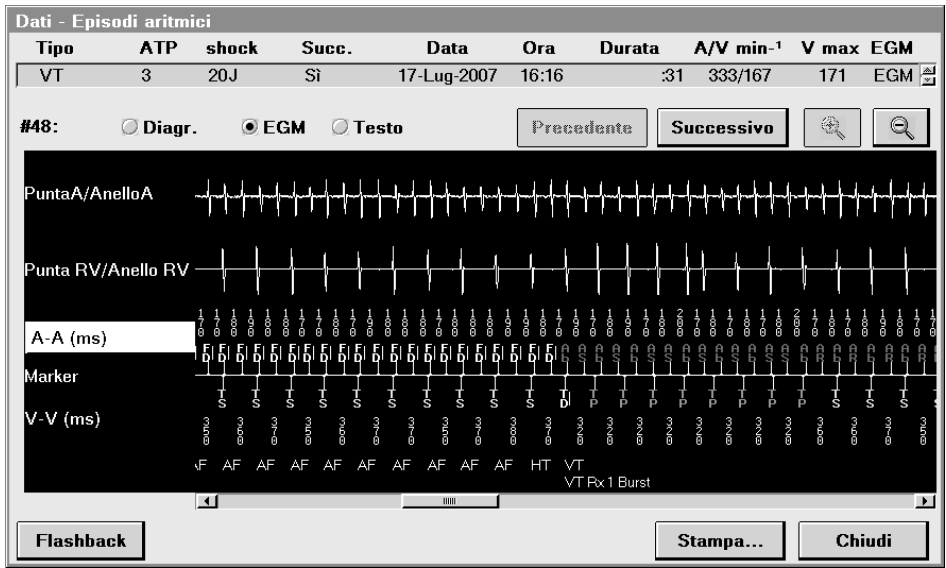Figura 154. EGM di un episodio



Nella visualizzazione di un testo su un episodio, nel campo Tipo iniziale compare la dicitura “Sospensione max”.

## 8.7 Sospensione e ripresa del riconoscimento delle tachiaritmie

In talune situazioni potrebbe rendersi necessaria la disattivazione del riconoscimento delle tachiaritmie. Durante le terapie di emergenza ed in alcuni test SEF, ad esempio, le terapie vengono erogate manualmente ed il riconoscimento e la memorizzazione degli episodi non sono necessari. Inoltre, alcuni tipi di intervento chirurgico (compresi quelli per elettrocauterizzazione, ablazione a RF e litotripsia) possono far sì che il dispositivo rilevi le tachiaritmie in maniera inappropriata ed erogare eventualmente una terapia indesiderata.

Quando il riconoscimento viene sospeso, il dispositivo interrompe temporaneamente la procedura di classificazione degli intervalli per il riconoscimento delle tachiaritmie. Il sensing e la stimolazione antibradicardica restano attivi, mentre i parametri di riconoscimento programmati non vengono modificati. Alla ripresa del riconoscimento, il dispositivo utilizza le impostazioni relative al riconoscimento precedentemente programmate. La funzione Sospendi/Ripristina si applica al riconoscimento delle tachiaritmie sia atriali che ventricolari.

### 8.7.1 Alcune considerazioni sulla sospensione del riconoscimento

Se durante una procedura di riconoscimento delle tachiaritmie il riconoscimento viene sospeso prima della sua effettiva conclusione, il riconoscimento preliminare non avverrà mai. Alla ripresa, il processo di riconoscimento ricomincerà da capo.

Se il riconoscimento viene sospeso dopo che si è verificato il riconoscimento di una tachiaritmia e lo si riprende prima che l'episodio di tachiaritmia sia terminato, il riconoscimento successivo funziona in maniera alquanto diversa per ciascun tipo di episodio:

**Episodi di AT/AF** – Sospendendo il riconoscimento di un episodio di AT/AF e riprendendolo prima che l'episodio sia terminato, il processo di riconoscimento ricomincerà da capo.

**Nota:** la sospensione del riconoscimento di una tachiaritmia non influenza il Cambio Modo. Un Cambio Modo può sempre verificarsi, indipendentemente dalla sospensione del riconoscimento di una tachiaritmia.

**Episodi di VT/FVT/VF** – Sospendendo il riconoscimento durante l'erogazione di una terapia, il dispositivo cessa di erogare la terapia in corso ma non effettua il riconoscimento successivo finché il riconoscimento non viene ripreso. Riprendendo il riconoscimento prima che l'episodio sia terminato, il dispositivo inizia il riconoscimento successivo e l'episodio viene riconosciuto nuovamente se viene raggiunto il valore programmato relativo al numero di battiti per il riconoscimento successivo.

**Episodi di monitoraggio di VT** – Sospendendo il processo di riconoscimento di un episodio di monitoraggio di VT e riprendendo successivamente il riconoscimento prima che l'episodio sia terminato, i dati memorizzati riguarderanno due episodi, con il primo episodio terminato mentre la frequenza è ancora rapida.

### 8.7.2 Come sospendere o riprendere il riconoscimento con il programmatore

**Figura 155.** I pulsanti [Sosp.] e [Riprist.]



I pulsanti [Sosp.] e [Riprist.] possono essere utilizzati ogni volta che si stabilisce un collegamento telemetrico con il dispositivo e il software del dispositivo è in esecuzione.

1. Per sospendere il riconoscimento, selezionare [Sosp.]. Il programmatore visualizza l'annotazione SOSPESO nella barra di stato.
2. Per riprendere il riconoscimento, selezionare [Riprist.].

### 8.7.3 Come sospendere o riprendere il riconoscimento con un magnete

1. Per sospendere il riconoscimento, posizionare il magnete (come il magnete del paziente modello 9466) sopra il dispositivo.
2. Per riprendere il riconoscimento, allontanare il magnete dal dispositivo.

**Nota:** la testina di programmazione contiene un magnete. Quando il programmatore utilizza la telemetria wireless, il riconoscimento può essere sospeso posizionando la testina di programmazione sopra il dispositivo. Per ulteriori informazioni su come stabilire un collegamento telemetrico, cfr. la Sezione 3.1, “Come stabilire un collegamento telemetrico tra il dispositivo ed il programmatore”, pagina 39.

## 9 Configurazione delle terapie per tachiaritmia

### 9.1 Trattamento degli episodi rilevati come VF

La fibrillazione ventricolare (VF) viene riconosciuta in presenza di un ritmo ventricolare altamente irregolare. La VF può essere mortale se non viene trattata tempestivamente con una terapia di defibrillazione.

#### 9.1.1 La soluzione offerta dal sistema è rappresentata dalle terapie per VF

Il dispositivo può rispondere agli episodi di tachiaritmia ventricolare rilevati nella zona di VF (episodi di VF) erogando una terapia di defibrillazione al cuore del paziente. La terapia di defibrillazione serve a terminare l'episodio depolarizzando il tessuto cardiaco e ripristinando allo stesso tempo il normale ritmo sinusale del paziente.

Il dispositivo può essere programmato in modo tale da erogare una sequenza di stimolazione antitachicardica ventricolare (ATP) prima della o durante la carica per la prima terapia di defibrillazione. Ciò consente al dispositivo di tentare di far cessare le tachiaritmie ventricolari rapide ma stabili che possono non richiedere l'erogazione di una terapia di defibrillazione per la loro cessazione.

Per informazioni correlate, cfr. la Sezione 8.2, "Riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari", pagina 304 e la Sezione 9.2, "Trattamento degli episodi di VT e di FVT con terapie di stimolazione antitachicardica", pagina 356.

#### 9.1.2 Funzionamento delle terapie per VF


Il dispositivo può essere programmato in modo tale da erogare una sequenza di un massimo di sei terapie per trattare gli episodi di VF, ognuna delle quali con impostazioni di energia e percorsi specifici. Se la prima terapia (contrassegnata dalla sigla Rx1) riesce a far cessare l'episodio, il dispositivo continua a monitorare gli episodi di VF successivi. Se il dispositivo rileva nuovamente l'episodio di VF dopo la prima erogazione della terapia, eroga una seconda terapia per VF (contrassegnata dalla sigla Rx2). Se la seconda terapia va a buon fine, il dispositivo continua a monitorare gli episodi di VF successivi continuando la procedura fino alla cessazione dell'episodio o fino all'erogazione dell'ultima terapia programmata.

Solo per la prima terapia per VF, il dispositivo può essere programmato in modo tale da tentare di far cessare la tachiaritmia ventricolare erogando una terapia di ATP prima di erogare uno shock di defibrillazione. La terapia di ATP può essere programmata per l'erogazione della prima terapia di defibrillazione durante o prima della carica. Ciò può permettere al dispositivo di terminare le tachiaritmie ventricolari rapide ma stabili che non richiedono l'erogazione di alcuna terapia di defibrillazione per la loro conclusione.

Per la prima terapia di defibrillazione programmata, una volta che la carica è stata completata, il dispositivo tenta di verificare la presenza continuata dell'episodio di VF prima di erogare lo shock. Il dispositivo interrompe l'erogazione della terapia se la tachiaritmia ventricolare cessa spontaneamente o per effetto della funzione ATP durante la carica. In caso contrario, il dispositivo tenta di erogare uno shock di defibrillazione sincronizzato con un evento ventricolare rilevato.

Per gli shock di defibrillazione successivi, il dispositivo non verifica la presenza di VF. Se queste terapie non possono essere sincronizzate con un evento ventricolare rilevato, il dispositivo le eroga in maniera asincrona.

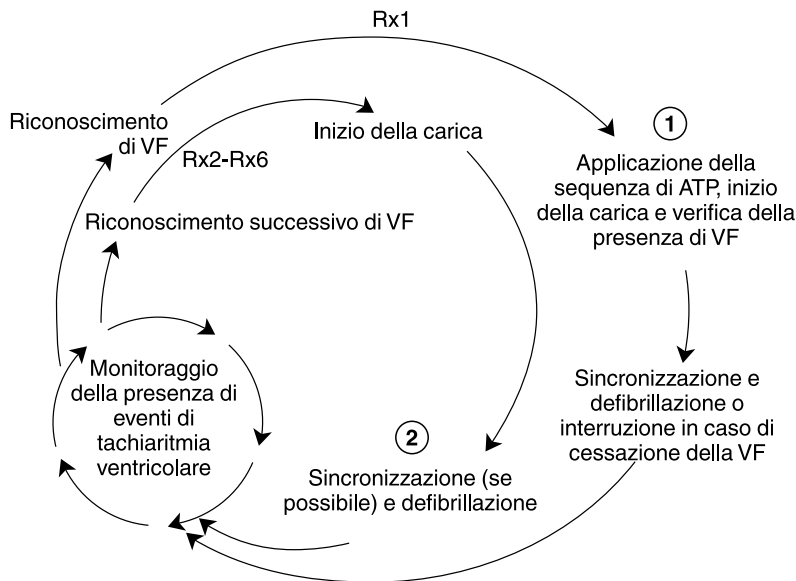**Figura 156.** Panoramica delle terapie per VF



- 1 L'utilizzo delle funzioni ATP prima della carica, ATP durante la carica, o nessuna ATP determina l'inizio della carica ed il momento in cui avviene la conferma di VF.
- 2 Il dispositivo tenta di sincronizzare la defibrillazione con un evento ventricolare. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dispositivo eroga la defibrillazione in modo asincrono.

### 9.1.2.1 Erogazione di terapie ad alta tensione

Per poter erogare una terapia di defibrillazione, il dispositivo deve prima caricare i suoi condensatori ad alta tensione fino a raggiungere il livello di energia programmato. Il tempo necessario per la carica dei condensatori dipende dal livello di energia programmato, dal grado di esaurimento della batteria e dal tempo trascorso dall'ultima ricarica dei condensatori. Il livello di energia erogata viene programmato separatamente per ciascuna terapia di defibrillazione. Gli impulsi di defibrillazione utilizzano una forma d'onda bifasica nella quale il percorso della corrente per l'impulso ad alta tensione viene invertito a metà strada durante l'erogazione dell'impulso.

Cfr. la Sezione A.5, "Livelli di energia e tempi di carica tipici", pagina 446 per informazioni su:

- i periodi di carica medi alla massima energia dei condensatori
- un confronto tra i livelli di energia erogata ed accumulata

### 9.1.2.2 Selezione degli elettrodi e del percorso di corrente ad alta tensione

I parametri Active Can/Coil SVC e Percorso consentono di specificare gli elettrodi e la direzione del flusso di corrente per gli impulsi di defibrillazione e cardioversione. Il parametro Active Can/Coil SVC ha le impostazioni seguenti:

- L'impostazione Can+SVC On consente di collegare l'Active Can (HVA) ed il Coil SVC (HVX). Si crea così un flusso di corrente tra questi elettrodi ed il Coil RV (HVB).
- L'impostazione Can Off consente di disattivare la funzione Active Can. In questo caso, è necessario impiantare un elettrocatetere SVC. Si crea così un flusso di corrente tra il Coil SVC (HVX) ed il Coil RV (HVB).
- L'impostazione SVC Off fa in modo che l'elettrocatetere SVC, se impiantato, non venga utilizzato. Si crea così un flusso di corrente tra l'Active Can ed il Coil RV (HVB).

**Nota:** per informazioni sulle caratteristiche degli elettrocateteri, cfr. la Sezione 2.4, "Valutazione e collegamento dell'elettrocatetere", pagina 28.

Le impostazioni per il parametro Percorso sono AX>B e B>AX. AX si riferisce agli elettrodi HVA e HVX che possono essere utilizzati singolarmente o abbinati. B si riferisce all'elettrodo HVB. L'impostazione Percorso definisce la direzione del flusso di corrente nel segmento iniziale della forma d'onda bifasica. Se il parametro viene impostato su AX>B, si crea un flusso di corrente tra l'Active Can, il Coil SVC ed il Coil RV. Se il parametro viene impostato su B>AX, il flusso di corrente viene invertito.



### 9.1.2.3 Erogazione dell'ATP prima della prima defibrillazione


È possibile programmare il dispositivo in modo tale da erogare una terapia di ATP prima di erogare la prima terapia di defibrillazione. Così facendo, si può evitare l'erogazione di shock ad alta tensione per trattare quei ritmi che possono essere terminati dall'ATP (ad esempio, la VT monomorfica rapida).

Impostando il parametro ATP su Durante la carica, il dispositivo eroga una sola sequenza di terapia di ATP quando inizia la carica per la terapia di defibrillazione. Se la carica viene ultimata prima che la sequenza della terapia di ATP sia completata, la sincronizzazione della terapia di defibrillazione viene ritardata finché la terapia di ATP non termina.

Impostando il parametro ATP su Prima della carica, il dispositivo eroga una sequenza di terapia di ATP non appena viene rilevata la VF. Al riconoscimento successivo di VF, il dispositivo inizia a caricare ed eroga una seconda sequenza ATP.

Il dispositivo non eroga terapie di ATP prima o durante la carica, a meno che gli ultimi otto intervalli ventricolari rilevati siano pari o superiori al valore programmato del parametro "Eroga ATP se gli ultimi 8 R-R  $\geq$ ".

**Nota:** il dispositivo impedisce l'erogazione di terapie di ATP durante o prima della carica per 30 s dopo l'erogazione di un'induzione T-Shock o Burst ventricolare da 50 Hz. Ciò impedisce alle terapie di ATP di interferire con il test della soglia di defibrillazione (DFT).

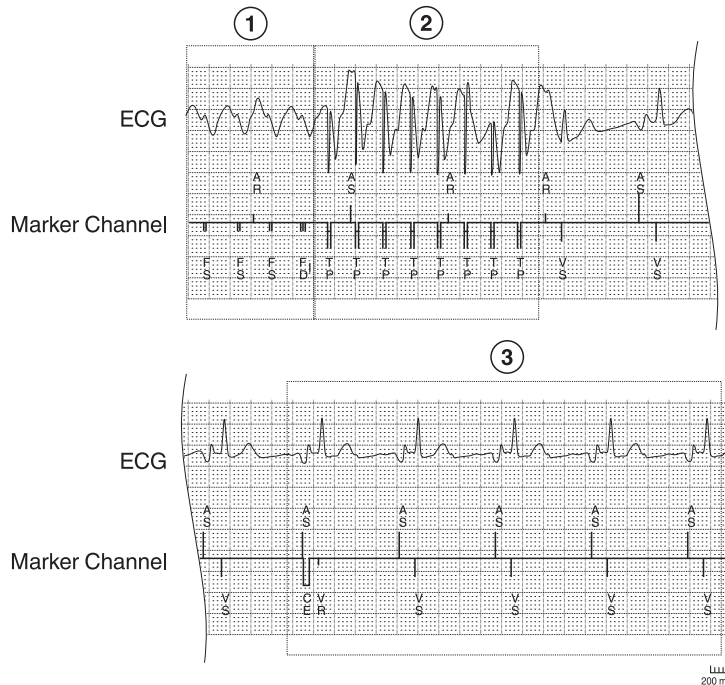**Figura 157.** Cessazione di un episodio ventricolare rapido andata a buon fine

- 1 Il dispositivo rileva una frequenza ventricolare rapida come un episodio di VF ed inizia a caricare i condensatori per una terapia di defibrillazione.
- 2 Durante la carica, il dispositivo eroga una sequenza di terapia di ATP Burst che fa cessare la tachiaritmia.
- 3 Una volta completata la carica, il dispositivo interrompe la terapia di defibrillazione poiché la VF non viene confermata.


Il valore del parametro ATP può essere modificato automaticamente da tre funzioni: ChargeSaver, Switchback e Smartmode. L'effetto delle funzioni ChargeSaver e Switchback sulla ATP viene illustrato nella Figura 158.

**Funzione ChargeSaver** – Attivando l'opzione ChargeSaver, il dispositivo può passare automaticamente dall'ATP durante la carica all'ATP prima della carica. Questo cambio avviene quando l'ATP riesce a far cessare la tachiaritmia rilevata entro un determinato numero programmabile di tentativi consecutivi durante la carica.

**Nota:** se si riprogramma uno dei parametri ATP, il dispositivo azzerà il conteggio delle ATP consecutive andate a buon fine utilizzato dalla funzione ChargeSaver.

**Funzione Switchback** – La funzione Switchback consente al dispositivo di passare automaticamente dall'ATP prima della carica all'ATP durante la carica. Questo cambio avviene se l'ATP prima della carica non riesce a far cessare la tachiaritmia rilevata in due tentativi consecutivi. La funzione Switchback è disponibile ogni volta che si attiva l'ATP prima della carica.

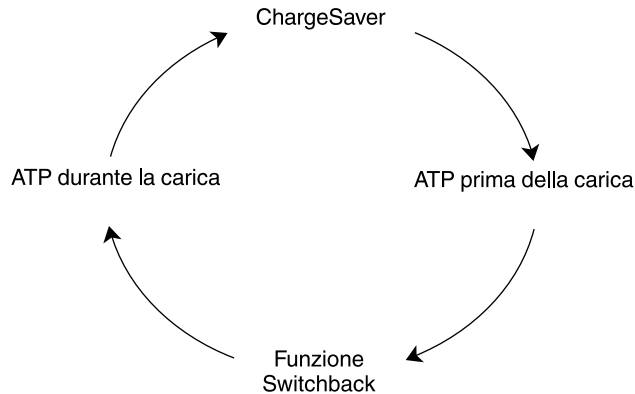**Figura 158.** Come agiscono le funzioni ChargeSaver e Switchback



**Funzione Smartmode** – Attivando la funzione Smartmode, il dispositivo disattiva automaticamente il parametro ATP se le terapie ATP erogate prima o durante la carica non riescono a far cessare la tachiaritmia in quattro episodi consecutivi.

#### 9.1.2.4 Verifica della VF per la prima defibrillazione


Prima di erogare il primo shock di defibrillazione per un episodio di VF, il dispositivo controlla il ritmo cardiaco per verificare la presenza di VF. Disattivando l'ATP durante la carica, il dispositivo applica la conferma di VF non appena viene riconosciuto un episodio di VF ed ha inizio la carica. Attivando l'ATP durante la carica, il dispositivo applica la conferma di VF una volta terminata la carica.

Il dispositivo verifica la presenza continuata di VF utilizzando un intervallo di conferma. L'intervallo di conferma è superiore di 60 ms rispetto all'intervallo di VT programmato (o all'intervallo di VF se il riconoscimento di VT è stato disattivato). Il dispositivo classifica qualsiasi evento ventricolare che abbia luogo nell'intervallo di conferma come un evento di tachiaritmia ventricolare, mentre classifica qualsiasi evento che abbia luogo fuori dall'intervallo come un evento normale.

Per ogni singolo evento ventricolare, il dispositivo controlla gli ultimi cinque eventi ventricolari. Se negli ultimi cinque eventi ventricolari vi sono stati quattro “eventi normali”, il dispositivo interrompe l'erogazione della terapia.

Attivando l'ATP durante la carica, il dispositivo inizia ad esaminare gli eventi ventricolari per conferma e sincronizzazione nel momento in cui la carica viene completata. Disattivando l'ATP durante la carica, il dispositivo applica la conferma di VF non appena viene riconosciuto un episodio di VF ed ha inizio la carica. In questo caso, se la terapia viene interrotta prima che il processo di carica venga completato, il dispositivo termina anche il processo di carica.

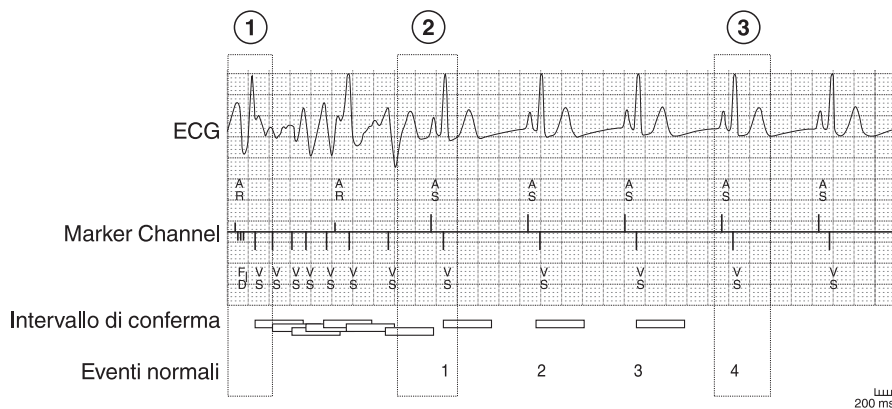**Figura 159.** Esempio di terapia di defibrillazione interrotta



- 1 Il dispositivo rileva la VF, dà inizio alla carica ed inizia a verificare la presenza di tachiaritmia utilizzando l'intervallo di conferma. In questo esempio, l'opzione ATP durante la carica è disattivata.
- 2 L'episodio di VF termina spontaneamente ed il normale ritmo sinusale riprende.
- 3 Se quattro degli ultimi cinque eventi sono “eventi normali”, il dispositivo interrompe la terapia e cessa di caricare i propri condensatori.


### 9.1.2.5 Sincronizzazione della terapia di defibrillazione iniziale

Una volta completate la carica e l'ATP durante la carica, il dispositivo continua a verificare la presenza di VF. Se la VF dovesse persistere, il dispositivo tenta di sincronizzare la terapia di defibrillazione con il secondo evento di tachiaritmia ventricolare che si verifica dopo la cessazione della carica, a condizione che non rientri nel periodo refrattario ventricolare e nel periodo vulnerabile atriale. Se ciò non dovesse sortire alcun effetto, il dispositivo tenterà di sincronizzare la terapia di defibrillazione con l'evento di tachiaritmia ventricolare successivo che si verifica al di fuori del periodo refrattario ventricolare.

Il dispositivo continua a tentare la sincronizzazione finché non eroga la terapia di defibrillazione oppure non conferma la presenza di VF ed interrompe la terapia.

**Nota:** il sistema definisce come periodo vulnerabile atriale una finestra di 150 ms-400 ms che fa seguito ad un evento atriale rilevato. Durante questo periodo, le terapie di defibrillazione vengono inibite per evitare l'induzione di tachiaritmie atriali.

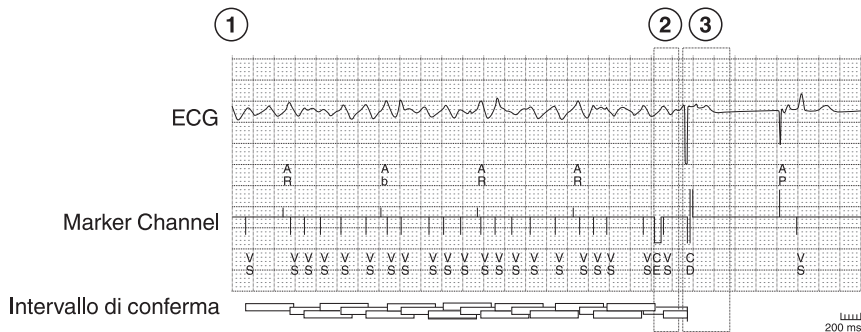**Figura 160.** Erogazione sincrona della defibrillazione



- 1 Il dispositivo ha rilevato una VF. Inizia a caricare i propri condensatori per la defibrillazione e verifica la presenza di VF utilizzando l'intervallo di conferma. In questo esempio, l'opzione ATP durante la carica è disattivata.
- 2 Il dispositivo completa l'operazione di carica ed avvia la sincronizzazione continuando la verifica della presenza di VF.
- 3 Al secondo evento tachiaritmico dopo la carica, il dispositivo eroga la terapia di defibrillazione.


### 9.1.2.6 Sincronizzazione di terapie di defibrillazione successive

Se la prima terapia di defibrillazione non riesce a terminare un episodio di VF, il dispositivo tenta di sincronizzare ogni terapia di defibrillazione successiva con un evento ventricolare rilevato. Nel caso in cui la sincronizzazione non fosse possibile, il dispositivo eroga la terapia di defibrillazione in modo asincrono.

Caricati i condensatori al valore di energia programmata, il dispositivo avvia una finestra di sincronizzazione da 900 ms. Se durante questa finestra si verifica un evento ventricolare rilevato compatibile, il dispositivo eroga la terapia di defibrillazione sincronizzata con l'evento. In caso contrario, eroga la terapia in modo asincrono dopo 900 ms (cfr. la Figura 161).

Qualsiasi evento ventricolare rilevato può essere trattato con l'erogazione di una terapia, a meno che l'episodio non si verifichi nel periodo refrattario o nel periodo vulnerabile atriale. Se un determinato evento si verifica nel periodo refrattario, il dispositivo continua a tentare la sincronizzazione. Se un determinato evento si verifica nel periodo vulnerabile atriale, il dispositivo modifica la finestra di sincronizzazione portandola a 500 ms e continua a tentare la sincronizzazione. Un evento ventricolare rilevato successivo che non rientra nel periodo refrattario può essere trattato con l'erogazione di una terapia, anche se rientra nel periodo vulnerabile atriale.

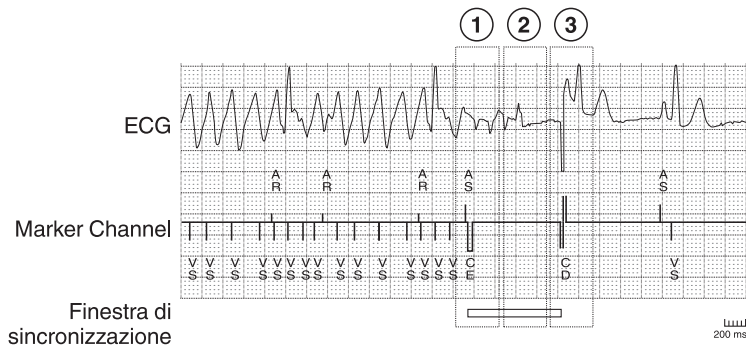**Figura 161.** Erogazione asincrona della defibrillazione



- 1 Dopo il riconoscimento successivo di VF, il dispositivo completa la carica e dà avvio ad una finestra di sincronizzazione di 900 ms.
- 2 Diversi eventi di VF a bassa ampiezza non vengono rilevati.
- 3 Dopo 900 ms, il dispositivo eroga la terapia di defibrillazione in modo asincrono.

### 9.1.2.7 Funzionamento del dispositivo durante e dopo una terapia di defibrillazione

Al primo evento ventricolare dopo la carica, il dispositivo passa al modo di stimolazione VVI finché la carica non viene erogata o interrotta. L'intervallo di stimolazione rimane invariato durante questo periodo.

Una volta erogata la terapia di defibrillazione, il dispositivo controlla la fine dell'episodio o del riconoscimento successivo. Il dispositivo sospende il riconoscimento di VT ed il riconoscimento tramite conteggio combinato per diciassette eventi che fanno seguito alla terapia di defibrillazione erogata in risposta ad una VF riconosciuta. Sospendendo il riconoscimento di VT, si evita il riconoscimento delle VT temporanee che possono far seguito alle terapie ad alta tensione. Per informazioni sul riconoscimento tramite conteggio combinato, cfr. la Sezione 8.2, "Riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari", pagina 304.

Subito dopo aver erogato lo shock, il dispositivo dà avvio ad un periodo di blanking post-shock di 520 ms.

Dopo il periodo di blanking post-shock, il dispositivo riprende la stimolazione antibradicardica. Il dispositivo funziona nel modo di stimolazione programmato. Vengono applicati i parametri di stimolazione post-shock. Per ulteriori informazioni cfr. la Sezione 7.13, “Aumento dell’uscita di stimolazione dopo una terapia ad alta tensione”, pagina 278. Attivando la stimolazione post-shock VT/VF, il dispositivo stimola con la frequenza overdrive programmata. Per ulteriori informazioni cfr. la Sezione 7.15, “Erogazione della stimolazione in overdrive dopo una terapia ad alta tensione per VT/VF”, pagina 289.

#### **9.1.2.8 Funzionamento del dispositivo dopo una terapia di defibrillazione interrotta**

Se il dispositivo interrompe una terapia di defibrillazione, ritorna immediatamente ai parametri di stimolazione antibradicardica programmati (non ai parametri di stimolazione post-shock).

Il dispositivo riprende a monitorare le tachiaritmie ventricolari dopo l’evento ventricolare stimolato o rilevato successivo. Se rileva nuovamente la VF prima che l’episodio sia terminato, il dispositivo tenterà di sincronizzare ed erogare la terapia programmata che è stata interrotta. Tuttavia, se l’episodio cessa, il dispositivo ritorna al riconoscimento normale.

**Nota:** se il dispositivo interrompe la terapia di defibrillazione lasciando energia accumulata nei condensatori, l’energia erogata nella successiva terapia ad alta tensione può essere superiore al valore programmato.

#### **9.1.3 Alcune considerazioni sulla programmazione delle terapie per VF**

**Attenzione:** se la funzione Active Can non viene utilizzata, il dispositivo erogherà soltanto le terapie di defibrillazione e cardioversione tra gli elettrodi Coil RV (HVB) e Coil SVC (HVX). Affinché il dispositivo possa erogare le terapie di defibrillazione e cardioversione, verificare che sia stato impiantato un elettrodo HVX supplementare e che questo sia collegato al dispositivo prima di programmare il parametro Active Can/Coil SVC su Can Off.

**Active Can/Coil SVC** – L’impostazione programmata per il parametro Active Can/Coil SVC si applica a tutte le funzioni che consentono di erogare shock ad alta tensione.

**Energia** – Programmando il livello di energia per la prima terapia di VF su un valore ottimizzato (ad esempio, il valore della soglia di defibrillazione più 10 J), si può accelerare l’erogazione della terapia e prolungare la durata della batteria. Un livello ottimizzato di energia fa cessare la tachiaritmia con un margine di sicurezza adeguato evitando sprechi

di energia. Le terapie per VF successive dovranno essere programmate sul massimo livello di energia.

**Disponibilità del livello di energia** – Per le terapie per VF Rx1 e Rx2 sono disponibili livelli di energia inferiori a 10 J. Per le terapie per VF Rx3–Rx6, il livello di energia non può essere programmato su un valore inferiore a 10 J. Analogamente, una terapia per VF non può essere seguita da un'altra terapia per VF con un parametro di energia inferiore.

**Energia e ATP durante la carica** – Quando si imposta il parametro Energia per una terapia su un valore inferiore a 20 J, il tempo di carica per tale terapia può essere troppo breve e pertanto non consentire di stabilire se l'ATP durante la carica abbia determinato la cessazione un episodio. Se l'ATP durante la carica è attivata, valutare la programmazione del parametro Energia per la prima terapia per VF su un valore di almeno 20 J.

**Terapie con aggressività crescente** – Se la funzione Terapie con aggressività crescente è attivata, il dispositivo può saltare la terapia di ATP prima della carica oppure erogare una terapia ad alta tensione con un livello di energia superiore a quello programmato. Così facendo, ogni singola terapia erogata durante un episodio in corso sarà aggressiva almeno quanto la terapia precedente. Per ulteriori informazioni cfr. la Sezione 9.8, "Ottimizzazione della terapia con l'opzione Terapie con aggressività crescente", pagina 412.

**Terapie di VT e FVT** – Le terapie per VT e FVT non possono essere attivate a meno che non sia stata anche attivata almeno una terapia per VF.

#### 9.1.4 Programmazione delle terapie per VF

La prima serie di istruzioni per la programmazione include i parametri ATP per la terapia per VF Rx1. L'esempio riportato illustra in che modo programmare una sequenza di ATP Ramp. Per istruzioni sulla programmazione della stimolazione Burst e Ramp+, vedere la Sezione 9.2, "Trattamento degli episodi di VT e di FVT con terapie di stimolazione antitachicardica", pagina 356.



## Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ VF | Terapie...
  - ▷ Stato della terapia di VF <On>
  - ▷ Energia
  - ▷ Percorso
- ⇒ ATP...
  - ▷ ATP <Prima della carica, Durante la carica>
  - ▷ Erogena ATP se gli ultimi 8 R-R>=
  - ▷ Tipo di terapia <Ramp>
  - ▷ N. iniziale di impulsi
  - ▷ Intervallo R-S1=(%RR)
  - ▷ Dec. intervallo
  - ▷ Smartmode
- ⇒ ChargeSaver...
  - ▷ Passare a 'ATP prima della carica' <On>
  - ▷ Cambiare quando il numero ... è uguale a

La seconda serie di istruzioni per la programmazione comprende le impostazioni condivise per i parametri di ATP ventricolare. Le Impostazioni condivise si applicano all'ATP prima della carica, all'ATP durante la carica ed alle Terapie ATP utilizzate per trattare gli episodi di VT e FVT.

**Nota:** il parametro Stimolazione V. consente di specificare se la stimolazione debba essere erogata nel ventricolo destro, nel ventricolo sinistro o in entrambi i ventricoli.

## Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ VF | Terapie...
  - ▷ Stato della terapia di VF <On>
  - ▷ Energia
  - ▷ Percorso
- ⇒ Impostazioni condivise...
  - ▷ Intervallo minimo ATP V-V
  - ▷ Ampiezza V.
  - ▷ Durata impulso V.
  - ▷ Periodo di blanking post-stimolazione V.
  - ▷ Stimolazione V.
  - ▷ Active Can/Coil SVC

9.1.5 Valutazione delle terapie per VF

9.1.5.1 La schermata Quick Look II

La schermata Quick Look II fornisce informazioni sulle terapie per VT/VF.

Selezionare l'icona Dati

⇒ Quick Look II

Figura 162. Informazioni sulla VT/VF nella schermata Quick Look II

% di tempo		Trattati	>>
AS-VS	<0.1 %	VT/VF	2
AS-VP	80.7 %	AT/AF	1
AP-VS	<0.1 %	shock	0
AP-VP	19.2 %		
AT/AF	<0.1 %	Monitorati	>>
		VT	2
		SVT	0
		AT/AF	0
Osservazioni (1)			>>
2 episodi di VT monitorati, il più lungo dei quali di 18 s.			

**Episodi di VT/VF trattata** – Questa sezione include un conteggio degli episodi di VT/VF trattata. Per visualizzare i dati relativi agli episodi trattati, è possibile selezionare il pulsante Trattati [>>].

**Osservazioni Quick Look II** – Le osservazioni Quick Look II si basano su un’analisi dei dati interrogati dall’ultima sessione e sui parametri programmati. Se sono disponibili informazioni correlate su una determinata osservazione, è possibile selezionare l’osservazione desiderata e poi selezionare il pulsante Osservazioni [>>] per visualizzarle.

9.1.5.2 Contatori di terapie per VT/VF

I contatori di terapie per VT/VF forniscono informazioni che servono a valutare l’efficacia della defibrillazione. I contatori di terapie per VT/VF includono un riepilogo delle terapie per VT/VF per la sessione precedente, per l’ultima sessione e la durata del dispositivo. I contatori di terapie per VT/VF includono anche la funzione Efficacia delle terapie per VT/VF dall’ultima sessione.

Selezionare l'icona Dati

⇒ Diagnostica clinica

⇒ Contatori

⇒ Rx VT/VF

Figura 163. Contatori di terapie per VT/VF

Dati - Contatori

☐ Episodi di VT/VF

☒ Rx VT/VF

☐ Episodi di AT/AF

☐ Rx AT/AF

Sessione precedente

Ultima sessione

05-Lug-2007 al

09-Lug-2007 al

09-Lug-2007

11-Lug-2007

Totale

Riepilogo terapia VT/VF

Terminato con ATP

2 di 2

3 di 4

6 di 7

Terminato con shock

0

2 di 2

3 di 3

Shock VT/VF complessivi

0

3

4

Cariche interrotte

0

0

0

Efficacia della terapia VT/VF dall'ultima sessione del 09-Lug-2007 al 11-Lug-2007

Terapia di VF

ATP+Car

35 J

35 J

35 J

35 J

35 J

35 J

35 J

Erogata

0

2

1

0

0

0

0

0

Riuscita

0

1

1

0

0

0

0

0

Terapia di FVT

Burst

35 J

35 J

35 J

35 J

35 J

35 J

35 J

Erogata

0

0

0

0

0

0

0

0

Riuscita

0

0

0

0

0

0

0

0

Accelerato

0

0

0

0

0

0

0

0

Terapia di VT

Burst

20 J

35 J

35 J

35 J

35 J

35 J

35 J

Erogata

4

0

0

0

0

0

0

0

Riuscita

3

0

0

0

0

0

0

0

Accelerato

1

0

0

0

0

0

0

0

Stampa...

Chiudi

Sono disponibili i seguenti dati dei contatori di terapie per VT/VF:

**Riepilogo terapie per VT/VF** – In questa sezione vengono registrati il numero di tachiaritmie ventricolari terminate con la stimolazione, il numero di tachiaritmie ventricolari terminate con uno shock, il numero complessivo di shock VT/VF e le cariche interrotte nella sessione precedente e nell'ultima sessione, oltre alla durata del dispositivo.

**Efficacia delle terapie per VT/VF dall'ultima sessione** – Relativamente alle terapie per VF, FVT e VT, i contatori registrano il numero ed il tipo di terapie erogate e risultate efficaci. Il contatore di terapie per VT comprende episodi di VT che hanno mostrato un'accelerazione durante la terapia o sono stati sottoposti a riconoscimento successivo come episodi di FVT o VF. Il contatore di terapie per FVT comprende episodi di FVT che sono stati sottoposti a riconoscimento successivo come episodi di VF.

## **9.2 Trattamento degli episodi di VT e di FVT con terapie di stimolazione antitachicardica**

Il dispositivo riconosce la tachicardia ventricolare sostenuta come una tachicardia ventricolare (VT) o un episodio di tachicardia ventricolare rapida (FVT). I trattamenti disponibili per questi episodi sono stati appositamente studiati per interrompere la tachicardia ventricolare e ripristinare il ritmo sinusale normale del paziente. La terapia di stimolazione può rappresentare una possibilità di trattamento per la cessazione di un episodio di VT o di FVT che potrebbe non richiedere l'erogazione di una terapia ad alta tensione.

### **9.2.1 La soluzione offerta dal sistema è rappresentata dalle terapie di stimolazione antitachicardica ventricolare**

Il dispositivo può rispondere ad un episodio di VT o FVT erogando terapie di stimolazione antitachicardica (ATP) ventricolare al cuore del paziente. Le terapie di ATP ventricolare sono state appositamente studiate per interrompere lo schema di attivazione di rientro per VT o FVT e ripristinare il ritmo sinusale normale del paziente. Le terapie di ATP erogano impulsi di stimolazione anziché shock ad alta tensione come quelli erogati nella terapia di cardioversione.

Per informazioni correlate, cfr. la Sezione 8.2, "Riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari", pagina 304 e la Sezione 9.3, "Trattamento di VT e FVT con cardioversione ventricolare", pagina 370.

### **9.2.2 Funzionamento delle terapie di ATP ventricolare**


Il dispositivo è in grado di erogare un massimo di sei terapie per trattare un episodio di VT o di FVT. È possibile programmare il dispositivo in modo tale da erogare terapie di ATP prima di erogare la prima terapia di cardioversione per ciascun tipo di episodio. Ciò può consentire al dispositivo di far cessare un episodio di tachicardia ventricolare ricorrendo ad una terapia di ATP ed erogando una terapia di cardioversione soltanto se la terapia di ATP si è rivelata inefficace.

Le opzioni disponibili per la terapia di ATP sono Burst, Ramp, and Ramp+, ognuna delle quali ha un numero programmabile di sequenze. Quando viene rilevato un episodio di VT o di FVT e la prima terapia programmata è una terapia di ATP, il dispositivo eroga la prima sequenza della terapia di ATP. Dopo la prima sequenza di ATP, il dispositivo continua il monitoraggio per verificare l'eventuale presenza di un episodio di tachicardia ventricolare. Se il dispositivo riconosce nuovamente l'episodio di tachicardia ventricolare, eroga la sequenza successiva ripetendo questo ciclo finché l'episodio non cessa o tutte le sequenze nella terapia non sono esaurite.


Se tutte le sequenze in una terapia di ATP dovessero rivelarsi inefficaci, il dispositivo inizia ad erogare la terapia di ATP o di cardioversione successiva. Se rileva che l'episodio di VT corrente ha subito un'accelerazione (di almeno 60 ms) o riconosce nuovamente la VT come FVT, il dispositivo salta le restanti sequenze della terapia di ATP dando avvio alla terapia successiva programmata per l'episodio.

Se il dispositivo riconosce nuovamente l'episodio di VT come VF, eroga una terapia di defibrillazione. Per ulteriori informazioni sulla terapia di defibrillazione, cfr. la Sezione 9.1, "Trattamento degli episodi rilevati come VF", pagina 342.

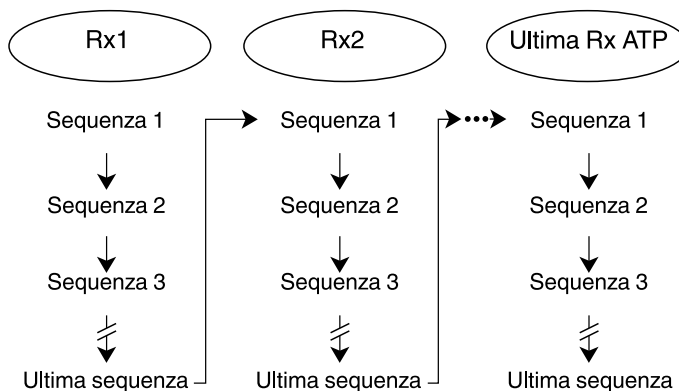**Figura 164.** Panoramica dell'erogazione di una terapia di ATP ventricolare



Per una panoramica dell'erogazione della sequenza di ATP ventricolare, cfr. la Figura 165.

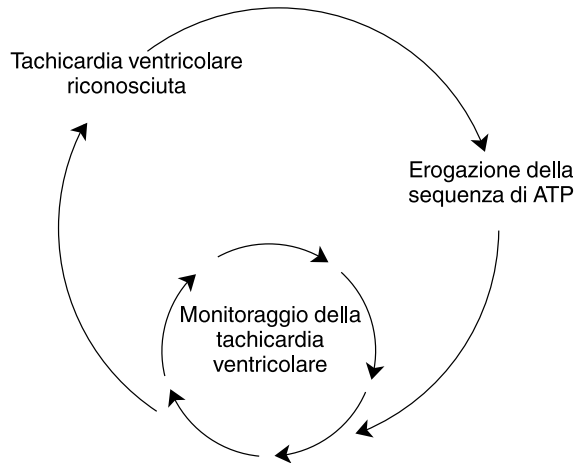**Figura 165.** Panoramica dell'erogazione della sequenza di ATP ventricolare

I parametri Ampiezza V., Durata impulso V., Blanking post-stim. V. e Stimolazione sono identici per tutte le terapie di ATP ventricolare. Questi parametri sono programmabili indipendentemente dalla durata dell'impulso di stimolazione antibradicardica, dall'ampiezza, dal periodo di blanking post-stimolazione e dalla stimolazione V..

### 9.2.2.1 Frequenza di stimolazione della terapia di ATP ventricolare

L'intervallo di stimolazione ATP si basa sulla durata del ciclo della tachicardia ventricolare, calcolata come la media degli ultimi quattro intervalli ventricolari che precedono il riconoscimento di VT o di FVT (o il riconoscimento successivo). Il parametro programmabile Intervallo minimo V-V di ATP limita l'intervallo di stimolazione in corrispondenza del quale gli impulsi di stimolazione ATP vengono erogati in sequenza. Se l'intervallo di stimolazione ATP è più breve dell'intervallo minimo V-V di ATP, gli impulsi di stimolazione vengono erogati con l'intervallo minimo V-V di ATP programmato.

Se l'intervallo intrinseco di tachicardia ventricolare è pari o inferiore all'intervallo minimo V-V di ATP programmato, il dispositivo salta il resto della terapia di ATP ed eroga la prima terapia di cardioversione programmata. Se non è stata programmata alcuna terapia di cardioversione, non viene erogata alcuna terapia.

Se l'intervallo intrinseco di tachicardia ventricolare è superiore all'intervallo minimo V-V di ATP programmato ma tutti gli intervalli di una sequenza di terapie di ATP sono stati erogati con l'intervallo minimo V-V di ATP, il dispositivo salta il resto della terapia di ATP ed eroga l'ATP o la terapia di cardioversione successiva programmata. Se il dispositivo rileva un episodio di FVT, eroga la terapia di cardioversione programmata successiva.


### 9.2.2.2 Terapia di stimolazione Burst

Il parametro programmabile # iniziale di impulsi consente di impostare il numero di impulsi di tutte le sequenze di terapie Burst. Intervallo R-S1=(%RR) e Dec. intervallo sono parametri programmabili che controllano gli intervalli di stimolazione Burst.

La prima sequenza Burst viene erogata all'intervallo di stimolazione determinato dal parametro Intervallo R-S1=(%RR), sotto forma di percentuale della durata del ciclo di tachicardia ventricolare. Ogni impulso di stimolazione della sequenza viene erogato allo stesso intervallo di stimolazione. Ad ogni riconoscimento successivo della tachicardia ventricolare dopo una sequenza con esito negativo, il dispositivo applica la percentuale Burst programmata alla durata del nuovo ciclo di tachicardia ventricolare. Successivamente sottrae il valore di decremento di intervallo (una volta a sequenza) per stabilire l'intervallo di stimolazione della successiva sequenza Burst.

**Nota:** la terapia di stimolazione Burst viene erogata nel modo di stimolazione VOO.

Nell'esempio del funzionamento della stimolazione Burst illustrato nella Figura 166, vengono erogate due sequenze di terapie Burst. La seconda sequenza di terapie fa cessare l'episodio di VT.

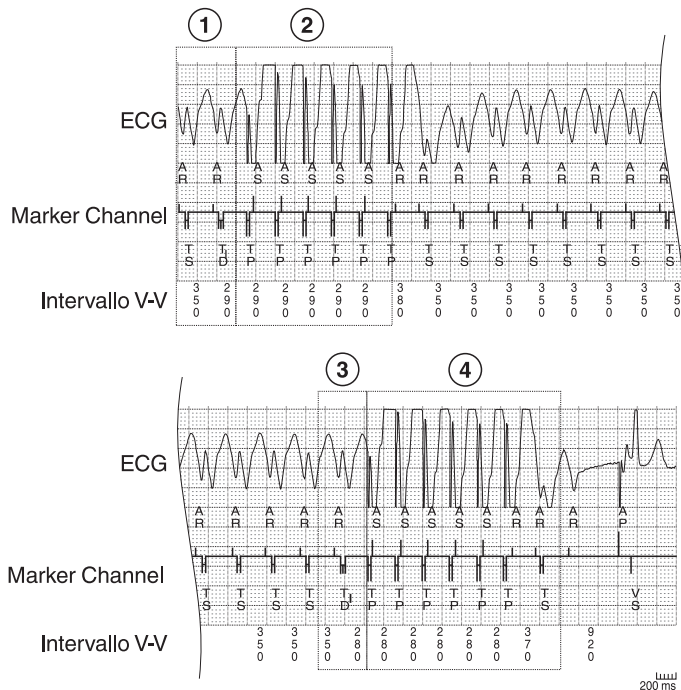**Figura 166.** Esempio di funzionamento della stimolazione Burst

- 1 Il dispositivo rileva un episodio di VT.
- 2 La prima sequenza di Burst viene erogata con un intervallo di stimolazione pari a 290 ms. Tuttavia, questa sequenza non riesce a far cessare l'episodio di VT.
- 3 Il dispositivo riconosce nuovamente l'episodio di VT.
- 4 La seconda sequenza Burst viene erogata con un intervallo di stimolazione pari a 280 ms (il decremento di intervallo è pari a 10 ms per sequenza). Questa sequenza fa cessare l'episodio di VT.

### 9.2.2.3 Terapia di stimolazione Ramp

Il parametro programmabile # Iniziale di impulsi consente di impostare il numero di impulsi della prima sequenza Ramp. Gli intervalli di stimolazione Ramp vengono controllati dai parametri programmabili Intervallo R-S1=(%RR) e Dec. intervallo.




In ogni sequenza Ramp, il primo impulso viene erogato all'intervallo di stimolazione determinato dal parametro Intervallo R-S1=(%RR), sotto forma di percentuale della durata del ciclo di tachicardia ventricolare. Gli altri impulsi di questa sequenza vengono erogati ad intervalli di stimolazione progressivamente più brevi sottraendo il valore di Dec. intervallo per ciascun impulso.

Ad ogni riconoscimento successivo della tachicardia ventricolare dopo una sequenza non riuscita, il dispositivo applica la percentuale Ramp programmata alla durata del nuovo ciclo di tachicardia ventricolare per calcolare l'intervallo iniziale di stimolazione per la sequenza successiva. Ad ogni sequenza viene aggiunto un impulso di stimolazione. Gli eventi ventricolari rilevati vengono contati come impulsi singoli della sequenza Ramp, anche se non si tratta di impulsi di uscita.

**Nota:** la terapia di stimolazione Ramp viene erogata nel modo di stimolazione VVI.

Nell'esempio del funzionamento della stimolazione Ramp illustrato nella Figura 167, vengono erogate due sequenze di terapie Ramp. La seconda sequenza di terapie fa cessare l'episodio di VT.

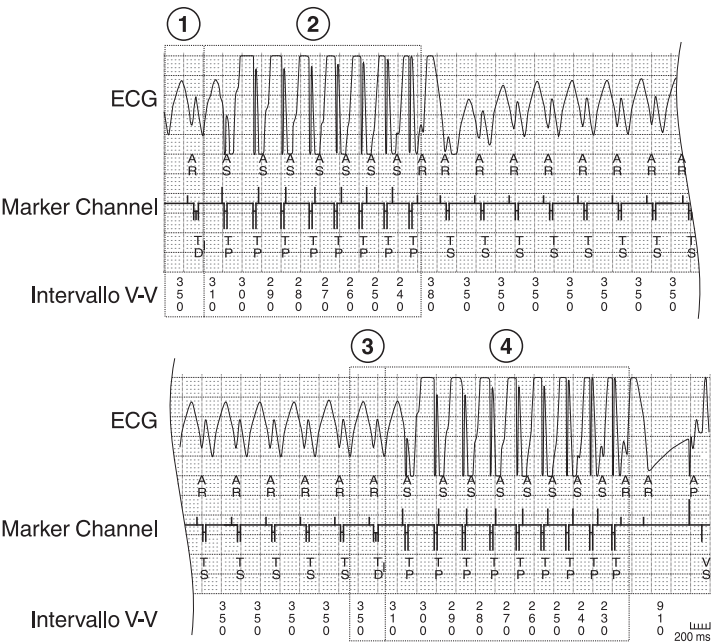**Figura 167.** Esempio di funzionamento della stimolazione Ramp



1 Il dispositivo rileva un episodio di VT.

- 2 La prima sequenza Ramp viene erogata con un intervallo iniziale di stimolazione pari a 310 ms. Ogni intervallo successivo subisce un decremento di 10 ms ad impulso. Vengono erogati otto impulsi di stimolazione, ma l'episodio di VT non cessa.
  - 3 Il dispositivo riconosce nuovamente l'episodio di VT.
  - 4 La seconda sequenza Ramp viene erogata con un intervallo iniziale di stimolazione pari a 310 ms. Ogni intervallo successivo subisce un decremento di 10 ms ad impulso. Vengono erogati nove impulsi di stimolazione e l'episodio di VT cessa.
- 

#### 9.2.2.4 Terapia di stimolazione Ramp+

Il parametro programmabile # Iniziale di impulsi consente di impostare il numero di impulsi della prima sequenza Ramp+. Gli intervalli di stimolazione Ramp+ vengono controllati dai parametri programmabili Intervallo R-S1=(%RR), S1S2(Ramp+)=(%RR) e S2SN(Ramp+)=(%RR).


Gli impulsi nella sequenza Ramp+ vengono erogati ad intervalli di stimolazione progressivamente più brevi, ognuno dei quali viene determinato come percentuale specifica della durata del ciclo di tachicardia ventricolare. Il primo impulso di ogni sequenza Ramp+ viene erogato ad un intervallo di stimolazione determinato utilizzando la percentuale dell'Intervallo R-S1=(%RR). L'intervallo di stimolazione per il secondo impulso della sequenza viene determinato dalla percentuale S1S2(Ramp+)=(%RR). Qualsiasi impulso residuo della sequenza viene erogato ad un intervallo di stimolazione determinato utilizzando la percentuale S2SN(Ramp+)=(%RR).

Ad ogni riconoscimento successivo della tachicardia ventricolare, il dispositivo applica le percentuali programmate alla durata del nuovo ciclo di tachicardia ventricolare per determinare l'intervallo di stimolazione per la sequenza Ramp+ successiva. Ad ogni sequenza viene aggiunto un impulso di stimolazione.

**Nota:** la terapia di stimolazione Ramp+ viene erogata nel modo di stimolazione VOO.

Nell'esempio del funzionamento della stimolazione Ramp+ illustrato nella Figura 168, vengono erogate due sequenze di terapie Ramp+. La seconda sequenza di terapie fa cessare l'episodio di VT.

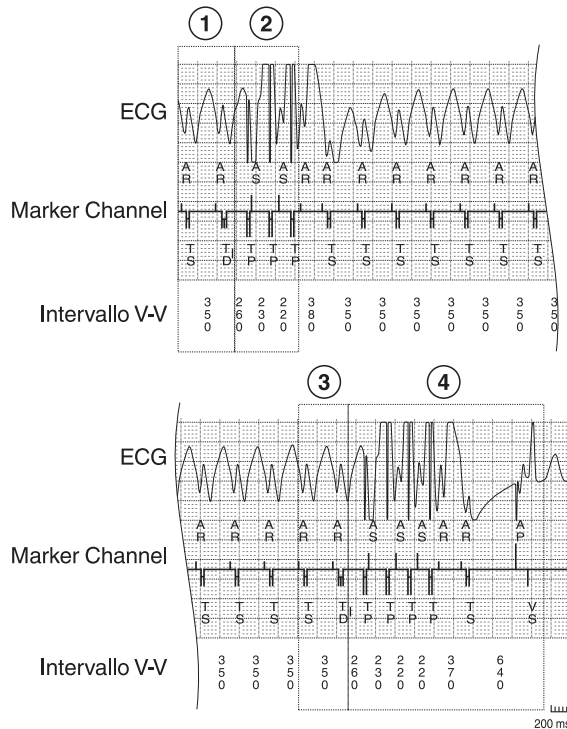**Figura 168.** Esempio di funzionamento della stimolazione Ramp+



- 1 Il dispositivo rileva un episodio di VT.
- 2 La prima sequenza Ramp+ consta di tre impulsi di stimolazione con intervalli di 260, 230 e 220 ms. L'episodio di VT non cessa.
- 3 Il dispositivo riconosce nuovamente l'episodio di VT.
- 4 La seconda terapia di stimolazione Ramp+ ripete i primi tre intervalli aggiungendo un altro impulso con un intervallo di 220 ms, che fa cessare l'episodio di VT.

### 9.2.2.5 Ottimizzazione delle terapie di ATP ventricolare con la funzione Smartmode

La funzione Smartmode è un'opzione programmabile per le terapie di ATP ventricolare. È possibile attivare la funzione Smartmode per tutte le terapie di ATP o solo per determinate terapie di ATP selezionate per le prime quattro terapie di VT o FVT.

Attivando la funzione Smartmode per una terapia di ATP ventricolare, il dispositivo monitora l'esito di questa terapia. Se tutte le sequenze della terapia di ATP sono state erogate senza successo in quattro episodi consecutivi, la funzione Smartmode annulla la terapia di ATP. Ciò consente al dispositivo di trattare gli episodi successivi in maniera più rapida, utilizzando le terapie di ATP eventualmente rivelatesi efficaci in precedenza.

Se la funzione Smartmode annulla una terapia di ATP ventricolare, è possibile selezionare una terapia diversa o modificare i parametri della terapia corrente per migliorarne l'efficacia. Una terapia di ATP annullata dalla funzione Smartmode viene indicata dall'etichetta "Off-SM" nella schermata dei contatori di terapie per VT/VF. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 9.2.5, "Valutazione delle terapie di ATP ventricolare", pagina 366.

### 9.2.3 Alcune considerazioni sulla programmazione delle terapie di ATP ventricolare

**Terapie di VT e FVT** – Le terapie di ATP non dovrebbero essere utilizzate per trattare soltanto episodi di VT o FVT. Si dovrebbe programmare almeno una terapia per VT ed una terapia di FVT sulla cardioversione alla massima energia.

**Terapie di cardioversione per FVT** – Non è possibile programmare tutte le terapie di FVT come terapie di ATP. Attivando una qualsiasi terapia di FVT, almeno una delle terapie deve essere programmata sulla terapia di cardioversione. La terapia di FVT finale deve essere sempre programmata sulla terapia di cardioversione.

**Aggressività delle terapie** – Le terapie di VT e FVT devono essere programmate con un'aggressività crescente. Ad esempio, non si può programmare una terapia di VT come cardioversione ed una terapia di VT successiva come terapia di ATP ventricolare. Analogamente, una terapia di cardioversione VT non può essere seguita da un'altra terapia di cardioversione VT con un parametro di energia inferiore.

**Terapie per VF** – Non è possibile attivare le terapie per VT e FVT, a meno che non sia stata anche attivata almeno una terapia per VF.

**Funzione Smartmode** – Per ripristinare una terapia di ATP ventricolare annullata dalla funzione Smartmode, programmare il parametro Stato terapia su On. La funzione Smartmode non è utilizzabile per le ultime due terapie di VT o FVT.

### 9.2.4 Programmazione delle terapie di ATP ventricolare

Le fasi di programmazione illustrate di seguito si applicano alle terapie per VT. È tuttavia possibile programmare le terapie di FVT nello stesso modo selezionando il campo Terapie... per le FVT nella schermata Parametri.

### 9.2.4.1 Programmazione della terapia di stimolazione Burst

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ VT | Terapie...
- ▷ Stato terapia di VT <On>
- ▷ Tipo di terapia <Burst>
- ▷ N. iniziale di impulsi
- ▷ Intervallo R-S1=(%RR)
- ▷ Dec. intervallo
- ▷ N. sequenze
- ▷ Smartmode

**Nota:** per le terapie Burst per gli episodi di FVT è prevista una sequenza di programmazione simile.

### 9.2.4.2 Programmazione della terapia di stimolazione Ramp

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ VT | Terapie...
- ▷ Stato terapia di VT <On>
- ▷ Tipo di terapia <Ramp>
- ▷ N. iniziale di impulsi
- ▷ Intervallo R-S1=(%RR)
- ▷ Dec. intervallo
- ▷ N. sequenze
- ▷ Smartmode

**Nota:** per le terapie Ramp per gli episodi di FVT è prevista una sequenza di programmazione simile.

### 9.2.4.3 Programmazione della terapia di stimolazione Ramp+

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ VT | Terapie...
- ▷ Stato terapia di VT <On>
- ▷ Tipo di terapia <Ramp+>
- ▷ N. iniziale di impulsi
- ▷ Intervallo R-S1=(%RR)
- ▷ S1S2 (Ramp+)=(%RR)
- ▷ S2SN (Ramp+)=(%RR)
- ▷ N. sequenze
- ▷ Smartmode

**Nota:** per le terapie Ramp+ per gli episodi di FVT è prevista una sequenza di programmazione simile.

### 9.2.4.4 Programmazione delle impostazioni condivise

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ VT | Terapie...
- ⇒ Impostazioni condivise...
- ▷ Intervallo minimo ATP V-V
- ▷ Ampiezza V.
- ▷ Durata impulso V.
- ▷ Periodo di blanking post-stimolazione V.
- ▷ Stimolazione V.

## 9.2.5 Valutazione delle terapie di ATP ventricolare

### 9.2.5.1 La schermata Quick Look II

La schermata Quick Look II fornisce informazioni sulle terapie per VT/VF.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Quick Look II

**Figura 169.** Informazioni sulle VT/VF nella schermata Quick Look II

% di tempo	Trattati	
AS-VS	<0.1 %	VT/VF 2
AS-VP	80.7 %	AT/AF 1
AP-VS	<0.1 %	shock 0
AP-VP	19.2 %	
AT/AF	<0.1 %	Monitorati
		VT 2
		SVT 0
		AT/AF 0
<b>Osservazioni (1)</b>		
- 2 episodi di VT monitorati, il più lungo dei quali di 18 s.		

**Episodi di VT/VF trattati** – Questa sezione include un conteggio degli episodi di VT/VF trattati. Per visualizzare i dati relativi agli episodi trattati, è possibile selezionare il pulsante Trattati [>>].

**Osservazioni Quick Look II** – Le osservazioni Quick Look II si basano su un'analisi dei dati interrogati dall'ultima sessione e sui parametri programmati. Se sono disponibili informazioni correlate su una determinata osservazione, è possibile selezionare l'osservazione desiderata e poi selezionare il pulsante Osservazioni [>>] per visualizzarle.


### 9.2.5.2 Contatori di terapie per VT/VF

I contatori di terapie per VT/VF forniscono informazioni che servono a valutare l'efficacia delle terapie di ATP ventricolare. I contatori di terapie per VT/VF includono un riepilogo delle terapie per VT/VF per la sessione precedente, per l'ultima sessione e la durata del dispositivo. I contatori di terapie per VT/VF includono anche la funzione Efficacia delle terapie per VT/VF dall'ultima sessione.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Contatori
- ⇒ Rx VT/VF

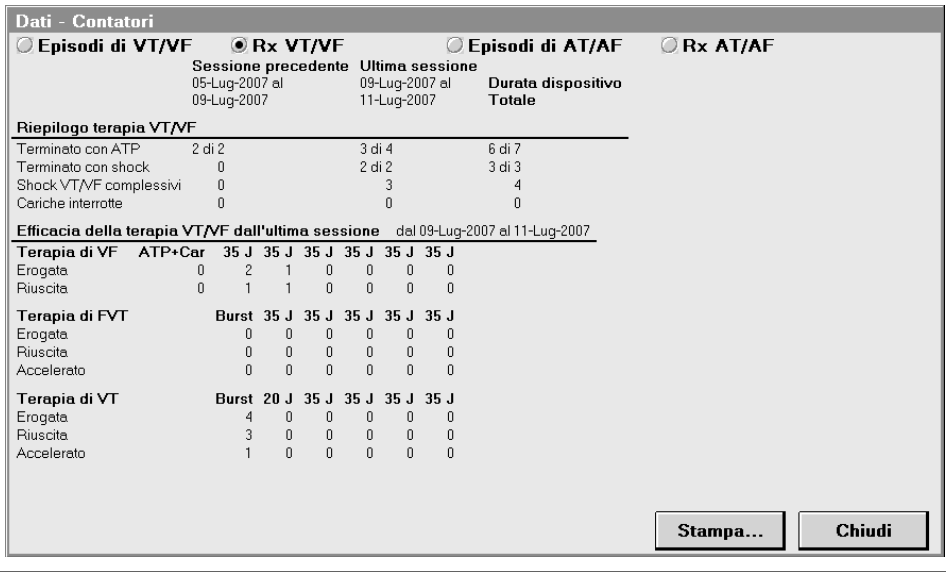Figura 170. La schermata dei contatori di terapie per VT/VF



I contatori di terapie per VT/VF forniscono i seguenti dati:

**Riepilogo terapia VT/VF** – Questo contatore registra il numero di tachiaritmie terminate con la stimolazione, il numero di tachiaritmie terminate con uno shock, il numero complessivo di shock VT/VF e le cariche interrotte nella sessione precedente e nell'ultima sessione, oltre alla durata del dispositivo.

**Efficacia della terapia per VT/VF dall'ultima sessione** – Questo contatore registra il numero ed il tipo di terapie per VF, FVT e VT erogate ed andate a buon fine. Il contatore di terapie per VT comprende episodi di VT che hanno subito un'accelerazione durante la terapia o che sono stati sottoposti a riconoscimento successivo come episodi di FVT o VF. Il contatore di terapie per FVT comprende episodi di FVT che sono stati sottoposti a riconoscimento successivo come episodi di VF.



9.2.5.3 Indicatori di funzionamento Smartmode

La schermata dei contatori di terapie per VT/VF fornisce informazioni sul funzionamento Smartmode.

Selezionare l'icona Dati

⇒ Diagnostica clinica

⇒ Contatori

⇒ Rx VT/VF

Figura 171. La schermata dei contatori di terapie per VT/VF

Efficacia della terapia VT/VF dall'ultima sessione dal 12-Lug-2007 al 13-Lug-2007									
Terapia di VF	ATP+Car	35 J	35 J	35 J	35 J	35 J	35 J	35 J	35 J
Erogeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riuscita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terapia di FVT	Burst	35 J	35 J	35 J	35 J	35 J	35 J	35 J	35 J
Erogeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riuscita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accelerato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terapia di VT	1 Off-SM* Ramp	35 J	35 J	35 J	35 J	35 J	35 J	35 J	35 J
Erogeta	4	4	0	0	0	0	0	0	0
Riuscita	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Accelerato	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Indica terapia auto disattivata da Smartmode.

1 L'etichetta "Off-SM" nel contatore di terapia per VT indica che la funzione Smartmode ha annullato una terapia di ATP inefficace.

Altre informazioni sul funzionamento Smartmode sono presenti anche nella schermata Terapie di VT o nella schermata Terapie di FVT.

**Figura 172.** La schermata Terapie di VT

Terapie di VT						
	Rx1	Rx2	Rx3	Rx4	Rx5	Rx6
Stato terapia di VT	1 Off-SM	On	On	On	On	On
Tipo di terapia		Ramp	CV	CV	CV	CV
Energia			35 J	35 J	35 J	35 J
Percorso			B>AX	B>AX	AX>B	AX>B
# Iniziale di impulsi		8				
Intervallo R-S1=(%RR)		91 %				
S1S2(Ramp+)=(%RR)						
S2SN(Ramp+)=(%RR)						
Dec. intervallo		10 ms				
# sequenze		3				
Funzione Smartmode		Off				
Impostazioni condivise...		Ricarica automatica condensatori...				
Annulla modifica						OK

- 1 L'etichetta "Off-SM" per Rx1 indica che la funzione Smartmode ha annullato una terapia di ATP inefficace.

## 9.3 Trattamento di VT e FVT con cardioversione ventricolare

Un episodio di VT o di FVT viene rilevato in presenza di una tachicardia ventricolare sostenuta. I trattamenti per questi episodi sono destinati ad interrompere la tachiaritmia ed a ripristinare il ritmo sinusale. Le terapie di ATP ventricolare possono far cessare questi episodi. Se le terapie di ATP sono inefficaci, è necessaria l'erogazione di uno shock ad alta tensione.

### 9.3.1 La soluzione offerta dal sistema è la cardioversione ventricolare

Il dispositivo può rispondere ad un episodio di VT o FVT erogando una terapia di cardioversione ventricolare al cuore del paziente. Al pari della terapia di defibrillazione, la cardioversione è destinata a far cessare un episodio depolarizzando il tessuto cardiaco e, simultaneamente, ripristinando il normale ritmo sinusale del paziente. Tuttavia, a differenza della defibrillazione, la cardioversione richiede che il dispositivo sincronizzi la terapia con un evento ventricolare rilevato.


Per ulteriori informazioni sul riconoscimento di episodi di VT o di FVT, cfr. la Sezione 8.2, "Riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari", pagina 304.

### 9.3.2 Funzionamento della cardioversione ventricolare

Quando viene rilevato un episodio di VT o FVT e la terapia successiva programmata è una cardioversione, il dispositivo inizia a caricare i condensatori ad alta tensione e cerca di verificare la presenza continuata della tachiaritmia. Se la tachiaritmia cessa, il dispositivo annulla la terapia.

Se la tachiaritmia è ancora presente quando i condensatori vengono caricati fino a raggiungere il livello di energia programmato, il dispositivo eroga l'impulso di cardioversione sincronizzato con un evento ventricolare rilevato. Nel caso in cui la sincronizzazione non fosse possibile, il dispositivo annulla la terapia.

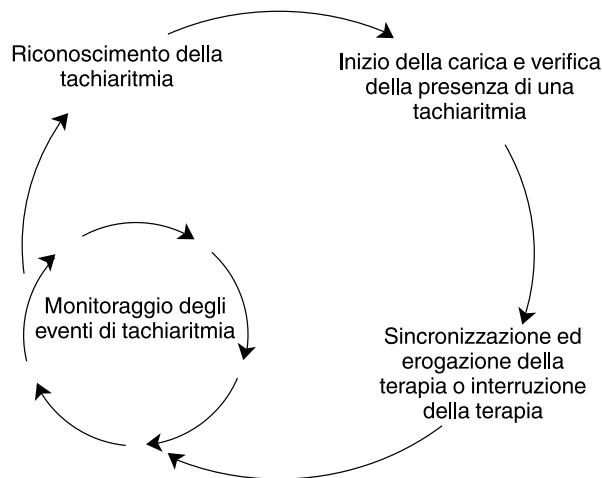**Figura 173.** Panoramica della cardioversione ventricolare



#### 9.3.2.1 Erogazione di terapie ad alta tensione

Per erogare una terapia di cardioversione, il dispositivo deve prima caricare i propri condensatori ad alta tensione fino a raggiungere il livello di energia programmato. Il tempo necessario per la carica dei condensatori dipende dal livello di energia programmato, dal grado di esaurimento della batteria e dal tempo trascorso dall'ultima ricarica dei condensatori. Il livello di energia erogata viene programmato separatamente per ciascuna terapia di cardioversione. Gli impulsi di cardioversione utilizzano una forma d'onda bifasica nella quale il percorso della corrente per l'impulso ad alta tensione viene invertito a metà strada durante l'erogazione dell'impulso.

Vedere la Sezione A.5, “Livelli di energia e tempi di carica tipici”, pagina 446 per informazioni su:

- i periodi di carica medi alla massima energia dei condensatori
- un confronto tra i livelli di energia erogata ed accumulata

### 9.3.2.2 Selezione degli elettrodi e del percorso di corrente ad alta tensione

I parametri Active Can/Coil SVC e Percorso consentono di specificare gli elettrodi e la direzione del flusso di corrente per gli impulsi di defibrillazione e cardioversione. Il parametro Active Can/Coil SVC ha le impostazioni seguenti:

- L'impostazione Can+SVC On consente di collegare l'Active Can (HVA) ed il Coil SVC (HVX). Si crea così un flusso di corrente tra questi elettrodi ed il Coil RV (HVB).
- L'impostazione Can Off consente di disattivare la funzione Active Can. In questo caso, è necessario impiantare un elettrocattetere SVC. Si crea così un flusso di corrente tra il Coil SVC (HVX) ed il Coil RV (HVB).
- L'impostazione SVC Off fa in modo che l'elettrocattetere SVC, se impiantato, non venga utilizzato. Si crea così un flusso di corrente tra l'Active Can ed il Coil RV (HVB).

**Nota:** per informazioni sulle caratteristiche degli elettrocatteteri, cfr. la Sezione 2.4, “Valutazione e collegamento dell'elettrocattetere”, pagina 28.

Le impostazioni per il parametro Percorso sono AX>B e B>AX. AX si riferisce agli elettrodi HVA e HVX che possono essere utilizzati singolarmente o abbinati. B si riferisce all'elettrodo HVB. L'impostazione Percorso definisce la direzione del flusso di corrente nel segmento iniziale della forma d'onda bifasica. Se il parametro viene impostato su AX>B, si crea un flusso di corrente tra l'Active Can, il Coil SVC ed il Coil RV. Se il parametro viene impostato su B>AX, il flusso di corrente viene invertito.


### 9.3.2.3 Conferma della VT o della FVT dopo il riconoscimento

Quando il dispositivo inizia a caricare i condensatori per la terapia di cardioversione, controlla anche il ritmo cardiaco per verificare che la tachiaritmia sia sempre presente prima di erogare la terapia.

Il dispositivo verifica la presenza continuata della tachiaritmia utilizzando un intervallo di conferma. L'intervallo di conferma è più lungo di 60 ms rispetto all'intervallo VT programmato. Il dispositivo classifica qualsiasi evento ventricolare che abbia luogo nell'intervallo di conferma come un “evento aritmico”, mentre classifica qualsiasi evento che abbia luogo al di fuori dell'intervallo come un “evento normale”.

Per ciascun evento ventricolare durante la carica, il dispositivo controlla gli ultimi cinque eventi dall'inizio della carica. Se negli ultimi cinque eventi ventricolari vi sono stati quattro "eventi normali", il dispositivo interrompe la carica annullando la terapia.

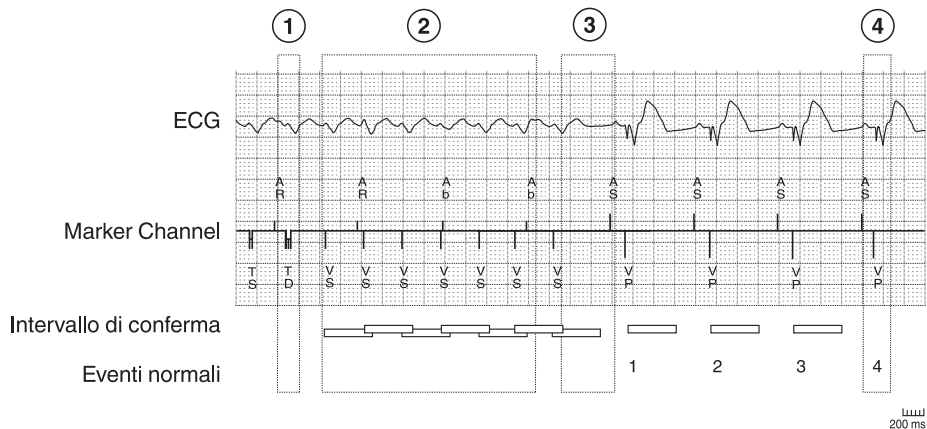**Figura 174.** Esempio di terapia di cardioversione annullata



- 1 Il dispositivo ha rilevato una VT ed inizia a caricare i condensatori per la cardioversione.
- 2 Il dispositivo verifica la presenza della tachiaritmia utilizzando l'intervallo di conferma.
- 3 L'episodio di VT termina spontaneamente ed il normale ritmo sinusale riprende.
- 4 Se quattro degli ultimi cinque eventi sono "eventi normali", il dispositivo cessa di caricare i propri condensatori.

#### 9.3.2.4 Sincronizzazione della cardioversione dopo la carica

Una volta terminata la carica, il dispositivo continua a verificare la presenza della tachiaritmia. Se la tachiaritmia persiste, il dispositivo tenta di erogare la terapia di cardioversione. Se la tachiaritmia cambia, il dispositivo interrompe la terapia.


Per erogare la terapia di cardioversione, il dispositivo tenta di sincronizzarla con un evento ventricolare non refrattario che soddisfa uno dei seguenti requisiti:

- L'evento è il secondo evento ventricolare tachiaritmico dopo la carica e non rientra nel periodo vulnerabile atriale.
- L'evento è il terzo evento ventricolare tachiaritmico.

**Nota:** il sistema definisce come periodo vulnerabile atriale una finestra di 250 ms che varia da 150 ms a 400 ms dopo un evento atriale rilevato. Una terapia di cardioversione erogata durante questo periodo potrebbe indurre una tachiaritmia atriale. Se è stata pianificata l'erogazione di una cardioversione durante questo periodo, questa viene rimandata fino all'evento idoneo successivo.

Il dispositivo continua la sincronizzazione fino a quando non eroga la terapia di cardioversione oppure non riesce a confermare la presenza della tachiaritmia ed annulla la terapia.

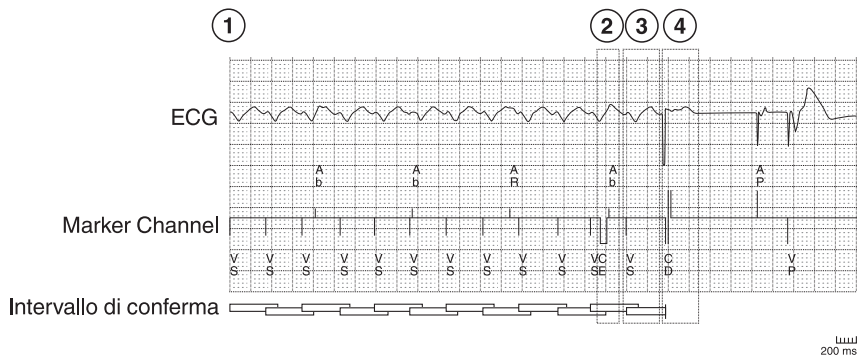**Figura 175.** Esempio di erogazione sincrona della cardioversione




- 1 Il dispositivo ha rilevato una VT. Carica i propri condensatori per la cardioversione e verifica se la tachiaritmia sia ancora presente.
- 2 Il dispositivo termina il processo di carica mentre continua la verifica.
- 3 Si verifica un evento ventricolare tachiaritmico.
- 4 Al secondo evento tachiaritmico dopo la carica, il dispositivo eroga la terapia di cardioversione.

Dopo la carica, il dispositivo verifica la presenza della tachiaritmia rilevata in maniera diversa da come la conferma durante la carica. Dopo la carica, il dispositivo interrompe la terapia di cardioversione nel caso in cui dovesse verificarsi uno degli eventi seguenti:

- un “evento normale” nel ventricolo
- tre intervalli ventricolari rilevati consecutivi inferiori a 200 ms

La presenza di brevi intervalli ventricolari rilevati durante la sincronizzazione indica che il ritmo ha accelerato dal riconoscimento iniziale o che è presente un oversensing significativo. In entrambi i casi, la cardioversione non può più essere considerata una terapia adeguata.

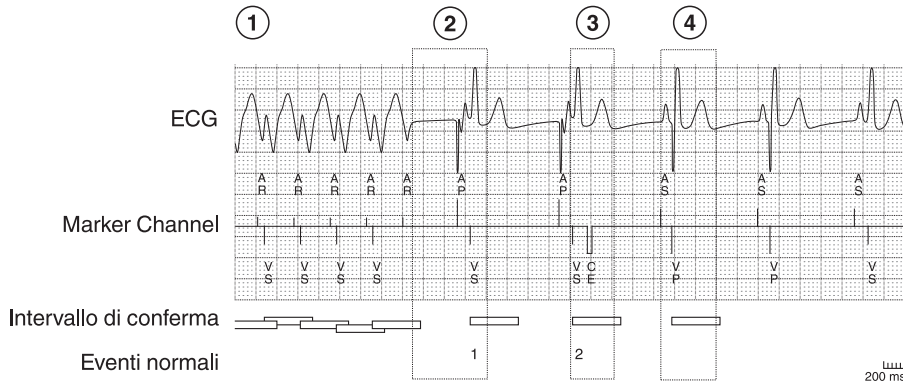**Figura 176.** Esempio di terapia di cardioversione interrotta

- 1 Il dispositivo ha rilevato una VT. Carica i propri condensatori per la cardioversione e verifica se la tachiaritmia sia ancora presente.
- 2 L'episodio di VT termina spontaneamente ed il normale ritmo sinusale riprende.
- 3 Il periodo di carica termina ed inizia la sincronizzazione. A questo punto, il dispositivo interrompe la procedura di verifica.
- 4 La terapia di cardioversione viene interrotta quando si verifica un "evento normale" durante la sincronizzazione.

### 9.3.2.5 La stimolazione antibradicardica durante e dopo una terapia di cardioversione

Al primo evento ventricolare dopo la carica, il dispositivo passa al modo di stimolazione VVI finché la carica non viene erogata o interrotta. L'intervallo di stimolazione rimane invariato durante questo periodo.

Una volta erogata la terapia di cardioversione, il dispositivo controlla la fine dell'episodio o del riconoscimento successivo. Subito dopo avere erogato lo shock, il dispositivo inizia un periodo di blanking post-shock di 520 ms e riprende la stimolazione antibradicardica nel modo di stimolazione programmato.

Vengono applicati i parametri di stimolazione post-shock. Per ulteriori informazioni cfr. la Sezione 7.13, "Aumento dell'uscita di stimolazione dopo una terapia ad alta tensione", pagina 278. Attivando la stimolazione post-shock VT/VF, il dispositivo stimola con la frequenza overdrive programmata. Per ulteriori informazioni cfr. la Sezione 7.15, "Erogazione della stimolazione in overdrive dopo una terapia ad alta tensione per VT/VF", pagina 289.

### 9.3.2.6 Sequenza dopo una terapia di cardioversione annullata

Se il dispositivo annulla una terapia di cardioversione, ritorna immediatamente ai parametri di stimolazione antibradicardica programmati, non ai parametri di stimolazione post-shock.

Il dispositivo riprende il monitoraggio delle aritmie dopo l'evento ventricolare stimolato o rilevato successivo. Se il dispositivo riconosce nuovamente la VT (o la FVT) prima che l'episodio termini, tenta di sincronizzare ed erogare la terapia programmata che è stata interrotta. Tuttavia, se l'episodio cessa, il dispositivo ritorna al riconoscimento normale.

**Nota:** se il dispositivo cancella la terapia di cardioversione lasciando energia accumulata nei condensatori, l'energia erogata nella successiva terapia ad alta tensione può essere superiore al valore programmato.

### 9.3.3 Alcune considerazioni sulla programmazione della cardioversione ventricolare

**Attenzione:** se la funzione Active Can non viene utilizzata, il dispositivo erogherà soltanto le terapie di defibrillazione e cardioversione tra gli elettrodi Coil RV (HVB) e Coil SVC (HVX). Affinché il dispositivo possa erogare le terapie di defibrillazione e cardioversione, verificare che sia stato impiantato un elettrodo HVX supplementare e che questo sia collegato al dispositivo prima di programmare il parametro Active Can/Coil SVC su Can Off.

**Active Can/Coil SVC** – L'impostazione programmata per il parametro Active Can/Coil SVC si applica a tutte le funzioni che consentono di erogare shock ad alta tensione.

**Energia** – La programmazione del livello di energia della terapia di cardioversione su un valore ottimizzato può accelerare l'erogazione e prolungare la durata della batteria. Un livello ottimizzato di energia fa cessare la tachiaritmia con un margine di sicurezza adeguato evitando sprechi di energia. Occorre programmare per lo meno una terapia di VT ed una terapia di FVT per la cardioversione alla massima energia.

**Terapie di cardioversione per FVT** – Se le terapie di FVT vengono attivate, almeno un terapia di FVT deve essere programmata sulla cardioversione (a qualsiasi livello di energia). La terapia di FVT finale deve essere sempre programmata sulla cardioversione.

**Aggressività delle terapie** – Le terapie di VT e FVT devono essere programmate con un'aggressività crescente. Ad esempio, non si può programmare una terapia di VT sulla cardioversione ed una terapia di VT successiva sulla terapia di ATP. Analogamente, una terapia di cardioversione VT non può essere seguita da un'altra terapia di cardioversione VT con un parametro di energia inferiore.

**Terapie di VF** – Le terapie di VT e FVT non possono essere attivate a meno che non sia stata anche attivata almeno una terapia di VF.



9.3.4 Programmazione della cardioversione ventricolare

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ VT | Terapie...
  - ▷ Stato terapia di VT <On>
  - ▷ Tipo di terapia <CV>
  - ▷ Energia
  - ▷ Percorso
- ⇒ Impostazioni condivise...
  - ▷ Active Can/Coil SVC

**Nota:** per le terapie di CV per gli episodi di FVT è prevista una sequenza di programmazione simile.

9.3.5 Valutazione della cardioversione ventricolare

9.3.5.1 La schermata Quick Look II

La schermata Quick Look II fornisce informazioni sulle terapie per VT/VF.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Quick Look II

Figura 177. Informazioni sulla VT/VF nella schermata Quick Look II

% di tempo		Trattati	
AS-VS	<0.1 %	VT/VF	2
AS-VP	80.7 %	AT/AF	1
AP-VS	<0.1 %	shock	0
AP-VP	19.2 %		
AT/AF	<0.1 %	Monitorati	
		VT	2
		SVT	0
		AT/AF	0
Osservazioni (1)			
2 episodi di VT monitorati, il più lungo dei quali di 18 s.			

**Episodi di VT/VF trattata** – Questa sezione include un conteggio degli episodi di VT/VF trattata. Per visualizzare i dati relativi agli episodi trattati, è possibile selezionare il pulsante Trattati [>>].

**Osservazioni Quick Look II** – Le osservazioni Quick Look II si basano su un’analisi dei dati interrogati dall’ultima sessione e sui parametri programmati. Se sono disponibili informazioni correlate su una determinata osservazione, è possibile selezionare l’osservazione desiderata e poi selezionare il pulsante Osservazioni [>>] per visualizzarle.


**9.3.5.2 Contatori di terapie per VT/VF**

I contatori di terapie per VT/VF forniscono informazioni che possono essere di aiuto nella valutazione dell’efficacia della cardioversione ventricolare. I contatori di terapie per VT/VF includono un riepilogo delle terapie per VT/VF per la sessione precedente, per l’ultima sessione e la durata del dispositivo. I contatori di terapie per VT/VF includono anche la funzione Efficacia delle terapie per VT/VF dall’ultima sessione.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Contatori
- ⇒ Rx VT/VF

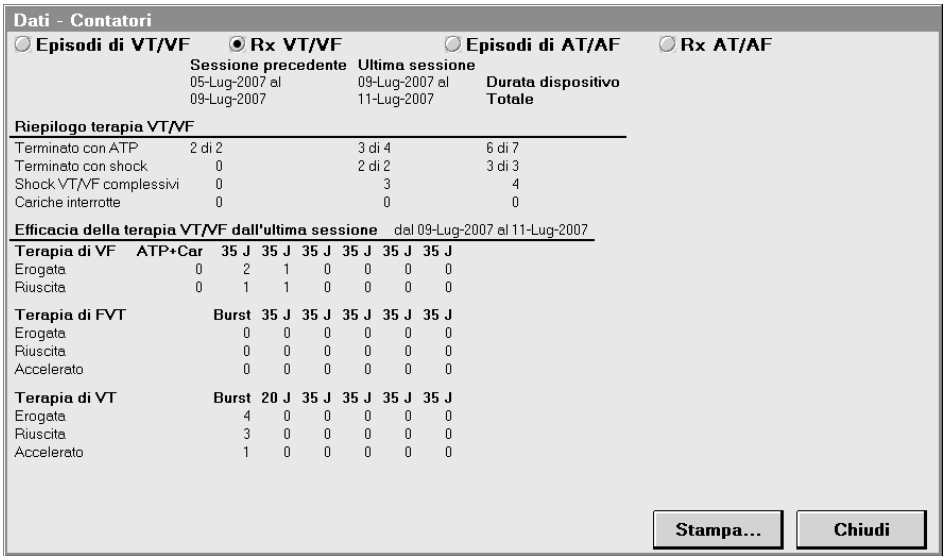**Figura 178.** Contatori di terapie per VT/VF



**Riepilogo terapia VT/VF** – In questa sezione vengono registrati il numero di aritmie terminate con stimolazione, il numero di aritmie terminate con shock, il numero di shock

VT/VF complessivi, il numero di cariche interrotte nella sessione precedente e nell'ultima sessione e la durata del dispositivo.

**Efficacia della terapia per VT/VF dall'ultima sessione** – Relativamente alle terapie per VF, FVT e VT, i contatori registrano il numero ed il tipo di terapie erogate e risultate efficaci. Il contatore di terapie per VT comprende episodi di VT che hanno subito un'accelerazione durante la terapia o che sono stati sottoposti a riconoscimento successivo come episodi di FVT o VF. Il contatore di terapie per FVT comprende episodi di FVT che sono stati sottoposti a riconoscimento successivo come episodi di VF.

## 9.4 Pianificazione delle terapie atriali

Un episodio di AT/AF viene rilevato quando si verifica una tachiaritmia atriale sostenuta. I trattamenti disponibili per questi episodi sono stati appositamente studiati per interrompere la tachiaritmia atriale e ripristinare il ritmo sinusale normale del paziente. Durante un episodio possono verificarsi variazioni del ritmo atriale o del substrato intrinseco. Tali variazioni potrebbero consentire la cessazione dell'episodio con l'erogazione di una terapia in precedenza rivelatasi inefficace.

### 9.4.1 La soluzione offerta dal sistema è la pianificazione delle terapie atriali

Il dispositivo offre la possibilità di pianificare terapie atriali da erogare per l'intera durata di un episodio di AT/AF e la flessibilità di determinare in che modo il dispositivo deve erogare le terapie programmando i parametri per le terapie atriali in base alla pianificazione. Ogni volta che si rende necessaria una terapia per AT/AF, il dispositivo pianifica una delle terapie erogabili secondo la programmazione effettuata.

Per informazioni sul riconoscimento e le terapie atriali, fare riferimento alle sezioni descritte di seguito:

- Sezione 8.1, "Riconoscimento di tachiaritmie atriali", pagina 294
- Sezione 9.5, "Trattamento degli episodi di AT/AF con la stimolazione antitachicardica", pagina 387
- Sezione 9.6, "Trattamento dell'AT/AF con la cardioversione atriale", pagina 400

### 9.4.2 Funzionamento della pianificazione delle terapie atriali

Il dispositivo pianifica l'erogazione di terapie atriali automatiche. Le opzioni programmabili consentono di impostare le condizioni per erogare la stimolazione antitachicardica (ATP) e le terapie automatiche di cardioversione atriale (CV). L'ATP reattiva è un'opzione che consente al dispositivo di erogare le terapie di ATP rivelatesi inefficaci in un momento precedente dell'episodio.

Le terapie di cardioversione atriale attivate dal paziente vengono erogate su iniziativa del paziente, a condizione che vi sia un episodio di AT/AF in corso. Per informazioni sulla pianificazione di queste terapie, cfr. la Sezione 9.7, "Erogazione di una cardioversione atriale attivata dal paziente", pagina 407.

#### **9.4.2.1 Durata di un episodio**

Il sistema consente di definire quando si possono pianificare le terapie di ATP atriale e di CV atriale nella durata di un episodio. In termini di pianificazione delle terapie, per durata di un episodio si intende il tempo trascorso dal riconoscimento iniziale di un episodio di AT/AF. I seguenti parametri consentono di programmare quando possono essere erogate le terapie:

- Il valore programmato ATP del parametro Durata episodio prima dell'erogazione Rx determina quando possono essere erogate le sequenze di ATP atriale.
- Il valore programmato CV automatica del parametro Durata episodio prima dell'erogazione Rx determina quando possono essere erogate le terapie automatiche di CV atriale.
- Programmando un limite di tempo per il parametro Durata per arresto, non verrà pianificata alcuna terapia atriale dopo che la durata dell'episodio avrà raggiunto il valore di Durata per arresto.

#### **9.4.2.2 Requisiti per la pianificazione di una terapia atriale automatica**

Al riconoscimento iniziale e ad ogni riconoscimento successivo, viene pianificata una delle terapie atriali erogabili. Per poter pianificare sequenze di ATP atriale e le terapie automatiche di CV atriale, dovranno essere presenti le condizioni descritte di seguito:

- Gli ultimi cinque eventi atriali verificatisi erano tutti eventi atriali rilevati.
- Nell'intervallo ventricolare precedente vi erano tre o più eventi atriali rilevati o due eventi atriali rilevati con intervalli inferiori all'intervallo di AT/AF.
- La terapia è erogabile da questo punto della durata episodio.
- Quando le terapie automatiche di CV atriale diventano erogabili, esse hanno la priorità sull'erogazione delle sequenze di ATP. Una volta erogate tutte le possibili terapie di CV, le sequenze di ATP restanti tornano ad essere erogabili.

Per le terapie automatiche di CV atriale vi sono alcuni requisiti aggiuntivi.

Una terapia automatica di CV atriale viene pianificata solo se la durata episodio rientra in una finestra di erogazione programmabile. La finestra di erogazione viene determinata da due parametri elencati in Limiti CV automatica. Questi parametri consentono di programmare l'ora iniziale e la durata della finestra di erogazione.

È possibile erogare terapie automatiche di CV atriale solo se dieci o più intervalli ventricolari degli ultimi dodici sono di durata pari o superiore a quella dell'intervallo R-R minimo programmato.

Per limitare il numero di shock atriali, è possibile programmare il parametro Max num. di shock al giorno (che si trova sotto Limiti CV automatica). Quando il numero totale di shock atriali automatici e di shock atriali attivati dal paziente raggiunge il limite programmato, non è possibile erogare altre terapie automatiche di CV atriale fino alla finestra di erogazione successiva. Le terapie di CV atriale attivate dal paziente restano erogabili.

La durata del dispositivo è protetta da un limite per le cariche di cardioversione atriale inefficaci. Questo limite non è programmabile e riguarda le terapie di CV atriale sia automatiche che attivate dal paziente. Durante un episodio atriale non viene pianificato alcun tipo di terapia di CV dopo l'interruzione di quindici terapie di CV atriale all'interno dello stesso episodio. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 9.6, "Trattamento dell'AT/AF con la cardioversione atriale", pagina 400.

#### **9.4.2.3 Utilizzo della zona di riconoscimento di AT/AF rapida**

Il riconoscimento delle tachiaritmie atriali può essere programmato su due zone di riconoscimento: AT/AF e AT/AF rapida. Ogni zona dispone di una serie univoca di terapie programmate. Il dispositivo pianifica ogni terapia di una serie indicata per una determinata zona. La disponibilità delle singole terapie può dipendere dall'intervallo atriale mediano attivo ogni volta che si verifica un determinato riconoscimento.

#### **9.4.2.4 ATP reattiva**

In taluni casi, la serie programmata di terapie di ATP atriale potrebbe inizialmente non far cessare una tachiaritmia atriale. Eventuali tentativi successivi di cessazione con la stessa serie di terapie di ATP atriale possono andare a buon fine, soprattutto se il ritmo atriale cambia. L'ATP reattiva consente al dispositivo di ripetere serie programmate di terapie di ATP atriale in due diverse situazioni. "Cambio ritmo" è un tipo di ATP reattiva che suddivide la zona di riconoscimento di AT/AF in regioni più piccole. Le terapie di ATP programmate per la zona di AT/AF si applicano ad ognuna delle regioni più piccole di quella zona. L'altro tipo di ATP reattiva è "Intervallo di tempo", che rende erogabili con durate specifiche tutte le terapie di ATP nel corso di un episodio.

**Nota:** l'efficacia della funzione ATP reattiva non è stata esaminata.


**Cambio ritmo** – Con il Cambio ritmo, il dispositivo riconosce le variazioni sopraggiunte nella regolarità e nella durata del ciclo dei ritmi atriali. La zona di riconoscimento di AT/AF viene suddivisa in una serie di regioni più ristrette. Le terapie di ATP programmate per la zona di AT/AF si applicano ad ognuna delle regioni più piccole di quella zona. Per i ritmi atriali regolari viene individuata una serie di regioni suddivise e un'altra serie di regioni viene

individuata per i ritmi atriali irregolari. Un ritmo atriale viene classificato come regolare o irregolare in base alla durata dei cicli atriali negli intervalli V-V recenti. Se il ritmo passa ad un'altra regione a causa di un cambio di durata o regolarità del ciclo, il dispositivo erogherà una delle terapie disponibili per la nuova regione.

Il passaggio da un ritmo regolare ad un ritmo irregolare introduce un ulteriore ritardo di programmazione di 10 min per consentire la conclusione spontanea del ritmo irregolare o il ritorno ad un ritmo regolare.


In presenza di una sola zona di riconoscimento atriale, il numero di regioni dipende dall'intervallo di riconoscimento di AT/AF programmato. Fare riferimento alla Figura 179.

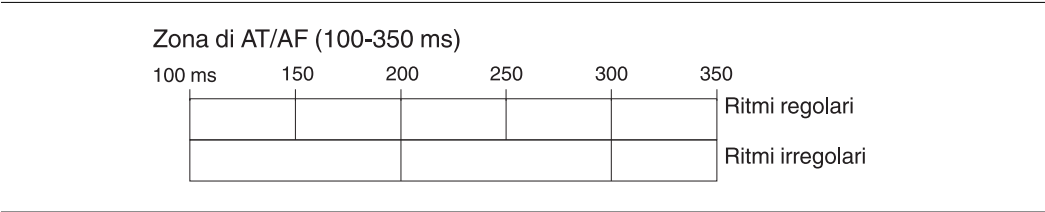**Figura 179.** Suddivisione della zona AT/AF per Cambio ritmo (solo AT/AF)



In presenza di due zone di riconoscimento atriale, il numero di regioni nella zona di AT/AF dipende dai valori programmati per l'intervallo di riconoscimento di AT/AF e per l'intervallo di riconoscimento di AT/AF rapida. Fare riferimento alla Figura 180. Poiché la zona di AT/AF rapida non viene suddivisa, le terapie di ATP per AT/AF rapida non vengono influenzate da questo tipo di ATP reattiva.

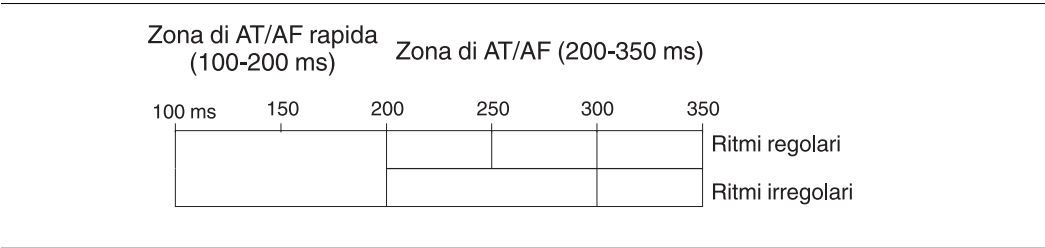**Figura 180.** Suddivisione della zona di AT/AF per Cambio ritmo (AT/AF e AT/AF rapida)



**Nota:** per visualizzare il numero di terapie di ATP atriale erogate per ciascuna regione, consultare la diagnostica Episodi aritmici. Vedere la Sezione 9.4.5.

**Intervallo di tempo** – L'intervallo di tempo consente al dispositivo di pianificare ulteriori terapie di ATP indipendentemente dalle variazioni del ritmo.

Tutte le sequenze di ATP diventano erogabili quando il valore di durata episodio raggiunge un multiplo dell'intervallo di tempo programmato. Ciò si applica alle terapie di ATP sia per la zona di AT/AF sia per la zona di AT/AF rapida. Questa funzione è utilizzabile soltanto entro le prime 48 ore di un episodio atriale.

#### **9.4.2.5 Disabilitazione automatica delle terapie atriali**

In talune situazioni, il dispositivo può disattivare o sospendere automaticamente una terapia atriale.

**Riconoscimento di VT/VF dopo l'erogazione di una terapia per AT/AF** – Le terapie atriali vengono disabilite se la VT/VF viene rilevata subito dopo l'erogazione di una terapia per AT/AF. In questo caso, le terapie atriali rimangono disabilite fino alla loro riprogrammazione.

**Riconoscimento di VT/VF indipendente dall'erogazione di terapie per AT/AF** – Se il dispositivo rileva una VT/VF durante un episodio di AT/AF ma il riconoscimento non ha alcuna relazione con l'erogazione della terapia, il dispositivo sospende temporaneamente le terapie atriali. Le terapie atriali riprendono automaticamente quando termina l'episodio di VT/VF.

Il sistema dispone inoltre di due opzioni programmabili che consentono di disabilitare le terapie atriali in determinate circostanze. È possibile accedere a questi opzioni selezionando "Interrompere Rx A dopo Rx/se l'elettrocatteter è sospetto".

**Accelerazione della frequenza ventricolare durante l'erogazione di una terapia di ATP atriale** – Se la frequenza ventricolare accelera durante l'erogazione di una terapia di ATP atriale e un episodio di tachiaritmia ventricolare non viene rilevato, il dispositivo disattiva immediatamente tutte le terapie di ATP atriale per il resto dell'episodio. Se questo tipo di accelerazione della frequenza si verifica in tre episodi, il dispositivo disabilita le terapie di ATP atriale finché queste non vengono riprogrammate. È possibile programmare questa opzione utilizzando il parametro "Disattivare ATP atriale se ciò accelera la frequenza V."

**Posizione dell'elettrocatteter atriale sospetta** – Il dispositivo controlla la posizione dell'elettrocatteter atriale ogni 24 ore. Il controllo della posizione dell'elettrocatteter atriale avviene soltanto se il modo di stimolazione comprende la stimolazione atriale. Il controllo viene disattivato durante il cambio modo, le sessioni di telemetria e qualsiasi episodio di tachiaritmia. Durante il controllo, l'atrio viene stimolato con una serie di impulsi ad alta frequenza per determinare il numero di intervalli AP-VS nelle serie più brevi di 80 ms. Un numero elevato di intervalli brevi indica che l'elettrocatteter potrebbe essersi spostato dall'atrio. Se questo controllo degli elettrocatteteri non va a buon fine, tutte le terapie atriali vengono disattivate fino alla loro riprogrammazione. È possibile programmare questa opzione utilizzando il parametro "Disattivare tutte le terapie atriali se la posizione dell'elettrocatteter atriale è sospetta".

### 9.4.3 Alcune considerazioni sulla pianificazione delle terapie atriali

**Terapie atriali e riconoscimento di AT/AF** – Se tutte le terapie atriali sono state programmate su Off e si cambia il valore del parametro di riconoscimento di AT/AF da Monitoraggio a On, il programmatore imposta automaticamente le prime due terapie di AT/AF sui valori nominali o su quelli precedentemente programmati.

**Controllo della posizione dell'elettrocatetere atriale** – Per assicurare l'effettivo controllo della posizione degli elettrocateteri, verificare che il modo di stimolazione comprenda la stimolazione atriale. Il controllo della posizione degli elettrocateteri non avviene se il modo di stimolazione programmato è VVIR, VVI, VOO, DOO o ODO.

**Controllo della posizione dell'elettrocatetere atriale e stimolazione ventricolare di sicurezza** – Il controllo della posizione degli elettrocateteri non potrà essere abilitato se la stimolazione ventricolare di sicurezza non è stata attivata.

**Riconoscimento di VF durante l'AT/AF** – Per assicurare la regolare esecuzione del riconoscimento di VF durante gli episodi di AT/AF, il riconoscimento di AT/AF non può essere abilitato se il riconoscimento di VF non viene attivato.

**Tempistica della finestra della terapia di CV** – Verificare che l'orologio del dispositivo sia stato regolato correttamente quando si imposta l'ora iniziale per la finestra di erogazione della CV. L'ora iniziale viene impostata in base all'orologio del dispositivo, che va regolato nella finestra Impostazione raccolta dati.

### 9.4.4 Programmazione della pianificazione delle terapie atriali

1. Selezionare l'icona Parametri.
2. Impostare il riconoscimento di AT/AF su On.



3. Selezionare il campo Terapie... per AT/AF per aprire la finestra Riconoscimento e terapie di AT/AF.

Riconoscimento e terapie di AT/AF			
Riconosc.	Zone	Intervallo A. (freq.)	
On	2	AT/AF rapida	200 ms (300 min <sup>-1</sup> )
		AT/AF	350 ms (171 min <sup>-1</sup> )

CV attivata dal paziente...	
35J B>AX	
5 Stimolazione antitachicardica (ATP)...	5 CV automatica...
Rx AT/AF rapida	Ramp (8), Burst+(6), 50 Hz(2)
Rx AT/AF	Ramp (8), Burst+(6)
8 Reactive ATP	7 Limiti automatici CV...
Cambio ritmo	On
Interv.di tempo	Ogni 7 ore
Interrompere Rx atriali	9
Rx/elettrocatt. sospetto...	2 On
Durata per arresto	10 48 h
6 Durata episodio prima dell'erogazione Rx	1 min
CV automatica	6 h

4. Impostare il numero di zone su 1 o 2, a seconda delle esigenze del paziente.
5. Selezionare le terapie di ATP e CV automatica desiderate.
6. Selezionare i valori desiderati per la Durata episodio prima dell'erogazione Rx (ATP e CV automatica).
7. Selezionare i limiti desiderati per la CV automatica (finestra erogazione e numero massimo di shock giornalieri).
8. Selezionare i valori desiderati per l'ATP reattiva (cambio ritmo e intervallo di tempo).
9. Specificare se le terapie atriali dovranno essere disabilitate in caso di accelerazione della frequenza o di posizione sospetta dell'elettrocattetero.
10. Selezionare il valore desiderato per la Durata per arresto.
11. Ritornare alla schermata Parametri e selezionare [PROGRAMMA].

#### 9.4.5 Valutazione della pianificazione delle terapie atriali

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Episodi aritmia
- ⇒ Testo

**Figura 181.** La schermata Episodi aritmici

Dati - Episodi aritmici									
Tipo	ATP	shock	Succ.	Data	Ora	Durata	A/V min <sup>-1</sup>	V max	EGM
AT/AF	4		Sì	11-Lug-2007	12:09	:03:33	300/51	VP	EGM

#21: ☐ Diagr. ☐ EGM ☒ Testo

Precedente Successivo

Numero di sequenze di ATP erogate (\* = ultima Rx)

	100-199 ms	200-249 ms	250-299 ms	300-349 ms	350-399 ms	400-449 ms
Regolare		4*	0	0	0	0
Irregolare	0	0			0	

Numero di sequenze di ATP per AT/AF erogate 4

Impostazioni parametri Zone Intervallo A. (frequenza)

Impostazioni parametri	Zone	Intervallo A. (frequenza)
AT/AF On	2	AT/AF rapida 200 ms (300 min <sup>-1</sup> )
		AT/AF 350 ms (171 min <sup>-1</sup> )

Tempo residuo prima di interrompere tutte le terapie: 48 h

Reactive ATP Limiti CV automatica

Reactive ATP	Limiti CV automatica
Cambio ritmo On	Ora iniziale 03:00 per 1 ore
Intervallo di tempo Off	Max num. di shock al giorno 1

Stampa... Chiudi

Per gli episodi di AT/AF, nella schermata del testo sugli episodi aritmici vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- un riepilogo degli episodi
- una sequenza di eventi
- il numero di sequenze di ATP atriale che sono state erogate in ogni regione di ATP reattiva
- il numero di shock automatici di CV che sono stati erogati (se effettivamente erogati)
- il numero di shock attivati dal paziente che sono stati erogati (se effettivamente erogati)
- i valori programmati per le funzioni Riconoscimento di AT/AF, Durata per arresto, ATP reattiva, Limiti CV automatica e le impostazioni della Sensibilità

## **9.5 Trattamento degli episodi di AT/AF con la stimolazione antitachicardica**

Il dispositivo rileva la tachicardia atriale sostenuta come un episodio di AT/AF. I trattamenti disponibili per questo tipo di episodi sono stati appositamente studiati per interrompere la tachicardia atriale e ripristinare il ritmo sinusale normale del paziente. La terapia di stimolazione può essere un'opzione valida per far cessare un episodio di tachicardia atriale.

### **9.5.1 La soluzione offerta dal sistema è rappresentata dalle terapie di stimolazione antitachicardica atriale**

In risposta ad un episodio di AT/AF, il dispositivo può erogare terapie di stimolazione antitachicardica (ATP) atriale al cuore del paziente. Le terapie di ATP atriale sono state appositamente concepite per interrompere lo schema di attivazione di rientro dell'AT/AF e ripristinare il ritmo sinusale normale del paziente. Le terapie di ATP erogano impulsi di stimolazione anziché shock ad alta tensione come quelli erogati nella terapia di cardioversione.

Per informazioni sul riconoscimento di AT/AF, vedere la Sezione 8.1, "Riconoscimento di tachiaritmie atriali", pagina 294. Per informazioni sulla terapia di cardioversione atriale, fare riferimento alla Sezione 9.6, "Trattamento dell'AT/AF con la cardioversione atriale", pagina 400.

### **9.5.2 Funzionamento delle terapie di ATP atriale**

Il dispositivo è in grado di erogare un massimo di tre terapie di ATP per trattare un episodio di AT/AF o un episodio di AT/AF rapida. Le terapie di ATP atriale sono Burst+, Ramp e Burst a 50 Hz, ognuna delle quali ha un numero programmabile di sequenze. Tutte le terapie di ATP atriale vengono erogate in modo AOO.


Il dispositivo pianifica l'erogazione di terapie atriali per l'intera durata di un episodio di AT/AF sostenuta, in base alle impostazioni programmate. Una terapia di ATP può essere interrotta se non si verifica alcun evento atriale entro 500 ms dal momento della pianificazione della terapia.

Quando viene rilevato un episodio di AT/AF o di AT/AF rapida e la terapia successiva pianificata è una terapia di ATP, il dispositivo eroga la prima sequenza della terapia di ATP. Dopo la prima sequenza di ATP, il dispositivo continua a monitorare l'eventuale presenza di un episodio di tachicardia atriale. Se il dispositivo riconosce nuovamente l'episodio di tachicardia atriale e la programmazione della terapia atriale non ha reso disponibile alcuna terapia di cardioversione, il dispositivo eroga la sequenza di ATP successiva ripetendo questo ciclo finché l'episodio non cessa o tutte le sequenze nella terapia non sono esaurite. Se tutte le sequenze di una terapia di ATP dovessero rivelarsi inefficaci e non è ancora disponibile alcuna terapia di cardioversione atriale, il dispositivo inizia ad erogare la terapia di ATP successiva pianificata.

**Note:**

- Quando le terapie automatiche di CV atriale diventano erogabili, esse hanno la priorità sull'erogazione delle sequenze di ATP. Una volta erogate tutte le possibili terapie di CV, le sequenze di ATP restanti tornano ad essere erogabili.
- Se il dispositivo rileva che l'episodio di AT/AF corrente ha subito un'accelerazione diventando un episodio di AT/AF rapida, salta le restanti sequenze di una terapia di ATP dando avvio alla terapia successiva pianificata per l'episodio. Il dispositivo, tuttavia, ritarda l'erogazione della terapia per trattare un episodio di AT/AF rapida rilevato dopo l'erogazione di una terapia di stimolazione di AT/AF. Una terapia di AT/AF rapida viene ritardata di almeno 10 min per fare in modo che un ritmo accelerato possa cessare spontaneamente o ritornare al ritmo di AT/AF precedente.
- Il riconoscimento atriale viene sospeso durante l'erogazione di una sequenza di terapie di ATP atriale.

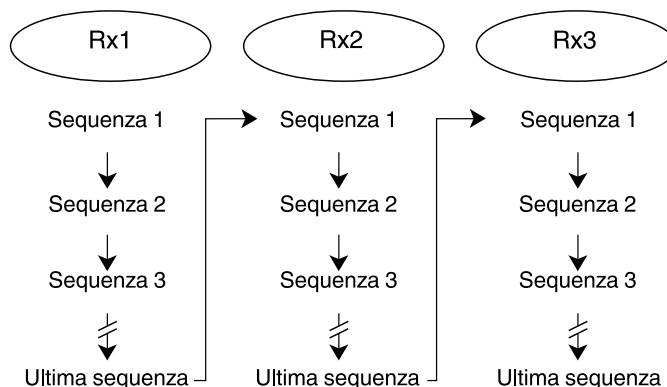**Figura 182.** Panoramica dell'erogazione di terapie di ATP atriale



Per una panoramica dell'erogazione di sequenze di ATP atriale, cfr. la Figura 183.


### 9.5.2.1 Pianificazione di terapie di ATP atriale

Il dispositivo si prepara ad erogare una terapia di ATP atriale in presenza delle seguenti condizioni:

- Al momento dell'erogazione pianificata è in corso un episodio atriale.
- La sequenziazione delle terapie di ATP atriale indica che le terapie di ATP sono attivate per una determinata classificazione del ritmo (AT/AF o AT/AF rapida).
- Per la classificazione in questione vi è ancora una terapia di ATP atriale inutilizzata.

Per maggiori informazioni sulla pianificazione delle terapie di ATP atriale, cfr. la Sezione 9.4, "Pianificazione delle terapie atriali", pagina 379.

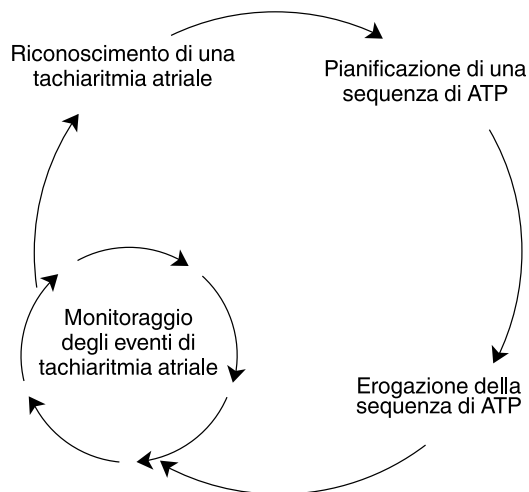**Figura 183.** Panoramica dell'erogazione di sequenze di ATP



### 9.5.2.2 Frequenza ed uscita di stimolazione della terapia di ATP atriale

**Limite minimo per l'intervallo di stimolazione ATP atriale** – Gli intervalli di stimolazione Burst+ e Ramp si basano su percentuali programmate della durata del ciclo di tachicardia atriale, calcolata come media degli ultimi dodici intervalli atriali prima dell'erogazione della terapia. La durata mediana del ciclo di tachicardia atriale può variare da una sequenza di una terapia a quella successiva. Gli intervalli di stimolazione ATP varieranno di conseguenza.

Il parametro programmabile Intervallo minimo di ATP A-A limita gli intervalli di stimolazione in corrispondenza dei quali vengono erogati gli impulsi di stimolazione Burst+ e Ramp. Se alcuni degli intervalli calcolati sono inferiori all'intervallo minimo di ATP A-A programmato, gli impulsi verranno erogati in base all'intervallo minimo di ATP A-A programmato.

Se la media degli ultimi 12 intervalli A-A è inferiore all'intervallo minimo di ATP A-A programmato, il dispositivo non eroga alcuna terapia di stimolazione Burst+ o Ramp se la frequenza atriale non diminuisce.

**Nota:** non esistono limiti di intervallo minimo per la terapia Burst atriale a 50 Hz.

**Uscita di stimolazione per le terapie ATP** – I valori dei parametri Ampiezza della stim. A. e Durata dell'impulso di stim. A. sono identici per tutte le terapie di ATP atriale, ma vengono programmati separatamente dall'ampiezza di stimolazione e dalla durata dell'impulso per gli impulsi di stimolazione antibradicardica.

### 9.5.2.3 Funzionamento della stimolazione Burst+


Il parametro programmabile N. iniziale impulsi S1 consente di impostare il numero iniziale di impulsi S1 in ogni sequenza di terapie Burst+. Interv. A-S1 (%AA), S1-S2 (%AA) e Decremento S2-S3 sono parametri programmabili che determinano gli intervalli di stimolazione in una sequenza Burst+.

Ogni sequenza Burst+ è composta dal numero iniziale di impulsi S1 programmato, seguito da due impulsi aggiuntivi se i parametri relativi a questi impulsi sono stati attivati. Gli intervalli di stimolazione per la prima sequenza Burst+ e gli impulsi aggiuntivi vengono espressi sotto forma di percentuali di durata del ciclo di tachicardia atriale. Nella prima sequenza Burst+, tutti gli impulsi iniziali S1 vengono erogati con lo stesso intervallo di stimolazione, determinato dalla percentuale dell'intervallo A-S1 (%AA). Il primo impulso aggiuntivo viene erogato con un intervallo determinato dalla percentuale S1-S2 (%AA). L'intervallo di stimolazione per l'impulso successivo viene calcolato sottraendo il valore del Decremento S2-S3 dall'intervallo precedente. Questo impulso viene erogato soltanto se il parametro S1-S2 (%AA) viene attivato.

In caso di riconoscimento successivo della tachicardia atriale dopo una sequenza inefficace, il dispositivo eroga un'altra sequenza di stimolazione Burst+ con intervalli di stimolazione più brevi. Per questa sequenza, il dispositivo calcola gli intervalli di stimolazione sottraendo il valore programmato di decremento di intervallo da ogni intervallo di stimolazione della sequenza precedente.

La stimolazione ventricolare VVI di backup è erogabile durante la sequenza di stimolazione Burst+.

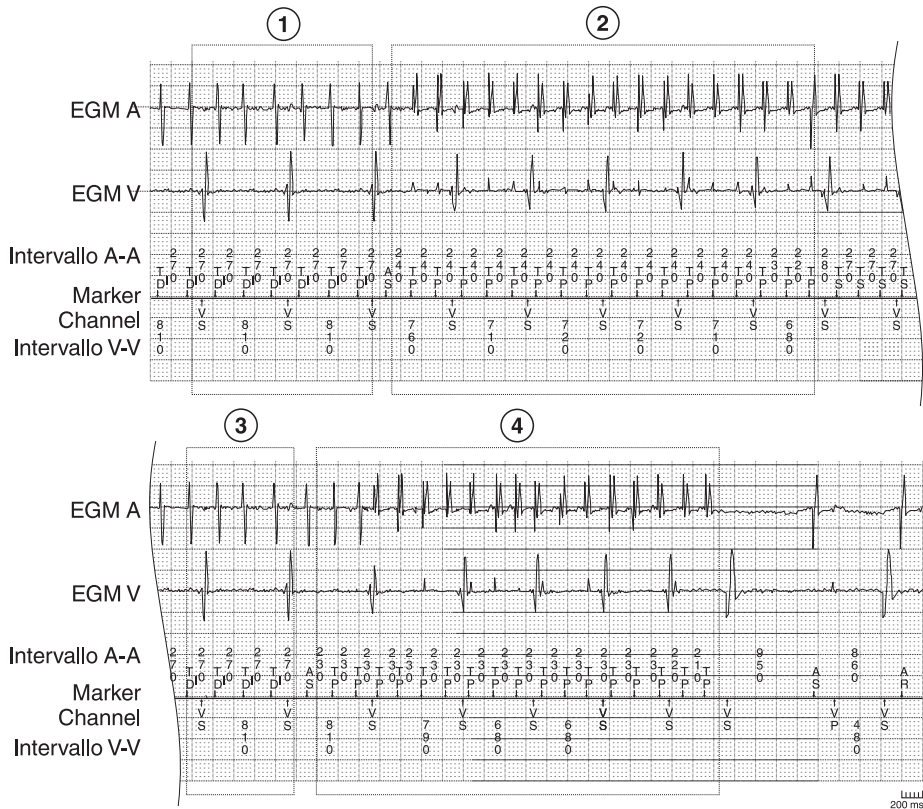**Figura 184.** Esempio di funzionamento della stimolazione Burst+



- 1 Il dispositivo rileva un episodio di AT/AF.
- 2 La prima sequenza di stimolazione Burst+ viene erogata con quindici impulsi con intervalli di stimolazione di 240 ms. La sequenza continua con due impulsi aggiuntivi con intervalli più brevi di 240 ms. L'intervallo subisce un decremento di 10 ms per ciascun impulso aggiuntivo. Questa sequenza non riesce a far cessare l'episodio di AT/AF.
- 3 Il dispositivo riconosce nuovamente l'episodio di AT/AF.
- 4 La seconda sequenza di stimolazione Burst+ viene erogata con quindici impulsi con intervalli di stimolazione di 230 ms. La sequenza continua con due impulsi aggiuntivi con intervalli più brevi di 230 ms. L'intervallo subisce un decremento di 10 ms per ciascun impulso aggiuntivo. Questa sequenza riesce a far cessare l'episodio di AT/AF.

#### 9.5.2.4 Funzionamento della stimolazione Ramp


Il parametro N. iniziale impulsi S1 consente di impostare il numero di impulsi nella prima sequenza Ramp. Intervallo A-S1 (%AA) e Decremento intervallo sono parametri programmabili che determinano gli intervalli di stimolazione Ramp.

Ogni sequenza di una terapia Ramp è composta dal numero programmato di impulsi erogati con intervalli di stimolazione decrescenti. In ogni sequenza, il primo impulso viene erogato con l'intervallo di stimolazione determinato dal parametro Intervallo A-S1=(%AA), sotto forma di percentuale della durata del ciclo di tachicardia ventricolare. Gli impulsi restanti nella sequenza vengono erogati ad intervalli di stimolazione progressivamente più brevi sottraendo il valore di Decremento intervallo per ciascun impulso.

Se la tachicardia atriale viene nuovamente riconosciuta dopo una sequenza non riuscita, il dispositivo applica la percentuale dell'intervallo A-S1 (%AA) programmata alla durata del nuovo ciclo di tachicardia atriale al riconoscimento successivo, per stabilire l'intervallo iniziale di stimolazione per la sequenza successiva. Ogni sequenza contiene un impulso di stimolazione in più rispetto alla sequenza precedente.

La stimolazione ventricolare VVI di backup è erogabile durante la stimolazione Ramp.

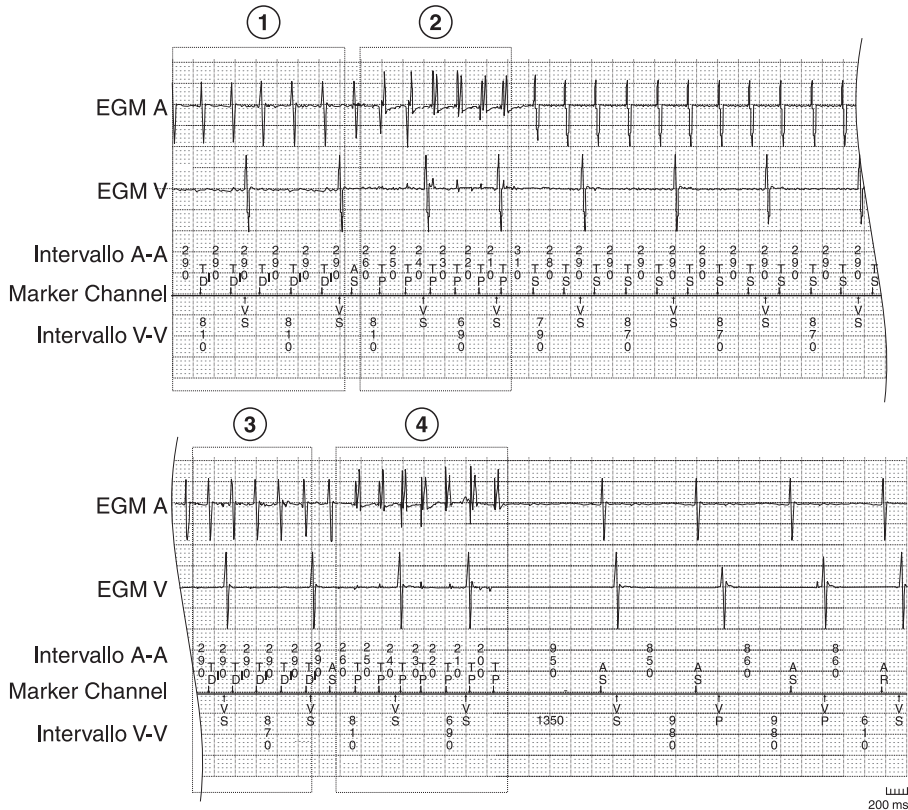

**Figura 185.** Esempio di funzionamento della stimolazione Ramp


- 1 Il dispositivo rileva un episodio di AT/AF.
- 2 La prima sequenza di stimolazione Ramp viene erogata con sei impulsi. Il primo intervallo è pari a 260 ms, mentre ogni intervallo successivo subisce un decremento di 10 ms, corrispondente al valore di Decremento intervallo. Questa sequenza non riesce a far cessare l'episodio di AT/AF.
- 3 Il dispositivo riconosce nuovamente l'episodio di AT/AF.
- 4 La seconda sequenza di stimolazione Ramp viene erogata con sette impulsi. Il primo intervallo è pari a 260 ms, mentre ogni intervallo successivo subisce un decremento di 10 ms, corrispondente al valore di Decremento intervallo. Questa sequenza riesce a far cessare l'episodio di AT/AF.

### 9.5.2.5 Funzionamento della stimolazione Burst a 50 Hz

Il dispositivo eroga una sequenza di terapie Burst a 50 Hz con una raffica di impulsi ad intervalli di stimolazione da 20 ms per la durata programmata della stimolazione Burst da 50 Hz. Ogni volta che la tachiaritmia atriale viene nuovamente riconosciuta, il dispositivo eroga un'altra sequenza Burst da 50 Hz fino all'erogazione dell'ultima sequenza programmata. La programmazione della terapia atriale viene ritardata per sedici eventi ventricolari dopo ogni sequenza di terapia Burst a 50 Hz.

La stimolazione ventricolare VOO di backup è erogabile durante la terapia Burst a 50 Hz.

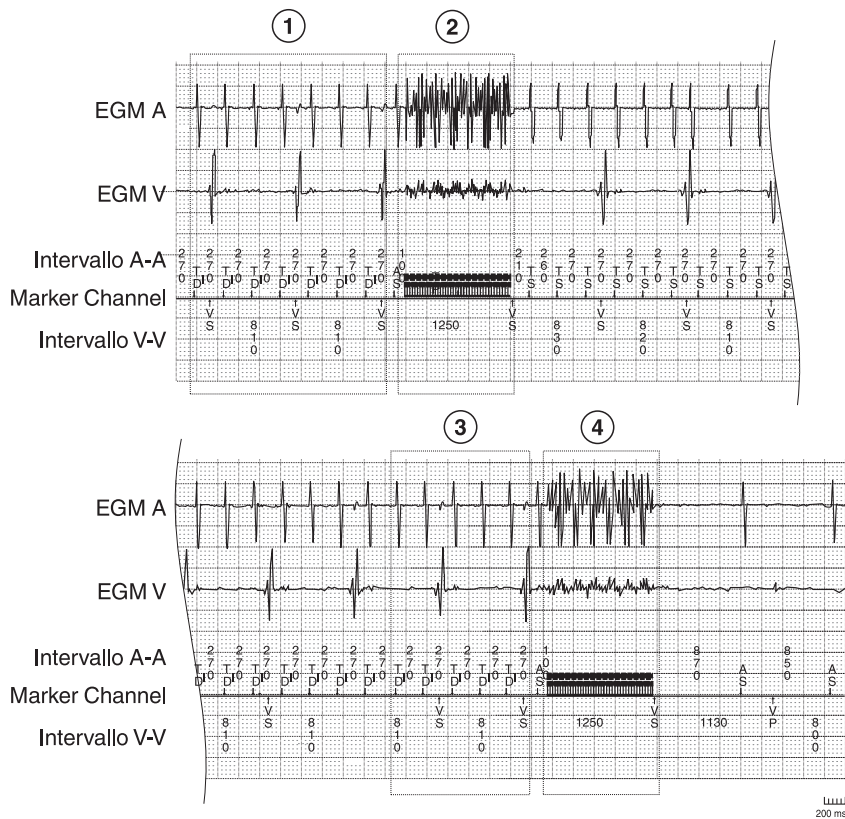**Figura 186.** Esempio di funzionamento della stimolazione Burst a 50 Hz



- 1 Il dispositivo rileva un episodio di AT/AF.
- 2 La prima sequenza Burst a 50 Hz viene erogata per una durata programmata. Questa sequenza non riesce a far cessare l'episodio di AT/AF.

- 3 Il dispositivo riconosce nuovamente l'episodio di AT/AF.
  - 4 Viene erogata una sequenza Burst identica a 50 Hz. Questa sequenza riesce a far cessare l'episodio di AT/AF.
- 

### 9.5.2.6 Stimolazione ventricolare di backup durante una terapia di ATP atriale

La stimolazione ventricolare di backup nei modi VVI e VOO è erogabile durante l'erogazione della terapia di ATP atriale. La stimolazione di backup viene erogata alla frequenza minima programmata separatamente o alla frequenza di stimolazione corrente (verrà selezionata quella più rapida). Se il parametro Stimolazione V. viene programmato su LV, la stimolazione ventricolare di backup viene erogata solo nella camera LV. Se il parametro Stimolazione V. programmato è diverso da LV (RV, RV→LV o LV→RV), la stimolazione ventricolare di backup viene erogata solo nella camera RV. L'uscita di stimolazione di backup è preimpostata su 6 V e 1,5 ms.

Per l'attivazione della stimolazione VVI/VOO di backup, sono utilizzabili le seguenti opzioni:

- On (sempre): la stimolazione di backup viene erogata durante ogni terapia di ATP atriale.
- On (attiv. autom.): la stimolazione di backup viene erogata se uno dei quattro eventi ventricolari antecedenti la terapia è stimolato. Selezionando l'attivazione automatica, il dispositivo esegue il monitoraggio degli eventi di sensing ventricolare a conduzione rapida che possono verificarsi durante l'erogazione di una terapia di ATP.

**Nota:** la stimolazione VVI di backup potrebbe entrare in competizione con l'attività ventricolare intrinseca durante la sequenza di ATP atriale.

### 9.5.2.7 Disabilitazione automatica delle terapie atriali

In talune situazioni, il dispositivo può disattivare o sospendere automaticamente una terapia di ATP.

**Riconoscimento di VT/VF dopo l'erogazione di una terapia per AT/AF** – Le terapie atriali vengono disabilitate se la VT/VF viene rilevata subito dopo l'erogazione di una terapia per AT/AF. In questo caso, le terapie atriali rimangono disabilitate fino alla loro riprogrammazione.

**Riconoscimento di VT/VF indipendente dall'erogazione di terapie per AT/AF** – Se il dispositivo rileva una VT/VF durante un episodio di AT/AF ma il riconoscimento non ha alcuna relazione con l'erogazione della terapia, il dispositivo sospende temporaneamente le terapie atriali. Le terapie atriali riprendono automaticamente quando termina l'episodio di VT/VF.

Per informazioni sulle opzioni programmabili in grado di disattivare le terapie, fare riferimento alla Sezione 9.4, “Pianificazione delle terapie atriali”, pagina 379.

### 9.5.3 Alcune considerazioni sulla programmazione delle terapie di ATP atriale

**Stimolazione di backup per la terapia Burst a 50 Hz** – La stimolazione VOO di backup è competitiva con la frequenza ventricolare intrinseca in presenza di una frequenza intrinseca.

**Terapia per VF** – Prima di attivare le terapie di ATP atriale, è necessario attivare la terapia per VF.

**Riconosc. AT/AF** – Assicurarsi che il riconoscimento di AT/AF sia stato attivato prima di programmare le terapie di ATP atriale. Se il riconoscimento di AT/AF non è stato attivato, il dispositivo non erogherà alcuna terapia di ATP atriale.

### 9.5.4 Programmazione delle terapie di ATP atriale

Nelle sezioni successive vengono illustrate le fasi di programmazione delle terapie di ATP nelle zone di AT/AF. È possibile programmare le terapie ATP nella zona di AT/AF rapida in maniera analoga, dopo aver selezionato il campo Rx AT/AF rapida nella finestra Riconoscimento di AT/AF e Terapie.

#### 9.5.4.1 Programmazione della terapia di stimolazione Burst+

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ AT/AF | Terapie...
- ⇒ AT/AF Rx | Terapie di stim. antitachicardica (ATP)...
- ▷ Stato Rx AT/AF <On>
- ▷ Tipo di terapia <Burst+>
- ▷ N. iniziale impulsi S1
- ▷ Intervallo A-S1 (%AA)
- ▷ S1-S2 (%AA)
- ▷ Decremento S2-S3
- ▷ Decremento intervallo
- ▷ N. sequenze

**Nota:** per le terapie Burst+ per gli episodi di AT/AF rapida è prevista una sequenza di programmazione simile.

#### 9.5.4.2 Programmazione della terapia di stimolazione Ramp

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ AT/AF | Terapie...
- ⇒ AT/AF Rx | Terapie di stim. antitachicardica (ATP)...
- ▷ Stato Rx AT/AF <On>
- ▷ Tipo di terapia <Ramp>
- ▷ N. iniziale impulsi S1
- ▷ Intervallo A-S1 (%AA)
- ▷ Decremento intervallo
- ▷ N. sequenze

**Nota:** per le terapie Ramp per gli episodi di AT/AF rapida è prevista una sequenza di programmazione simile.

#### 9.5.4.3 Programmazione della terapia di stimolazione Burst a 50 Hz

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ AT/AF | Terapie...
- ⇒ AT/AF Rx | Terapie di stim. antitachicardica (ATP)...
- ▷ Stato Rx AT/AF <On>
- ▷ Tipo di terapia ;<50 Hz>
- ▷ Durata Burst a 50 Hz
- ▷ N. sequenze

**Nota:** per le terapie Burst a 50 Hz per gli episodi di AT/AF rapida è prevista una sequenza di programmazione simile.

9.5.4.4 Programmazione delle terapie di ATP atriale condivise

Selezionare l'icona Parametri

⇒ AT/AF I Terapie...

⇒ AT/AF Rx I Terapie di stim. antitachicardica (ATP)...

- ▷ Intervallo minimo di ATP A-A
- ▷ Ampiezza della stimolazione A.
- ▷ Durata dell'impulso di stimolazione A.
- ▷ Stimolazione VVI/VOO di backup
- ▷ Frequenza di stimolazione di backup VVI/VOO

9.5.5 Valutazione delle terapie di ATP atriale

9.5.5.1 La schermata Quick Look II

Selezionare l'icona Dati

⇒ Quick Look II

Figura 187. Informazioni sull'AT/AF nella schermata Quick Look II

% di tempo		Trattati	
AS-VS	<0.1 %	VT/VF	2
AS-VP	80.7 %	AT/AF	1
AP-VS	<0.1 %	shock	0
AP-VP	19.2 %		
AT/AF	<0.1 %	Monitorati	
		VT	2
		SVT	0
		AT/AF	0

Osservazioni (1)

2 episodi di VT monitorati, il più lungo dei quali di 18 s.

**Episodi di AT/AF trattata** – In questa sezione è riportato il conteggio degli episodi di AT/AF trattata. Per visualizzare i dati relativi agli episodi trattati, è possibile selezionare il pulsante Trattati [>>].

**Osservazioni Quick Look II** – Le osservazioni di Quick Look II si basano su un'analisi dei dati interrogati dall'ultima sessione e sui parametri programmati. Se sono disponibili informazioni correlate a una determinata osservazione, è possibile selezionare l'osservazione desiderata e poi scegliere il pulsante Osservazioni [>>] per visualizzarle.


9.5.5.2 Contatori delle terapie per AT/AF

I contatori di terapie per AT/AF forniscono informazioni che possono essere di aiuto nella valutazione dell'efficacia delle terapie di ATP atriale erogate dall'ultima sessione. Questi contatori includono anche dati sulle terapie atriali ad alta tensione.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Contatori
- ⇒ Rx AT/AF

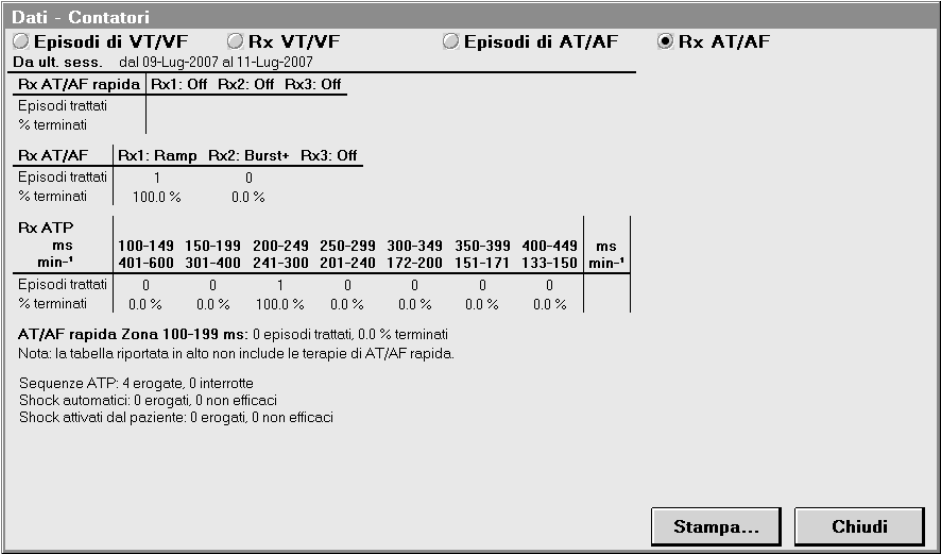Figura 188. Contatori di terapie per AT/AF



I contatori di terapie di ATP atriale forniscono i seguenti dati :

**Terapie di AT/AF** – Questo contatore registra il numero di episodi di AT/AF trattata per ogni singola terapia programmata e la percentuale di episodi terminati con successo per ogni singola terapia programmata.

**Terapie di AT/AF rapida** – Questo contatore registra il numero di episodi di AT/AF rapida trattata per ogni singola terapia programmata e la percentuale di episodi terminati con successo per ogni singola terapia programmata. Questi dati vengono visualizzati sullo schermo soltanto se il riconoscimento di AT/AF viene programmato su due zone.

**Episodi trattati per durata del ciclo** – Questo contatore registra il numero di episodi trattati per la durata del ciclo atriale e la percentuale di episodi terminati con successo per la durata del ciclo atriale.

**Sequenze di ATP** – Questo contatore registra il numero di sequenze di ATP atriale erogate ed il numero di sequenze interrotte.

## 9.6 Trattamento dell'AT/AF con la cardioversione atriale

Un episodio di AT/AF viene rilevato quando si verifica una tachicardia atriale sostenuta. I trattamenti per questi episodi sono destinati ad interrompere la tachiaritmia atriale ed a ripristinare il ritmo sinusale. Le terapie di ATP atriale possono far cessare questi episodi. Le terapie ad alta tensione possono terminare questi episodi nel caso in cui le terapie di ATP si fossero rivelate inefficaci.

### 9.6.1 La soluzione offerta dal sistema è la cardioversione atriale

Il dispositivo può erogare una terapia di cardioversione atriale al cuore del paziente in risposta ad un episodio di AT/AF. La cardioversione è destinata a far cessare l'episodio depolarizzando il tessuto cardiaco e ripristinando simultaneamente il normale ritmo sinusale del paziente.

La cardioversione atriale viene erogata automaticamente quando viene pianificata dal dispositivo. In alternativa, può essere erogata quando il paziente utilizza il Patient Assistant per sollecitarla.


Per informazioni correlate, cfr. le sezioni seguenti:

- Sezione 8.1, "Riconoscimento di tachiaritmie atriali", pagina 294
- Sezione 9.4, "Pianificazione delle terapie atriali", pagina 379
- Sezione 9.7, "Erogazione di una cardioversione atriale attivata dal paziente", pagina 407

### 9.6.2 Funzionamento della cardioversione atriale

Programmando l'erogazione della cardioversione (CV) atriale automatica durante un episodio di AT/AF, il dispositivo carica i condensatori ad alta tensione fino a raggiungere il livello di energia programmato tentando di sincronizzare lo shock con un evento ventricolare rilevato al di fuori del periodo ventricolare vulnerabile. Se non dovesse riuscire ad effettuare la sincronizzazione, il dispositivo interrompe la terapia.

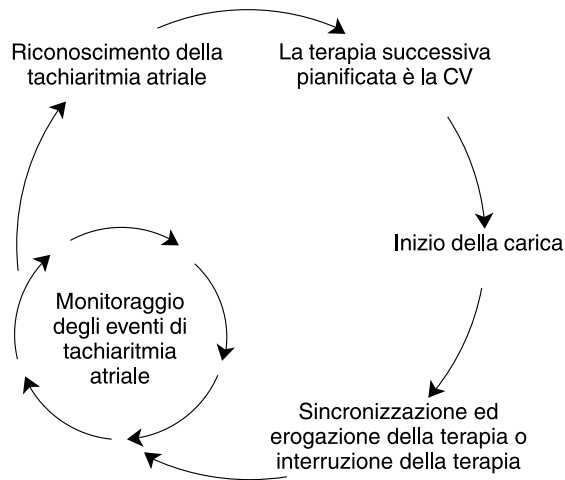

**Figura 189.** Panoramica della cardioversione (CV) atriale automatica

### 9.6.2.1 Erogazione di terapie ad alta tensione

Per poter erogare una terapia di cardioversione atriale, il dispositivo deve prima caricare i propri condensatori ad alta tensione fino a raggiungere il livello di energia programmato. Il tempo necessario per la carica dei condensatori dipende dal livello di energia programmato, dal grado di esaurimento della batteria e dal tempo trascorso dall'ultima ricarica dei condensatori. Il livello di energia erogata viene programmato separatamente per ciascuna terapia di cardioversione. Gli impulsi di cardioversione utilizzano una forma d'onda bifasica nella quale il percorso della corrente per l'impulso ad alta tensione viene invertito a metà strada durante l'erogazione dell'impulso.

Cfr. la Sezione A.5, "Livelli di energia e tempi di carica tipici", pagina 446 per informazioni su:

- i periodi di carica medi alla massima energia dei condensatori
- un confronto tra i livelli di energia erogata ed accumulata

Durante il periodo di carica dei condensatori, il dispositivo continua a stimolare e rilevare nel modo di stimolazione programmato. Tuttavia, blocca il funzionamento della risposta in frequenza e disattiva le funzioni di stimolazione per intervento atriale.

### 9.6.2.2 Selezione degli elettrodi e del percorso di corrente ad alta tensione

I parametri Active Can/Coil SVC e Percorso consentono di specificare gli elettrodi e la direzione del flusso di corrente per gli impulsi di defibrillazione e cardioversione. Il parametro Active Can/Coil SVC ha le impostazioni seguenti:

- L'impostazione Can+SVC On consente di collegare l'Active Can (HVA) ed il Coil SVC (HVX). Si crea così un flusso di corrente tra questi elettrodi ed il Coil RV (HVB).
- L'impostazione Can Off consente di disattivare la funzione Active Can. In questo caso, è necessario impiantare un elettrocattetere SVC. Si crea così un flusso di corrente tra il Coil SVC (HVX) ed il Coil RV (HVB).
- L'impostazione SVC Off fa in modo che l'elettrocattetere SVC, se impiantato, non venga utilizzato. Si crea così un flusso di corrente tra l'Active Can ed il Coil RV (HVB).

**Nota:** per informazioni sulle caratteristiche degli elettrocatteteri, cfr. la Sezione 2.4, "Valutazione e collegamento dell'elettrocattetere", pagina 28.

Le impostazioni per il parametro Percorso sono AX>B e B>AX. AX si riferisce agli elettrodi HVA e HVX che possono essere utilizzati singolarmente o abbinati. B si riferisce all'elettrodo HVB. L'impostazione Percorso definisce la direzione del flusso di corrente nel segmento iniziale della forma d'onda bifasica. Se il parametro viene impostato su AX>B, si crea un flusso di corrente tra l'Active Can, il Coil SVC ed il Coil RV. Se il parametro viene impostato su B>AX, il flusso di corrente viene invertito.

### 9.6.2.3 Pianificazione di una cardioversione atriale automatica

Il dispositivo pianifica una terapia automatica di CV in presenza delle seguenti condizioni:

- La CV è abilitata per una determinata classificazione del ritmo (AT/AF o AT/AF rapida).
- Può essere erogata una terapia di CV non erogata in precedenza per la classificazione del ritmo in questione.
- Al momento dell'erogazione pianificata è in corso un episodio atriale.
- La durata dell'episodio rientra in una finestra di erogazione programmabile.
- Il numero massimo giornaliero di shock atriali non è stato raggiunto.


Per ulteriori informazioni sui parametri di programmazione, cfr. la Sezione 9.4, "Pianificazione delle terapie atriali", pagina 379. Quando viene pianificata l'erogazione di una terapia di CV, il dispositivo inizia a caricare i condensatori.

### 9.6.2.4 Sincronizzazione della cardioversione atriale

Una volta completata la carica, il dispositivo dà avvio ad un intervallo di sincronizzazione dal successivo evento ventricolare rilevato o stimolato. L'intervallo di sincronizzazione è uguale all'intervallo di stimolazione alla frequenza minima. Il dispositivo utilizza l'intervallo di sincronizzazione per individuare l'onda R ed erogare lo shock. La terapia di cardioversione atriale viene erogata al secondo evento ventricolare che non rientra nel periodo refrattario ventricolare. La durata del periodo refrattario ventricolare viene impostata dal parametro programmabile condiviso denominato "Intervallo minimo R-R". Durante la sincronizzazione, un evento ventricolare che si verifica durante il periodo refrattario ventricolare riavvia l'intervallo di sincronizzazione. La tempistica di una tipica sincronizzazione per cardioversione atriale è illustrata nella Figura 190.

Il dispositivo tenta di sincronizzare la cardioversione atriale con gli eventi ventricolari rilevati. In assenza di un'attività ventricolare rilevata, il dispositivo eroga lo shock atriale allo scadere dell'intervallo di sincronizzazione. Ciò consente di trattare i pazienti con tachiaritmie atriali e blocco cardiaco completo.

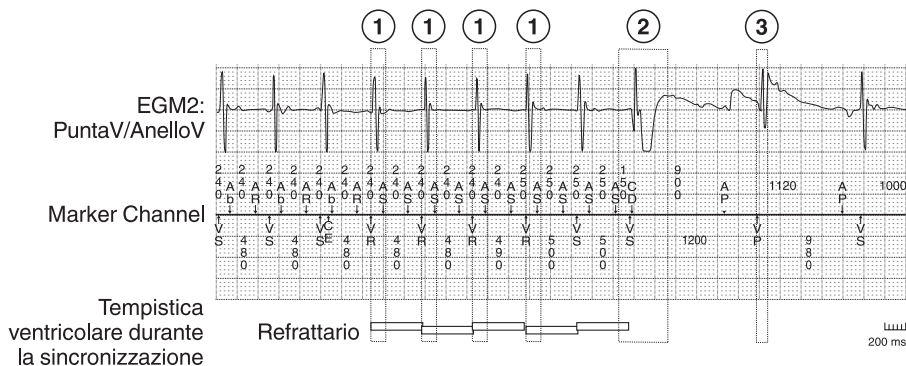**Figura 190.** Sincronizzazione della cardioversione atriale



- 1 Il dispositivo non eroga alcuna terapia di CV per alcun evento ventricolare perché ognuno di essi è compreso nel periodo refrattario ventricolare.
- 2 Il dispositivo eroga la terapia di CV al secondo evento ventricolare che si è verificato al di fuori del periodo refrattario ventricolare.
- 3 La stimolazione programmata riprende dopo l'evento ventricolare successivo.

La terapia di cardioversione atriale viene interrotta nel caso in cui dovessero verificarsi dodici eventi ventricolari refrattari rilevati. In questo caso, l'interruzione della terapia impedisce l'erogazione durante il periodo vulnerabile che precede una depolarizzazione ventricolare. Una terapia di cardioversione atriale erogata durante questo periodo vulnerabile potrebbe indurre una tachiaritmia ventricolare.

### 9.6.2.5 Funzionamento del dispositivo dopo una terapia di cardioversione atriale

Una volta erogata una terapia di cardioversione atriale, il dispositivo monitora la fine dell'episodio o del riconoscimento successivo dell'episodio. Subito dopo l'erogazione di una terapia di cardioversione, il dispositivo dà avvio ad un periodo di blanking post-shock di 520 ms.

Dopo il periodo di blanking post-shock, il dispositivo riprende la stimolazione antibradicardica nel modo di stimolazione programmato. Le impostazioni relative all'ampiezza della stimolazione ed alla durata dell'impulso vengono controllate dai parametri Stimolazione post-shock. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 7.13, "Aumento dell'uscita di stimolazione dopo una terapia ad alta tensione", pagina 278.

Il dispositivo monitora l'episodio per sapere se la terapia ha determinato la cessazione o il riconoscimento successivo dell'evento.

### 9.6.2.6 Funzionamento del dispositivo dopo una terapia di cardioversione atriale interrotta

Dopo l'interruzione di una terapia di cardioversione atriale, il dispositivo ritorna immediatamente alle impostazioni di stimolazione antibradicardica programmate, non ai parametri di stimolazione post-shock.

Il dispositivo riprende a monitorare le tachiaritmie atriali dopo l'evento ventricolare stimolato o rilevato successivo. Se il dispositivo riconosce nuovamente l'episodio di AT/AF prima che l'episodio sia terminato, tenterà di sincronizzare ed erogare la terapia programmata che è stata interrotta. Tuttavia, se l'episodio cessa, il dispositivo ritorna al riconoscimento normale.

**Nota:** se il dispositivo interrompe la terapia di cardioversione lasciando energia accumulata nei condensatori, l'energia erogata nella successiva terapia ad alta tensione può essere superiore al valore programmato.

### 9.6.3 Alcune considerazioni sulla programmazione della cardioversione atriale

**Avvertenza:** dopo un accidente ischemico o cerebrovascolare, disabilitare le terapie di cardioversione atriale finché il paziente non si è stabilizzato.

**Attenzione:** se la funzione Active Can non viene utilizzata, il dispositivo erogherà soltanto le terapie di defibrillazione e cardioversione tra gli elettrodi Coil RV (HVB) e Coil SVC (HVX). Affinché il dispositivo possa erogare le terapie di defibrillazione e cardioversione, verificare che sia stato impiantato un elettrodo HVX supplementare e che questo sia collegato al dispositivo prima di programmare il parametro Active Can/Coil SVC su Can Off.

**Active Can/Coil SVC** – L'impostazione programmata per il parametro Active Can/Coil SVC si applica a tutte le funzioni che consentono di erogare shock ad alta tensione.

**Sensing** – Al fine di garantire un'erogazione appropriata della terapia di cardioversione atriale, programmare il dispositivo in modo da evitare il sensing del far field di onde R.

**Limiti della CV automatica** – È possibile programmare il dispositivo in modo tale da erogare terapie di cardioversione atriale automatiche durante le ore selezionate del giorno o della notte. È anche possibile limitare il numero di terapie automatiche di cardioversione atriale che il dispositivo può erogare in un unico ciclo di 24 ore.

**Terapia per VF** – Prima di abilitare la cardioversione atriale automatica, è necessario attivare almeno una terapia per VF.

#### 9.6.4 Programmazione della cardioversione atriale

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ AT/AF | Terapie...
- ⇒ AT/AF Rx | CV automatica...
- ▷ Stato CV automatica <On>
- ▷ Energia
- ▷ Percorso
- ▷ Intervallo minimo R-R
- ▷ Active Can/Coil SVC

**Nota:** per le terapie di CV automatica per gli episodi di AT/AF rapida è prevista una sequenza di programmazione simile.

#### 9.6.5 Valutazione della cardioversione atriale

##### 9.6.5.1 La schermata Quick Look II

La schermata Quick Look II fornisce informazioni sulle terapie per AT/AF.

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Quick Look II

**Figura 191.** Informazioni sull'AT/AF nella schermata Quick Look II

% di tempo		Trattati	
AS-VS	<0.1 %	VT/VF	2
AS-VP	80.7 %	AT/AF	1
AP-VS	<0.1 %	shock	0
AP-VP	19.2 %		
AT/AF	<0.1 %	<b>Monitorati</b>	
		VT	2
		SVT	0
		AT/AF	0
<b>Osservazioni (1)</b>			
2 episodi di VT monitorati, il più lungo dei quali di 18 s.			

**Episodi di AT/AF trattata** – In questa sezione è riportato il conteggio degli episodi di AT/AF trattata. Per visualizzare i dati relativi agli episodi trattati, è possibile selezionare il pulsante Trattati [>>].

**Osservazioni Quick Look II** – Le osservazioni Quick Look II si basano su un'analisi dei dati interrogati dall'ultima sessione e sui parametri programmati. Per visualizzare le informazioni correlate, è possibile selezionare un'osservazione specifica e selezionare il pulsante Osservazioni [>>].

### 9.6.5.2 Contatori di terapie per AT/AF

I contatori di terapie per AT/AF forniscono informazioni che possono essere di aiuto nella valutazione dell'efficacia delle terapie di cardioversione atriale erogate dall'ultima sessione. I contatori includono anche dati sulle terapie di ATP atriale.


Selezionare l'icona Dati

⇒ Diagnostica clinica

⇒ Contatori

⇒ Rx AT/AF

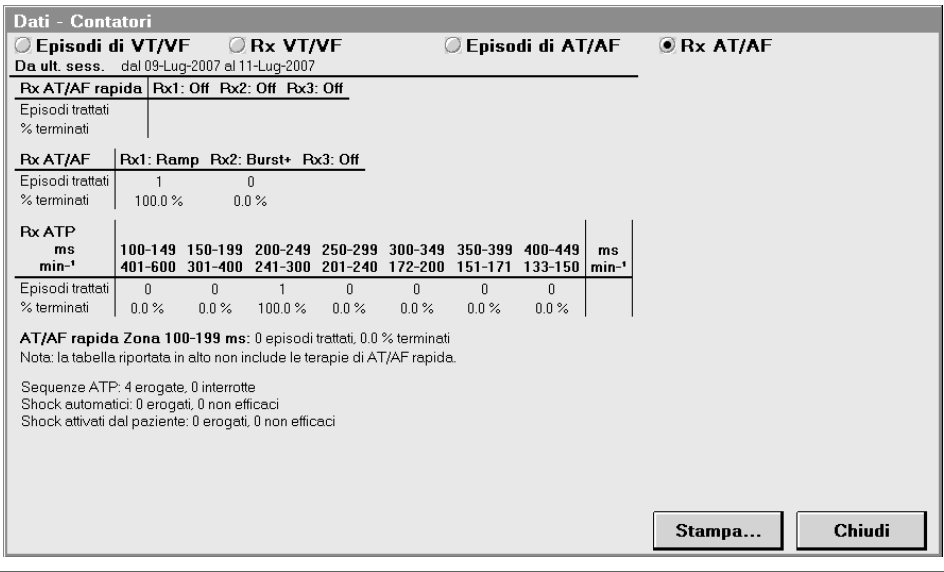Figura 192. Contatori di terapie per AT/AF



I contatori di terapie ad alta tensione forniscono i seguenti dati:

- Shock automatici** – Registrazione del numero di shock atriali automatici erogati e del numero di shock non andati a buon fine.
- Shock attivati dal paziente** – Registrazione del numero di shock atriali attivati dal paziente erogati e del numero di shock non andati a buon fine.

9.7 Erogazione di una cardioversione atriale attivata dal paziente

I trattamenti per gli episodi di AT/AF sono destinati ad interrompere le tachiaritmie atriali ed a ripristinare il ritmo sinusale. Nonostante si possa ricorrere alle terapie atriali automatiche (ATP e cardioversione) per far cessare questi episodi, può essere opportuno lasciare che sia il paziente a sollecitare l'erogazione della cardioversione atriale.

### **9.7.1 La soluzione offerta dal sistema è la cardioversione atriale attivata dal paziente**

La cardioversione atriale attivata dal paziente consente al paziente di attivare l'erogazione di una terapia secondo le istruzioni fornitegli anticipatamente. Ciò ha lo scopo di offrire al paziente un maggiore controllo dell'impostazione e della tempistica della terapia. In caso di terapia attivata dal paziente, il paziente utilizzerà l'InCheck Patient Assistant modello 2696 per sollecitare l'erogazione di una terapia di cardioversione atriale da parte del dispositivo. Il dispositivo erogherà la terapia di cardioversione atriale solo in presenza di determinate condizioni.

Per informazioni correlate, cfr. le sezioni seguenti:

- Sezione 8.1, "Riconoscimento di tachiaritmie atriali", pagina 294
- Sezione 9.6, "Trattamento dell'AT/AF con la cardioversione atriale", pagina 400


Per ulteriori informazioni sull'InCheck Patient Assistant modello 2696, si rimanda al relativo manuale.

### **9.7.2 Funzionamento della cardioversione atriale attivata dal paziente**

Per sollecitare l'erogazione della cardioversione atriale, il paziente utilizzerà in primo luogo il Patient Assistant per sapere se è in corso un episodio di AT/AF. Se vi è un episodio in corso, il paziente può sollecitare l'erogazione della cardioversione. In presenza delle condizioni di erogazione, la cardioversione atriale attivata dal paziente entra in attesa. Quando la cardioversione atriale attivata dal paziente è in attesa, ha la precedenza su qualsiasi altra terapia atriale automatica pianificata.

Quando la cardioversione atriale attivata dal paziente è in attesa, il dispositivo carica i condensatori ad alta tensione fino a raggiungere il livello di energia programmato e tenta di sincronizzare lo shock con un evento ventricolare rilevato verificatosi al di fuori del periodo ventricolare vulnerabile. Se non dovesse riuscire ad effettuare la sincronizzazione, il dispositivo interrompe la terapia.

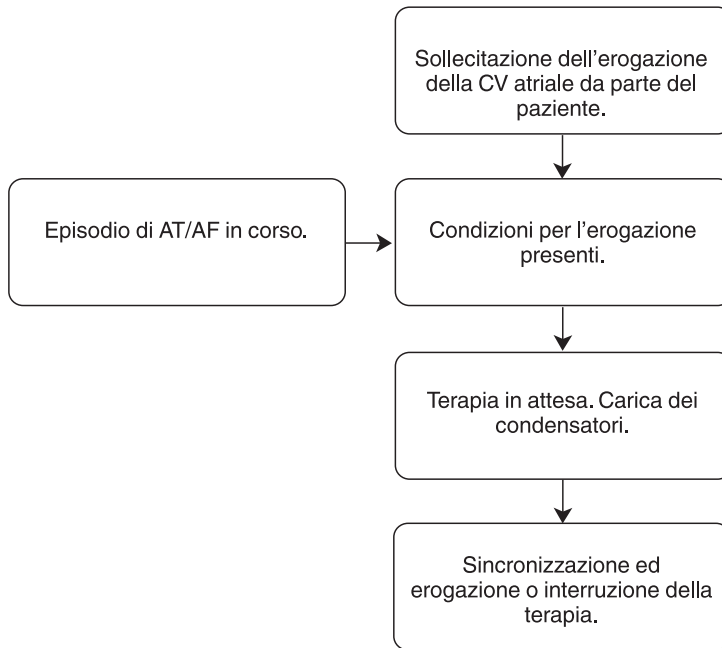

**Figura 193.** Panoramica della cardioversione (CV) atriale attivata dal paziente

In caso di cardioversione atriale attivata dal paziente, le operazioni di sincronizzazione ed erogazione della terapia vengono effettuate con le stesse modalità della cardioversione atriale automatica. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 9.6, "Trattamento dell'AT/AF con la cardioversione atriale", pagina 400.

#### **9.7.2.1 Condizioni per l'erogazione della cardioversione atriale attivata dal paziente**

Una cardioversione atriale attivata dal paziente può entrare in attesa solo in presenza delle seguenti condizioni:

- Il dispositivo è stato programmato per consentire l'erogazione di una terapia di cardioversione atriale attivata dal paziente.
- La richiesta di erogazione della terapia di cardioversione è stata ricevuta durante un episodio di AT/AF.
- Non è in corso alcun episodio ventricolare o episodio di monitoraggio di VT.

- La durata dell'episodio atriale è inferiore al parametro programmato Durata per arresto.
- Le terapie atriali non sono state disabilite.
- Nell'episodio corrente sono stati interrotti meno di quindici shock atriali automatici o attivati dal paziente a causa di una mancata sincronizzazione. Questo requisito protegge la durata del dispositivo limitando le cariche inefficaci di cardioversione.

Una cardioversione atriale attivata dal paziente e in attesa può essere erogata solo se si verificano tutti gli eventi descritti di seguito:

- Il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con un evento ventricolare rilevato.
- Meno di 10 degli ultimi 12 intervalli ventricolari sono più brevi dell'intervallo R-R minimo programmato.
- La cardioversione atriale attivata dal paziente è in attesa da meno di 60 s.

#### **9.7.2.2 Funzionamento del dispositivo dopo l'erogazione di una terapia di cardioversione atriale attivata dal paziente**

Una volta erogata una terapia di cardioversione atriale, il dispositivo monitora la fine dell'episodio o del riconoscimento successivo dell'episodio. Subito dopo l'erogazione di una terapia di cardioversione, il dispositivo dà avvio ad un periodo di blanking post-shock di 520 ms.

Dopo il periodo di blanking post-shock, il dispositivo riprende la stimolazione antibradicardica nel modo di stimolazione programmato. Le impostazioni relative all'ampiezza della stimolazione ed alla durata dell'impulso vengono controllate dai parametri Stimolazione post-shock. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 7.13, "Aumento dell'uscita di stimolazione dopo una terapia ad alta tensione", pagina 278.

Il dispositivo monitora l'episodio per sapere se la terapia ha determinato la cessazione o il riconoscimento successivo dell'evento.

Se l'episodio viene nuovamente riconosciuto, il dispositivo può pianificare una delle terapie atriali automatiche erogabili. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 9.4, "Pianificazione delle terapie atriali", pagina 379. Verrà erogata un'altra cardioversione atriale attivata dal paziente solo in caso di ricezione di una nuova richiesta in tal senso.

#### **9.7.2.3 Funzionamento del dispositivo dopo l'erogazione di una terapia di cardioversione atriale attivata dal paziente interrotta**

Dopo l'interruzione di una terapia di cardioversione atriale, il dispositivo ritorna immediatamente alle impostazioni di stimolazione antibradicardica programmate, non ai parametri di stimolazione post-shock.

Il dispositivo riprende a monitorare le tachiaritmie atriali dopo l'evento ventricolare stimolato o rilevato successivo. A differenza della cardioversione atriale automatica, se il dispositivo riconosce nuovamente un episodio di AT/AF prima che l'episodio sia terminato, non tenterà di sincronizzare ed erogare la cardioversione atriale attivata dal paziente che è stata interrotta. Se l'episodio viene nuovamente riconosciuto, il dispositivo può pianificare una delle terapie atriali automatiche erogabili. Se l'episodio cessa, il dispositivo ritorna alla normale funzione di riconoscimento.

### **9.7.3 Alcune considerazioni sulla programmazione della cardioversione atriale attivata dal paziente**

Le considerazioni sulla programmazione della cardioversione atriale attivata dal paziente sono valide anche per la cardioversione atriale automatica.

**Avvertenza:** dopo un accidente ischemico o cerebrovascolare, disabilitare le terapie di cardioversione atriale finché il paziente non si è stabilizzato.

**Attenzione:** se la funzione Active Can non viene utilizzata, il dispositivo erogherà soltanto le terapie di defibrillazione e cardioversione tra gli elettrodi Coil RV (HVB) e Coil SVC (HVX). Affinché il dispositivo possa erogare le terapie di defibrillazione e cardioversione, verificare che sia stato impiantato un elettrodo HVX supplementare e che questo sia collegato al dispositivo prima di programmare il parametro Active Can/Coil SVC su Can Off.

**Active Can/Coil SVC** – L'impostazione programmata per il parametro Active Can/Coil SVC si applica a tutte le funzioni che consentono di erogare shock ad alta tensione.

**Sensing** – Al fine di garantire un'erogazione appropriata della terapia di cardioversione atriale, programmare il dispositivo in modo da evitare il sensing del far field di onde R.

**Terapia per VF** – Prima di abilitare la cardioversione atriale, è necessario attivare almeno una terapia per VF.

### 9.7.4 Programmazione di una cardioversione atriale attivata dal paziente

Selezionare l'icona Parametri

- ⇒ AT/AF | Terapie...
- ⇒ CV attivata dal paziente...
  - ▷ Stato CV attivata dal paziente <On>
  - ▷ Energia
  - ▷ Percorso
  - ▷ Intervallo minimo R-R
  - ▷ Active Can/Coil SVC

### 9.7.5 Valutazione della cardioversione atriale attivata dal paziente

I contatori di terapie per AT/AF registrano il numero di shock atriali attivati dal paziente che sono stati erogati ed il numero di shock che non sono stati in grado di far cessare un episodio di AT/AF. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 5.5, "Visualizzazione dei dati sugli episodi aritmici e impostazione delle preferenze per la raccolta dati", pagina 144.

## 9.8 Ottimizzazione della terapia con l'opzione Terapie con aggressività crescente

Durante un episodio di tachiaritmia ventricolare, la frequenza ventricolare può accelerare o rallentare, determinando così il riconoscimento successivo dell'episodio da parte del dispositivo come un tipo diverso di tachiaritmia. In tal caso, il dispositivo erogherà la successiva terapia programmata erogabile per il tipo di tachiaritmia che è stata nuovamente riconosciuta. In alcuni casi, ciò può rendere le terapie erogate più tardi in un episodio meno aggressive di quelle erogate in precedenza. Il dispositivo potrebbe ad esempio rilevare un episodio come VF, erogare una terapia di defibrillazione, riconoscere nuovamente l'episodio come FVT e quindi erogare una terapia di ATP.

### 9.8.1 La soluzione offerta dal sistema è rappresentata dalle terapie con aggressività crescente

Se la funzione Terapie con aggressività crescente è attivata, il dispositivo salta le terapie o modifica il livello di energia ad alta tensione in modo tale che ogni terapia erogata durante un episodio di tachiaritmia ventricolare abbia almeno un'aggressività pari a quella della terapia precedente.

### 9.8.2 Funzionamento delle terapie con aggressività crescente

Ogni volta che il dispositivo eroga una terapia durante un episodio di tachiaritmia ventricolare, la funzione Terapie con aggressività crescente modifica le terapie erogabili in caso di riconoscimento successivo dell'episodio. Le modifiche apportate possono essere di tre tipi.

In primo luogo, il dispositivo non eroga le terapie programmate per le tachiaritmie più lente per il resto dell'episodio ma eroga la successiva terapia programmata per la tachiaritmia di tipo più rapido rilevata durante l'episodio. Se ad esempio il dispositivo rileva una VF ed eroga una terapia di defibrillazione, per il resto dell'episodio erogherà soltanto le terapie di defibrillazione per VF.

In secondo luogo, se il dispositivo eroga una terapia di cardioversione ventricolare, salta tutte le terapie di ATP per il resto dell'episodio. Se ad esempio il dispositivo rileva una VT, eroga una terapia di cardioversione e riconosce nuovamente l'episodio come FVT, salterà tutte le terapie di ATP programmata per la FVT erogando la terapia di cardioversione successiva programmata per la FVT.

Infine, se il dispositivo eroga una terapia di cardioversione ventricolare, modificherà il valore dell'energia per la terapia di cardioversione o di defibrillazione successiva affinché risulti pari o superiore al valore dell'energia dell'ultima terapia erogata. Se ad esempio il dispositivo dopo aver rilevato una VT eroga una cardioversione da 35 J e riconosce nuovamente l'episodio come FVT, anche la terapia di cardioversione successiva erogherà un'energia di 35 J nonostante il valore programmato sia pari a 20 J.

**Nota:** attivando la funzione Terapie con aggressività crescente, il dispositivo non salterà l'ATP durante la carica. Tuttavia, attivando la funzione ATP prima della carica, il dispositivo salterà la sequenza di ATP prima della carica erogando soltanto una sequenza di ATP durante la carica.

### 9.8.3 Programmazione delle terapie con aggressività crescente

Selezionare l'icona Parametri

⇒ VF | Terapie...

⇒ Impostazioni condivise...

▷ Terapie con aggressività crescente

## 9.8.4 Valutazione delle terapie con aggressività crescente

### 9.8.4.1 Testo sugli episodi di VT/VF trattata

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Episodi aritmia
- ⇒ Testo

Nel testo relativo ad un episodio di tachiaritmia ventricolare trattato vengono elencate tutte le terapie erogate dal dispositivo durante l'episodio. Se la funzione Terapie con aggressività crescente è stata abilitata, il relativo messaggio di attivazione precederà l'elenco delle terapie.

**Figura 194.** Testo su un episodio in caso di attivazione della funzione Terapie con aggressività crescente

Terapie	Erogato	Carica	Ohm	Energia
Terapie con aggressività crescente attivate.				
VT Rx1 Burst	Seq 1			
VF Rx1 Defib	33.6 J	14.43 s	32 ohm	0.0 - 35 J
VF Rx2 Defib	33.6 J	12.11 s	32 ohm	2.5 - 35 J
Terminazione				
Risultato criterio di insorgenza				

- 1 Opzione Testo
- 2 Visualizzazione dell'elenco delle terapie e del messaggio relativo all'attivazione della funzione Terapie con aggressività crescente


### 9.8.4.2 Diagramma episodi di VT/VF trattata

Selezionare l'icona Dati

- ⇒ Diagnostica clinica
- ⇒ Episodi aritmia
- ⇒ Diagramma

Il diagramma degli intervalli o delle frequenze per un episodio di tachiaritmia ventricolare mostra come è cambiata la frequenza ventricolare durante un episodio e come è cambiata rispetto ai valori programmati di Intervallo VF (frequenza), Intervallo FVT (frequenza) ed Intervallo VT (frequenza). In questo diagramma viene inoltre indicata ogni terapia erogata durante l'episodio, il che consente di confrontare le terapie erogate ed il ritmo rilevato.

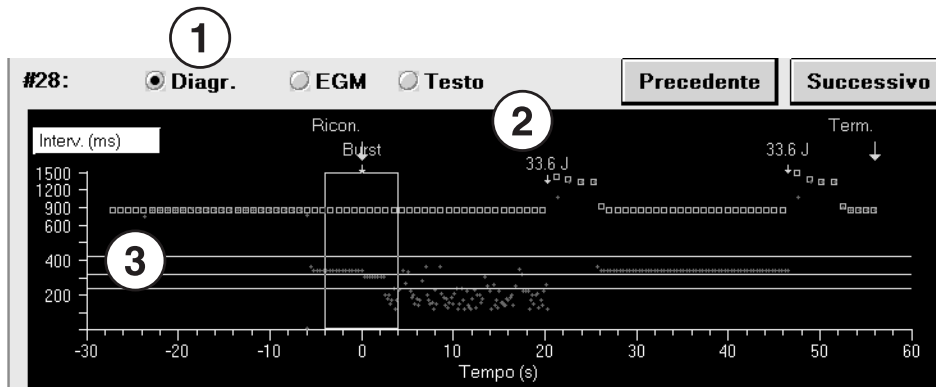**Figura 195.** Diagramma di un episodio con la funzione Terapie con aggressività crescente abilitata



1 Opzione Diagramma

2 Annotazioni sul riconoscimento e le terapie

3 Intervalli di riconoscimento degli episodi di VF, FVT e VT

## 9.9 Ottimizzazione del tempo di carica con la funzione Ricarica automatica dei condensatori

La ricarica dei condensatori assicura dei tempi rapidi di carica ed un'erogazione immediata della terapia ad alta tensione. Tra una ricarica e l'altra, i condensatori perdono gradualmente di efficienza, il che determina dei tempi di ricarica prolungati. Per assicurare una rapida carica per l'erogazione di terapie ad alta tensione, i condensatori ad alta tensione dovrebbero essere ricaricati periodicamente.

### 9.9.1 La soluzione offerta dal sistema è la funzione di ricarica automatica dei condensatori

La funzione di ricarica automatica dei condensatori assicura una ricarica completa e periodica dei condensatori ad alta tensione.

### 9.9.2 Funzionamento della ricarica automatica dei condensatori

La funzione di ricarica automatica dei condensatori consente una ricarica completa dei condensatori ad intervalli regolari. I condensatori vengono completamente ricaricati alla massima energia con una dispersione della carica di almeno 10 min. Il sistema registra la data e l'ora di ciascuna ricarica. Dopo ogni ricarica, la funzione pianifica la successiva ricarica automatica dei condensatori. Man mano che la batteria si esaurisce durante la vita utile del dispositivo, i tempi di carica aumentano gradualmente indipendentemente dalla ricarica dei condensatori.


I condensatori possono essere ricaricati automaticamente o manualmente. Per informazioni sulla ricarica manuale dei condensatori, cfr. la Sezione 10.5, "Test dei condensatori del dispositivo", pagina 425.

#### 9.9.2.1 Gestione degli intervalli

La funzione di ricarica automatica dei condensatori gestisce gli intervalli di ricarica dei condensatori. Ogni volta che i condensatori vengono ricaricati, il dispositivo pianifica la ricarica successiva in base all'intervallo minimo di ricarica automatica dei condensatori correntemente programmato.

**Riavvio dell'intervallo** – Ogni volta che ha luogo una ricarica completa dei condensatori, la funzione riavvia l'intervallo. Il riavvio impedisce ricariche troppo frequenti dei condensatori e, di conseguenza, un consumo non necessario della batteria.

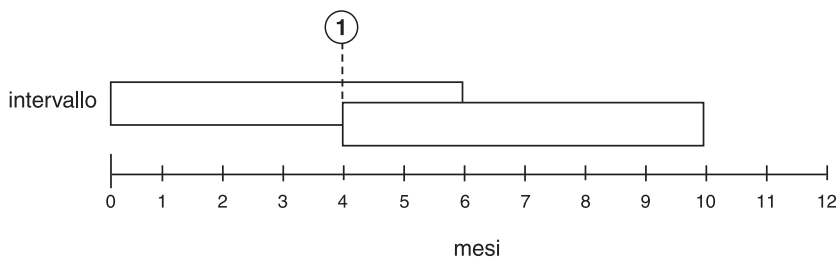**Figura 196.** Riavvio dell'intervallo




- 1 Al quarto mese, una terapia di defibrillazione alla massima energia è stata interrotta e si è verificata una dispersione della carica di almeno 10 min. La ricarica completa dei condensatori che ne è derivata ha riavviato l'intervallo minimo di ricarica automatica dei condensatori.

**Prolungamento dell'intervallo** – Quando una carica alla massima energia viene erogata o scaricata prematuramente (prima che siano trascorsi 10 min), l'intervallo verrà prolungato automaticamente di due mesi a causa della ricarica parziale dei condensatori che ne deriva. Pertanto, il dispositivo prolunga l'intervallo di ricarica dei condensatori ad ogni ricarica



parziale, come illustrato nella Figura 197. Il totale di tutti i prolungamenti successivi non dovrà superare l'intervallo minimo di ricarica automatica dei condensatori programmato.

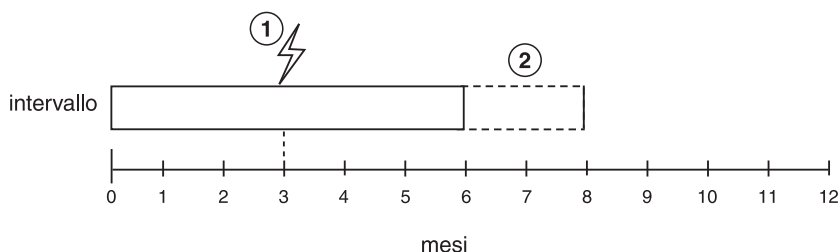
**Figura 197. Intervallo prolungato**



- 1 La carica alla massima energia per una terapia di defibrillazione è stata erogata al terzo mese di un intervallo di sei mesi.
- 2 L'intervallo viene prolungato di altri due mesi, passando da sei ad otto mesi. L'intervallo successivo del periodo compreso tra il terzo e l'ottavo mese si verifica al quinto mese.

**Come cambiare l'intervallo con l'opzione Auto** – Programmando il parametro relativo all'intervallo minimo di ricarica automatica dei condensatori su Auto, il dispositivo segue una pianificazione semestrale per la ricarica dei condensatori finché la batteria non si avvicina alla fine servizio (EOS). In caso di tempo di carica eccessivo, il dispositivo passa ad un programma mensile di ricarica automatica.

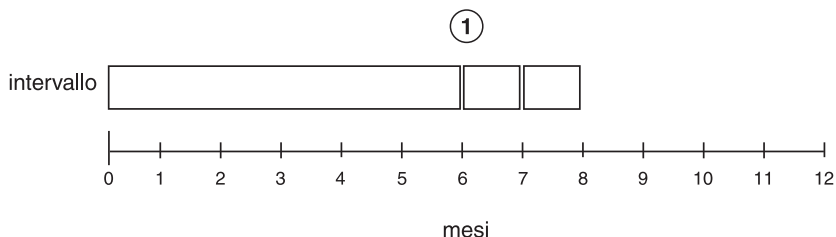**Figura 198. Cambio di intervallo**



- 1 Si è verificato un tempo di carica eccessivo nell'intervallo di sei mesi. Il sistema è passato automaticamente ad un intervallo di un mese.

### 9.9.3 Alcune considerazioni sulla programmazione della ricarica automatica dei condensatori

**Ricarica manuale dei condensatori all'impianto** – Al momento dell'impianto, i condensatori del dispositivo non sono ancora stati ricaricati completamente. Eseguire pertanto una ricarica manuale dei condensatori al momento dell'impianto. Prima di programmare l'intervallo minimo di ricarica automatica dei condensatori, ricaricare manualmente i condensatori per ridurre il tempo di carica del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla ricarica manuale dei condensatori, cfr. la Sezione 10.5, "Test dei condensatori del dispositivo", pagina 425.

**Riprogrammazione dell'intervallo** – Nel riprogrammare l'intervallo minimo di ricarica automatica dei condensatori, verificare sempre che il tempo di carica sia accettabile per il dispositivo. Per maggiori informazioni sui tempi di carica, cfr. la Sezione A.5, "Livelli di energia e tempi di carica tipici", pagina 446. Eseguire una ricarica manuale dei condensatori oppure valutare uno dei tempi recenti di carica alla massima energia visualizzati nella schermata Misurazioni batteria ed elettrocateteri.

**Nota:** riprogrammando l'intervallo minimo di ricarica automatica dei condensatori, il dispositivo non reimposta l'intervallo. Il tempo trascorso dall'ultima ricarica viene preso in considerazione per la pianificazione della ricarica successiva. Se dall'ultima ricarica è trascorso più tempo di quello consentito dall'ultimo intervallo programmato, la ricarica verrà effettuata al termine della sessione di telemetria corrente.

**Monitoraggio del tempo di carica con la funzione Medtronic CareAlert** – In caso di tempo di carica eccessivo o di sospensione del circuito, la funzione Medtronic CareAlert può emettere un avviso. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 5.3, "Allarmi e notifiche automatiche di eventi legati al trattamento clinico e alle prestazioni del sistema", pagina 127.

**Valutazione dell'intervallo di ricarica a confronto della durata** – Un intervallo minimo di ricarica automatica dei condensatori più breve consente di ricaricare i condensatori con maggiore frequenza, ottimizzandone così l'efficienza. Tuttavia, è opportuno ricordare che ogni ricarica dei condensatori viene prodotta da una carica alla massima energia che riduce la durata del dispositivo. Si consiglia pertanto di valutare le esigenze del paziente in termini di erogazione di una terapia rapida a confronto dell'effetto sulla durata del dispositivo. Per informazioni sulla durata del dispositivo, cfr. la Sezione 5.11, "Ottimizzazione della durata del dispositivo", pagina 175.

### 9.9.4 Programmazione dell'intervallo minimo di ricarica automatica dei condensatori

Selezionare l'icona Parametri

⇒ VF | Terapie...

⇒ Ricarica automatica condensatori....

▷ Intervallo minimo di ricarica automatica dei condensatori

### 9.9.5 Valutazione del tempo di carica

Per valutare le prestazioni correnti del dispositivo in termini di carica, prendere nota dell'ora e della data della carica visualizzate nella schermata Misurazioni batteria ed elettrocateteri. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 5.9, "Visualizzazione di dati dettagliati sulle prestazioni del dispositivo e degli elettrocateteri", pagina 162. Se la data dell'ultima carica effettuata è recente e il tempo di carica è accettabile, non sarà necessario effettuare ulteriori esami.

**Figura 199.** I dati relativi al tempo di carica visualizzati nella schermata Misurazioni batteria ed elettrocateteri

Dati - Misurazioni batteria ed elettrocateteri	
<b>Tensione della batteria</b>	
(RRT+2.63V)	
11-Lug-2007	
Tensione	3.20 V
<b>Ultima ricarica condensatori</b>	
05-Lug-2007	
Tempo di carica	13.4 s
Energia	0.0 - 35 J
<b>Ultima carica</b>	
11-Lug-2007	
Tempo di carica	12.4 s
Energia	1.6 - 35 J

In caso contrario, ricorrere ad un test di carica/scarica per valutare il tempo di carica. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 10.5, "Test dei condensatori del dispositivo", pagina 425.

## 10 Test di sistema

### 10.1 Valutazione del ritmo intrinseco

Il test del ritmo intrinseco consente di valutare il ritmo cardiaco intrinseco del paziente inibendo temporaneamente l'uscita di stimolazione del dispositivo. Durante il test del ritmo intrinseco, il dispositivo viene temporaneamente programmato su un modo senza stimolazione.

#### 10.1.1 Alcune considerazioni sulla valutazione del ritmo intrinseco

**Attenzione:** durante l'esecuzione del test del ritmo intrinseco, il paziente non riceve alcun supporto di stimolazione. La stimolazione resta inibita finché si tiene premuto il pulsante [INIBISCI Premere e tenere premuto]. Valutare attentamente le conseguenze derivanti dall'esecuzione di questo test su pazienti pacemaker dipendenti.

**Riduzione manuale della frequenza di stimolazione** – Prima di inibire la stimolazione, valutare per tutti i pazienti un'eventuale riduzione della frequenza minima programmata ed assicurarsi che il paziente venga stimolato con questa frequenza. Così facendo, si possono evitare variazioni improvvise nel supporto della frequenza ventricolare.

**Riconoscimento delle tachiaritmie sospeso** – Il riconoscimento delle tachiaritmie viene sospeso durante il test del ritmo spontaneo.

#### 10.1.2 Come eseguire un test del ritmo intrinseco

1. Selezionare Test > Ritmo intrinseco.
2. Premere e tenere premuto il pulsante [INIBISCI Premere e tenere premuto]. La stimolazione resterà inibita fino al rilascio di questo pulsante.
3. Per stampare una registrazione del ritmo cardiaco intrinseco del paziente, premere il tasto della velocità di avanzamento carta della stampante o del registratore. Il tracciato dell'ECG non dovrebbe evidenziare alcuna stimolazione.

### 10.2 Misurazione delle soglie di stimolazione

Il test della soglia di stimolazione consente di determinare le soglie di stimolazione del paziente. Le informazioni sulle soglie di stimolazione possono essere usate per determinare impostazioni adeguate di ampiezza e durata dell'impulso per garantire la cattura riducendo al minimo l'uscita di stimolazione allo scopo di massimizzare la durata della batteria.

### 10.2.1 Alcune considerazioni sulla misurazione delle soglie di stimolazione

**Valori selezionabili e predefiniti** – I valori selezionabili e quelli predefiniti forniti dal test della soglia di stimolazione dipendono dai valori programmati per la terapia di stimolazione antibradicardica.

**Soglia di stimolazione e margine di sicurezza** – Dopo aver completato un test della soglia di stimolazione, verificare che i parametri di durata e ampiezza dell'impulso programmati in modo permanente garantiscano un margine di sicurezza adeguato al di sopra della soglia di stimolazione.

**Misurazione delle soglie di stimolazione per i sistemi con tre elettrocatteteri** – Il dispositivo dispone di uscite indipendenti per la stimolazione atriale, RV e LV. Le soglie atriale, RV e LV possono essere misurate separatamente ed i singoli margini di sicurezza sono applicabili ad ogni soglia.

**Riconoscimento delle tachiaritmie sospeso** – Il riconoscimento delle tachiaritmie viene sospeso durante il test di soglia di stimolazione.

### 10.2.2 Come misurare le soglie di stimolazione

72 min<sup>-1</sup> / 830 ms

LECG: Cassa/SVC

EGM1: Punta A/Anel

EGM2: Punta RV/Anello RV

**Test - Soglia di stimolazione**

Tipo di test	Ampiezza	<b>TEST</b> Premere e tenere premuto Tenere prem. per determinare soglia.
Camera	RV	
Decremento dopo	3 impulsi	
<b>Valore test</b> Modo: DDD Freq. min.: 90 min <sup>-1</sup> Ritardo A-V: 130 ms Ampiezza RV: 0.75 V Dur. imp. RV: 0.40 ms Altri parametri...		<b>Permanente</b> DDD 50 min <sup>-1</sup> 130 ms 1.25 V 0.40 ms

1. Selezionare Test > Soglia di stimolazione.

2. Selezionare dei valori per i parametri Tipo di test, Camera e Decremento dopo, oppure accettare i valori visualizzati.

3. Selezionare i valori di test iniziali per Modo, Frequenza minima, Ritardo AV, Ampiezza e Durata impulso, oppure accettare i valori visualizzati.
4. Premere e tenere premuto il pulsante [TEST Premere e tenere premuto].
5. Osservare il monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale per verificare se vi sia stata una perdita di cattura.
6. In caso di perdita di cattura, rilasciare immediatamente il pulsante [TEST Premere e tenere premuto]. Il dispositivo ripristinerà i valori di stimolazione originari visualizzando la schermata con i risultati del test.
7. Per modificare la soglia di stimolazione rilevata, selezionare il valore appropriato sotto Soglia nella finestra Test - Risultati.

**Test soglia di stimolazione ampiezza RV - Risultati**

	<b>Valore finale</b>	<b>Soglia</b>	<b>Permanente</b>
Modo	DDD		DDD
Freq. min.	90 min <sup>-1</sup>		50 min <sup>-1</sup>
Ritardo A-V	130 ms		130 ms
Ampiezza RV	0.75 V	7 0.75 V	1.25 V 9
Dur. imp. RV	0.40 ms	0.40 ms	0.40 ms
Altri parametri...			

8  Tracciato test

10 **Stampa...**

**PROGRAMMA** **Chiudi**

**Annulla modifica**

8. Per visualizzare un tracciato del test della soglia di stimolazione, selezionare l'icona Tracciato test nell'angolo in basso a sinistra della finestra Test soglia di stimolazione ampiezza – Risultati. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 3.11, “Come utilizzare la funzione di monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale”, pagina 82.
9. Per programmare dei nuovi valori di ampiezza o di durata dell'impulso, selezionare Ampiezza o Durata impulso nella colonna Permanente della finestra Test - Risultati. La finestra Cattura si apre. Nella finestra Cattura, selezionare prima i valori desiderati e poi [OK]. Nella finestra successiva, selezionare [PROGRAMMA].
10. Per stampare un rapporto del test della soglia di stimolazione, selezionare il pulsante [Stampa...].

## 10.3 Misurazione dell'impedenza degli elettrocateteri

Il Test dell'impedenza degli elettrocateteri consente di testare l'integrità del sistema di elettrocateteri impiantato misurando l'impedenza degli elettrodi di stimolazione e ad alta tensione. Le misurazioni dell'impedenza vengono effettuate senza ricorrere all'erogazione di shock o impulsi ad alta tensione per catturare il cuore. Il dispositivo effettua queste misurazioni utilizzando degli impulsi sottosoglia a bassa tensione.

### 10.3.1 Alcune considerazioni sulla misurazione dell'impedenza degli elettrocateteri

**Sensing degli impulsi di misurazione** – Durante una sequenza di misurazioni dell'impedenza degli elettrocateteri, il dispositivo può rilevare gli impulsi di test sottosoglia come eventi refrattari atriali o eventi atriali rilevati. Gli impulsi di test possono provocare anche lievi variazioni in uno o più canali dell'EGM o nel canale LECG. Gli impulsi erogati durante un test dell'impedenza degli elettrocateteri non determinano la cattura cardiaca né influenzano il riconoscimento delle tachiaritmie.

**Riconoscimento delle tachiaritmie sospeso** – Il riconoscimento delle tachiaritmie viene sospeso durante il test di impedenza degli elettrocateteri.

### 10.3.2 Come misurare l'impedenza degli elettrocateteri

1. Selezionare Test > Impedenza elettrocateteri.
2. Selezionare [AVVIA Misurazione]. Attendere la conferma della programmazione ed il messaggio di elaborazione in corso.
3. Se necessario, terminare il test selezionando [STOP]. Se il test viene interrotto, le misurazioni dell'impedenza degli elettrocateteri non vengono aggiornate.
4. Al termine del test, verranno visualizzati i nuovi valori di impedenza misurati per le polarità testate. È inoltre possibile visualizzare le misurazioni relative a tutte le polarità degli elettrocateteri disponibili selezionando il pulsante Tutte le polarità misurate [>>].

Per stabilire se l'impedenza degli elettrocateteri sia variata, è possibile confrontare i valori misurati con i valori registrati nella schermata Tendenze impedenza elettrocateteri e con quelli misurati durante visite di controllo precedenti (esaminare a questo proposito la cartella clinica del paziente).

## 10.4 Esecuzione di un test di sensing

Il test di sensing consente di misurare le ampiezze delle onde P e delle onde R, che possono risultare utili nella valutazione delle prestazioni dell'integrità degli elettrocateri e del sensing. Il test di sensing consente di programmare temporaneamente il modo, il ritardo AV e la frequenza minima in tale modo tale da impedire al dispositivo di stimolare il paziente e di aumentare le probabilità di occorrenza di eventi rilevati. Una volta avviato il test, è possibile ridurre ulteriormente la frequenza di stimolazione finché il ritmo cardiaco intrinseco non prevale. Il dispositivo misura le ampiezze solo in caso di eventi intrinseci.

### 10.4.1 Alcune considerazioni sull'esecuzione di un test di sensing

**Modi di stimolazione DOO, VOO e AOO** – Se il modo di stimolazione programmato è DOO, VOO o AOO, non è possibile eseguire il test di sensing.

**Modi di stimolazione disponibili** – I modi di stimolazione disponibili in Valore test dipendono dal modo di stimolazione programmato.

**Comfort del paziente** – Durante un test di sensing, ridurre gradualmente la frequenza di stimolazione per ridurre al minimo la sintomatologia del paziente associata a brusche variazioni della frequenza cardiaca.

**Sospensione automatica** – Se non si verificano eventi intrinseci e non vengono apportate modifiche alla frequenza di stimolazione, il test di sensing termina automaticamente dopo alcuni secondi ripristinando le impostazioni programmate.

**Confronto con le tendenze di sensing** – Le misurazioni dell'ampiezza di sensing effettuate durante un test di sensing possono comprendere eventi atipici o derivanti da oversensing (ad esempio PVC oppure far field di onde R). Questi eventi sono esclusi dalle misurazioni automatiche giornaliere dell'ampiezza di sensing che il dispositivo raccoglie e registra nelle tendenze dell'ampiezza del sensing. A causa di questa differenza nelle operazioni di misurazione, i risultati del test di sensing possono divergere da quelli registrati nei dati sulle tendenze dell'ampiezza di sensing.

**Polarità di sensing RV** – Gli elettrodi di sensing ventricolare inclusi nelle misurazioni del test di sensing dipendono dal valore programmato per il parametro Polarità sensing RV.

**Valore massimo misurato** – Il valore massimo di ampiezza misurabile in un test di sensing è pari a 20 mV. Se l'ampiezza supera i 20 mV, il risultato viene visualizzato come >20 mV.

**Selezione dei valori di sensibilità** – Non modificare i valori di Sensibilità A. e Sensibilità RV in base ai risultati del test di sensing. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 7.1, "Sensing dell'attività cardiaca intrinseca", pagina 219.

**Riconoscimento delle tachiaritmie sospeso** – Il riconoscimento delle tachiaritmie viene sospeso durante il test di sensing.



### 10.4.2 Come eseguire un test di sensing

**Attenzione:** fare attenzione quando si selezionano impostazioni di stimolazione provvisorie per pazienti portatori di pacemaker. Questi pazienti potrebbero infatti non ricevere un supporto di stimolazione adeguato durante l'esecuzione delle misurazioni dell'ampiezza.

1. Interrogare il dispositivo selezionando [Interroga...].
2. Selezionare Test > Sensing.
3. Programmare i parametri relativi a Valore test per Modo e Ritardo AV oppure accettare i valori visualizzati.
4. Selezionare [AVVIA Misurazione].
5. Osservare il monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale per stabilire se sia presente un ritmo intrinseco. In caso di persistenza di una stimolazione costante, ridurre la frequenza minima.
6. Se necessario, premere [STOP e ripristina] per interrompere il test. Così facendo, le impostazioni temporanee della stimolazione relative a Modo, Ritardo AV e Frequenza minima ritorneranno ai valori programmati.

Una volta completato il test di sensing, i risultati della misurazione vengono visualizzati nella schermata Test. Per confrontare le misurazioni del test di sensing con le misurazioni automatiche giornaliere dell'ampiezza di sensing, selezionare il pulsante Tendenze ampiezza onda P/R [ >> ].

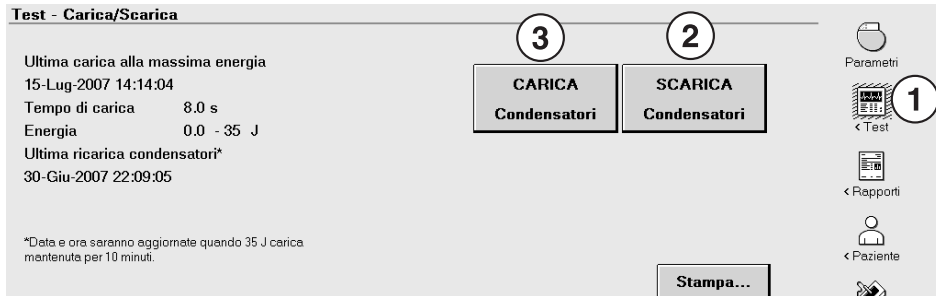
## 10.5 Test dei condensatori del dispositivo

Il test di carica/scarica consente di testare il tempo di carica dei condensatori, ricaricare manualmente i condensatori del dispositivo e scaricare ogni eventuale carica residua presente nei condensatori. Una volta caricati i condensatori, la carica resta al loro interno finché non viene scaricata, erogata tramite una terapia di cardioversione o defibrillazione oppure dispersa per almeno 10 min. Nella schermata Test - Carica/Scarica vengono visualizzati la data, l'ora, il tempo di carica ed i valori di energia relativi all'ultima carica alla massima energia (partendo da qualsiasi valore iniziale) dei condensatori del dispositivo. Nella stessa schermata vengono anche visualizzati la data e l'ora dell'ultima ricarica dei condensatori.

**Nota:** la ricarica manuale dei condensatori reimposta l'intervallo di ricarica automatica dei condensatori ottimizzandone il tempo di carica. Per ulteriori informazioni sulla funzione di ricarica automatica dei condensatori, cfr. la Sezione 9.9, "Ottimizzazione del tempo di carica con la funzione Ricarica automatica dei condensatori", pagina 415.

**Nota:** Il riconoscimento delle tachiaritmie viene sospeso durante il test di carica/scarica.

### 10.5.1 Come eseguire un test di carica/scarica



1. Selezionare Test > Carica/Scarica.
2. Per eliminare qualsiasi carica presente nei condensatori, selezionare [SCARICA Condensatori] ed attendere circa 20 s.
3. Per caricare i condensatori, selezionare [CARICA Condensatori]. Nella riga di stato del dispositivo viene visualizzato il messaggio "Funzionamento manuale: carica". Se necessario, selezionare [INTERROMPI test] per interrompere la carica di test.
4. Completata la carica, nella schermata Marker Channel compare il simbolo di fine carica (FC) ed il messaggio "Funzionamento manuale: carica" scompare dalla riga di stato del dispositivo.
5. Per recuperare i dati relativi al tempo di carica dal dispositivo, selezionare [ACQUISISCI dati].



6. Valutare il tempo di carica. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione A.5, “Livelli di energia e tempi di carica tipici”, pagina 446. Se si determina che il tempo di carica non è tollerabile per il paziente, lasciare dissipare la carica per 10 min ed eseguire nuovamente il test carica/scarica.
  - a. Se il secondo tempo di carica è accettabile, valutare un'eventuale riduzione dell'intervallo di ricarica automatica dei condensatori.
  - b. Se il secondo tempo di carica non è accettabile, si prega di contattare il rappresentante di zona della Medtronic.

### 10.5.2 Come ricaricare manualmente i condensatori

1. Eseguire un test di carica/scarica.
2. Lasciare disperdere la carica di test per 10 min.

## 10.6 Induzione di un'aritmia

Il dispositivo ha numerose funzioni per studi elettrofisiologici (SEF), compresi i protocolli di stimolazione cardiaca che inducono tachiaritmie. I metodi di induzione disponibili sono T-Shock, Burst a 50 Hz, Burst costante e PES. Questi protocolli di induzione possono essere utilizzati per indurre aritmie durante i test EF per valutare l'efficacia delle terapie per tachiaritmia.

### 10.6.1 Alcune considerazioni sull'induzione delle aritmie

**Avvertenza:** monitorare attentamente il paziente durante l'utilizzo di una funzione per studi EF. Assicurarsi di avere a disposizione un defibrillatore esterno pronto per l'uso durante l'induzione di qualsiasi tachiaritmia. Una tachiaritmia indotta può degenerare in fibrillazione ventricolare.

**Collegamento telemetrico** – Assicurarsi della presenza di un collegamento telemetrico tra il dispositivo ed il programmatore prima di eseguire una funzione per studi EF. Un'interrogazione o una programmazione andata a buon fine è indicativa di una corretta comunicazione tra il dispositivo ed il programmatore.

Quando si usa un collegamento telemetrico wireless, verificare che almeno tre delle spie verdi dell'icona della telemetria wireless siano illuminate. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 3.1, “Come stabilire un collegamento telemetrico tra il dispositivo ed il programmatore”, pagina 39.

**Ripresa del riconoscimento** – Il riconoscimento delle tachiaritmie viene sospeso automaticamente durante e dopo tutte le funzioni per studi EF, ad eccezione dell'induzione

T-Shock o Burst a 50 Hz. Tutte le induzioni erogate durante gli studi EF consentono il ripristino automatico del riconoscimento dopo l'erogazione. Selezionare la casella di controllo Ripristino al BURST o Ripristino all'erogazione per attivare la ripresa automatica dopo un'induzione. Per riprendere il riconoscimento dopo una terapia manuale o dopo un'induzione erogata con la ripresa automatica disattivata, selezionare [Riprist.] o allontanare la testina di programmazione dal dispositivo impiantato.

**Interruzione di un'induzione o di una terapia** – In via precauzionale, il programmatore dispone del pulsante [INTERROMPI] che può essere selezionato per interrompere immediatamente qualsiasi induzione o terapia per tachiaritmia in corso. Un'induzione con burst può anche essere interrotta allontanando la penna ottica dal pulsante [Premere e tenere premuto]. Quando viene erogata una terapia manuale, il dispositivo interrompe automaticamente qualsiasi induzione o terapia automatica in corso.

**Valori temporanei di parametro** – Le funzioni per gli studi EF utilizzano valori di test che non modificano i parametri programmati del dispositivo. I valori di test diventano operativi all'inizio dell'induzione o della terapia. Al termine dell'induzione o della terapia, il dispositivo ritorna ai parametri programmati per la stimolazione antibradicardica e la terapia per tachiaritmia.

**Controllo dei parametri programmati** – Prima di visualizzare una schermata di induzione, il sistema verifica che il dispositivo sia stato programmato per riconoscere e trattare le aritmie indotte. Se le funzioni di riconoscimento o terapeutiche non sono state programmate correttamente, sullo schermo compare un avviso.

**Pulsanti presenti sulla testina di programmazione** – Il pulsante Programma situato sulla testina di programmazione è disabilitato durante le funzioni per gli studi EF. Il pulsante Interroga, situato anch'esso sulla testina di programmazione, è invece disattivato durante le induzioni per gli studi EF. Utilizzare il pulsante corretto visualizzato sullo schermo per erogare un'induzione o una terapia manuale.

**Ultima induzione (mm:ss)** – Per T-Shock ed i protocolli ventricolari Burst a 50 Hz, è attivo un timer che consente di tenere traccia del tempo trascorso dall'ultima induzione. Questo timer si trova nell'angolo in basso a sinistra dello schermo del programmatore.

### 10.6.2 Induzione di VF con T-Shock

Per indurre una VF, è possibile utilizzare un'induzione T-Shock. Per indurre la VF, il dispositivo eroga una serie di impulsi di stimolazione VOO allo scopo di rendere la tempistica delle onde T maggiormente prevedibile. Il dispositivo è in grado di erogare simultaneamente uno shock con un'onda T nel periodo refrattario del ciclo cardiaco. Il dispositivo consente di specificare le caratteristiche degli impulsi di stimolazione e dello shock ad alta tensione e di introdurre un ritardo tra l'impulso di stimolazione finale e lo shock.

L'interfaccia dell'induzione T-Shock include alcune funzioni che semplificano l'esecuzione dei test DFT. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 4.5, "Esecuzione dei test della soglia di defibrillazione ventricolare", pagina 110.

### 10.6.2.1 Alcune considerazioni sull'induzione di VF con T-Shock


**Avvertenza:** monitorare attentamente il paziente durante l'utilizzo di una funzione per studi EF. Assicurarsi di avere a disposizione un defibrillatore esterno pronto per l'uso durante l'induzione di qualsiasi tachiaritmia. Una tachiaritmia indotta può degenerare in fibrillazione ventricolare.

**ATP prima della carica e ATP durante la carica** – Le funzioni ATP prima della carica e ATP durante la carica vengono disattivate automaticamente per 30 s dopo l'erogazione di un'induzione T-Shock. Ciò impedisce possibili interferenze tra le terapie di ATP ed i test della soglia di defibrillazione.

**La casella di controllo Attivazione** – Come misura precauzionale, non è possibile selezionare [EROGA T-Shock] se prima non si seleziona la casella di controllo Attivazione. Dopo aver erogato uno shock o aver chiuso la schermata T-Shock, è necessario selezionare la casella di controllo Attivazione prima di erogare un'altra induzione T-Shock.

### 10.6.2.2 Come indurre la VF con T-Shock

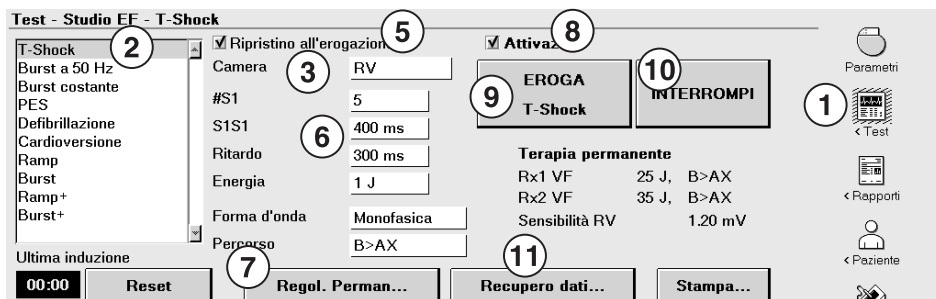**Figura 200.** La schermata di induzione T-Shock



1. Selezionare Test > Studio EF.
2. Selezionare T-Shock dalla casella Induzioni/Terapie.
3. Assicurarsi che il parametro Camera sia impostato sull'impostazione ventricolare desiderata.

4. Se si intende trattare l'episodio indotto con una terapia manuale, selezionare [Sospendi] per disattivare il riconoscimento automatico.

**Nota:** il pulsante [Sospendi] si trova nella parte superiore della schermata e non è illustrato nella Figura 200.

5. Selezionare la casella di controllo Ripristino all'erogazione per il riconoscimento e l'erogazione automatici della terapia o deselezionare la casella di controllo relativa alla terapia manuale.

**Nota:** durante una sessione di telemetria wireless, non è possibile erogare un'induzione T-Shock quando si posiziona un magnete o una testina di programmazione sopra il dispositivo e si seleziona la casella di controllo Ripristino all'erogazione. In caso di visualizzazione di un messaggio di errore, rimuovere il magnete o la testina di programmazione o deselezionare la casella di controllo Ripristino all'erogazione.

6. Accettare i valori di test visualizzati o selezionarne di nuovi.
7. Per visualizzare e modificare i parametri di riconoscimento e della terapia di VF, selezionare [Regol. Permanente...].
8. Selezionare la casella di controllo Attivazione.
9. Selezionare [EROGA T-Shock].

**Nota:** se l'energia presente nei condensatori è superiore al livello di energia selezionato, selezionando [EROGA T-Shock] il programmatore visualizza un avviso. Per eliminare l'avviso, selezionare [SCARICA] o [ANNULLA].

10. Se necessario, selezionare [INTERROMPI] per interrompere l'induzione o qualsiasi terapia in corso.
11. Selezionare [Recupero dati...] e [Stampa...] per rivedere e stampare i dati relativi al paziente.

### 10.6.3 Induzione di VF con Burst a 50 Hz

Per indurre la VF, è possibile ricorrere all'induzione ventricolare Burst a 50 Hz. Per indurre la VF, l'induzione Burst da 50 Hz eroga una rapida raffica di impulsi di stimolazione VOO nel ventricolo. L'ampiezza e la durata di questi impulsi sono selezionabili, mentre l'intervallo di stimolazione è fisso a 20 ms.

Finché si tiene premuto il pulsante [BURST a 50 Hz Premere e tenere premuto] sullo schermo del programmatore, il dispositivo continua ad erogare l'induzione (fino ad un massimo di 10 s).

L'interfaccia dell'induzione ventricolare Burst da 50 Hz include alcune funzioni che facilitano l'esecuzione dei test DFT. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 4.5, "Esecuzione dei test della soglia di defibrillazione ventricolare", pagina 110.


### 10.6.3.1 Alcune considerazioni sull'induzione di VF con stimolazione Burst a 50 Hz

**Avvertenza:** monitorare attentamente il paziente durante l'utilizzo di una funzione per studi EF. Assicurarsi di avere a disposizione un defibrillatore esterno pronto per l'uso durante l'induzione di qualsiasi tachiaritmia. Una tachiaritmia indotta può degenerare in fibrillazione ventricolare.

**ATP prima della carica e ATP durante la carica** – Le funzioni ATP prima della carica e ATP durante la carica vengono disattivate automaticamente per 30 s dopo l'erogazione di un'induzione Burst a 50 Hz. Ciò impedisce possibili interferenze tra le terapie di ATP ed i test della soglia di defibrillazione.

### 10.6.3.2 Erogazione di un'induzione ventricolare Burst a 50 Hz

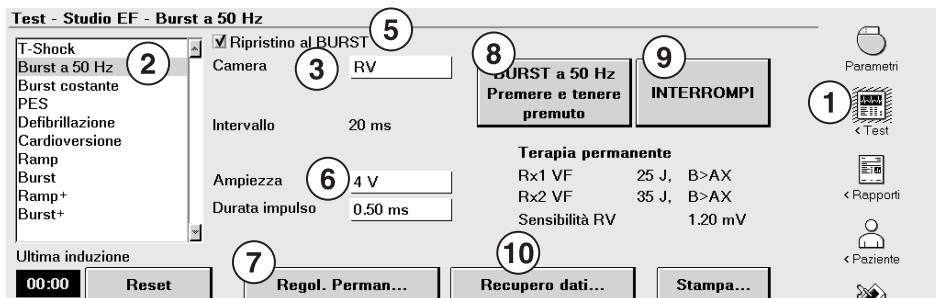**Figura 201.** La schermata di induzione ventricolare con Burst a 50 Hz



1. Selezionare Test > Studio EF.
2. Selezionare Burst a 50 Hz dalla casella delle induzioni/terapie.
3. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare camera, selezionare [RV]. Impostare il parametro Camera sul valore ventricolare desiderato.
4. Se si intende trattare l'episodio indotto con una terapia manuale, selezionare [Sospendi] per disattivare il riconoscimento automatico.

**Nota:** il pulsante [Sospendi] si trova nella parte superiore della schermata e non è illustrato nella Figura 201.

5. Selezionare la casella di controllo Ripristino al BURST per il riconoscimento e l'erogazione automatici della terapia o deselectare la casella di controllo relativa alla terapia manuale.
6. Accettare i valori di test visualizzati o selezionarne di nuovi.
7. Per visualizzare e modificare i parametri di riconoscimento e della terapia di VF, selezionare [Regol. Permanente...].
8. Premere e tenere premuto il pulsante [BURST a 50 Hz Premere e tenere premuto]. Rilasciare il pulsante per terminare l'induzione.
9. Se necessario, selezionare [INTERROMPI] per interrompere una terapia in corso.
10. Selezionare [Recupero dati...] e [Stampa...] per rivedere e stampare i dati relativi al paziente.

#### 10.6.4 Induzione di una AT/AF con un'induzione Burst a 50 Hz

Per indurre un'AT/AF, è possibile ricorrere ad un'induzione Burst atriale a 50 Hz. Per indurre l'AT/AF, l'induzione Burst a 50 Hz consente di erogare una rapida raffica di impulsi di stimolazione AOO nell'atrio. L'ampiezza e la durata di questi impulsi sono selezionabili, mentre l'intervallo di stimolazione è fisso a 20 ms.

Finché si tiene premuto il pulsante [BURST a 50 Hz Premere e tenere premuto] sullo schermo del programmatore, il dispositivo continua ad erogare l'induzione (fino ad un massimo di 10 s).

Quando si esegue un'induzione atriale Burst a 50 Hz, si può far erogare dal dispositivo la stimolazione VOO di backup.

L'induzione Burst a 50 Hz può anche essere utilizzata per trattare manualmente gli episodi di AF.

##### 10.6.4.1 Alcune considerazioni sull'induzione di una AT/AF con Burst atriale a 50 Hz

**Avvertenza:** monitorare attentamente il paziente durante l'utilizzo di una funzione per studi EF. Assicurarsi di avere a disposizione un defibrillatore esterno pronto per l'uso durante l'induzione di qualsiasi tachiaritmia. Una tachiaritmia indotta può degenerare in fibrillazione ventricolare.


**Impostazione della stimolazione ventricolare e stimolazione VOO di backup** – Se il valore programmato del parametro Stimolazione ventricolare è RV, RV→LV o LV→RV, la stimolazione VOO di backup viene erogata nel ventricolo destro. Se il valore programmato



del parametro Stimolazione ventricolare è LV, la stimolazione VOO di backup viene erogata nel ventricolo sinistro.

#### 10.6.4.2 Come erogare di una stimolazione atriale Burst a 50 Hz

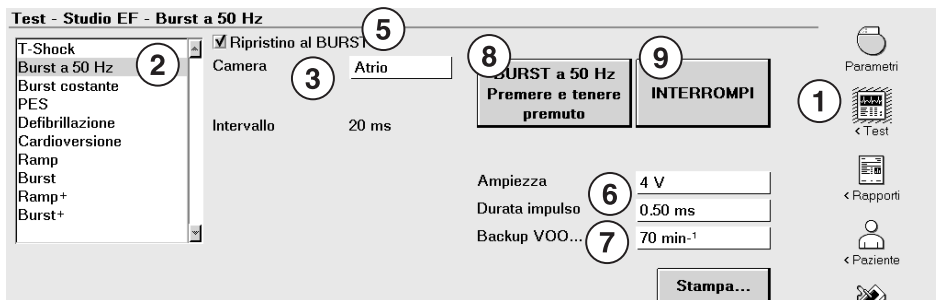**Figura 202.** La schermata di induzione con Burst atriale a 50 Hz



1. Selezionare Test > Studio EF.
2. Selezionare Burst a 50 Hz dalla casella delle induzioni/terapie.
3. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare camera, selezionare [Atrio]. In caso contrario, assicurarsi che il parametro Camera sia impostato su Atrio.
4. Se si intende trattare l'episodio indotto con una terapia manuale, selezionare [Sospendi] per disattivare il riconoscimento automatico.  
**Nota:** il pulsante [Sospendi] si trova nella parte superiore della schermata e non è illustrato nella Figura 202.
5. Selezionare la casella di controllo Ripristino al BURST per il riconoscimento e l'erogazione automatici della terapia o deselectare la casella di controllo relativa alla terapia manuale.
6. Accettare i valori di test visualizzati o selezionarne di nuovi.
7. Se si desidera erogare una stimolazione VOO di backup durante la stimolazione con burst, selezionare i valori in Backup VOO.
8. Premere e tenere premuto il pulsante [BURST a 50 Hz Premere e tenere premuto]. Rilasciare il pulsante per terminare l'induzione.
9. Se necessario, selezionare [INTERROMPI] per interrompere una terapia in corso.

### 10.6.5 Induzione di AT o VT con un'induzione Burst costante

Per indurre una AT o una VT, è possibile ricorrere ad un'induzione Burst costante. Per indurre tachiaritmie atriali o ventricolari, l'induzione Burst costante eroga una serie di impulsi di stimolazione AOO o VOO asincroni nella camera desiderata con un intervallo uniforme e selezionabile. È anche possibile specificare l'ampiezza e la durata degli impulsi.

Durante un'induzione atriale a Burst costante, si può far erogare dal dispositivo la stimolazione VVI di backup.

#### 10.6.5.1 Alcune considerazioni sull'induzione di AT o VT con Burst costante


**Avvertenza:** monitorare attentamente il paziente durante l'utilizzo di una funzione per studi EF. Assicurarsi di avere a disposizione un defibrillatore esterno pronto per l'uso durante l'induzione di qualsiasi tachiaritmia. Una tachiaritmia indotta può degenerare in fibrillazione ventricolare.

**Ampiezza atriale e stimolazione VVI di backup** – La stimolazione di backup VVI durante un'induzione Burst costante atriale può essere inibita da crosstalk se il valore di test dell'ampiezza atriale è superiore a 6 V.

**Impostazione della stimolazione ventricolare e stimolazione VVI di backup** – Se il valore programmato del parametro Stimolazione ventricolare è RV, RV→LV o LV→RV, la stimolazione VVI di backup viene erogata nel ventricolo destro. Se il valore programmato del parametro Stimolazione ventricolare è LV, la stimolazione VVI di backup viene erogata nel ventricolo sinistro.

#### 10.6.5.2 Come erogare un'induzione Burst costante

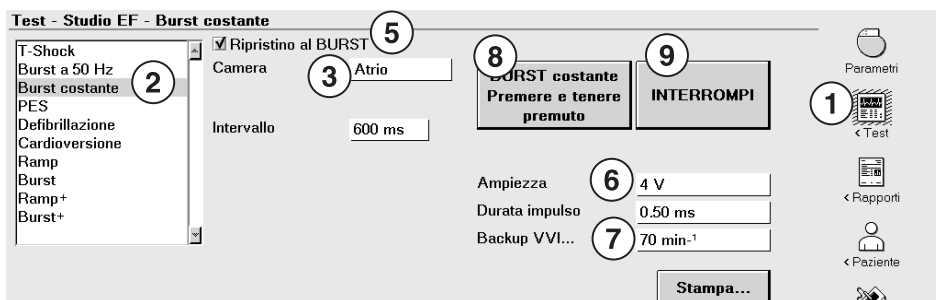**Figura 203.** La schermata di induzione con Burst costante



1. Selezionare Test > Studio EF.
2. Selezionare Burst costante dalla casella delle induzioni/terapie.
3. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare camera, selezionare [Atrio] o [RV]. Se si seleziona [RV], impostare il parametro Camera sull'impostazione ventricolare desiderata.
4. Se si intende trattare l'episodio indotto con una terapia manuale, selezionare [Sospendi] per disattivare il riconoscimento automatico.  
**Nota:** il pulsante [Sospendi] si trova nella parte superiore della schermata e non è illustrato nella Figura 203.
5. Selezionare la casella di controllo Ripristino al BURST per il riconoscimento e l'erogazione automatici della terapia o deselezionare la casella di controllo relativa alla terapia manuale.
6. Accettare i valori di test visualizzati o selezionarne di nuovi.
7. Se si desidera erogare una stimolazione VVI di backup durante un'induzione atriale, selezionare i valori in Backup VVI.
8. Premere e tenere premuto [BURST costante Premere e tenere premuto]. Rilasciare il pulsante per terminare l'induzione.
9. Se necessario, selezionare [INTERROMPI] per interrompere una terapia in corso.

### 10.6.6 Induzione di una AT o VT con la stimolazione elettrica programmata

Per indurre una AT o una VT, è possibile ricorrere alla stimolazione elettrica programmata (PES). Per indurre tachicardie atriali o ventricolari, la PES eroga un numero selezionabile di impulsi di stimolazione in corrispondenza dell'intervallo S1S1, per poi erogare un massimo di tre impulsi di stimolazione asincroni in corrispondenza degli intervalli S1S2, S2S3 e S3S4. È possibile specificare la camera, l'ampiezza, la durata dell'impulso e gli intervalli di stimolazione per l'induzione.

Quando si effettua un'induzione atriale PES, si può far erogare dal dispositivo la stimolazione VVI di backup.

### 10.6.6.1 Alcune considerazioni sull'induzione di AT o VT con la PES


**Avvertenza:** monitorare attentamente il paziente durante l'utilizzo di una funzione per studi EF. Assicurarsi di avere a disposizione un defibrillatore esterno pronto per l'uso durante l'induzione di qualsiasi tachiaritmia. Una tachiaritmia indotta può degenerare in fibrillazione ventricolare.

**Ampiezza atriale e stimolazione VVI di backup** – La stimolazione di backup VVI durante un'induzione PES atriale può essere inibita da crosstalk se il valore di test dell'ampiezza atriale è superiore a 6 V.

**Impostazione della stimolazione ventricolare e stimolazione VVI di backup** – Se il valore programmato del parametro Stimolazione ventricolare è RV, RV→LV o LV→RV, la stimolazione VVI di backup viene erogata nel ventricolo destro. Se il valore programmato del parametro Stimolazione ventricolare è LV, la stimolazione VVI di backup viene erogata nel ventricolo sinistro.

### 10.6.6.2 Come erogare un'induzione PES

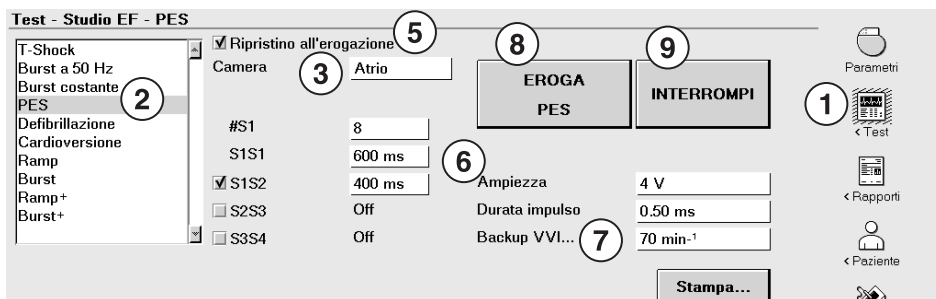**Figura 204.** La schermata di induzione con PES



1. Selezionare Test > Studio EF.
2. Selezionare PES dalla casella delle induzioni/terapie.
3. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare camera, selezionare [Atrio] o [RV]. Se si seleziona [RV], impostare il parametro Camera sull'impostazione ventricolare desiderata.
4. Se si intende trattare l'episodio indotto con una terapia manuale, selezionare [Sospendi] per disattivare il riconoscimento automatico.

**Nota:** il pulsante [Sospendi] si trova all'inizio della schermata e non è illustrato nella Figura 204.

5. Selezionare la casella di controllo Ripristino all'erogazione per il riconoscimento e l'erogazione automatici della terapia o deselectare la casella di controllo relativa alla terapia manuale.
6. Accettare i valori di test visualizzati o selezionarne di nuovi.
7. Se si desidera erogare una stimolazione VVI di backup durante un'induzione atriale, selezionare i valori in Backup VVI.
8. Selezionare [EROGA PES].
9. Se necessario, selezionare [INTERROMPI] per interrompere una terapia in corso.

## 10.7 Erogazione di terapie manuali

Le terapie manuali sono terapie per tachiaritmia che si erogano dal programmatore. Durante i test EF, è possibile ricorrere alle terapie manuali per erogare una terapia di backup. Nelle visite di controllo, le terapie manuali possono essere di aiuto nella valutazione dell'efficacia della terapia e per apportare ogni eventuale modifica necessaria nel contesto di un trattamento cronico.

Le terapie manuali disponibili sono Defibrillazione, Cardioversione, Ramp, Burst, Ramp+ e Burst+.

### 10.7.1 Alcune considerazioni

**Avvertenza:** monitorare attentamente il paziente durante l'erogazione di una terapia manuale. Assicurarsi di avere a portata di mano un defibrillatore esterno e pronto per l'uso. Durante i test del dispositivo possono verificarsi tachiaritmie potenzialmente dannose.

**Interruzione di un'induzione o di una terapia** – Come misura precauzionale, è possibile selezionare il pulsante [INTERROMPI] visualizzato sullo schermo del programmatore per terminare immediatamente qualsiasi induzione o terapia automatica o manuale in corso. Durante l'erogazione di una terapia manuale, il dispositivo interrompe automaticamente qualsiasi induzione o terapia automatica in corso.

**Ampiezza atriale e stimolazione VVI di backup** – Se il valore di test per l'ampiezza atriale è superiore a 6 V, la stimolazione VVI di backup durante una terapia di ATP atriale manuale può essere inibita dal crosstalk.

**Sospensione del riconoscimento durante la terapia manuale** – Il riconoscimento delle tachiaritmie viene sospeso automaticamente quando si eroga una terapia manuale. Il riconoscimento rimane sospeso finché non si seleziona [RIPRIST] o la sessione di telemetria tra il programmatore e il dispositivo non termina.

**Pulsanti presenti sulla testina di programmazione** – Durante le terapie manuali, il pulsante Programma situato sulla testina di programmazione è disabilitato. Utilizzare il pulsante appropriato [EROGA] sullo schermo per erogare una terapia manuale.

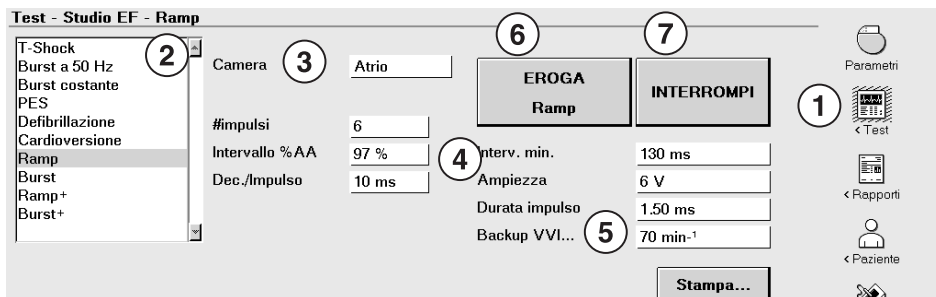
**Telemetria** – Assicurarsi che tra il dispositivo ed il programmatore si stabilisca un collegamento telemetrico prima di erogare una terapia manuale. Un'interrogazione o una programmazione andata a buon fine è indicativa di una corretta comunicazione tra il dispositivo ed il programmatore.

Quando si usa un collegamento telemetrico wireless, verificare che almeno tre delle spie verdi dell'icona della telemetria wireless siano illuminate. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 3.1.

**Nota:** il collegamento telemetrico può interrompersi durante il periodo di carica per una terapia ad alta tensione a causa di rumore elettrico. La telemetria riprende dopo il completamento della carica.

**Valori temporanei di parametro** – Le funzioni per l'erogazione manuale delle terapie utilizzano valori temporanei che non modificano i parametri programmati del dispositivo. I valori temporanei diventano operativi all'inizio della terapia manuale. Al termine della terapia manuale, il dispositivo ritorna ai valori di parametro programmati per la stimolazione antibradicardica e la terapia per tachiaritmia.

## 10.7.2 Come erogare una terapia manuale



1. Selezionare Test > Studio EF.
2. Selezionare la terapia manuale desiderata dalla casella Induzioni/Terapie.
3. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare camera, selezionare [Atrio] o [RV] a seconda delle esigenze. Se si seleziona [RV], impostare il parametro Camera sull'impostazione ventricolare desiderata.
4. Accettare i valori di test correnti o selezionarne di nuovi.

5. Per erogare una stimolazione VVI di backup durante una terapia atriale, selezionare Backup VVI... ed impostare i parametri per la stimolazione VVI di backup.
6. Selezionare [EROGA].
7. Se necessario, selezionare [INTERROMPI] per terminare la terapia manuale.

### 10.7.3 Funzionamento delle terapie manuali

In linea di massima, ogni terapia manuale con una terapia automatica corrispondente funziona in modo identico alla terapia automatica.

**Terapie di stimolazione antitachicardica** – Con le terapie ATP manuali è possibile erogare una sequenza della terapia selezionata. Per informazioni sul funzionamento delle terapie atriali Ramp e Burst+, vedere la Sezione 9.5, “Trattamento degli episodi di AT/AF con la stimolazione antitachicardica”, pagina 387. Per informazioni sul funzionamento delle terapie ventricolari Ramp, Burst e Ramp+, vedere la Sezione 9.2, “Trattamento degli episodi di VT e di FVT con terapie di stimolazione antitachicardica”, pagina 356.

**Defibrillazione** – La terapia di defibrillazione manuale carica i condensatori del dispositivo erogando uno shock bifasico sincronizzato con un'onda R rilevata, se possibile. Il dispositivo non verifica la presenza di VF prima di erogare lo shock. Per ulteriori informazioni sulla defibrillazione, cfr. la Sezione 9.1, “Trattamento degli episodi rilevati come VF”, pagina 342.

**Cardioversione ventricolare** – La terapia di cardioversione ventricolare manuale carica i condensatori tentando di sincronizzare lo shock con un evento ventricolare rilevato al di fuori del periodo refrattario. Se non è in grado di sincronizzare la terapia, il dispositivo interrompe la terapia. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 9.3, “Trattamento di VT e FVT con cardioversione ventricolare”, pagina 370.

**Cardioversione atriale** – La terapia di cardioversione atriale manuale carica i condensatori tentando di sincronizzare lo shock con un evento ventricolare rilevato al di fuori del periodo refrattario. Se l'intervallo ventricolare è più breve dell'intervallo R-R selezionato, il dispositivo interrompe la terapia. Per ulteriori informazioni, cfr. la Sezione 9.6, “Trattamento dell'AT/AF con la cardioversione atriale”, pagina 400.

# A Guida di consultazione rapida


## A.1 Caratteristiche fisiche

**Tabella 13.** Caratteristiche fisiche

Volume <sup>a</sup>	38 cm <sup>3</sup>
Massa	68 g
A x L x P <sup>b</sup>	69 mm x 51 mm x 15 mm
Superficie della cassa del dispositivo	59 cm <sup>2</sup>
ID radiopaco	PUG
Materiali a contatto con tessuto umano <sup>c</sup>	Titanio, poliuretano, gomma siliconica
Batteria	Litio all'ossido d'argento

<sup>a</sup> Volume con i connettori staccati dai fori.  
<sup>b</sup> Le guarnizioni possono sporgere leggermente dalla superficie della cassa.  
<sup>c</sup> I test a cui questi materiali sono stati sottoposti per determinare la loro capacità di evitare incompatibilità biologica hanno fornito ottimi risultati. Il dispositivo non produce temperature nocive per il tessuto adiacente in condizioni di funzionamento normale.

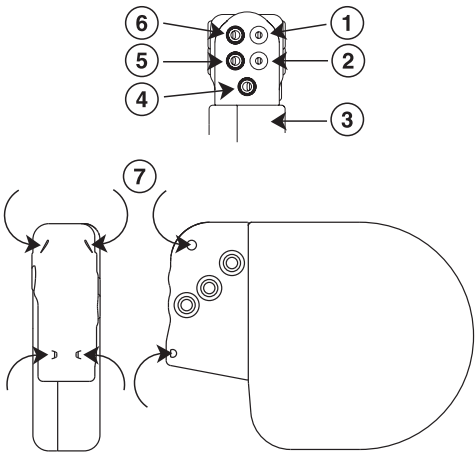**Figura 205.** Fori dei connettori e fori per sutura



- 1 Porta DF-1, SVC (HVX)
- 2 Porta DF-1, RV (HVB)
- 3 Elettrodo Active Can del dispositivo, Cassa (HVA)
- 4 Porta IS-1, LV
- 5 Porta IS-1, RV



- 6 Porta IS-1, A
- 7 Fori per sutura

A.2 Specifiche elettriche

Tabella 14. Caratteristiche della batteria


Fabbricante	Medtronic Energy and Component Center
Modello	161455
Composto chimico	Litio all'ossido d'argento
Tensione nominale	3,2 V
Capacità media durante l'RRT	1,0 Ah
Capacità minima dopo l'RRT	0,1 Ah

Tabella 15. Tensione massima d'uscita dell'ICD durante l'erogazione di shock ad alta tensione

Energia programmata/erogata	Tensione massima per la prima fase di impulsi	Tensione massima per la seconda fase di impulsi
Minima: 0,4 J ( $\pm 0,25$ J)	77 V ( $\pm 16\%$ )	39 V ( $\pm 30\%$ )
Media: 18 J ( $\pm 20\%$ )	520 V ( $\pm 10\%$ )	260 V ( $\pm 25\%$ )
Max.: 35 J ( $\pm 20\%$ )	722 V ( $\pm 10\%$ )	361 V ( $\pm 25\%$ )

A.2.1 Forme d'onda in uscita

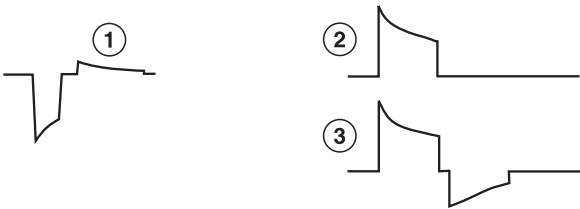Figura 206. Forme d'onda in uscita tipiche




- 1 Forma d'onda di stimolazione
- 2 Forma d'onda monofasica ad alta tensione (solo induzioni con T-Shock)
- 3 Forma d'onda bifasica ad alta tensione

### A.2.2 Metodi di misurazione

Parametri importanti quali la durata dell'impulso, l'ampiezza dell'impulso e la sensibilità sono stati misurati dal fabbricante alle condizioni standard di 37 °C, 60 min<sup>-1</sup>, 3,5 V, 0,4 ms; sensibilità nominale; con tre livelli di carica in conformità alla norma EN 45502-2-2.

**Durata dell'impulso** – La durata dell'impulso è stata misurata a 1/3 della tensione massima in conformità alla norma EN 45502-2-2.

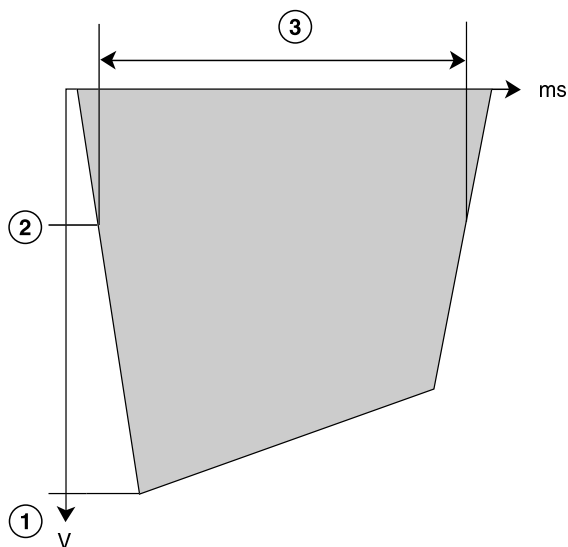
**Figura 207.** Misurazione della durata dell'impulso




- 1 Ampiezza massima
- 2 1/3 dell'ampiezza massima

- 3 Durata dell'impulso

**Ampiezza** – L'ampiezza dell'impulso è stata calcolata in conformità alla norma EN 45502-2-2.

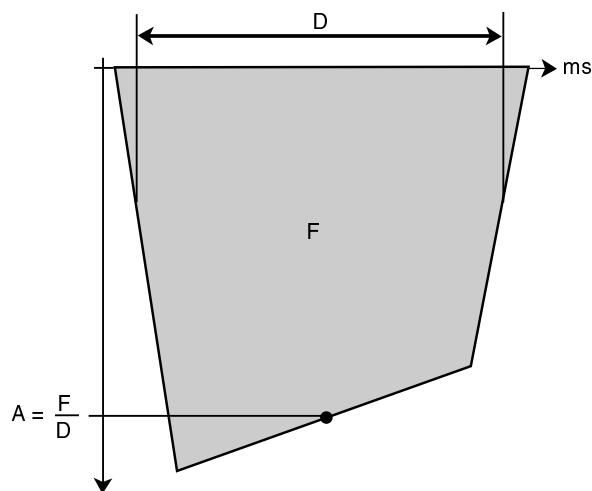**Figura 208.** Misurazione dell'ampiezza dell'impulso

**Sensibilità** – La sensibilità atriale e quella ventricolare vengono definite come l'ampiezza di tensione di un segnale di prova a norma EN 45502-2-2 che sia appena sufficiente ad essere rilevato dal dispositivo.

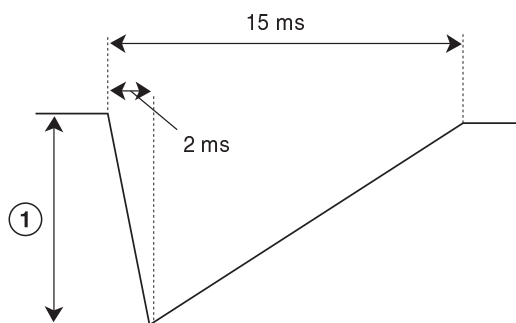**Figura 209.** Misurazione della sensibilità

1 Ampiezza

**Note:**

- Durante la misurazione dei parametri di stimolazione e di sensing con analizzatori per i sistemi di stimolazione si potrebbero riscontrare notevoli differenze rispetto alle specifiche riportate nel presente manuale, in quanto i metodi di misura impiegati da tali sistemi possono differire da quelli sopra descritti.
- I risultati delle misurazioni di impedenza degli elettrocateri possono essere falsati da apparecchi di monitoraggio di elettrocardiogramma.

**Rapporto di reiezione di modo comune** – Il rapporto di reiezione di modo comune (CMRR) per le frequenze di 16,6 Hz, 50 Hz e 60 Hz è di almeno: 100 (40 dB). Il calcolo del CMRR è stato eseguito sulla base delle misure ottenute con un segnale sinusoidale iniettato direttamente nel dispositivo. Il CMRR del dispositivo e del sistema di elettrocateri dipende da diversi fattori, come il posizionamento degli elettrodi o la loro distanza reciproca, e potrebbe risultare inferiore al rapporto CMRR del dispositivo.

**A.2.3 Variazioni associate alla temperatura**

Frequenza base, frequenza di test, durata ed ampiezza dell'impulso restano nei limiti di tolleranza previsti quando la temperatura del dispositivo è compresa tra 22 °C e 45 °C. La sensibilità alle condizioni nominali misurata a 37 °C può variare di  $\pm 1\%$  a °C da 22 °C a 45 °C.

**A.3 Indicatori di sostituzione**

La tensione della batteria ed i messaggi sullo stato della sostituzione vengono visualizzati sul display del programmatore e nei rapporti stampati. Le condizioni relative al Momento consigliato per la sostituzione (RRT) e alla Fine servizio (EOS) sono elencate nella Tabella 16.

**Tabella 16.** Indicatori di sostituzione

Momento consigliato per la sostituzione (RRT)	$\leq 2,63$ V in tre misurazioni automatiche giornaliere consecutive
Fine servizio (EOS)	3 mesi dopo l'RRT

**Data RRT** – Quando la batteria raggiunge l'RRT, il programmatore visualizza la data nelle schermate Quick Look II e Misurazioni della batteria e degli elettrocateri.

**Sostituzione all'EOS** – Se il programmatore indica che il dispositivo è all'EOS, il dispositivo deve essere sostituito immediatamente.

**Periodo di servizio prolungato** – Il Periodo di servizio prolungato (PSP) è il periodo di tempo che intercorre tra il RRT e l'EOS. Il PSP è pari a 3 mesi, in presenza delle seguenti

condizioni: Stimolazione DDD al 100% a  $60 \text{ min}^{-1}$ , ampiezza della stimolazione atriale e RV pari a 2,5 V, ampiezza della stimolazione LV pari a 3,0 V, durata dell'impulso pari a 0,4 ms; carico di stimolazione da 600  $\Omega$  e 6 cariche alla massima energia. Se il dispositivo supera queste condizioni, l'EOS può comparire prima dello scadere dei 3 mesi.

## A.4 Durata prevista

La durata prevista (in anni) del dispositivo è riportata nella Tabella 17. I dati si basano su uscite di stimolazione programmate sull'ampiezza specificata ed una durata dell'impulso di 0,4 ms, stimolazione biventricolare al 100%, la percentuale specificata di stimolazione atriale a  $60 \text{ min}^{-1}$  e gli altri parametri con un trascinamento atriale a  $70 \text{ min}^{-1}$ .

Le previsioni sulla durata del dispositivo si basano sull'impostazione predefinita di ricarica automatica dei condensatori. Indicativamente, ogni carica alla massima energia fa diminuire la durata prevista di 25 giorni. La durata del dispositivo dipende dalle impostazioni programmate di determinate funzioni, quali la memorizzazione dell'EGM pre-aritmia.

Le previsioni sulla durata del dispositivo si basano sui dati relativi all'esaurimento accelerato della batteria e sul modello del dispositivo specificato. Questi valori non devono essere interpretati come numeri precisi.

**Tabella 17.** Durata prevista in anni

Stimolazione in percentuale	Frequenza di carica alla massima energia <sup>a</sup>	Prearitmia EGM memorizza- zione <sup>b</sup>	Impedenza stimola- zione di 500 $\Omega$		Impedenza stimolazione di 600 $\Omega$		Impedenza stimolazione di 900 $\Omega$	
			2,5 V <sup>c</sup>	3,5 V <sup>d</sup>	2,5 V <sup>c</sup>	3,5 V <sup>d</sup>	2,5 V <sup>c</sup>	3,5 V <sup>d</sup>
DDD, 0% 0% atriale 100% biventri- colare	Semestrale	Off	5,8	4,5	6,0	4,8	6,5	5,5
	Trimestrale	Off	5,3	4,2	5,5	4,5	5,9	5,0
	Semestrale	On	5,7	4,4	5,9	4,7	6,4	5,4
	Trimestrale	On	5,2	4,2	5,4	4,4	5,8	5,0
DDD, 15% 15% atriale 100% biventri- colare	Semestrale	Off	5,7	4,5	6,0	4,8	6,5	5,4
	Trimestrale	Off	5,3	4,2	5,5	4,4	5,9	5,0
	Semestrale	On	5,6	4,4	5,9	4,7	6,3	5,3
	Trimestrale	On	5,2	4,1	5,4	4,4	5,8	4,9
DDD, 50% 50% atriale 100% biventri- colare	Semestrale	Off	5,6	4,3	5,9	4,6	6,4	5,3
	Trimestrale	Off	5,2	4,0	5,4	4,3	5,8	4,9
	Semestrale	On	5,5	4,2	5,8	4,5	6,3	5,2
	Trimestrale	On	5,1	4,0	5,3	4,2	5,7	4,8

**Tabella 17.** Durata prevista in anni (continua)

Stimolazione in percentuale	Frequenza di carica alla massima energia <sup>a</sup>	Prearitmia EGM memorizzazione <sup>b</sup>	Impedenza stimolazione di 500 Ω		Impedenza stimolazione di 600 Ω		Impedenza stimolazione di 900 Ω	
			2,5 V <sup>c</sup>	3,5 V <sup>d</sup>	2,5 V <sup>c</sup>	3,5 V <sup>d</sup>	2,5 V <sup>c</sup>	3,5 V <sup>d</sup>
DDD, 100%	Semestrale	Off	5,5	4,1	5,7	4,4	6,3	5,1
100% atriale	Trimestrale	Off	5,1	3,9	5,3	4,1	5,7	4,7
100% biventri-colare	Semestrale	On	5,4	4,0	5,6	4,3	6,2	5,0
	Trimestrale	On	5,0	3,8	5,2	4,0	5,6	4,7

<sup>a</sup> La frequenza di carica alla massima energia può comprendere degli shock di terapia alla massima energia o delle ricariche dei condensatori. Eventuali cariche supplementari alla massima energia dovute a shock terapeutici, test del dispositivo o ricarica dei condensatori riducono la durata di circa 25 giorni (0,07 anni).

<sup>b</sup> I dati forniti per la programmazione dell'attivazione della memorizzazione dell'EGM pre-aritmia si basano su un periodo di sei mesi (due intervalli di follow-up con cadenza trimestrale) della durata del dispositivo. Un ulteriore utilizzo della funzione di memorizzazione dell'EGM pre-aritmia riduce la durata prevista di circa il 17% o di due mesi all'anno.

<sup>c</sup> Ampiezza A e RV a 2,5 V, ampiezza LV a 3,0 V.

<sup>d</sup> Ampiezza A e RV a 3,5 V, ampiezza LV a 4 V.

**Nota:** queste previsioni si basano sui tempi tipici di deposito su scaffali. Presumendo l'ipotesi peggiore in termini di durata di deposito su scaffali (18 mesi), la durata risulterà ridotta di circa il 7,2%.

## A.5 Livelli di energia e tempi di carica tipici

L'energia accumulata è sempre superiore all'energia erogata. L'energia accumulata deriva dalla carica massima dei condensatori. Per un confronto tra i vari livelli di energia programmati ed erogati dal dispositivo e i livelli di energia accumulata nei condensatori prima dell'erogazione, fare riferimento alla Tabella 18. Nella tabella sono riportati anche i tempi di carica associati all'energia erogata ed accumulata.

**Tabella 18.** Livelli di energia programmata/erogata e accumulata e relativi tempi di carica

Energia			Energia		
Programmata/Erogata <sup>a</sup>	Accumulata <sup>b</sup>	Tempo di carica <sup>c</sup>	Programmata/Erogata <sup>a</sup>	Accumulata <sup>b</sup>	Tempo di carica <sup>c</sup>
35 J	39 J	7,7 s	9 J	10 J	2,0 s
32 J	36 J	7,0 s	8 J	9,1 J	1,8 s
30 J	34 J	6,6 s	7 J	8,1 J	1,5 s
28 J	32 J	6,2 s	6 J	6,9 J	1,3 s
26 J	29 J	5,7 s	5 J	5,7 J	1,1 s
25 J	28 J	5,5 s	4 J	4,6 J	0,9 s
24 J	27 J	5,3 s	3 J	3,5 J	0,7 s

**Tabella 18.** Livelli di energia programmata/erogata e accumulata e relativi tempi di carica (continua)

Energia			Energia		
Programmata/Ero-gata <sup>a</sup>	Accu-mulata <sup>b</sup>	Tempo di carica <sup>c</sup>	Program-mata/Erogata <sup>a</sup>	Accumu-lata <sup>b</sup>	Tempo di carica <sup>c</sup>
22 J	25 J	4,8 s	2 J	2,3 J	0,4 s
20 J	23 J	4,4 s	1,8 J	2,1 J	0,4 s
18 J	20 J	4,0 s	1,6 J	1,9 J	0,4 s
16 J	18 J	3,5 s	1,4 J	1,7 J	0,3 s
15 J	17 J	3,3 s	1,2 J	1,5 J	0,3 s
14 J	16 J	3,1 s	1,0 J	1,2 J	0,2 s
13 J	15 J	2,9 s	0,8 J	0,9 J	0,2 s
12 J	14 J	2,6 s	0,6 J	0,7 J	0,1 s
11 J	13 J	2,4 s	0,4 J	0,5 J	0,1 s
10 J	11 J	2,2 s			

<sup>a</sup>Energia erogata sul blocco del connettore in un carico da 75  $\Omega$ .

<sup>b</sup>Energia accumulata al termine della carica nel condensatore.

<sup>c</sup>Tempo medio di carica ad inizio servizio (BOS), a condensatori completamente carichi, arrotondato per eccesso al decimo di secondo.

L'ultimo tempo di carica dei condensatori viene visualizzato sullo schermo del programmatore e nei rapporti stampati. Per valori tipici relativi al tempo di carica al BOS ed al RRT, cfr. la Tabella 19. È possibile analizzare il tempo di carica tramite il test carica/scarica.

**Tabella 19.** Tempi medi di carica alla massima energia con condensatori completamente ricaricati

Ad inizio servizio (BOS)	7,7 s
Al momento consigliato per la sostituzione (RRT)	9,3 s

## A.6 Applicazione di un magnete

Applicando un magnete in prossimità del dispositivo, il riconoscimento delle tachiaritmie viene sospeso e non viene erogata alcuna terapia per tachiaritmia. Il segnale acustico si attiverà solo se l'allarme è stato programmato in tal senso. Quando si stabilisce un collegamento telemetrico mediante la testina di programmazione, il dispositivo ignora il magnete presente all'interno della testina.

## A.7 Dati memorizzati e diagnostica

**Tabella 20.** Memorizzazione dei dati sugli episodi aritmici

<b>Tipo di episodio</b>	<b>Capacità</b>
Diario episodi di VT/VF trattata	100 registrazioni
EGM, marker e intervalli degli episodi di VT/VF trattata	10 min
Diario episodi di VT monitorata	15 registrazioni
EGM, marker e intervalli degli episodi di VT monitorata	2,5 min
Diario episodi di VT non sostenuta	15 registrazioni
EGM, marker e intervalli degli episodi di VT non sostenuta	2 min
Diario episodi di AT/AF trattata	100 registrazioni
EGM, marker e intervalli degli episodi di AT/AF trattata	8,25 min
Diario episodi di AT/AF monitorata	50 registrazioni
EGM, marker e intervalli degli episodi di AT/AF monitorata	3 min
Diario episodi di SVT	25 registrazioni
EGM, marker e intervalli degli episodi di SVT	2,5 min
Diario, marker e intervalli degli episodi di sensing ventricolare	8 registrazioni
Diario episodi attivati dal paziente	50 registrazioni
Dati degli intervalli della memoria Flashback prima di ciascuno dei seguenti eventi:	2000 eventi (compresi sia gli eventi A che gli eventi V)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• interrogazione</li> <li>• episodio di VT</li> <li>• episodio di VF</li> <li>• episodio di AT/AF</li> </ul>	

**Tabella 21.** Contatori degli episodi di VT/VF

I contatori degli episodi di VT/VF indicano i dati relativi alla sessione di follow-up corrente e a quella precedente.

- Conteggi di ciascun tipo di episodi di VT/VF
- VF
  - FVT
  - VT
  - VT monitorata
  - VT-NS (>4 battiti)
  - Serie di PVC (2–4 battiti)
  - PVC singole
  - Cicli di stimolazioni di VRS
  - Singole stimolazioni di VRS



**Tabella 21.** Contatori degli episodi di VT/VF (continua)

Conteggi di ciascun tipo di episodio di SVT (inibizione della terapia per VT/VF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FibA/FlutterA</li> <li>• Tachicardia sinusale</li> <li>• Altre SVT 1:1</li> <li>• Stabilità V.</li> <li>• Insorgenza</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabella 22.** Contatori di terapie per VT/VF

I contatori delle terapie per VT/VF indicano i dati relativi alla sessione di follow-up corrente e a quella precedente.

Contatori riepilogativi di terapie per VT/VF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminato con ATP</li> <li>• Terminato con shock</li> <li>• Shock per VT/VF complessivi</li> <li>• Cariche interrotte</li> </ul>
Contatori di efficacia delle terapie per VT/VF	<p>Per Rx1–Rx6 VF e ATP durante/prima della carica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogate</li> <li>• Efficaci</li> </ul> <p>Per Rx1–Rx6 FVT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogate</li> <li>• Efficaci</li> <li>• Accelerate</li> </ul> <p>Per Rx1–Rx6 VT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogate</li> <li>• Efficaci</li> <li>• Accelerate</li> </ul>

**Tabella 23.** Contatori degli episodi di AT/AF

I contatori degli episodi di AT/AF indicano i dati relativi alla sessione di follow-up corrente e a quella precedente.

Dati riepilogativi su AT/AF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % di tempo in AT/AF</li> <li>• Media AT/AF in ore/giorno</li> <li>• Episodi di AT/AF monitorata</li> <li>• Episodi di AT/AF trattata</li> <li>• Episodi terminati con ATP</li> <li>• % di tempo in stimolazione atriale</li> <li>• % di tempo in intervento atriale</li> <li>• AT-NS (&gt;6 battiti)</li> </ul>
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabella 23.** Contatori degli episodi di AT/AF (continua)

Numero di episodi di AT/AF

- Raggruppati per durata<sup>a</sup>
- Raggruppati per ora di inizio<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Questo contatore comprende ogni caso in cui il dispositivo abbia individuato l'insorgenza di AT/AF. Pertanto, il numero totale di episodi indicato da questo contatore può superare il numero di episodi di AT/AF rilevati e registrati dal dispositivo.

**Tabella 24.** Contatori di terapie per AT/AF

I contatori di terapie per AT/AF indicano i dati relativi alla sessione di follow-up corrente e a quella precedente.

Numero di episodi di AT/AF trattata e percentuale di episodi terminati

- Raggruppati per zona di riconoscimento e terapia erogata
- Raggruppati per durata del ciclo atriale

Conteggi dei tipi diversi di terapie per AT/AF

- Sequenze di ATP
  - erogate
  - interrotte
- Shock automatici
  - erogati
  - non riusciti
- Shock attivati dal paziente
  - erogati
  - non riusciti

**Tabella 25.** Dati sulle misurazioni della batteria e degli elettrocateri

Il dispositivo monitora automaticamente e costantemente lo stato della batteria e degli elettrocateri per l'intera durata del dispositivo. È possibile stampare e visualizzare i seguenti dati:

- Tensione della batteria
  - Ultima ricarica dei condensatori
    - Tempo di carica
    - Energia
  - Ultima carica erogata
    - Tempo di carica
    - Energia
  - Contatore di integrità del sensing
    - Intervalli V-V brevi
  - Risultati del controllo della posizione dell'elettrocatero atriale
  - Impedenza dell'elettrocatero
    - Stimolazione A
    - Stimolazione RV
    - Stimolazione LV
    - Defibrillazione RV
    - Defibrillazione SVC
  - Sensing
    - Ampiezza dell'onda P
    - Ampiezza dell'onda R
  - Ultima terapia ad alta tensione
    - Impedenza misurata
    - Energia erogata
    - Forma d'onda
    - Percorso
-

**Tabella 26.** Dati sull'andamento delle prestazioni degli elettrocateri

Il dispositivo memorizza misurazioni giornaliere per quattordici giorni. Dopo il quattordicesimo giorno, il dispositivo comprime ogni settimana completa di dati creando un campione settimanale per un massimo di ottanta settimane. Oltre le 82 settimane la gestione dei dati prevede l'eliminazione di questi ultimi a partire da quelli più vecchi.

Misure dell'impedenza degli elettrocateri

- Impedenza di stimolazione A
- Impedenza di stimolazione RV
- Impedenza di stimolazione LV
- Impedenza di defibrillazione
  - RV
  - SVC
- Soglia di cattura
  - LV
- Ampiezza delle onde P/R
  - Onda P
  - Onda R

**Tabella 27.** Dati sull'andamento Cardiac Compass

I dati sulle tendenze del Cardiac Compass sono disponibili unicamente sotto forma di rapporto stampato. Il rapporto mostra le tendenze cliniche a lungo termine per un periodo massimo di quattordici mesi. Ogni rapporto contiene le seguenti informazioni:

- Programmazione, interrogazione ed eventi di sessioni remote con annotazione di date ed eventi
- Uno o più shock al giorno
- Episodi di VT/VF trattata al giorno
- Frequenza ventricolare durante VT/VF
- Episodi di VT non sostenuta al giorno
- Minuti o ore totali di AT/AF al giorno
- Frequenza ventricolare in corso di AT/AF
- Percentuale di stimolazione erogata al giorno
- Frequenza ventricolare media (frequenze diurne e notturne)
- Attività del paziente
- Variabilità della frequenza cardiaca
- Indice del fluido OptiVol
- Impedenza toracica

**Tabella 28.** Dati del Rapporto di gestione scompensi cardiaci

I dati del Rapporto di gestione scompensi cardiaci sono disponibili soltanto sotto forma di rapporto stampato. Il rapporto mostra le tendenze a lungo termine di frequenze cardiache, aritmie ed indicatori di accumulo di fluidi per un periodo massimo di quattordici mesi. Ogni rapporto contiene le seguenti informazioni:

- Programmazione, interrogazione ed eventi di sessioni remote con annotazione di date ed eventi
- Indice del fluido OptiVol
- Impedenza toracica
- Uno o più shock al giorno
- Episodi di VT/VF trattata al giorno
- Minuti o ore totali di AT/AF al giorno
- Frequenza ventricolare in corso di AT/AF
- Attività del paziente
- Frequenza ventricolare media
- Variabilità della frequenza cardiaca
- Percentuale di stimolazione erogata al giorno

**Tabella 29.** Dati del rapporto Istogrammi della frequenza

I dati degli istogrammi della frequenza sono disponibili unicamente sotto forma di rapporto stampato. Il rapporto mostra la distribuzione delle frequenze atriali e ventricolari registrate dall'ultima sessione paziente e nel periodo che precede l'ultima sessione.

Gli istogrammi mostrano la percentuale della durata totale della stimolazione o del sensing per le seguenti sequenze di eventi:<sup>a</sup>

- Eventi di AS-VS
- Eventi di AS-VP
- Eventi di AP-VS
- Eventi di AP-VP
- VP
- Stimolazione VSR
- VS

Gli istogrammi mostrano la distribuzione della frequenza degli eventi stimolati e rilevati per:

- Frequenza atriale<sup>b</sup>
- Frequenza ventricolare
- Frequenza ventricolare in corso di AT/AF

<sup>a</sup> Se durante il periodo di registrazione è stato selezionato un modo bicamerale, il rapporto mostra i dati sequenziali degli eventi AS-VS, AS-VP, AP-VS e AP-VP. Se è stato programmato un modo monocamerale, il rapporto mostra la percentuale di tempo impiegato per la stimolazione ed il sensing.

<sup>b</sup> Se oltre il 2% degli eventi atriali rilevati viene identificato come far field di onda R, la gamma percentuale generale ("2-5%" o ">5%") viene annotata sopra l'istogramma della frequenza atriale.

**Tabella 30.** Dati degli eventi Medtronic CareAlert

---

Gli allarmi del dispositivo e del monitor possono attivare le notifiche Medtronic CareAlert. Ogni registrazione CareAlert include le seguenti informazioni:

- Data in cui l'evento si è verificato per la prima volta (dall'ultima interrogazione)
  - Descrizione dell'evento che ha attivato la notifica Medtronic CareAlert
  - Soglia programmata per la notifica Medtronic CareAlert, se applicabile
-

## B Parametri del dispositivo

### B.1 Impostazioni di emergenza

**Tabella 31.** Impostazioni di emergenza e valori di default

Parametro	Valori selezionabili
<b>Defibrillazione</b>	
Energia	0,4; 0,6 ... 1,8; 2; 3 ... 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 35 J
Percorso <sup>a</sup>	B>AX
<b>Cardioversione</b>	
Energia	0,4; 0,6 ... 1,8; 2; 3 ... 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 35 J
Percorso <sup>a</sup>	B>AX
<b>Burst costante</b>	
Intervallo	100; 110 ... 350 ... 600 ms
Ampiezza RV	8 V
Durata dell'impulso RV	1,5 ms
Stimolazione V.	RV
<b>Stimolazione VVI</b>	
Stimolazione V.	RV
Modo di stimolazione	VVI
Frequenza minima	70 min <sup>-1</sup>
Ampiezza RV <sup>b</sup>	6 V
Durata dell'impulso RV <sup>b</sup>	1,5 ms
Blanking V. post VP	240 ms
Stabilizzazione della frequenza V.	Off
Risposta al sensing V.	Off

<sup>a</sup>Se il parametro Active Can/Coil SVC è impostato su Can Off, l'elettrodo HVA (Cassa) non viene usato nel percorso di erogazione ad alta tensione. Se il parametro Active Can/Coil SVC è impostato su SVC Off, l'elettrodo HVX (SVC) non viene usato nel percorso di erogazione ad alta tensione.

<sup>b</sup>Se l'Ampiezza RV viene programmata su 8 V, la stimolazione VVI viene erogata a 8 V con una durata dell'impulso pari a 1,2 ms.

## B.2 Parametri di riconoscimento delle tachicardie

**Tabella 32.** Parametri di riconoscimento delle tachiaritmie

Parametro	Valori programmabili	Alla consegna	Reset
Riconoscimento di AT/AF	On, Monitoraggio	Monitoraggio	Monitoraggio
Zone	1; 2	—	—
Intervallo AT/AF (frequenza) <sup>a</sup>	150; 160 ... 350 ... 450 ms	350 ms	350 ms
Intervallo AT/AF rapida (frequenza) <sup>a</sup>	150; 160 ... 200 ... 250 ms	200 ms	200 ms
Riconoscimento di VF	On, OFF	OFF	On
Intervallo di VF (frequenza) <sup>a</sup>	240; 250 ... 320 ... 400 ms	320 ms	320 ms
Battiti per il riconoscimento iniziale di VF	12/16; 18/24; 24/32; 30/40; 45/60; 60/80; 75/100; 90/120; 105/140; 120/160	18/24	18/24
Battiti per il riconoscimento successivo di VF	6/8; 9/12; 12/16; 18/24; 21/28; 24/32; 27/36; 30/40	12/16	12/16
Riconoscimento di FVT	OFF, via VF, via VT	OFF	OFF
Intervallo di FVT (frequenza) <sup>a</sup>	200; 210 ... 240 ... 600 ms	—	—
Riconoscimento di VT	On, OFF	OFF	OFF
Intervallo di VT (frequenza) <sup>a</sup>	280; 290 ... 360 ... 650 ms	360 ms	400 ms
Battiti per il riconoscimento iniziale di VT	12; 16 ... 52; 76; 100	16	16
Battiti per il riconoscimento successivo di VT	4; 8; 12 ... 52	12	12
Monitoraggio di VT	Monitoraggio, Off	Off	Off
Intervallo di monitoraggio di VT (frequenza) <sup>a</sup>	280; 290 ... 450 ... 650 ms	450 ms	450 ms
Battiti per attivare il monitoraggio di VT	16; 20 ... 56; 80; 110; 130	20	20
AF/Afl <sup>b</sup>	On, Off	Off	Off
Tachicardia sinusale <sup>b</sup>	On, Off	Off	Off
Altre SVT 1:1	On, Off	Off	Off
Limite V. di SVT <sup>a</sup>	240; 250 ... 320 ... 650 ms	320 ms	320 ms
Stabilità <sup>a</sup>	Off; 30; 40 ... 100 ms	Off	Off
Insorgenza	Off, On, Monitoraggio	Off	Off
Percentuale di insorgenza	72; 75; 78; 81; 84; 88; 91; 94; 97%	81%	81%



**Tabella 32.** Parametri di riconoscimento delle tachiaritmie (continua)

Parametro	Valori programmabili	Alla consegna	Reset
Tempo massimo di sospensione ...			
Tempo massimo di sospensione	Off <sup>a</sup> ; 0,5; 1 ... 5; 6; 7; 8 ... 20; 22; 24; 26; 28; 30 min	Off	Off
Tempo max. sospensione terapia	Appropriata alla zona <sup>a</sup> ; Passare a terapia per VF	Appropriata alla zona	Appropriata alla zona
Sensibilità RV <sup>c,d</sup>	0,15; 0,30 <sup>a</sup> ; 0,45; 0,60; 0,90; 1,20 mV	0,3 mV	0,3 mV
Sensibilità A. <sup>c,d</sup>	0,15; 0,30 <sup>a</sup> ; 0,45; 0,60; 0,90; 1,20; 1,50; 1,80; 2,10; 4,00 mV	0,3 mV	0,3 mV

<sup>a</sup> Gli intervalli misurati vengono arrotondati per difetto ad un multiplo di 10 ms (per esempio, 457 ms diventa 450 ms). Il dispositivo utilizza questo valore di intervallo arrotondato per difetto durante l'applicazione dei criteri programmati e nel calcolo delle medie.

<sup>b</sup> Al momento della consegna, i criteri per tachicardia sinusale e AF/Flutter A sono disattivati. Tuttavia, quando il riconoscimento di VT è impostato su On o Monitoraggio di VT è impostato su Monitoraggio, questi criteri vengono automaticamente impostati su On.

<sup>c</sup> Questa impostazione è attiva per tutte le attività di sensing in questa camera, sia per le operazioni di riconoscimento delle tachiaritmie che per quelle di stimolazione antibradicardia.

<sup>d</sup> Valutare attentamente la possibilità di aumentare la sensibilità alle EMI e l'oversensing prima di modificare la soglia di sensibilità selezionando il valore minimo (più sensibile), pari a 0,15, mV. Nelle prove sulla sensibilità alle interferenze modulate in presenza delle condizioni specificate dalla norma CENELEC EN 45502-2-2:2008, clausola 27.5.1, il dispositivo può rilevare interferenze se la soglia di sensibilità viene programmata su un valore minimo di 0,15 mV. Il dispositivo soddisfa i requisiti previsti dalla clausola 27.5.1 quando la soglia di sensibilità viene programmata su un valore pari o superiore a 0,3 mV.

## B.3 Parametri della terapia per tachiaritmia atriale

**Tabella 33.** Parametri della terapia per tachiaritmia atriale

Parametro	Valori programmabili	Alla consegna	Reset
<b>Stimolazione antitachicardica (ATP)</b>			
Stato Rx AT/AF	On, Off <sup>a</sup>	Off	Off
Tipo di terapia	50 Hz, Ramp, Burst+ Rx1: Ramp <sup>a</sup> Rx2: Burst+ <sup>a</sup> Rx3: 50 Hz <sup>a</sup>	—	—
Stato CV automatica per AT/AF	On, Off <sup>a</sup>	Off	Off
Stato Rx AT/AF rapida	On, Off <sup>a</sup>	Off	Off
Tipo di terapia	50 Hz, Ramp, Burst+ Rx1: Ramp <sup>a</sup> Rx2: Burst+ <sup>a</sup> Rx3: 50 Hz <sup>a</sup>	—	—

**Tabella 33.** Parametri della terapia per tachiaritmia atriale (continua)

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Stato CV automatica per AT/AF rapida	On, Off☞	Off	Off
Stato CV attivata dal paziente	On, Off☞	Off	Off
<b>CV automatica</b>			
Energia	0,4; 0,6 ... 1,8; 2; 3 ... 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 35☞ J	—	—
Percorso <sup>a</sup>	AX>B; B>AX☞	—	—
<b>CV condivisa</b>			
Intervallo minimo R-R <sup>b</sup>	400; 410 ... 500☞ ... 600 ms	500 ms	500 ms
Active Can/Coil SVC <sup>c</sup>	Can+SVC On☞; Can Off; SVC Off	Can+SVC On	Can+SVC On
<b>Limiti della CV automatica</b>			
Ora iniziale finestra erogazione	00:00; 01:00; 02:00; 03:00☞ ... 23:00	03:00	03:00
Durata finestra erogazione	1☞, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 h	1 h	1 h
Shock massimi al giorno	1☞, 2, 3, 4, 5, Nessun limite	1	1
<b>Durata episodio prima dell'erogazione Rx</b>			
Durata episodio prima della CV	0; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 min; 1; 2; 3; 4; 5; 6☞, 12, 24, 48, 72 h, 7 giorni	6 h	6 h
<b>Parametri Burst a 50 Hz</b>			
Durata Burst a 50 Hz	0,5; 1☞; 2; 3 s	—	—
N. sequenze	1; 2☞ ... 10	—	—
<b>Parametri Burst+</b>			
N. iniziale impulsi S1	1; 2 ... 15☞; 20; 25	—	—
Intervallo A-S1 (%AA)	28; 31; 34; 38; 41 ... 59; 63; 66 ... 84; 88; 91☞; 94; 97%	—	—
S1-S2 (%AA)	28; 31; 34; 38; 41 ... 59; 63; 66; 69 ... 84☞; 88; 91; 94; 97%; Off	—	—
Decremento S2-S3	0; 10☞; 20 ... 80 ms; Off	—	—
Decremento intervallo	0; 10☞ ... 40 ms	—	—
N. sequenze	1; 2 ... 6☞ ... 10	—	—
<b>Parametri Ramp</b>			
N. iniziale impulsi S1	1; 2 ... 6☞ ... 15; 20; 25	—	—
Intervallo A-S1 (%AA)	28; 31; 34; 38; 41 ... 59; 63; 66 ... 84; 88; 91☞; 94; 97%	—	—

**Tabella 33.** Parametri della terapia per tachiaritmia atriale (continua)

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Decremento intervallo	0; 10☞ ... 40 ms	—	—
N. sequenze	1; 2 ... 8☞; 9; 10	—	—
<b>Interrompere Rx atriale dopo (condiviso)</b>			
Rx/elettrocatt. sospetto...			
Disattivare ATP atriale se ciò accelera la frequenza V.?	Sì☞, No	Sì	Sì
Disattivare tutte le terapie atriali se la posizione dell'elettro- catetere atriale è sospetta? (Controllo posizione elettro- catetere atriale)	Sì☞, No	No	No
Durata per arresto	12; 24; 48☞; 72 h; Nessuno	48 h	48 h
<b>Durata episodio prima dell'erogazione Rx</b>			
Durata episodio prima dell'ATP	0; 1☞; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 min; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 12; 24 h	1 min	1 min
<b>ATP reattiva</b>			
Cambio ritmo	On☞, Off	On	On
Intervallo di tempo	Off, 2, 4, 7☞, 12, 24, 36, 48 h	Off	Off
<b>ATP A. condivisa</b>			
Intervallo minimo ATP A-A <sup>b</sup>	100; 110; 120; 130☞ ... 400 ms	150 ms	150 ms
Ampiezza della stimola- zione A.	1; 2 ... 6☞; 8 V	6 V	6 V
Durata dell'impulso di stimolazione A.	0,1; 0,2 ... 1,5☞ ms	1,5 ms	1,5 ms

**Tabella 33.** Parametri della terapia per tachiaritmia atriale (continua)

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Stimolazione VVI/VOO di backup	Off, On (Sempre), On (Attivazione automatica)Ⓢ	On (Attivazione automatica)	On (Attivazione automatica)
Freq. stim. VVI/VOO di backup	60; 70Ⓢ ... 120 min <sup>-1</sup>	70 min <sup>-1</sup>	70 min <sup>-1</sup>

<sup>a</sup> Se il parametro Active Can/Coil SVC è impostato su Can Off, l'elettrodo HVA (Can) non viene usato nel percorso di erogazione ad alta tensione. Se il parametro Active Can/Coil SVC è impostato su SVC Off, l'elettrodo HVX (SVC) non viene usato nel percorso di erogazione ad alta tensione.

<sup>b</sup> Gli intervalli misurati vengono arrotondati ad un multiplo di 10 ms (per esempio, 457 ms diventa 450 ms). Il dispositivo utilizza questo arrotondamento all'attivazione dei criteri programmati e nel calcolo degli intervalli medi.

<sup>c</sup> Il parametro Active Can/Coil SVC è attivo in tutte le terapie ad alta tensione automatiche, manuali e di emergenza. È inoltre attivo nelle induzioni T-Shock.

## B.4 Parametri della terapia per tachiaritmie ventricolari

**Tabella 34.** Parametri della terapia per tachiaritmie ventricolari

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
<b>Parametri della terapia per VF</b>			
Stato della terapia per VF	OnⓈ, Off	On	On
Energia <sup>a</sup>	0,4; 0,6 ... 1,8; 2; 3 ... 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 35Ⓢ J	35 J	35 J
Percorso <sup>b</sup>	AX>B; B>AX Rx1–Rx4: B>AXⓈ Rx5–Rx6: AX>BⓈ	B>AX	B>AX
ATP...	Off, Durante la caricaⓈ, Prima della carica	Durante la carica	Off
Eroga ATP se gli ultimi 8 R-R >=	200; 210 ... 240Ⓢ ... 300 ms	240 ms	240 ms
Tipo di terapia	BurstⓈ, Ramp, Ramp+	Burst	Burst
ChargeSaver...	OnⓈ, Off	On	On
Cambia quando il numero di ATP efficaci consecutive è uguale a	1Ⓢ; 2; 3; 4; 6; 8; 10	1	4
Funzione Smartmode	OnⓈ, Off	On	On
<b>Parametri terapia per VT/FVT</b>			
Stato della terapia per VT	On, OffⓈ	Off	Off
Stato della terapia per FVT	On, OffⓈ	Off	Off

**Tabella 34.** Parametri della terapia per tachiaritmie ventricolari (continua)

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Tipo di terapia	CV, Burst, Ramp, Ramp+	—	—
Energia	Rx1: Burst⚡ Rx2–Rx6: CV⚡ 0,4; 0,6 ... 1,8; 2; 3 ... 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 35 J Rx1–Rx2 VT: 20⚡ J Rx3–Rx6 VT: 35⚡ J Rx1–Rx6 FVT: 35⚡ J	—	—
Percorso <sup>b</sup>	AX>B; B>AX Rx1–Rx4: B>AX⚡ Rx5–Rx6: AX>B⚡	—	—
<b>Parametri della terapia Burst</b>			
Numero iniziale di impulsi	1; 2 ... 8⚡ ... 15	Rx1 VF: 8 Altro: —	—
Intervallo R-S1=(%RR)	50; 53; 56; 59; 63; 66 ... 84; 88⚡; 91; 94; 97%	Rx1 VF: 88% Altro: —	—
Decremento intervallo	0; 10⚡ ... 40 ms	Rx1 VF: 10 ms Altro: —	—
Numero di sequenze	1; 2 ... 10 Terapie per VT: 3⚡ Terapie per FVT: 1⚡	Rx1 VF: 1 Altro: —	—
Funzione Smartmode <sup>c</sup>	On, Off⚡	Rx1 VF: On Altro: —	—
<b>Parametri della terapia Ramp</b>			
Numero iniziale di impulsi	1; 2 ... 8⚡ ... 15	—	—
Intervallo R-S1=(%RR)	50; 53; 56; 59; 63; 66 ... 84; 88; 91⚡; 94; 97%	—	—
Decremento intervallo	0; 10⚡ ... 40 ms	—	—
Numero di sequenze	1; 2 ... 10 Terapie per VT: 3⚡ Terapie per FVT: 1⚡	—	—
Funzione Smartmode <sup>c</sup>	On, Off⚡	—	—
<b>Parametri della terapia Ramp+</b>			
Numero iniziale di impulsi	1; 2; 3⚡ ... 15	—	—
Intervallo R-S1=(%RR)	50; 53; 56; 59; 63; 66 ... 75⚡ ... 84; 88; 91; 94; 97%	—	—
S1S2 (Ramp+)=(%RR)	50; 53; 56; 59; 63; 66; 69⚡ ... 84; 88; 91; 94; 97%	—	—
S2SN (Ramp+)=(%RR)	50; 53; 56; 59; 63; 66⚡ ... 84; 88; 91; 94; 97%	—	—

**Tabella 34.** Parametri della terapia per tachiaritmie ventricolari (continua)

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Numero di sequenze	1; 2 ... 10 Terapie per VT: 3⚡ Terapie per FVT: 1⚡	—	—
Funzione Smartmode <sup>c</sup>	On, Off⚡	—	—
<b>Impostazioni condivise...</b>			
Intervallo V-V minimo ATP	150; 160 ... 200⚡ ... 400 ms	200 ms	200 ms
Ampiezza V.	1; 2 ... 6; 8⚡ V	8 V	8 V
Durata impulso V.	0,1; 0,2 ... 1,5⚡ ms	1,5 ms	1,5 ms
Blanking post stim. V.	170; 180 ... 240⚡ ... 450 ms	240 ms	240 ms
Stimolazione V. <sup>e</sup>	RV⚡, RV+LV, LV	RV	RV
Active Can/Coil SVC <sup>d</sup>	Can+SVC On⚡; Can Off; SVC Off	Can+SVC On	Can+SVC On
Terapie con aggressi- vità crescente	On, Off⚡	Off	Off
<b>Ricarica automatica condensatori...</b>			
Intervallo minimo di rica- rica automatica dei con- densatori	Automatico⚡; 1; 2 ... 6 mesi	Automatico	Automatico

<sup>a</sup> Per le terapie automatiche 3, 4, 5 o 6, l'energia deve essere pari ad almeno 10 J.

<sup>b</sup> Se il parametro Active Can/Coil SVC è impostato su Can Off, l'elettrodo HVA (Can) non viene usato nel percorso di erogazione ad alta tensione. Se il parametro Active Can/Coil SVC è impostato su SVC Off, l'elettrodo HVX (SVC) non viene usato nel percorso di erogazione ad alta tensione.

<sup>c</sup> La funzione Smartmode è disponibile solo per Rx1 – Rx4.

<sup>d</sup> Il parametro Active Can/Coil SVC è attivo in tutte le terapie ad alta tensione automatiche, manuali e di emergenza. È inoltre attivo nelle induzioni T-Shock.

<sup>e</sup> Selezionando RV+LV, la terapia di ATP viene erogata LV→RV con un ritardo di 2,5 ms.

## B.5 Parametri di stimolazione

**Tabella 35.** Frequenze e intervalli del modo

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Modo	DDDR; DDD⚡; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO	DDD	VVI
il Cambio Modo	On⚡, Off	On	Off
Frequenza minima	30; 35 ... 50⚡; 55; 60; 70; 75 ... 150 min <sup>-1</sup> (±2 min <sup>-1</sup> )	50 min <sup>-1</sup>	65 min <sup>-1</sup>
Frequenza massima di trascinamento	80; 85 ... 130⚡ ... 150 min <sup>-1</sup> (±2 min <sup>-1</sup> )	130 min <sup>-1</sup>	120 min <sup>-1</sup>
AV stimolato	30; 40 ... 130⚡ ... 350 ms (±4 ms)	130 ms	180 ms

**Tabella 35.** Frequenze e intervalli del modo (continua)

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
AV rilevato	30; 40 ... 100☞ ... 350 ms (+30; -2 ms)	100 ms	150 ms
PVARP	Auto☞; 150; 160 ... 500 ms (+5; -30 ms)	Auto	Auto
PVARP minimo	150; 160 ... 250☞ ... 500 ms (+5; -30 ms)	250 ms	250 ms
Periodo refrattario A.	150; 160 ... 310☞ ... 500 ms (+5; -30 ms)	310 ms	310 ms

**Tabella 36.** Parametri atriali

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Ampiezza atriale <sup>a</sup>	0,5; 0,75 ... 3,5☞ ... 5; 5,5; 6; 8 V	3,5 V	4 V
Durata dell'impulso atriale <sup>b</sup>	0,03; 0,06; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4☞ ... 1,5 ms	0,4 ms	0,4 ms
Sensibilità atriale <sup>c,d</sup>	0,15 mV ( $\pm 75\%$ ); 0,3☞; 0,45; 0,6 mV ( $\pm 50\%$ ); 0,9; 1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 4,0 mV ( $\pm 30\%$ )	0,3 mV	0,3 mV

<sup>a</sup>Se testata ai sensi della norma CENELEC EN 45502-2-1:2003, la tolleranza (+40%/-30% per tensioni inferiori a 2,0 e  $\pm 30\%$  per tensioni pari o superiori a 2,0) non viene applicata al valore programmato ma all'ampiezza A calcolata, che dipende dall'ampiezza programmata  $A_p$  e dalla durata programmata dell'impulso  $W_p$ :  $A = A_p \times [0,9 - (W_p \times 0,145 \text{ ms}^{-1})]$

<sup>b</sup>Se testata ai sensi della norma CENELEC EN 45502-2-1:2003, la durata misurata dell'impulso W dipende dal carico Rload (in Ohm) e dalla durata programmata dell'impulso  $W_p$  (in secondi):  $W \leq W_p + 34 \mu\text{s}$  e  $W \geq$  il valore minore di  $(W_p - 16 \mu\text{s})$  oppure  $(124 \mu\text{s} + (4 \mu\text{s} \times R\text{load}))$ .

<sup>c</sup>Questa impostazione è attiva in tutte le attività di sensing in questa camera, nelle operazioni di riconoscimento delle tachiaritmie e di stimolazione antibradicardica.

<sup>d</sup>Con un'onda sinusale<sup>2</sup> da 20 ms. Quando si utilizza la forma d'onda CENELEC, il valore di soglia nominale del sensing sarà 1,4 volte superiore rispetto al valore di soglia nominale del sensing dell'onda sinusale<sup>2</sup>.

**Tabella 37.** Parametri RV

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Ampiezza RV <sup>a</sup>	0,5; 0,75 ... 3,5☞ ... 5; 5,5; 6; 8 V	3,5 V	6 V
Durata dell'impulso RV <sup>b</sup>	0,03; 0,06; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4☞ ... 1,5 ms	0,4 ms	1,5 ms

**Tabella 37. Parametri RV (continua)**

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Sensibilità RV <sup>c,d</sup>	0,15 mV (±75%); 0,3 $\Phi$ ; 0,45; 0,6 mV (±50%); 0,9; 1,2 mV (±30%)	0,3 mV	0,3 mV
Polarità sensing RV	Bipolare; Punta/Coil	Bipolare	Bipolare

<sup>a</sup> Se testata ai sensi della norma CENELEC EN 45502-2-1:2003, la tolleranza (+40%/-30% per tensioni inferiori a 2,0 e ±30% per tensioni pari o superiori a 2,0) non viene applicata al valore programmato ma all'ampiezza A calcolata, che dipende dall'ampiezza programmata  $A_p$  e dalla durata programmata dell'impulso  $W_p$ :  $A = A_p \times [0,9 - (W_p \times 0,145 \text{ ms}^{-1})]$

<sup>b</sup> Se testata ai sensi della norma CENELEC EN 45502-2-1:2003, la durata misurata dell'impulso W dipende dal carico Rload (in Ohm) e dalla durata programmata dell'impulso  $W_p$  (in secondi):  $W \leq W_p + 34 \mu\text{s}$  e  $W \geq$  il valore minore di  $(W_p - 16 \mu\text{s})$  oppure  $(124 \mu\text{s} + (4 \mu\text{s} \times \text{Rload}))$ .

<sup>c</sup> Con un'onda sinusale<sup>2</sup> da 40 ms. Quando si utilizza la forma d'onda CENELEC, il valore di soglia nominale del sensing sarà 1,5 volte superiore rispetto al valore di soglia nominale del sensing dell'onda sinusale<sup>2</sup>.

<sup>d</sup> Questa impostazione è attiva in tutte le attività di sensing in questa camera, nelle operazioni di riconoscimento delle tachiaritmie e di stimolazione antibradicardica.

**Tabella 38. Parametri LV**

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Ampiezza LV <sup>a</sup>	0,5; 0,75 ... 4 $\Phi$ ... 5; 5,5; 6; 8 V	4 V	6 V
Durata dell'impulso LV <sup>b</sup>	0,03; 0,06; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 $\Phi$ ... 1,5 ms	0,4 ms	1,5 ms
Polarità stimol. LV	Punta LV/Coil RV, Anello LV/Coil RV, Punta LV/Anello LV	Punta LV/Coil RV	Punta LV/Coil RV
Stimolazione V.	RV; RV→LV; LV→RV $\Phi$ ; LV	LV → RV	RV
Ritardo di stim. V-V	0 $\Phi$ ; 10 ... 80 ms	0 ms	0 ms

<sup>a</sup> Se testata ai sensi della norma CENELEC EN 45502-2-1:2003, la tolleranza (+40%/-30% per tensioni inferiori a 2,0 e ±30% per tensioni pari o superiori a 2,0) non viene applicata al valore programmato ma all'ampiezza A calcolata, che dipende dall'ampiezza programmata  $A_p$  e dalla durata programmata dell'impulso  $W_p$ :  $A = A_p \times [0,9 - (W_p \times 0,145 \text{ ms}^{-1})]$

<sup>b</sup> Se testata ai sensi della norma CENELEC EN 45502-2-1:2003, la durata misurata dell'impulso W dipende dal carico Rload (in Ohm) e dalla durata programmata dell'impulso  $W_p$  (in secondi):  $W \leq W_p + 34 \mu\text{s}$  e  $W \geq$  il valore minore di  $(W_p - 16 \mu\text{s})$  oppure  $(124 \mu\text{s} + (4 \mu\text{s} \times \text{Rload}))$ .



**Tabella 39.** Parametri della gestione cattura LV

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Gestione cattura LV	Adattato $\diamond$ ; Monitoraggio; Off	Adattato	Off
Margine di sicurezza ampiezza LV	+0,5; +1,0; +1,5 $\diamond$ ; +2,0; +2,5 V	+1,5 V	+1,5 V
Ampiezza massima adattata LV <sup>a</sup>	0,5; 0,75 ... 5,0; 5,5; 6 $\diamond$ V	6,0 V	6,0 V

<sup>a</sup> Se testata ai sensi della norma CENELEC EN 45502-2-1:2003, la tolleranza (+40%/-30% per tensioni inferiori a 2,0 e  $\pm 30\%$  per tensioni pari o superiori a 2,0) non viene applicata al valore programmato ma all'ampiezza A calcolata, che dipende dall'ampiezza programmata  $A_p$  e dalla durata programmata dell'impulso  $W_p$ :  $A = A_p \times [0,9 - (W_p \times 0,145 \text{ ms}^{-1})]$

**Tabella 40.** Periodi di blanking

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Intervallo PVAB	10; 20 ... 150 $\diamond$ ... 300 ms	150 ms	150 ms
Metodo PVAB	Parziale $\diamond$ , Parziale+, Assoluto	Parziale	Parziale
Blanking A. post AP	150; 160 ... 200 $\diamond$ ... 250 ms	200 ms	240 ms
Blanking A. post AS	100 $\diamond$ ; 110 ... 170 ms	100 ms	100 ms
Blanking V. post VP	170; 180 ... 200 $\diamond$ ... 450 ms	200 ms	240 ms
Blanking V. post VS	120 $\diamond$ ; 130 ... 170 ms	120 ms	120 ms

**Tabella 41.** Parametri della stimolazione con risposta in frequenza

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Freq. max sens.	80; 85 ... 120 $\diamond$ ... 150 $\text{min}^{-1}$ ( $\pm 2 \text{ min}^{-1}$ )	120 $\text{min}^{-1}$	120 $\text{min}^{-1}$
Frequenza ADL	60; 65 ... 95 $\diamond$ ... 145 $\text{min}^{-1}$ ( $\pm 2 \text{ min}^{-1}$ )	95 $\text{min}^{-1}$	95 $\text{min}^{-1}$
Ottimizzazione profilo freq.	On $\diamond$ , Off	On	Off
Risposta ADL	1; 2; 3 $\diamond$ ; 4; 5	3	3
Risposta sotto sforzo	1; 2; 3 $\diamond$ ; 4; 5	3	3
Soglia di attività	Bassa; Medio-Bassa $\diamond$ ; Medio-Alta; Alta	Medio-Bassa	Medio-Bassa
Accelerazione dell'atti- vità	15; 30 $\diamond$ ; 60 s	30 s	30 s
Decelerazione di attività	Esercizio $\diamond$ ; 2,5; 5; 10 min	Esercizio	5 min
Regolazione ADL	5; 6 ... 40; 42 ... 80	18	18
Setpoint di frequenza massima	15; 16 ... 40; 42 ... 80; 85 ... 180	40	40

**Tabella 42.** Parametri dell'intervallo A-V variabile con la frequenza

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Intervallo A-V variabile con la frequenza	Off, On <sup>⚡</sup>	On	On
Frequenza iniziale	50; 55 ... 90 <sup>⚡</sup> ... 145 min <sup>-1</sup>	80 min <sup>-1</sup>	60 min <sup>-1</sup>
Frequenza di arresto	55; 60 ... 130 <sup>⚡</sup> ... 150 min <sup>-1</sup>	130 min <sup>-1</sup>	120 min <sup>-1</sup>
PAV minimo	30; 40 ... 100 <sup>⚡</sup> ... 200 ms	100 ms	140 ms
SAV minimo	30; 40 ... 70 <sup>⚡</sup> ... 200 ms	70 ms	110 ms

**Tabella 43.** Parametri della Risposta di rilevamento V.

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Risposta al sensing V.	On <sup>⚡</sup> , Off	On	Off
Frequenza massima	95; 100 ... 130 <sup>⚡</sup> ... 150 min <sup>-1</sup>	130 min <sup>-1</sup>	130 min <sup>-1</sup>

**Tabella 44.** Parametri di stabilizzazione della frequenza atriale

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Stabilizzazione della frequenza A.	On, Off <sup>⚡</sup>	Off	Off
Frequenza massima	80; 85 ... 100 <sup>⚡</sup> ... 150 min <sup>-1</sup>	100 min <sup>-1</sup>	100 min <sup>-1</sup>
Incremento percentuale dell'intervallo	12,5; 25 <sup>⚡</sup> ; 50%	25%	25%

**Tabella 45.** Parametri della stimolazione atriale preferenziale

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
A. Preference Pacing (Stimolazione A. preferenziale)	On, Off <sup>⚡</sup>	Off	Off
Frequenza massima	80; 85 ... 100 <sup>⚡</sup> ... 150 min <sup>-1</sup>	100 min <sup>-1</sup>	100 min <sup>-1</sup>
Diminuzione dell'intervallo	30; 40; 50 <sup>⚡</sup> ... 100; 150 ms	50 ms	50 ms
Battiti di ricerca	5; 10 <sup>⚡</sup> ... 25; 50	10	5

**Tabella 46.** Parametri della stimolazione overdrive dopo Cambio Modo (PMOP)

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Post Cambio Modo	On, Off	Off	Off
Frequenza overdrive	70; 75; 80 ... 120 min <sup>-1</sup>	80 min <sup>-1</sup>	65 min <sup>-1</sup>
Durata overdrive	0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 60; 90; 120 min	10 min	10 min

**Tabella 47.** Parametri di risposta all'AF condotta

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Risposta AF condotta	On, Off	On	Off
Livello di risposta	Bassa, Media, Alta	Media	Media
Frequenza massima	80; 85 ... 110 ... 130 min <sup>-1</sup>	110 min <sup>-1</sup>	110 min <sup>-1</sup>

**Tabella 48.** Parametri di stabilizzazione della frequenza ventricolare

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Stabilizzazione frequenza V.	On, Off	Off	Off
Frequenza massima	80; 85 ... 100 ... 120 min <sup>-1</sup>	100 min <sup>-1</sup>	120 min <sup>-1</sup>
Incremento intervallo	100; 110 ... 150 ... 400 ms	150 ms	150 ms

**Tabella 49.** Parametri della stimolazione post-shock VT/VF

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Stimolazione post-shock VT/VF	Off, On	Off	Off
Frequenza overdrive	70; 75; 80 ... 120 min <sup>-1</sup>	80 min <sup>-1</sup>	80 min <sup>-1</sup>
Durata overdrive	0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 60; 90; 120 min	0,5 min	0,5 min

**Tabella 50.** Parametri della stimolazione post-shock

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Ampiezza A. post-shock <sup>a</sup>	1; 2; 3; 4; 5; 6; 8 V	4 V	4 V
Durata impulso A. post-shock <sup>b</sup>	0,1; 0,2 ... 1,5 ms	1,5 ms	1,5 ms

**Tabella 50.** Parametri della stimolazione post-shock (continua)

Parametro	Valori programmabili	Alla consegna	Reset
Ampiezza V. post-shock <sup>a,c</sup>	1; 2 ... 6⚡; 8 V	6 V	6 V
Durata impulso V. post-shock <sup>b,c</sup>	0,1; 0,2 ... 1,5⚡ ms	1,5 ms	1,5 ms

<sup>a</sup> Se testata ai sensi della norma CENELEC EN 45502-2-1:2003, la tolleranza (+40%/-30% per tensioni inferiori a 2,0 e ±30% per tensioni pari o superiori a 2,0) non viene applicata al valore programmato ma all'ampiezza A calcolata, che dipende dall'ampiezza programmata  $A_p$  e dalla durata programmata dell'impulso  $W_p$ :  $A = A_p \times [0,9 - (W_p \times 0,145 \text{ ms}^{-1})]$

<sup>b</sup> Se testata ai sensi della norma CENELEC EN 45502-2-1:2003, la durata misurata dell'impulso W dipende dal carico Rload (in Ohm) e dalla durata programmata dell'impulso  $W_p$  (in secondi):  $W \leq W_p + 34 \mu\text{s}$  e  $W \geq$  il valore minore di  $(W_p - 16 \mu\text{s})$  oppure  $(124 \mu\text{s} + (4 \mu\text{s} \times \text{Rload}))$ .

<sup>c</sup> Attiva in tutte le camere ventricolari stimulate.

**Tabella 51.** Parametri sonno

Parametro	Valori programmabili	Alla consegna	Reset
Sonno	On, Off⚡	Off	Off
Frequenza sonno	30; 35 ... 50⚡; 55; 60; 70; 75 ... 100 min <sup>-1</sup>	50 min <sup>-1</sup>	50 min <sup>-1</sup>
Ora inizio sonno	00:00; 00:10 ... 22:00⚡ ... 23:50	22:00	22:00
Ora risveglio	00:00; 00:10 ... 07:00⚡ ... 23:50	07:00	07:00

**Tabella 52.** Parametri della stimolazione atriale non competitiva (NCAP)

Parametro	Valori programmabili	Alla consegna	Reset
Stimolazione atriale non competitiva	On⚡, Off	On	On
Intervallo NCAP	200; 250; 300⚡; 350; 400 ms	300 ms	300 ms

**Tabella 53.** Altre funzioni di stimolazione

Parametro	Valori programmabili	Alla consegna	Reset
Recupero del trascina-mento atriale	On, Off⚡	Off	Off
Intervento PMT	On, Off⚡	Off	Off
Risposta a PVC	On⚡, Off	On	On
Stimolazione ventricolare di sicurezza <sup>a</sup>	On⚡, Off	On	On

<sup>a</sup> Erogata come stimolazione LV quando la stimolazione LV è programmata in modo permanente. Altrimenti, erogata come stimolazione RV.

## B.6 Parametri della funzione Medtronic CareAlert

**Tabella 54.** Parametri della funzione Medtronic CareAlert

Parametro	Valori programmabili	Alla consegna	Reset
<b>Allarmi trattamento clinico</b>			
Sistema di monitoraggio domestico del paziente	Sì, No <sup>⚡</sup>	No	No
<b>Impostazioni fluido OptiVol ...</b>			
Segnale acustico dispositivo			
Urgenza dell'allarme OptiVol <sup>a</sup>	Alta, Bassa <sup>⚡</sup>	—	—
Attivazione allarme OptiVol	On; Sospensione per 3 giorni; Sospensione per 5 giorni; Sospensione per 7 giorni; Sospensione per 14 giorni; Off (solo Osservazione) <sup>⚡</sup>	Off (solo Osservazione)	Off (solo Osservazione)
Sistema di monitoraggio domestico del paziente			
Attivazione allarme OptiVol <sup>b</sup>	Off <sup>⚡</sup> , On	Off	Off
Condivise (segnale acustico dispositivo e monitoraggio domestico del paziente)			
Soglia OptiVol <sup>c</sup>	30; 40; 50; 60 <sup>⚡</sup> ... 180	60	60
<b>Orario di attivazione allarme (OptiVol) ...<sup>a</sup></b>	00:00; 00:10 ... 10:10 <sup>⚡</sup> ... 23:50	10:10	10:10
<b>Impostazioni del burden di AT/AF e della frequenza ...</b>			
Segnale acustico dispositivo			
Urgenza dell'allarme <sup>a</sup>	Alta <sup>⚡</sup> , Bassa	—	—
Attivazione allarme burden quotidiano di AT/AF	Off (solo osservazione) <sup>⚡</sup> , On	Off (solo Osservazione)	Off (solo Osservazione)
Attivazione allarme frequenza V. media durante l'AT/AF	Off (solo osservazione) <sup>⚡</sup> , On	Off (solo Osservazione)	Off (solo Osservazione)
Sistema di monitoraggio domestico del paziente			
Attivazione allarme burden quotidiano di AT/AF <sup>b</sup>	Off <sup>⚡</sup> , On	Off	Off
Attivazione allarme frequenza V. media durante l'AT/AF <sup>b</sup>	Off <sup>⚡</sup> , On	Off	Off

**Tabella 54.** Parametri della funzione Medtronic CareAlert (continua)

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Condivise (segnale acustico dispositivo e monitoraggio domestico del paziente)			
Burden quotidiano di AT/AF	0,5; 1; 2; 6⬢, 12, 24 ore al giorno	6 ore al giorno	6 ore al giorno
Frequenza V. media durante l'AT/AF	90; 100⬢ ... 150 min <sup>-1</sup>	100 min <sup>-1</sup>	100 min <sup>-1</sup>
Burden quotidiano per la frequenza V. media	0,5; 1; 2; 6⬢, 12, 24 ore al giorno	6 ore al giorno	6 ore al giorno
<b>Numero di shock erogati in un episodio ...<sup>d</sup></b>			
Segnale acustico dispositivo			
Attivazione allarme - Urgenza	Off⬢, On-Bassa, On-Alta	Off	Off
Sistema di monitoraggio domestico del paziente			
Attivazione allarme <sup>b</sup>	Off⬢, On	Off	Off
Condivise (segnale acustico dispositivo e monitoraggio domestico del paziente)			
Soglia del numero di shock <sup>a</sup>	1⬢; 2; 3; 4; 5; 6	1	1
<b>Esaurimento di tutte le terapie per una zona durante un episodio</b>			
Segnale acustico dispositivo			
Attivazione allarme - Urgenza	Off⬢, On-Bassa, On-Alta	Off	Off
Sistema di monitoraggio domestico del paziente			
Attivazione allarme <sup>b</sup>	Off⬢, On	Off	Off
<b>Allarmi integrità elettrocat./disp.</b>			
Sistema di monitoraggio domestico del paziente	Sì, No⬢	No	No
<b>Impedenza elettrocatereteri fuori range ...</b>			
Segnale acustico dispositivo			
Urgenza dell'allarme <sup>a</sup>	Bassa, Alta⬢	Alta	—
Attivazione impedenza di stimolazione A.	On⬢, Off (solo Osservazione)	On	Off (solo Osservazione)
Attivazione impedenza di stimolazione RV	On⬢, Off (solo Osservazione)	On	Off (solo Osservazione)

**Tabella 54.** Parametri della funzione Medtronic CareAlert (continua)

Parametro	Valori programmabili	Alla consegna	Reset
Attivazione impedenza di stimolazione LV	On $\oplus$ , Off (solo Osservazione)	On	Off (solo Osservazione)
Attivazione impedenza di defibrillazione RV	On $\oplus$ , Off (solo Osservazione)	On	Off (solo Osservazione)
Attivazione impedenza di defibrillazione SVC <sup>e</sup>	On $\oplus$ , Off (solo Osservazione)	On	Off (solo Osservazione)
Sistema di monitoraggio domestico del paziente			
Attivazione impedenza di stimolazione A. <sup>b</sup>	Off, On $\oplus$	On	Off
Attivazione impedenza di stimolazione RV <sup>b</sup>	Off, On $\oplus$	On	Off
Attivazione impedenza di stimolazione LV <sup>b</sup>	Off, On $\oplus$	On	Off
Attivazione impedenza di defibrillazione RV <sup>b</sup>	Off, On $\oplus$	On	Off
Attivazione impedenza di defibrillazione SVC <sup>b,e</sup>	Off, On $\oplus$	On	Off
Condivise (segnale acustico dispositivo e monitoraggio domestico del paziente)			
Impedenza di stimolazione A. inferiore a	200 $\oplus$ ; 300; 400; 500 $\Omega$	200 $\Omega$	200 $\Omega$
Impedenza di stimolazione A. superiore a	1000; 1500; 2000; 3000 $\oplus$ $\Omega$	3000 $\Omega$	3000 $\Omega$
Impedenza di stimolazione RV inferiore a	200 $\oplus$ ; 300; 400; 500 $\Omega$	200 $\Omega$	200 $\Omega$
Impedenza di stimolazione RV superiore a	1000; 1500; 2000; 3000 $\oplus$ $\Omega$	3000 $\Omega$	3000 $\Omega$
Impedenza di stimolazione LV inferiore a	200 $\oplus$ ; 300; 400; 500 $\Omega$	200 $\Omega$	200 $\Omega$
Impedenza di stimolazione LV superiore a	1000; 1500; 2000; 3000 $\oplus$ $\Omega$	3000 $\Omega$	3000 $\Omega$
Impedenza di defibrillazione RV inferiore a	20 $\oplus$ ; 30; 40; 50 $\Omega$	20 $\Omega$	20 $\Omega$
Impedenza di defibrillazione RV superiore a	100; 130; 160; 200 $\oplus$ $\Omega$	200 $\Omega$	200 $\Omega$

**Tabella 54.** Parametri della funzione Medtronic CareAlert (continua)

Parametro	Valori programmabili	Alla conse- gna	Reset
Impedenza di defibrillazione SVC inferiore a	20 <sup>⊕</sup> ; 30; 40; 50 Ω	20 Ω	20 Ω
Impedenza di defibrillazione SVC superiore a	100; 130; 160; 200 <sup>⊕</sup> Ω	200 Ω	200 Ω
<b>RRT Tensione di batteria insufficiente ...</b>			
Segnale acustico dispositivo			
Attivazione allarme - Urgenza	Off, On-Bassa, On-Alta <sup>⊕</sup>	On-Alta	Off
Sistema di monitoraggio dome- stico del paziente			
Attivazione allarme <sup>b</sup>	Off, On <sup>⊕</sup>	On	Off
<b>EOS tempo di carica eccessivo ...</b>			
Segnale acustico dispositivo			
Attivazione allarme - Urgenza	Off, On-Bassa, On-Alta <sup>⊕</sup>	On-Alta	Off
Sistema di monitoraggio dome- stico del paziente			
Attivazione allarme <sup>b</sup>	Off, On <sup>⊕</sup>	On	Off
<b>Riconoscimento di VF Off, 3+ VF o 3+ FVT Rx Off.</b>			
Segnale acustico dispositivo			
Attivazione allarme	Off; On-Alta <sup>⊕</sup>	On-Alta	On-Alta
Sistema di monitoraggio dome- stico del paziente			
Attivazione allarme <sup>b</sup>	Off, On <sup>⊕</sup>	On	Off
<b>Orario di attivazione allarme (tutti gli altri) ...<sup>a</sup></b>	00:00; 00:10 ... 08:00 <sup>⊕</sup> ... 23:50	08:00	08:00

<sup>a</sup>Questo parametro viene visualizzato soltanto se è stato attivato un allarme associato.

<sup>b</sup>Gli allarmi del sistema di monitoraggio domestico del paziente sono programmabili e trasmissibili ad un sistema di monitoraggio domestico solo quando quest'ultimo è programmato su Sì.

<sup>c</sup>Riducendo la soglia OptiVol, il dispositivo diventerà maggiormente sensibile alle variazioni dello stato del fluido intratoracico del paziente. Un aumento della Soglia OptiVol potrebbe ritardare o impedire l'analisi da parte del dispositivo di variazioni significative nello stato del fluido intratoracico del paziente.

<sup>d</sup>Tenere presente che le terapie per VF, VT e FVT possono essere erogate durante un unico episodio (dal riconoscimento iniziale fino alla conclusione dell'episodio).

<sup>e</sup>Se non è stato impiantato alcun elettrocattetero SVC, l'allarme non si attiverà.



## B.7 Parametri per la raccolta dei dati

**Tabella 55.** Parametri per la raccolta dei dati

Parametro	Valori programmabili	Alla consegna	Reset
Sorgente LECG (Leadless ECG) <sup>a</sup>	Cassa / SVC <sup>b,c</sup> ; Coil RV / Anello A	Cassa / SVC	Cassa / SVC
Range LECG (Leadless ECG)	±1; ±2 <sup>b</sup> ; ±4; ±8; ±12; ±16; ±32 mV	±2 mV	±8 mV
Sorgente dell'EGM 1	Punta RV / Coil RV; Punta RV / Anello RV; Punta A / Anello RV; Punta A / Anello A <sup>b</sup> ; Anello A / Anello RV; Anello A / Coil RV	Punta A / Anello A	Punta A / Anello A
Range dell'EGM 1	±1; ±2; ±4; ±8 <sup>b</sup> ; ±12; ±16; ±32 mV	±8 mV	±8 mV
Sorgente dell'EGM 2	Cassa / Coil RV; Cassa / Anello RV; Punta RV / Coil RV; Punta RV / Anello RV <sup>b</sup> ; Cassa / SVC <sup>b,c</sup> ; Coil RV / SVC <sup>b</sup> ; Punta LV / SVC <sup>b</sup> ; Cassa / Punta LV; Punta RV / Punta LV	Punta RV / Anello RV	Punta RV / Anello RV
Range dell'EGM 2	±1; ±2; ±4; ±8 <sup>b</sup> ; ±12; ±16; ±32 mV	±8 mV	±8 mV
Sorgente dell'EGM 3	Cassa / Coil RV; Punta RV / Coil RV; Punta RV / Anello RV; Punta LV / Anello LV <sup>d</sup> ; Punta LV / Anello RV; Punta LV / Coil RV <sup>b</sup>	Punta LV / Coil RV	Punta LV / Coil RV
Range dell'EGM 3	±1; ±2; ±4; ±8 <sup>b</sup> ; ±12; ±16; ±32 mV	±8 mV	±2 mV
Monitorato	EGM 1 e EGM 2 <sup>b</sup> ; EGM 1 e EGM 3; EGM 1 e LECG; EGM 2 e EGM 3; EGM 2 e LECG; EGM 3 e LECG	EGM1 e EGM2	EGM1 e EGM2
EGM pre-aritmia	Off <sup>b</sup> , On - 1 mese, On - 3 mesi, On continuo	Off	Off
<b>Episodi di sensing V.</b>			
VS consecutive per il riconoscimento >=	5; 8; 10 <sup>b</sup> ; 15; 20; 30; 40; 50; 100; 150; 200	10	10
VP consecutive per terminare >=	2; 3 <sup>b</sup> ; 5; 10	3	3
Data/ora dispositivo <sup>e</sup>	(immettere ora e data)	—	—
Telemetria Holter	Off <sup>b</sup> ; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 24; 36; 46 h	Off	Off

<sup>a</sup>Questo canale dell'EGM visualizza i segnali di campo lontano. Per visualizzare un segnale ECG di superficie approssimato, selezionare la sorgente EGM Cassa / SVC.

<sup>b</sup>In questa configurazione, è necessario collegare un elettrocatetere alla porta SVC.

<sup>c</sup>Selezionando Cassa/SVC, il range dell'EGM viene automaticamente impostato su ±2 mV. Il range dell'EGM viene impostato automaticamente su ±8 mV per tutte le altre opzioni della sorgente dell'EGM.

<sup>d</sup>Questa configurazione richiede un elettrocattetere bipolare LV.

<sup>e</sup>L'ora e la data memorizzate nelle registrazioni degli episodi così come altri dati dipendono dall'orologio Data/Ora del dispositivo.

## B.8 Parametri dei test di sistema

**Tabella 56.** Parametri per i test di sistema

Parametro	Valori selezionabili
<b>Parametri per il test della soglia di stimolazione</b>	
Tipo di test	Ampiezza, Durata impulso
Camera	LV, RV, Atrio
Decremento dopo	2; 3 ... 15 impulsi
Modo <sup>a</sup> (test di RV o di LV)	VVI; VOO; DDI; DDD; DOO
Modo <sup>a</sup> (test Atrio)	AAI; AOO; DDI; DDD; DOO
Frequenza minima <sup>b</sup>	30; 35 ... 60; 70; 75 ... 150 min <sup>-1</sup>
Ampiezza RV	0,25; 0,5 ... 5; 5,5; 6; 8 V
Durata impulso RV	0,03; 0,06; 0,1; 0,2 ... 1,5 ms
Ampiezza LV	0,25; 0,5 ... 5; 5,5; 6; 8 V
Durata impulso LV	0,03; 0,06; 0,1; 0,2 ... 1,5 ms
Ampiezza A.	0,25; 0,5 ... 5; 5,5; 6; 8 V
Durata impulso A.	0,03; 0,06; 0,1; 0,2 ... 1,5 ms
Ritardo AV	30; 40 ... 350 ms
Periodo di blanking post-stimolazione V.	150; 160 ... 450 ms
Blanking post-stimolazione A.	150; 160 ... 250 ms
PVARP <sup>c</sup>	150; 160 ... 500 ms
Polarità di stimolazione (LV)	Punta LV/Coil RV, Anello LV/Coil RV, Punta LV/Anello LV
<b>Parametri del test di sensing</b>	
Modo <sup>a</sup>	AAI, DDD, DDI, VVI, ODO
Ritardo AV	30; 40 ... 350 ms
Frequenza minima <sup>b</sup>	30; 35 ... 60; 70; 75 ... 120 min <sup>-1</sup>

<sup>a</sup>I valori selezionabili per questo parametro dipendono dal modo di stimolazione programmato.

<sup>b</sup>Quando si esegue il test in modo DDD, la Frequenza minima deve essere inferiore alla Frequenza massima di trascinamento programmata.

<sup>c</sup>I valori selezionabili per questo parametro dipendono dai valori PVAB programmati.

## B.9 Parametri SEF

**Tabella 57.** Parametri di induzione con T-Shock

Parametro	Valori selezionabili
Camera <sup>a</sup>	RV $\oplus$ , RV+LV, LV
Ripristino all'erogazione	Attivato $\oplus$ , Disattivato
Attivazione	Attivato, Disattivato $\oplus$
N. S1	2; 3; 4; 5 $\oplus$ ; 6; 7; 8
S1S1	300; 310 ... 400 $\oplus$ ... 2000 ms
Ritardo	20; 30 ... 300 $\oplus$ ... 600 ms
Energia	0,4; 0,6; 0,8; 1,0 $\oplus$ ... 1,8; 2; 3; 4 ... 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 35 J
Forma d'onda	Monofasica $\oplus$ , Bifasica
Percorso <sup>b</sup>	AX>B; B>AX $\oplus$

<sup>a</sup>Se la camera selezionata è RV+LV, il ritardo viene impostato su 2,5 ms e la stimolazione LV viene erogata per prima.

<sup>b</sup>Se il parametro Active Can/Coil SVC è impostato su Can Off, l'elettrodo HVA (Can) non viene usato nel percorso di erogazione ad alta tensione. Se il parametro Active Can/Coil SVC è impostato su SVC Off, l'elettrodo HVX (SVC) non viene usato nel percorso di erogazione ad alta tensione.

**Tabella 58.** Parametri di induzione Burst a 50 Hz

Parametro	Valori selezionabili
Ripristino al Burst	Attivato $\oplus$ , Disattivato
Camera	Atrio, RV, LV
Ampiezza	1; 2; 3; 4 $\oplus$ ; 5; 6; 8 V
Durata dell'impulso	0,10; 0,20 ... 0,50 $\oplus$ ... 1,50 ms
Backup VOO (per Burst atriale a 50 Hz) <sup>a</sup>	On, Off $\oplus$
Frequenza di stimolazione	60; 70 $\oplus$ ... 120 min <sup>-1</sup>
Ampiezza V. <sup>b,c</sup>	0,50; 0,75 ... 5,00; 5,50; 6,00; 8,00 V
Durata impulso V. <sup>b</sup>	0,10; 0,20 ... 1,50 ms

<sup>a</sup>Impostando la stimolazione V su RV, RV→LV o su LV→RV, nella camera RV verrà erogata la stimolazione V di backup. Se la stimolazione V viene impostata su LV, la stimolazione V di backup verrà erogata nella camera LV.

<sup>b</sup>Il valore predefinito di questo parametro viene stabilito in base alle impostazioni permanenti programmate per la stimolazione antibradicardica.

<sup>c</sup>Se l'ampiezza della stimolazione atriale è superiore a 6 V, può verificarsi crosstalk.

**Tabella 59.** Parametri di induzione Burst costante

Parametro	Valori selezionabili
Ripristino al Burst	Attivato $\oplus$ , Disattivato
Camera <sup>a</sup>	Atrio, RV, RV+LV, LV
Intervallo	100; 110 ... 600 $\oplus$ ms
Ampiezza <sup>b</sup>	1; 2; 3; 4 $\oplus$ ; 5; 6; 8 V

**Tabella 59.** Parametri di induzione Burst costante (continua)

Parametro	Valori selezionabili
Durata dell'impulso <sup>b</sup>	0,10; 0,20 ... 0,50☎ ... 1,50 ms
Backup VVI (per il Burst costante atriale) <sup>c</sup>	On, Off☎
Frequenza di stimolazione	60; 70☎ ... 120 min <sup>-1</sup>
Ampiezza V. <sup>d,e</sup>	0,50; 0,75 ... 5,00; 5,50; 6,00; 8,00 V
Durata impulso V. <sup>d</sup>	0,10; 0,20 ... 1,50 ms

<sup>a</sup> Se la camera selezionata è RV+LV, il ritardo viene impostato su 2,5 ms e la stimolazione LV viene erogata per prima.

<sup>b</sup> Attiva in tutte le camere ventricolari stimulate.

<sup>c</sup> Impostando la stimolazione V su RV, RV→LV o su LV→RV, nella camera RV verrà erogata la stimolazione V di backup. Se la stimolazione V viene impostata su LV, la stimolazione V di backup verrà erogata nella camera LV.

<sup>d</sup> Il valore predefinito di questo parametro viene stabilito in base alle impostazioni permanenti programmate per la stimolazione antibradicardica.

<sup>e</sup> Se l'ampiezza della stimolazione atriale è superiore a 6 V, può verificarsi crosstalk.

**Tabella 60.** Parametri di induzione PES

Parametro	Valori selezionabili
Ripristino all'erogazione	Attivato☎, Disattivato
Camera <sup>a</sup>	Atrio, RV, RV+LV, LV
N. S1	1; 2 ... 8☎ ... 15
S1S1	100; 110 ... 600☎ ... 2000 ms
S1S2	Off; 100; 110 ... 400☎ ... 600 ms
S2S3	Off☎; 100; 110 ... 400; 410 ... 600 ms <sup>b</sup>
S3S4	Off☎; 100; 110 ... 400; 410 ... 600 ms <sup>b</sup>
Ampiezza <sup>c</sup>	1; 2; 3; 4☎; 5; 6; 8 V
Durata dell'impulso <sup>c</sup>	0,10; 0,20 ... 0,50☎ ... 1,50 ms
Backup VVI (per PES atriale) <sup>d</sup>	On, Off☎
Frequenza di stimolazione	60; 70☎ ... 120 min <sup>-1</sup>
Ampiezza V. <sup>e,f</sup>	0,50; 0,75 ... 5,00; 5,50; 6,00; 8,00 V
Durata impulso V. <sup>e</sup>	0,10; 0,20 ... 1,50 ms

<sup>a</sup> Se la camera selezionata è RV+LV, il ritardo viene impostato su 2,5 ms e la stimolazione LV viene erogata per prima.

<sup>b</sup> Il valore predefinito quando il parametro è attivo è pari a 400 ms.

<sup>c</sup> Attiva in tutte le camere ventricolari stimulate.

<sup>d</sup> Impostando la stimolazione V su RV, RV→LV o su LV→RV, nella camera RV verrà erogata la stimolazione V di backup. Se la stimolazione V viene impostata su LV, la stimolazione V di backup verrà erogata nella camera LV.

<sup>e</sup> Il valore predefinito di questo parametro viene stabilito in base alle impostazioni permanenti programmate per la stimolazione antibradicardica.

<sup>f</sup> Se l'ampiezza della stimolazione atriale è superiore a 6 V, può verificarsi crosstalk.

**Tabella 61.** Parametri di defibrillazione manuale

Parametro	Valori selezionabili
Energia	0,4; 0,6 ... 1,8; 2; 3 ... 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 35 J
Percorso <sup>a</sup>	AX>B, B>AX

<sup>a</sup> Se il parametro Active Can/Coil SVC è impostato su Can Off, l'elettrodo HVA (Cassa) non viene usato nel percorso di erogazione ad alta tensione. Se il parametro Active Can/Coil SVC è impostato su SVC Off, l'elettrodo HVX (SVC) non viene usato nel percorso di erogazione ad alta tensione.

**Tabella 62.** Parametri di cardioversione manuale

Parametro	Valori selezionabili
Camera	Atrio; RV
Energia	0,4; 0,6 ... 1,8; 2; 3 ... 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 35 J
Percorso <sup>a</sup>	AX>B, B>AX
R-R minimo (solo CV atriale)	400; 410 ... 500 ... 600 ms

<sup>a</sup> Se il parametro Active Can/Coil SVC è impostato su Can Off, l'elettrodo HVA (Cassa) non viene usato nel percorso di erogazione ad alta tensione. Se il parametro Active Can/Coil SVC è impostato su SVC Off, l'elettrodo HVX (SVC) non viene usato nel percorso di erogazione ad alta tensione.

**Tabella 63.** Parametri condivisi per le terapie ATP manuali

Parametro	Valori selezionabili
Intervallo minimo (ATP atriale)	100; 110; 120; 130 ... 400 ms
Intervallo minimo (ATP ventricolare)	150; 160 ... 200 ... 400 ms
Ampiezza <sup>a</sup>	1; 2 ... 6; 8 V
Durata dell'impulso <sup>a</sup>	0,10; 0,20 ... 1,50 ms
Backup VVI (per la terapia ATP atriale) <sup>b</sup>	On, Off
Frequenza di stimolazione	60; 70 ... 120 min <sup>-1</sup>
Ampiezza V. <sup>c,d</sup>	0,50; 0,75 ... 5,00; 5,50; 6,00; 8,00 V
Durata impulso V. <sup>c</sup>	0,10; 0,20 ... 1,50 ms

<sup>a</sup> Attiva in tutte le camere ventricolari stimulate.

<sup>b</sup> Impostando Stim. V. su RV, RV→LV o LV→RV, la stimolazione ventricolare di backup verrà erogata nella camera RV. Se Stim. V. viene invece impostata su LV, la stimolazione ventricolare di backup viene erogata nella camera LV.

<sup>c</sup> Il valore predefinito di questo parametro viene stabilito in base alle impostazioni permanenti programmate per la stimolazione antibradicardia.

<sup>d</sup> Se l'ampiezza della stimolazione atriale è superiore a 6 V, può verificarsi un fenomeno di crosstalk.

**Tabella 64.** Parametri della terapia Ramp manuale

Parametro	Valori selezionabili
Camera <sup>a</sup>	Atrio, RV, RV+LV, LV
Parametri della terapia di stimolazione ventricolare Ramp	
N. impulsi	1; 2 ... 6 ... 15
% Intervalli RR	50; 53; 56; 59; 63; 66 ... 84; 88; 91; 94; 97%
Dec./Impulso	0; 10; 20; 30; 40 ms
Parametri della terapia Ramp atriale	
N. impulsi	1; 2 ... 6 ... 15; 20; 30 ... 100
% Intervalli AA	28; 31; 34; 38; 41 ... 59; 63; 66 ... 84; 88; 91; 94; 97%
Dec./Impulso	0; 10; 20; 30; 40 ms

<sup>a</sup>Se la camera selezionata è RV+LV, il ritardo viene impostato su 2,5 ms e la stimolazione LV viene erogata per prima.

**Tabella 65.** Parametri della terapia Burst manuale

Parametro	Valori selezionabili
Camera <sup>a</sup>	RV, RV+LV, LV
N. impulsi	1; 2 ... 8 ... 15
% Intervalli RR	50; 53; 56; 59; 63; 66 ... 84; 88; 91; 94; 97%

<sup>a</sup>Se la camera selezionata è RV+LV, il ritardo viene impostato su 2,5 ms e la stimolazione LV viene erogata per prima.

**Tabella 66.** Parametri della terapia Ramp+ manuale

Parametro	Valori selezionabili
Camera <sup>a</sup>	RV, RV+LV, LV
N. impulsi	1; 2; 3 ... 15
R-S1 (%RR)	50; 53; 56; 59; 63; 66 ... 75 ... 84; 88; 91; 94; 97%
S1-S2 (%RR)	50; 53; 56; 59; 63; 66; 69 ... 84; 88; 91; 94; 97%
S2-SN (%RR)	50; 53; 56; 59; 63; 66 ... 84; 88; 91; 94; 97%

<sup>a</sup>Se la camera selezionata è RV+LV, il ritardo viene impostato su 2,5 ms e la stimolazione LV viene erogata per prima.

**Tabella 67.** Parametri terapia Burst+ manuale

Parametro	Valori selezionabili
N. impulsi S1	1; 2 ... 6 ... 15; 20; 30 ... 100
% Intervalli AA	28; 31; 34; 38; 41 ... 59; 63; 66 ... 84; 88; 91; 94; 97%

**Tabella 67.** Parametri terapia Burst+ manuale (continua)

Parametro	Valori selezionabili
S1S2	Off, 28, 31, 34, 38, 41 ... 59, 63, 66 ... 84 <sup>⚡</sup> , 88, 91, 94, 97%
Dec S2S3	Off, 0, 10, 20 <sup>⚡</sup> ... 80 ms

## B.10 Parametri non programmabili

**Tabella 68.** Parametri non programmabili

Parametro	Valore
Soglia di definizione di eventi prematuri per il conteggio delle PVC e delle serie di PVC	69%
<b>Periodi di blanking fissi</b>	
Blanking atriale dopo un evento ventricolare stimolato <sup>a</sup>	30 ms
Blanking atriale dopo una terapia ad alta tensione	520 ms
Blanking ventricolare dopo un evento atriale stimolato	30 ms <sup>b</sup>
Blanking ventricolare dopo una terapia ad alta tensione	520 ms
<b>Parametri fissi di stimolazione antibradicardica</b>	
Intervalli di VSP <sup>c</sup>	110 ms
Valore PVARP applicato dalla Risposta a PVC e dall'Intervento PMT <sup>d</sup>	400 ms
Valore NCAP applicato dalla Risposta a PVC e dall'Intervento PMT <sup>e</sup>	400 ms
<b>Parametri fissi della terapia ad alta tensione</b>	
Periodo massimo di carica	30 s
Forma d'onda <sup>f</sup>	Bifasica
Tilt	50%
Periodo refrattario dopo un evento ventricolare rilevato durante la sincronizzazione della cardioversione	200 ms
Periodo refrattario dopo un evento stimolato durante la carica o la sincronizzazione <sup>g</sup>	400 ms
Periodo refrattario dopo l'inizio della carica <sup>g</sup>	400 ms
Periodo atriale vulnerabile	250 ms
Intervallo di fuga dopo una terapia ad alta tensione	1200 ms
Sospensione del riconoscimento di VT dopo una terapia di defibrillazione	17 eventi ventricolari
<b>Parametri fissi della terapia ATP atriale automatica</b>	
Ampiezza della stimolazione di backup VVI/VOO	6 V
Durata impulso stimolazione di backup VVI/VOO	1,5 ms

**Tabella 68.** Parametri non programmabili (continua)

Parametro	Valore
<b>Parametri fissi per gli studi EF</b>	
Ampiezza della stimolazione con T-Shock <sup>h</sup>	8 V
Durata dell'impulso di stimolazione T-Shock <sup>h</sup>	1,5 ms
Intervallo della stimolazione Burst a 50 Hz	20 ms
<b>Parametri hardware</b>	
Limite della frequenza di stimolazione <sup>i</sup> (funzione di protezione)	171 min <sup>-1</sup>
Impedenza d'ingresso	minimo 150 kΩ
<b>Momento consigliato per la sostituzione (RRT)</b>	
Soglia tensione della batteria	≤ 2,63 V

<sup>a</sup> Il periodo di tempo che intercorre tra gli impulsi di stimolazione biventricolari può influire sulla durata del periodo di blanking atriale.

<sup>b</sup> 35 ms quando l'ampiezza della stimolazione ventricolare viene programmata su 8 V.

<sup>c</sup> L'intervallo VSP può essere automaticamente abbreviato dal dispositivo da 110 ms a 70 ms in presenza di frequenze di stimolazione più elevate (laddove necessario) per sostenere il riconoscimento delle tachicardie ventricolari.

<sup>d</sup> Il PVARP viene prolungato a 400 ms solo se il PVARP corrente è inferiore a 400 ms.

<sup>e</sup> Il prolungamento della NCAP è attivo soltanto se la NCAP è attivata.

<sup>f</sup> La forma d'onda per un'induzione T-Shock può essere programmata come bifasica o monofasica.

<sup>g</sup> Non influisce sulla classificazione degli eventi durante la carica.

<sup>h</sup> Attiva in tutte le camere ventricolari per cui è stata programmata la stimolazione da parte del dispositivo.

<sup>i</sup> Non attivo durante le terapie ATP o la stimolazione ventricolare di sicurezza.



# Glossario

**Active Can** – Opzione per la selezione della cassa del dispositivo come elettrodo attivo per l'erogazione delle terapie di defibrillazione e cardioversione.

**annotazioni Decision Channel** – annotazioni su EGM salvati e trasmessi tramite telemetria che documentano le procedure di riconoscimento delle tachiaritmie.

**attività quotidiane (ADL)** – livello di movimento del paziente durante le attività quotidiane essenziali (p. es. il vestirsi, il mangiare o durante i lavori domestici).

**A-V adattabile alla frequenza (RAAV)** – funzione di stimolazione bicamerale che accorcia automaticamente l'intervallo AV a frequenze elevate per mantenere il trascinamento 1:1 e la sincronia A-V.

**bifasica** – forma d'onda di una terapia ad alta tensione in cui la maggior parte dell'energia viene erogata da anodo a catodo, mentre l'energia residua viene erogata da catodo ad anodo.

**Cambio Modo** – funzione che determina il passaggio del dispositivo da un modo di stimolazione bicamerale con trascinamento atriale ad uno senza trascinamento durante una tachiaritmia atriale. Questa funzione previene la stimolazione ventricolare rapida che può essere causata dal trascinamento di un'alta frequenza atriale.

**cardioversione** – terapia destinata a far cessare un episodio di tachiaritmia depolarizzando il tessuto cardiaco e ripristinando allo stesso tempo il normale ritmo sinusale del paziente. Il dispositivo deve sincronizzare la terapia con un evento ventricolare rilevato.

**cattura** – depolarizzazione del tessuto cardiaco causata da uno stimolo elettrico erogato da un dispositivo cardiaco.

**conduzione retrograda** – conduzione elettrica dai ventricoli agli atri.

**Contatore di integrità del sensing** – contatore diagnostico che registra il numero di intervalli ventricolari brevi che si verificano tra una sessione paziente e quella successiva. Un numero elevato di intervalli ventricolari brevi può indicare un doppio conteggio delle onde R, la rottura di un elettrocattetero o una vite di fissaggio allentata.

**crosstalk** – situazione che si verifica quando la stimolazione erogata in una camera viene rilevata come attività intrinseca nell'altra camera.

**defibrillazione** – terapia destinata a far cessare un episodio di fibrillazione ventricolare depolarizzando il tessuto cardiaco e ripristinando allo stesso tempo il normale ritmo sinusale del paziente.

**durata** – numero di anni restanti prima che la batteria del dispositivo raggiunga la tensione corrispondente al momento consigliato per la sostituzione (RRT). Definita anche come "durata prevista".

**durata prevista** – numero di anni previsto prima del raggiungimento da parte della batteria del dispositivo della tensione corrispondente al momento consigliato per la sostituzione (RRT).

**EGM di campo lontano** – segnale EGM rilevato tra elettrodi distanti, ad esempio, l'EGM rilevato tra la cassa del dispositivo e l'anello dell'elettrocattetero ventricolare.

**EOS (fine servizio)** – indicatore di stato della batteria visualizzato dal programmatore per indicare che il dispositivo deve essere sostituito immediatamente e che non è in grado di funzionare in modo conforme alle specifiche.

**Evento** – Battito rilevato o stimolato.

**Evento di allarme OptiVol** – evento Medtronic CareAlert indicante che l'indice del fluido OptiVol supera la soglia OptiVol programmata.

**evento rilevato** – attività elettrica che avviene attraverso gli elettrodi di sensing, che supera la soglia di sensibilità programmata e viene identificata dal dispositivo come un evento cardiaco.

**Forma d'onda** – Rapporto grafico dell'attività elettrica, ad esempio, del tracciato dell'EGM intracardiaco o dell'ECG di superficie.

**frequenza ADL** – frequenza cardiaca approssimativa desiderata che ci si aspetta venga raggiunta dal paziente durante le attività quotidiane.

**frequenza del sensore** – frequenza di stimolazione determinata dal livello di attività del paziente e dai parametri di risposta in frequenza programmati; questa frequenza viene modificata ed impostata su un valore compreso tra la frequenza massima del sensore e la frequenza minima corrente.

**frequenza di blocco 2:1** – rapporto di conduzione in cui ogni secondo evento atriale è refrattario. Ciò determina una frequenza di stimolazione ventricolare dimezzata rispetto alla frequenza atriale. Viene denominato anche "blocco A-V di tipo Mobitz II di secondo grado".

**Funzione Altre SVT 1:1** – opzione della funzione PR Logic studiata per inibire il riconoscimento ventricolare per le tachicardie sopraventricolari che manifestano un'attivazione atriale e ventricolare quasi simultanea.

**Funzione Medtronic CareAlert** – allarmi acustici del sistema e allarmi del sistema di monitoraggio domestico che segnalano al paziente l'occorrenza di condizioni di allarme programmabili. Il paziente può così fissare con lo specialista un appuntamento per la visita di controllo.

**Funzione Tach. Sinus.** – opzione della funzione PR Logic studiata per distinguere la tachicardia sinusale ad alta frequenza dalla tachiaritmia ventricolare.

**Gestione cattura** – funzione che monitora la soglia di stimolazione modificando eventualmente le impostazioni dell'uscita di stimolazione per mantenere la cattura.

**HVA/HVB/HVX** – identificatori degli elettrodi ad alta tensione. In una configurazione di elettrocateri standard, HVA rappresenta il corpo in titanio del dispositivo (can), HVB l'elettrodo a spirale nel ventricolo destro (RV) e HVX un elettrodo a spirale nella vena cava superiore (SVC).

**ID radiopaco** – piastrina metallica (situata all'interno del blocco connettore del dispositivo) recante il logo della Medtronic ed un codice univoco che consente di individuare il dispositivo o la famiglia di dispositivi mediante fluoroscopia.

**impedenza** – opposizione totale da parte di un circuito nei confronti del flusso di corrente elettrica; l'impedenza degli elettrocateri può essere misurata per verificare l'integrità del sistema.

**impedenza di riferimento** – basale con cui viene confrontata l'impedenza intratoracica per stabilire se il flusso toracico sia in aumento.

**impedenza intratoracica** – impedenza nel torace secondo la misurazione effettuata presso due punti all'interno del torace.

**impedenza toracica** – impedenza nel torace secondo la misurazione effettuata presso due punti all'interno del torace.

**indicatori di stato del dispositivo** – avvisi del programmatore (come "Attenzione - Reset elettrico del dispositivo") che segnalano problemi di memoria o di funzionamento del dispositivo.

**induzione T-Shock** – protocollo di induzione di VF che eroga uno shock programmabile sincronizzato con la ripolarizzazione ventricolare o l'onda T.

**interferenze elettromagnetiche (EMI)** – energia trasmessa da sorgenti esterne per irradiazione, conduzione o induzione, che può interferire con le funzioni del dispositivo (ad esempio, il riconoscimento) o danneggiare potenzialmente i circuiti del dispositivo.

**Interroga** – comando per trasmettere le impostazioni dei parametri del dispositivo ed i dati memorizzati al programmatore.

**Intervallo atriale mediano** – Settimo intervallo in un elenco ordinato numericamente dei 12 intervalli A-A più recenti.

**intervallo AV rilevato (SAV)** – ritardo programmabile successivo ad un evento atriale rilevato che pianifica una stimolazione ventricolare corrispondente.

**Intervallo di AT/AF** – intervallo programmabile che definisce la zona di riconoscimento di AT/AF. L'intervallo mediano atriale deve essere inferiore a questo valore affinché un episodio di AT/AF possa essere riconosciuto.

**Intervallo PAV** – intervallo programmabile tra una stimolazione atriale e la stimolazione ventricolare pianificata corrispondente.

**Intervallo ventricolare mediano** – Settimo intervallo in un elenco ordinato numericamente dei 12 intervalli V-V più recenti.

**Leadless ECG** – funzione del dispositivo che consente al personale medico di eseguire i test e registrare un segnale equivalente ad un ECG senza dover collegare derivazioni ECG di superficie.

**Memoria Flashback** – visualizzazione da parte del programmatore degli intervalli che precedono gli episodi di tachiaritmia o l'ultima interrogazione del dispositivo.

**Memorizzazione dell'EGM pre-aritmia** – (Denominata anche "Pre-memorizzazione dell'EGM") Opzione programmabile che consente di registrare l'EGM prima dell'insorgenza o del riconoscimento di una tachiaritmia. Quando questa funzione è attivata, il dispositivo registra l'EGM in modo continuo. Se si verifica un episodio di tachiaritmia, l'ultimo EGM raccolto viene aggiunto alla registrazione dell'episodio per documentare il ritmo al momento dell'insorgenza.

**Momento consigliato per la sostituzione** – cfr. "RRT".

**Monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale** – Funzione programmabile del programmatore per la visualizzazione delle forme d'onda dell'ECG, dei Marker Channel e dell'EGM trasmesse tramite telemetria su uno schermo o su uno schermo parziale.

**Monitoraggio domestico** – Apparecchiatura destinata a essere utilizzata presso l'abitazione di un paziente e in grado di ricevere dati dal dispositivo impiantato del paziente mediante telemetria.

**nominale** – valore di parametro consigliato dalla Medtronic e potenzialmente accettabile per la maggior parte dei pazienti.

**operazioni manuali** – funzioni del dispositivo che possono essere avviate soltanto tramite il programmatore e durante una sessione paziente (per esempio, funzioni per studi EF o test di sistema manuali).

**Opzione AF/Flutter A** – opzione della funzione PR Logic studiata per distinguere la fibrillazione atriale condotta rapidamente o il flutter atriale dalla tachiaritmia ventricolare.

**oversensing** – sensing inappropriato di eventi cardiaci o di segnali non cardiaci. Tra gli esempi figurano il far field di onde R, le onde T, i miopotenziali e le interferenze elettromagnetiche.

**periodo di blanking** – intervallo di tempo durante il quale il sensing viene disabilitato in una camera per evitare l'oversensing.

**Periodo di carica** – Periodo impiegato dal dispositivo per immagazzinare l'energia programmata (carica) nei condensatori ad alta tensione.

**Periodo di servizio prolungato (PSP)** – numero presunto di mesi di funzionamento del dispositivo una volta raggiunto il RRT.

**periodo refrattario** – intervallo di tempo durante il quale il dispositivo rileva normalmente gli eventi ma li classifica come refrattari e risponde in maniera limitata.

**Periodo refrattario atriale (ARP)** – intervallo che fa seguito ad un evento atriale stimolato o rilevato durante il quale il dispositivo rileva eventi ma risponde ad essi in maniera limitata. Questo intervallo viene applicato quando il dispositivo funziona in modo di stimolazione atriale monocamerale.

**PMOP (stimolazione overdrive dopo Cambio Modo)** – funzione di intervento atriale attiva con il Cambio Modo che consente di erogare la stimolazione atriale preferenziale durante la fase vulnerabile dopo la conclusione di un episodio di AT/AF.

**profilo della frequenza** – istogramma delle frequenze del sensore utilizzate dall'ottimizzazione del profilo di frequenza per modificare automaticamente le impostazioni della risposta in frequenza.

**PVAB (periodo di blanking atriale post-ventricolare)** – intervallo dopo eventi ventricolari durante il quale gli eventi atriali vengono ignorati dalle funzioni di stimolazione antibradicardica o non vengono rilevati dal dispositivo, a seconda del metodo PVAB programmato.

**PVARP (periodo refrattario atriale post-ventricolare)** – periodo refrattario atriale che fa seguito ad un evento ventricolare utilizzato per prevenire l'inibizione o le PMT nei modi di stimolazione bicamerale.

**PVC (contrazione ventricolare prematura)** – Evento ventricolare rilevato che segue direttamente un altro evento ventricolare, senza eventi atriali intermedi.

**range della frequenza sotto sforzo** – frequenze coincidenti con o prossime alla frequenza massima del sensore durante attività di esercizio intenso.

**Rapporto del Cardiac Compass** – rapporto stampato relativo alle tendenze cliniche a lungo termine, come la frequenza di aritmie, le frequenze cardiache e le terapie erogate dal dispositivo, considerate in un periodo massimo di quattordici mesi.

**Rapporto di gestione scompensi cardiaci** – riepilogo della diagnostica dello scompenso cardiaco di un paziente, completo di cronologia della terapia di resincronizzazione cardiaca associata.

**Recupero del trascinamento atriale (ATR)** – funzione che serve a ripristinare il trascinamento atriale qualora si fosse perso a causa di eventi atriali consecutivi che rientrano nel periodo refrattario successivo ai rilevamenti ventricolari.

**Reset elettrico** – Operazione automatica del dispositivo che consente di rimediare ad un'interruzione nella memoria del dispositivo e nel circuito di controllo. I parametri programmati possono essere impostati ai valori di reset elettrico. Questa operazione attiva un indicatore di stato del dispositivo ed un tono automatico della funzione Medtronic CareAlert.

**ricarica dei condensatori** – qualsiasi carica alla massima energia programmata dissipabile (ovvero che non viene erogata al paziente o viene scaricata) per almeno 10 min.

**Ripristino** – Comando di programmazione che ripristina il riconoscimento automatico della tachiaritmia.

**risposta ADL** – parametro programmabile che modifica lo slope della curva della risposta in frequenza per modificare la distribuzione della frequenza desiderata nel range di frequenza submassimale in modo tale da corrispondere al livello di attività del paziente.

**Risposta all'AF condotta** – funzione che consente di modificare la frequenza di stimolazione per promuovere una frequenza ventricolare regolare durante gli episodi di AT/AF.

**Risposta al sensing ventricolare (VSR)** – funzione destinata a promuovere la stimolazione CRT continua erogando la stimolazione ventricolare a seguito di eventi ventricolari rilevati.

**Risposta in frequenza** – modifica della frequenza di stimolazione cardiaca in risposta a variazioni sopraggiunte nell'attività del paziente rilevata.

**RRT (momento consigliato per la sostituzione)** – indicatore di stato della batteria visualizzato dal programmatore che indica quando sostituire il dispositivo.

**sensore di attività** – accelerometro del dispositivo che rileva i movimenti corporei del paziente.

**sequenza, ATP** – una serie programmabile di impulsi terapeutici di stimolazione antitachicardica (ATP).

**Sincronia A-V** – contrazione coordinata degli atri e dei ventricoli per una gettata cardiaca di maggiore efficacia.

**Sincronizzazione** – Periodo durante le terapie di cardioversione e defibrillazione in cui il dispositivo cerca di erogare lo shock contemporaneamente ad un evento ventricolare rilevato.

**Smartmode** – funzione che consente di disattivare una terapia di stimolazione antitachicardica rivelatasi inefficace in quattro episodi consecutivi. In questo modo, il dispositivo può trattare più rapidamente gli episodi successivi con terapie dimostrate efficaci.

**soglia di stimolazione** – uscita di stimolazione minima in grado di catturare in maniera costante il cuore.

**Soglia OptiVol** – valore programmabile dell'indice del fluido OptiVol al di sopra del quale vengono emessi allarmi ed osservazioni relativi agli eventi di allarme OptiVol.

**Sospendi** – Comando di programmazione che disattiva temporaneamente le funzioni di riconoscimento della tachiaritmia.

**Stabilizzazione della frequenza atriale (ARS)** – funzione di gestione del ritmo atriale che consente di eliminare una pausa prolungata che fa seguito ad una contrazione atriale prematura (PAC).

**Stabilizzazione della frequenza ventricolare (VRS)** – funzione di gestione del ritmo ventricolare che elimina una pausa prolungata presente nel ciclo ventricolare dopo una contrazione ventricolare prematura (PVC).

**stimolazione antitachicardica (ATP)** – terapie che erogano sequenze rapide di impulsi di stimolazione per interrompere le tachiaritmie.

**Stimolazione atriale non competitiva (NCAP)** – funzione di stimolazione programmabile che inibisce la stimolazione atriale durante un intervallo programmabile dopo un evento atriale refrattario.

**Stimolazione atriale preferenziale (APP)** – funzione di gestione del ritmo atriale che fa aumentare leggermente la frequenza di stimolazione rispetto alla frequenza sinusale intrinseca.

**Stimolazione post-shock** – funzione che fornisce un supporto di stimolazione temporaneo dopo una terapia ad alta tensione aumentando l'ampiezza della stimolazione e la durata dell'impulso al fine di prevenire la perdita di cattura.

**Stimolazione post-shock VT/VF** – funzione che consente di erogare una stimolazione temporanea in overdrive in grado di migliorare la gettata cardiaca dopo una terapia ad alta tensione.

**Stimolazione ventricolare di sicurezza (VSP)** – funzione della terapia di stimolazione che consente di prevenire l'asistolia ventricolare dovuta all'inibizione inappropriata della stimolazione ventricolare.

**tachicardia mediata dal pacemaker (PMT)** – un ritmo rapido erroneamente stimolato, che può verificarsi con i modi di trascinamento atriale. Avviene quando un dispositivo bicamerale rileva e trascina le onde P retrograde in modo DDD o DDDR.

**Telemetria** – Trasmissione di dati fra il dispositivo ed il programmatore tramite onde radio.

**Telemetria Holter** – funzione di telemetria che consente di trasmettere i dati EGM e Marker Channel in modalità continua, per un numero programmabile di ore, indipendentemente dal fatto sia stato effettivamente stabilito un collegamento wireless tra il dispositivo ed il programmatore.

**Telemetria Marker Channel** – Simboli telemetrati che annotano il rilevamento, la stimolazione, il riconoscimento e le terapie del dispositivo.

**Terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT)** – erogazione di impulsi di stimolazione coordinati sia al ventricolo sinistro che al ventricolo destro, per trattare la desincronizzazione ventricolare.

**Trascinamento** – Vedere "Trascinamento atriale".

**trascinamento atriale** – operazione di stimolazione bicamerale che stimola il ventricolo in risposta agli eventi atriali.

**ultima sessione** – si riferisce all'ultima volta in cui l'interrogazione del dispositivo è andata a buon fine prima dell'interrogazione corrente. Una seduta termina dopo otto ore dall'ultima interrogazione.

**undersensing** – mancato rilevamento dell'attività cardiaca intrinseca da parte del dispositivo.



# Indice

## A

ablazione a radiofrequenza	34
accelerometro	243
Active Can/Coil SVC	344, 372, 402
ad ultrasuoni, terapia	36
allarmi OptiVol	205
programmazione	203
sospensione	204
ampiezza	
misurazioni del sensing, automatiche	166
misurazioni di sensing, manuali	424
stimolazione	231
tendenze del sensing	167
Test della soglia di stimolazione	420
Analizzatore (modello 2290)	23
esportazione delle misurazioni degli elettrocateri	81
misurazioni dell'elettrocateri	106
sessione concomitante	81
andamento delle prestazioni degli elettrocateri	120, 452
annotazioni	
Decision Channel	87
Marker Channel	54, 85
programmazione dei parametri	54
annotazioni Decision Channel	
nei dati dell'EGM dell'episodio	149
sui tracciati di forma d'onda in tempo reale	87
valutazione della funzione Insorgenza	332
valutazione della funzione PR Logic	325
valutazione della funzione Stabilità	336
valutazione del tempo massimo di sospensione	338
annotazioni Marker Channel	338
nei dati dell'EGM dell'episodio	149
per gli impulsi di stimolazione APP	283
per gli impulsi di stimolazione ARS	281
annotazioni su eventi	
Rapporto di gestione degli scompensi cardiaci	210
apparecchiatura richiesta per eseguire un impianto	101
applicazione di un magnete	447
APP (Stimolazione atriale preferenziale)	283
ARS (stabilizzazione frequenza atriale)	280

## ATP

vedere terapie di ATP atriale	
vedere terapie di ATP ventricolare	
ATP durante la carica	345
ATP prima della carica	345
ATP reattiva	381
Cambio ritmo	382
Intervallo di tempo	382
regioni suddivise	382
regolarità	382
ritardo dopo un ritmo irregolare	382
atriale, riconoscimento	
Marker Channel, annotazioni	86
atriale, terapie di ATP	
parametri	457
ATR (Recupero del trascinamento atriale)	193
Attivatore Conexus	41
AVP	
vedere periodo vulnerabile atriale	
avvertenze e precauzioni	
ambiente domestico e lavorativo	36
conservazione e maneggiamento, dispositivo	27
elettrocateri	28
espanto e smaltimento	26
funzionamento del dispositivo	29
generalità	26
possibili effetti indesiderati	37
preparazione per l'impianto	102
rischi derivanti dall'utilizzo di determinate terapie mediche	32

## B

banda di frequenza MICS	22
banda MICS (Medical Implant Communications Service)	22
barra dei comandi, programmatore	57
barra delle applicazioni, programmatore	52
barra di stato, programmatore	53
batteria ed elettrocateri, dati sulle misurazioni	419, 451
blanking	
nella camera opposta	222
parametri	465
post-rilevamento	222
post-shock	223
post-stimolazione	222
PVAB	223

blanking nella camera opposta	222
BOS	
vedere Inizio servizio (BOS)	

## C

cacciavite torsiometrico	108
CAFR (risposta all'AF condotta)	195
Cambio Modo	275
considerazioni	276
e insorgenza di AT/AF	295
e PMOP	276, 286
funzionamento	275
insorgenza di un episodio atriale	275
programmazione	277
valutazione	277
Cambio ritmo, ATP reattiva	382
campi magnetici statici	37
caratteristiche fisiche	440
cardioversione	
vedere terapie di CV atriale, attivate dal paziente	
vedere terapie di CV atriale, automatiche	
vedere terapie di CV ventricolare	
CareAlert	
vedere Medtronic CareAlert	
CareLink Monitor (modello 2490C)	23
ChargeSaver	346
Circuito di carica inattivo	173
Coda di stampa	99
coil SVC	
e Leadless ECG (LECG)	91
vedere anche Active Can/Coil SVC	
collegamento degli elettrocateri	108
porte di connessione dell'elettrocateri	108, 440
vedere anche elettrocateri	
collegamento telemetrico wireless Conexus	39
competizione atriale	268
conclusione	
riconoscimento di AT/AF	298
Riconoscimento di VT/VF	313
condizioni post-ERI	
vedere Periodo di servizio prolungato	
Conexus, collegamento telemetrico wireless	22
Attivatore Conexus	23
conservazione, dispositivo	27
Contatore di integrità del sensing	165
valutazione del sensing	229
contatori degli episodi di AT/AF	449
contatori degli episodi di VT/VF	448

contatori di episodi di AT/AF	156
valutazione del riconoscimento di AT/AF	304
valutazione stimolazione per intervento atriale	288
contatori di episodi di VT/VF	154
valutazione della VRS	292
valutazione del riconoscimento di VT/VF	321
contatori di terapie per AT/AF	157, 450
valutazione delle terapie di ATP atriale	399
Contatori di terapie per AT/AF	
valutazione delle terapie di CV atriale	406, 412
contatori di terapie per VT/VF	155, 449
Contatori di terapie per VT/VF	
valutazione delle terapie di ATP ventricolare	367
valutazione delle terapie di cardioversione ventricolare	378
valutazione delle terapie per VF	354
Conteggio combinato	311
controindicazioni	25
Controllo posizione elettrocateri atriale	
risultati	165
terapie atriali	383
crosstalk	
inibizione della stimolazione ventricolare	273
CRT, stimolazione	
parametri	464
CV atriale attivata dal paziente	
vedere terapie di CV atriale, attivate dal paziente	

## D

dati dei contatori	153
contatori degli episodi di AT/AF	449
contatori degli episodi di VT/VF	448
contatori di episodi di AT/AF	156
contatori di episodi di VT/VF	154
contatori di terapie per AT/AF	157, 450
contatori di terapie per VT/VF	155, 449
visualizzazione	153
dati della memoria Flashback	
valutazione della risposta in frequenza	250
valutazione del riconoscimento di VT/VF	319
visualizzazione	158
dati, memorizzati	
andamento delle prestazioni degli elettrocateri	452
andamento delle prestazioni del dispositivo e degli elettrocateri	162
batteria ed elettrocateri, dati sulle misurazioni	451
contatori degli episodi di AT/AF	449
contatori degli episodi di VT/VF	448
contatori di episodi di AT/AF	156

contatori di episodi di VT/VF . . . . .	154	valutazione della pianificazione delle terapie atriali . . . . .	385
contatori di terapie per AT/AF . . . . .	157, 450	valutazione della stimolazione post-shock VT/VF . . . . .	290
contatori di terapie per VT/VF . . . . .	155, 449	valutazione delle terapie con aggressività crescente . . . . .	414
dati dei contatori . . . . .	153	valutazione del riconoscimento di AT/AF . . . . .	300
dati della memoria Flashback . . . . .	158, 448	valutazione del riconoscimento di VT/VF . . . . .	317
dati Quick Look II . . . . .	123	valutazione del tempo massimo di sospensione . . . . .	338
dati sugli episodi aritmici . . . . .	144, 448	visualizzazione . . . . .	145
dati sugli episodi di sensing ventricolare . . . . .	215	dati sugli episodi di sensing ventricolare . . . . .	215
eventi Medtronic CareAlert . . . . .	127, 454	programmazione della raccolta dati . . . . .	216
rapporto degli istogrammi di frequenza . . . . .	159	stimolazione CRT inibita . . . . .	215
Rapporto del Cardiac Compass . . . . .	138, 452	valutazione della stimolazione CRT . . . . .	189
rapporto di gestione degli scompensi cardiaci . . . . .	208	valutazione delle funzioni di recupero CRT . . . . .	196
Rapporto di gestione scompensi cardiaci . . . . .	453	visualizzazione . . . . .	216
rapporto Istogrammi della frequenza . . . . .	453	dati sulle misurazioni della batteria e degli elettrocateri . . . . .	163
read from disk . . . . .	93	dati sul paziente . . . . .	77
recupero . . . . .	92	descrizione dei campi . . . . .	78
salva su dischetto . . . . .	92	esportati dall'analizzatore . . . . .	81
salvataggio . . . . .	92	finestra Anamnesi . . . . .	79
tendenze dell'impedenza degli elettrocateri . . . . .	452	Rapporto di gestione degli scompensi cardiaci . . . . .	209
dati memorizzati . . . . .		visualizzazione ed inserimento . . . . .	79
vedere dati, memorizzati . . . . .		vedere anche Therapy Guide . . . . .	
dati, paziente . . . . .	77	defibrillazione, emergenza . . . . .	57
dati Quick Look II . . . . .	123	defibrillazione esterna . . . . .	33
condizioni del paziente . . . . .	125	destinazione d'uso . . . . .	24
e follow-up del paziente . . . . .	118	diagnostica clinica . . . . .	
informazioni sulla batteria . . . . .	124	contatori di episodi di AT/AF . . . . .	156
Osservazioni . . . . .	126	contatori di episodi di VT/VF . . . . .	154
stato della conduzione . . . . .	123	contatori di terapie per AT/AF . . . . .	157
stato e tendenze degli elettrocateri . . . . .	124	contatori di terapie per VT/VF . . . . .	155
valutazione della Gestione cattura . . . . .	258	dati dei contatori . . . . .	153
valutazione delle terapie di ATP atriale . . . . .	398	dati della memoria Flashback . . . . .	158
valutazione delle terapie di ATP ventricolare . . . . .	366	dati sugli episodi aritmici . . . . .	144
valutazione delle terapie di cardioversione . . . . .		rapporto degli istogrammi di frequenza . . . . .	159
ventricolare . . . . .	377	Rapporto del Cardiac Compass . . . . .	138
valutazione delle terapie di CV atriale . . . . .	405	diario episodi . . . . .	145
valutazione delle terapie per VF . . . . .	354	diatermia . . . . .	32
valutazione del riconoscimento di AT/AF . . . . .	300	dimensioni, dispositivo . . . . .	440
valutazione del riconoscimento di VT/VF . . . . .	317	dischetti, dati del dispositivo . . . . .	92
dati sugli episodi aritmici . . . . .	144	discriminazione SVT . . . . .	
capacità di memorizzazione . . . . .	448	annullamento con la funzione Tempo massimo di . . . . .	
diagramma degli intervalli degli episodi . . . . .	148	sospensione . . . . .	337
diario episodi . . . . .	145	funzione Insorgenza . . . . .	328
EGM degli episodi . . . . .	149	funzione PR Logic . . . . .	322
preferenze della raccolta dati . . . . .	151	funzione Stabilità . . . . .	334
registrazioni degli episodi . . . . .	147	Funzioni di discriminazione di SVT . . . . .	314
testo di un episodio . . . . .	151		
valutazione del Cambio Modo . . . . .	277		
valutazione della funzione Insorgenza . . . . .	332		
valutazione della funzione PR Logic . . . . .	325		
valutazione della funzione Stabilità . . . . .	336		

dispositivo		
collegamento degli elettrocateri	108	
controindicazioni	25	
dimensioni	440	
durata prevista	445	
espianto e sostituzione	116	
indicazioni d'uso	24	
panoramica delle funzioni	21	
posizionamento e fissaggio	114	
preparazione all'impianto	103	
dispositivo di monitoraggio domestico		
CareLink Monitor (modello 2490C)	23	
Indicatore PatientLook (modello 2490R)	24, 128	
Monitor SentryCheck (modello 2697)	203	
dispositivo di monitoraggio, domestico		
Indicatore PatientLook (modello 2490R)	24	
Monitor SentryCheck (modello 2697)	203	
Dispositivo di monitoraggio SentryCheck (modello 2697)	24	
dispositivo, durata	175	
dispositivo, durata prevista	445	
documentazione	12	
durata	445	
durata del dispositivo		
impostazioni di terapia per tachiaritmia	176	
influenzata dalla APP	285	
Memorizzazione dell'EGM pre-aritmia	178	
ottimizzazione	175	
previsioni	445	
ricarica dei condensatori	178	
Telemetria Holter	178	
uscite di stimolazione	176	
durata della batteria	445	
durata dell'impulso		
stimolazione	231	
Test della soglia di stimolazione	420	
durata prevista	445	
durata prevista dispositivo	445	
vedere anche dispositivo, durata prevista		
<b>E</b>		
EAS	37	
ECG di superficie	83	
ECG, di superficie	91	
vedere anche Leadless ECG (LECG)		
EGM		
vedere elettrogrammi (EGM)		
EGM degli episodi	149	
memorizzazione nel dispositivo	149	
EGM pre-aritmia, memorizzazione		
parametri di memorizzazione	473	
elettrocateri, impedenza	423	
tendenze	166	
Test dell'impedenza degli elettrocateri	423	
elettrocateri		
adattatori	104	
collegamento con il dispositivo	108	
compatibilità degli elettrocateri	26, 104	
compatibilità dei connettori	104	
considerazioni sul test	106	
impianto	105	
misurazioni all'impianto	106	
panoramica del sistema	21	
porte	108	
porte, connessione	440	
posizione	105	
selezione	104	
valutazione	106	
elettrocateri e batteria, dati sulle misurazioni	451	
elettrocauterizzazione	33, 339	
elettrogrammi (EGM)		
EGM degli episodi	149	
impostazione del range EGM	83, 88	
impostazione del range LECG	83, 88	
parametri di memorizzazione	473	
EMI	36	
energia		
accumulata	446	
erogata	446	
energia accumulata	446	
energia erogata	446	
EOL		
vedere Fine durata (EOS)		
EOS	164, 444	
ERI	11	
vedere anche Momento consigliato per la sostituzione		
erronea individuazione di un episodio	121	
esercizio		
Decelerazione di esercizio	246	
trascinamento di frequenze atriali rapide	239	
espianto, dispositivo	26, 116	
esterna defibrillazione	33	
eventi		
Medtronic CareAlert	127	
refrattari	225	
eventi refrattari	225	
<b>F</b>		
Fine servizio (EOS)	444	
schermo del programmatore	164	
finestra Rapporti disponibili	96	

finestra Stampa - Opzioni	96, 97	Funzione Altre SVT 1:1	323
evitare	94	funzione Insorgenza	328
fissaggio dei tracciati di forma d'onda in tempo reale		considerazioni	332
fluidointratoracico	88	Eventi di monitoraggio di VT	331
follow-up, paziente	200	funzionamento	329
controllo degli indicatori della batteria e dello stato del dispositivo	120	Monitoraggio Insorgenza	333
controllo del ritmo cardiaco manifesto	119	programmazione	332
linee guida	118	valutazione	332
ottimizzazione del tempo di carica dei condensatori	415	funzione PR Logic	322
strumenti	118	considerazioni	325
valutazione del dispositivo e degli elettrocaterteri	120	funzione AF/AFI	323
valutazione della terapia CRT	122	Funzione Altre SVT 1:1	323
valutazione della terapia di stimolazione	121	funzione Tach. Sinus.	323
valutazione della terapia per tachiaritmia	122	Interrogazione iniziale	323
valutazione del riconoscimento delle tachiaritmie	121	programmazione	325
verifica dello stato del sistema	119	SVT e VT dissociate	323
fori per sutura, ubicazione	440	valutazione	325
forma d'onda in tempo reale, tracciati		funzione Smartmode	356
registrazione	87	funzione Sonno	265
richiamo	90	considerazioni	266
forma d'onda, tracciati	54, 82	funzionamento	265
fissaggio	88	programmazione	267
modifica	83, 84	valutazione	267
Frequenza ADL	244	funzione Stabilità	334
frequenza del sensore	243	considerazioni	335
frequenza di blocco 2:1	239	Eventi di monitoraggio di VT	335
calcoli del programmatore	264	funzionamento	334
calcolo da parte del programmatore	261	programmazione	336
Frequenza massima del sensore	244	valutazione	336
Frequenza massima di trascinamento	241	Funzione Switchback	347
Frequenza minima	231, 244	funzioni di recupero della stimolazione CRT	190
funzione Sonno	265	Recupero del trascinamento atriale	193
Frequenza Sonno	265	Risposta all'AF condotta	195
frequenze		Risposta al sensing ventricolare	191
Frequenza ADL	244	valutazione	196
frequenza atriale più rapida	239	fusione delle zone	312
frequenza del sensore	243		
frequenza di blocco 2:1	239	<b>G</b>	
frequenza di stimolazione corrente	260	Gestione cattura	251
Frequenza massima del sensore	244	considerazioni	257
Frequenza massima di trascinamento	241	impostazione Adattata	251
Frequenza minima	244	impostazione Monitoraggio	251
Frequenza Sonno	265	programmazione	257
parametri	462	valutazione	258
funzionamento Wenckebach	241	ventricolare sinistra	253
funzione AF/AFI	323	Gestione della cattura ventricolare sinistra (LVCM)	253
		controlli della conduzione	254
		controllo da parte del dispositivo	254
		interruzione di una ricerca	256
		modifica dell'ampiezza	256

parametri . . . . .	465	indicatori di sostituzione della batteria . . . . .	164, 444
pianificazione . . . . .	255	indicatori di stato del dispositivo	
ricerca della soglia di stimolazione . . . . .	255	Circuito di carica inattivo . . . . .	173
<i>vedere anche</i> Gestione cattura		eliminazione . . . . .	172
<b>I</b>		reset elettrico del dispositivo . . . . .	173
icona Checklist . . . . .	55, 61	Sospensione circuito di carica . . . . .	173
icona Dati . . . . .	55	Terapie per AT/AF disattivate . . . . .	174
icona Parametri . . . . .	55, 66	indicazioni d'uso . . . . .	24
icona Paziente . . . . .	55	indice del fluido, OptiVol . . . . .	201
icona Rapporti . . . . .	55, 95	induzione Burst a 50 Hz	
icona Sessione . . . . .	55	erogazione di un'induzione atriale . . . . .	433
icona Test . . . . .	55	erogazione di un'induzione ventricolare . . . . .	431
icone		parametri . . . . .	475
Checklist . . . . .	55, 61	test DFT . . . . .	113
Dati . . . . .	55	induzione Burst costante	
Parametri . . . . .	55, 66	erogazione . . . . .	434
Paziente . . . . .	55	parametri . . . . .	475
Rapporti . . . . .	55, 95	Induzione con T-Shock	
Sessione . . . . .	55	test DFT . . . . .	111
Test . . . . .	55	induzione PES . . . . .	435
<i>vedere anche</i> pulsanti		erogazione . . . . .	436
identificazione del paziente . . . . .	57, 77	parametri . . . . .	476
ID radiopaco . . . . .	440	induzione T-Shock . . . . .	428
impedenza degli elettrocateri		erogazione . . . . .	429
misurazioni . . . . .	166	parametri . . . . .	475
tendenze . . . . .	166, 452	induzioni . . . . .	427
impedenza, elettrocateri . . . . .	166	Burst a 50 Hz, atriale . . . . .	432
misurazioni . . . . .	166	Burst a 50 Hz, ventricolare . . . . .	430
impedenza intratoracica		Burst costante . . . . .	434
monitoraggio del fluido OptiVol . . . . .	200	considerazioni . . . . .	427
impedenza toracica		parametri . . . . .	475
monitoraggio del fluido OptiVol . . . . .	200	PES . . . . .	435
impianto		T-Shock . . . . .	428
apparecchiature . . . . .	101	informazioni sulla carica dei condensatori . . . . .	165, 425
completamento . . . . .	115	informazioni sulle terapie ad alta tensione . . . . .	165
considerazioni per la preparazione . . . . .	102	Inizio servizio (BOS)	
preparazione per . . . . .	101	tempo medio di carica . . . . .	447
Risposta in frequenza . . . . .	246	Insorgenza di AT/AF . . . . .	295
impostazioni della terapia, ottimizzazione . . . . .	176	interferenze elettromagnetiche (EMI) . . . . .	36
InCheck Patient Assistant (modello 2696) . . . . .	24, 147	interrogazione, dispositivo . . . . .	50
registrazione dei sintomi . . . . .	147	intervalli di stimolazione	
utilizzo da parte del paziente . . . . .	408	Intervallo AV adattabile alla frequenza . . . . .	260
Indicatore di sostituzione elettiva (ERI) . . . . .	11	Intervallo PAV . . . . .	232
<i>vedere anche</i> Momento consigliato per la sostituzione		Intervallo SAV . . . . .	232
Indicatore PatientLook (modello 2490R) . . . . .	24, 128, 202	la NCAP . . . . .	267
indicatori di sostituzione . . . . .	444	parametri . . . . .	462
Fine servizio (EOS) . . . . .	164, 444	periodi di blanking . . . . .	222
Momento consigliato per la sostituzione (RRT) . . . . .	164, 444	Periodo refrattario atriale . . . . .	226
Periodo di servizio prolungato (PSP) . . . . .	164		

PVAB	223
PVARP automatico	263
PVARP fisso	225
intervalli, stimolazione	
vedere intervalli di stimolazione	
Intervallo AV adattabile alla frequenza	260
considerazioni	261
funzionamento	260
Intervallo PAV	232
Intervallo SAV	232
programmazione	262
Intervallo A-V variabile con la frequenza	
parametri	466
intervallo di riconoscimento	
AT/AF	294
Riconoscimento di VT/VF	306
vedere anche Cambio Modo	
Intervallo di tempo, ATP reattiva	382
Intervallo PAV	232
vedere anche Intervallo AV adattabile alla frequenza	
Intervallo SAV	232
vedere anche Intervallo AV adattabile alla frequenza	
interventi, stimolazione atriale	279
APP	283
ARS	280
PMOP	286
valutazione	288
Intervento PMT	269
funzionamento	269
parametri	468
programmazione	270
vedere anche Risposta a PVC	
istogrammi, frequenza	159
istruzioni per la programmazione	10
<b>L</b>	
Leadless ECG (LECG)	91
e follow-up del paziente	119
funzionamento	91
parametri di memorizzazione	473
selezione della sorgente	152
selezione del range	88
utilizzo del coil SVC	91
visualizzato	83
Limiti della CV automatica	380
finestra di erogazione	381
shock massimi	381
liste di controllo	
creazione	63
e follow-up del paziente	118
eliminazione	65

modifica	64
selezione	61
standard	60, 65
utilizzo	62
litotripsia	34, 339
livelli di energia	446
LVCM (Gestione della cattura ventricolare sinistra)	253

## M

Magnete del paziente (modello 9466)	
Notifiche Medtronic CareAlert	128
sospensione e ripresa del riconoscimento	341
magnete, paziente	
vedere Magnete del paziente (modello 9466)	
maneggiamento, dispositivo	27
margine di sicurezza	
defibrillazione	110
stimolazione	252
Marker Channel, annotazioni	85
nelle registrazioni delle forme d'onda in tempo reale	85
riconoscimento	86, 87
stimolazione	86
terapie	86, 87
Medical Implant Communications Service (MICS), banda di frequenza	39
Medtronic CareAlert	202
applicazione di un magnete	447
parametri	469
riepilogo eventi	454
Memorizzazione dell'EGM pre-aritmia	
effetto sulla durata del dispositivo	178
selezione	151
messaggi di avvertenza	68
messaggi informativi	68
messaggi su interlock	68
MICS, banda di frequenza	39
Misurazione e tendenze dell'ampiezza delle onde P	
Test di sensing	424
valutazione del sensing	229
Misurazione e tendenze dell'ampiezza delle onde R	
Test di sensing	424
valutazione del sensing	229
visualizzazione delle tendenze dell'ampiezza	167
misurazioni con il Velocity Time Integral (VTI)	184
misurazioni dell'ampiezza di sensing	
automatiche	166
manuale	424

misurazioni ecocardiografiche	
M-Mode	183
Velocity Time Integral (VTI)	184
misurazioni ecocardiografiche con il M-Mode	
modi di stimolazione	183
vedere modi, stimolazione	
modi di stimolazione con trascinamento	
modi di stimolazione senza trascinamento	232
modi, stimolazione	
AAI e AAIR	235
AOO	236
bicamerale	231
DDDR e DDD	232
DDIR e DDI	233
DOO	234
modi con trascinamento	232
modi senza trascinamento	233
monocamerale	234
ODO	233
parametri	462
selezione	237
visualizzazione del modo attivo	53
VOO	236
VVI di emergenza	58
VVIR e VVI	234
vedere anche Cambio Modo	
Momento consigliato per la sostituzione (RRT)	
schermo del programmatore	444
tempo medio di carica	164
tempo medio di carica	447
monitoraggio automatico dello stato del dispositivo	
	172
Monitoraggio del fluido OptiVol	
Andamento del fluido OptiVol	200, 201
considerazioni	201
Diario eventi OptiVol	203
funzionamento	208
Indice del fluido OptiVol	201, 211
misurazioni dell'impedenza	201
Monitor SentryCheck (modello 2697)	201
programmazione	203
Soglia OptiVol	205
valutazione	205
vedere anche Rapporto del Cardiac Compass	
monitoraggio del fluido OptiVol	
OptiVol, allarmi	205
Monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale	
cambio di visualizzazione	54, 82
modifica delle forme d'onda	54, 82
valutazione del tempo massimo di sospensione	83
	338
Monitoraggio di VT	
	311

Monitoraggio domestico	
Dispositivo di monitoraggio SentryCheck (modello 2697)	24
monitoraggio, domestico	
Dispositivo di monitoraggio SentryCheck (modello 2697)	24
monitoraggio, stato del fluido OptiVol	
vedere Dispositivo di monitoraggio SentryCheck (modello 2697)	
Monitor SentryCheck (modello 2697)	203

## N

NCAP (stimolazione atriale non competitiva)	
notifiche	267
vedere Medtronic CareAlert	
Notifiche Medtronic CareAlert	
considerazioni	127
funzionamento	136
istruzioni da fornire al paziente	128
non programmabili	134
notifica sonora	130
notifica wireless	132
orario di notifica, selezione	131
programmabili	133
programmazione	129
valutazione	136
valutazione	137

## O

OptiVol, allarmi	
programmazione	203
sospensione	204
orologio del dispositivo	
controllo della funzione Sonno	266
parametro Data/Ora dispositivo	473
pianificazione delle terapie atriali	384
programmazione	266
orologio, dispositivo	
	266
Osservazioni, Quick Look II	
	126
Ottimizzazione del profilo di frequenza	
oversensing	245
oversensing	227

## P

pacemaker Wenckebach	
panoramica del sistema	241
parametri	21
istruzioni per la programmazione	66
modificati in questa sessione	51
simbolo di parametro adattato	66
valori in sospeso	66
vedere anche parametri, programmabili	



Parametri adattati	66	terapie atriali	457
Gestione cattura	257	terapie manuali	477, 478
Ottimizzazione del profilo di frequenza	248	terapie ventricolari	460
parametri di fabbricazione		VRS	467
vedere parametri, programmabili		patient assistant	
parametri di reset elettrico		vedere InCheck Patient Assistant (modello 2696)	
vedere parametri, programmabili		pazienti pacemaker dipendenti	32
parametri di stimolazione	462	Periodo di blanking atriale post-ventricolare (PVAB)	
parametri fissi	479	funzionamento	223
parametri nominali		PVAB Assoluto	224
simbolo nominale	72	PVAB Parziale	223
valori nominali della Medtronic	72	PVAB Parziale+	223
vedere anche parametri, programmabili		periodo di inizializzazione dell'impedenza di riferimento	
parametri non programmabili	479		203
parametri, programmabili		Periodo di servizio prolungato (PSP)	164, 444
APP	466	periodo refrattario	
ARS	466	atriale	235
frequenze	462	PVARP	225, 262
induzioni	475	sincronizzato per l'erogazione della terapia	225
intervalli di stimolazione	462	Periodo refrattario atriale	226, 235
Intervallo A-V variabile con la frequenza	466	vedere anche Periodo refrattario atriale post-ventricolare (PVARP)	
Intervento PMT	468	Periodo refrattario atriale post ventricolare (PVARP)	
Medtronic CareAlert	469		225
modi, stimolazione	462	Periodo refrattario atriale post-ventricolare (PVARP)	
NCAP	468	PVARP automatico	262
PMOP	467	periodo refrattario atriale post ventricolare (PVARP)	
Recupero del trascinamento atriale	468	prolungato dalla risposta a PVC	271
Risposta AF condotta	467	prolungato da un intervento PMT	269
Risposta a PVC	468	periodo vulnerabile atriale	
Risposta di rilevamento	466	rinvio della CV ventricolare	374
Risposta in frequenza	465	rinvio della defibrillazione	349
Stimolazione post-shock VT/VF	467	stimolazione durante	267
Stimolazione ventricolare di sicurezza	468	pianificazione delle terapie atriali	379
Studi EF	475	ATP reattiva	381
terapia di emergenza	455	classificazione del ritmo	382
terapie manuali	477, 478	considerazioni	384
test di sistema	474	funzionamento	379
parametri programmabili		Limiti della CV automatica	380
funzione Sonno	468	programmazione	384
gestione cattura	465	valutazione	385
monitoraggio di VT	456	PMOP (Stimolazione overdrive dopo Cambio Modo)	
periodi di blanking	465		286
pianificazione delle terapie atriali	457	polarità degli elettrocateteri	
raccolta dati	473	sensing bipolare	220
riconoscimento di AT/AF	456	sensing bipolare integrato	220
riconoscimento di VT/VF	456	polarità, elettrocatetere	
stimolazione atriale	463	vedere polarità degli elettrocateteri	
stimolazione LV	464	porte, connessione dell'elettrocatetere	440
stimolazione post-shock	467	porte, connettore dell'elettrocatetere	108
stimolazione RV	463		

porte di connessione dell'elettrocattetere . . . . .	108, 440	pulsante [Annulla modifica] . . . . .	75
posizione . . . . .		pulsante Calibra . . . . .	84
dispositivo . . . . .	114	pulsante [Carica...] parametri . . . . .	71
elettrocatteteri . . . . .	105	pulsante [Emergenza] . . . . .	58, 59
possibili effetti indesiderati . . . . .	37	pulsante [Fine sessione...] . . . . .	51
post-shock, stimolazione . . . . .		pulsante [Fissa] . . . . .	55
parametri . . . . .	467	pulsante [Interroga...] . . . . .	56
preferenze della raccolta dati . . . . .		pulsante [INTERROMPI] . . . . .	428, 437
EGM pre-aritmia . . . . .	151	pulsante [Logica...] . . . . .	77
impostazione . . . . .	151	pulsante [Normalizza] . . . . .	84
Leadless ECG (LECG) . . . . .	152	pulsante [Opzioni di stampa...] . . . . .	94
parametri . . . . .	473	pulsante [PROGRAMMA] . . . . .	69
programmazione . . . . .	153	pulsante [Regola...] . . . . .	55
sorgente e range dell'EGM . . . . .	151	pulsante [Riprist.] . . . . .	340, 437
preferenze, programmatore . . . . .		pulsante [Salva su dischetto...] . . . . .	51
In stampa . . . . .	94	pulsante [Salva...] parametri . . . . .	71
Rapporti iniziali . . . . .	95	Pulsante [Sosp.] . . . . .	340
prestazioni del dispositivo e degli elettrocatteteri . . . . .		pulsante [Stampa adesso] . . . . .	97
visualizzazione dell'andamento . . . . .	162	pulsante [Stampa in seguito] . . . . .	97
prestazioni del dispositivo e dell'elettrocattetere . . . . .		pulsante [Stampa...] . . . . .	94
valutazione . . . . .	115	pulsante [Termina] . . . . .	51
programmatore . . . . .		pulsante [TherapyGuide...] . . . . .	75
area delle attività . . . . .	54	pulsante [Tracciati...] . . . . .	55, 90
collegamento telemetrico wireless Conexus . . . . .	39	pulsante [Vai a attività] . . . . .	61
Conexus, collegamento telemetrico wireless . . . . .	22	pulsante [Visualizza suggerimenti] . . . . .	75
configurazione . . . . .	102	pulsanti . . . . .	
indicatore di stato della telemetria . . . . .	42	[Annulla] . . . . .	75
messaggi . . . . .	68	[Annulla modifica] . . . . .	75
modifica dei tracciati di forma d'onda . . . . .	84	Calibra . . . . .	84
pannello strumenti . . . . .	55	[Emergenza] . . . . .	58, 59
panoramica . . . . .	22	[Fine sessione...] . . . . .	51
pulsanti . . . . .	56	[Fissa] . . . . .	55
read from disk . . . . .	93	[Interroga...] . . . . .	56
registratore del tracciato . . . . .	87	[INTERROMPI] . . . . .	428, 437
salva su dischetto . . . . .	92	[Logica...] . . . . .	77
schermo . . . . .	52	[Normalizza] . . . . .	84
software . . . . .	22	[Opzioni di stampa...] . . . . .	94
stato del dispositivo . . . . .	53	[Carica...] parametri . . . . .	71
telemetria non wireless . . . . .	39	[Salva...] parametri . . . . .	71
tracciati di forma d'onda . . . . .	54, 82	premere e tenere premuto . . . . .	56
<i>vedere anche icone</i> . . . . .		[PROGRAMMA] . . . . .	69
<i>vedere anche Monitoraggio del ritmo cardiaco in tempo reale</i> . . . . .		[Regola...] . . . . .	55
<i>vedere anche pulsanti</i> . . . . .		[Riprist.] . . . . .	340, 437
programmatore, messaggi . . . . .		[Salva su dischetto...] . . . . .	51
avvertenze . . . . .	68	selezione . . . . .	56
informativi . . . . .	68	[Sospendi] . . . . .	340
interlock . . . . .	68	[Stampa adesso] . . . . .	97
programmazione, istruzioni . . . . .	10	[Stampa in seguito] . . . . .	97
PSP . . . . .	164, 444	[Stampa...] . . . . .	94
pulsante [Annulla] . . . . .	75	[Termina] . . . . .	51

[TherapyGuide...]	75
[Tracciati...]	55, 90
[Vai a attività]	61
[Visualizza suggerimenti]	75
VVI di emergenza	59
<i>vedere anche icone</i>	
PVAB Assoluto	224
PVAB Parziale	223
PVAB Parziale+	223
PVAB (Periodo di blanking atriale post-ventricolare)	223
PVARP automatico	262
considerazioni	264
funzionamento	263
programmazione	265
PVARP (Periodo refrattario atriale post-ventricolare)	225

## R

range EGM, selezione	88, 151
rapporti	94
Coda di stampa	99
impostazione delle opzioni di stampa	96
metodi di stampa	95
preferenze	94
rapporto degli istogrammi di frequenza	159
Rapporto del Cardiac Compass	138
rapporto di gestione degli scompensi cardiaci	208
Rapporto finale	98
Rapporto interrogazione iniziale	95
Rapporto Quick Look II	95
Rapporto degli istogrammi della frequenza	
stampa	160
tipi di istogrammi	160
valutazione della stimolazione CRT	187
valutazione delle funzioni di recupero CRT	199
rapporto degli istogrammi di frequenza	159
Rapporto degli istogrammi di frequenza	
valutazione della funzione Sonno	267
valutazione della risposta in frequenza	249
valutazione del riconoscimento di AT/AF	303
Rapporto del Cardiac Compass	138, 452
annotazioni su eventi	139
e follow-up del paziente	118
informazioni sulla stimolazione e sulla risposta in frequenza	142
informazioni sulle aritmie AT/AF	141
Informazioni sulle aritmie VT/VF	140
informazioni sullo scompenso cardiaco	143
stampa	138
valutazione della funzione PR Logic	325

valutazione della funzione Sonno	267
valutazione delle funzioni di recupero CRT	198
valutazione del monitoraggio del fluido OptiVol	206
valutazione del riconoscimento di AT/AF	302
valutazione del riconoscimento di VT/VF	320
Rapporto di gestione degli scompensi cardiaci	208
Andamento del fluido OptiVol	211
annotazioni su eventi	210
dati sul paziente	209
grafici sulle tendenze cliniche	212
Indice del fluido OptiVol	211
stampa del rapporto	208
valutazione del monitoraggio del fluido OptiVol	206
<i>vedere anche Rapporto del Cardiac Compass</i>	
Rapporto di gestione scompensi cardiaci	453
stato clinico e osservazioni	210
valutazione della stimolazione CRT	188
Rapporto finale	98
Rapporto interrogazione iniziale	95
rapporto Istogrammi della frequenza	453
Rapporto Quick Look II	95
Read From Disk	93
Recupero del trascinarsi atriale	193
considerazioni	194
funzionamento	193
parametri	468
programmazione	194
registrazioni degli episodi	147
diagramma degli intervalli degli episodi	148
diario episodi	145
EGM degli episodi	149
sorgenti monitorate	151
testo di un episodio	151
Registrazioni dei sintomi nel diario attivate dal paziente	147
Regolazione ADL	244
Regolazione UR	244
reset elettrico	173
risposta al	174
RF, ablazione	34, 339
Ricarica automatica dei condensatori	
azzeramento dell'orologio dell'intervallo	416
considerazioni	418
funzionamento	416
impostazione Auto	417
programmazione	419
ricarica, condensatori	
automatica	416
manuale	425

ricarica dei condensatori		Riconoscimento di VT/VF	304
automatica	416	conclusione	313
effetto sulla durata del dispositivo	178	considerazioni	315
manuale	425	Conteggio combinato	311
riconoscimento		funzionamento	305
<i>vedere</i> riconoscimento atriale		Funzioni di discriminazione di SVT	314
<i>vedere</i> riconoscimento ventricolare		fusione delle zone	312
riconoscimento atriale		intervallo di riconoscimento	306
parametri	456	Monitoraggio di VT	311
Riconoscimento di AT/AF	294	programmazione	316
sospensione e ripresa	339	Riconoscimento di VT rapida (via VT)	309
riconoscimento delle tachiaritmie atriali		riconoscimento preliminare	305
<i>vedere</i> riconoscimento atriale		riconoscimento successivo	312
riconoscimento delle tachiaritmie ventricolari		tachiaritmie ventricolari non sostenute (episodi di VT-NS)	312
<i>vedere</i> riconoscimento ventricolare		valutazione	317
Riconoscimento di AF		zone	306
<i>vedere</i> Riconoscimento di AT/AF		riconoscimento di VT/VF	
Riconoscimento di AT/AF	294	parametri	456
conferma	296	riconoscimento preliminare	
e Cambio Modo	275	riconoscimento di AT/AF	294
e riconoscimento di VT/VF	296	Riconoscimento di VT/VF	305
far field di onde R	296	riconoscimento successivo	
funzionamento	294	riconoscimento di AT/AF	298
memorizzazione degli episodi registrati	296	Riconoscimento di VT/VF	312
riconoscimento preliminare	294	riconoscimento ventricolare	304
riconoscimento di AT/AF		funzione Insorgenza	328
conclusione	298	funzione PR Logic	322
considerazioni	299	funzione Stabilità	334
e Cambio Modo	295	parametri	456
Insorgenza di AT/AF	295	Riconoscimento di VT/VF	304
Monitoraggio	299	sospensione e ripresa	339
parametri	456	Tempo massimo di sospensione	337
programmazione	299	ripresa del riconoscimento	339
Riconoscimento di AT/AF rapida	297	e induzioni durante studi EF	428
riconoscimento successivo	298	ripristino automatico del riconoscimento	428
valutazione	300	risonanza magnetica (RM)	34
zone	297	Risposta AF condotta	
Riconoscimento di AT/AF rapida	297	parametri	467
Riconoscimento di FVT		Risposta all'AF condotta	195
via VF	309	considerazioni	196
via VT	309	funzionamento	195
<i>vedere anche</i> ventricolare, riconoscimento		programmazione	196
Riconoscimento di VF		Risposta al sensing ventricolare	191
<i>vedere</i> Riconoscimento di VT/VF		considerazioni	192
Riconoscimento di VT		e VSP	191
<i>vedere</i> Riconoscimento di VT/VF		funzionamento	191
Riconoscimento di VT rapida		programmazione	193
via VF	309	sospensione	192
via VT	309	Risposta a PVC	
<i>vedere anche</i> ventricolare, riconoscimento		parametri	468

Risposta di rilevamento			
parametri	466	programmazione	228
Risposta in frequenza	242	soglie di sensing	221
accelerazione e decelerazione	246	valutazione	228
all'impianto	246	sensing nella camera opposta	226, 227
considerazioni	247	sensore di attività	243
curva di frequenza	244	sequenze, ATP atriale	
Decelerazione di esercizio	246	Burst a 50 Hz	394
Frequenza ADL	244	Burst+	390
Frequenza massima del sensore	244	Ramp	392
Frequenza minima	244	sequenze, ATP ventricolare	
funzionamento	243	Burst	359
Ottimizzazione del profilo di frequenza	245	Ramp	360
parametri	465	Ramp+	362
programmazione	248	sessione di follow-up del paziente	118
programmazione manuale	245	sessioni di follow-up	91
range della frequenza sotto sforzo	245	sessioni, paziente	92
Risposta ADL	245	avvio	47
Risposta sotto sforzo	245	avvio della telemetria non wireless	48
valori di riferimento	244	avvio della telemetria wireless Conexus	47
valutazione	249	conclusione	51
Risposta PVC	271	effetti della telemetria durante	49
funzionamento	271	effetti di una carica dei condensatori	49
programmazione	272	e trasmissioni Marker Channel	49
risterilizzazione, dispositivo	26	follow-up	118
ritmo atriale, classificazione	382	visualizzazione delle modifiche	51
RM	34	set di parametri	71
RRT	164, 444	Interrogazione iniziale	72
<b>S</b>		recupero	72
Salva su dischetto	92	salvataggio	72
scarica di una carica accumulata	426	set personalizzati	72
schermata Parametri		valori nominali della Medtronic	72
programmazione dei parametri	66	set di parametri di Interrogazione iniziale	72
secondari	69	set di parametri nominali della Medtronic	72
visualizzazione dei parametri	66	simboli, confezione	13
segnali acustici		sintomi	
Notifiche Medtronic CareAlert	128	registrati dal paziente	147
notifiche Medtronic CareAlert	134	sistemi elettronici di sorveglianza (EAS)	37
segnali acustici di notifica	134	smaltimento, dispositivo	26
segnali acustici di notifica, dimostrazione	136	Smartmode	347
selezione degli elettrocateteri da impiantare	104	software applicativo	22
sensibilità		Soglia di attività	243
vedere sensing		Soglia OptiVol, impostazione	203
sensing	219	soglie di sensing, salvataggio	106
considerazioni	226	soglie di stimolazione, salvataggio	106
funzionamento	221	soglie, stimolazione	420
oversensing	227	dopo l'erogazione di shock	279
periodi di blanking	222	Gestione cattura	252
periodi refrattari	225	Sonno, funzione	
		parametri	468
		sorgente dell'EGM, selezione	151

sorgenti, EGM	151	stimolazione Burst costante, di emergenza	57
Sospensione circuito di carica	173	Stimolazione Burst+	390
sospensione e ripresa del riconoscimento	339	stimolazione CRT	180
con il programmatore	340	Stimolazione CRT	
considerazioni	340	considerazioni	186
con un magnete	341	funzionamento	180, 234
e studi EF	428	funzioni di recupero della stimolazione CRT	190
sostituzione, dispositivo	116	impulso di stimolazione LV	180, 234
specifiche elettriche		misurazioni ecocardiografiche	183
durata prevista	445	programmazione	187
indicatori di sostituzione	444	programmazione del dispositivo	181
Stabilizzazione della frequenza atriale (ARS)	280	programmazione del ritardo di stimolazione V-V	183
considerazioni	282	Ritardo di stimolazione V-V	180, 234
funzionamento	280	valutazione	187
programmazione	282	Stimolazione overdrive dopo Cambio Modo (PMOP)	286
Stabilizzazione della frequenza ventricolare (VRS)	290	considerazioni	287
considerazioni	292	funzionamento	286
funzionamento	291	parametri	467
parametri	467	programmazione	288
programmazione	292	stimolazione per intervento atriale	279
valutazione	292	APP	283
Stabilizzazione frequenza atriale (ARS)		ARS	280
parametri	466	PMOP	286
stampa		valutazione	288
vedere forma d'onda, tracciati		Stimolazione post-shock	278
vedere rapporti		funzionamento	279
stampante		programmazione	279
formato A4	96, 97	Stimolazione post-shock VT/VF	289
programmatore	96	funzionamento	289
registratore del tracciato del programmatore	97	parametri	467
stato clinico		programmazione	289
Rapporto di gestione scompensi cardiaci	210	valutazione	290
stimolazione antitachicardica		Stimolazione Ramp	
terapie di ATP atriale	387	terapie di ATP atriale	392
terapie di ATP ventricolare	356	terapie di ATP ventricolare	360
stimolazione atriale competitiva	268	Stimolazione Ramp+	362
Stimolazione atriale non competitiva (NCAP)	267, 268	Stimolazione ventricolare di sicurezza	
funzionamento	268	parametri	468
parametri	468	Stimolazione ventricolare di sicurezza (VSP)	272
programmazione	269	considerazioni	274
valutazione	269	funzionamento	273
vedere anche Intervento PMT		programmazione	274
vedere anche Risposta PVC		valutazione	274
Stimolazione atriale preferenziale (APP)	283	stimolazione VVI di emergenza	59
considerazioni	285	Studi EF	427
effetto sulla durata del dispositivo	176	considerazioni	427
funzionamento	283	Induzione Burst a 50 Hz, atriale	432
parametri	466	Induzione Burst a 50 Hz, ventricolare	430
programmazione	285	induzione Burst costante	434
stimolazione Burst	359		

induzione PES	435
induzione T-Shock	428
interruzione	428
parametri	475
studi elettrofisiologici	
vedere Studi EF	
SVT e VT dissociate	323

## T

tachiaritmie ventricolari non sostenute (episodi di VT-NS)	312
tachicardia mediata da pacemaker	269
tachicardia sinusale	
funzione Insorgenza	328
funzione Tach. Sinus.	323
tachicardia sopraventricolare (SVT)	294, 304, 322
telefoni cellulari	36
telemetria	
effetti durante	49
marker sul tracciato della forma d'onda	88
telemetria wireless Conexus	41
utilizzo di una testina di programmazione	41, 46
Telemetria Holter	
effetto sulla durata del dispositivo	178
parametri di memorizzazione	473
programmazione	49
utilizzo della telemetria non wireless	49
telemetria wireless Conexus	
Attivatore Conexus	41
attivazione	41
mantenimento del collegamento telemetrico	43
Standby	44
tempi di carica	
dettagli su	416
medi	446
ottimizzazione	415
valutazione	419, 425
tempo	
di carica	446
Tempo massimo di sospensione	337
considerazioni	338
funzionamento	337
Passare a Terapia per VF	337
programmazione	338
Terapia appropriata alla zona	337
valutazione	338
tendenze cliniche	
Rapporto di gestione degli scompensi cardiaci	212
tendenze dell'ampiezza del sensing	167

tendenze della soglia di cattura	169
valutazione della Gestione cattura	259
terapia ad ultrasuoni	36
terapia di emergenza	
cardioversione	57
considerazioni	57
defibrillazione	57
parametri	455
stimolazione Burst costante	57
stimolazione VVI	58
terapia di resincronizzazione cardiaca	
vedere stimolazione CRT	
Terapia di stimolazione Burst a 50 Hz	394
Terapia di VF	337
vedere anche Tempo massimo di sospensione	
terapia per FVT	
parametri	460
terapie di ATP ventricolare	356
terapie di CV ventricolare	370
terapia per VF	337, 342
Active Can/Coil SVC	344
annullamento della terapia	347
ATP durante la carica	345
ATP prima della carica	345
considerazioni	351
emergenza	57
e terapie con aggressività crescente	413
funzionamento	342
funzione ChargeSaver	346
Funzione Switchback	347
parametri	460
percorso di corrente	344
programmazione	352
sincronizzazione iniziale	348
sincronizzazioni successive	349
Smartmode	347
stimolazione durante e dopo la defibrillazione	350
valutazione	354
verifica della presenza di VF	347
vedere anche Tempo massimo di sospensione	
terapia per VT	
parametri	460
terapie di ATP ventricolare	356
terapie di CV ventricolare	370
terapie	
vedere terapie atriali	
vedere terapie di stimolazione	
vedere terapie manuali	
vedere terapie ventricolari	

terapie atriali				terapie di CV atriale, attivate dal paziente	400, 407
ATP atriale	387			considerazioni	411
Controllo posizione elettrocatteter atriale	383			funzionamento	408
CV atriale attivata dal paziente	407			patient assistant	408
CV atriale automatica	400			programmazione	412
durata di un episodio	380			terapia erogata	410
Marker Channel, annotazioni	86			terapia programmata	409
parametri	457			valutazione	412
zone di riconoscimento	381			<i>vedere anche</i> terapie di CV atriale, automatiche	
<i>vedere anche</i> pianificazione delle terapie atriali				terapie di CV atriale, automatiche	400
terapie atriali, pianificazione				Active Can/Coil SVC	402, 404
parametri	457			carica dei condensatori	402
Terapie con aggressività crescente	412			considerazioni	404
funzionamento	413			energia erogata	401
terapie con aggressività crescente				erogazione asincrona	403
programmazione	413			erogazione sincrona	403
valutazione	414			funzionamento	400
terapie di ATP atriale	387			inizio	380
accelerazione della frequenza V.	383			Limiti della CV automatica	380
ATP reattiva	381			polarità del percorso	402
considerazioni	396			programmazione	405
disabilitazione	383			stimolazione dopo la terapia	404
durata del ciclo di tachicardia atriale	389			stimolazione dopo una terapia interrotta	404
funzionamento	387			terapia interrotta	403
inizio	380			valutazione	405
Intervallo minimo di ATP A-A	390			<i>vedere anche</i> terapie di CV atriale, attivate dal paziente	
programmazione	396			terapie di CV ventricolare	370
Sequenze di terapie di stimolazione Burst a 50 Hz				Active Can/Coil SVC	372
	394			considerazioni	376
Sequenze di terapie di stimolazione Burst+	390			e terapie con aggressività crescente	413
Sequenze di terapie Ramp	392			funzionamento	371
valutazione	398			parametri	460
terapie di ATP ventricolare	356			percorso di corrente	372
considerazioni	364			programmazione	377
e terapie con aggressività crescente	413			Sincronizzazione	373
frequenza di stimolazione	358			stimolazione durante e dopo la CV	375
funzionamento	356			valutazione	377
Intervallo minimo ATP V-V	358			terapie di defibrillazione	
parametri	460			<i>vedere</i> terapia per VF	
programmazione	364			terapie di stimolazione	230
Sequenze di terapie di stimolazione Burst	359			APP	283
Sequenze di terapie Ramp	360			ARS	280
Sequenze di terapie Ramp+	362			A-V adattato alla frequenza	260
valutazione	366			Cambio Modo	275
terapie di cardioversione ventricolare				considerazioni	237
emergenza	57			funzione Sonno	265
Terapie di CV				Gestione cattura	251
<i>vedere</i> terapie di CV atriale, attivate dal paziente				interventi, aritmia	279
<i>vedere</i> terapie di CV atriale, automatiche				Intervento PMT	269
<i>vedere</i> terapie di CV ventricolare				la NCAP	267



la VSP .....	272
PMOP .....	286
programmazione .....	238
PVARP automatico .....	262
Risposta in frequenza .....	242
Risposta PVC .....	271
stimolazione CRT .....	180
Stimolazione post-shock .....	278
Stimolazione post-shock VT/VF .....	289
terapia di stimolazione Burst costante di emergenza .....	57
valutazione .....	238
VRS .....	290
VVI di emergenza .....	58
terapie manuali .....	437
considerazioni .....	437
erogazione .....	438
funzionamento .....	439
interruzione .....	437
parametri .....	477, 478
terapie ventricolari	
accelerazione della terapia .....	413
ATP ventricolare .....	356
CV ventricolare .....	370
Marker Channel, annotazioni .....	87
parametri .....	460
terapia per VF .....	342
Terapie con aggressività crescente .....	413
test della soglia di defibrillazione (DFT)	110
con l'utilizzo dell'induzione T-Shock .....	111
misurazioni all'impianto .....	110
preparazione per .....	111
utilizzo dell'induzione Burst a 50 Hz .....	113
Test della soglia di stimolazione	420
considerazioni .....	421
esecuzione .....	421
margine di sicurezza .....	421
parametri .....	474
Test dell'impedenza degli elettrocatereteri .....	423
considerazioni .....	423
esecuzione .....	423
Test del ritmo intrinseco .....	420
considerazioni .....	420
esecuzione .....	420
test DFT	
vedere test della soglia di defibrillazione (DFT)	
Test di carica scarica .....	425
esecuzione .....	426
Test di sensing .....	424
considerazioni .....	424
esecuzione .....	425
Misurazione e tendenze dell'ampiezza delle onde P e delle onde R .....	424
parametri .....	474
valutazione del sensing .....	228
test di sistema	
vedere test, sistema	
test di soglia	
vedere Test della soglia di stimolazione	
Test di soglia di stimolazione	
margine di sicurezza .....	252
test, sistema	
parametri .....	474
Test della soglia di stimolazione .....	420
Test dell'impedenza degli elettrocatereteri .....	423
Test del ritmo intrinseco .....	420
Test di carica scarica .....	425
Test di sensing .....	424
vedere anche Studi EF	
TherapyGuide .....	73
come visualizzare i valori suggeriti .....	75
considerazioni .....	75
selezione delle condizioni cliniche .....	73
suggestori relativi alla programmazione .....	73
visualizzazione della finestra Logica .....	77
tracciati di forma d'onda .....	54, 82
fissaggio .....	88
traccianti di forma d'onda, in tempo reale	
registrazione .....	87
richiamo .....	90
tracciato dell'EGM	
vedere EGM degli episodi	
<b>U</b>	
ubicazione dei fori per sutura .....	114
uscite di stimolazione	
curva del margine di sicurezza .....	252
effetto sulla durata del dispositivo .....	176
gestione .....	176
inibizione .....	420
modifica manuale .....	252
vedere anche Gestione cattura	
<b>V</b>	
valori di riferimento, Risposta in frequenza .....	244
valutazione del tempo di carica .....	419
valutazione del tempo massimo di sospensione .....	338
ventricolare, riconoscimento	
Marker Channel, annotazioni .....	87
VRS (Stabilizzazione della frequenza ventricolare) . . .	290
VSP (stimolazione ventricolare di sicurezza) .....	272
VSR (Risposta al sensing ventricolare) .....	191

VT/VF, riconoscimento  
Riconoscimento di VT rapida (via VT) . . . . . 309

**W**  
wireless, collegamento telemetrico  
vedere Conexus, collegamento telemetrico wireless

**Z**  
zone  
riconoscimento di AT/AF . . . . . 297  
Riconoscimento di VT/VF . . . . . 306





# Medtronic

**Produttore**

Medtronic, Inc.  
710 Medtronic Parkway  
Minneapolis, MN 55432-5604  
Stati Uniti  
Internet: [www.medtronic.com](http://www.medtronic.com)  
Tel. +1-763-514-4000  
Fax: +1-763-514-4879

**Mandatario Medtronic nella CE/  
Distribuito da**

Medtronic B.V.  
Earl Bakkenstraat 10  
6422 PJ Heerlen  
Paesi Bassi  
Tel. +31-45-566-8000  
Fax: +31-45-566-8668

**Sede per Europa/Africa/Medio  
Oriente**

Medtronic International Trading Sàrl  
Route du Molliau 31  
Case Postale 84  
CH-1131 Tolochenaz  
Svizzera  
Internet: [www.medtronic.com](http://www.medtronic.com)  
Tel. +41-21-802-7000  
Fax: +41-21-802-7900

Manuali tecnici:  
[www.medtronic.com/manuals](http://www.medtronic.com/manuals)

© Medtronic, Inc. 2009  
M932635A006B  
2009-07-14



\*M932635A006\*